

Blue Sky Plan®

MANUAL DO USUÁRIO

EU	REP
----	-----

 mdi Europa GmbH

Langenhagener Straße 71 D-30855 Langenhagen, Germany

CE 0297

Contents

1 Introdução	6
1.1 Indicações de uso.....	6
1.2 Advertências	8
1.3 Funções baseadas em IA	10
1.4 Funções gratuitas e funções por assinatura.....	12
2 Instalando o Blue Sky Plan	13
2.1 Processo de Instalação	13
2.2 Requisitos de Hardware	15
2.3 Sistema Operacional	15
3 Blue Sky Launcher.....	16
3.1 Módulos e tipos de planejamento.....	16
3.2 Configuração do projeto	17
3.3 Configurações do projeto	18
3.4 Importação de Dados	20
3.5 Gerenciamento de catálogo	22
3.6 Gerenciamento de projeto	23
4 Licenças	25
4.1 As principais características das licenças	25
4.2 Registro de licença	25
4.3 Opções de conta digital BlueSkyBio	28
4.4 Licenças em Preferências	28
4.5 Licenças compartilhadas	29
4.6 Comprar exportação.....	32
5 Carregando imagens de TC e TCTB dos pacientes no Blue Sky Plan	35
5.1 Selecionando a localização das imagens DICOM.....	35
5.2 Selecionando as séries	36
5.3 Melhorando o desempenho	36
5.4 Alinhar a digitalização e definir o intervalo de fatias	37
5.5 Importar superfícies adicionais.....	37
5.6 Posicionando a curva panorâmica.....	38
6 Interface do Software	40
6.1 Telas e visões.....	40
6.2 Tela Multiplanar.....	48
6.3 Controles do Mouse 3D.....	49
7 CT Dicom Viewer	53
8 Posicionando Implantes e pinos	56
8.1 Adicionando um implante ou pino.....	56
8.2 Posicionando e manuseando o implante.....	63
8.3 Operações adicionais no implante	64
8.4 Painel Lateral.....	66
8.5 Interação com os parâmetros de implantes selecionados	67
8.6 Validação dos Implantes.....	67
8.7 Pedidos de Implantes	69
9 Ferramentas	70

9.1 Barra de Ferramentas.....	70
9.2 Abrindo um projeto	71
9.3 Salvando um projeto.....	71
9.4 Fechando um projeto.....	71
9.5 Salvando imagens em formato JPG.....	71
9.6 Salvando capturas de tela e gerando um relatório de perfurações	71
9.7 Modificando janela e nível	74
9.8 Zoom	75
9.9 Movendo a imagem	75
9.10 Movendo objetos	75
9.11 Medições e Sobreposições.....	75
9.12 Medidas Lineares	76
9.13 Medidas Angulares	77
9.14 Medições de Densidade	77
9.15 Correção das medições e número da posição	77
9.16 Deletando uma medição.....	77
9.17 Sobreposições	77
9.18 Panorâmica	78
9.19 Mostrar dimensões	80
10 Importando o dispositivo de digitalização	81
10.1 Marcadores de Gutta Percha Coincidindo.....	82
10.2 Marcadores de Gutta Percha não coincidindo	83
11 Importação de modelo STL (planejamento com TC).....	85
12 Planejando sem TC.....	89
13 Ajuste de modelo STL	93
14 Registro de Corpo de Digitalização (Scan Body).....	94
15 Dentes Virtuais.....	97
15.1 Inserindo Coroas	97
15.2 Posicionando e manipulando as coroas	98
15.3 Adicionar a coroa com IA.....	99
15.4 Alinhando um implante e outras operações.....	100
15.5 Menu Contextual	102
16 Segmentação do dente e maxilar.....	104
16.1 Segmentação automática dos dentes	104
16.2 Segmentação virtual dos dentes	108
16.3 Segmentação automática do maxilar	109
16.4 Vias aéreas.....	112
17 Guia Cirúrgico	115
17.1 Fabricação do guia baseada em dispositivo de escaneamento	115
17.2 Fabricação do guia baseada em escaneamento da superfície de modelos.	117
17.3 Remove retenções	120
17.4 Ferramenta de Pincel	121
17.5 Ferramenta de Texto	122
18 Modo endodôntico.....	124
19 Exportando Dados	127
20 Softwares externos.....	128
20.1 Importar do Medit.....	128
21 Pinos de Articulação.....	130
22 Exportando Coordenadas	133

23 Operações booleanas.....	135
23.1 União	135
23.2 Diferença	136
23.3 Interseção	136
24 Tubos de conexão.....	138
25 Formas personalizadas	139
26 Assistente Blue Sky Plan	140
26.1 Assistente automático de implantes	140
26.2 Descrição passo a passo do assistente	144
27 Módulo Ortodôntico.....	158
27.1 21.1. Adicionando Modelo STL.....	159
27.2 Registro de Mordida	161
27.3 Articulação mandibular	161
27.4 Marcando Dentes e Alinhamento dos Maxilares	162
27.5 Funcionalidade dos Maxilares	164
27.6 Segmentação dentária	164
27.7 Recorte do Modelo	166
27.8 Movimentação dos Dentes	168
27.9 Gerando posições intermediárias	174
27.10 Alinhadores Ortodônticos.....	176
27.11 Bandeja de Ligação Indireta – Alinhar os Braquetes aos Dentes	181
27.12 Bandeja de Ligação Indireta - Alinhar os Braquetes ao Arame	183
27.13 Geração e Exportação dos Modelos STL.....	184
27.14 Mostrar dimensões	188
27.15 Instruções Rápidas para o uso de sistema computadorizado de braquetes ortodônticos	190
28 Módulo de Prótese Total	193
28.1 Adicionando o modelo STL do paciente	193
28.2 Adicionando dentes virtuais	193
28.3 Marcar Dente Visível para a cadeia de dentes	194
28.4 Limpando a Cadeia de dentes	194
28.5 Mostrar/ ocultar cadeia de dentes	194
28.6 Mover a cadeia de dentes completa.....	195
28.7 Manipulação de modelos.....	195
28.8 Criando a Prótese Total.....	195
28.9 Etapa 1 – cavidades e direção de inserção	196
28.10 Etapa 2 – seleção da base da prótese total	197
28.11 Etapa 3 – contorno gengival	197
28.12 Etapa 4 – Prótese Total.....	198
28.13 Exportando	199
28.14 Painel de superfícies dentárias	200
28.15 Abrindo um projeto salvo	201
28.16 Capturas de Tela	203
29 Módulo de Coroa e Pontes	206
29.1 Adicionando o modelo STL do paciente	206
29.2 Adicionando dentes virtuais	206
29.3 Painel de Desenho das Restaurações	207
29.4 Seleção do tipo de restauração – Coroa sobre implante.....	207
29.5 Seleção do tipo de restauração – Coroa convencional.....	212

29.6 Criando uma ponte	216
29.7 Painel de superfícies dentárias	218
29.8 Painel de edição dos dentes	219
29.9 Painel de Componentes	219
29.10 Painel de Capturas de Tela	220
29.11 Exportação CAM	221
29.12 Preferências de Coroa e Ponte	222
30 Tala.....	223
30.1 Adicionando o modelo STL do paciente	224
30.2 Alinhar à grade	224
30.3 Registro de Mordida	224
30.4 Articulação mandibular	226
30.5 Remover retenções	226
30.6 Adicionar desprogramadores anteriores	229
30.7 Desenhar curva da placa.....	231
30.8 Definir áreas elevadas.....	232
30.9 Editar modelo da placa.....	233
30.10 Exportar e carregar para BioBigBox.....	234
30.11 Atalhos do teclado.....	235
30.12 Atalhos de manipulação.....	235
30.13 Painel de visibilidade	235
30.14 Módulo de edição	237
30.15 Editar modelo	237
30.16 Observações e Medidas.....	238
30.17 Criar uma captura de tela	239
30.18 Movimento da mandíbula	239
30.19 Mostrar dimensões	239
31 Preferências	241
31.1 Geral.....	241
31.2 Personalização	242
31.3 Projeto	242
31.4 Atalhos.....	242
31.5 Avançado.....	243
31.6 Guia Cirúrgico.....	243
31.7 Brocas de corte BSB direto	243
31.8 Ortodontia e limites de movimento do dente	244
31.9 Coroa e Ponte	244
32 Atualizações automáticas	245
33 Notas de Rodapé	247
33.1 Instruções de uso para alinhadores prescritos Blue Sky Bio	247
33.2 Instruções de uso de sistema computadorizado de braquetes ortodônticos	248
33.3 Blue Sky Bio Aligner G - Instruções para o paciente.....	250
33.4 Blue Sky Bio Aligner G - Instruções para o usuário.....	251


1 Introdução

O Blue Sky Plan® é um software de computador baseado em Windows destinado à colocação de implantes cirúrgicos virtuais 3D, oferecendo aos médicos uma forma mais precisa de tratar os pacientes. O Blue Sky Plan® é preciso e pode ajudar o clínico a determinar a posição ideal para a colocação do implante para obter os melhores resultados estéticos e funcionais. O Blue Sky Plan® pode ser usado para fins de diagnóstico e pode auxiliar na fabricação de guias cirúrgicos para cirurgia guiada por computador. O uso do Blue Sky Plan® é a maneira de oferecer a seus pacientes os melhores cuidados disponíveis.

O Blue Sky Plan® converte uma tomografia computadorizada (TC) ou tomografia computadorizada de feixe cônico (TCFC) em um formato que permite ao dentista avaliar a topografia anatômica da maxila e mandíbula, bem como a localização de estruturas importantes. As imagens de TC ou TCFC do paciente são armazenadas no formato DICOM a partir de um centro de imagens. O software converte essas imagens e torna possível visualizar as estruturas anatômicas do paciente. Esses dados podem ser usados para um preciso planejamento pré-cirúrgico do tratamento.

O dentista pode usar o programa para:

- realizar planejamento pré-cirúrgico
- ajudar na fabricação de um guia cirúrgico preciso
- diminuir o risco de complicações cirúrgicas
- criar simulações realísticas do plano de tratamento
- ajudar na seleção do tipo e do tamanho do implante
- avalia o resultado de enxertos ósseos
- armazenar dados dos pacientes
- permite comunicação visual com os pacientes e a equipe de trabalho
- demonstra conhecimento, credibilidade e segurança
- ajuda a oferecer cuidados avançados aos pacientes

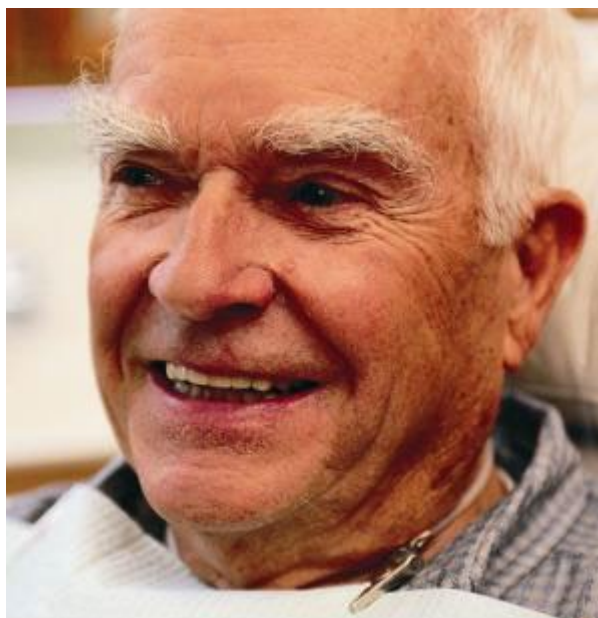

O software Blue Sky Plan® pode ser baixado no site <http://www.blueskybio.com>. Uma licença de usuário deverá ser obtida para cada instalação. Durante o processo de instalação o software requisitará ao usuário que solicite a licença via internet. O Blue Sky Plan® pode ser baixado gratuitamente. A exportação de dados requer créditos de exportação, e as funções Premium de Automação Avançada (Premium Advanced Automation) requerem uma assinatura paga após um período de avaliação gratuito (consulte a seção 1.4).

1.1 Indicações de uso

O Blue Sky Plan é destinado a ser utilizado como um software conversor de imagens DICOM geradas em tomografias computadorizada para um formato que permita ao dentista avaliar a topografia anatômica da maxila e mandíbula, assim como a localização de estruturas importantes. Ele permite que a informação seja utilizada para o planejamento pré-cirúrgico de procedimentos de implantes dentário.

O Blue Sky Bio Aligners é uma série de aparelhos plásticos transparentes e leves, indicados para o tratamento de más oclusões dentárias em pacientes com dentição permanente (ou seja, todos os

segundos molares). Utilizando uma série de movimentos incrementais dos dentes, posiciona sequencialmente os dentes por meio de força suave contínua.

O sistema de braquete ortodôntico computadorizado Blue Sky Bio é um sistema de software destinado ao uso como auxílio no planejamento de tratamento ortodôntico para corrigir más oclusões em pacientes ortodônticos. Para uso por profissionais de odontologia treinados em tratamento ortodôntico, incluindo análises radiográficas e planejamento de tratamento. O sistema de braquete ortodôntico computadorizado Blue Sky Bio é destinado ao uso com braquetes disponíveis no mercado atualmente usados no tratamento ortodôntico padrão. O produto final é uma guia de colagem indireta para uso do cirurgião-dentista na colocação de vários braquetes ao mesmo tempo.

O módulo de dentadura destina-se a ser utilizado para projetar uma dentadura e exportar toda a dentadura ou partes selecionadas da dentadura a partir do software para impressão 3D.

A funcionalidade de coroa e ponte permite a um cirurgião-dentista projetar um ou mais dentes novos no Blue Sky Plan que se ligarão a um dente danificado ou a um pilar baseado em titânio.

1.2 Advertências

O software não contém nenhuma funcionalidade para verificar se a implementação real do plano de tratamento virtual pode resultar em danos ao paciente. Qualquer plano de tratamento virtual deve ser avaliado por um profissional licenciado treinado, confirmando que o tratamento virtual pode ser implementado na realidade e não causará danos ao paciente.

Se a função de segmentação do software for usada, a segmentação deverá ser cuidadosamente avaliada para garantir que corresponda à anatomia do paciente e corrigida, se necessário.

O Blue Sky Plan® inclui funções que utilizam IA (consulte a seção 1.3). Os resultados dessas funções (canais nervosos detectados, dentes e maxilares segmentados, coroas geradas, tipos, tamanhos e posições de implantes sugeridos, marcações dos dentes, dentes segmentados em digitalizações ópticas e posições dentárias ortodônticas sugeridas) são apenas propostas. O usuário deve revisar e verificar cada resultado automatizado em relação aos dados de TC/TCFC e às digitalizações ópticas do paciente, e corrigi-lo ou rejeitá-lo quando necessário, antes de se basear nele para planejamento do tratamento, exportação ou fabricação de qualquer dispositivo.

Uma função automatizada pode produzir um resultado incompleto ou incorreto, especialmente com dados de baixa qualidade, incompletos ou atípicos (por exemplo, artefatos de dispersão causados por restaurações metálicas, anatomia incomum, áreas edêntulas ou locais previamente tratados). Um resultado que pareça plausível também deve ser verificado.

Os resultados automatizados não substituem o julgamento clínico de um profissional qualificado e habilitado. A responsabilidade pelo plano de tratamento final, incluindo cada elemento gerado automaticamente aceito pelo usuário, continua sendo do clínico.


Antes de exportar dados do software ou de realizar qualquer tratamento do paciente, o usuário deve ter lido e seguido estas instruções de uso. O dentista responsável pelo tratamento deve revisar, modificar se necessário e aprovar todos os dados gerados pelo software antes de qualquer tratamento do paciente. Um usuário que não seja o dentista responsável pelo tratamento deve ser autorizado por ele e deve garantir que essa revisão e aprovação ocorram.

É importante verificar se os conjuntos de dados importados e exportados são de qualidade adequada e correspondem às estruturas anatômicas do paciente.



Os aparelhos fabricados com base no plano de tratamento virtual devem ser fabricados apenas com materiais biocompatíveis que possuam propriedades mecânicas adequadas e estejam em conformidade com os órgãos reguladores locais. Os aparelhos devem ser marcados com informações do paciente para evitar erros ao entregar o aparelho. Imagens radiográficas ou ópticas de baixa qualidade, treinamento inadequado do usuário ou hardware inadequado podem afetar os resultados da imagem.

Os dados DICOM podem ser usados para:


1) fazer um modelo 3D em escala da mandíbula com o implante planejado de acordo com as ilustrações abaixo:

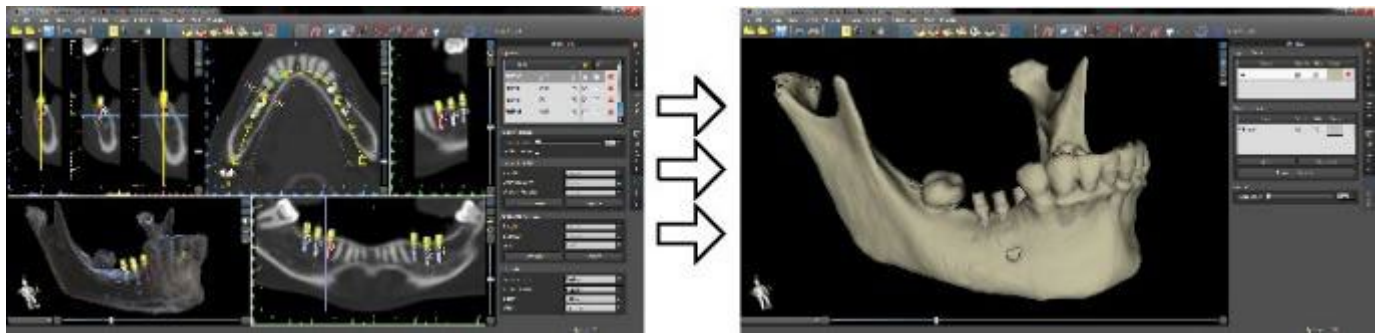

2) fabricar um guia cirúrgico suportado em osso

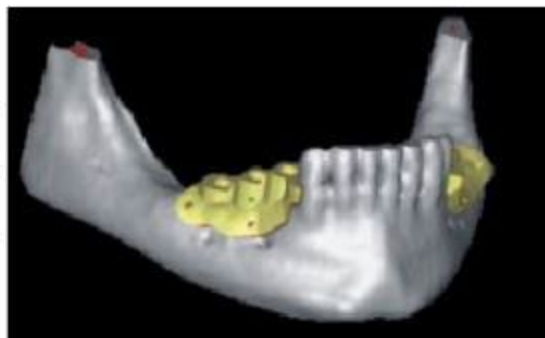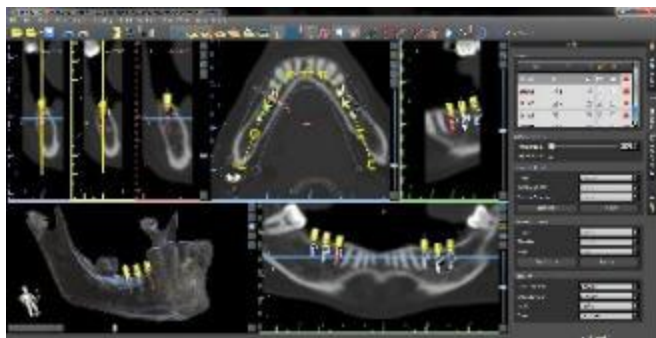

3) fabricar um guia cirúrgico suportado em gengiva

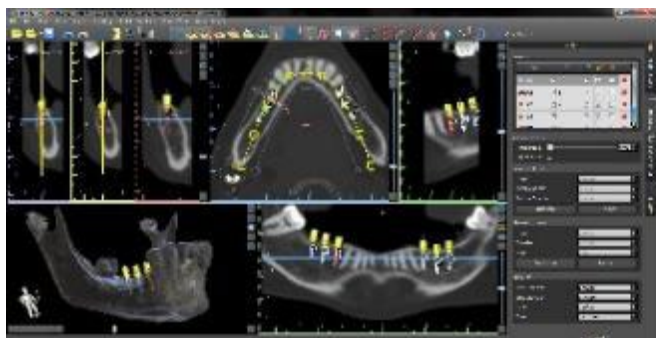

*Os arquivos com posicionamento tridimensional de implantes e o arquivo do guia tridimensional só podem ser gerados no Blue Sky Plan®.

1.3 Funções baseadas em IA

O Blue Sky Plan® versão 5.1 inclui as funções descritas abaixo, que utilizam modelos de IA. Cada função propõe um resultado que é exibido ao usuário; nenhuma delas finaliza um plano de tratamento, exporta dados ou encomenda peças sem uma ação do usuário. O usuário pode revisar, ajustar ou rejeitar o resultado de cada função conforme descrito abaixo e deve fazê-lo antes de se basear nele (consulte a seção 1.2).

Modelos de IA bloqueados. Os modelos de IA são bloqueados (locked). Eles não aprendem nem mudam durante o uso e são atualizados somente por meio de novas versões lançadas do software.

Rastreamento do nervo (detecção do canal mandibular)

O que faz: Detecta o canal mandibular nos dados de TC/TCFC e o rastreia até o forame mental. Disponível por meio de “Autodetect Nerves” (totalmente automático), de “Detect Nerve” (a partir de um ponto em que o usuário clica dentro do forame mental na vista transversal) e como primeira etapa do Assistente automático de implantes e do Assistente Blue Sky Plan.

Como o usuário revisa, ajusta ou rejeita o resultado: O canal detectado é exibido em todas as vistas. O usuário verifica seu trajeto em todo o comprimento nas vistas panorâmica, transversal e axial; ajusta-o arrastando os pontos do nervo (incluindo a posição vestibular/lingual na vista transversal) e alterando seu diâmetro no painel de nervos; ou o rejeita excluindo o nervo (Panels > Nerve List) e rastreando o canal manualmente ou definindo os forames manualmente (“Set Right Foramen Manually” / “Set Left Foramen Manually”). A detecção automática do nervo pode ser desativada nas Preferências.

Segmentação dos dentes na TC

O que faz: Identifica os dentes individuais (e, se ativado, os implantes existentes) nos dados de TC/TCFC e cria um modelo de superfície 3D separado para cada um. Disponível por meio de “Select Tooth” e “Create STL Surfaces for All Teeth” (Model Master > Segmentation), automaticamente ao importar a TC se ativado nas Preferências, e dentro dos assistentes (segmentação local ou completa).

Como o usuário revisa, ajusta ou rejeita o resultado: O resultado é exibido em cores nos cortes ortogonais e pode ser mostrado em 3D com “Show Segmentation 3D Preview”. O usuário o compara com os dados de TC e o corrige com as ferramentas de refinamento (Smooth, Inflate, Deflate) ou com a segmentação virtual dos dentes para um dente não detectado. O usuário rejeita um resultado com “Clear Segmentation Data”, “Undo” ou ocultando ou excluindo a superfície no painel de superfícies.

Segmentação do maxilar na TC

O que faz: Separa a mandíbula e/ou a maxila dos dados de TC/TCFC e cria modelos de superfície 3D, opcionalmente com os dentes como modelos separados e com as vias aéreas. Disponível por meio de “Automatic Jaw Segmentation”, automaticamente ao importar a TC se ativado nas Preferências, e dentro dos assistentes.

Como o usuário revisa, ajusta ou rejeita o resultado: O maxilar é exibido como pré-visualização antes da criação de qualquer superfície. O usuário o compara com os dados de TC e o corrige com as ferramentas de segmentação antes de clicar em “Next”; pode voltar com “Previous” ou reiniciar com “Start New Segmentation”; e pode ocultar ou remover os modelos resultantes na tabela de superfícies STL. Se “Run Bone Segmentation without manual adjustments” estiver ativado, a etapa de edição é ignorada e o usuário deve revisar a superfície resultante e reiniciar a segmentação se ela não corresponder à anatomia do paciente.

Design de coroa (dente com IA)

O que faz: Gera uma forma de coroa específica para o paciente em uma posição dentária selecionada, ajustada aos dentes vizinhos e, quando um modelo antagonista alinhado em oclusão é importado, à arcada oposta. Disponível por meio de “Automatically create AI Tooth” na caixa de diálogo “Add Tooth” e na etapa “Position Crowns” do Assistente automático de implantes.

Como o usuário revisa, ajusta ou rejeita o resultado: A coroa é exibida em 3D sobre o modelo. O usuário verifica sua forma, posição, contatos proximais e oclusão; ajusta sua posição, rotação e tamanho com o widget de manipulação; gera-a novamente com “Regenerate AI Tooth”; substitui-a por uma coroa do catálogo de dentes; ou a exclui.

Posicionamento do implante

O que faz: Propõe o implante (plataforma, diâmetro e comprimento) do sistema de implantes selecionado e sua posição e orientação para uma posição dentária, vinculado ao dente com IA e limitado pelo osso nos dados de TC e pelos valores “Subcrestal Depth” e “Max Implant Width” em Preferences > Surgical Guide. Disponível por meio de “Automatic Implant” na caixa de diálogo “Add New Implant” e no Assistente automático de implantes. Requer um dente com IA e dados de TC importados.

Como o usuário revisa, ajusta ou rejeita o resultado: O implante é exibido em todas as vistas juntamente com seu status de validação; um implante inválido é sinalizado com um ícone que abre o painel de validação de implantes. O usuário verifica a posição do implante em relação ao canal mandibular, aos dentes e raízes vizinhos, às corticais e ao seio; ajusta a posição com o widget de manipulação; substitui o implante por outro compatível com o kit de brocas selecionado; ou o rejeita excluindo-o e posicionando um implante manualmente.

Marcação do modelo 3D (ortodontia)

O que faz: Coloca automaticamente pontos de referência em cada dente do modelo de digitalização óptica importado e atribui os números dos dentes usados pela segmentação subsequente. Ativada ou desativada em Tools > Preferences > Orthodontics > Automatic Annotation.

Como o usuário revisa, ajusta ou rejeita o resultado: Os pontos são exibidos no modelo 3D e no esquema dentário do painel. O usuário verifica se cada dente está marcado na posição e com o número corretos; corrige a marcação alternando para a marcação manual e movendo os pontos, ou com “Correct Single Tooth” e “Clear Tooth”; ou a rejeita com “Clear All Teeth” e marca os dentes manualmente.

Segmentação do modelo 3D (ortodontia)

O que faz: Detecta a margem gengival de cada dente marcado no modelo de digitalização óptica e separa os dentes do modelo para que possam ser movimentados.

Como o usuário revisa, ajusta ou rejeita o resultado: A margem detectada de cada dente é exibida como uma curva. O usuário revisa cada dente e corrige a margem arrastando os pontos de controle ou redesenhando parte da curva (Shift + botão esquerdo do mouse). A segmentação só é aplicada quando o usuário clica em “Continue to Model Trimming”.

Alinhamento dentário ortodôntico

O que faz: Calcula as posições finais propostas dos dentes para o tratamento com alinhadores com “Align Both Jaws Automatically” ou “Align without IPR resolving”. Ambas as arcadas devem estar carregadas e marcadas. As colisões entre as arcadas não são resolvidas automaticamente.

Como o usuário revisa, ajusta ou rejeita o resultado: As posições finais propostas são exibidas para ambas as arcadas. Um dentista habilitado revisa cada posição dentária, as colisões entre as arcadas e os valores de IPR; ajusta dentes individuais ou grupos de dentes com o widget de alinhamento manual; executa novamente o alinhamento com outras configurações; ou descarta a proposta e planeja as posições dos dentes manualmente. O setup final é criado somente a partir das posições aceitas pelo usuário.

Etapas automáticas baseadas em regras. O Assistente automático de implantes executa várias das funções acima em sequência, juntamente com etapas automáticas que não utilizam IA: alinhamento automático do modelo com a TC, curva automática do guia cirúrgico e geração do guia cirúrgico. O usuário revisa o resultado de cada etapa antes de prosseguir e pode voltar a qualquer etapa anterior.

1.4 Funções gratuitas e funções por assinatura

O Blue Sky Plan® versão 5.1 é um único download de software gratuito. Não existem versões gratuita e paga separadas; todos os usuários instalam o mesmo software.

Disponível sem assinatura:

- todas as funções do Blue Sky Plan® versão 5.0 e anteriores, incluindo o Assistente Blue Sky Plan passo a passo
- as funções baseadas em IA descritas na seção 1.3 quando usadas individualmente (Autodetect Nerves, Automatic Tooth Segmentation, Automatic Jaw Segmentation, Automatically create AI Tooth, Automatic Implant, Automatic Teeth Annotation, segmentação dentária em ortodontia e Align Both Jaws Automatically)

Funções Premium de Automação Avançada (assinatura paga necessária após o período de avaliação gratuito):

- o Assistente automático de implantes – planejamento de implantes e design do guia cirúrgico totalmente automáticos, executando em sequência a detecção do nervo, o alinhamento do modelo, o posicionamento de coroas e implantes, a curva do guia e a criação do guia cirúrgico
- o painel “Guide Connectors” – peças magnéticas para guias cirúrgicos

Cada usuário recebe um período de avaliação gratuito das funções Premium de Automação Avançada. Após o período de avaliação, essas funções ficam disponíveis somente com uma assinatura ativa, vinculada ao computador em que foi ativada. Se a assinatura não for mantida, somente as funções Premium de Automação Avançada são desativadas; o software, os projetos existentes e todas as outras funções continuam disponíveis e não é necessário desinstalar nem reinstalar nada.


A exportação de dados do software (por exemplo, guias cirúrgicos, modelos e outras superfícies para fabricação) é cobrada por exportação por meio de créditos de exportação, independentemente de o usuário ter uma assinatura. Uma assinatura não inclui créditos de exportação. Os créditos de exportação e as assinaturas são adquiridos pela conta BlueSkyBio Digital do usuário (consulte o capítulo “Licenças”); o custo atual de cada tipo de exportação é exibido em Tools > Preferences > BlueSkyBio Account.

2 Instalando o Blue Sky Plan


O software Blue Sky Plan® é compatível com o sistema operativo Windows. Estão disponíveis pacotes de instalação para o sistema indicado.

2.1 Processo de Instalação


Após baixar o software Blue Sky Plan® para disco rígido do seu computador, simplesmente execute o arquivo e siga os passos para realizar a instalação:

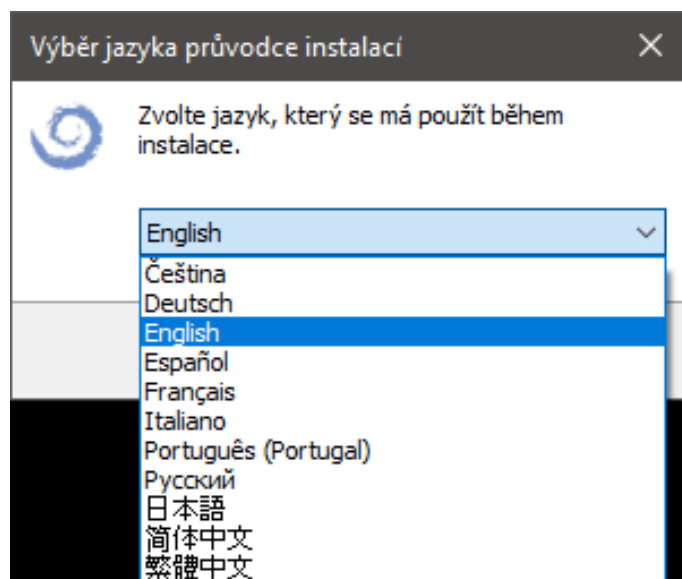


Selecione o idioma e clique em "OK".

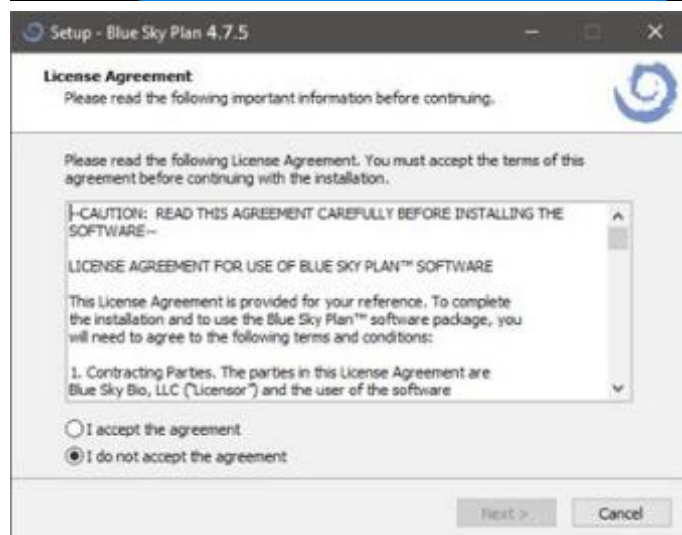


Leia atentamente o contrato de licença, selecione uma das opções e clique em "Seguinte".

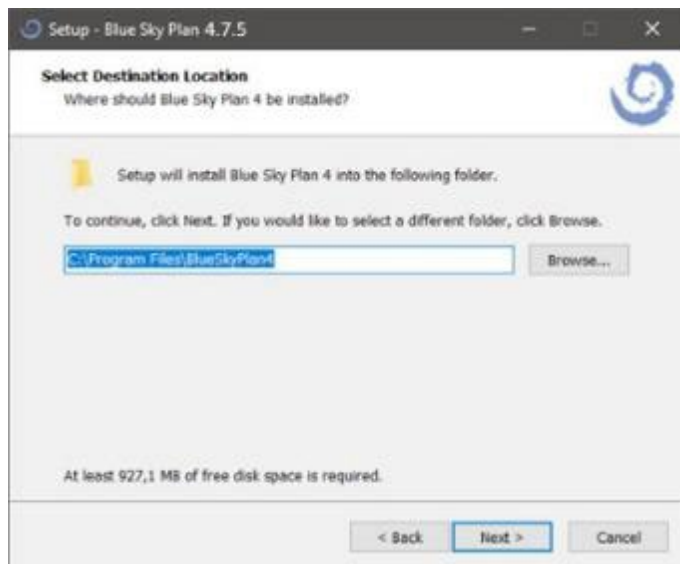

Clique em "Seguinte".

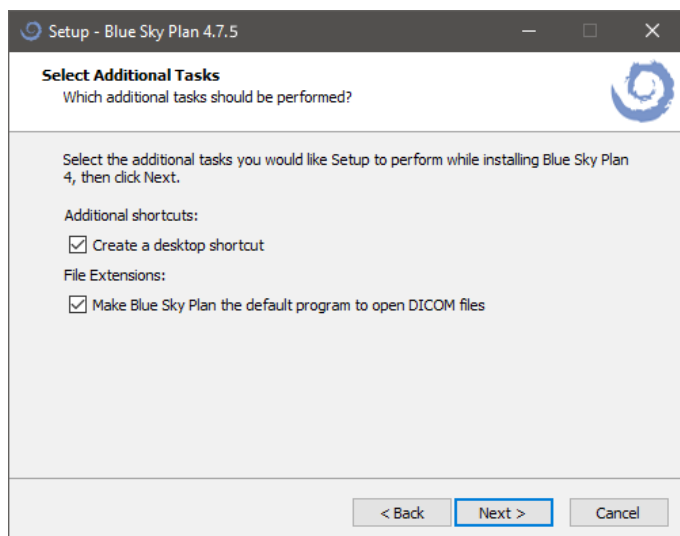

Clique em "Seguinte".

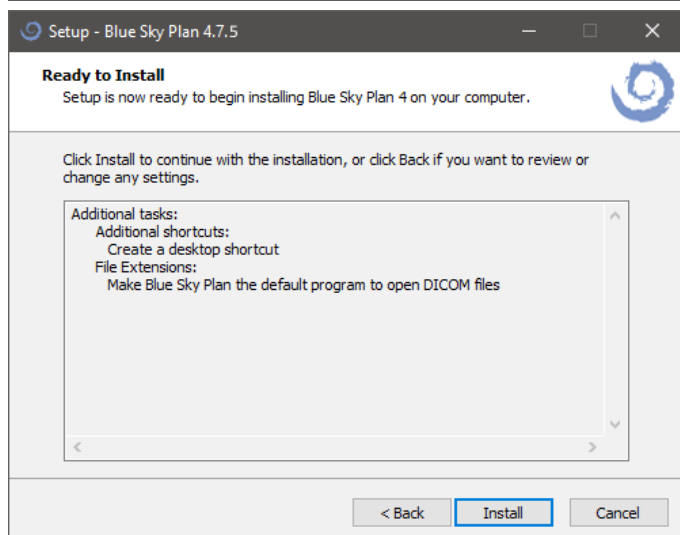

Clique em "Instalar".



Clique em “Concluir”.

2.2 Requisitos de Hardware

Requisitos mínimos:

- SIST. OPERACIONAL: Windows 10 Home/Professional de 64 bits
- Processador: Quad Core Intel i7 ou similar
- RAM: Pelo menos 16 GB
- Placa de Vídeo: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti
- Monitor: resolução mínima de 1850p
- Disco rígido: 5 GB de espaço livre

2.3 Sistema Operacional

Requisitos mínimos:

Windows 10 Home/Professional (64bit)

3 Blue Sky Launcher

O Blue Sky Launcher é uma ferramenta multifuncional que fornece acesso a todos os recursos do aplicativo Blue Sky Plan®. Permite aos usuários iniciar os módulos específicos de planejamento de tratamento, organizados em blocos hexagonais (1), e fornece acesso aos processos vinculados à conta BlueSkyBio Digital (2) (consulte o capítulo 4). Além disso, os usuários podem gerenciar pacotes de catálogo (3) (por exemplo, implantes, dentes) e abrir projetos existentes (4). O Blue Sky Launcher funciona como um "hub central", integrando efetivamente todas as principais funcionalidades em uma interface intuitiva.

As opções de planejamento do tratamento são organizadas em módulos distintos (Ortodontia, Planejamento de Implantes e Guia Cirúrgico etc.), que podem ser divididos em tipos de planejamento (Alinhadores, Guia Cirúrgico etc.). Cada módulo e tipo de planejamento tem seus próprios requisitos específicos em relação aos dados que precisam ser importados.



3.1 Módulos e tipos de planejamento

O planejamento de um novo tratamento começa com a criação de um novo projeto. Para começar, o usuário seleciona um módulo específico (1) e, se houver, um tipo específico de planejamento (2). Abaixo está uma lista de todos os módulos e seus tipos de planejamento:

- **Easy CT DICOM Viewer** - consulte o capítulo 7
- **Ortodontia** - consulte o capítulo 25
 - **Alinhadores**
 - **Guia de colagem indireta (IBT) Alinhar os braquetes aos dentes**
 - **Guia de colagem indireta (IBT) Alinhar os braquetes ao arame**
- **Tala** - consulte o capítulo 28
 - **Tala incisal (AMPISA)**
 - **Tala de mordida oclusal**
- **Planejamento de implantes e guias cirúrgicos**
 - **Assistente automático de implantes** - consulte o capítulo 24
 - **Outros fluxos de guias cirúrgicos** - consulte o capítulo 17
- **Prótese** - consulte o capítulo 26
- **Análise cefalométrica**
 - **Análise cefalométrica de uma imagem**
 - **Análise cefalométrica de uma TC**
- **Coroa e Ponte** - consulte o capítulo 27
 - **Coroa convencional**
 - **Coroa no Ti-base**
 - **Ponte**
- **Endodontia** - consulte o capítulo 18
- **Modelo Mestre** - consulte o capítulo 13
 - **Modelo Mestre (TC)**
 - **Modelo Mestre (apenas STL)**




3.2 Configuração do projeto

Após selecionar o módulo e o tipo de planejamento, o usuário entra no fluxo de Configuração do Projeto, que consiste em duas etapas interconectadas. Nas Configurações do Projeto (1) o usuário deve criar ou selecionar o paciente, o tratamento e selecionar a mandíbula planejada. Em Importação de Dados (2) o usuário deve importar os dados relevantes. Quando todas essas etapas necessárias forem concluídas, será possível iniciar o planejamento real que foi selecionado. A navegação entre as etapas é fornecida por duas setas azuis, Voltar (3) e Seguinte (4). É sempre permitido retornar ao passo anterior (Voltar), enquanto só é permitido avançar (Seguinte) se todos os requisitos para a etapa atual tiverem sido cumpridos.



3.3 Configurações do projeto

A primeira etapa do fluxo consiste em: criar/selecionar/ignorar o paciente (1), criar/selecionar o tratamento (2) e, se disponível, escolher o tipo de arcada (3). O gerenciamento de pacientes e tratamentos permite a integração com serviços on-line, como BioBigBox, LabPronto e iSmile.

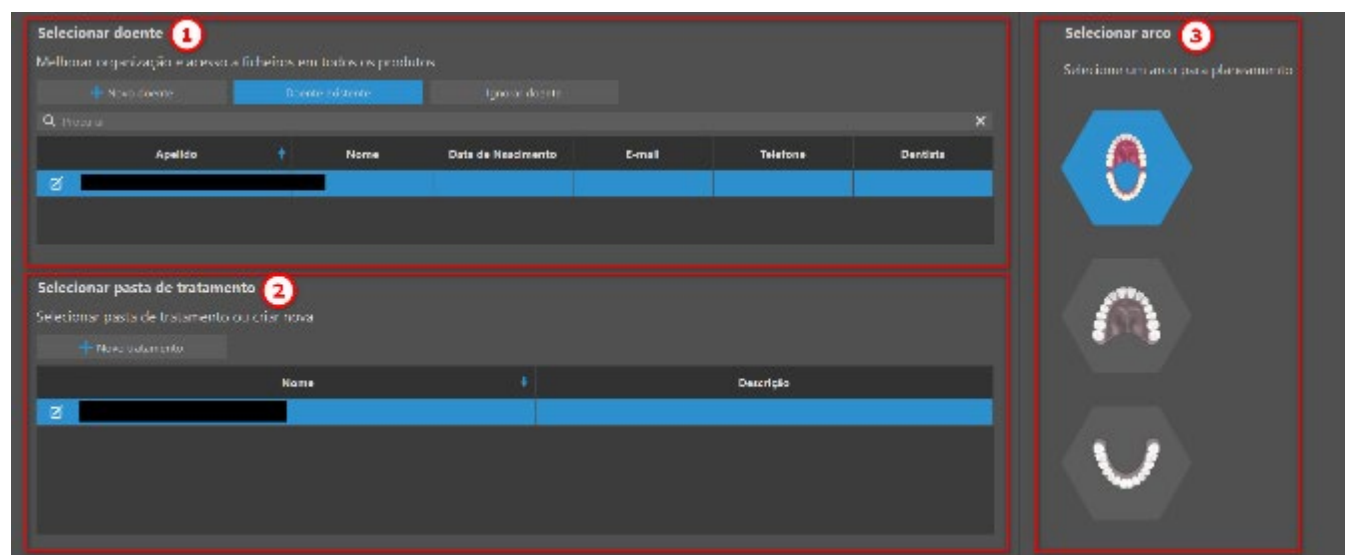

3.3.1 Criar e editar pacientes

Se o usuário ainda não tiver criado nenhum paciente, a tabela de pacientes estará vazia. Um novo paciente pode ser criado clicando no botão "Novo paciente", que abre a caixa de diálogo "Adicionar paciente". A criação do paciente também pode ser ignorada e concluída posteriormente, se necessário.

A caixa de diálogo "Adicionar paciente" contém os seguintes campos:

- Nome *
- Apellido *
- Data de Nascimento
- E-mail
- Telefone
- País (selecionado: United States of America (the))
- Dentista
- Descrição

Os campos assinalados com * são obrigatórios.

Botões de ação: Atualizar, Remover, Cancelar.


Para criar um paciente, é necessário preencher pelo menos os campos "Nome" e "Sobrenome". Outros campos são opcionais, embora "E-mail" precise ser adicionado em um formato de e-mail padrão. Clique em "Criar" para adicionar o paciente ou em "Cancelar" para fechar a caixa de diálogo.

Qualquer informação do paciente pode ser editada posteriormente. Para isso, clique no ícone "Editar informações do paciente" no lado esquerdo da célula "Sobrenome". Ajuste qualquer campo conforme necessário e clique no botão "Atualizar" para salvar as alterações. O botão "Remover" exclui o paciente completamente e o botão "Cancelar" fecha a caixa de diálogo.

3.3.2 Criar e editar tratamentos

Após criar um paciente, o novo tratamento é criado automaticamente. O usuário também pode criar o tratamento manualmente clicando no botão "Novo tratamento" – a caixa de diálogo "Adicionar tratamento" será aberta.

O campo "Nome" é obrigatório para criar um tratamento, os outros campos são opcionais. Clique em "Criar" para adicionar o tratamento ou em "Cancelar" para fechar a caixa de diálogo.

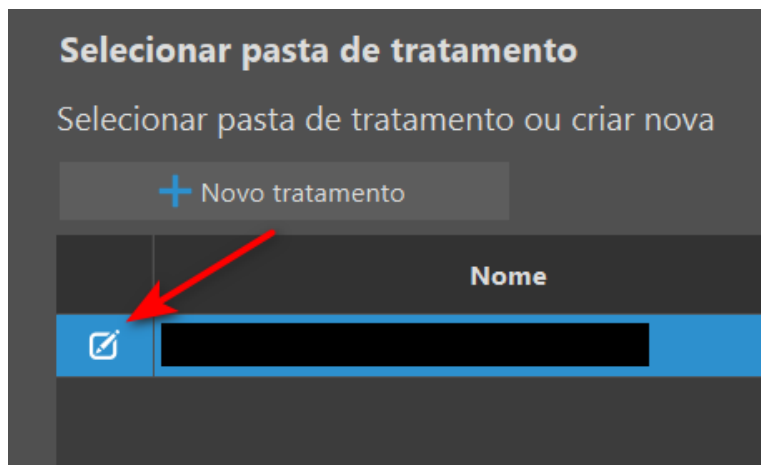

Assim como acontece com os pacientes, os tratamentos também podem ser editados. Clique no ícone "Editar informações do tratamento" no lado esquerdo da célula "Nome". O botão "Atualizar" salva as alterações, o botão "Remover" exclui o tratamento e o botão "Cancelar" fecha a caixa de diálogo.

3.3.3 Classificar colunas e barra de pesquisa


Para melhorar a organização de pacientes e tratamentos, todas as colunas nas tabelas podem ser classificadas por vários critérios. Qualquer paciente pode ser facilmente encontrado usando a barra de pesquisa.

3.3.4 Seleção de arcada


Alguns módulos, como Ortodontia, exigem um maxilar planejado: maxila, mandíbula ou ambos os maxilares. Clicar no tipo de mandíbula planejada permite que o usuário continue para a etapa Importação de Dados.

3.4 Importação de Dados

A segunda etapa envolve a importação dos dados necessários para a próxima etapa do planejamento. Dependendo do tipo de planejamento selecionado, será necessário importar dados de TC ou um modelo STL (ou uma imagem no caso de Análise Cefalométrica de Imagem). Quando o usuário seleciona e confirma os dados desejados na janela de diálogo que se abre ao entrar na Importação de Dados, os dados são categorizados automaticamente com base em seus títulos. Também é possível importar dados por meio dos botões "Importar escaneamento(s) óptico(s)" e "Importar tomografia(s) computadorizada(s)" (ou "Importar imagem(ns)" no caso de análise cefalométrica a partir de imagem) (1) ou por meio do botão "Importar item" ("+") (2). Dados individuais são representados por um único item. O item selecionado é exibido na pré-visualização (3).

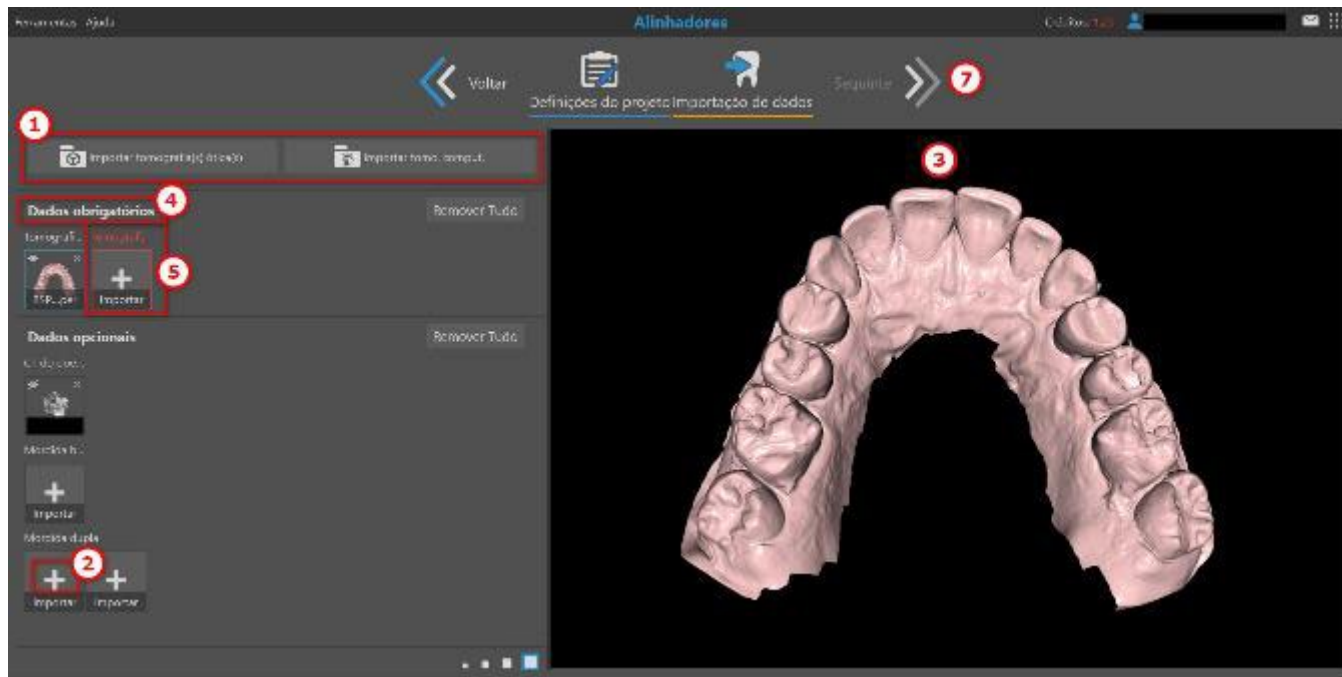


Você pode modificar a TC importada clicando no botão "Ajustar tomografia computadorizada" (6). Esta opção fica disponível quando os dados de TC são selecionados. Uma vez ativado, o sistema alterna para o modo de definição do volume de interesse e ajuste de imagem. Após recortar ou alinhar os dados, não é mais possível realizar ajustes adicionais na tomografia. Para modificar novamente a TC, é necessário removê-la e importá-la novamente.

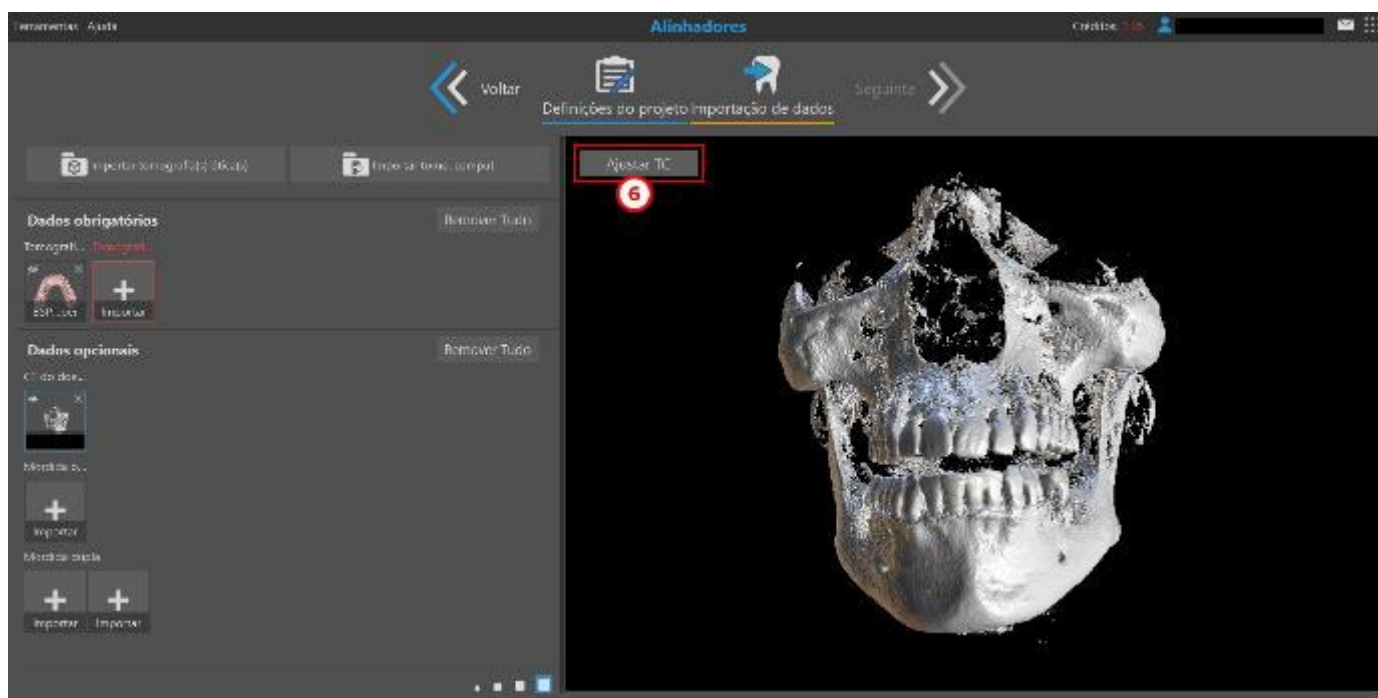

3.4.1 Gerenciamento de dados

Dados obrigatórios (4) contêm dados obrigatórios. Dados obrigatórios, contornados com uma borda vermelha até serem preenchidos, são necessários para planejamento posterior (5). Dados opcionais (X) contêm dados não obrigatórios que podem apoiar ou refinar o planejamento. Por outro lado, os dados classificados automaticamente como "Não categorizados" (X) devem ser movidos para Dados


opcionais, se possível, pois podem não ser incluídos no planejamento posterior (dependendo do tipo de planejamento selecionado e do tipo de dados).

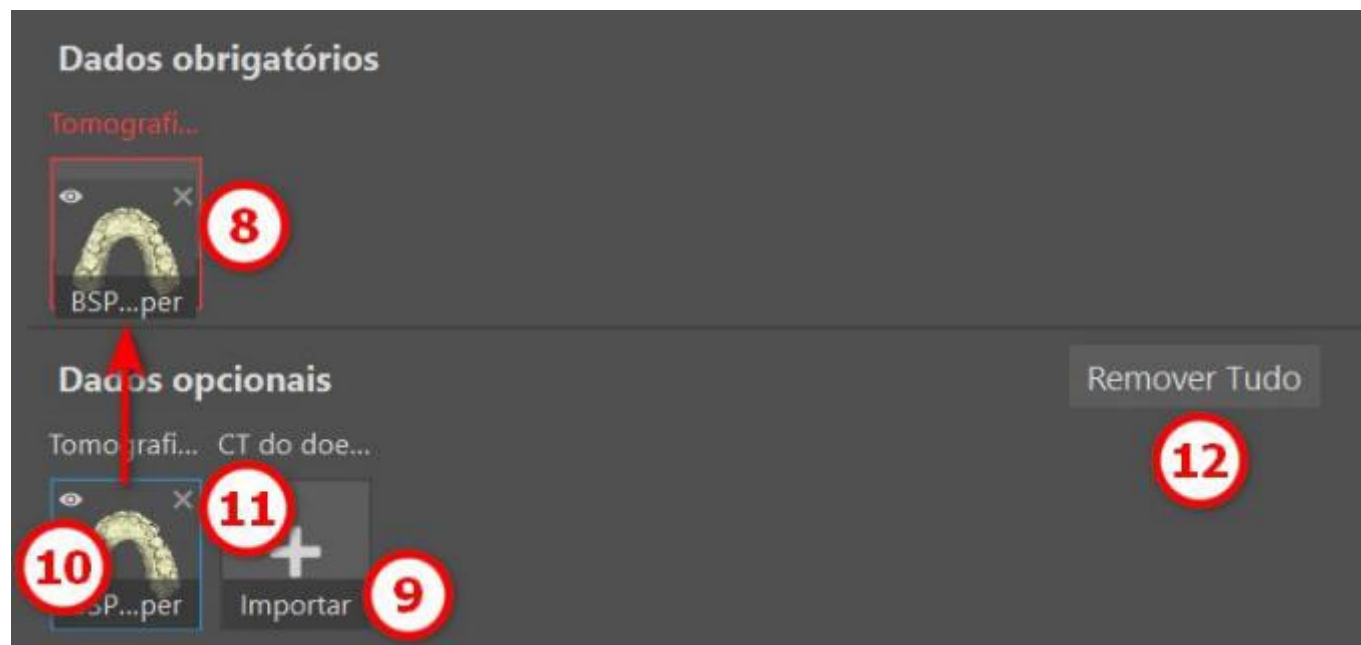

Os dados podem ser movidos entre categorias por meio da função arrastar e soltar (8), renomeados ao clicar no nome do arquivo (9), exibidos ou ocultos na visualização (10) e removidos individualmente usando o ícone de cruz (11) ou em massa clicando no botão "Remover tudo" (12). Uma vez cumpridos todos os requisitos, é possível iniciar o planejamento clicando na seta "Seguinte" (7).


3.5 Gerenciamento de catálogo

O Blue Sky Plan® permite ao usuário gerenciar facilmente vários pacotes de catálogo, incluindo implantes, dentes, braquetes e botões (1). A visão geral do catálogo fornece informações sobre o nome do pacote (2), seu tamanho (3) e o status do pacote (4) (instalado ou para download). Os pacotes podem ser baixados um por um (5) ou em massa (6). Em ambos os casos, o usuário pode acompanhar facilmente o andamento do download a qualquer momento (7). Cada pacote pode ser desinstalado, exceto aqueles instalados por padrão (8). Se necessário, um pacote pode ser importado manualmente (9) selecionando o arquivo apropriado na janela de diálogo.

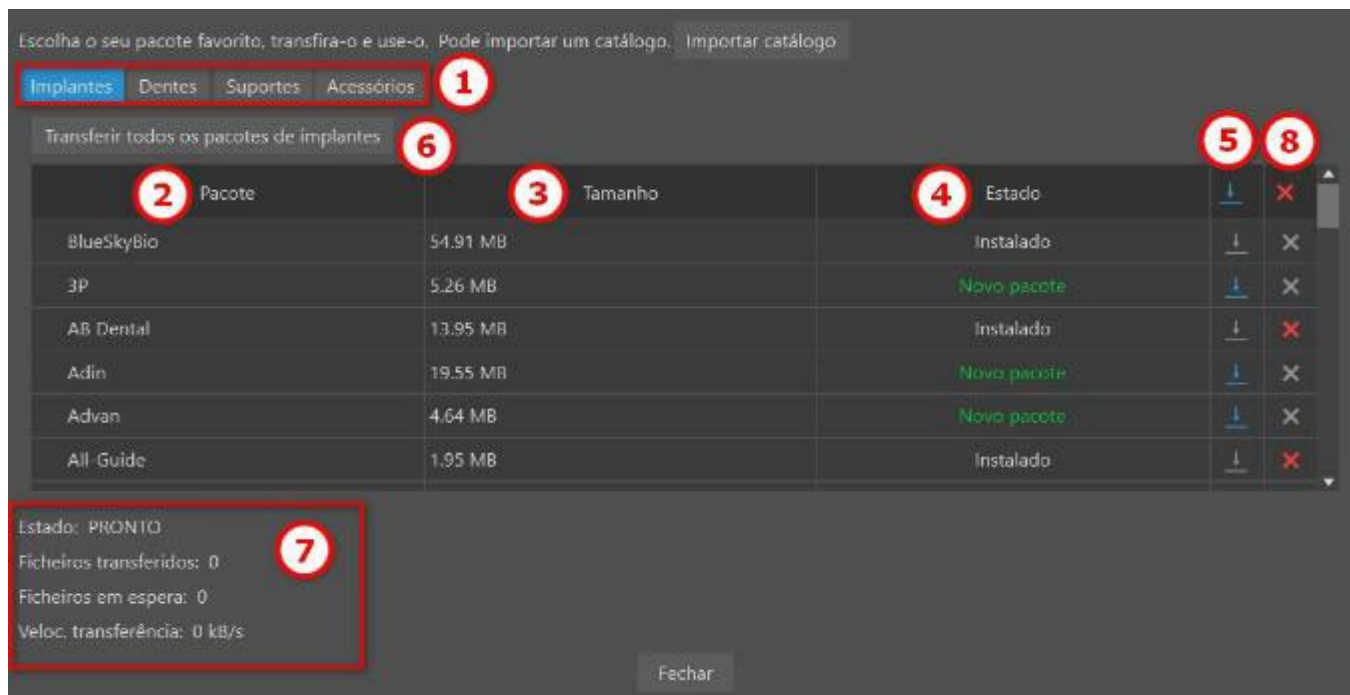


3.6 Gerenciamento de projeto

O Blue Sky Launcher permite ao usuário acessar e gerenciar projetos existentes salvos em qualquer módulo. Cada projeto fornece detalhes importantes, como nome do paciente, última atualização, nome do projeto e tipo de planejamento (1). O recurso de pin (2) torna os projetos facilmente acessíveis e os exibe no lado mais à esquerda.

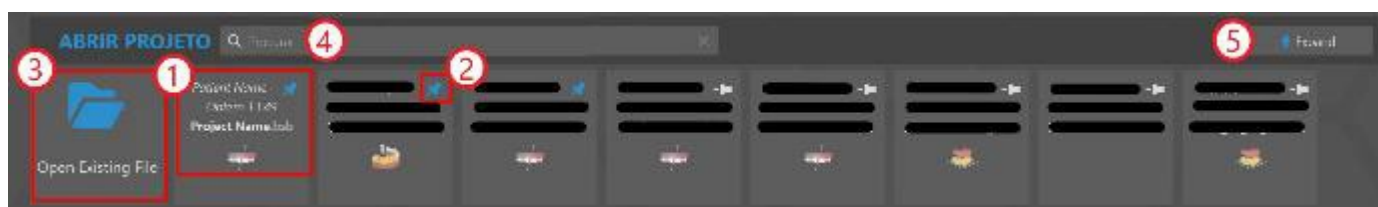

Para abrir um projeto existente, o usuário pode clicar no botão "Abrir arquivo existente" (3) e procurá-lo em uma caixa de diálogo pop-up de arquivo. Caso o usuário queira localizar um projeto com mais precisão, poderá usar a função da barra de pesquisa (4). Clicar no botão "Expandir" (5) revelará projetos adicionais com informações mais detalhadas e uma prévia (6). Com a função de filtro (7), o usuário pode restringir a lista de projetos com base em critérios como o tipo de planejamento, se o projeto está fixado ou se está salvo na nuvem ou localmente. O botão "Limpar filtros" redefine todos os filtros aplicados (8). Por fim, a seção do projeto pode retornar ao seu tamanho original clicando no botão "Recolher" (9).

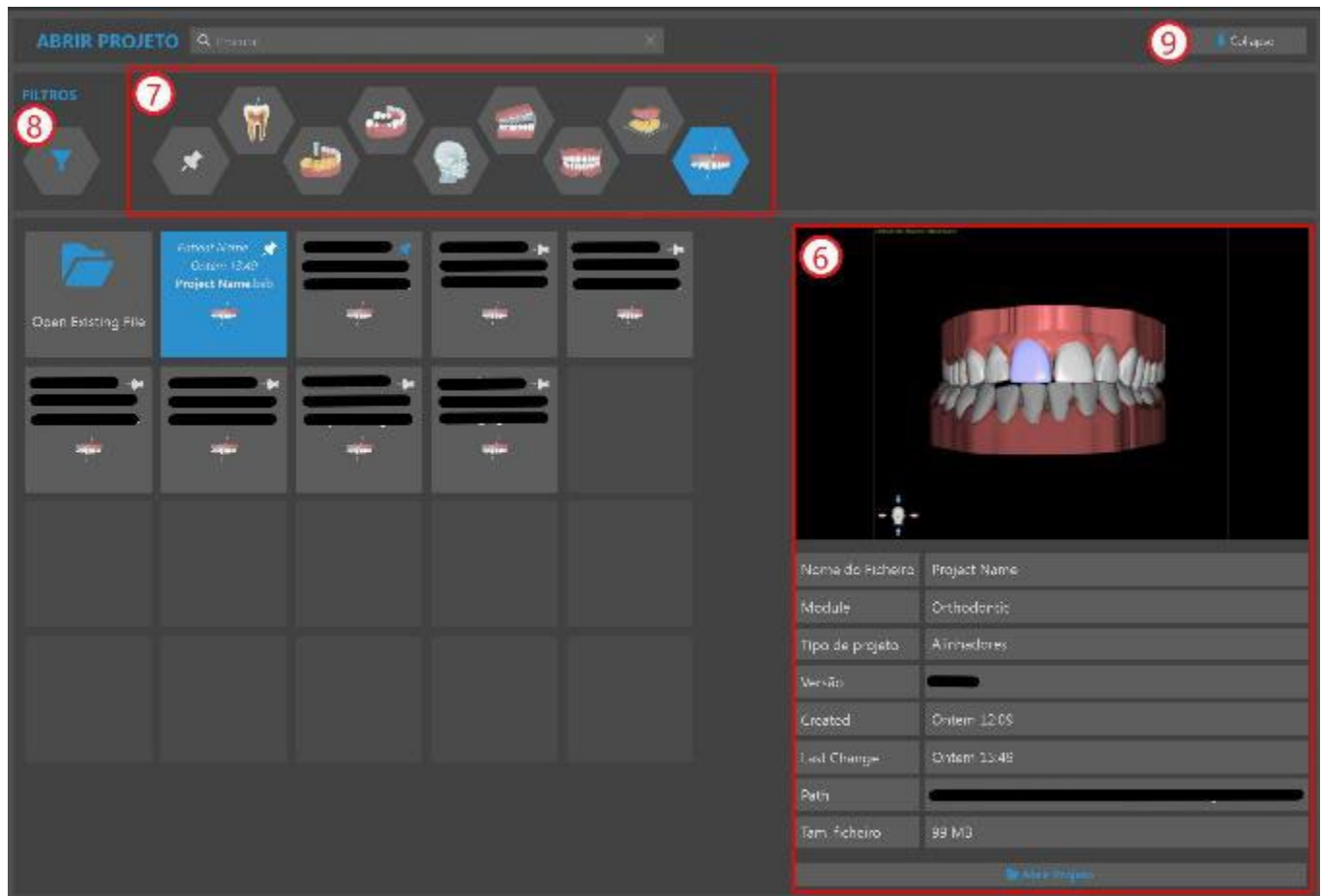

Para abrir um projeto, o usuário pode clicar com o botão esquerdo nele e selecionar o botão "Abrir projeto" na caixa de diálogo pop-up ou, se a seção do projeto estiver expandida, clicar duas vezes no projeto ou usar o botão "Abrir projeto" localizado no lado direito abaixo dos detalhes do projeto.

4 Licenças


O sistema de licenças é baseado no ambiente de conta digital BlueSkyBio (denominado a seguir "conta BSB"), onde uma licença exclusiva é gerada para cada usuário. Todo o processo de criação da licença é feito automaticamente quando o usuário inicia a versão atual do Blue Sky Plan®.

4.1 As principais características das licenças

- Os créditos da conta de um usuário podem ser usados em várias máquinas. As exportações na licença fornecida são compartilhadas entre essas várias máquinas.
- O usuário pode compartilhar sua licença com outro usuário assim que o proprietário da licença permitir o compartilhamento (por meio de aprovação por e-mail).

4.2 Registro de licença

O processo de registro de licença é muito simples e intuitivo. Na primeira inicialização do Blue Sky Plan®, o usuário é redirecionado para a página de login da conta BSB no navegador.

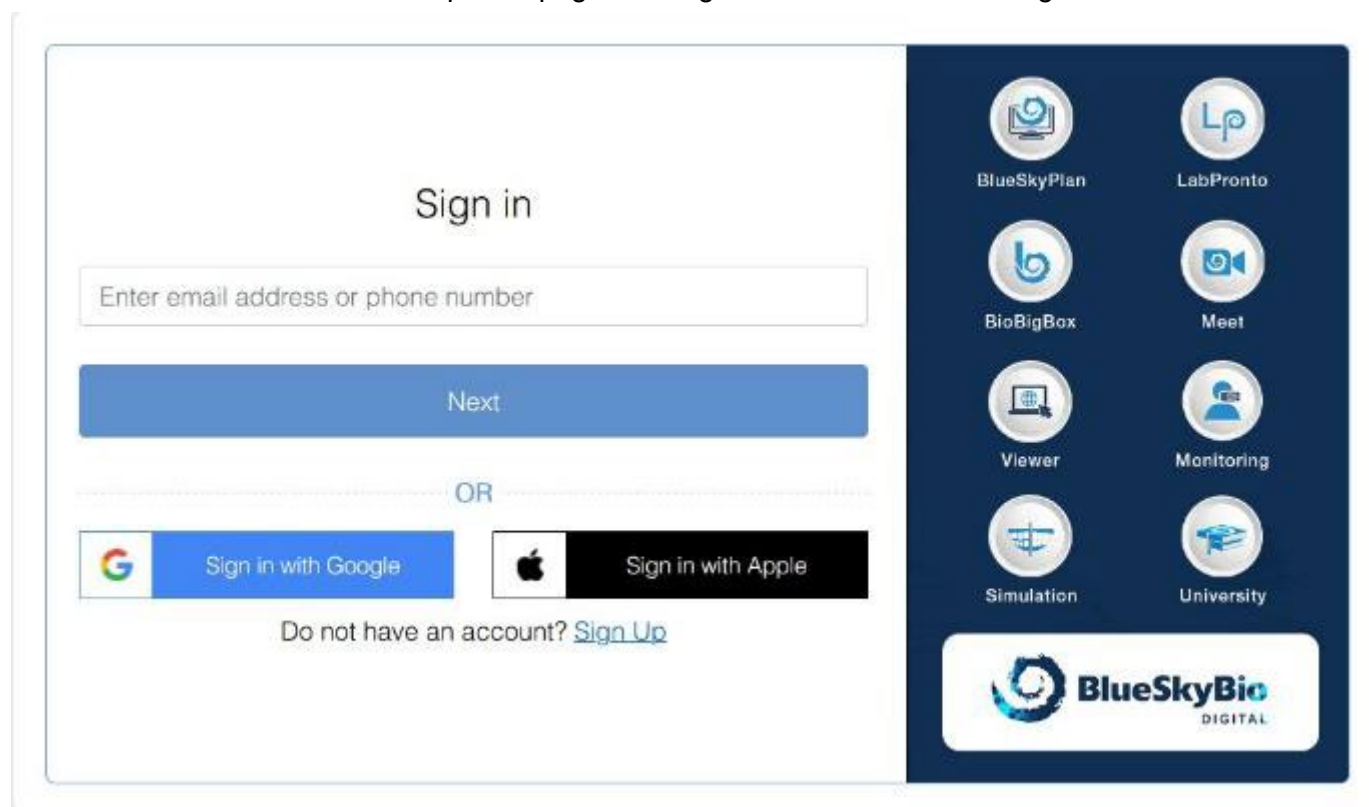

Se você ainda não tem uma conta BSB, clique no botão "Registrar-se" e preencha todos os campos necessários. Também é possível criar uma conta BSB e fazer login usando uma conta Google ou Apple.

Create your Blue Sky Digital Account

 Continue with Google
  Continue with Apple

OR

First Name *
 Last Name *

Email *

Password
 Confirm Password

Password must be at least eight characters in length. It must contain at least one uppercase, lowercase, number and a special character.

Select
 Cell Phone

☐ I am human
 

[Sign In Instead](#)


BlueSkyBio
DIGITAL

 BlueSkyPlan
  LabPronto

 BioBigBox
  Meet

 Viewer
  Monitoring

 Simulation
  University

Após criar a conta BSB, um código de verificação é enviado para o número de telefone registrado.

Sign in

Please type the verification code sent to + 

Verification Code

☐ Remember me

[Additional Sign In Options](#)


BlueSkyBio
DIGITAL

 BlueSkyPlan
  LabPronto

 BioBigBox
  Meet

 Viewer
  Monitoring

 Simulation
  University

Após a inserção do código de verificação, o processo de registro é concluído com a confirmação do e-mail enviado para o endereço de e-mail do usuário.



Welcome to Blue Sky Bio Digital Solutions!

Please confirm your account by pressing the button below.

Confirm



Copyright 2024 Blue Sky Bio. All Rights Reserved.


A conclusão do processo de registro permite que o usuário acesse o aplicativo Blue Sky Plan®. O usuário registrado atualmente é exibido no canto superior direito do Blue Sky Launcher.



Se o usuário estiver desconectado do Blue Sky Plan®, o aplicativo o redirecionará automaticamente para a página de login da conta BSB, onde ele poderá fazer login com seu e-mail e senha (ou, alternativamente, pelo código de verificação enviado para seu número de telefone). Após fazer login na conta BSB, o usuário também estará conectado ao aplicativo BSB.

4.3 Opções de conta digital BlueSkyBio

No canto superior direito do Blue Sky Launcher, o usuário pode escolher entre diferentes opções vinculadas à sua conta BSB e serviços on-line em geral.

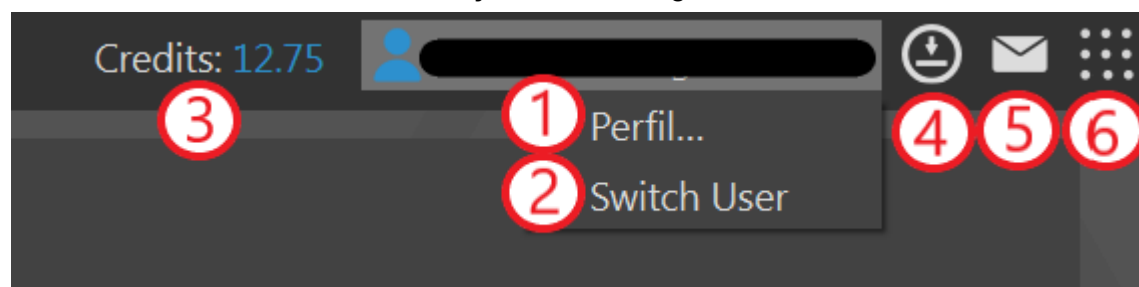


Para verificar e gerenciar o perfil da conta BSB no navegador, abra o menu de contexto clicando com o botão esquerdo na conta do usuário e selecione "Perfil..." (1). Se necessário, o usuário pode sair do Blue Sky Plan® e permitir que outro usuário faça login clicando em "Trocar usuário" (2), o que abrirá automaticamente a página de login da conta BSB no navegador.

Além disso, o usuário pode comprar créditos (3), verificar se o aplicativo está atualizado (4), ler notificações (5) e aderir a qualquer serviço on-line oferecido pela Blue Sky Bio (6).

4.4 Licenças em Preferências

O usuário pode verificar sua licença em *Ferramentas > Preferências > Conta BlueSkyBio*.

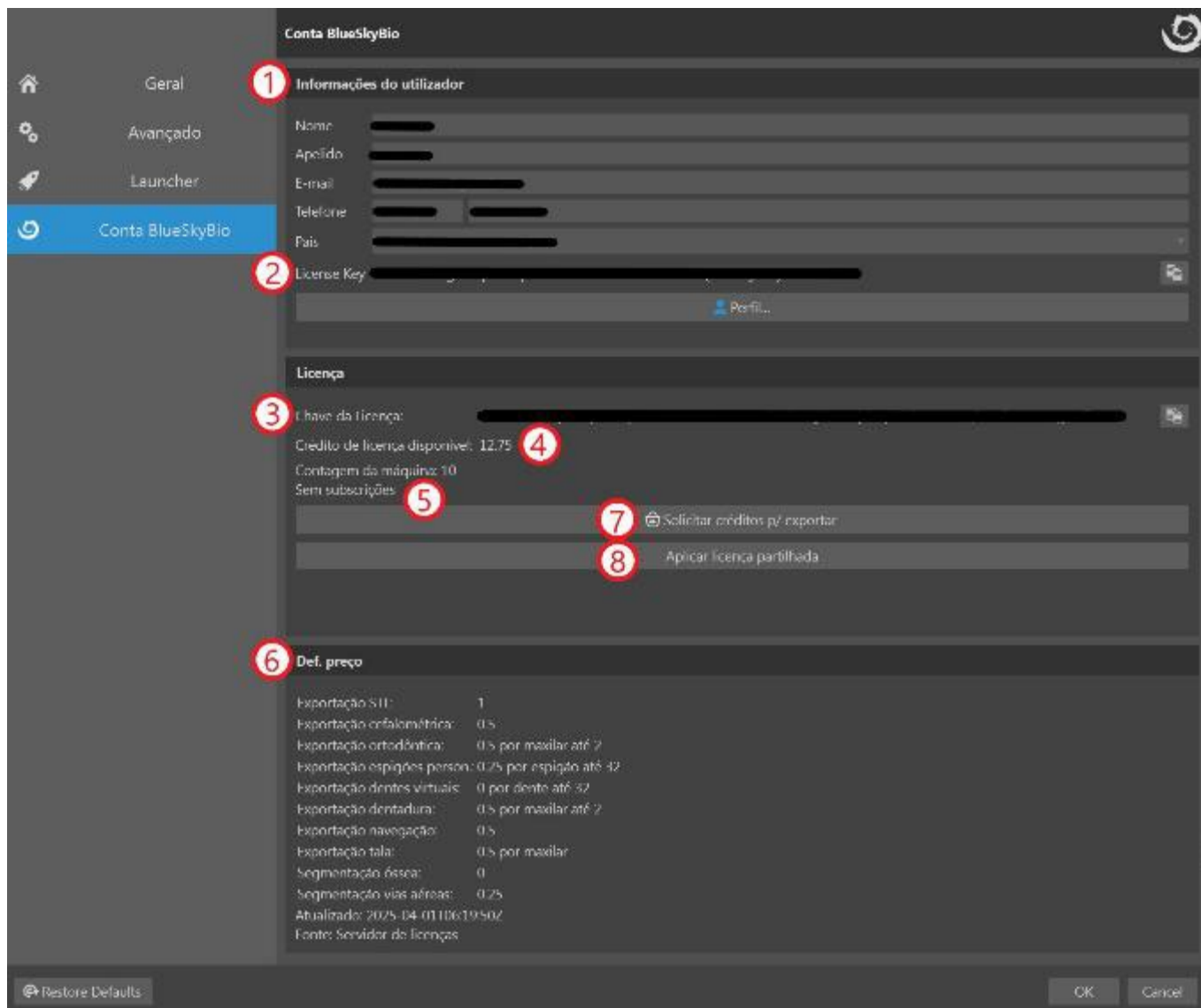


Em "Informações do Usuário" (1), o usuário pode verificar os dados obrigatórios, registrados em sua licença. Nesta seção, o usuário também pode visualizar sua própria chave de licença (privada) (2), enquanto na seção "Licença" o usuário pode visualizar a licença que está sendo usada no momento (3). Esta licença pode ser própria (privada) ou uma licença compartilhada com outro usuário. Se for uma licença compartilhada, ambas as chaves de licença (2)(3) serão diferentes. "Crédito de licença disponível" (4) mostra o crédito restante na licença usada atualmente. O usuário também tem uma visão geral de todas as assinaturas ativas (5). O preço (6) mostra o custo de diferentes tipos de exportações. O usuário pode comprar créditos ou assinaturas clicando no botão "Solicitar créditos de exportação" (7). O botão "Aplicar licença compartilhada" ou "Desvincular licença compartilhada" (8) alterna entre uma licença privada e uma licença compartilhada.


4.5 Licenças compartilhadas

Os usuários podem usar não apenas suas próprias licenças (privadas), mas também as licenças de outros usuários. Essas licenças são chamadas de "licenças compartilhadas".

Em *Ferramentas > Preferências > Conta BlueSkyBio*, clique em "Aplicar licença compartilhada".

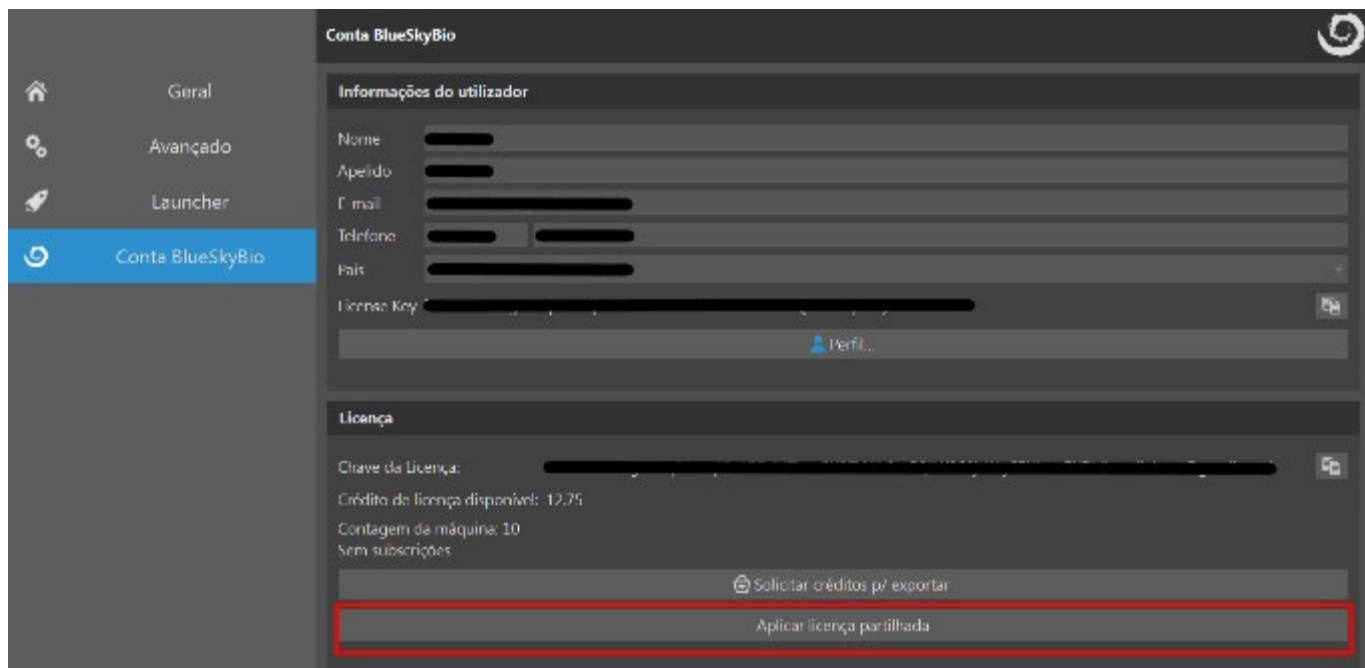

Digite a chave de licença do outro usuário. Agora você é informado de que a aprovação do proprietário é necessária. Observe que ambos os usuários devem compartilhar o mesmo país (*Código do país*), caso contrário, a licença de compartilhamento não será possível.

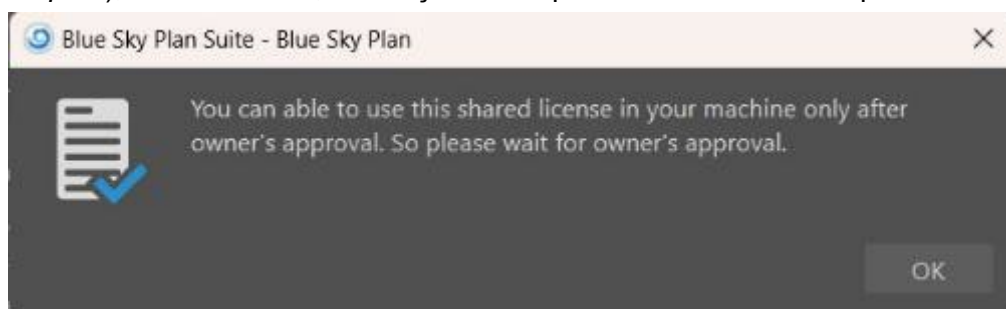

Enquanto isso, o proprietário da licença recebe um e-mail com a solicitação da licença.

License Request!

Dear **Josef**,

New computer "xxxx-xxxx-xxxx [REDACTED]" is requesting your approval to use your existing license. If it is you or someone else with whom you shared your license then please approve it.

Name: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Approve


Sincerely,
The BlueSkyBio Digital Team.

A aprovação deste e-mail permitirá que você use a licença do proprietário em um computador com um código de máquina exclusivo.


**BlueSkyPlan.com**[Purchase Exports](#)[Manage Credit Cards](#)[Login](#)[Signup](#)[Czech Republic](#)

Request for sharing your license on computer xxxx-xxxx-xxxx [REDACTED] is approved.

Quando o proprietário da licença aprovar a solicitação, o usuário que enviou a solicitação poderá clicar em “Aplicar licença compartilhada” novamente e confirmar a chave de licença compartilhada. A chave compartilhada foi aplicada com sucesso e está pronta para uso.

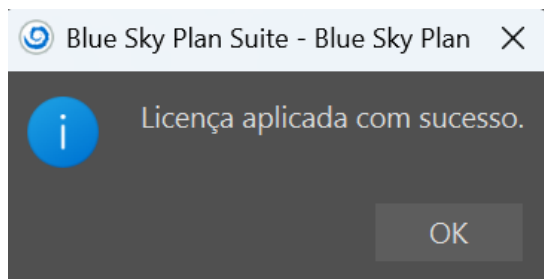

A partir de agora, todos os créditos serão deduzidos da licença compartilhada. O usuário pode retornar à sua licença privada a qualquer momento clicando em “Desconectar licença compartilhada”.

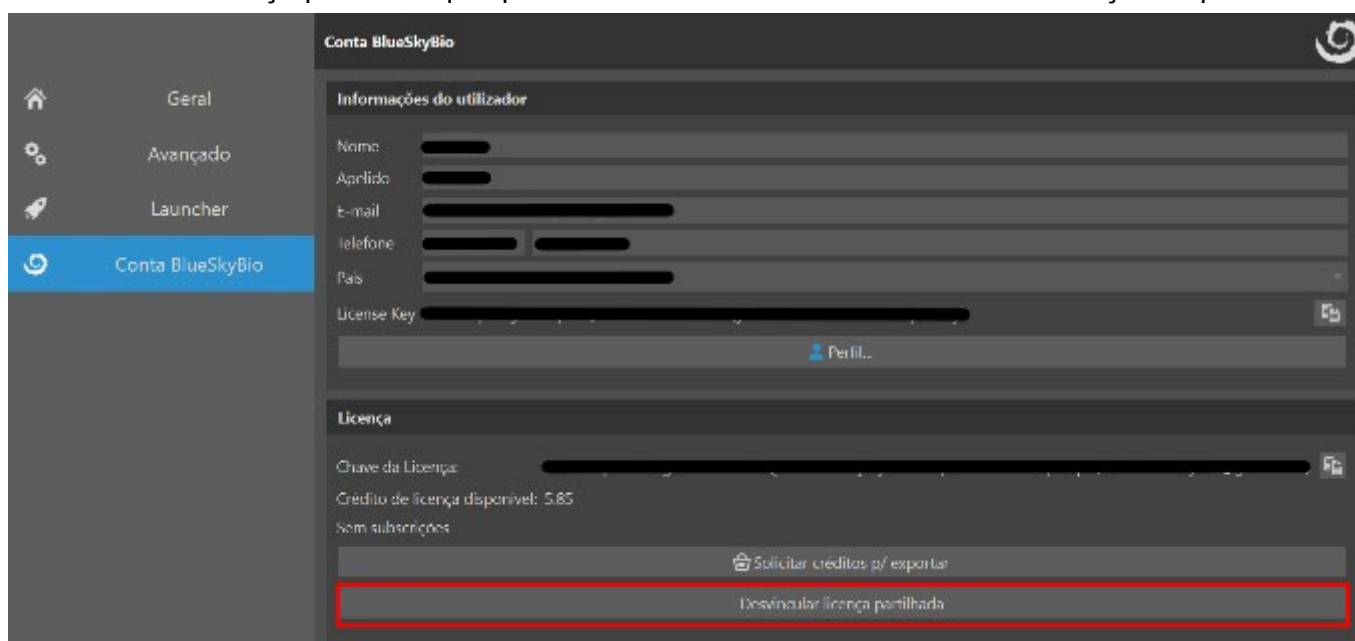

4.6 Comprar exportação

Se o usuário estiver conectado ao Blue Sky Plan®, ele poderá comprar créditos ou assinaturas necessárias para vários tipos de exportação.

O usuário pode comprar créditos clicando em "Créditos" no canto superior direito do Blue Sky Launcher ou navegando até *Ferramentas > Preferências > Conta BlueSkyBio* e clicando em "Solicitar créditos de exportação".

O usuário é redirecionado para a página "Comprar Exportações", onde pode selecionar o tipo de pacote desejado e continuar para a finalização da compra.

Select Package Type

	Package Type	Export Credits	Free Bonus Credits	Price
☒	STLE5	5	1	
☐	STLE10	10	2	
☐	STLE50	50	3	
☐	STLE100	100	5	
☐	STLE200	200	10	
☐	STLE300	300	15	
☐	STLE500	500	25	
☐	STLE1000	950	50	

Proceed to Checkout

O usuário pode escolher entre vários métodos de pagamento. Após a conclusão do processo de pedido, os créditos de exportação são adicionados à licença do usuário.



Credits Have Been Added to License Number : xxxx-xxxx-xxxx-
You now have 7 Credits Remaining.

Licença

Chave da Licença:

Crédito de licença disponível: 12.75

Contagem da máquina: 10

Sem subscrições

Solicitar créditos p/ exportar

Aplicar licença partilhada




5 Carregando imagens de TC e TCTB dos pacientes no Blue Sky Plan

O Blue Sky Plan® pode carregar imagens DICOM não compactadas (exportadas por todos os scanners de TC) no software. O Blue Sky Plan é um "auto processador", permitindo ao usuário importar diretamente as imagens DICOM em algumas etapas fáceis. Um protocolo de digitalização completo está disponível no site da Blue Sky Bio e pode ser enviado ao local de digitalização.

5.1 Selecionando a localização das imagens DICOM

Para importar as imagens TC ou TCFC dos pacientes, siga esses passos:

1. Selecione o tipo de planejamento "Planejamento de implantes e guias cirúrgicas" e, em seguida, "Plano cirúrgico com TC e escaneamento óptico".
2. Uma nova janela irá aparecer.

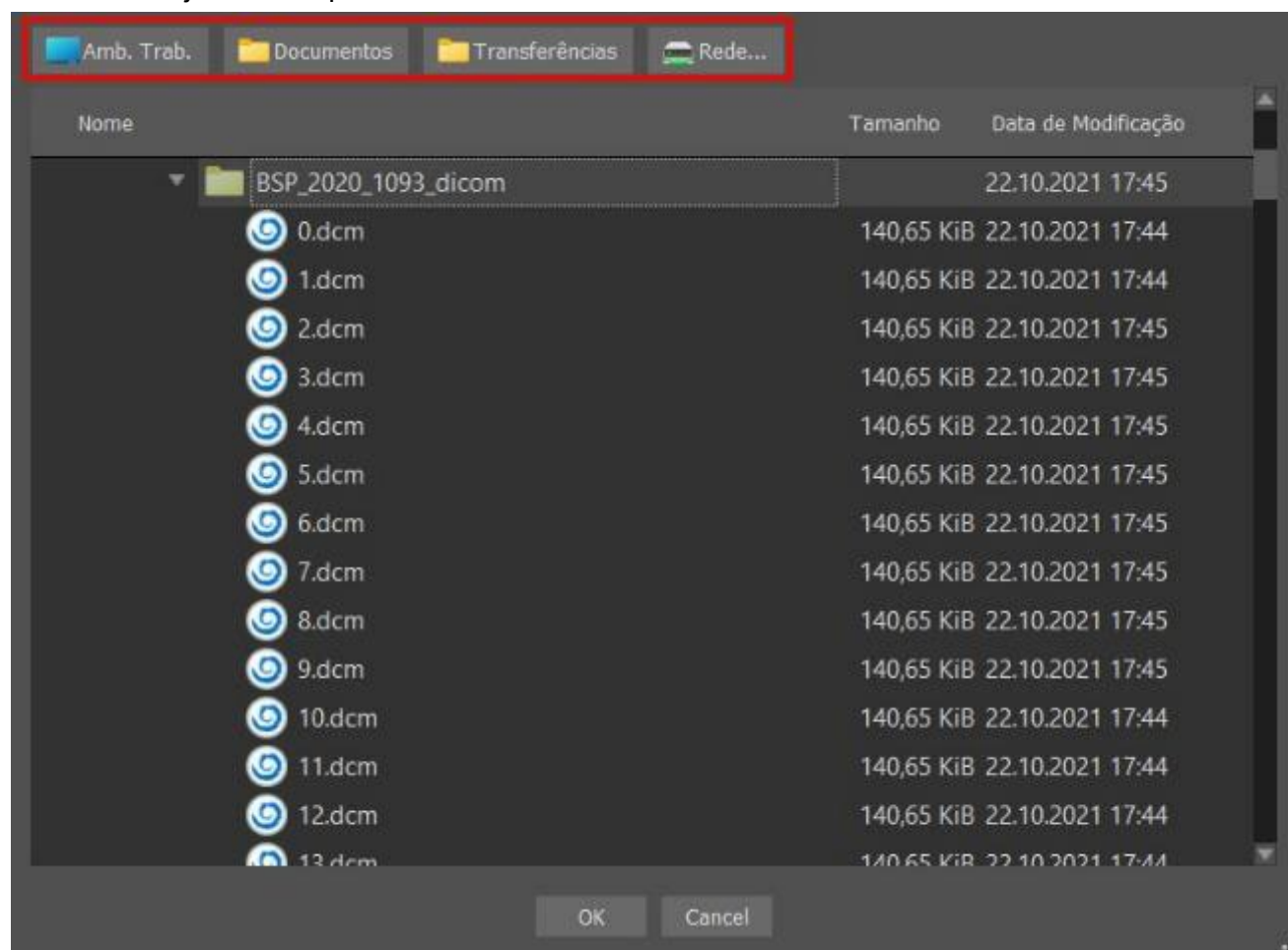


Observe que existem vários botões de atalho que aparecem na parte superior da janela. Esses botões permitem uma navegação rápida para a pasta que contém as imagens DICOM.

Selecione o diretório que contém as imagens DICOM (você também pode carregar um arquivo zipado com as imagens DICOM) e clique em OK. As imagens devem ser armazenadas no formato DICOM pelo serviço de radiologia para que possam ser lidas no Blue Sky Plan®.

5.2 Selecionando as séries

Uma lista das séries disponíveis que podem ser carregadas será exibida (1). Idealmente, cada série deve ser salva em uma pasta separada e apenas uma série será exibida.

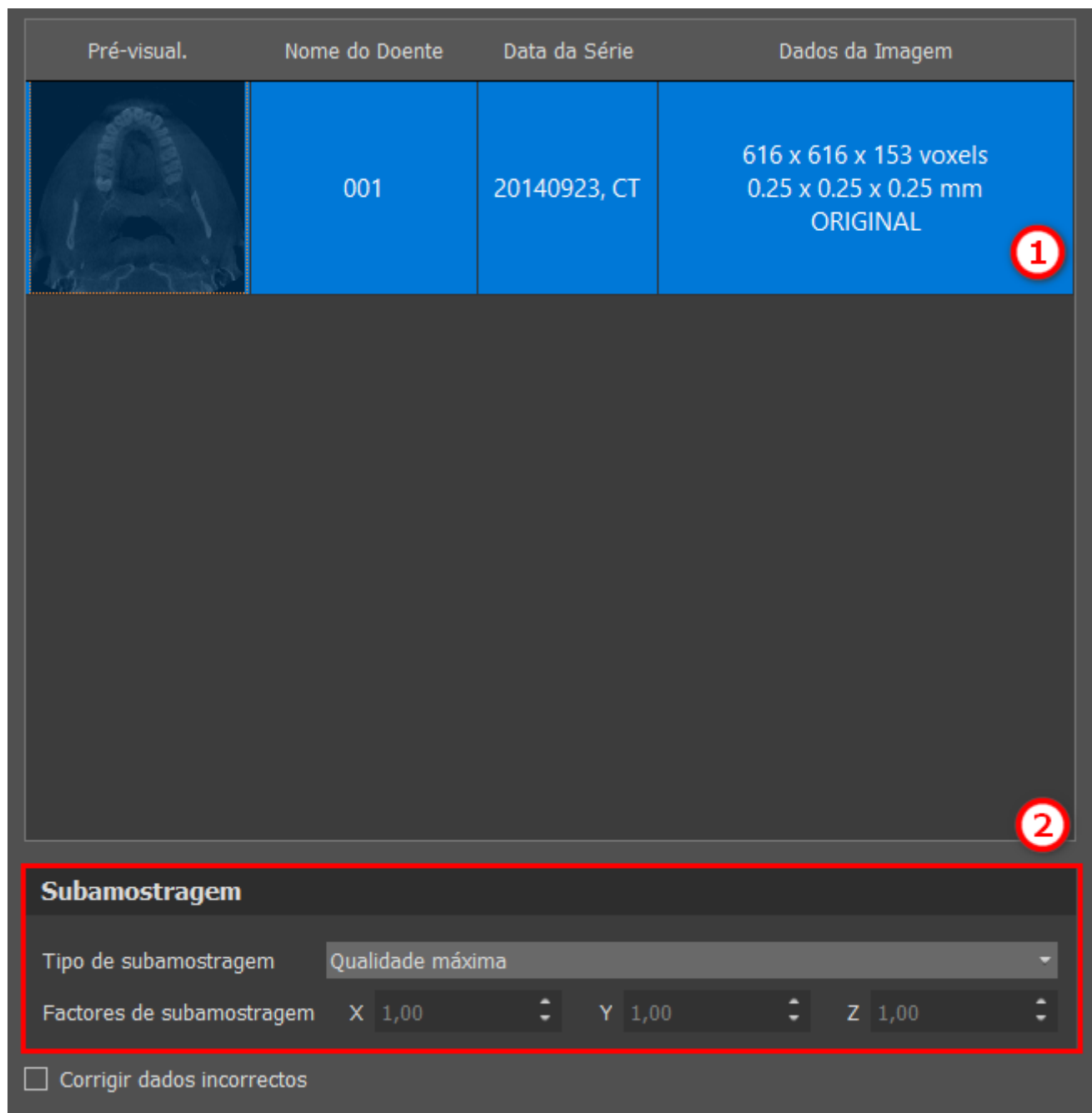


5.3 Melhorando o desempenho

No caso de o computador não possuir memória de sistema ou de vídeo suficiente e, possivelmente, também se a placa de vídeo não for suficientemente potente, o programa possibilita reduzir (reduzir a amostra) os dados de entrada; o usuário pode definir isso manualmente para cada eixo ou escolher uma das configurações disponíveis (2).

O software compensará automaticamente as fatias "ignoradas" e a qualidade do plano de tratamento e do modelo cirúrgico não será comprometida.

5.4 Alinhar a digitalização e definir o intervalo de fatias

Nesta etapa, você alinha os dados volumétricos e delimitar a área de interesse nos dados. É possível cortar os dados em todas as direções, arrastando as linhas amarelas (1) ou definindo diretamente a dimensão da fatia para os eixos individuais (2). O modo de exibição de dados pode ser alterado selecionando “Modo de Imagem” (3).

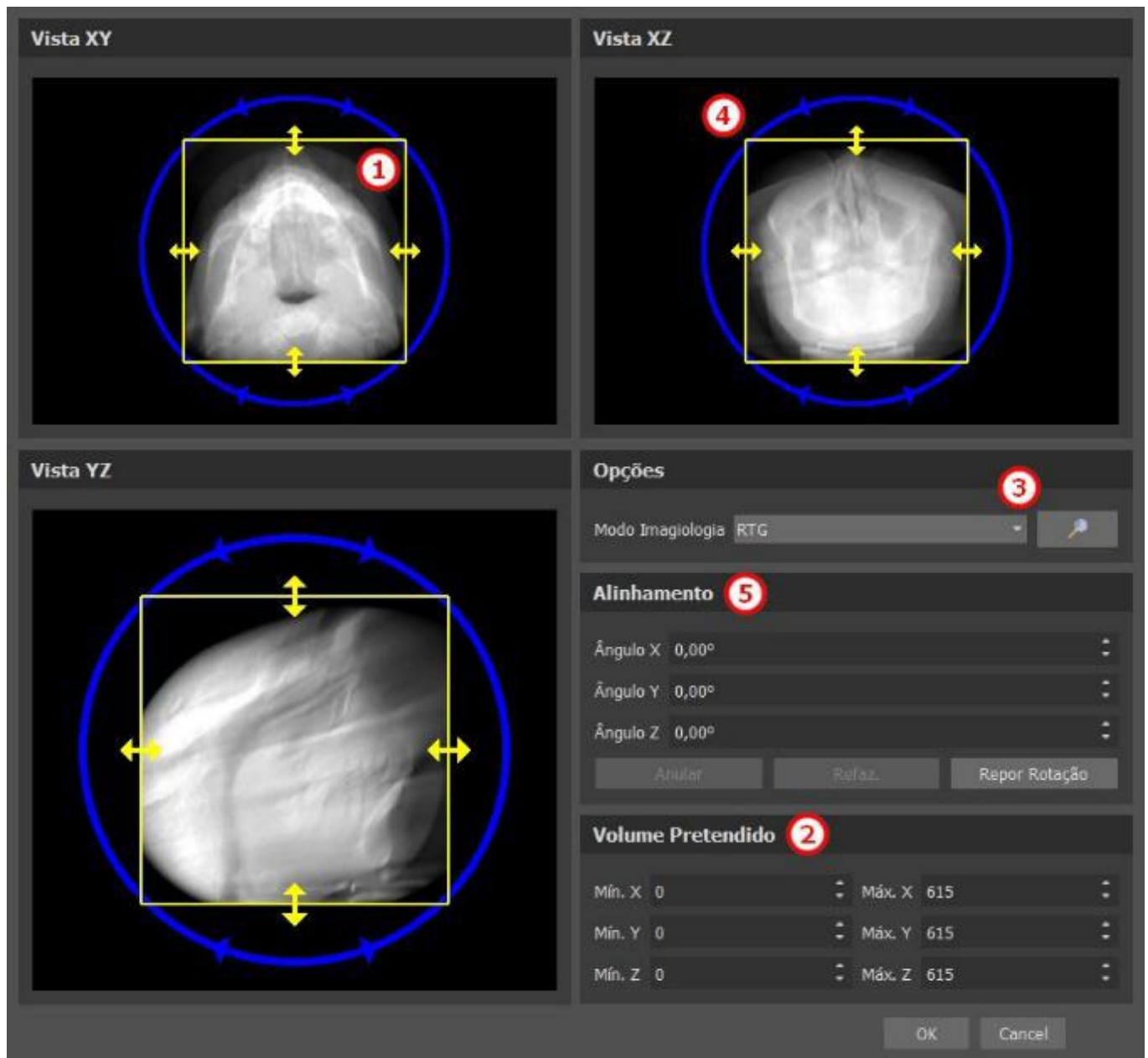


Os dados podem ser alinhados usando os círculos azuis (4); também é possível inserir valores para rotação em torno dos eixos de coordenadas individuais manualmente (5). A transformação executada também se aplica corretamente à importação de dados.

Dado os requisitos significativos de memória e desempenho para visualizar dados médicos em 3D, é aconselhável cortar os dados de entrada na área de interesse real; isso permite que o programa funcione muito mais suavemente.


5.5 Importar superfícies adicionais

Depois de carregar os dados de TC, o usuário pode importar superfícies adicionais. Após escolher um, selecione o diretório que contém o modelo ou a digitalização necessária.

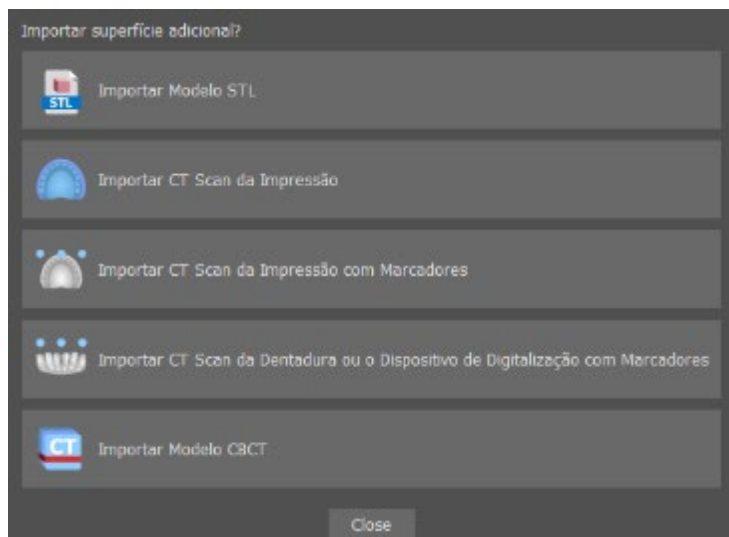

5.6 Posicionando a curva panorâmica

A curva panorâmica (o meio das três ou cinco curvas que aparecem na vista axial) é gerada automaticamente após a importação dos dados de TC. É possível ajustá-la manualmente.

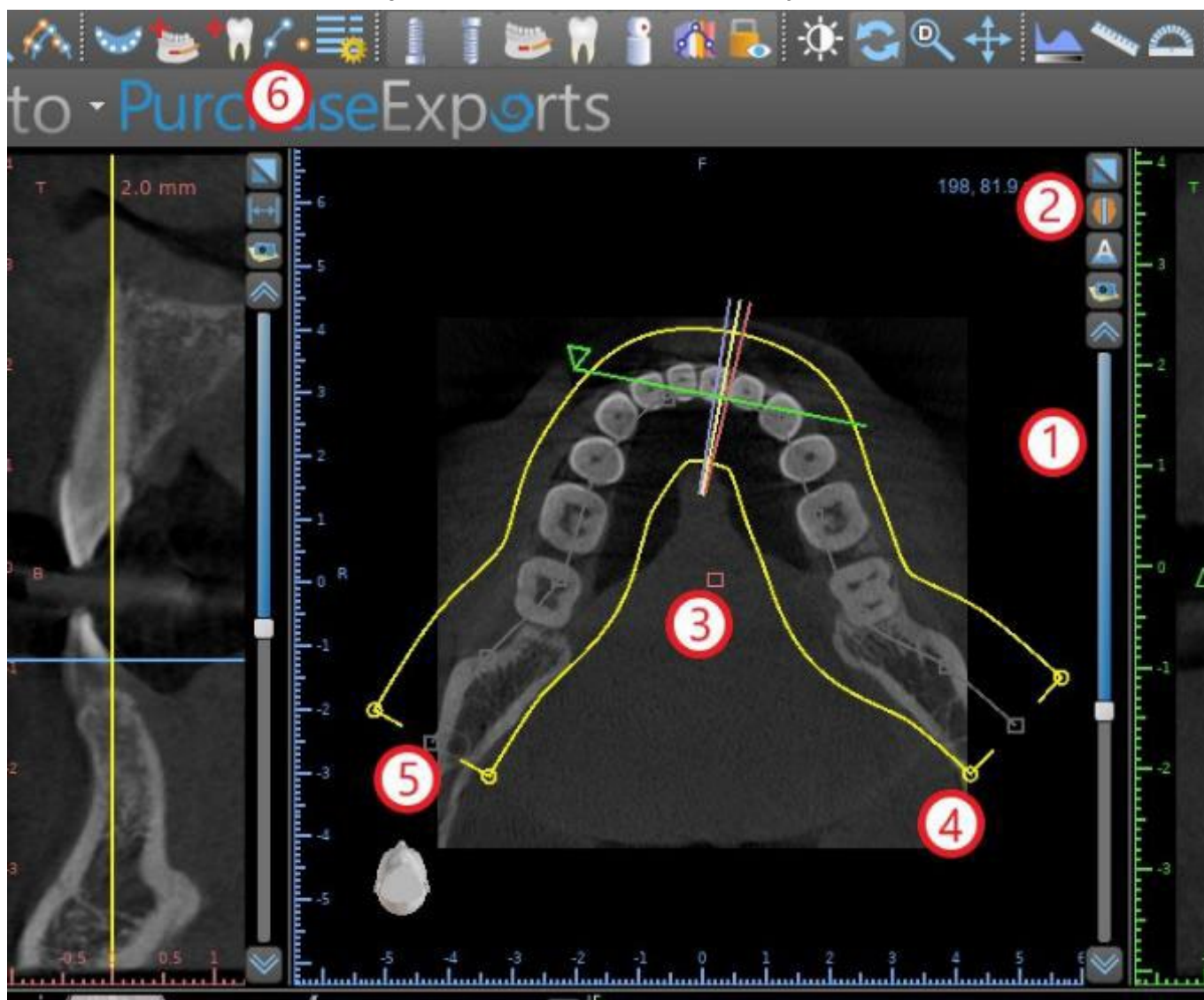

Isso pode ser feito usando o controle deslizante (1) para identificar uma fatia axial que mostra o arco / rebordo completo da mandíbula do paciente. Se necessário, é possível alternar o modo de exibição da fatia axial para uma exibição de raio-X clicando no botão (2).


A curva como um todo pode ser alterada arrastando a alavanca vermelha (3) e a largura da curva pode ser ajustada arrastando qualquer alavanca amarela (4). Arrastar a alavanca amarela dentro da curva vai diminuir/aumentar a curva. Arrastar qualquer uma das alavancas cinzas (5) ao longo da curva pode alinhar a curva na posição desejada.

Como alternativa, toda a curva pode ser redesenhada pressionando o botão “Desenhar curva dental” (6). O usuário pode clicar com o botão esquerdo periodicamente enquanto o mouse se move pelo arco (da esquerda para a direita), colocando pontos. O software conectará os pontos para desenhar a curva panorâmica. Quando a curva estiver completa, basta clicar duas vezes ou clicar no botão “Desenhar curva dental” (3) novamente, ou pressionar “Esc”.

6 Interface do Software

O Blue Sky Plan® permite a interação perfeita entre as várias janelas, exibindo as imagens axial, sagital, coronal, transversal, tangencial, panorâmica e 3D.

Dependendo do se pretendido, é possível selecionar a janela ativa para funções multiplanares (axial, sagital, coronal e 3D) ou funções de implante (transversal, tangencial, axial, panorâmica e 3D). O usuário pode alternar entre diferentes perspectivas ("Visão > Perspectivas" (1), ou clicando no botão na barra de ferramentas de ícones (2)). Em qualquer perspectiva, é possível adicionar qualquer janela de visualização (na barra de menu "Visão> Visões" (3)).

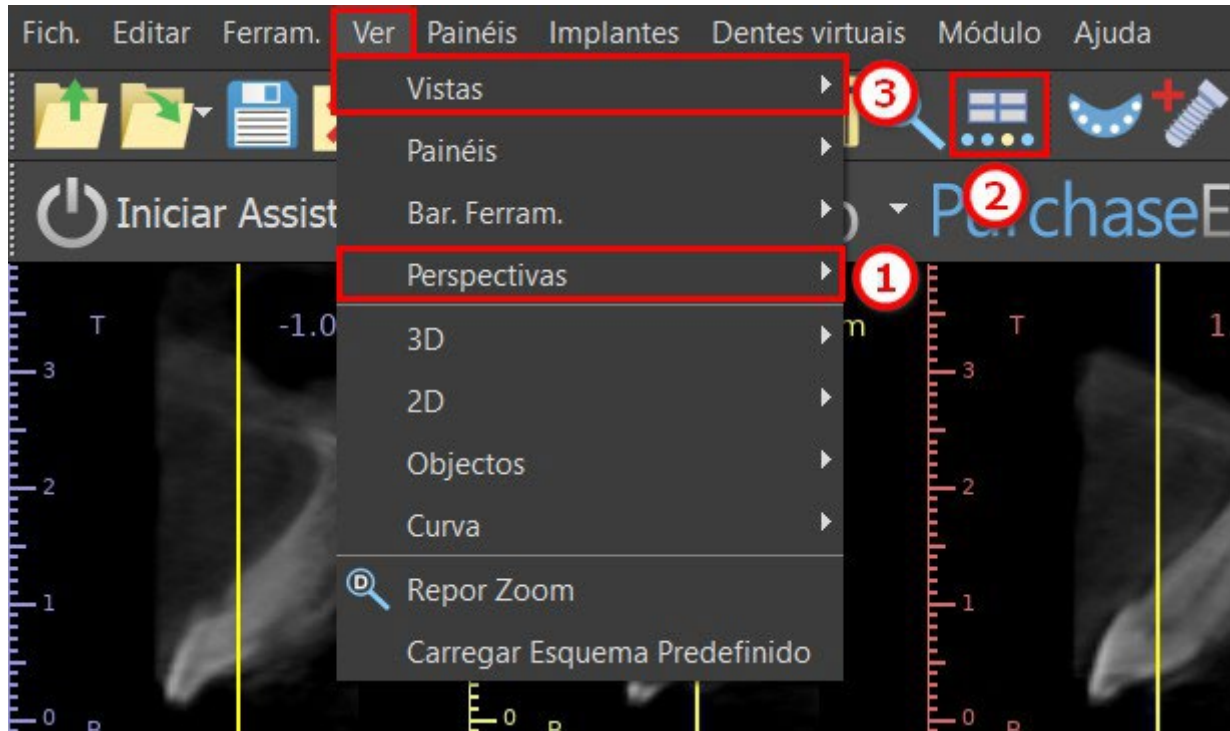

As informações e ferramentas a seguir podem ser visualizadas na maioria das janelas ativas:

- Cores individuais para cada seção transversal de imagens,
- Indicadores mostrando a posição atual das imagens,
- etiqueta da imagem
- réguas

6.1 Telas e visões


A tela de implante permite a visualização das imagens transversais, tangenciais, axiais, panorâmicas e 3D. Todas as ferramentas de planejamento podem ser acessadas através da barra de menu (1) abaixo. A barra de ferramentas de ícones e a barra de ferramentas de imagens panorâmicas (2 e 3, respectivamente, na ilustração a seguir) mostram as ferramentas mais usadas.



6.1.1 Janela Axial

As imagens axiais são fatias horizontais do volume e podem ser vistas na exibição superior intermediária (ou na ilustração a seguir) no aplicativo (1). Eles estão marcados em azul. Todas as outras imagens são geradas a partir da sequência de imagens axiais.

Movendo o controle deslizante axial (2), é possível visualizar a sequência completa de imagens axiais. A linha indicadora da fatia axial é exibida nas imagens transversais, panorâmicas e 3D (3).

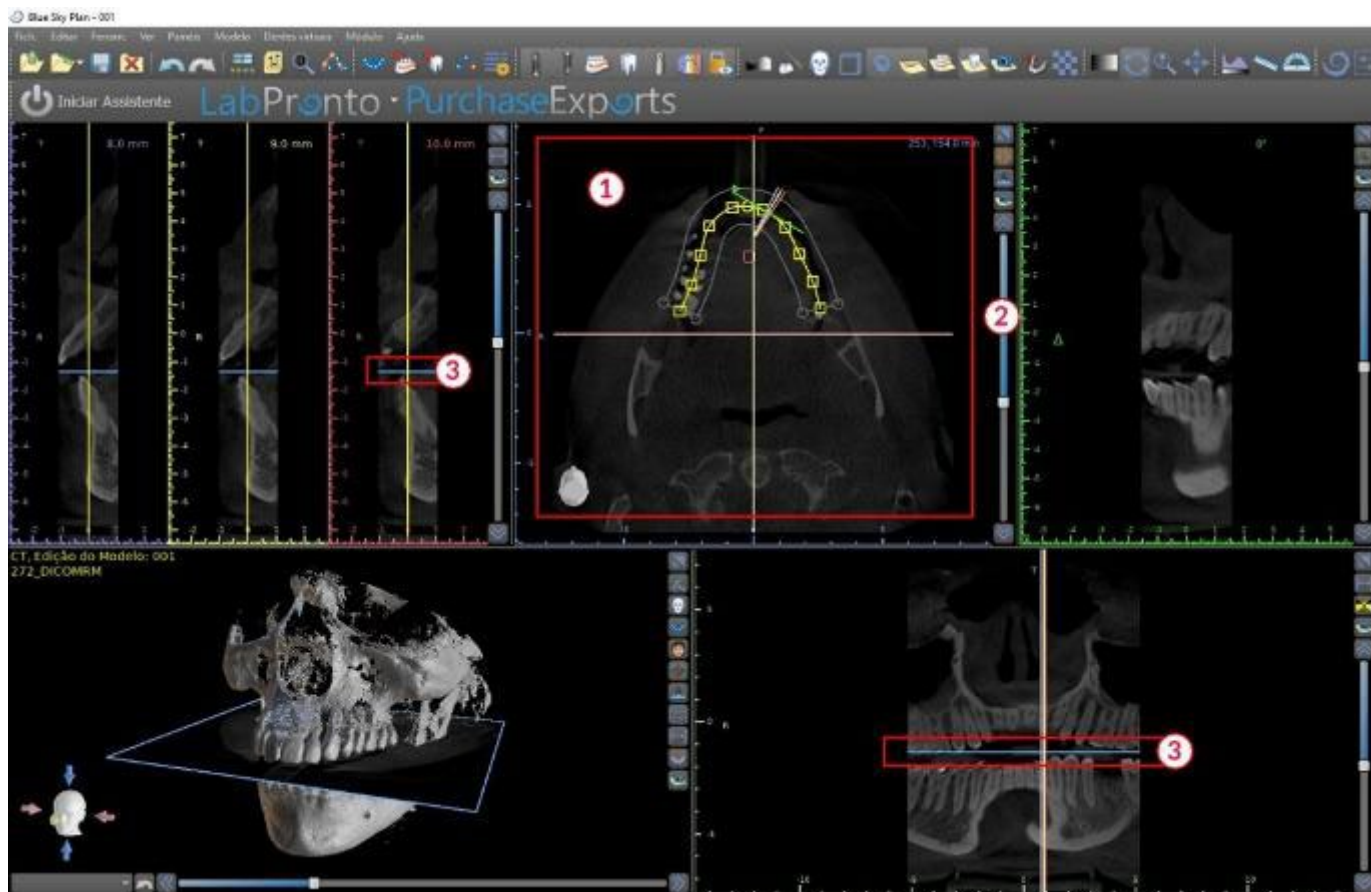


6.1.2 Janela Transversal

A vista das seções transversais exibe fatias verticais ao redor do rebordo do paciente. À medida que o usuário se move pelas fatias usando controle deslizante transversal (1), as linhas multicoloridas correspondentes nas vistas axial e panorâmica (2 e 3) se movem de acordo, identificando a localização das cinco (três) imagens exibidas nas vistas transversais.


Essas imagens são usadas para avaliar a altura e a espessura do osso no planejamento. Quando os implantes são colocados, eles geralmente são colocados em uma das imagens na vista em seção transversal.

A distância que separa as imagens pode ser modificada clicando no ícone  (4) e um novo valor pode ser selecionado no menu suspenso. Por padrão, a distância entre as imagens é definida como 1 mm.

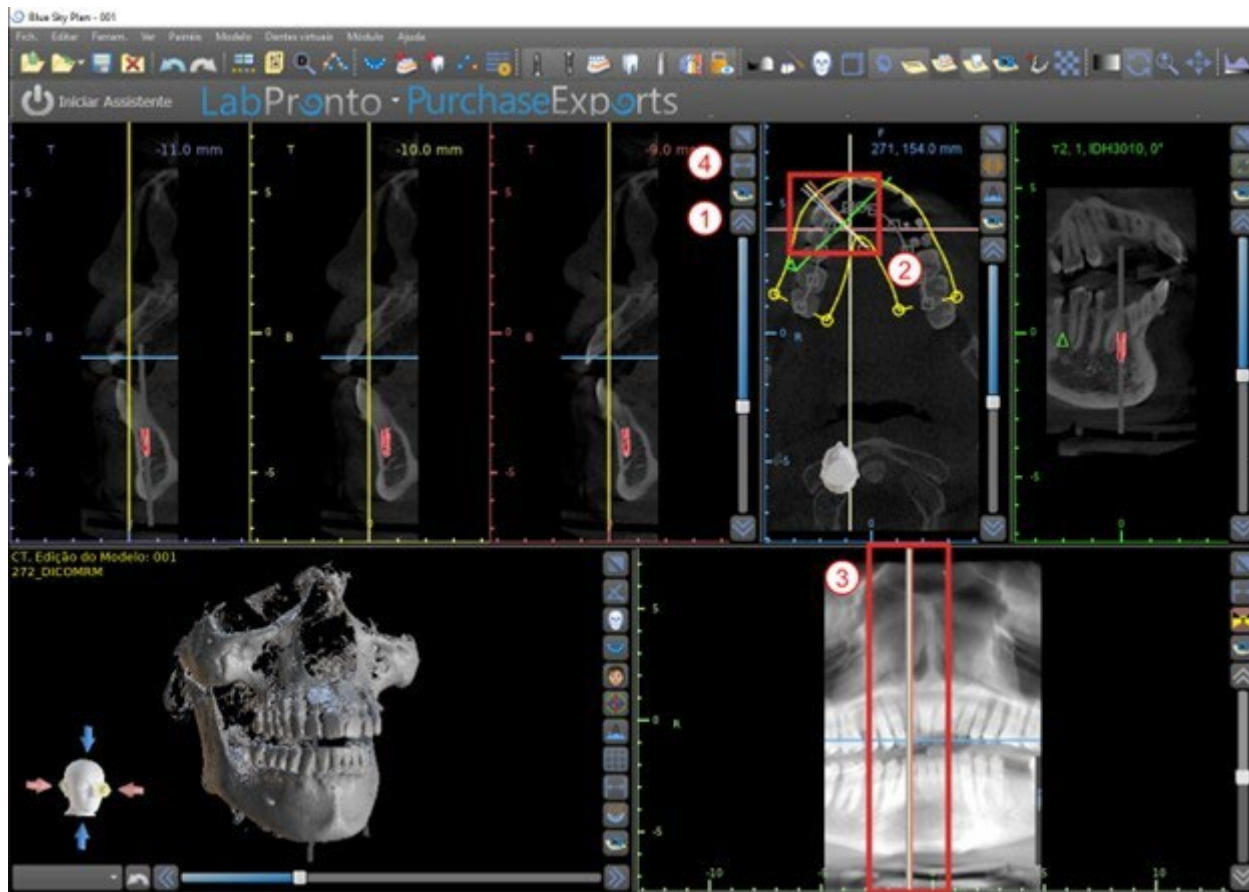

6.1.3 Janela Panorâmica

A imagem panorâmica está localizada na janela inferior direita do aplicativo (1) e é marcada com verde claro.

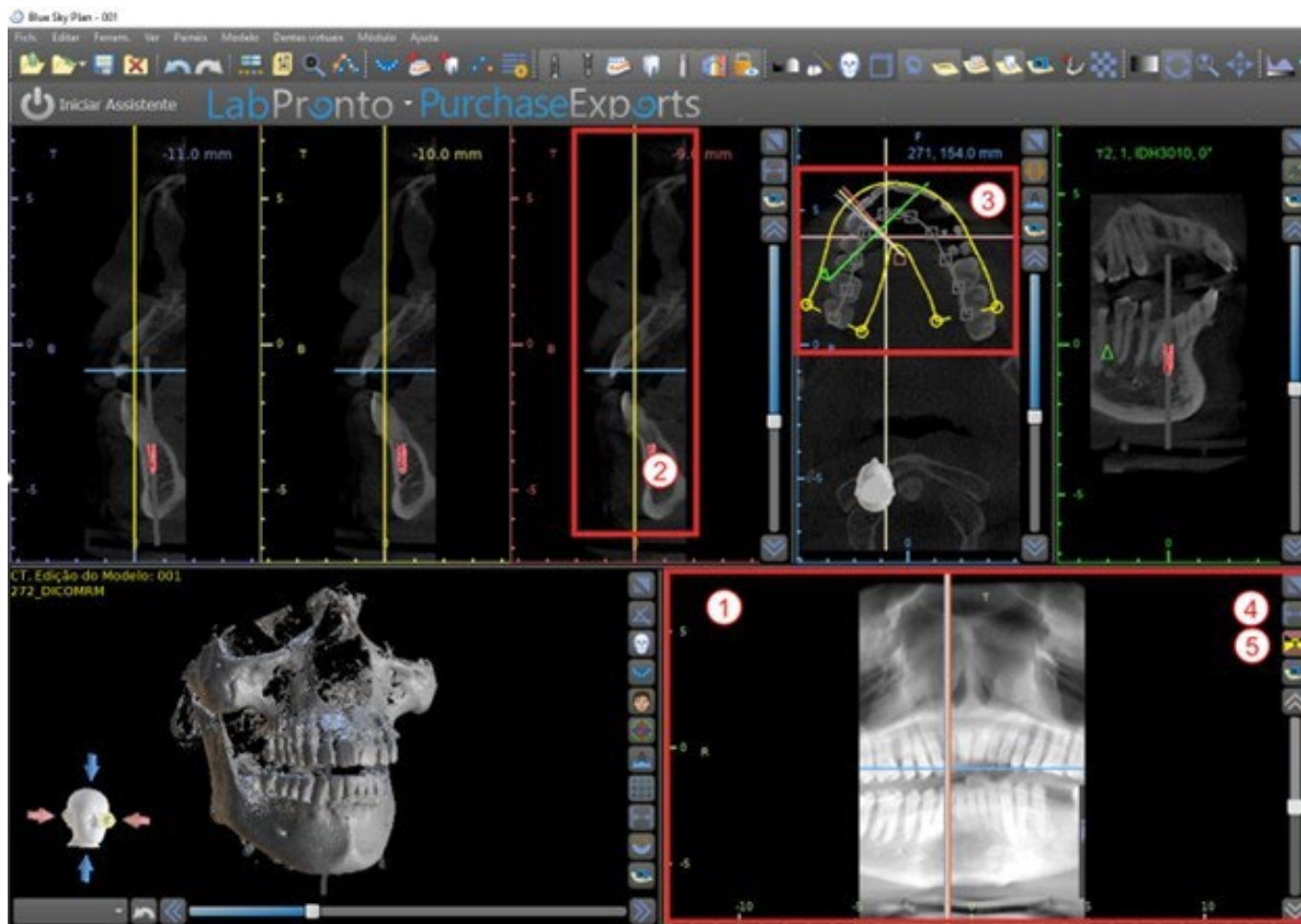

A linha indicadora da fatia panorâmica aparece nas vistas em corte transversal (2) e axial (3). À medida que o usuário percorre as imagens panorâmicas, a curva panorâmica se move ao longo do plano axial horizontal para indicar a localização da fatia específica representada pela localização da curva panorâmica.

O alcance do campo de visão alcançável pela curva panorâmica pode ser ajustado clicando no ícone (4) da distância de deslocamento escolhendo uma distância adequada. A mudança no intervalo de fatias englobadas pela curva panorâmica será representada por uma mudança na distância entre as curvas panorâmicas interna e externa.

O botão do modo de visualização (5) altera a vista panorâmica para uma imagem composta que representa uma imagem semelhante a um raio-X. Em tal situação, a curva panorâmica na vista axial desaparecerá, pois nenhuma fatia individual está sendo representada e, em vez disso, uma imagem composta de todas as fatias dentro do intervalo relevante é exibida. Selecionar o botão do modo de exibição novamente retornará a vista panorâmica para a vista de seção padrão.

6.1.4 Janela tangencial / implante


A vista tangencial está localizada na parte superior direita (1) do aplicativo e é marcada em verde. Funciona em dois modos. Se nenhum implante estiver ativo, ele exibirá a vista ortogonal à vista de seção transversal (tangencial à curva).

O plano exibido pode ser girado com o controle deslizante na janela de vista tangencial (1) ou arrastando a linha que exibe a interseção do plano com a fatia axial na janela de vista axial (2). A direção da vista no plano da fatia tangencial é indicada na vista axial com um triângulo verde.

Se um implante estiver ativo, a vista se orienta em uma posição tangencial à curva ao alternar para o implante. No entanto, ele não exibe o plano perpendicular, mas o plano que passa através do implante. Nesse modo, a orientação do plano é indicada não apenas na vista axial, mas também no implante associado na janela 3D (3).

Se o implante for girado em uma visão diferente, o plano exibido na janela (1) muda automaticamente para o plano girado do implante.

Graças à opção de girar o plano que passa pelo implante, é possível verificar e corrigir com facilidade a inclinação da posição do implante ao visualizar de qualquer ângulo.

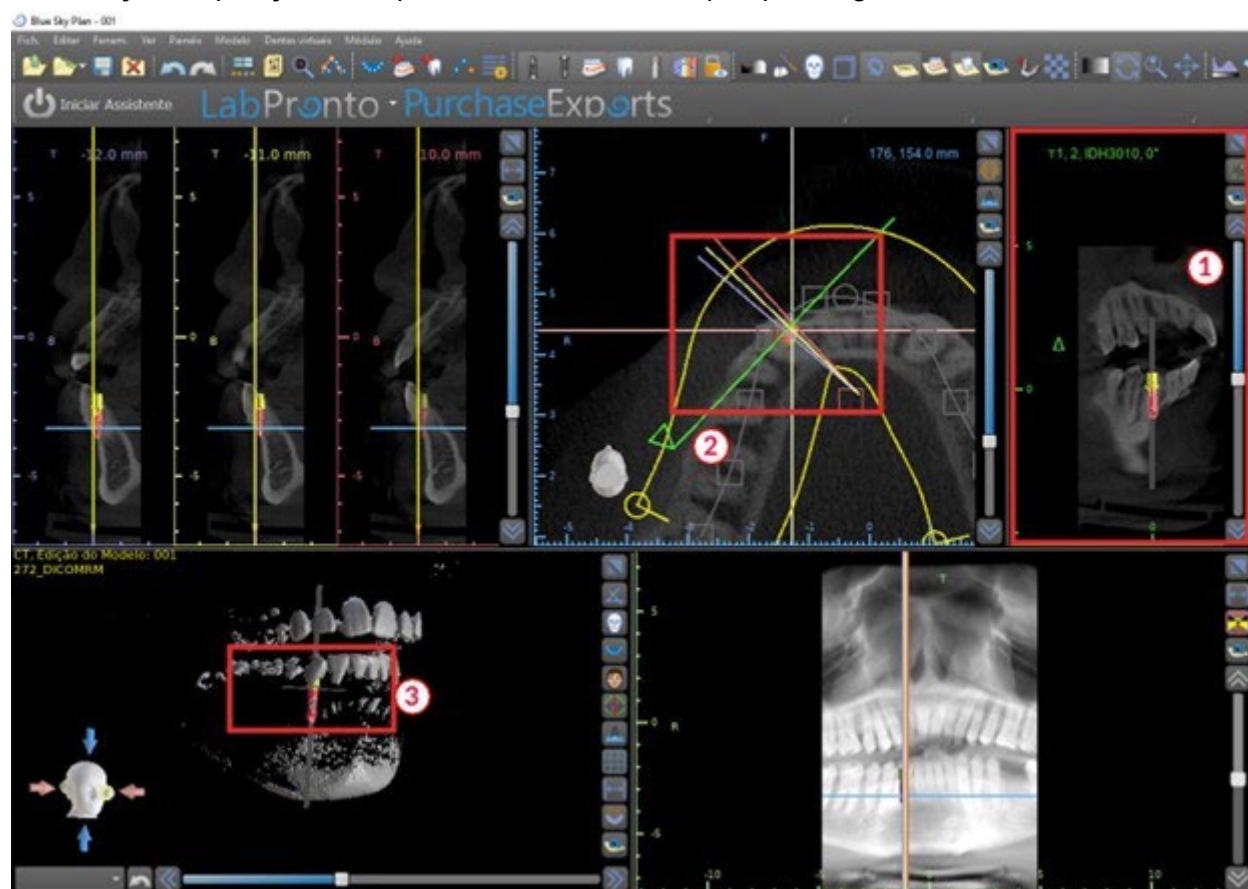

6.1.5 Vista 3D

A imagem 3D está localizada na vista inferior esquerda do aplicativo (1). Para girar a imagem 3D, clique e segure no botão esquerdo do mouse no modelo e, para ampliar, clique e segure no botão direito do mouse.



6.1.6 Botões de atalho 3D

A visualização 3D possui vários botões de atalho valiosos no lado direito da visualização. O primeiro botão (2) maximiza a janela.

O segundo botão (3) permite ao usuário alterar o posicionamento da vista. O usuário pode clicar no botão para abrir um menu suspenso. A orientação da anatomia do paciente será ajustada de acordo com a opção escolhida.

O terceiro botão (4) permite ao usuário tirar proveito de diferentes opções de renderização de volume. É possível definir o tipo e a qualidade da renderização usando as opções de menu contextual ou o painel Renderização de volume, que pode ser acessado no menu abaixo da opção "Painéis".

A opção "Predefinições" abre uma seleção de diferentes predefinições de renderização de volume 3D com diferentes esquemas de cores.

No modo "Superfícies", são mostradas diferentes superfícies ("superfícies CT") (1) definidas no painel "Superfícies", que podem ser acessadas no menu principal na opção "Painéis" ou clicando duas vezes na janela 3D.

O usuário pode atribuir um nome a cada superfície de densidade e definir valores limite, a cor ou a transparência.

Na tabela "Superfícies STL" localizada no mesmo painel(2), os usuários podem encontrar modelos criados ou importados para os quais é possível definir cor, visibilidade e transparência.

A visibilidade dos modelos STL, diferente das superfícies CT, não é afetada pelo modo de renderização de volume escolhido.

O quarto botão (5) ativa a visibilidade das fatias na janela 3D.

O quinto botão (6) insere uma captura atual da janela 3D no painel "Capturas de tela".

6.1.7 Seleção de superfície (corte 3D)

Uma visualização 3D pode ser cortada com a função Seleção de superfície (3). No modo "Superfícies", cada superfície CT é cortada independentemente das outras. A primeira superfície não deletável compartilha sua área de corte com os outros modos de visualização (Ossos Sombreados, MIP, Raio-X, etc.).

O corte serve para:

- Remover ruído
- Remover anatomia supérflua
- Anatomia isolada


As ferramentas de corte estão na parte inferior do painel "Superfícies" (3). É possível cortar dados com o botão "Cortar", excluir um corte realizado anteriormente com o botão "Limpar" e isolar a parte anatômica selecionada. Também é possível inverter o corte atual.

Depois que o usuário clica no botão "Recortar", o aplicativo muda para o modo de desenho. Nesse ponto, clicando no botão esquerdo do mouse na janela 3D e arrastando o cursor, é possível desenhar uma área que é cortada da superfície selecionada após a liberação do botão do mouse. O desenho também pode ser chamado a qualquer momento pressionando a tecla "Shift" e mantendo-a pressionada durante todo o período do desenho.

Se queremos isolar uma parte específica da anatomia, devemos primeiro garantir que ela não esteja conectada a nenhuma outra parte. Podemos garantir isso usando a função de corte descrita acima. Podemos isolar a anatomia dessa maneira com o botão "Isolar" e clicando nela na janela 3D. Todas as partes da anatomia são removidas, exceto a parte selecionada.

Assim que tivermos uma parte cortada da anatomia que queremos exibir, é possível inverter o corte com a caixa de seleção "Inverter".

Quaisquer ações de corte podem ser revertidas usando a função "Desfazer".

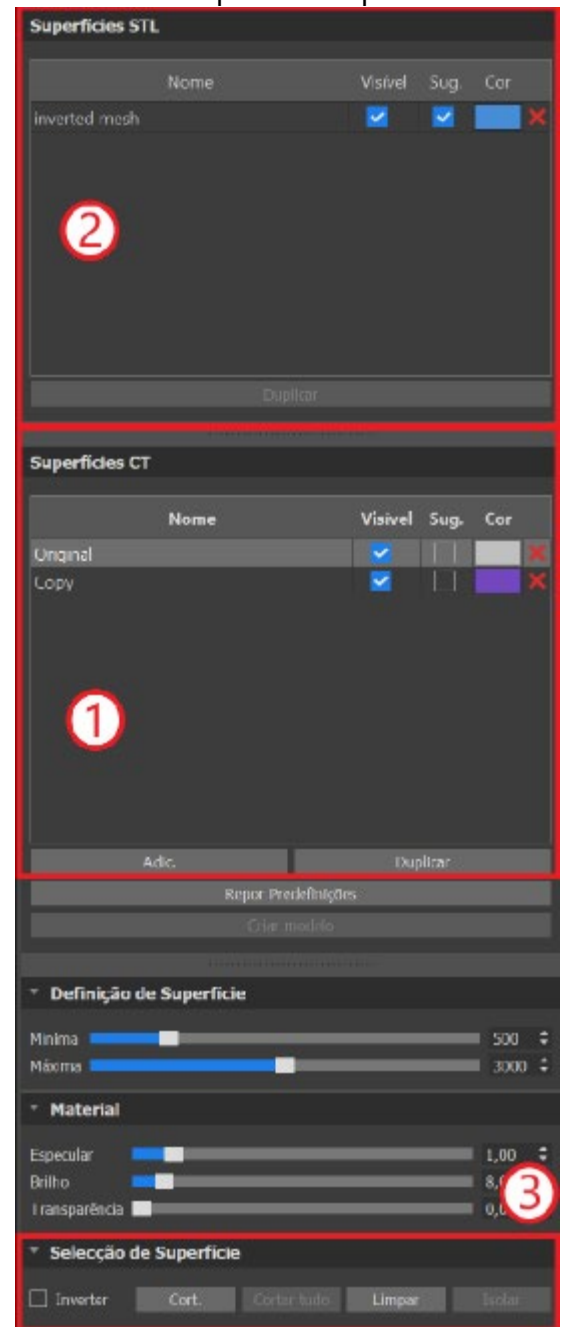

6.1.8 Indicadores


Os indicadores são linhas de referência que indicam o posicionamento entre as imagens mostradas na tela.

Normalmente, os indicadores já estão ativados nas janelas de imagens 2D. Para desativá-los, clique em "Exibir > 2D" no menu e escolha o indicador a ser desativado.

Também é possível ativar os indicadores nas imagens 3D. Clique em "Ver > 3D" no menu e escolha o tipo de projeção a ser ativado na imagem 3D.


Para alterar a visibilidade de objetos como implantes ou dentes, é possível usar os painéis associados, os botões na barra de ícones (1), ou a opção "Vista > Objetos" na barra de menu (2).

Após mudar a visibilidade da curva dental e os indicadores de fatia nas vistas 2D, será possível usar o ícone “Todas as projeções” (alternativamente “Ocultar todas as projeções”)  na barra de ícones.

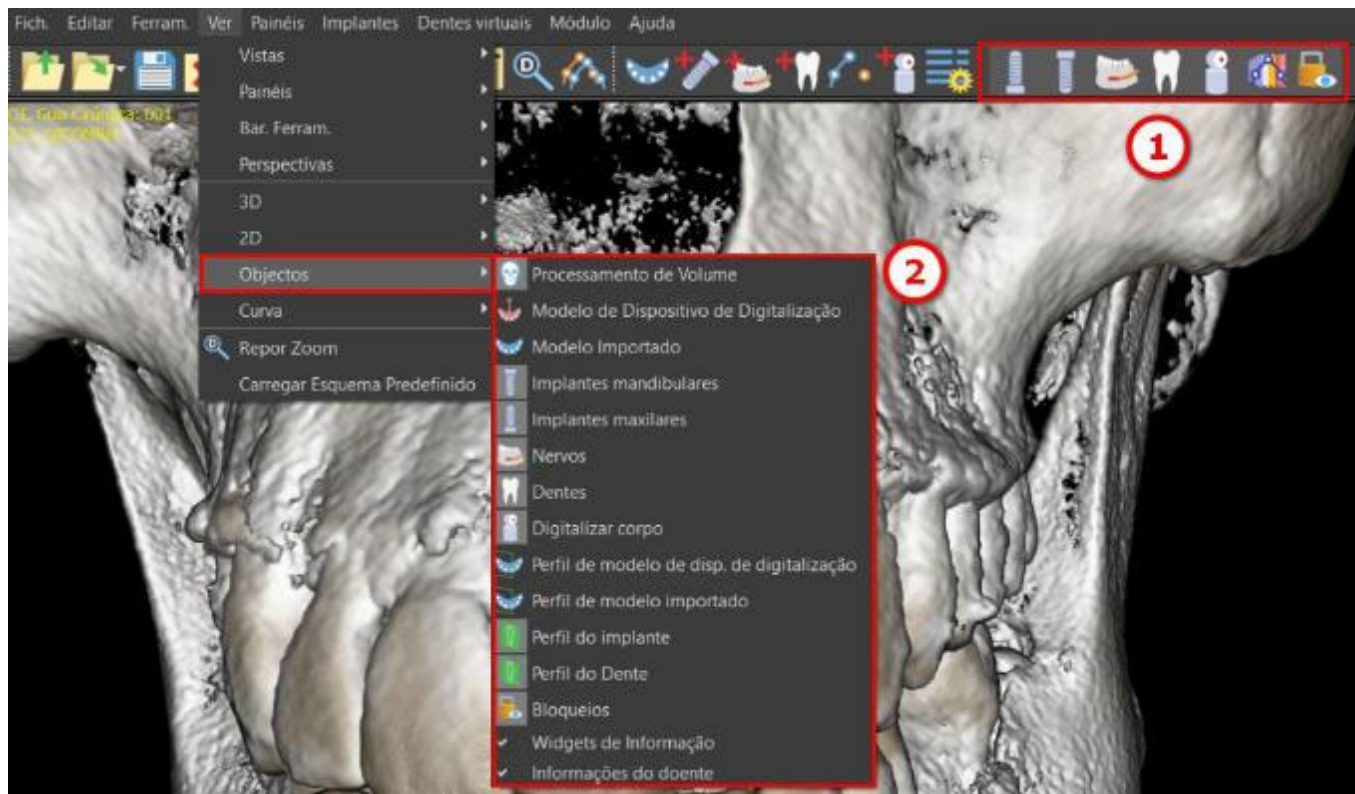

6.2 Tela Multiplanar


Para acessar a tela multiplanar, clique na opção de menu “Ver > Perspectivas > MPR”. A tela multiplanar possibilita a visualização de imagens coronal, axial, sagital e 3D. Essa triagem é geralmente usada para aplicações como lesões e defeitos orais e maxilofaciais, remoção de dentes impactados e tratamento da patologia da articulação temporomandibular.

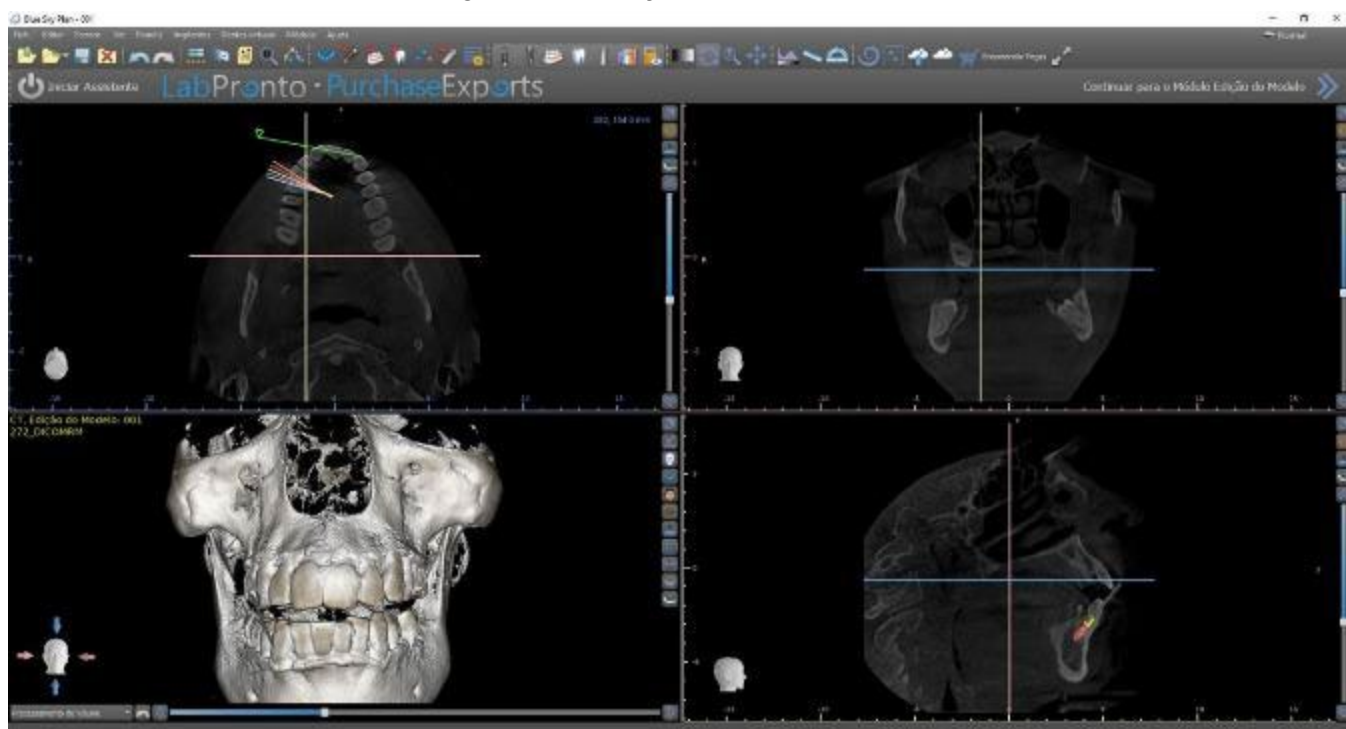

Para localizar a imagem desejada, mova a barra deslizante localizada ao lado das janelas. As linhas indicadoras mostram a posição exata da imagem de uma janela em relação às imagens nas outras janelas.

6.2.1 Janela Sagital

A imagem sagital é um plano vertical que divide o crânio nos lados direito e esquerdo. Está localizada na janela inferior esquerda do software (1) e é marcada em amarelo. Quando o usuário move a barra de rolagem da janela sagital (2), toda a sequência de imagens deste grupo serão exibidas. A linha indicadora da fatia sagital aparece nas imagens em corte coronal (3) axial (4) e 3D.

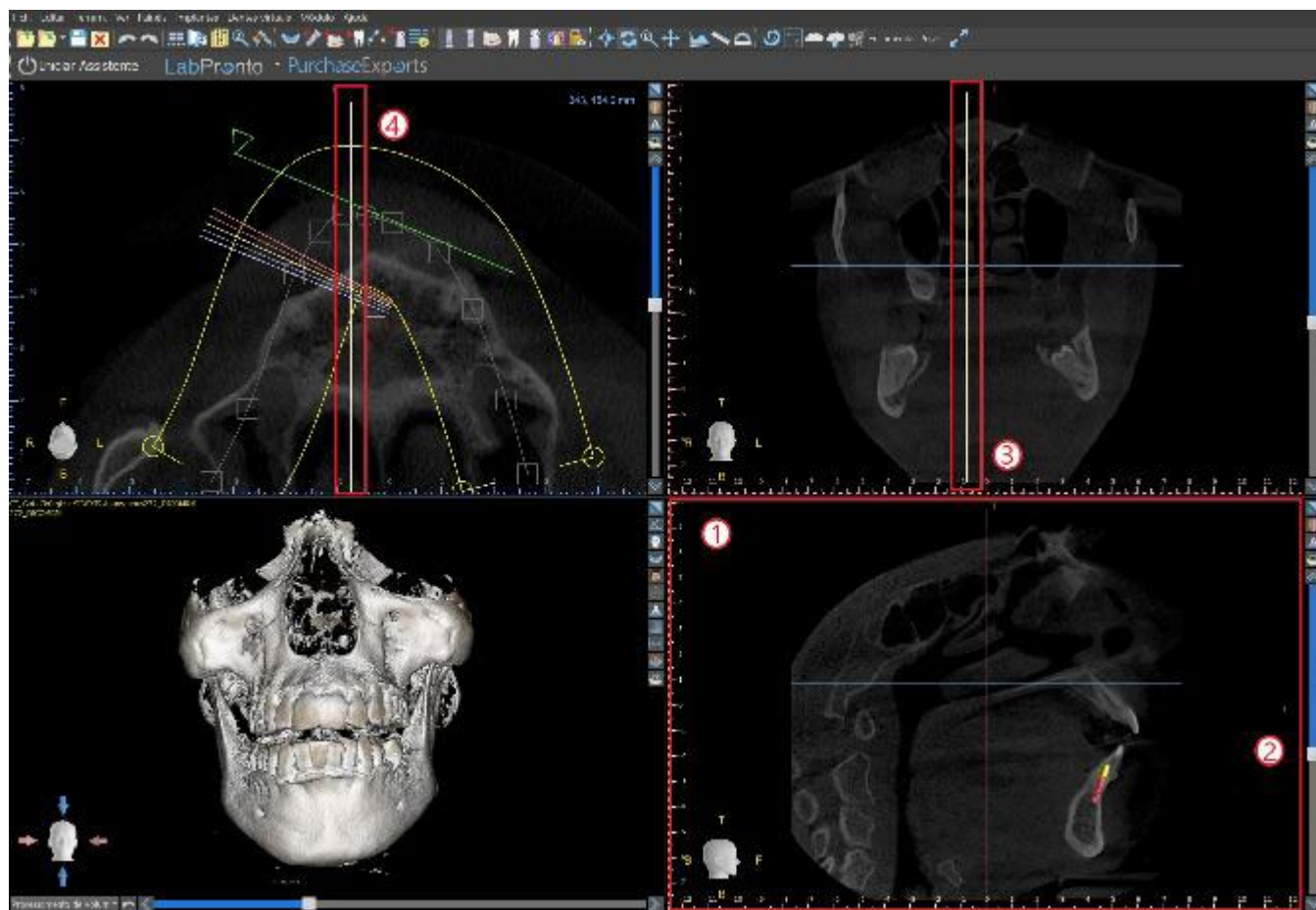


6.2.2 Janela Coronal


A imagem coronal é um plano vertical que divide o crânio nos lados anterior e posterior. Esta imagem está localizada na janela superior direita do aplicativo e é marcada em rosa. Quando o usuário move a barra de rolagem da janela coronal, toda a sequência de imagens deste grupo serão exibidas. A linha indicadora da fatia coronal aparece nas imagens em corte axial, sagital e 3D.

6.3 Controles do Mouse 3D


O BSP permite que o usuário utilize um mouse 3D. Para utilizá-lo, faça o download do software na seguinte página <https://3dconnexion.com/drivers/>.

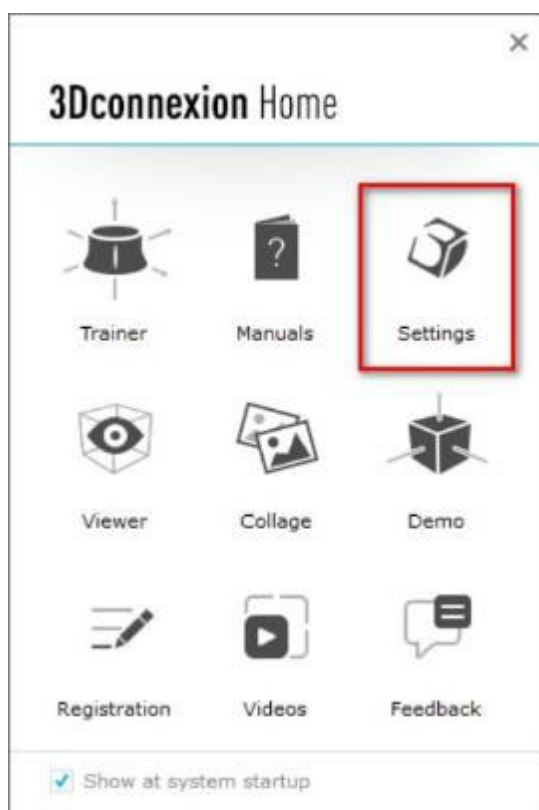


Após a instalação, abra as Configurações do 3Dconnexion e clique nos **Botões** (2) para abrir o menu de botões. Certifique-se de ter definido o **Blue Sky Plan** (1) nas configurações do mouse 3D.

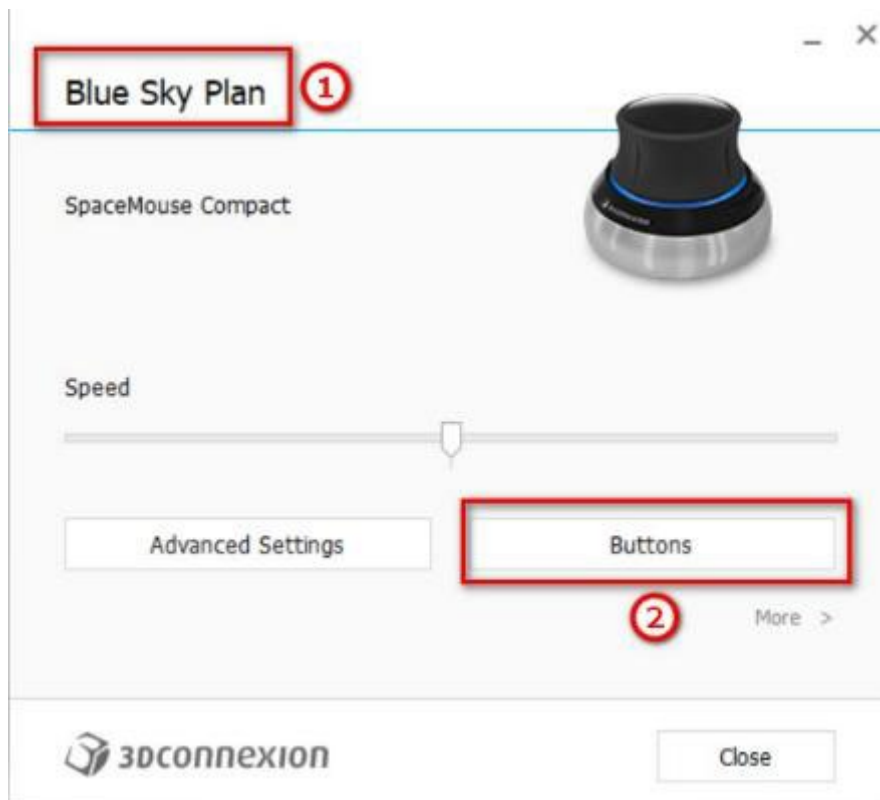


No menu de botões do Blue Sky Plan, configure os botões esquerdo e direito do mouse (3) para os controles. O Blue Sky Plan permite que o usuário configure controles (4) para: Arquivo, Objetos, Ortodontia, Paineis e Perspectivas.

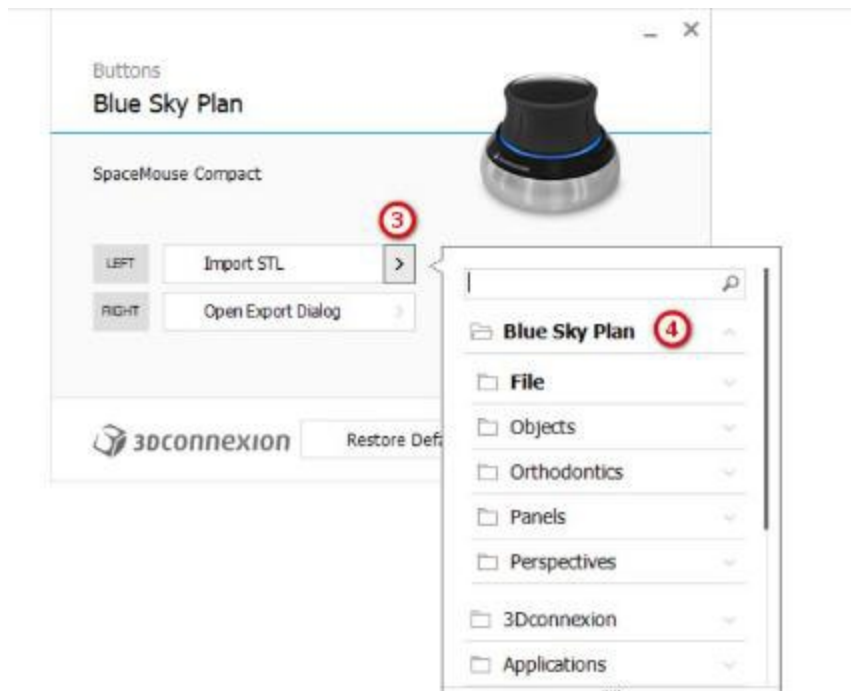

O usuário pode definir as funções básicas, como desfazer/refazer, copiar/colar, ou controles de câmera. Você também pode definir as funções do BSP que controlam a IU do programa.

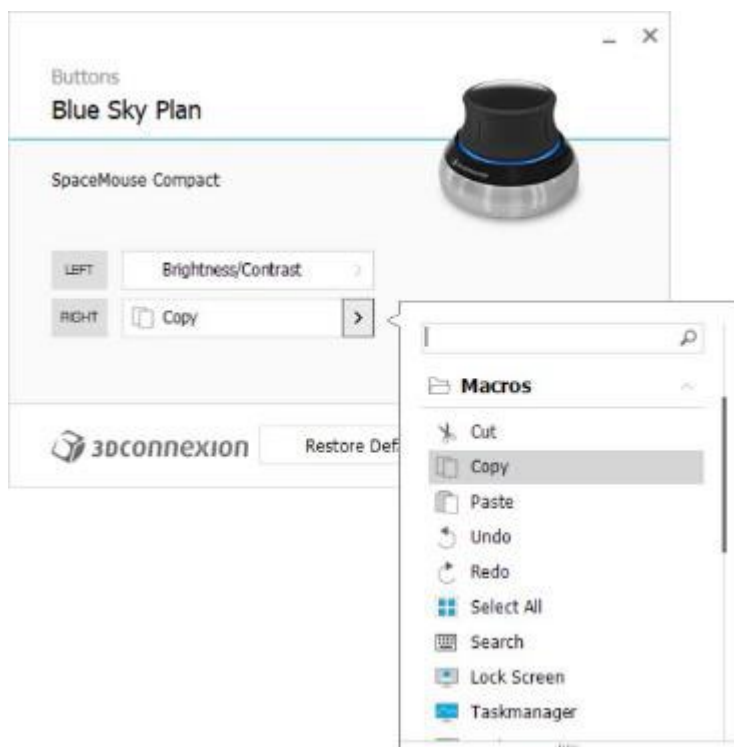

Os controles (5) do mouse 3D para o Blue Sky Plan foram configurados.

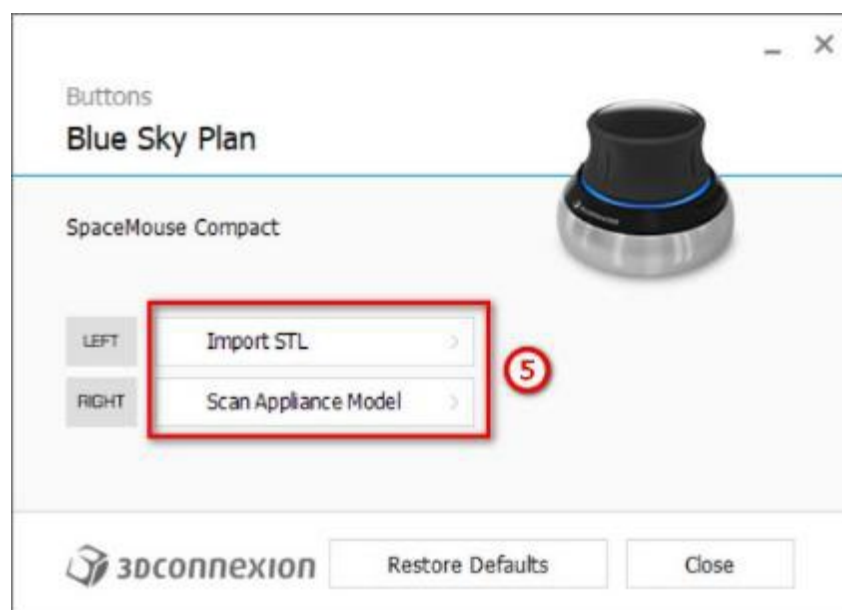

Todas as opções podem ser restauradas clicando no botão “Restaurar Padrões”. Para configurações mais avançadas, clique no botão “Configurações Avançadas”.

7 CT Dicom Viewer

O CT DICOM Viewer simplifica o trabalho com Dados CT, especialmente para a revisão de CT scans. Para iniciar um novo projeto, clique no botão CT DICOM Viewer (1) e escolha um arquivo contendo dados DICOM (2). As próximas etapas envolvem selecionar uma das séries DICOM (3) e definir o volume de interesse e o modo de imagem (4).



O CT DICOM Viewer pode ser definido como o “módulo de invólucro aberto” em Preferências -> Avançadas (ou seja, o módulo predefinido no qual os dados são abertos “quando clica duas vezes”).


O CT DICOM Viewer é baseado no módulo de edição de modelos; as principais diferenças entre os dois são:

- Projetos salvos no CT DICOM Viewer podem ser abertos no módulo Edição de Modelo
- As alterações da UI realizadas no CT DICOM Viewer não são salvas (barras de ferramentas, painéis, etc.)
- A caixa de diálogo “Importar superfície adicional” não é exibida no CT DICOM Viewer
- Apenas a Barra de Ferramentas Principal, a Barra de Ferramentas de Medições e a Barra de Ferramentas de Mensagens são ativadas por predefinição
- Luminosidade/Contraste, Cortes Ortogonais, Representação de volume, Superfícies, Lista de Notas, Lista de Nervos e painéis de Ecrãs estão disponíveis por predefinição

Para trabalhar com ferramentas adicionais (capítulo 7), selecione os módulos Edição do Modelo ou Guias Cirúrgicos (capítulo 15) no Blue Sky Launcher ou mude para o módulo Normal/Avançado.



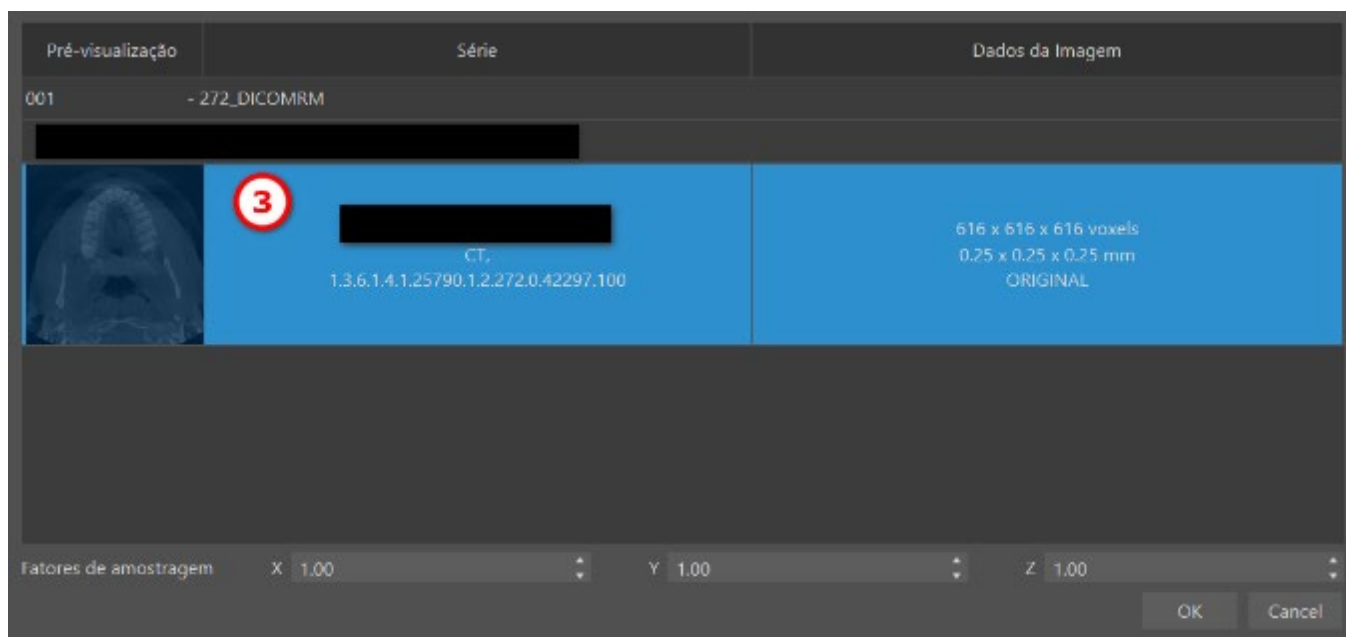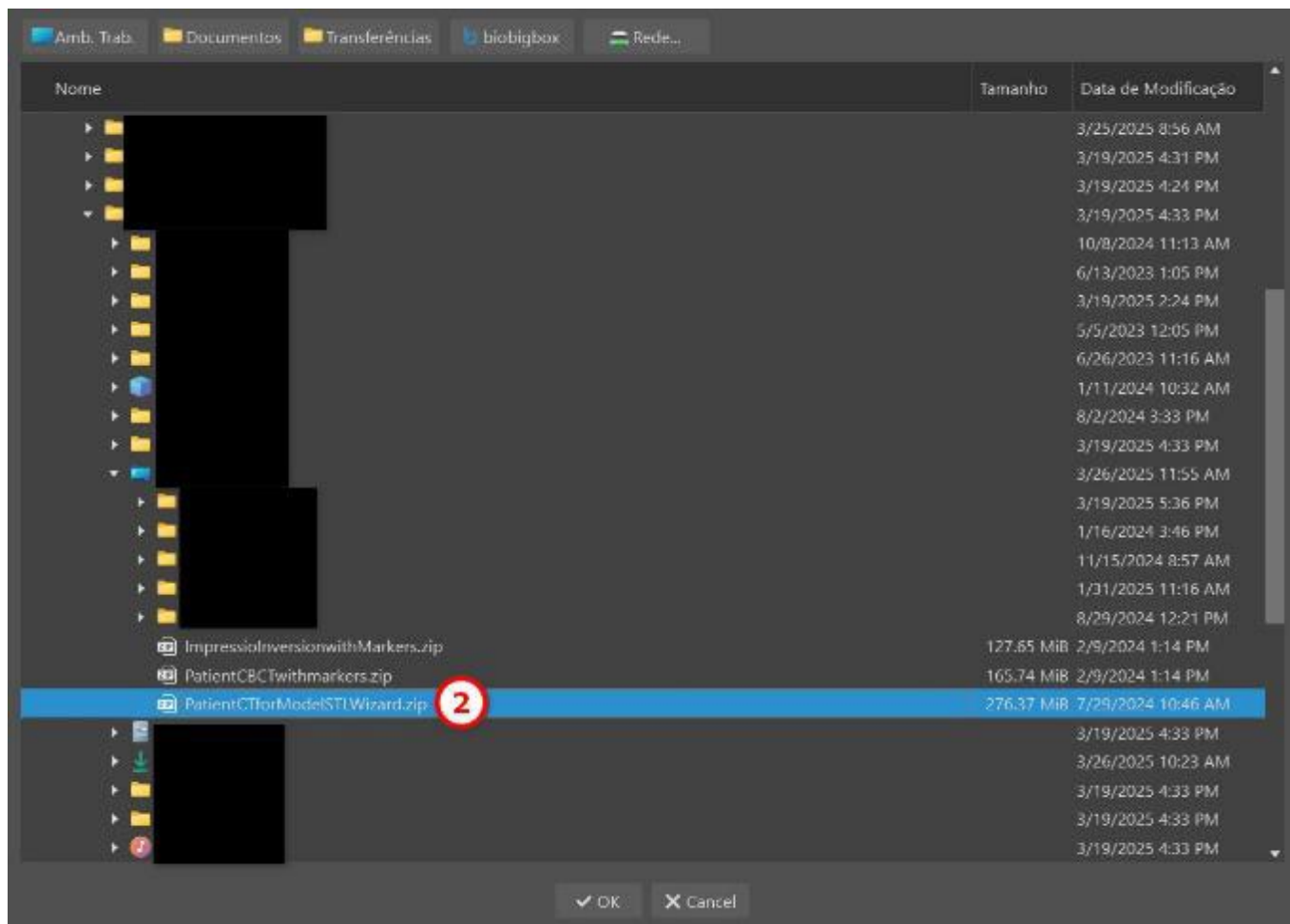

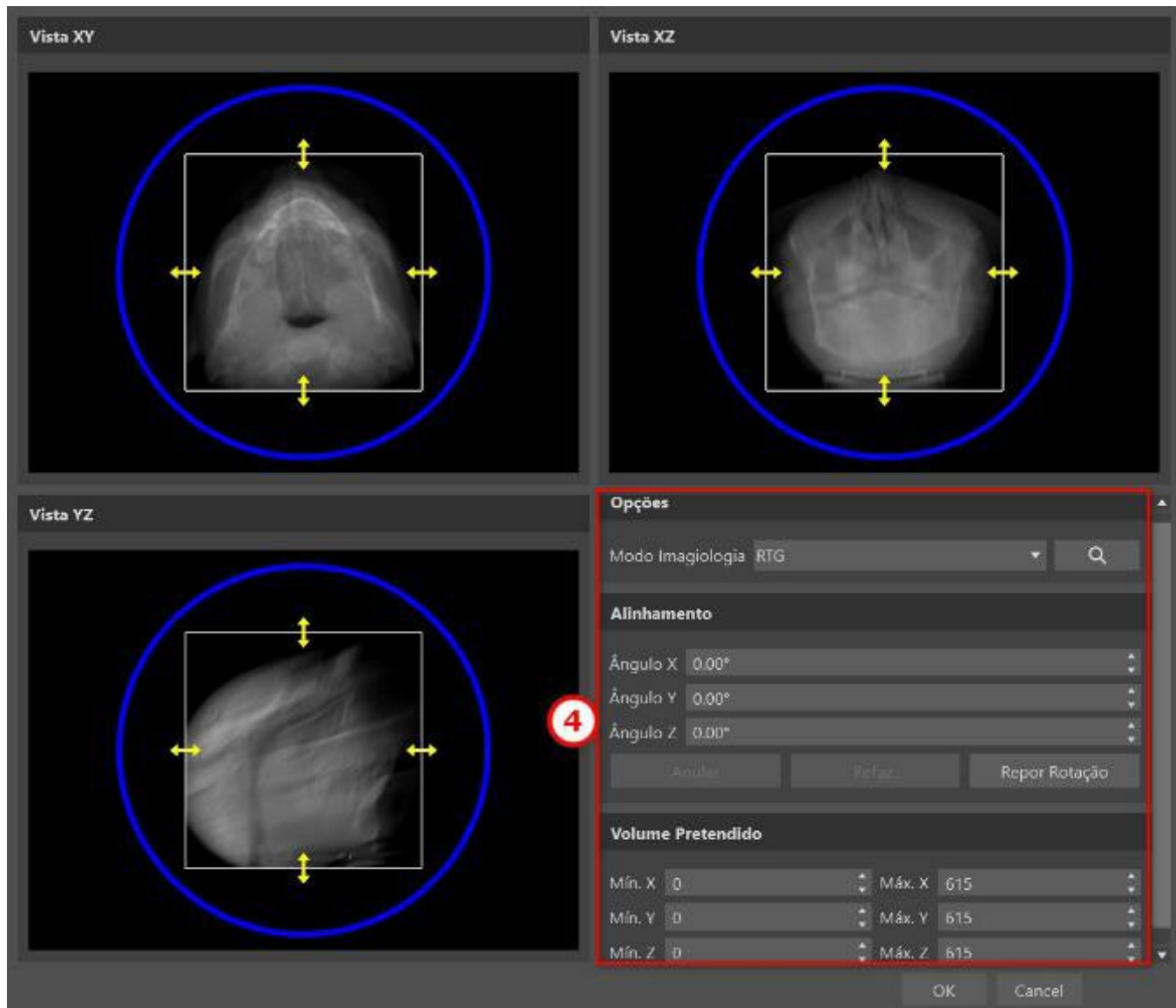


8 Posicionando Implantes e pinos

O Blue Sky Plan® permite o planejamento virtual de implantes através das imagens de TC ou TCTB do paciente. É possível adicionar, trocar, mover e girar o implante e o pilar ou o pino nas diferentes vistas.

8.1 Adicionando um implante ou pino

8.1.1 Implante de um catálogo

Antes de posicionar o implante, recomenda-se medir primeiro as dimensões do osso. Dessa forma, é possível estimar quais dimensões o implante deve ter. Clicar no ícone  na barra de ferramentas abre uma caixa de diálogo para adicionar um implante.

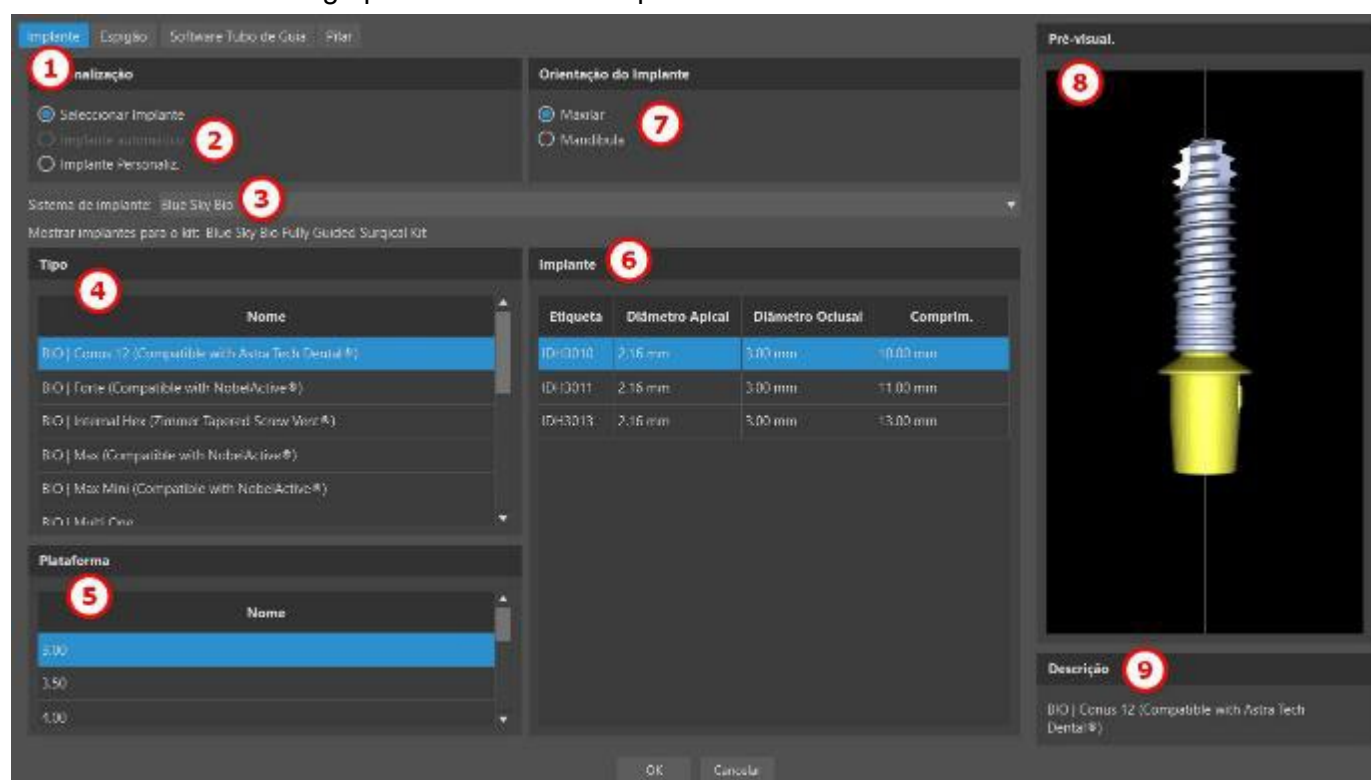

Nesta caixa de diálogo, é possível modificar os parâmetros do implante, o pilar e o guia de perfuração. As partes correspondentes podem ser selecionadas nas guias individuais (1). “Selecionar implante” (2) é selecionado por padrão, o que permite selecionar um implante do catálogo (3) com base em seu tipo (4) e plataforma (5) e, em seguida, de acordo com seus parâmetros (6). Também é possível especificar a orientação do implante (7). O implante atualmente selecionado pode ser visualizado na pré-visualização (8). Uma breve descrição do implante (9) também está localizada na parte inferior da caixa de diálogo.

8.1.2 Implante automático do catálogo

O implante automático é adicionado usando a função “Adicionar dente” no módulo Normal ou Avançado. Por padrão, a guia “Criar dente automaticamente com IA” (1) é selecionada. Em seguida,

escolha o dente associado na pré-visualização (2). A descrição textual da coroa aparece em (3). Em seguida, use a caixa de seleção "Implante" (4) para ativar o campo com os parâmetros do implante. Ao clicar no campo do implante (5), aparece a caixa de diálogo "Adicionar novo implante".

Pré-visual.

1

Selecione o dente.

2

Nome

3

Primeiro molar da Mandíbula esquerda

☒ Implante


4

Blue Sky Bio IDH3010 com ABDH30


5

OK Cancelar


Nesta caixa de diálogo, selecione a opção "Implante automático" (6) que seleciona automaticamente um implante adequado do fabricante selecionado. É possível selecionar um sistema de implante do catálogo (7) clicando no menu suspenso (observação: é importante fazer o download do pacote do catálogo de implantes relevante). A opção de implante automático permite escolher o "Tipo de implante" (8). A plataforma e o implante específicos (10) serão escolhidos automaticamente. A "Orientação do implante" (9) não pode ser alterada, porque o implante está vinculado ao dente selecionado na caixa de diálogo "Adicionar dente". Para adicionar um pilar ao implante automático, alterne para a guia "Pilar" (11). O implante automático é selecionado clicando no botão "OK" (12).

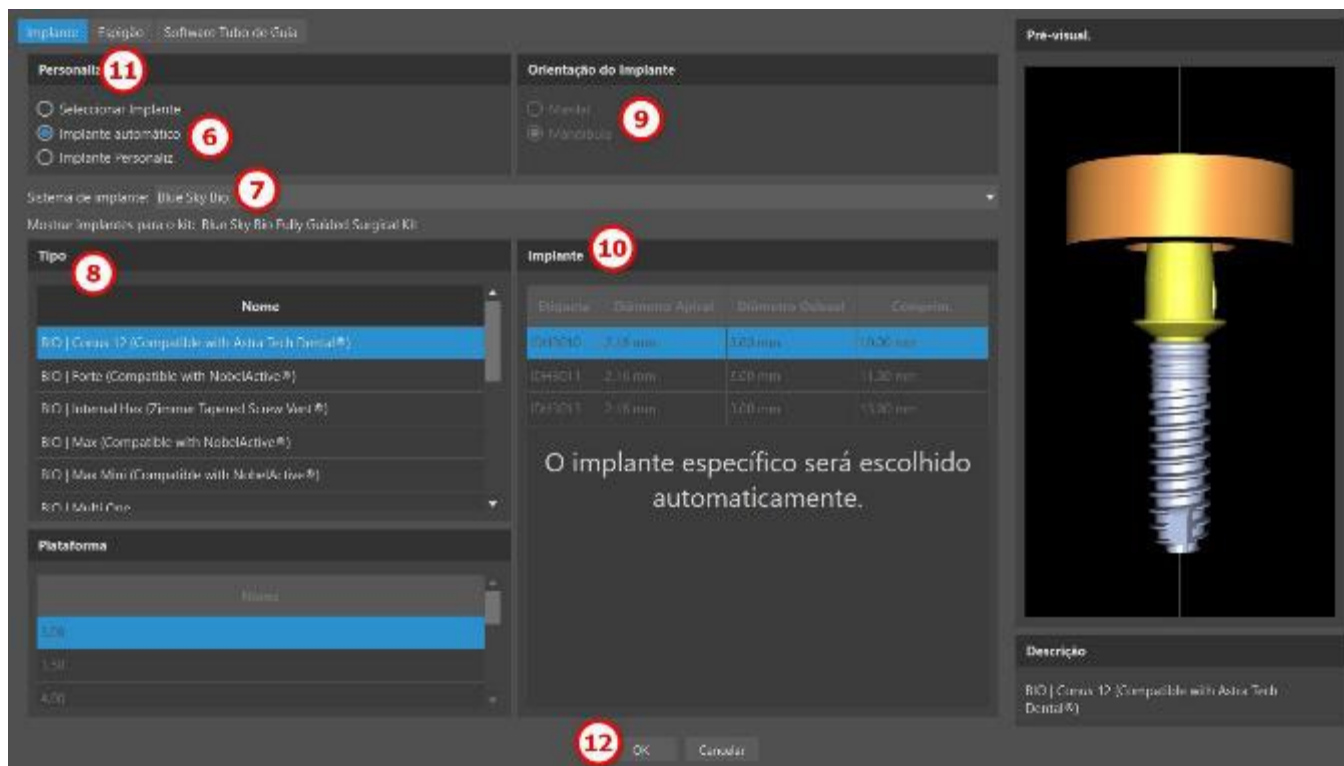


"Pilar personalizado" permite que os parâmetros individuais do pilar sejam alterados. O tamanho do último implante usado é exibido por padrão. Ao alternar para a guia "Implante" para um implante automático, o comprimento e o diâmetro personalizados serão definidos como 3x20 mm.

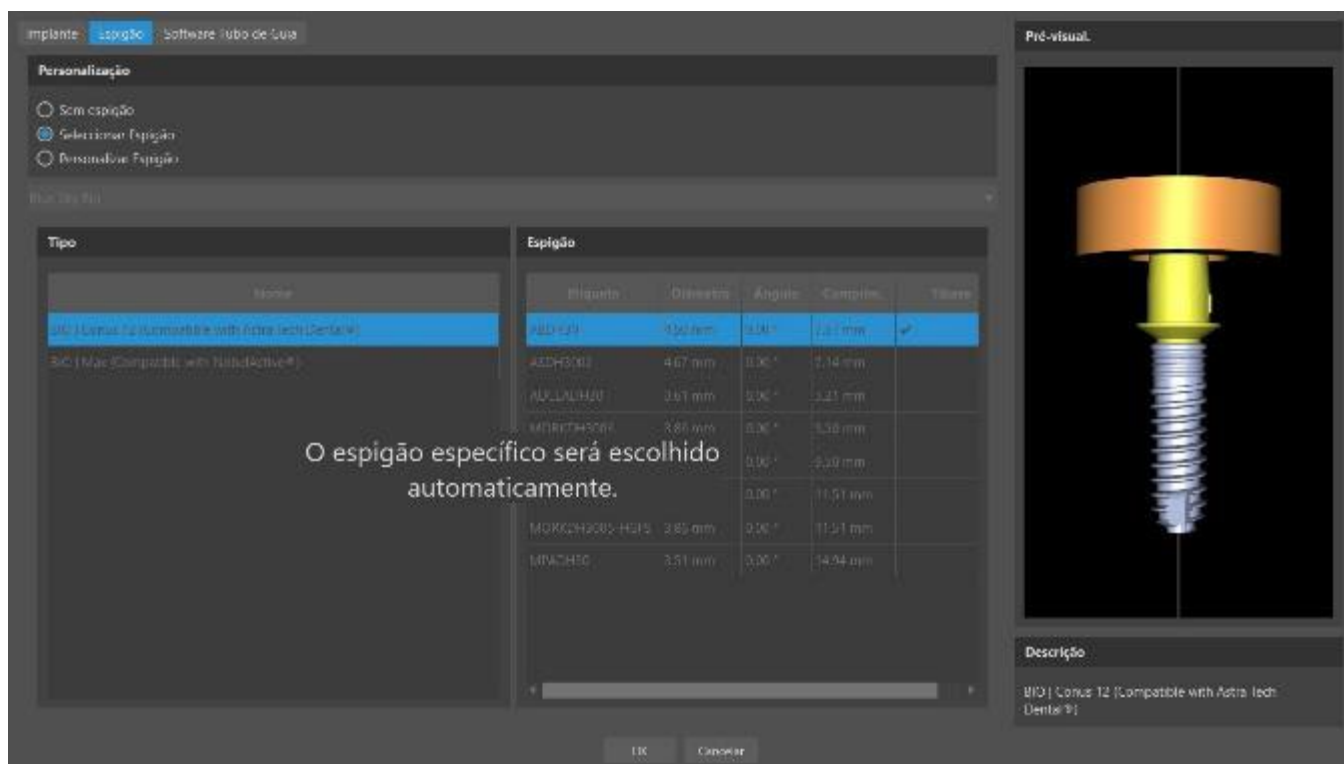

É possível visualizar que tipo de implante e pilar foi selecionado no campo do implante (13). Um implante automático com um dente de IA será adicionado clicando no botão "OK" (14).

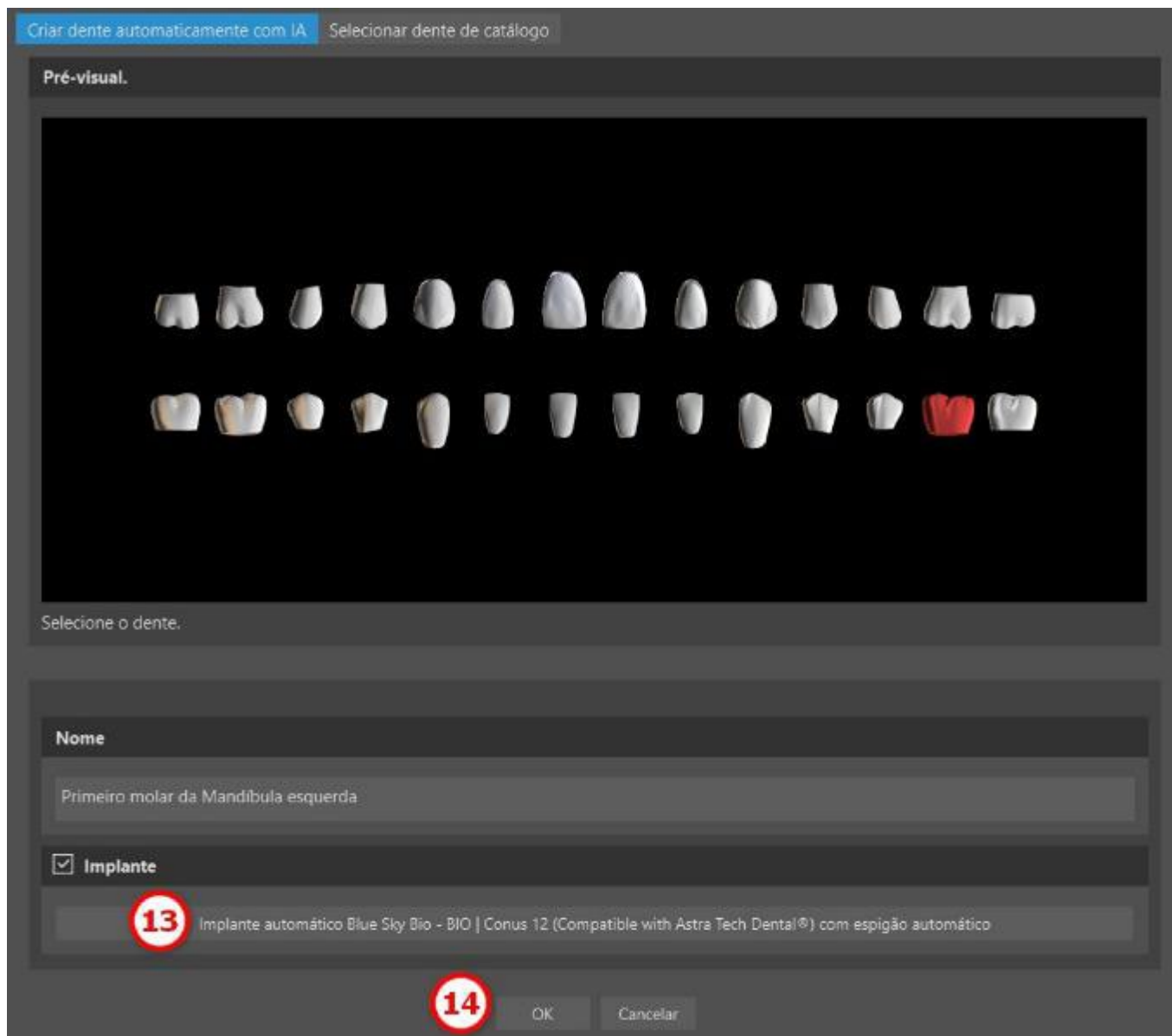

Para o posicionamento automático do implante, é necessário introduzir dois valores de controle, ambos encontrados em Preferências > Guia Cirúrgico. Esses valores ajudam a definir limitações e preferências personalizadas para a colocação do implante. O primeiro valor de controle, "Profundidade subcrestal", mede a distância da borda do osso até o centro oclusal do eixo vertical do implante. É útil quando o osso tem um formato de crista irregular. Isso permite que o implante seja colocado mais profundamente no osso. Se o implante não for profundo o suficiente, ele pode acabar ficando muito fino devido ao formato da crista óssea que o restringe. Nesses casos, a "Profundidade subcrestal" pode ser aumentada para permitir que o implante seja colocado mais profundamente, acomodando implantes mais largos. O segundo valor de controle, "Largura máxima do implante", é usado para limitar a largura do implante, garantindo que ele não fique muito grosso.

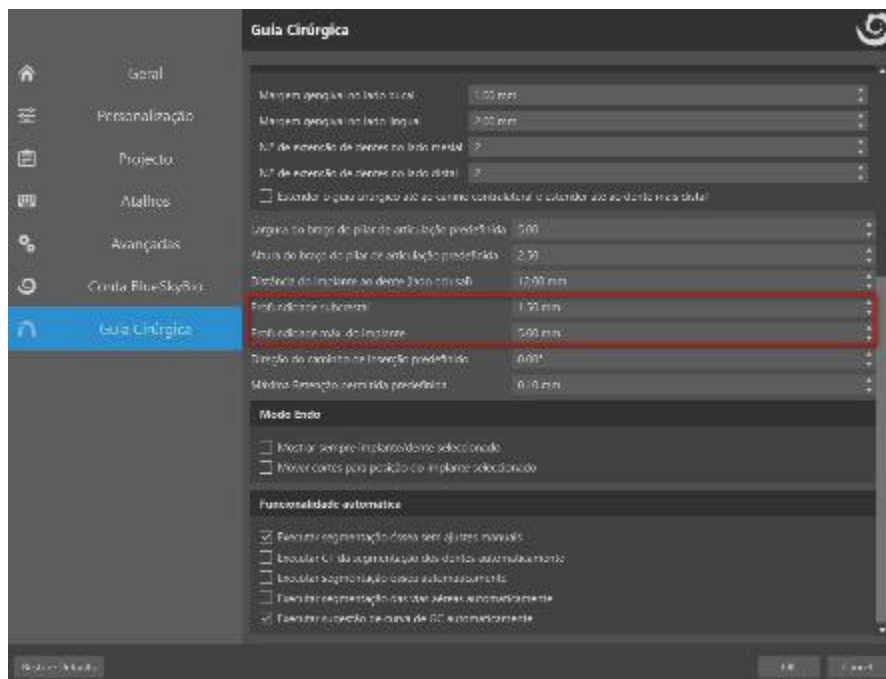


Observação: Os implantes automáticos só estão disponíveis ao adicionar um dente de IA e se os dados de TC forem importados.

Observação: O implante selecionado automaticamente e sua posição são propostas. Verifique o implante em todas as vistas, consulte o painel de validação de implantes e ajuste, substitua ou exclua o implante conforme necessário antes de prosseguir (consulte as seções 1.2 e 1.3).


8.1.3 Implante Customizado

Se nenhum dos implantes atender aos requisitos específicos, é possível criar um implante simplificado, mas totalmente parametrizado. Isso é possível clicando na opção "Implante personalizado" (1). Os parâmetros individuais (2) podem ser modificados com os campos correspondentes. Essas alterações aparecem imediatamente na visualização.

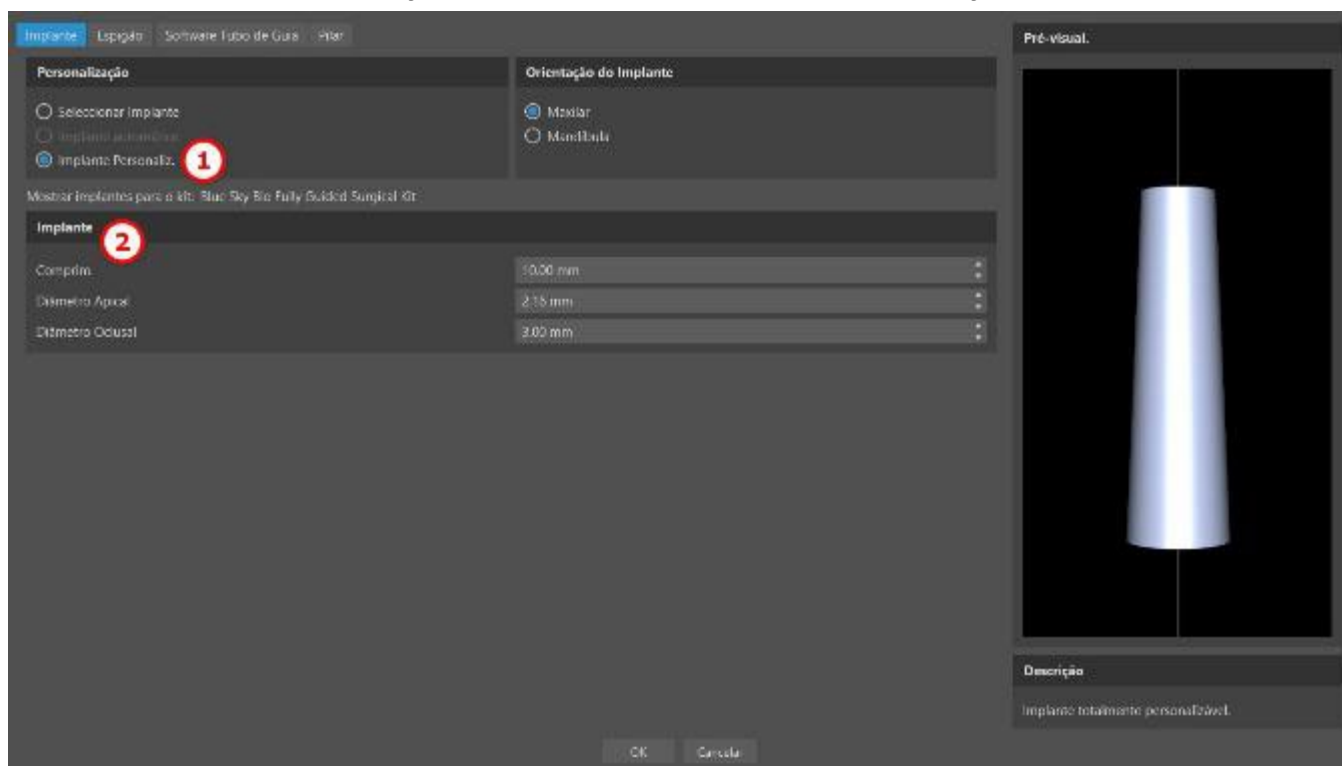


8.1.4 Pilar de um catálogo

Por padrão, o implante é carregado sem um pilar. Se desejar adicionar um pilar, é necessário alternar primeiro para a guia "Pilar" (1) e depois selecionar a opção "Selecionar pilar" (2). Uma lista de pilares compatíveis com o implante selecionado é exibida na tabela (3). Depois de escolhermos um implante parametrizado, uma tabela para selecionar o tipo e a plataforma será exibida aqui de forma semelhante à do implante.

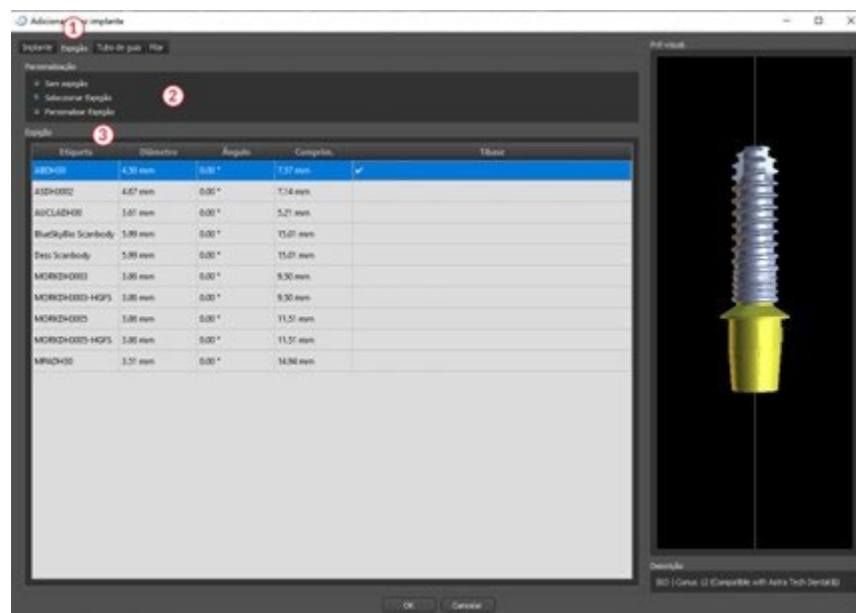


8.1.5 Pilar Customizado

O pilar também pode ser totalmente parametrizado da mesma maneira que o implante. Primeiro, selecionamos "Pilar personalizado" (1); então é possível definir os parâmetros individuais (2).

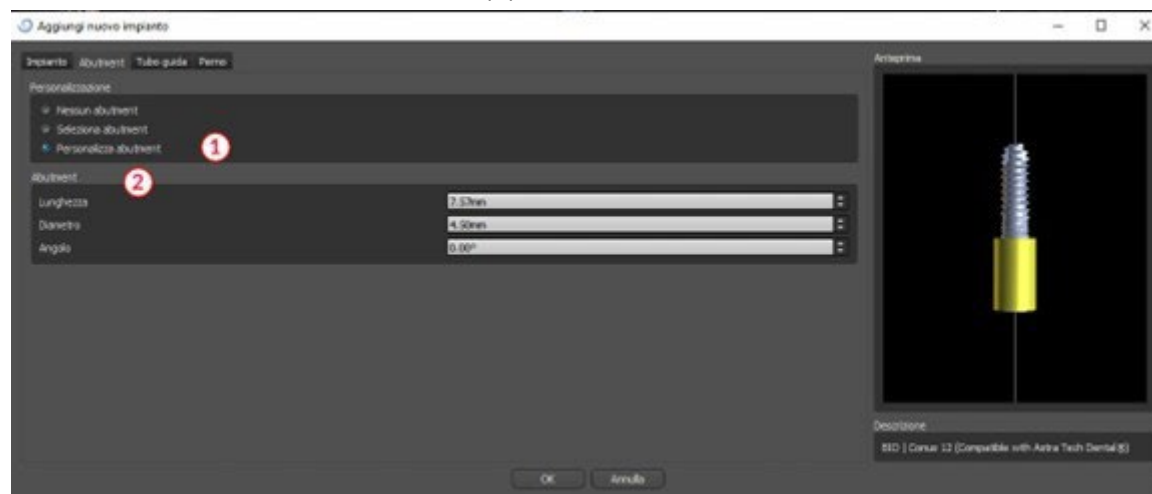


8.1.6 Tubo de guia do software

O implante possui uma guia de perfuração auxiliar adicionada por padrão. Se quisermos modificá-lo, é necessário mudar para a guia "Guia de Perfuração do Software" (1). Seus parâmetros podem ser alterados nos campos correspondentes (2). Se quisermos exibi-lo ou ocultá-lo na visualização, podemos usar a caixa de seleção (3).

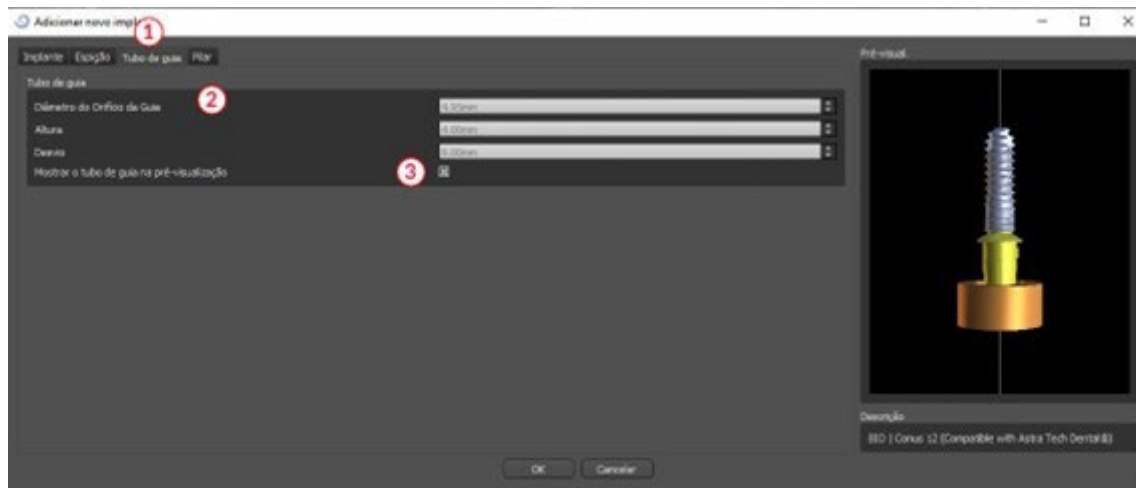


8.1.7 Pino de um catálogo

Em vez de um implante, é possível adicionar um pino (1). Este é um implante especial para posicionar o guia com mais firmeza. Ao contrário de um implante, ele não pode ter um pilar, mas apenas uma guia de broca.

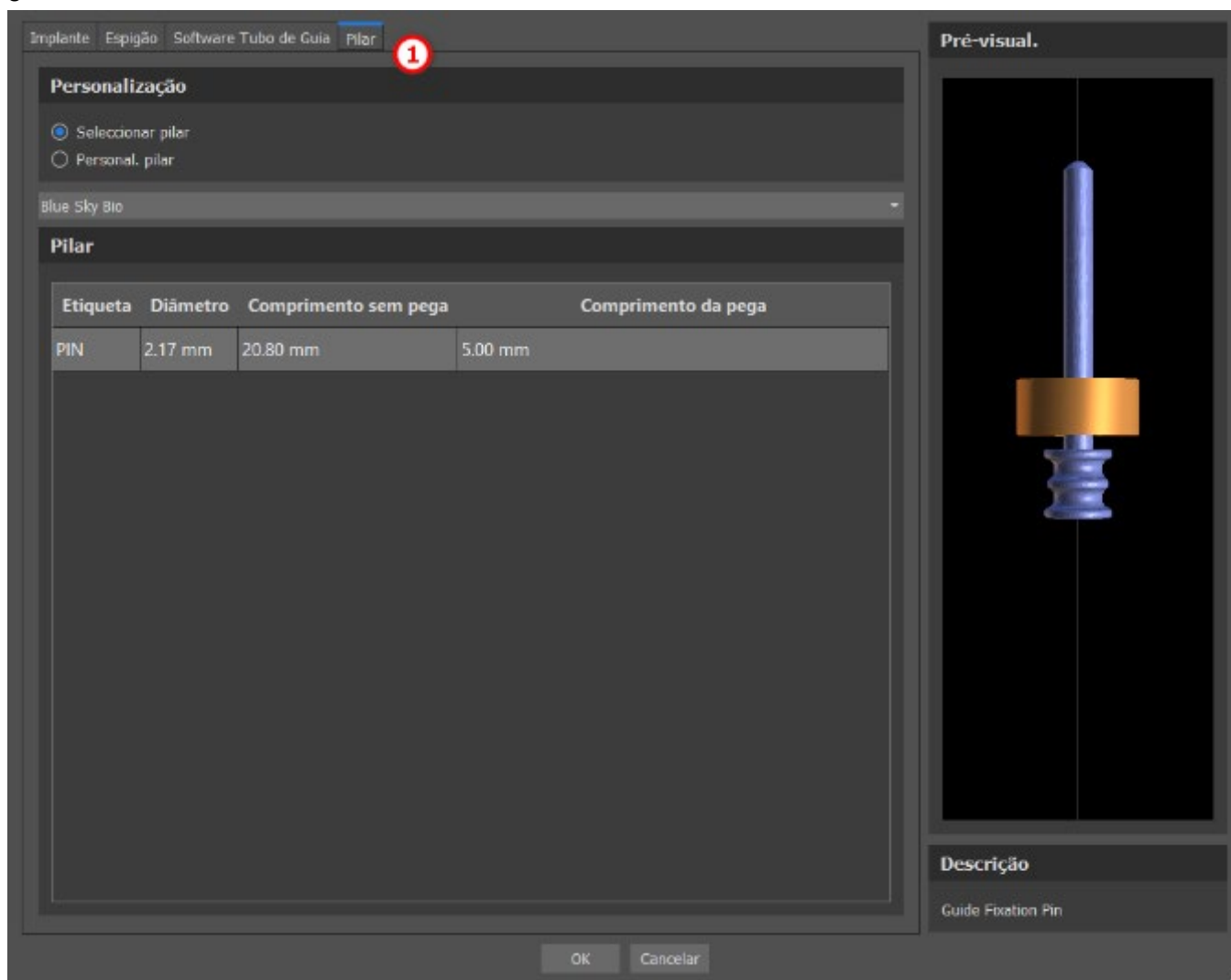

8.1.8 Pino customizado


Também é possível ajustar seu próprio pino da mesma forma que nas peças anteriores (1). Comprimento 0 (2) define o comprimento da parte azul do pino; comprimento 1 (3) define o comprimento da parte verde.

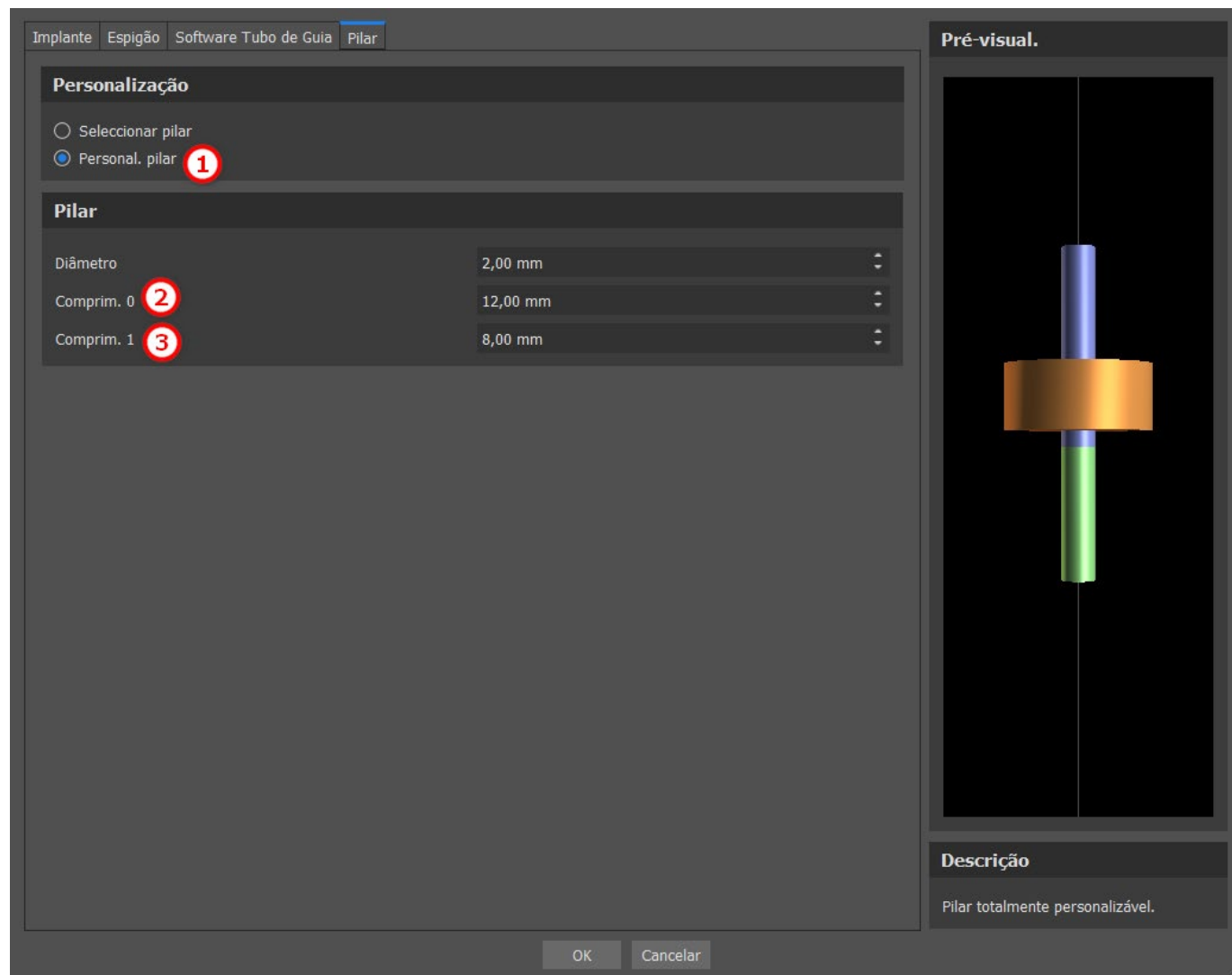

8.2 Posicionando e manuseando o implante

Confirmamos a escolha do implante na caixa de diálogo pressionando “OK”. O cursor do mouse muda para . Em seguida, podemos posicionar o implante clicando na fatia e, se necessário, na visualização 3D em qualquer janela. Após a adição, o implante é sempre posicionado perpendicularmente à orientação selecionada. Cabe ao usuário ajustar a posição e a rotação.

É possível mover o implante em todas as janelas. Para isso, mova o cursor para o implante, clique no botão esquerdo do mouse e arraste. O implante sempre se move no plano da vista.

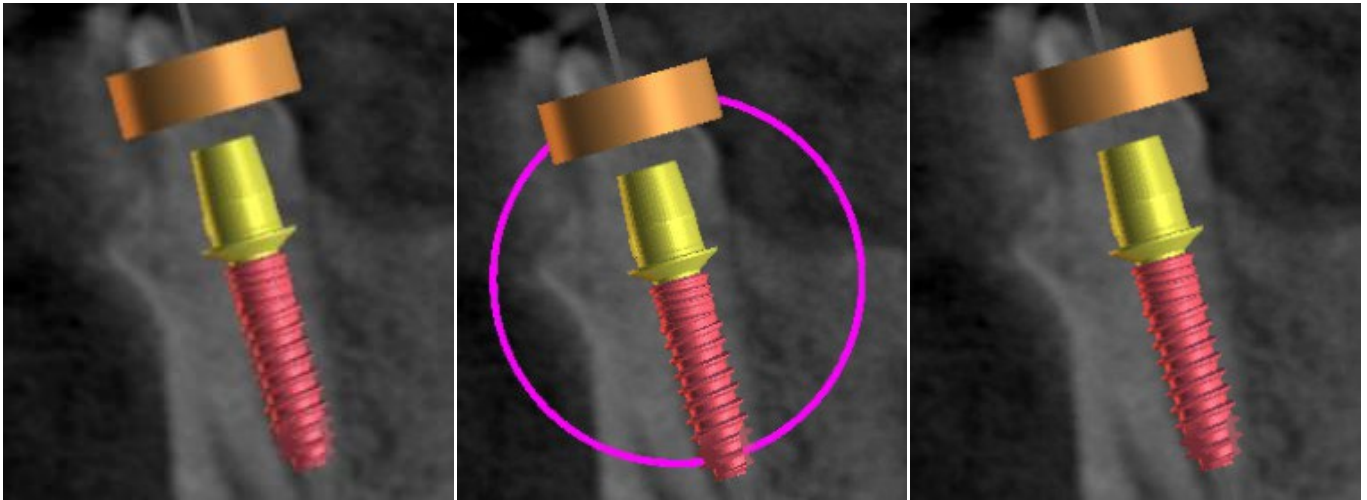

Além de movê-lo, também é possível girá-lo usando os chamados arrastadores. Eles são exibidos quando você posiciona o cursor no implante, seu pilar ou a guia de perfuração. Se movermos o cursor do mouse para o arrastador e clicar no botão esquerdo do mouse, o arrastador mudará de cor e, arrastando o mouse, é possível modificar a rotação do implante.

8.3 Operações adicionais no implante


8.3.1 Barra de Ferramentas

Na barra de menus superior, é possível exibir uma barra de ferramentas com outras operações no implante, selecionando “Exibir > Barras de Ferramentas > Barra de Ferramentas do Implante”. Aqui estão os ícones para remover o implante (1), o implante (2) e exibir informações sobre o implante (3) e o modo Endo, para colocar os implantes pela ponta ((4) consulte o capítulo 17).




As operações 1 e 3 são usadas da mesma maneira: clicando no ícone, movemos o cursor sobre o implante e clicamos nele. Para a opção de substituir o implante (2), a mesma caixa de diálogo é exibida ao adicionar um implante, na qual escolhemos com qual implante queremos substituir o implante selecionado.

8.3.2 Menu de contexto

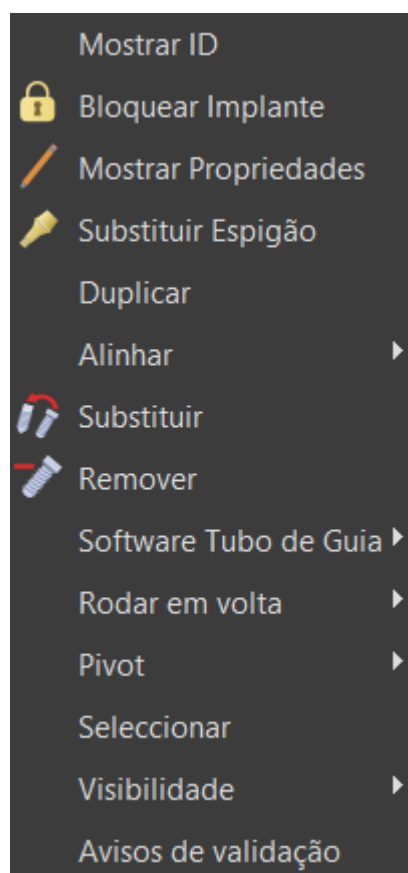


Várias operações também podem ser executadas no implante através do menu de contexto, a que podemos recorrer clicando no botão direito do mouse no implante.

É possível exibir o ID do implante (uma breve descrição editável do implante) ou suas propriedades. Também é possível travar o implante contra edições. O implante bloqueado possui um ícone de cadeado próximo a ele. É igualmente possível substituir e, se necessário, adicionar um pilar. Todo o implante pode ser duplicado ou alinhado com outro implante. Isso significa que, embora o implante permaneça em sua posição, ele gira no espaço de forma que seu eixo fique paralelo ao eixo de outro implante. Uma substituição complexa de implante também pode ser realizada no menu de contexto. O implante também pode ser removido. Além disso, é possível alterar o ponto em que o implante gira durante a manipulação (o chamado Eixo ou Pivot). É possível cancelar a seleção do implante ativo através do menu de contexto. Por fim, a visibilidade de partes individuais do implante pode ser alterada ("Visibilidade > Tubo guia do implante/ pilar/software").

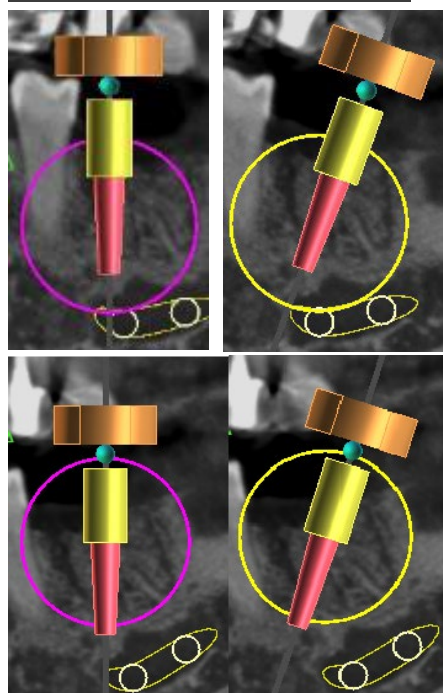

Eixo definido como Centro. O implante gira em torno de seu centro.


Eixo definido como Cabeça. O implante agora gira em torno de sua cabeça.

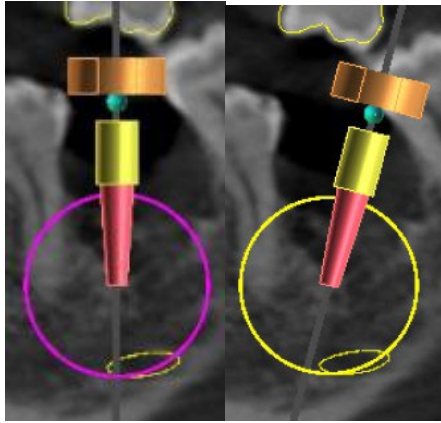

Eixo definido como Ponta. O implante agora gira em torno de sua ponta.

8.4 Painel Lateral

Para facilitar a localização entre os implantes, o painel lateral pode ser exibido em “Painéis > Lista de Implantes”.

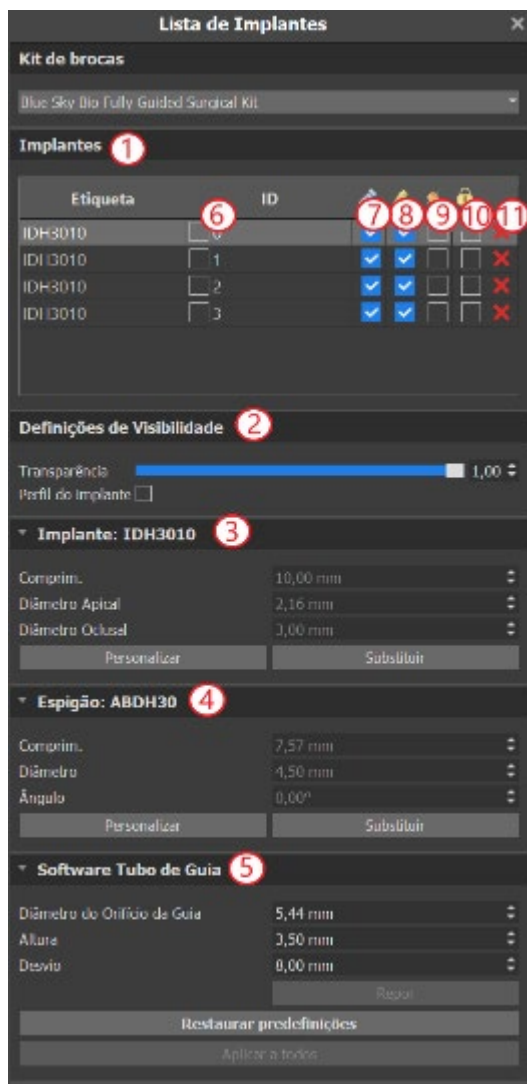


Ele contém uma lista de todos os implantes (1), as configurações para a transparência e visibilidade dos contornos na vista 2D (2), os parâmetros do implante ativo (3), seu pilar (4) e o guia de perfuração (5). Para um pino, as propriedades do pino são exibidas em vez das propriedades do implante e do pilar. Para as seções de implante e pilar, também existem os botões "Personalizar" e "Substituir". O botão "Personalizar" substitui o implante por sua variante totalmente parametrizada. "Substituir" abre a mesma caixa de diálogo para adicionar um implante e possibilita a substituição do implante pela variante selecionada.

Várias propriedades do implante podem ser alteradas rapidamente na lista de implantes. Um é o ID (6), que é uma breve descrição do implante. É possível alterar a visibilidade do ID clicando duas vezes nele e alternar sua visibilidade nas janelas com a caixa de seleção. A caixa de seleção sob o implante (7) altera a visibilidade do implante, a caixa de seleção sob o ícone do pilar (8) altera a visibilidade do pilar e a caixa de seleção sob a guia da broca (9) altera a visibilidade da broca guia. Todas as configurações de visibilidade são independentes umas das outras. Finalmente, para cada implante há um ícone para removê-lo (11) e travá-lo (10).


8.5 Interação com os parâmetros de implantes selecionados

Os parâmetros do implante podem ser exibidos no menu de contexto. Se o painel lateral for exibido, o implante associado será selecionado neste painel e seus parâmetros aparecerão. Se este painel estiver oculto, uma caixa de diálogo especial será exibida quando o usuário tentar exibir os parâmetros. Ele exibe novamente o ID do implante (1), os parâmetros do implante (2), os parâmetros do pilar (3) e os parâmetros da guia de perfuração (4). Para um pino, os parâmetros do pino aparecem aqui, em vez dos parâmetros do implante e do pilar, da mesma forma que no painel lateral.

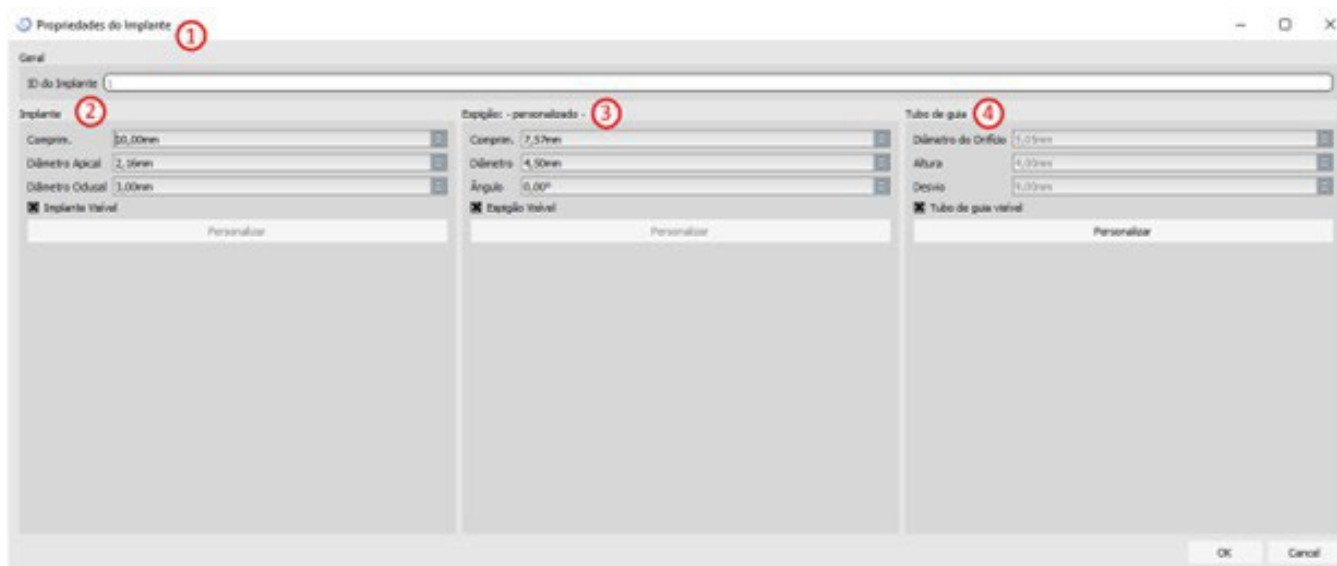


8.6 Validação dos Implantes

Todos os implantes são validados em segundo plano. Isso significa que suas posições uma em relação à outra e aos nervos são verificadas. Se um implante for avaliado como inválido, o ícone  aparecerá próximo a ele.

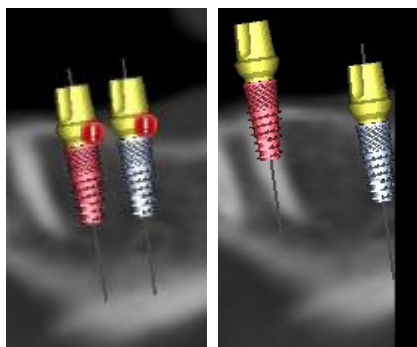

O primeiro critério considerado é a distância entre os implantes. Se dois implantes estiverem muito próximos um do outro, ambos serão avaliados como inválidos, o que é representado pela aparência de ícones sobre os dois implantes.

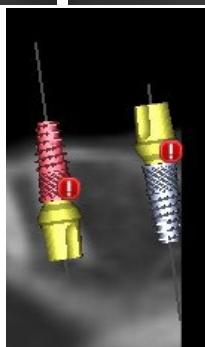

O segundo critério é o ângulo entre os implantes. Se esse ângulo for muito grande, os implantes são novamente avaliados como inválidos, apesar de estarem relativamente distantes. Para cumprir os critérios de validação, devemos reduzir o ângulo entre os implantes e, se necessário, aumentar novamente a distância entre os implantes.

O terceiro critério é a distância do nervo. As mesmas considerações se aplicam aqui quanto à distância entre os implantes.

Se você não tiver certeza do motivo da falha na validação, poderá abrir um painel com os resultados da validação em “Painéis > Validação de Implante”. Neste painel também é possível definir os parâmetros de validação (1). Há uma lista aqui de todos os implantes inválidos (2) e os motivos pelos quais a validação do implante selecionado falhou (3).

Nota: os pinos não são validados contra si mesmos (ou implantes) ou contra nervos.

Validação do Implante

Definições de Validação 1

☒ Implantes - prof. broca

☒ Implantes - aviso kit broca

☒ Implantes - violação do tubo de guia

☒ Implantes - distância mínima

3,00mm

☒ Nervo - distância mínima

2,00mm

☒ Implantes - ângulo máximo

15,00°

Implantes - distância de verificação de ângulo

100mm

Tolerância de Colisão do Tubo de Guia

1,50mm

Repor Predefinições

Implantes Inválidos 2

ID	Etiqueta	Ângulo
----	----------	--------

Resultados de Validação 3

8.7 Pedidos de Implantes

Os implantes podem ser solicitados diretamente pelo aplicativo, selecionando Solicitar implantes na barra de ferramentas.



O site da Blue Sky Bio será carregado automaticamente, e os implantes usados no plano de tratamento serão adicionados automaticamente ao carrinho de compras. Implantes e itens adicionais podem ser adicionados ao carrinho de compras, continuando as compras pelo site.


Se foram utilizados implantes personalizados (implantes que não foram selecionados no catálogo Blue Sky Bio) no plano de tratamento, esses implantes não serão adicionados automaticamente ao carrinho de compras.

9 Ferramentas

Este capítulo explica as propriedades de cada ferramenta Blue Sky Plan® e a barra de ferramentas que contém as ferramentas mais usadas no aplicativo.


9.1 Barra de Ferramentas

- 1 – Barra de menus (acesso a todas as ferramentas de software)
- 2 – Barra de ícones (acesso rápido às principais ferramentas)
- 3 – Ícones de visualização 3D (rotação de visualização, configurações de renderização de volume e visibilidade de fatias)
- 4 – Ícones panorâmicos (passo de deslocamento, modo de raio X, etc.)

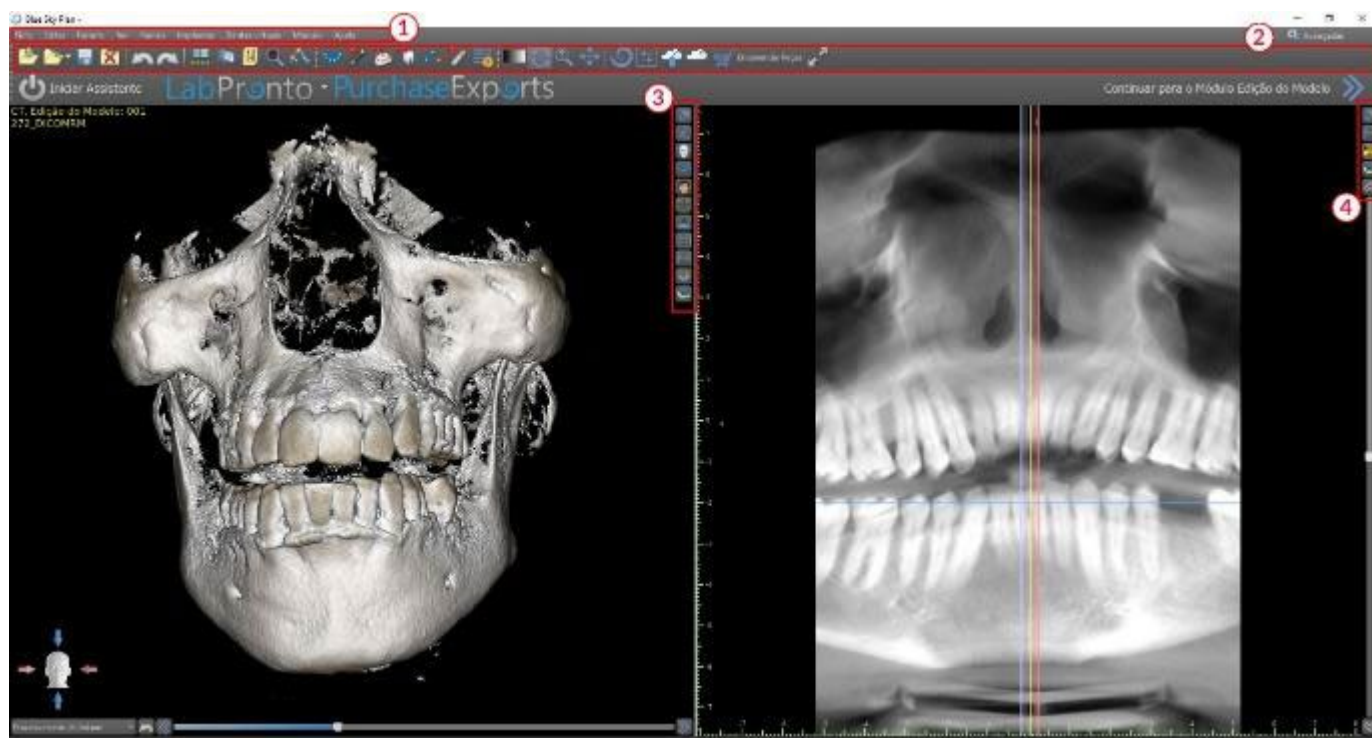

Barras de ferramentas adicionais podem ser exibidas por meio das opções de contexto na barra principal ou através da opção “Exibir > Barras de Ferramentas”.

9.2 Abrindo um projeto

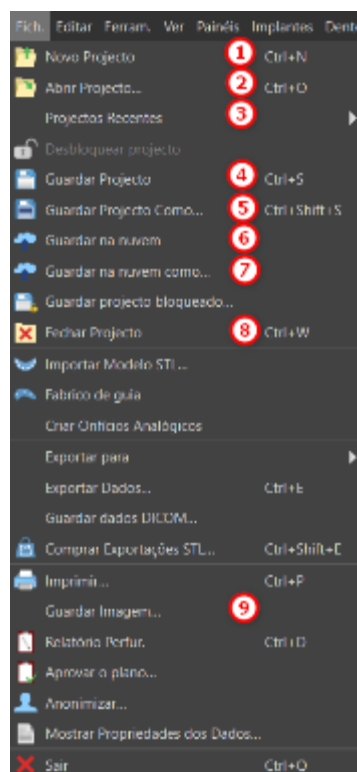

Depois de clicar na opção de menu “Arquivo NovoProjeto” (1), o aplicativo retornará ao menu principal. Você pode criar um novo projeto, selecionando o tipo de planejamento. Você pode abrir projetos já existentes clicando em “Arquivo > Abrir Projeto” (2), é possível abrir o projeto utilizado mais recentemente em “Arquivo > Projetos Recentes” (3).

9.3 Salvando um projeto

Para salvar um projeto modificado, clique na opção de menu “Arquivo > Salvar projeto” (4). Para salvar um projeto com um novo nome, clique na opção de menu “Arquivo > Salvar projeto como” (5). Os projetos também podem ser salvos em uma conta on-line segura para tornar os dados acessíveis a partir de qualquer computador no qual o usuário esteja conectado. Para fazer isso, clique na opção de menu “Arquivo > Salvar na nuvem” (6) ou “Arquivo > Salvar na nuvem como” (7). Se a sincronização na nuvem em “Preferências > Geral” estiver ativada, toda vez que você salvar o projeto, ele também será salvo na nuvem.

9.4 Fechando um projeto

Para fechar um arquivo de projeto, clique na opção de menu “Arquivo > Fechar projeto” (8).


9.5 Salvando imagens em formato JPG

Para salvar as imagens de tela atualmente visíveis no formato .jpg, clique na opção de menu “Arquivo > Salvar imagem” (7) e escolha a pasta em que deseja salvar as imagens ou o arquivo PDF.

9.6 Salvando capturas de tela e gerando um relatório de perfurações

As capturas de tela também podem ser capturadas individualmente usando o botão “Captura de tela” (1) localizado no lado direito de cada visualização. As capturas de tela capturadas são inseridas na lista no painel “Capturas de tela” (2), que pode ser acessado no menu “Painéis”.

Para a maioria das fatias, isso possibilita extrair não apenas a visualização atual, mas também todas as outras posições de fatia possíveis com as configurações atuais. As imagens da tela são capturadas no tamanho correspondente ao tamanho atual da janela e na configuração (3) no painel "Capturas de tela".

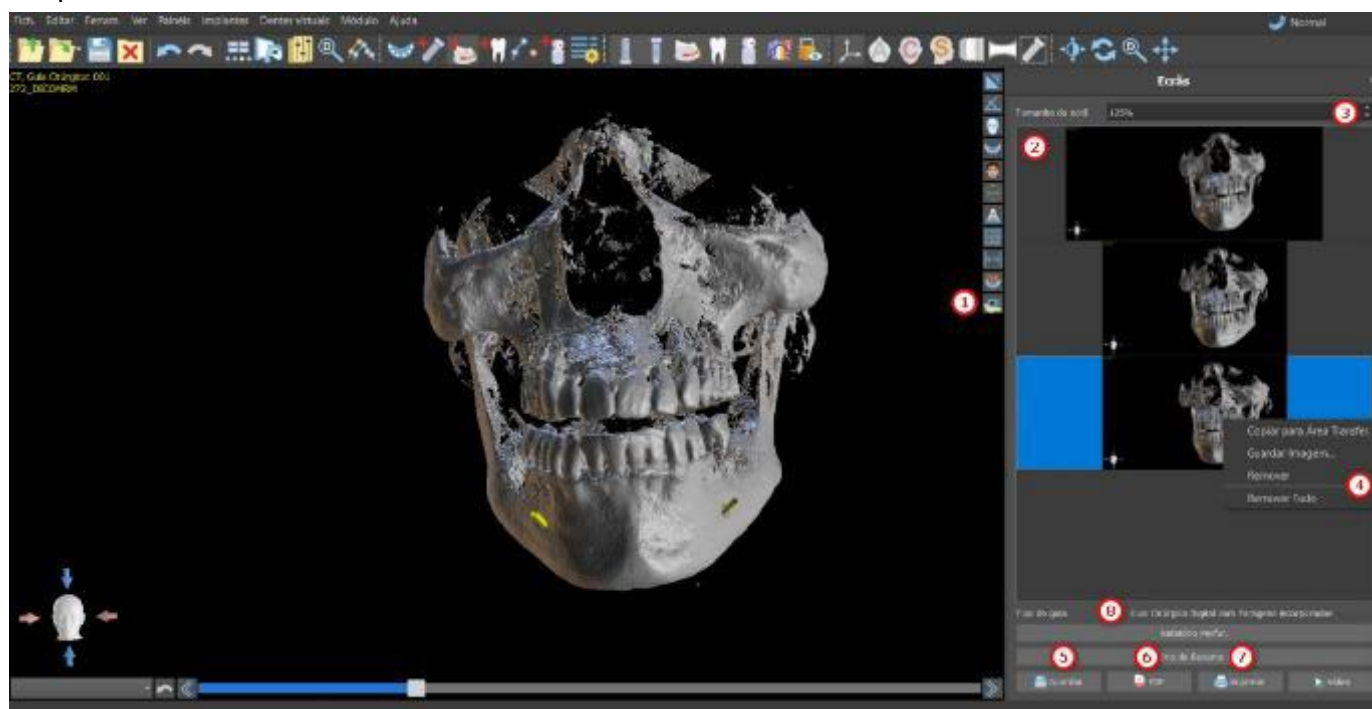

Usando as opções do menu de contexto, ao clicar no botão direito do mouse (4) na lista de capturas de tela (2), é possível copiar a captura de tela selecionada na área de transferência, salvá-la no disco ou removê-la da lista. A captura de tela pode ser exibida em seu tamanho original clicando duas vezes na visualização.

As capturas podem ser salvas individualmente no formato de bitmap selecionado (5), um documento PDF de todas as janelas (6) e o documento pode ser impresso diretamente (7).

9.6.1 Relatório de perfuração

Um conjunto de capturas de tela também pode ser criado com o botão "Relatório de perfuração" (8), que cria um conjunto de capturas instantâneas contendo a vista 3D, a vista panorâmica e um par da vista normal e tangencial para cada implante planejado.

9.6.2 Exportando PDF e configurações de impressão


Ao exportar para um arquivo PDF e imprimir, o layout das imagens na página pode ser selecionado na seção "*Layout da página*" (1). No modo "*Somente tamanho reduzido*" (2) o programa não amplia as imagens e tenta manter o tamanho real.

The image shows a software configuration window for 'Blue Sky Plan' with the following sections and numbered callouts:

- 1. Esquema de página:** Options for page layout including 'Uma imagem por página', 'Tudo numa página', 'Personal.' (selected with dimensions 3 x 2), 'Melh. ajuste', 'Reduzir apenas (preferência tamanho real)', and 'Colocar tipo visualização diferente numa nova linha'.
- 2. Reduzir apenas (preferência tamanho real):** A checkbox option.
- 3. Cabeçalho:** Header configuration section with a font dropdown set to 'Arial' and size '14', and a text area containing 'Zpráva Blue Sky Plan'.
- 4. Rodapé:** Footer configuration section with a font dropdown set to 'Arial' and size '12', and a text area containing 'Blue Sky Plan'.
- 5. Info.:** Information section with a font dropdown set to 'Arial' and size '12'. It includes checkboxes for 'Nome do Doente', 'ID do Doente', 'Data Digital', 'Data', and 'Nome do Projecto'.
- 6. Lista de Implantes:** Implants list section with a font dropdown set to 'Arial' and size '10'. It includes checkboxes for 'Formato do relatório da guia', 'Ocultar a mensagem do relatório de perfuração de 0,7 mm', and 'Informação do espigão'.
- 7. Título da Imagem:** Image title section with a font dropdown set to 'Arial' and size '12'. It includes a color selection box and checkboxes for 'Alinhar a superior', 'Alinhar a inferior' (selected), 'Colocar título sobre imagem', 'Mostrar posição de corte', and 'Mostrar escala'.
- Notas:** A section for notes with a font dropdown set to 'Arial' and size '12'.

At the bottom right of the window are 'OK' and 'Cancel' buttons.

O documento criado pode ser complementado com um cabeçalho de usuário (3) e rodapé (4), informações básicas sobre o paciente e o projeto (5), uma tabela de implantes (6) e uma descrição de cada imagem inserida na imagem (7). Depois que as configurações são confirmadas, o documento criado aparece na janela de visualização.

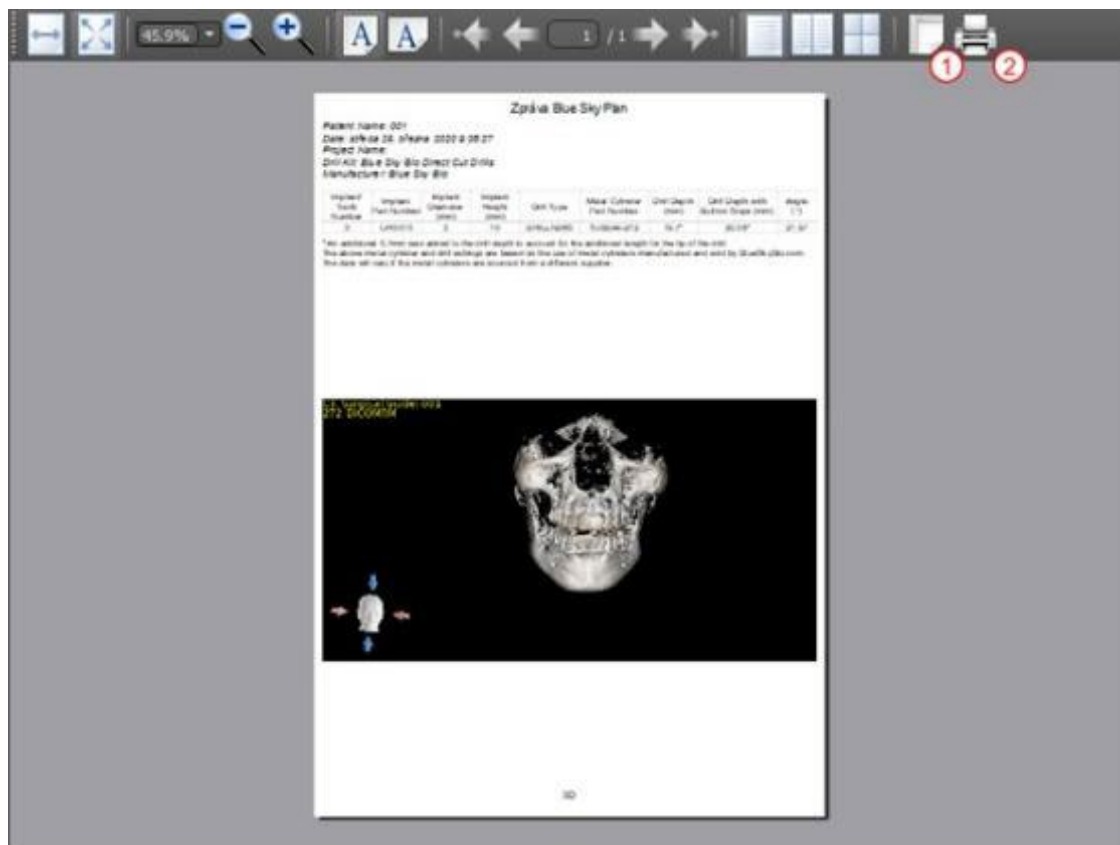

9.7 Modificando janela e nível

O brilho da tela e o contraste dos dados de densidade podem ser alterados no painel "Brilho / contraste" (2), que pode ser acessado no menu "Painéis" (1). O brilho e o contraste também podem ser alterados com um modo especial do mouse (3), no qual o movimento ao longo do eixo horizontal enquanto pressiona o botão esquerdo do mouse altera o brilho, e o movimento ao longo do eixo vertical altera o contraste.



9.8 Zoom

Para aumentar o zoom, pressione e mantenha pressionado o botão direito do mouse e arraste o mouse para cima ou para baixo.

Uma segunda opção é selecionar o ícone de zoom  (como mostrado abaixo) e mantenha pressionado o botão esquerdo do mouse enquanto move o mouse para frente ou para trás.



9.9 Movendo a imagem

Clique no ícone “Mover imagem”  e arraste a imagem conforme desejado. Uma imagem também pode ser movida mantendo a roda do mouse pressionada (pressionando-a e não rolando) e arrastando a imagem.




9.10 Movendo objetos

No modo padrão do mouse (representado pelo ícone do modo Trackball  na barra de ícones), clicar com o botão esquerdo altera a posição da fatia. Se o cursor do mouse estiver posicionado sobre um objeto que possa ser manipulado, o cursor mudará e o objeto poderá ser movido e, se necessário, seu ângulo de rotação ou tamanho poderá ser alterado usando o arrastador exibido.



9.11 Medições e Sobreposições

Os usuários podem realizar qualquer medida de densidade(1), comprimento(2), ou ângulo (3) em imagens 2D. Eles também podem inserir setas (4), descrições de texto (5) ou escala (6).

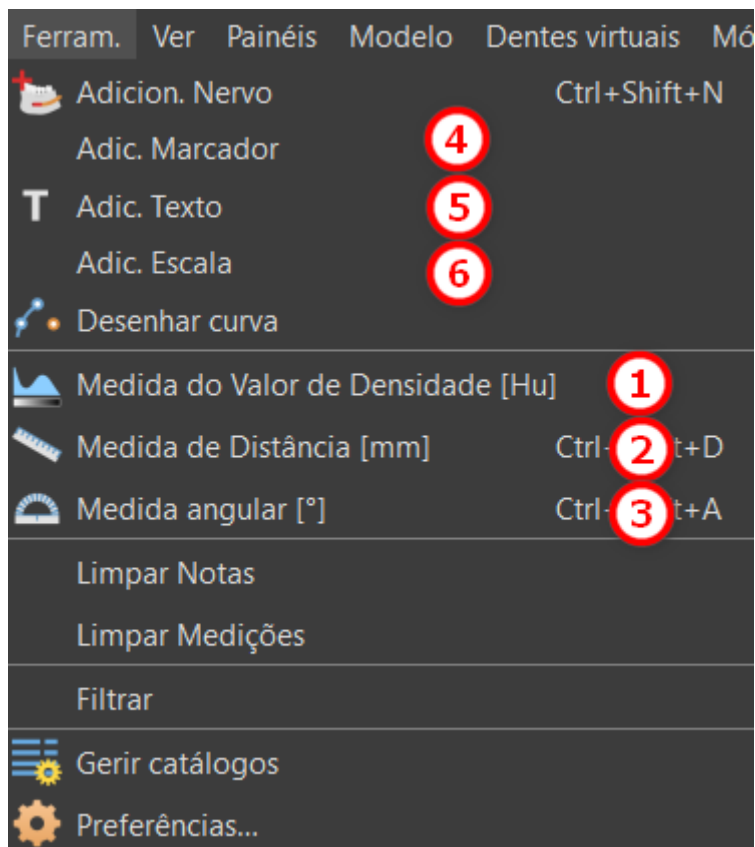

9.12 Medidas Lineares

Clique na opção de menu “Ferramentas > Medição da distância” (2) para realizar quaisquer medições 2D.

Clique no botão esquerdo do mouse com o ponteiro da imagem para marcar o ponto inicial da distância a ser medida e clique novamente na imagem para marcar o ponto final da distância medida. Para corrigir a medida, você pode pegar um dos pontos finais e movê-los.

9.13 Medidas Angulares

Clique na opção de menu “Ferramentas > Medida angular” (3). Clique no botão esquerdo do mouse com o ponteiro na imagem e repita o processo duas vezes para obter um ângulo. Para corrigir a medida, você pode pegar os pontos que especificam o ângulo.

9.14 Medições de Densidade

Clique na opção de menu “Ferramentas > Medida de densidade” (1). O valor da medição da densidade é obtido a partir das informações contidas na imagem do paciente e pode variar para cada tomografia ou TCFC. As medições são dadas em unidades de Hounsfield.

9.15 Correção das medições e número da posição

O usuário pode corrigir a medida e todas as sobreposições no modo padrão do mouse. É possível corrigir uma medida clicando na borda da medida com o botão esquerdo do mouse e arrastando. Também é possível posicionar o valor numérico da medição fora da imagem.

9.16 Deletando uma medição

É possível apagar uma medição de duas maneiras:

- Clique na aresta de medição ou clique no número com o botão direito do mouse. Um menu aparecerá com a opção de exclusão.
- Clique na opção de menu “Painéis > Lista de notas”. Um painel aparecerá (7) com uma lista de todas as medidas, tipos, valores e cores. Para apagar uma medida, clique no X ao lado da medida.

9.17 Sobreposições


Para adicionar texto ou outros tipos de sobreposições, selecione a ação correspondente no menu “Ferramentas”. Especifique a posição do item na janela selecionada clicando nele. A sobreposição inserida é vinculada a uma posição específica na fatia; não será visível para outras posições. As fatias ortogonais e a fatia normal podem ser posicionadas no local de uma sobreposição clicando duas vezes no campo “Tipo de nota” (1) ou no campo “Visualizar” (2) do item associado.

Nota	Tipo de Nota	Cor	Vista
88.14°	Ângulo	Amarelo	Axial
23.85 mm	Distância	Amarelo	Axial
-132 Hu	Densidade	Amarelo	Axial
MARKER	Marcador	Verde	Axial
871 Hu	Densidade	Amarelo	Axial
	Escala	Branco	Axial

O texto de uma sobreposição pode ser alterado clicando no campo “Nota” no painel “Lista de notas” (7) ou através do menu de contexto no item na fatia associada. A cor de vários tipos de itens também pode ser alterada no painel “Lista de notas” clicando no campo “Cor”.

9.18 Panorâmica

Uma imagem panorâmica é uma fatia panorâmica da boca e dos dentes. É um plano perpendicular da imagem axial.

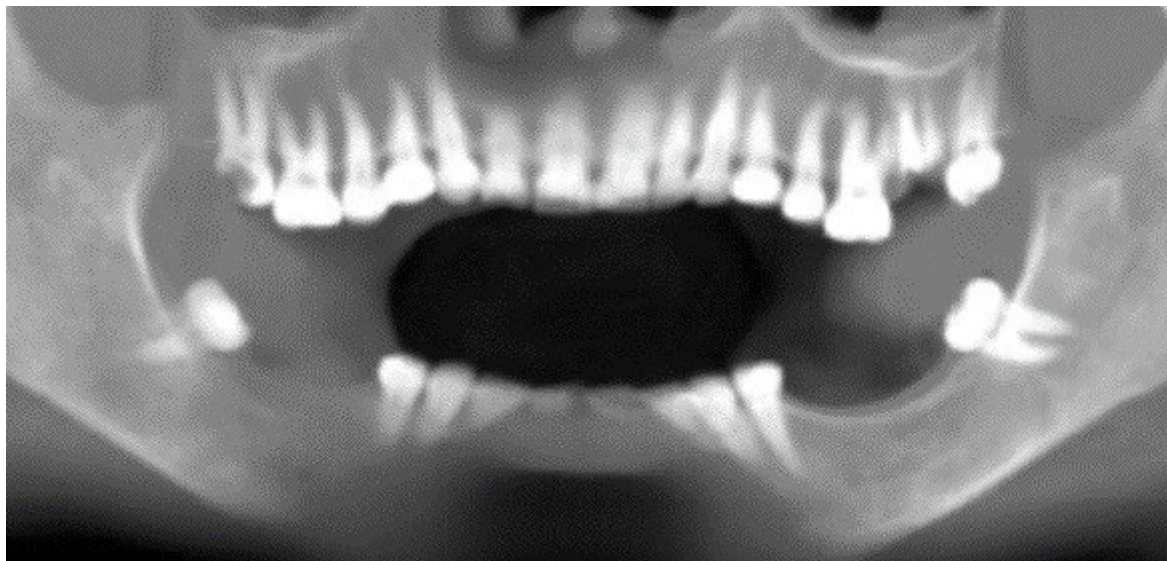

9.18.1 Criando a curva panorâmica

Consulte a Seção 4.6.

9.18.2 Canal Mandibular

O canal mandibular pode ser adicionado manual ou automaticamente (5) na imagem panorâmica e visualizado em todas as imagens.

9.18.3 Adicionando um canal mandibular

Ajuste a curva panorâmica para ajustar o arco do paciente, conforme descrito na seção 4.6. Clique no botão “Adicionar Nervo”, localizado na barra de ícones ou na opção “Ferramentas”, na barra de menu (1). O painel Nervos (2) será exibido e irá mostrar as propriedades padrão para o nervo (3). Clique nas partes do nervo na janela panorâmica e siga o canal até o forame mental.

Ao inserir pontos do nervo, a posição da fatia pode ser alterada com a barra de rolagem no lado direito da janela e o último ponto adicionado pode ser removido com a ação “Editar > Desfazer”. Você pode ajustar o aspecto vestibular / lingual ajustando o ponto do nervo na vista em corte transversal posteriormente. Adicione outro nervo clicando no botão “Add Nerve” (4) no painel Nerves e repita do outro lado. Todas as imagens devem mostrar o nervo com um diâmetro padrão em amarelo.



Também é possível adicionar um nervo clicando no botão “Detectar Nervo”, onde um novo canal nervoso é adicionado, basta clicar dentro do forame mental na fatia correspondente da vista transversal. Você também pode utilizar a detecção de nervos completamente automatizada clicando no botão “Autodetectar nervos”.

Observação: Um canal nervoso detectado automaticamente deve ser verificado em todo o seu trajeto nas vistas panorâmica, transversal e axial e corrigido se necessário (consulte as seções 1.2 e 1.3).



9.18.4 Alteração dos parâmetros do canal mandibular


Clicar na cor do nervo na lista (2) abre a janela de seleção de cores. Após a escolha, confirme sua seleção pressionando “OK”. A largura do nervo é exibida na coluna adjacente. Isso pode ser alterado clicando na janela e inserindo novos valores ou clicando repetidamente nas setas ao lado para alterar o valor em incrementos de 0,1 mm.

9.18.5 Deletando o canal mandibular

Selecione a opção de menu “Painéis > Lista de nervos” e clique na letra X ao lado do nervo a ser excluído.


9.18.6 Exibição do Canal em diferentes modos de visualização panorâmica

Conforme descrito na Seção 5.1.3, na vista panorâmica é possível alternar entre o modo composto e o modo de exibição de fatia. No modo composto, todo o canal mandibular é exibido na forma de um contorno, incluindo todos os pontos de controle (veja a imagem). No modo de fatia, apenas os pontos de controle próximos ao plano panorâmico são visíveis. O canal mandibular em si só é exibido na forma de fatias do mesmo plano.

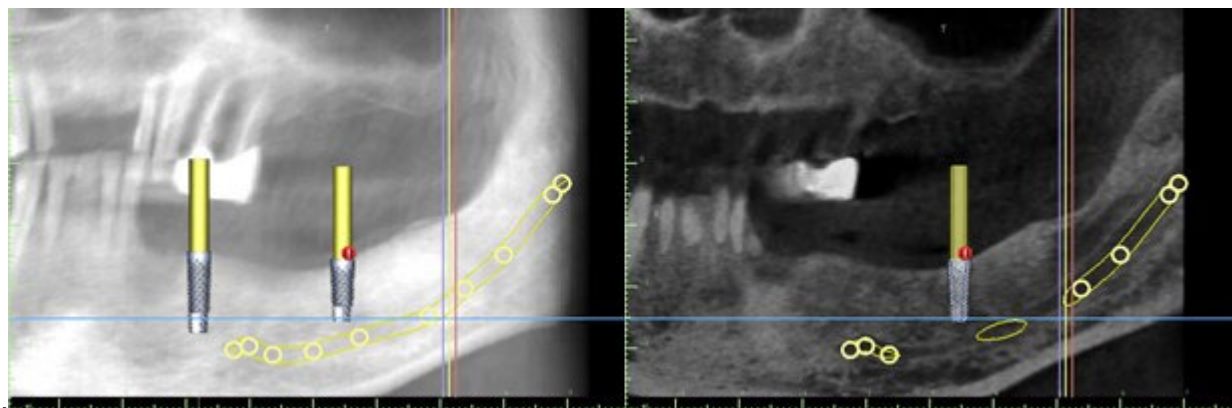

9.19 Mostrar dimensões

Esta ferramenta de medição está disponível nos módulos Modelo Mestre, Avançado e Guia Cirúrgico (Endodôntico). Clique com o botão direito do mouse em um objeto na cena 3D e selecione "Mostrar dimensões" no menu de contexto. As dimensões são ocultadas clicando em "Ocultar dimensões" no mesmo menu de contexto. Em Ferramentas > Mostrar dimensões (1), é possível ativar a multisseleção sem precisar clicar em "Mostrar dimensões". A multisseleção é desativada ao clicar fora do objeto. Todas as dimensões podem ser ocultadas ou exibidas novamente no painel Superfícies (2).

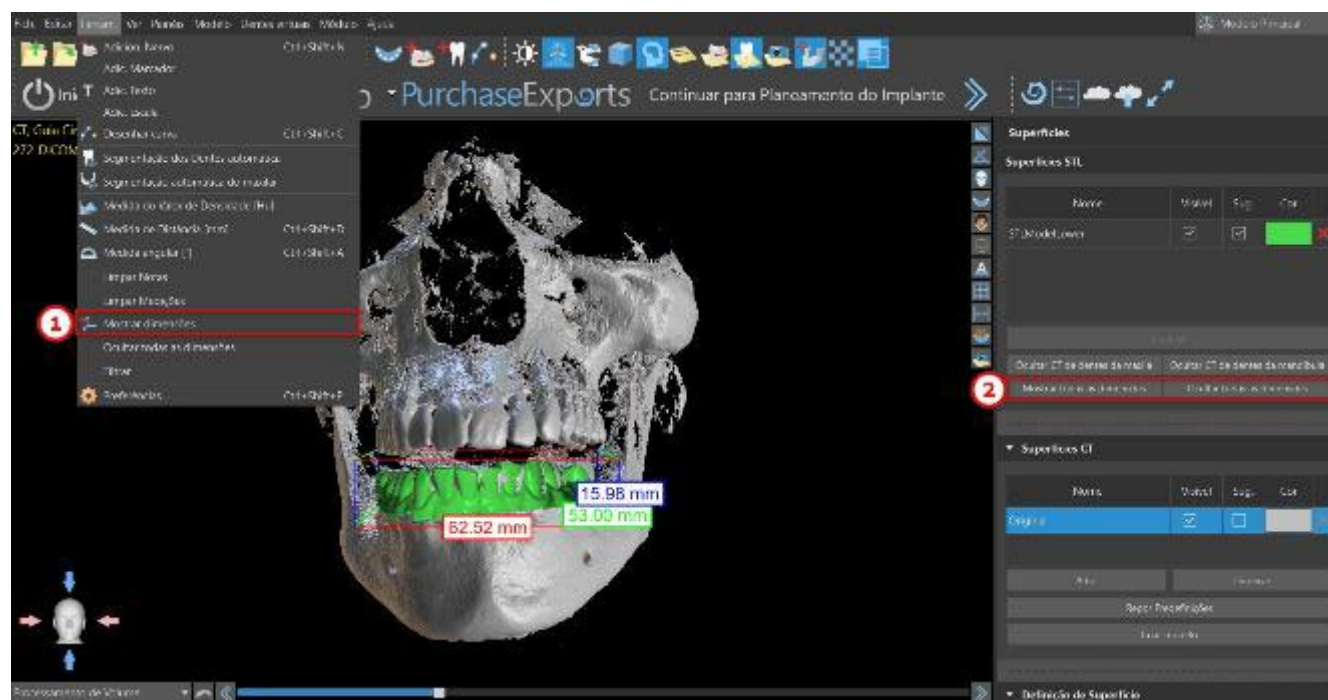

10 Importando o dispositivo de digitalização

O Protocolo de Digitalização Blue Sky Plan® exige duas tomografias computadorizadas. O primeiro exame deve ser do paciente usando um dispositivo de digitalização e o segundo deve ser apenas do dispositivo de digitalização. Como o dispositivo de digitalização é feito principalmente de material radiolúcido, o aparelho de escaneamento não aparece na digitalização do paciente.

No entanto, ele aparece quando digitalizado sozinho, pois a densidade relevante do dispositivo de escaneamento é maior que a densidade do ar, fazendo com que apareça na digitalização. O software permite que as duas digitalizações sejam mescladas para que o Dispositivo de Digitalização apareça na digitalização do paciente. A combinação do Dispositivo de Digitalização é um auxílio para o planejamento adequado do tratamento, pois mostra a posição dos futuros dentes e remove os artefatos que possam ter aparecido anteriormente na área dos dentes.


Siga as etapas abaixo para importar o dispositivo de escaneamento:


1) Carregue o conjunto DICOM do paciente no aplicativo Blue Sky Plan.

2) No módulo de “Modelo Mestre”, selecione “Arquivo> Importar DICOMS >Dispositivo de escaneamento”. Siga as instruções para identificar o local dos DICOMS do dispositivo de escaneamento e selecione a região de interesse relevante, selecionando apenas o intervalo que contém o dispositivo de escaneamento.



O dispositivo de escaneamento também pode ser importado por meio do módulo de “Modelo Mestre”, na tela principal. Após selecionar “Modelo Mestre > Importar escaneamento de TC do paciente”, siga as instruções e selecione a região de interesse (conforme descrito acima). Feito isso, a janela com diversos tipos de superfícies adicionais será exibida. Selecione “Importar escaneamento de TC da prótese ou Escanear dispositivo com marcadores”.

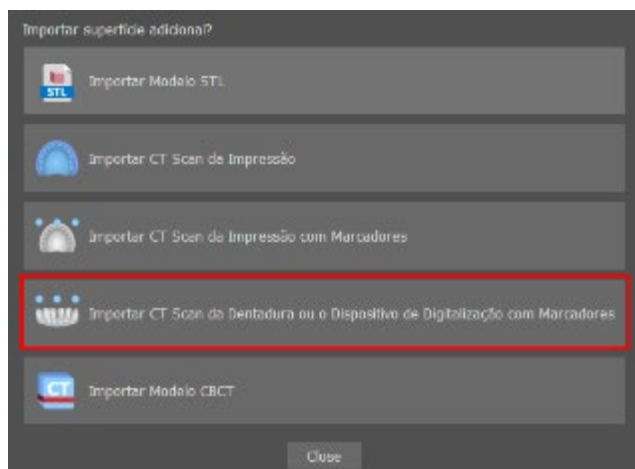

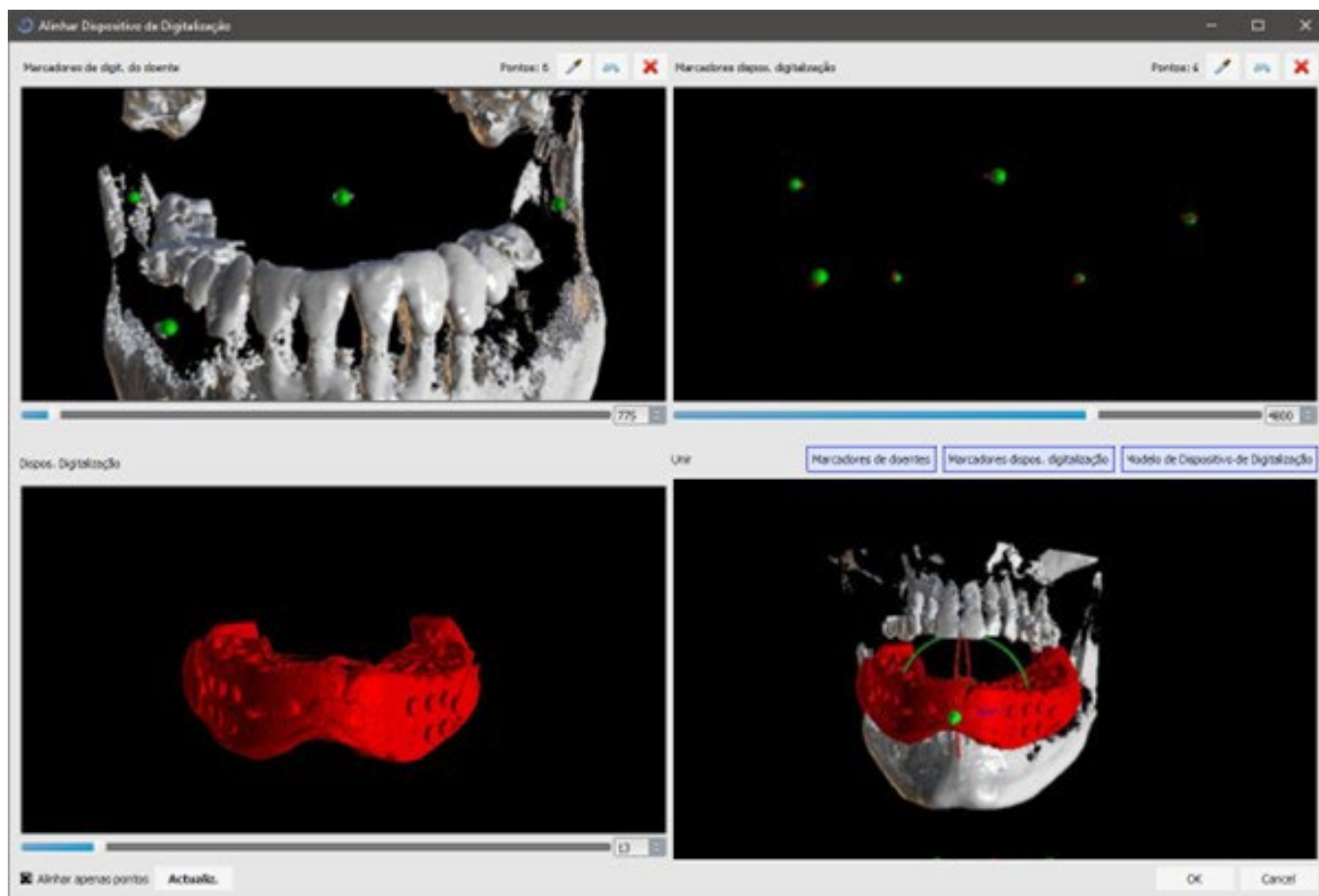


3) No processo de alinhamento, você pode usar os botões para alternar a exibição simultânea dos marcadores de guta dos dados do paciente (branco) e dispositivo de escaneamento (vermelho). Você pode exibir ou ocultar o modelo do dispositivo de escaneamento com o botão.

A caixa superior esquerda contém os marcadores de guta do exame do paciente. A caixa superior direita contém os marcadores de guta do dispositivo de escaneamento. A caixa inferior esquerda contém uma imagem do dispositivo de escaneamento. A caixa inferior direita exibe os dois conjuntos de marcadores de guta, se eles coincidirem.

10.1 Marcadores de Gutta Percha Coincidindo


Se os dois conjuntos de marcadores coincidem, continuamos da seguinte forma. Se eles não coincidirem, continue na seção 9.2.

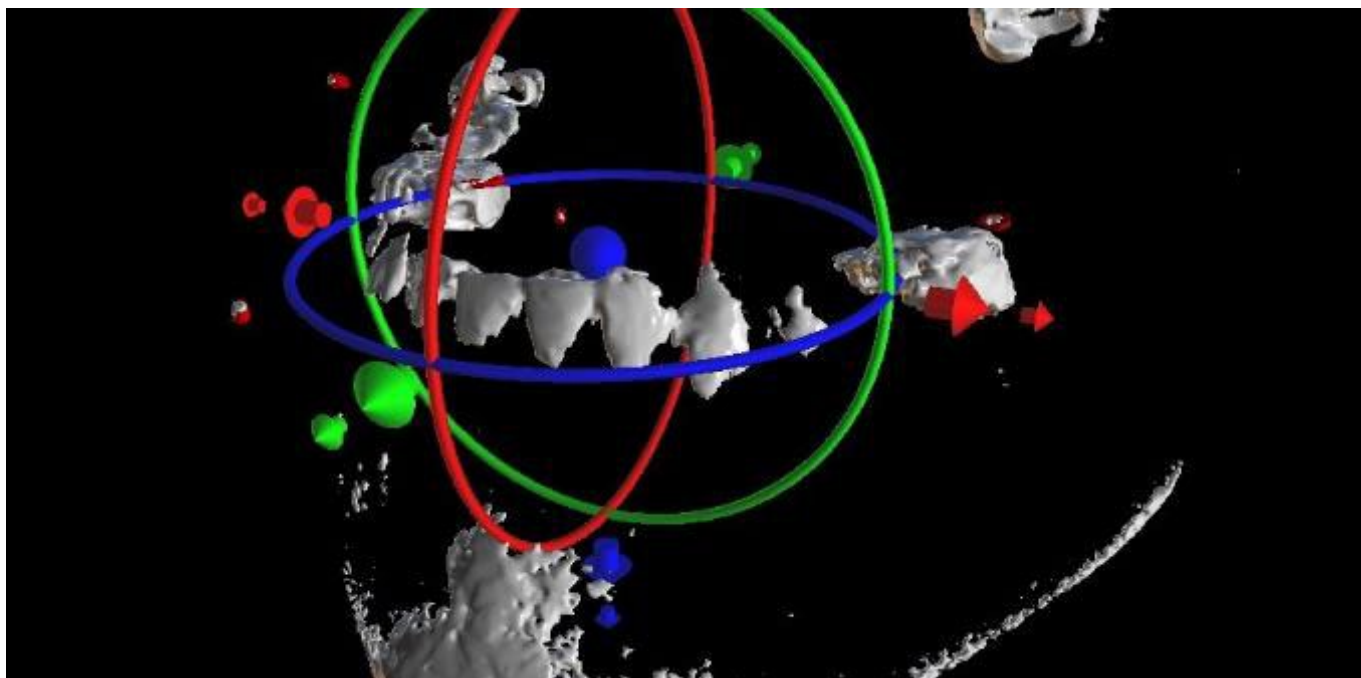

4) Confirme o alinhamento dos dados pressionando "OK".

5) O dispositivo de escaneamento aparecerá na imagem 3D da mandíbula do paciente. As propriedades do dispositivo de escaneamento podem ser alteradas no painel "Superfícies" da tabela "Superfícies importadas".

10.2 Marcadores de Gutta Percha não coincidindo

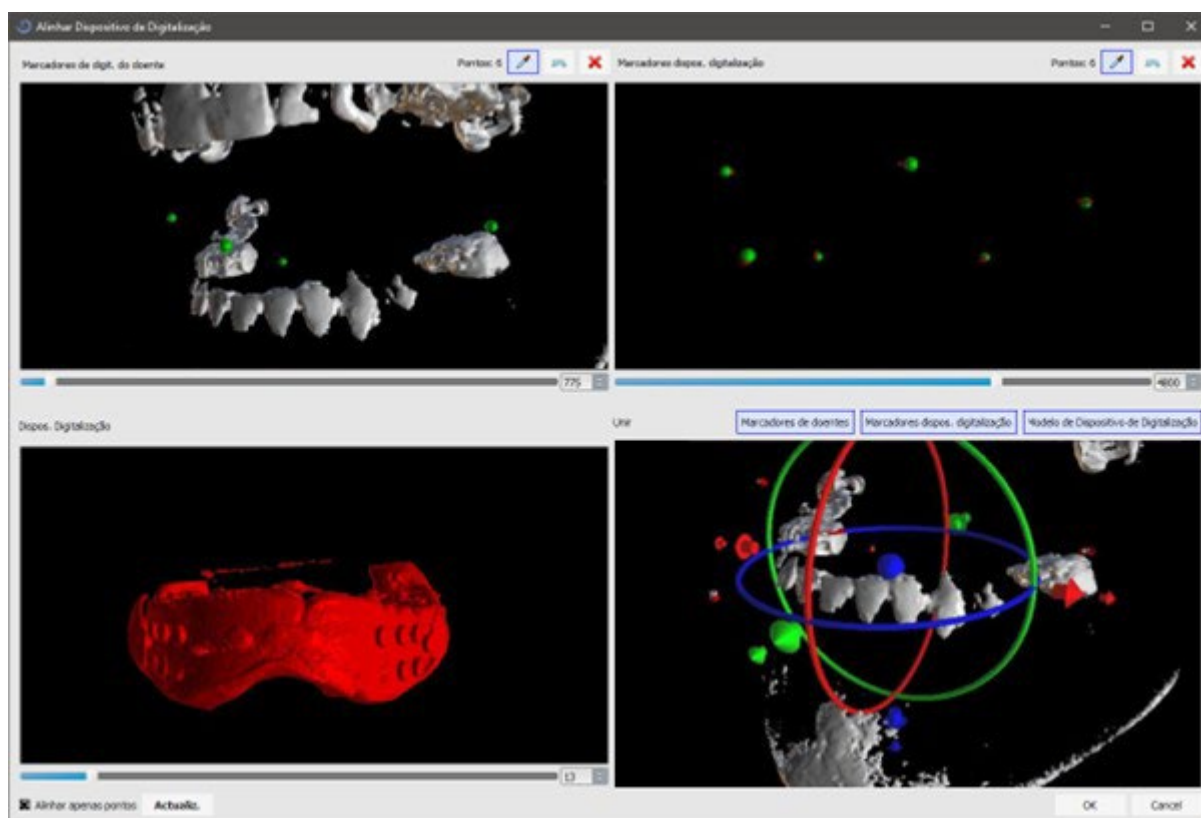

4) Na caixa superior direita, use a ferramenta de zoom (botão direito do mouse), o controle deslizante de densidade 3D e a ferramenta de rotação (botão esquerdo do mouse) para visualizar claramente

pelo menos quatro marcadores de guta. Identifique os marcadores de guta clicando no botão  ou pressionando a tecla "Shift" seguida de cliques com o botão esquerdo do mouse nos marcadores de guta. Uma identificação incorreta de um marcador pode ser revertida com o botão. Se necessário, todas as identificações podem ser canceladas com o botão.


5) Repita a etapa anterior para a caixa superior esquerda para identificar os marcadores do paciente.

6) Realize o alinhamento com base nos marcadores de guta identificados pressionando o botão "Atualizar". Se o resultado não corresponder aproximadamente ao desejado, identifique mais pontos para alinhamento ou, para dados com marcadores de gutta difíceis de discernir, marque "Alinhar somente pontos". Nesta configuração, o programa alinha os pontos identificados sem referência aos dados dimensionais. O alinhamento também pode ser corrigido manualmente usando o arrastador na janela inferior direita.



7) O dispositivo de escaneamento aparecerá na imagem 3D da mandíbula do paciente. As propriedades do dispositivo de escaneamento podem ser alteradas no painel "Superfícies" da tabela "Superfícies importadas".

11 Importação de modelo STL (planejamento com TC)

Os modelos STL existentes são importados para o Blue Sky Plan®, selecionando a opção “Importar Modelo STL” no menu pop-up automático após a importação da TC do paciente. Outra possibilidade é selecionar “Arquivo > Importar Modelo STL”.

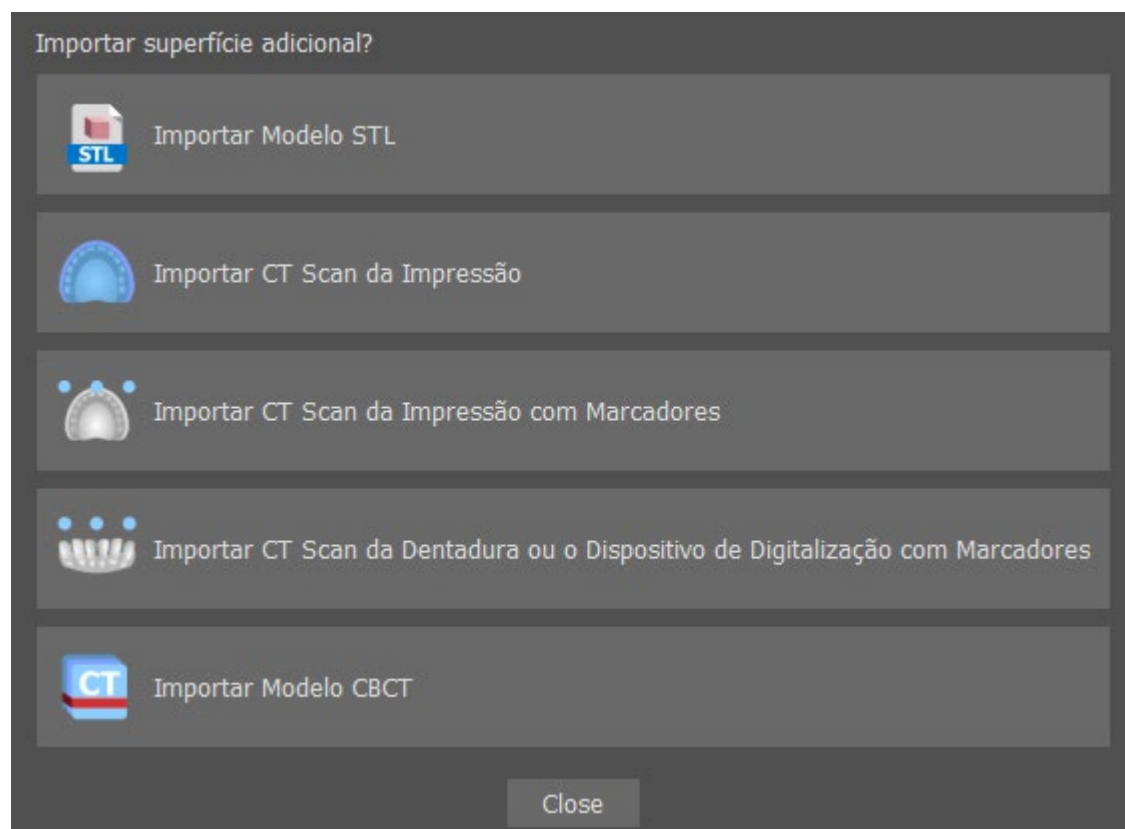


Após o modelo ser carregado, o Alinhamento Automático do Blue Sky Plan solicita a orientação do modelo e tenta alinhar o modelo automaticamente. A área selecionada pode ser limpada clicando no botão “Limpar seleção”.

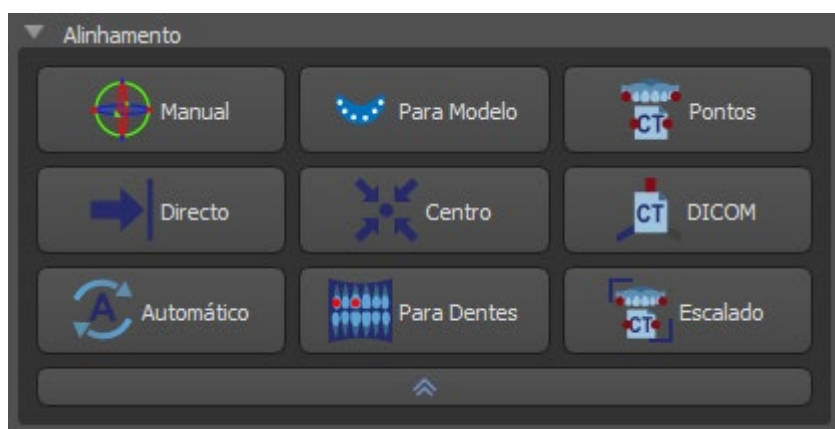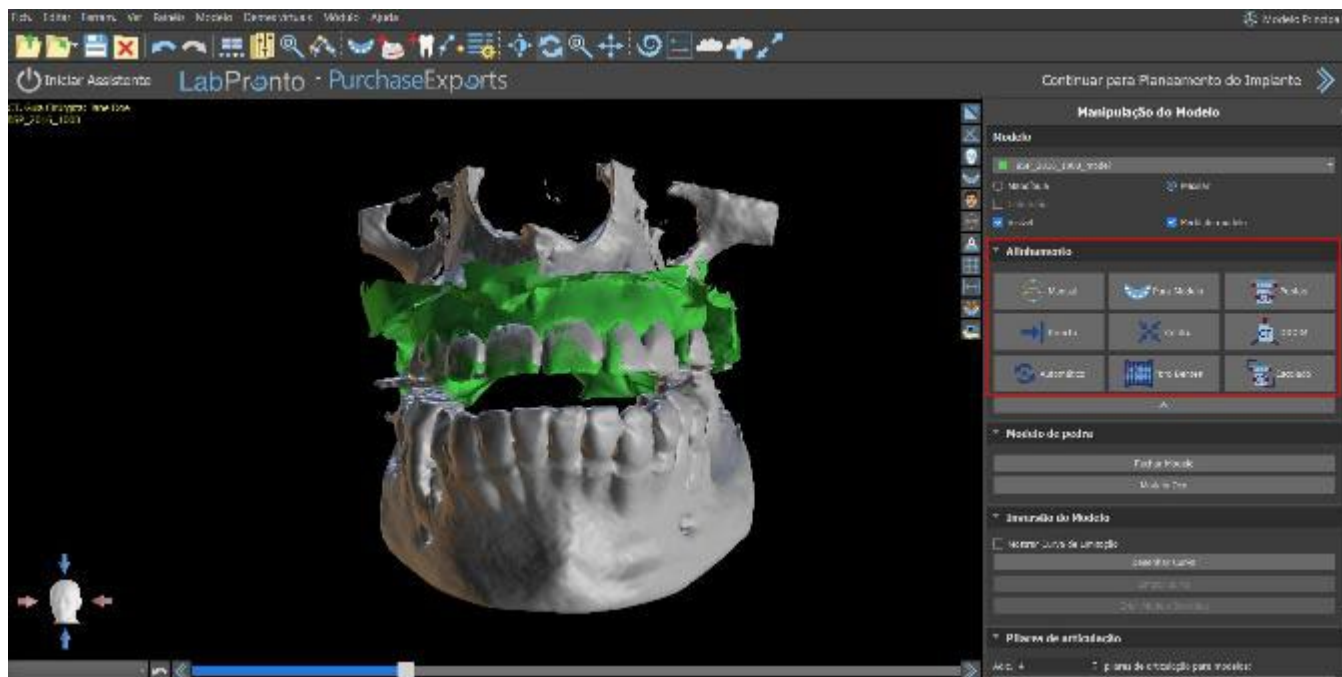

Se o modelo já estiver alinhado com os dados, “Direto” deve corresponder à posição correta do modelo. Para modelos STL criados com software diferente do Blue Sky Plan®, use o alinhamento “DICOM”. “Centro” coloca o modelo no meio da cena sem realizar nenhuma rotação.


Como o alinhamento automático geralmente não é suficientemente preciso, o Blue Sky Plan® também permite realizar o alinhamento inserindo um par de pontos correspondentes um ao outro. Se você selecionar “Pontos”, uma caixa de diálogo aparecerá para inserir os pontos manualmente. O modelo de superfície exibido na janela esquerda da caixa de diálogo é criado com base nas configurações da superfície de densidade atualmente selecionada. Também pode influenciar significativamente o tempo necessário para criar o modelo e a visibilidade dos pontos de referência pertinentes, definindo os limites da superfície de densidade.

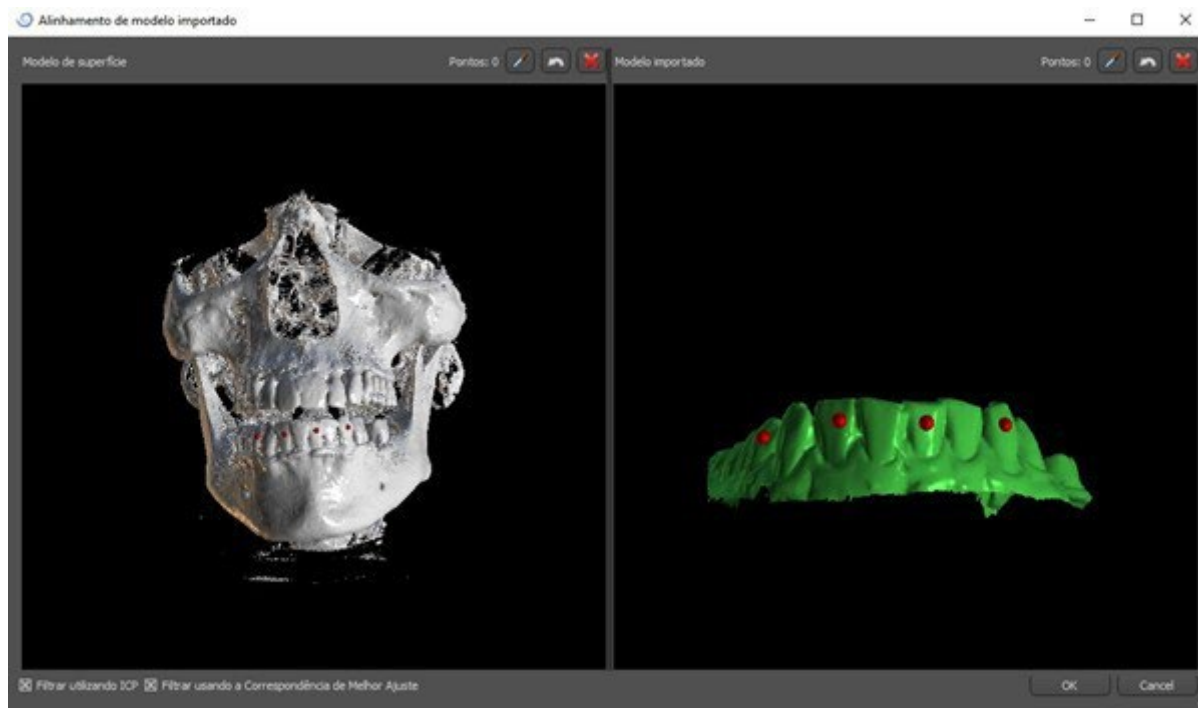

É possível adicionar pontos clicando no botão com o conta-gotas  ou pressionando a tecla Shift+botão esquerdo do mouse. Se “Refinar usando ICP” estiver ativado, o programa tentará executar um alinhamento automático adicional após o alinhamento com base nos pontos inseridos.

Uma maneira semelhante de alinhamento baseada em pontos é “Escalado” (funciona com escala extra) e “Para os dentes” (funciona com a imagem panorâmica em vez do modelo de superfície).

Também é possível alinhar o modelo manualmente na janela 3D usando o arrastador que aparece quando você pressiona o botão “Manual”. Clicar neste mesmo botão fecha o modo de alinhamento manual e o arrastador desaparece.

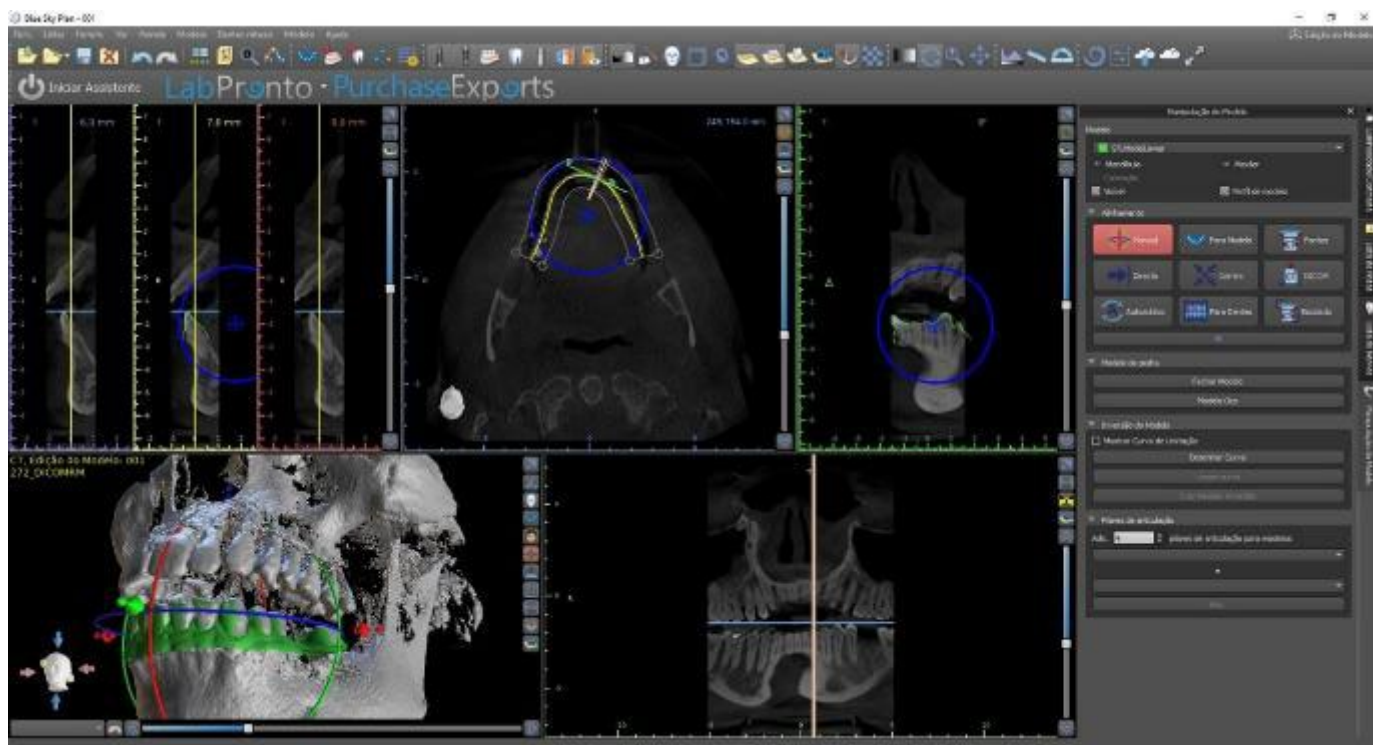


Ao alinhar manualmente, é possível definir um ponto fixo (o chamado eixo) em torno do qual o modelo gira. Nas vistas 2D, o eixo é representado por uma cruz. Ao arrastar a cruz, é possível mover o modelo no plano de visão. O modelo pode ser girado usando o círculo azul. Mantenha pressionada a

tecla Shift e clique com o botão esquerdo do mouse para posicionar o eixo em uma posição diferente nas vistas 2D. Na janela 3D, o eixo pode ser reposicionado usando as pequenas setas arrastadoras.


12 Planejando sem TC

O software Blue Sky Plan® também permite o planejamento de casos sem uma tomografia computadorizada - apenas modelos STL.


Se um usuário planejar um caso sem uma tomografia computadorizada, os modelos importados podem não ser orientados corretamente (a orientação não corresponde à cabeça no canto inferior esquerdo da visualização 3D). Isso torna o planejamento muito difícil. Nesses casos, o Blue Sky Plan possui uma caixa de diálogo de alinhamento de modelos, que é aberta ao selecionar o tipo de planejamento "Plano cirúrgico com escaneamento óptico".

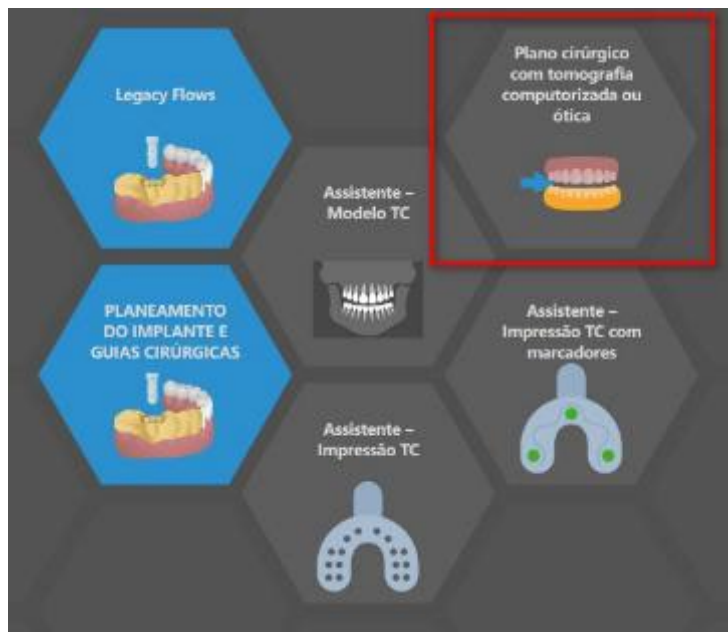


Você pode importar um ou vários modelos. Para o alinhamento, é necessário selecionar o modelo principal (idealmente maxila) através do qual o alinhamento é feito. O usuário também precisa especificar se o modelo é um Arco Dentado, Arco Edêntulo, ou um Arco Parcial.

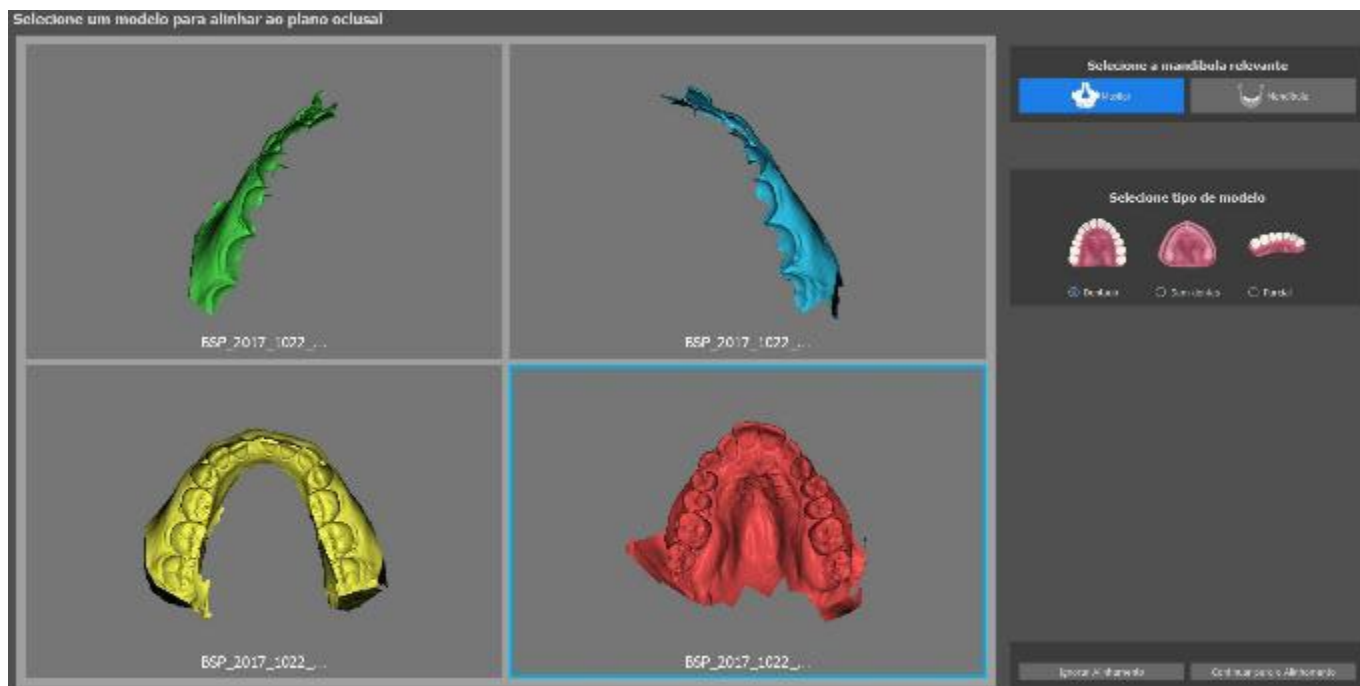


Na próxima etapa, o usuário marca três pontos no modelo (segurando Shift + Botão esquerdo do mouse) para auxiliar o software a alinhar os modelos de forma adequada (de modo a corresponder à orientação do sistema de coordenadas BSP). O restante dos modelos será alinhado em relação ao alinhamento do modelo primário.

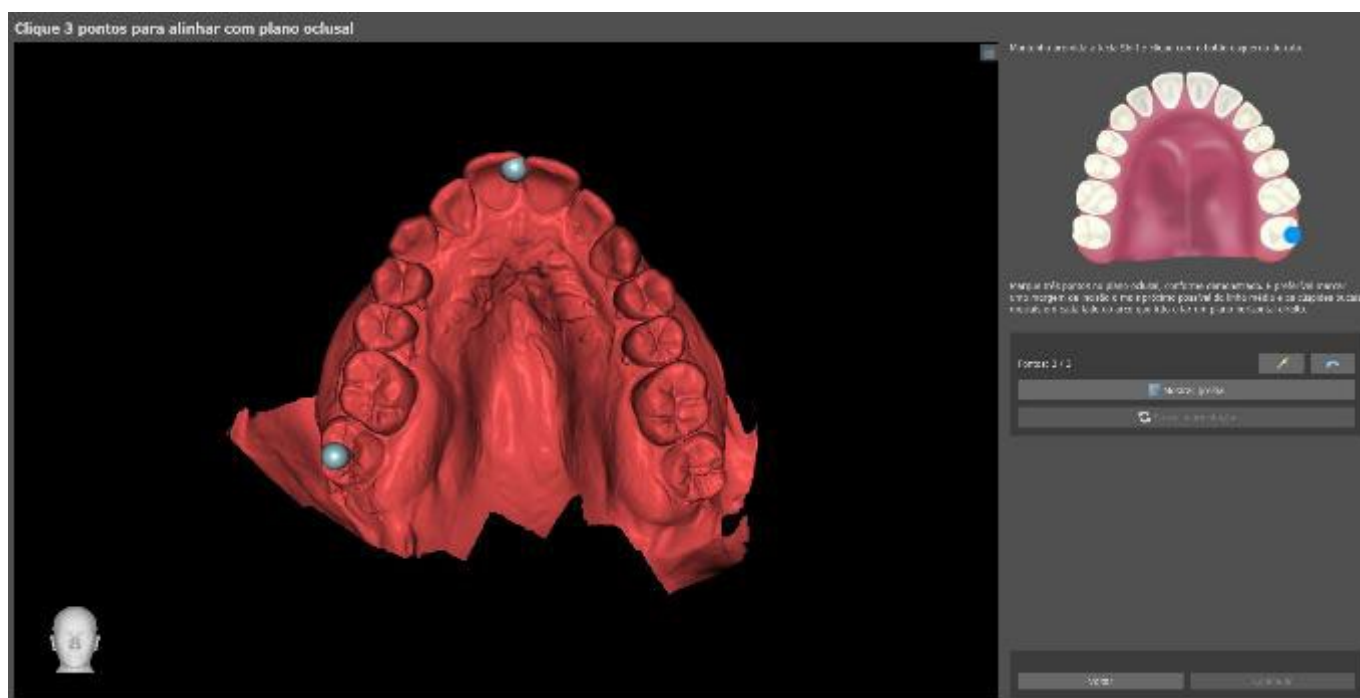


Na última etapa, o usuário pode ajustar manualmente o modelo principal usando a grade. Se vários modelos foram importados, eles se moverão juntos como um grupo.

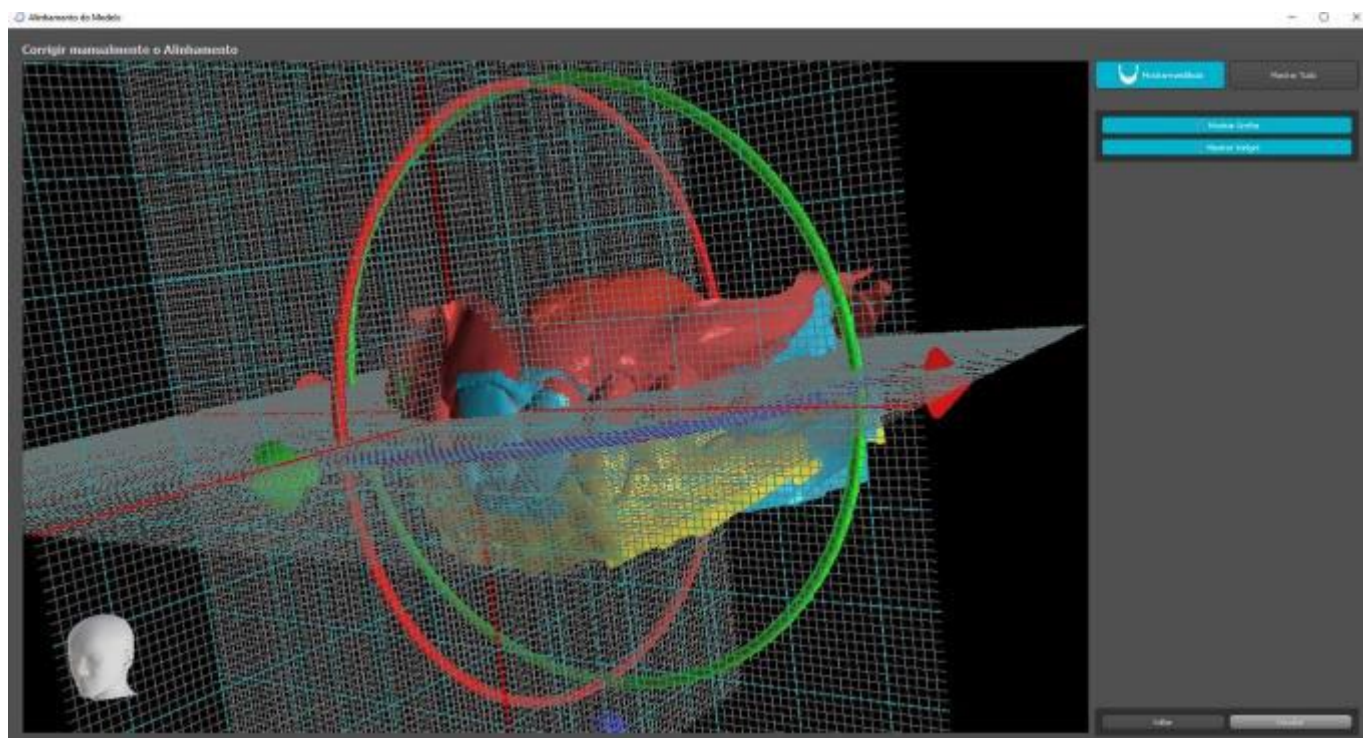

O software Blue Sky Plan® também permite ao usuário alinhar os modelos automaticamente. Esta opção pode ser modificada em Preferências.

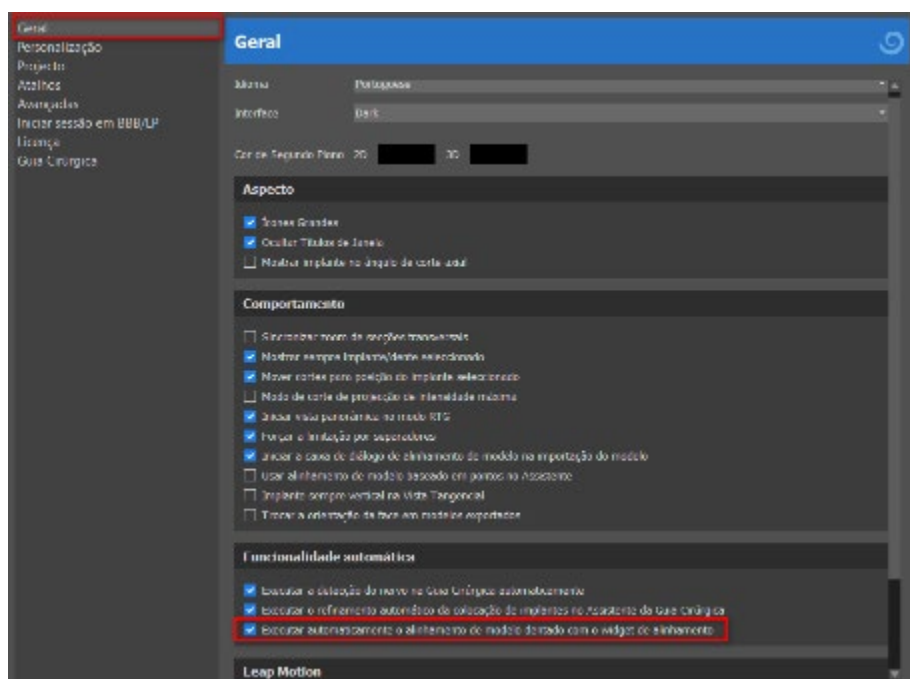


O modelo principal pode ser ajustado manualmente usando a grade. Se vários modelos forem importados, eles serão movidos juntos como um grupo. É possível redefinir a posição do modelo ajustado para sua posição alinhada automaticamente. O alinhamento do modelo STL será concluído clicando no botão “Concluir”.

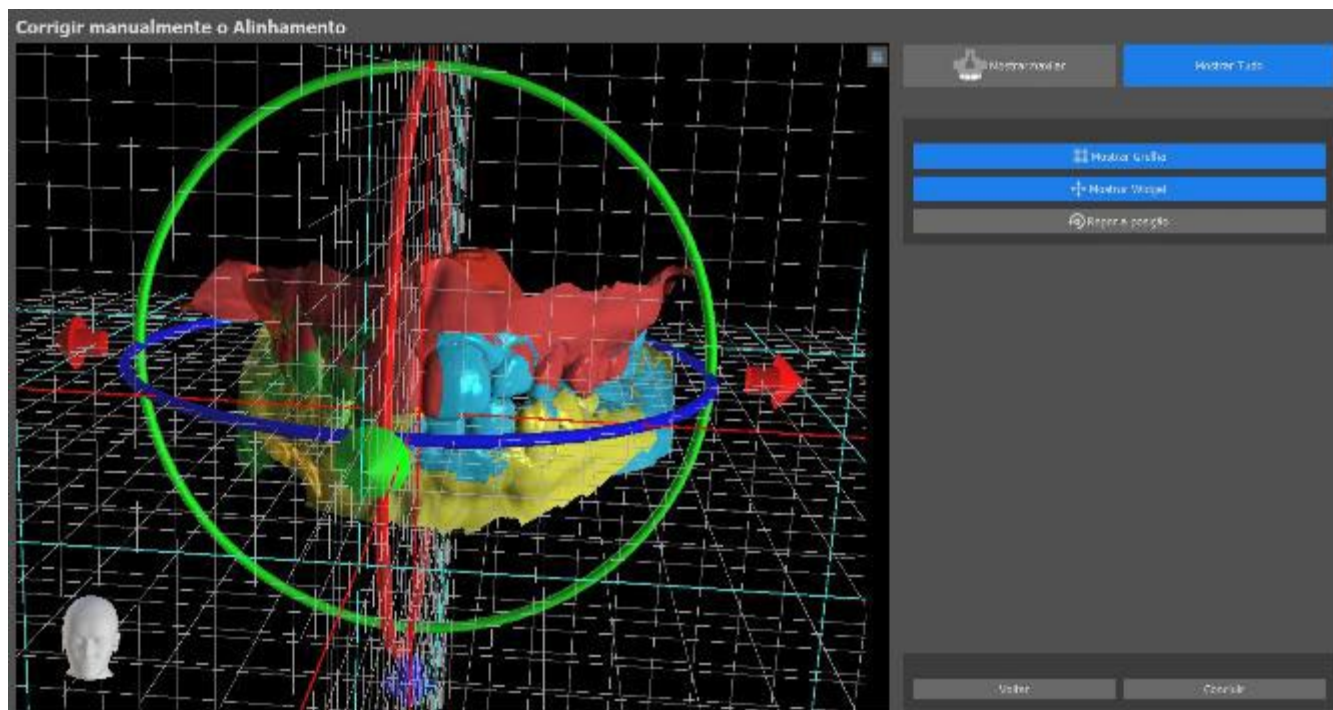

13 Ajuste de modelo STL

O software Blue Sky Plan permite ao usuário selecionar e remover parte da superfície (modelo) e fechar todos os furos que foram criados durante o processo.

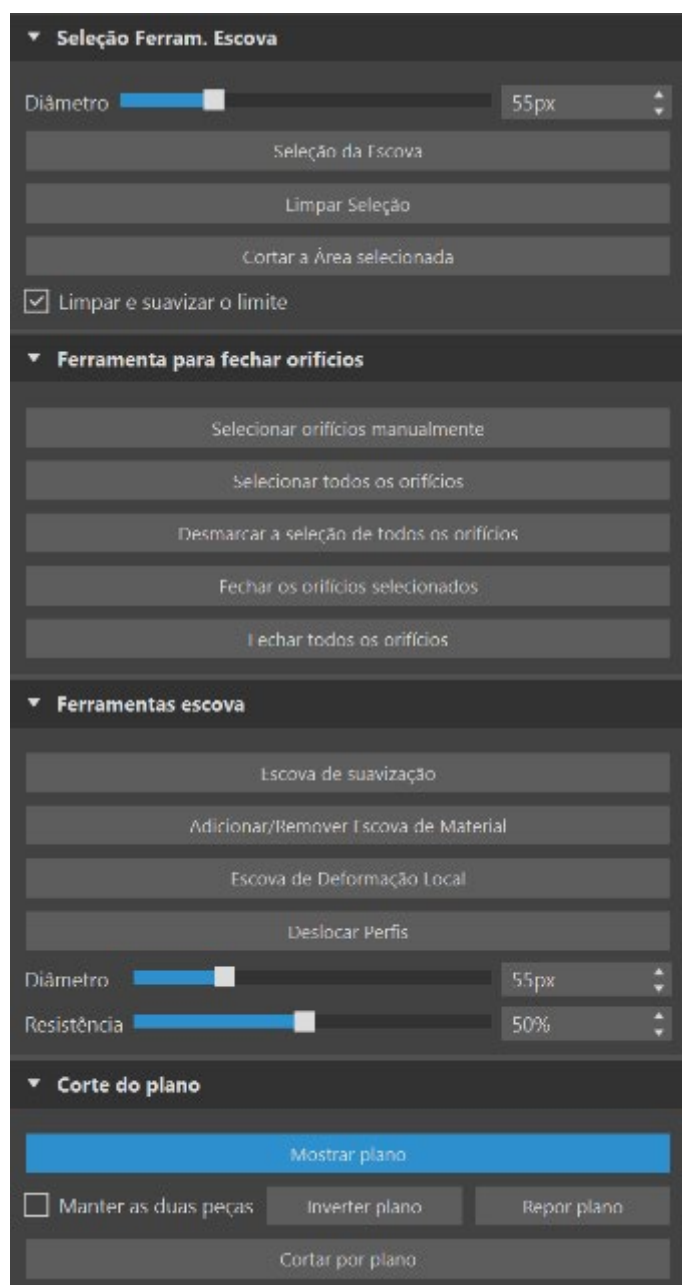

Todas as ferramentas necessárias estão disponíveis no painel Edição do modelo. Usando o “Pincel de seleção”, o usuário pode selecionar uma parte da superfície e removê-la pressionando o botão “Recortar área selecionada”. Dessa forma, o usuário pode limpar a superfície de peças dispersas ou “extrair” um dente, por exemplo. A área selecionada pode ser limpa pressionando o botão “Limpar seleção”.

A remoção de partes do modelo, no entanto, criará um furo (ou vários). A “Ferramenta de fechamento de furos” pode ser usada para fechá-los. O usuário pode selecionar e fechar um furo específico, ou selecionar e fechar todos de uma só vez. Todos os furos selecionados também podem ser desmarcados.

Nota: Esta ferramenta é feita para fechar orifícios menores e mais simples. Casos mais complicados podem levar muito tempo. O modelo pode ser completamente fechado e reparado usando a ferramenta “Fechar modelo”, que também cria um modelo de gesso com base.

As irregularidades da superfície podem ser corrigidas usando “Mover contornos”, que só pode ser usado na vista ortogonal (não funciona na vista 3D). “Adicionar/Remover Pincel de Material” é usado para adicionar/remover material de superfície. O “Pincel de Deformação Local” deforma a superfície num ponto local. Para as modificações finais e para o polimento da superfície do orifício fechado, pode ser usado o “Pincel de Alisamento”.



“Corte plano” é usado para cortar um modelo por um plano de corte. O plano pode ser movido e girado e a direção de corte pode ser invertida. O plano pode ser redefinido para a posição horizontal padrão. Ambas as partes do modelo de corte podem ser mantidas (um novo modelo de restante de Corte Plano será criado).

14 Registro de Corpo de Digitalização (Scan Body)

O Blue Sky Plan® tem uma funcionalidade útil que permite ao usuário registrar os arquivos STL dos corpos de digitalização presentes no catálogo de peças BSP nos corpos de digitalização visíveis em um modelo digitalizado.

O Blue Sky Plan® pode converter o corpo de digitalização (tipo de pilar que serve como um "pilar" no momento da digitalização) em um pilar real com um implante conectado.


Uma vez que o modelo STL com corpos de verificação visíveis é importado, clicar no  ícone na barra de ferramenta(enquanto o modo "Normal" ou "Avançado" estiver ativo) abre uma caixa de diálogo para ajustar o corpo de digitalização do catálogo ao modelo digitalizado.

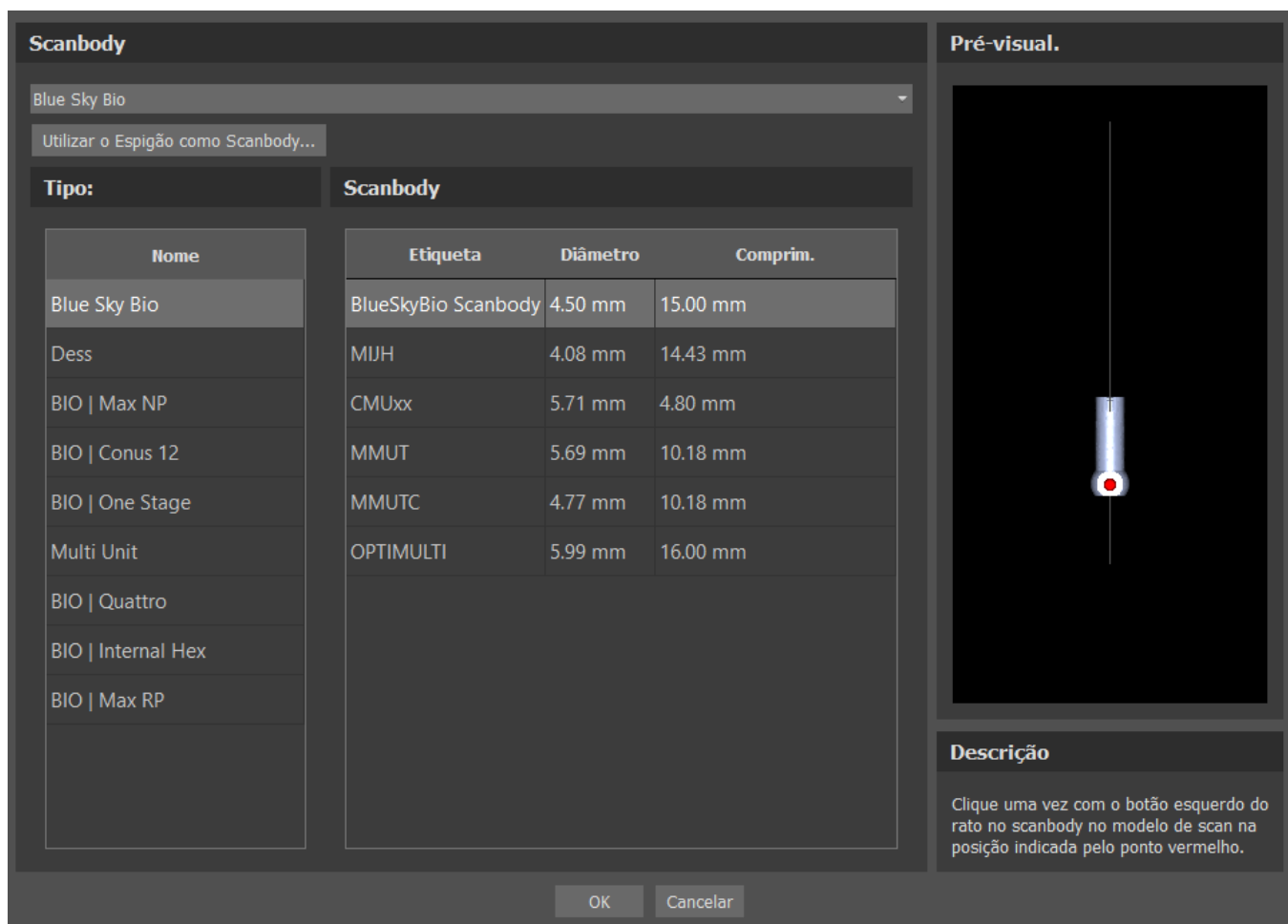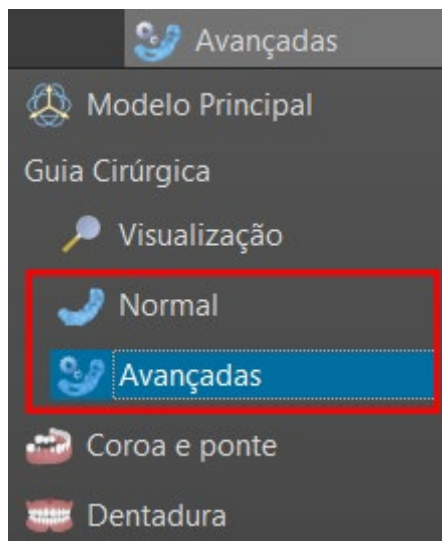


Depois de escolher um corpo de escaneamento no catálogo, ele pode ser colocado clicando na cabeça do pilar escaneado no modelo - para obter a melhor posição de ajuste, é bom clicar no local ilustrado pelo marcador vermelho, como mostra o catálogo pré-visualização do corpo da digitalização.

Uma vez que a posição do corpo de escaneamento estiver precisamente definida, a janela com os implantes será exibida. Após escolher o implante desejado, o corpo de escaneamento e o implante serão automaticamente alinhados juntos. O dente pode ser adicionado clicando em "Adicion. Dente" pela barra de ferramentas ou clicando com o botão direito no corpo do escaneamento > Adicion. Dente. Outra opção para alinhar um dente é clicando no implante > Alinhar > Alinhar novo dente.

Também é possível alinhar tanto um implante existente como um novo ao corpo de escaneamento, basta clicar com o botão direito no corpo de escaneamento e selecionar a opção desejada no menu suspenso.

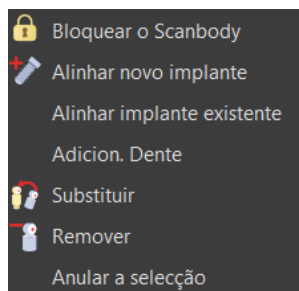

Posteriormente, a posição do corpo da digitalização também pode ser refinada manualmente usando a ferramenta de manipulação comum na visualização 3D.

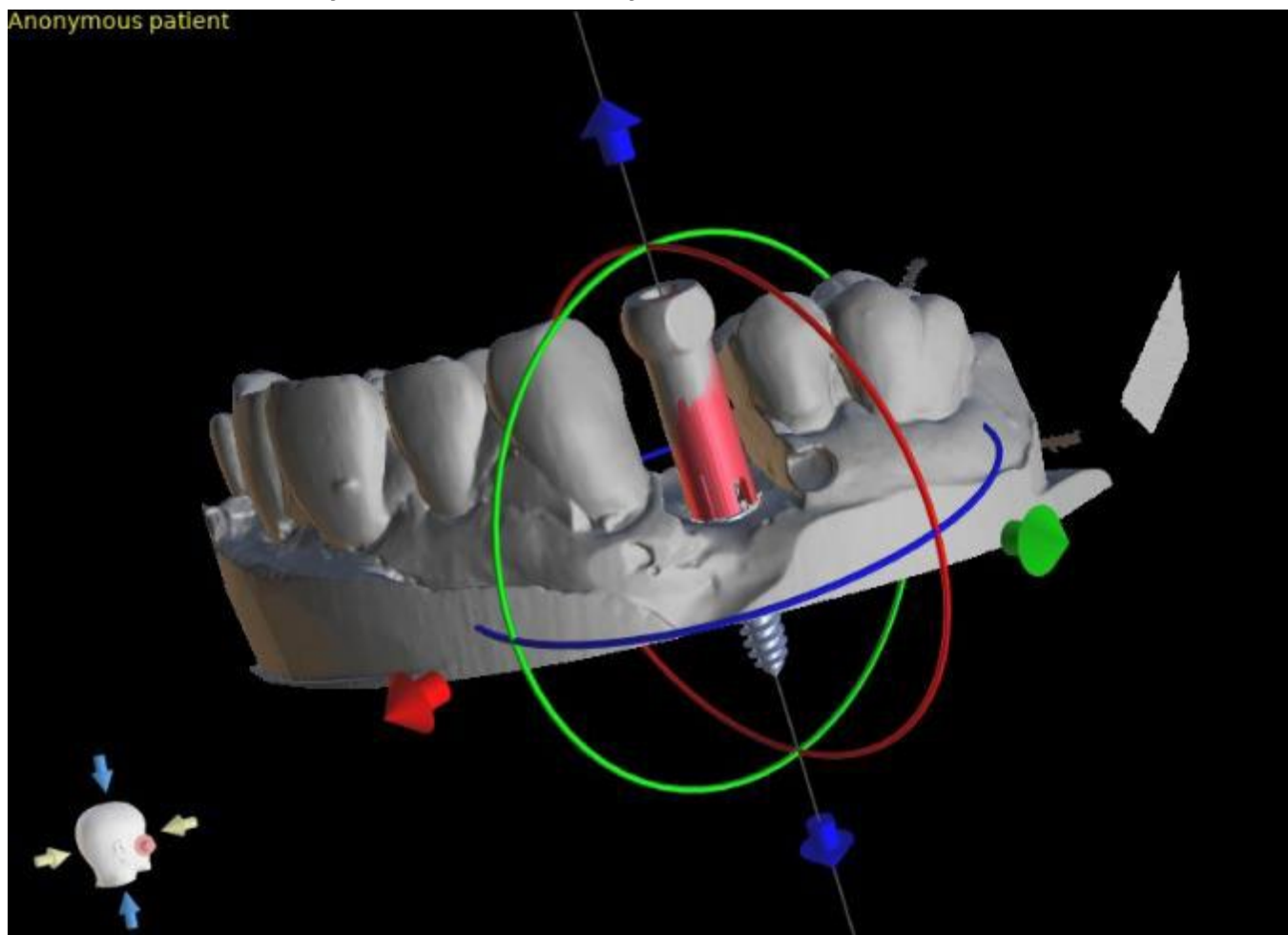

15 Dentes Virtuais

O Blue Sky Plan® possibilita a inserção de dentes "virtuais" no projeto. Usando modelos de coroas geradas automaticamente ou ainda coroas predefinidas de catálogos, podemos mostrar ao paciente o possível resultado após a execução de todos os procedimentos planejados. Os dentes virtuais também possibilitam o alinhamento de um implante novo ou existente e, portanto, inspecionam visualmente facilmente a respectiva posição da coroa resultante em relação à posição do implante e planejar qualquer pilar.


15.1 Inserindo Coroas

É altamente recomendável especificar a curva dentária, pois a coroa inserida será girada automaticamente em relação a ela. As coroas individuais são inseridas clicando no  ícone na barra de ferramentas principal ou utilizando o botão no painel lateral (indicado abaixo) "Lista de dente", ou, se necessário, selecionando o item de menu "Dentes Virtuais > Adicionar dente".

Uma caixa de diálogo para selecionar a coroa será aberta. Primeiramente, o usuário pode escolher entre dois tipos de coroas: geradas automaticamente e predefinidas de catálogos. Observe que as coroas geradas automaticamente estão disponíveis somente no módulo do Guia Cirúrgico.

Para a criação automática de uma coroa, selecione a guia "Criar dente automaticamente com IA" (1). Depois selecione o dente associado na pré-visualização (3) - a descrição de texto da coroa aparece em (4). Também é possível inserir implantes junto aos novos dentes (5). Para mais informações sobre inserção de implantes, consulte o capítulo 8. Confirme a seleção clicando no botão "OK" (6) (o botão "Cancelar" fecha a caixa de diálogo sem fazer uma seleção (7)). O usuário pode então posicionar a coroa na área associada, a coroa é então gerada automaticamente. As dimensões e o local do dente podem ser modificadas posteriormente diretamente na sequência.

Para usar uma coroa predefinida do catálogo, selecione a guia "Selecionar dente de catálogo" (2). Comparado à criação automática da coroa, há algumas diferenças na caixa de diálogo. No menu suspenso, é possível selecionar os dentes de um conjunto de geometria específico (8). Na pré-visualização, é possível selecionar dentes adicionais mantendo pressionadas as teclas Shift ou Ctrl (9). O tamanho dos dentes também pode ser ajustado (10). Um dente pode ser alinhado a um implante já existente (11), ou a posição dos dentes pode ser ajustada com base na altura da curva panorâmica (12).

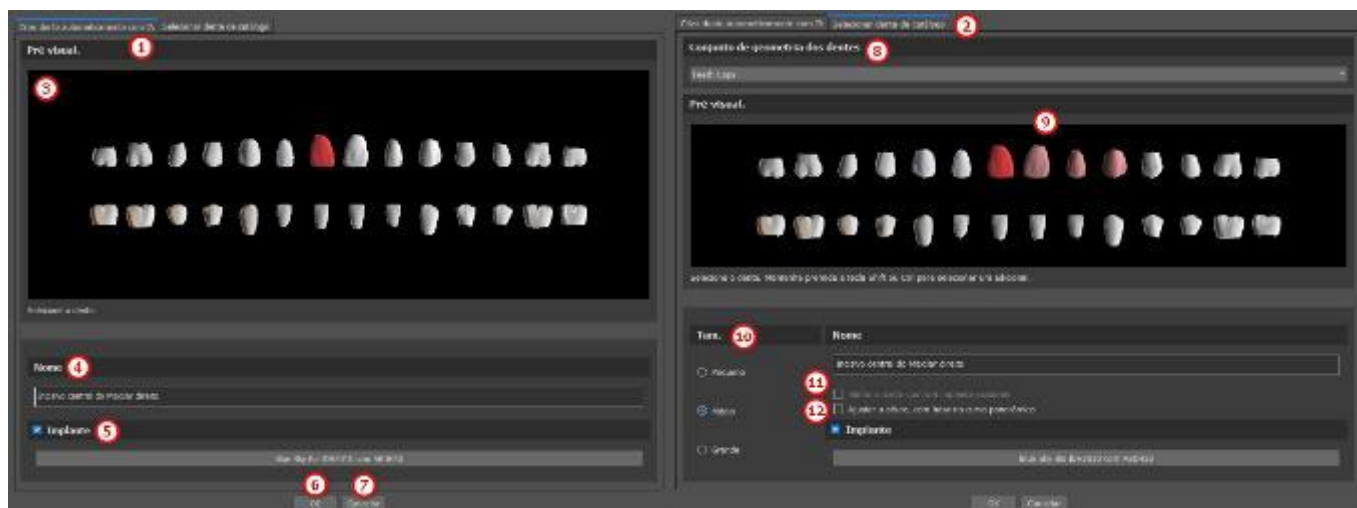


15.2 Posicionando e manipulando as coroas


O cursor do mouse muda para uma cruz quando a caixa de diálogo é fechada. Em seguida, a coroa pode ser posicionada clicando na fatia e, se necessário, na visualização 3D em qualquer janela.

A coroa é posicionada na posição vertical de acordo com o tipo de dente simulado e gira em relação à curva dentária. Cabe ao usuário ajustar sua posição.

O dente pode ser movido em todas as janelas. Para isso, posicione o mouse na geometria do dente, clique no botão esquerdo do mouse e arraste. O dente sempre se move no plano da vista. O dente também pode ser girado usando os chamados arrastadores. Eles aparecem novamente quando o cursor do mouse está posicionado no dente. O arrastador pode então ser arrastado clicando no botão esquerdo do mouse; o arrastador muda de cor e a rotação do dente é modificada ao arrastar.

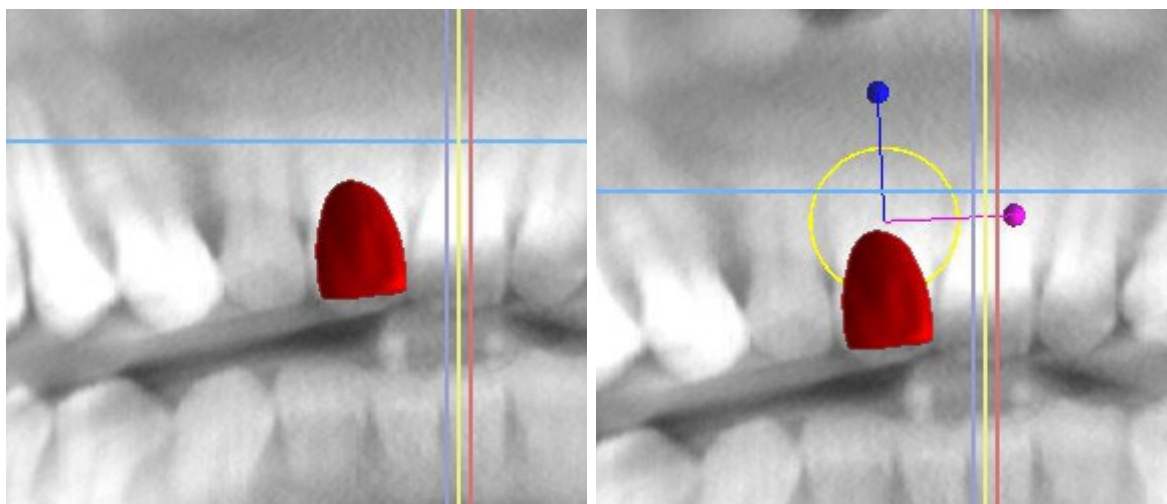


O ponto de rotação (o chamado eixo ou pivot) pode estar no centro da geometria do dente ou no início do sistema de coordenadas local. Está localizado no mesmo local que a cabeça do implante alinhado.

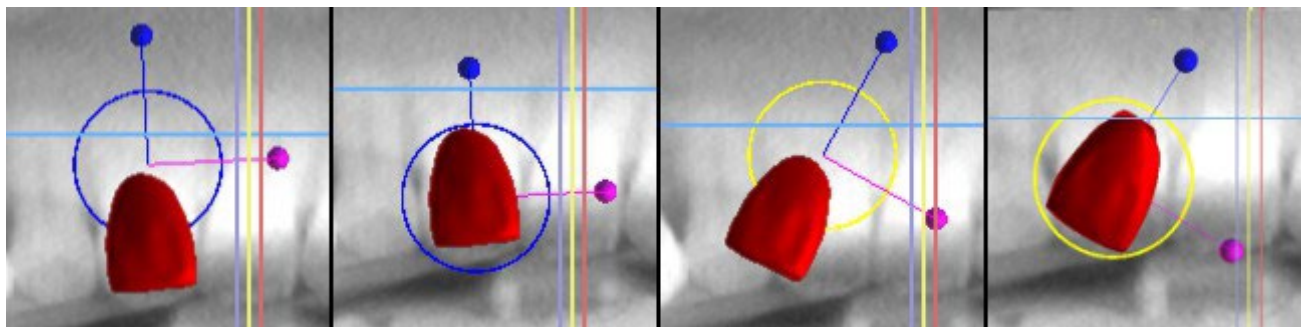

Na vista 3D, o dente pode ser arrastado não apenas no plano da vista, mas também ao longo do eixo do dente. Como nas outras vistas, é necessário mover o cursor sobre o dente e exibir os arrastadores. As setas azuis acima e abaixo do dente servem para deslocá-lo ao longo do eixo. Mudamos a posição do dente movendo o cursor para a seta, clicando no botão esquerdo do mouse e arrastando. Quanto aos implantes, três círculos de cores diferentes aparecem na visualização 3D para girar o dente em torno dos eixos correspondentes do sistema de coordenadas local.

Além da posição e rotação, o tamanho da coroa também pode ser modificado na visualização 3D. As esferas exibidas ao longo do eixo do dente servem para alterar o tamanho. O tamanho do dente pode ser alterado movendo o cursor para ele, clicando no botão esquerdo do mouse e arrastando.

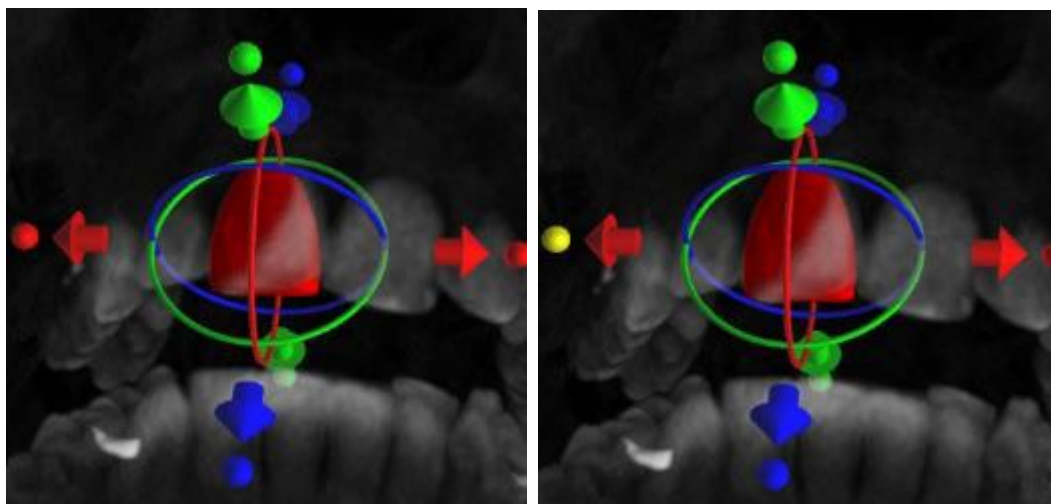


15.3 Adicionar a coroa com IA

Para gerar um dente por IA para um caso em que ambos os modelos de mandíbula são importados, primeiro selecione um dente de uma lista de dentes e depois escolha um antagonista. Este modelo antagonista deve ser alinhado em oclusão com o modelo com o dente ausente.

A seleção do antagonista pode ser feita por meio de um menu suspenso que aparecerá logo após selecionar um dente de IA na Lista de Dentes e pressionar o botão "OK". Clicar no botão "Cancelar" cancela a seleção da mandíbula, não a geração dos dentes. É necessário clicar novamente no botão Cancelar.

Independentemente da mandíbula oposta estar disponível, é possível regenerar um dente de IA. Clique com o botão direito no dente de IA e selecione "Regenerar dente de IA" no menu de contexto. O cursor do mouse muda para um dente. Clique com o botão esquerdo no modelo na posição desejada do dente.

Observação: Revise a forma, a posição, os contatos proximais e a oclusão do dente com IA gerado. Ajuste-o, gere-o novamente ou substitua-o por uma coroa do catálogo de dentes se não for aceitável (consulte as seções 1.2 e 1.3).

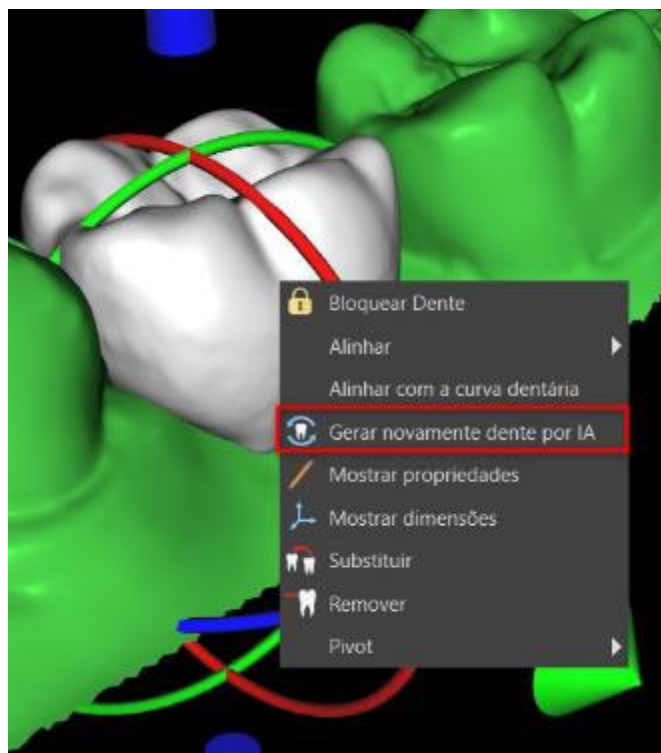


15.4 Alinhando um implante e outras operações

O painel lateral, que pode ser aberto com a opção de menu “Painéis > Lista de Dentes”, fornece mais operações sobre o dente. Uma lista contendo uma descrição do dente (1), uma caixa de seleção (2) para ativar e desativar a visibilidade de um dente individual e um botão para remover o dente especificado (3) são exibidos neste painel. O dente atualmente selecionado é exibido em vermelho na sequência e a linha associada é destacada na lista.

Quanto aos implantes, também é possível definir a transparência (4) ou o contorno (5) dos dentes.

Há também um botão "Adicionar dente" aqui para adicionar um dente (6), que funciona da mesma maneira que o botão da barra de ferramentas descrito acima, opcionalmente através de um item de menu.

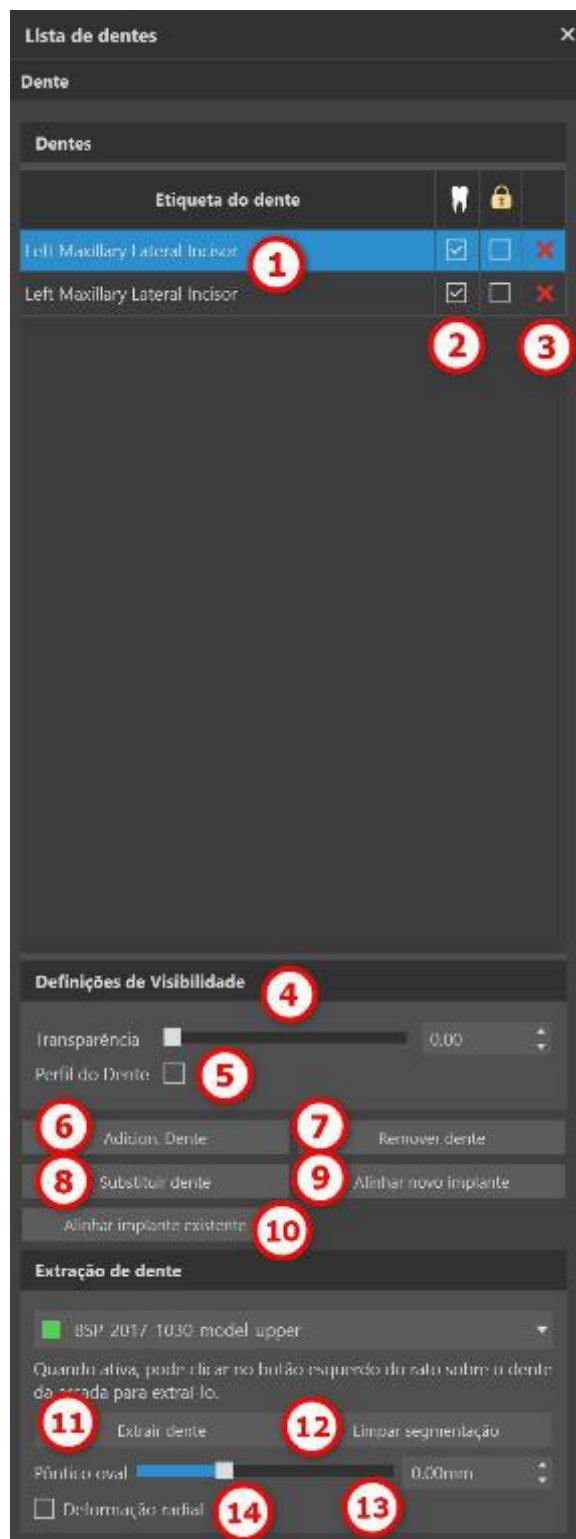


O resultado de clicar no botão “Remover Dente” (7) depende se um dente é foi selecionado. Nesse caso (se um dos dentes estiver selecionado), a ação será executada diretamente no dente designado. Caso contrário, o dente selecionado é removido da sequência clicando no mouse. O botão para alterar a geometria do dente é “Substituir Dente” (8). A caixa de diálogo para selecionar a nova geometria funciona de forma análoga: se um dos dentes estiver selecionado, a nova geometria será definida para ele; se nenhum for selecionado, o cursor do mouse mudará para uma cruz de seleção e a geometria mudará para a do dente selecionado clicando nela.

O botão "Alinhar novo implante" (9) primeiro abre uma caixa de diálogo para selecionar o implante (consulte o capítulo 7) e após a seleção ser confirmada com o botão "OK", o novo implante é adicionado ao projeto com a configuração de posição correspondente ao dente selecionado.

O botão para alinhar um implante existente (10) funciona de forma análoga. Quando pressionado, o cursor do mouse muda para uma cruz de seleção e, quando um dos implantes existentes é clicado, sua posição em relação ao dente é modificada.

O dente pode ser extraído na seção "Extração de dente". Ao clicar no botão “Extrair dente” (11), a segmentação inicia na varredura selecionada e é criado um modelo segmentado. Quando a segmentação está ativa, é possível usar CTRL + clique esquerdo no dente da mandíbula para extraí-lo. A segmentação é excluída clicando no botão "Limpar segmentação" (12).

A deformação radial (14) afeta a forma do pântico oval resultante. Quando ligado, a quantidade de deformação da superfície depende unicamente da distância do ponto da superfície do centro teórico do dente, resultando em um formato simétrico dependente do raio. Em seguida, o controle deslizante (13) afeta a profundidade resultante da ovação do pântico após a extração do dente.

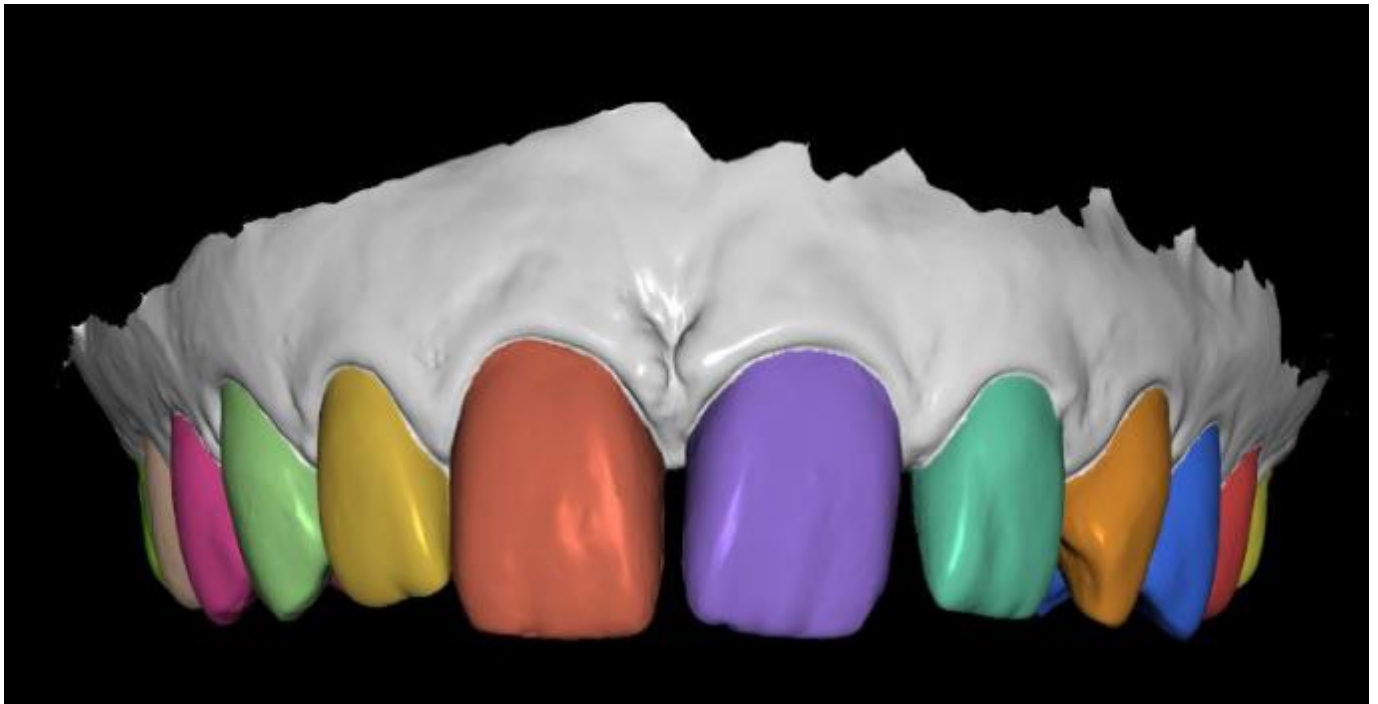

Modelo preparado para extração dentária


15.5 Menu Contextual

Algumas operações também podem ser executadas através do menu de contexto. Recorremos a isso clicando no botão direito do mouse na geometria do dente. Além das operações descritas acima, como alinhar o implante, remover o dente ou substituí-lo por outro tipo, também é possível agrupar um dente com um implante e movê-los juntos pela cena, além de escolher o ponto de rotação dos arrastadores (o pivot), conforme descrito no capítulo 14.2.



16 Segmentação do dente e maxilar


O Blue Sky Plan® torna possível segmentar e remover dentes e maxilares individuais dos dados. Os seguintes métodos de segmentação são suportados. A segmentação está disponível no módulo Modelo Principal > Painéis > Segmentação. É possível acessar a segmentação automática tanto do dente quanto do maxilar por Modelo Principal > Ferramentas > Segmentação automática dos dentes ou Segmentação automática do maxilar.

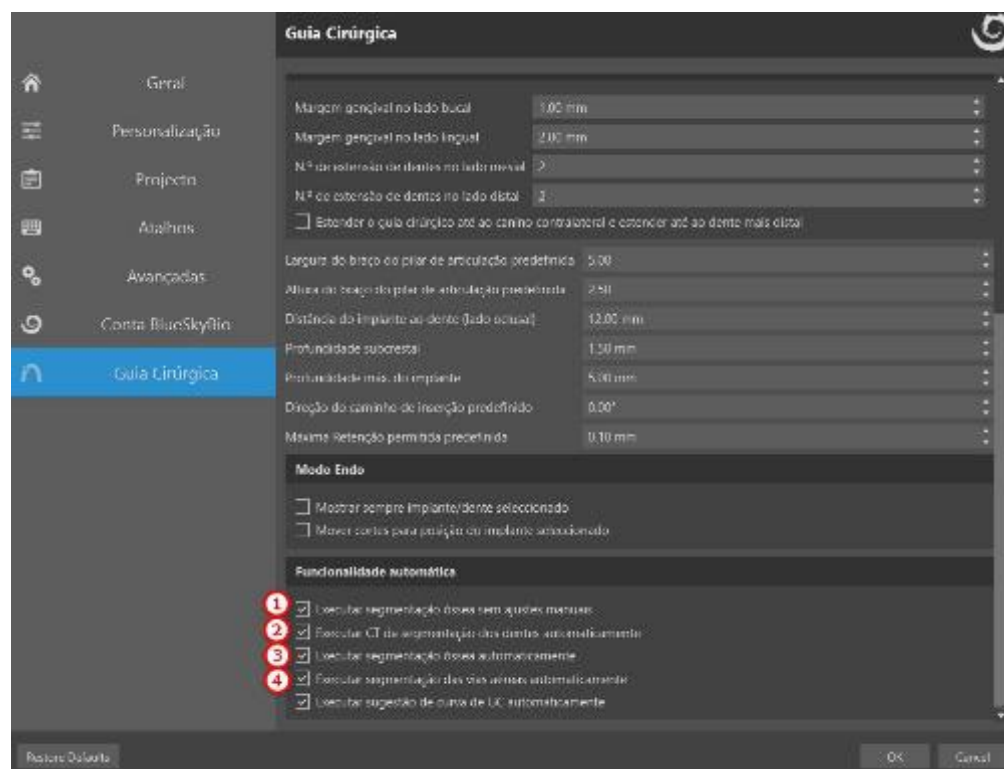


As configurações de segmentação podem ser ajustadas em Preferências > Guia Cirúrgico > Funcionalidade automática. “Executar segmentação óssea sem ajustes manuais” (1) não exibirá as ferramentas de edição manual do usuário durante o processo de segmentação do maxilar. As outras três caixas de seleção irão iniciar o processo de segmentação específico depois que os dados CT forem importados. “Executar CT da segmentação dos dentes automaticamente ao importar TC” (2) iniciará somente a segmentação dentária. “Executar segmentação óssea automaticamente ao importar TC” (3) iniciará a segmentação dentária e do maxilar (nota: isso irá sobrescrever a caixa de seleção “Executar CT da segmentação dos dentes automaticamente ao importar TC”). “Executar segmentação das vias aéreas automaticamente ao importar TC” (4) iniciará a segmentação das vias aéreas.

16.1 Segmentação automática dos dentes

Com a funcionalidade de segmentação, você também pode usar a Segmentação dentária automática”. Há duas opções disponíveis – Selecionar dente e Criar superfícies STL para todos os dentes.

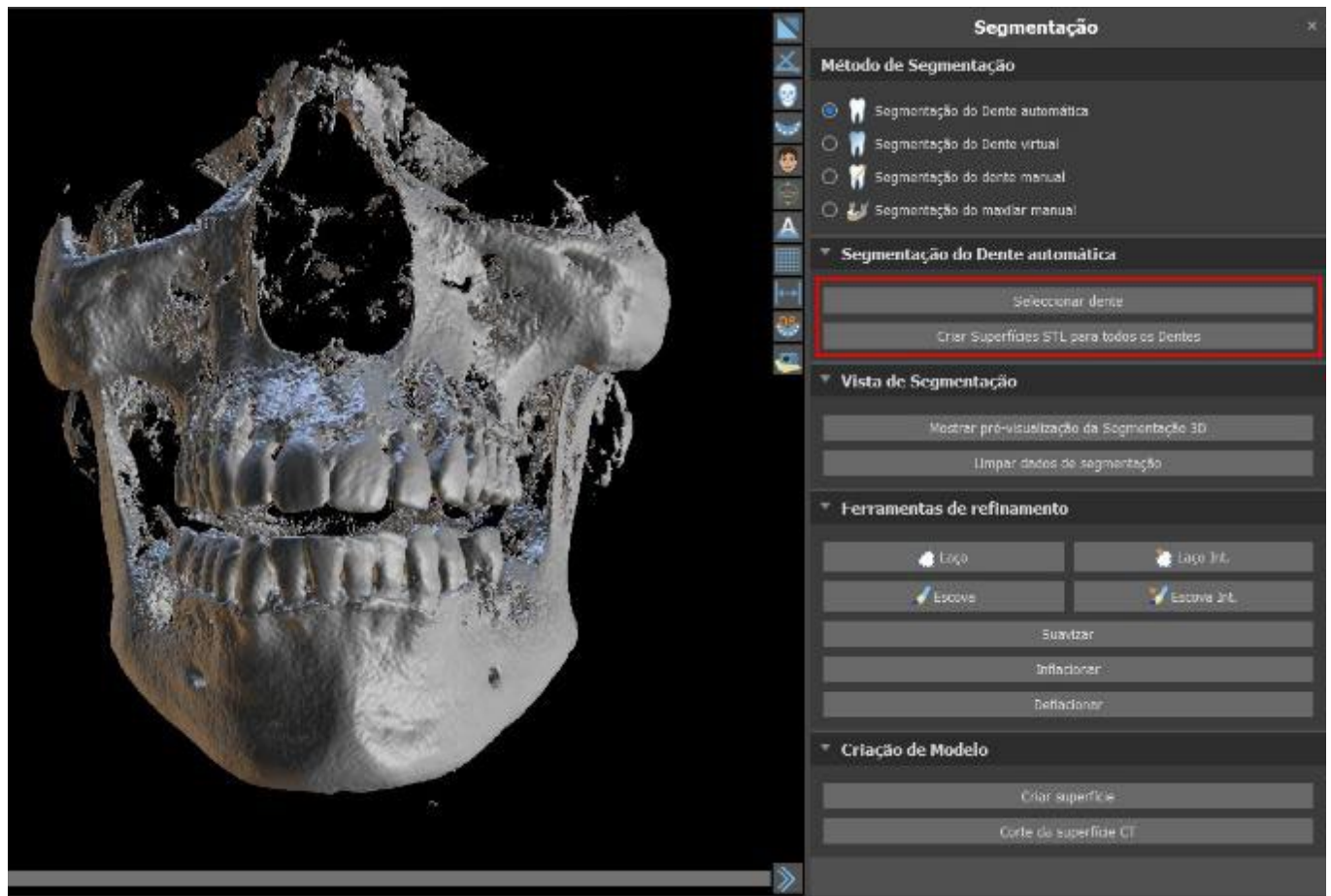


Para trabalhar com uma segmentação por vez, clique no botão Selecionar dente (1) e escolha um dente de uma das fatias ortogonais (2) que você precisa selecionar. O resultado da seleção será colorido em todas as fatias. Uma pré-visualização do dente selecionado pode ser exibida em 3D, basta clicar em Exibir segmentação da pré-visualização 3D (3). A seleção do dente pode ser removida das fatias ortogonais clicando em Limpar dados de segmentação.

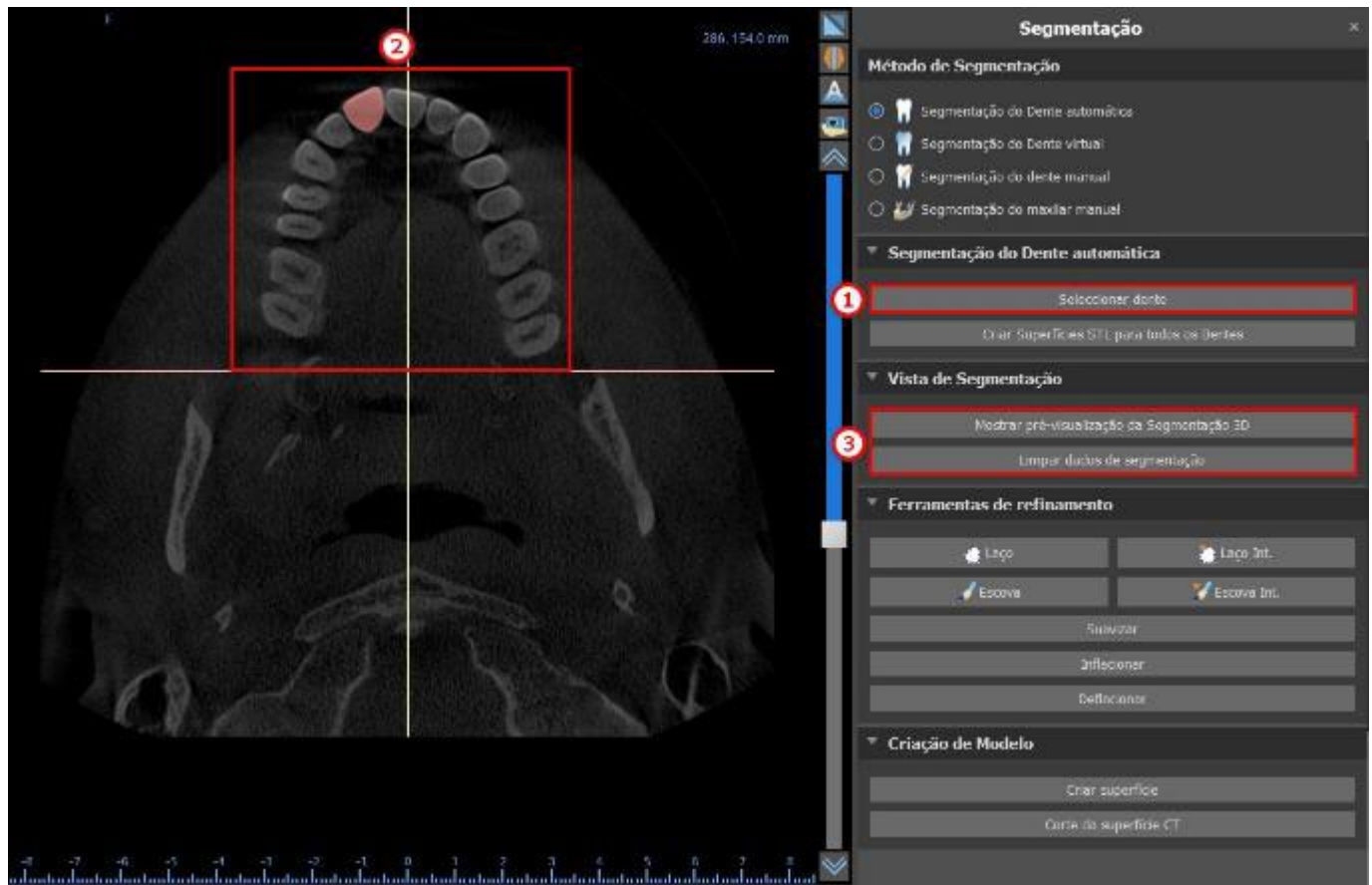


A seleção do dente pode ser corrigida com as “Ferramentas de refinamento” (4). Também é possível aplicar um filtro de “Suavização” nos dados de segmentação. “Inflar” infla os dados em um voxel enquanto “Desinflar” reduz os dados em um voxel.



Para criar um modelo 3D dos dados de segmentação, clique em “Criar superfície” (5). Para criar uma nova superfície de TC com o corte atual de segmento, clique em Cortar da superfície de TC”.

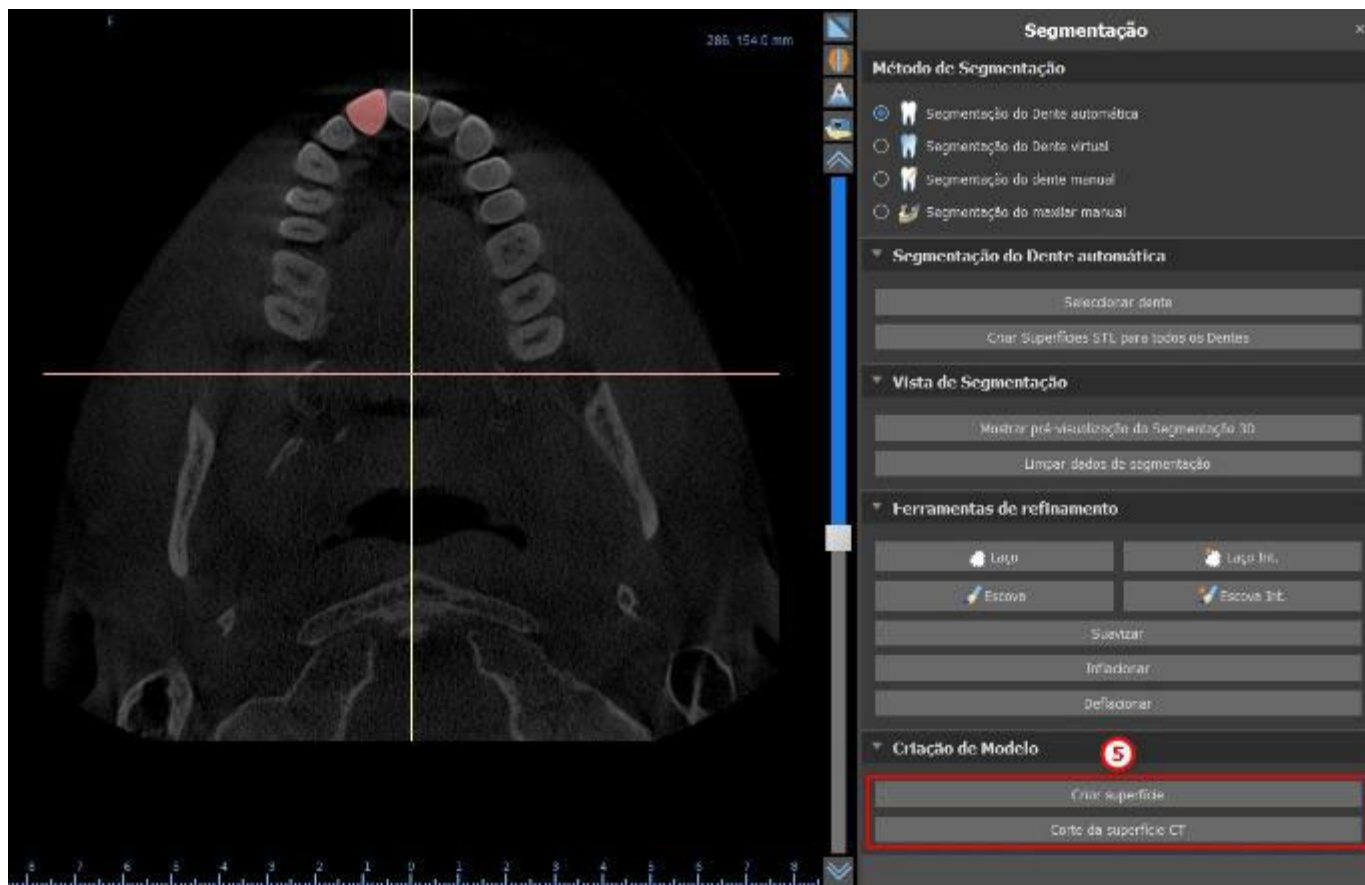


Caso deseje fazer uma segmentação totalmente automatizada, clique em “Criar superfícies STL para todos os dentes” (6).

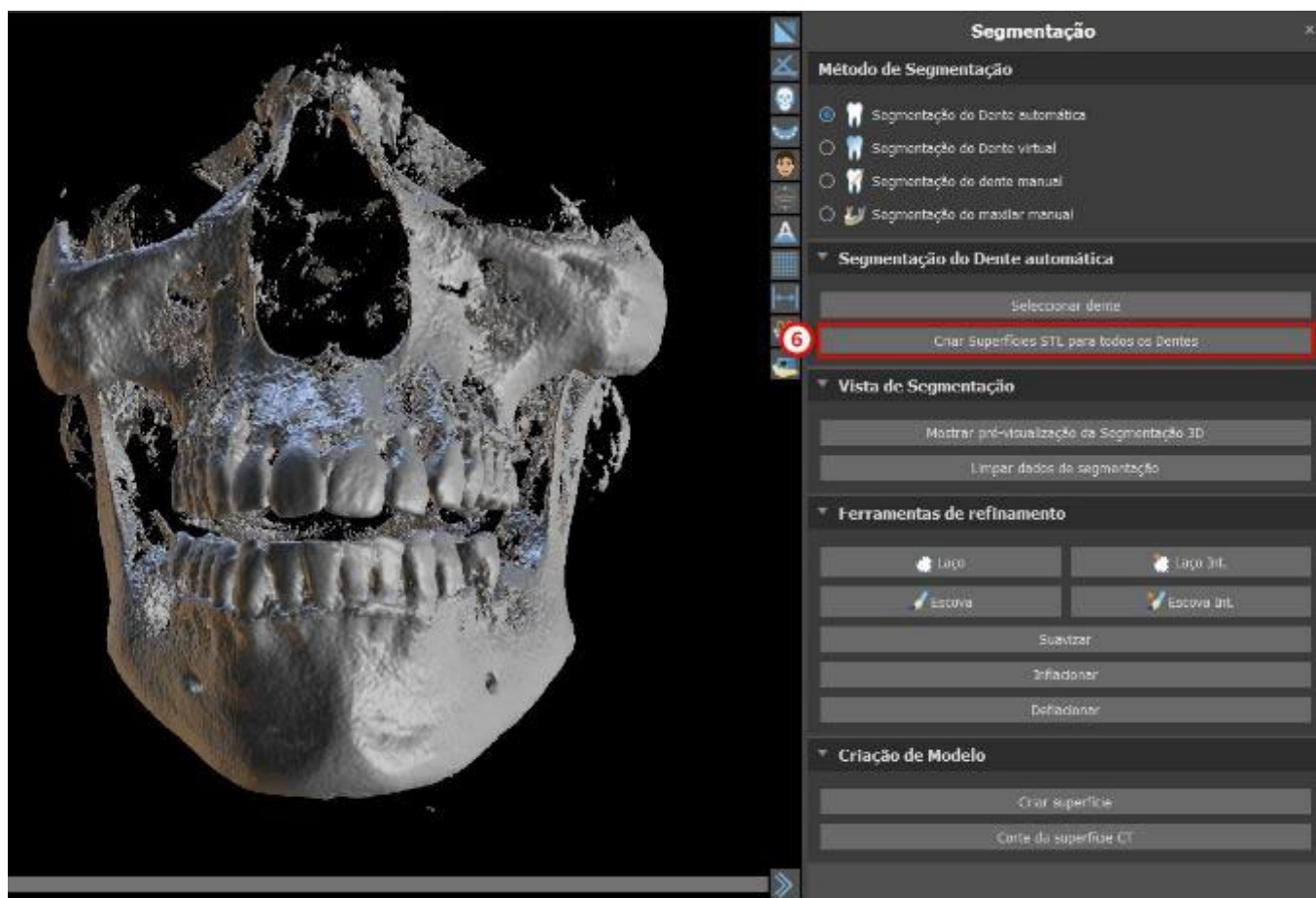


Você pode conferir os dentes totalmente segmentados no painel de Superfícies.

Observação: Compare os dentes segmentados com os dados de TC originais nas vistas de corte antes de utilizá-los. Corrija ou remova qualquer dente segmentado incorretamente ou não detectado (consulte as seções 1.2 e 1.3).

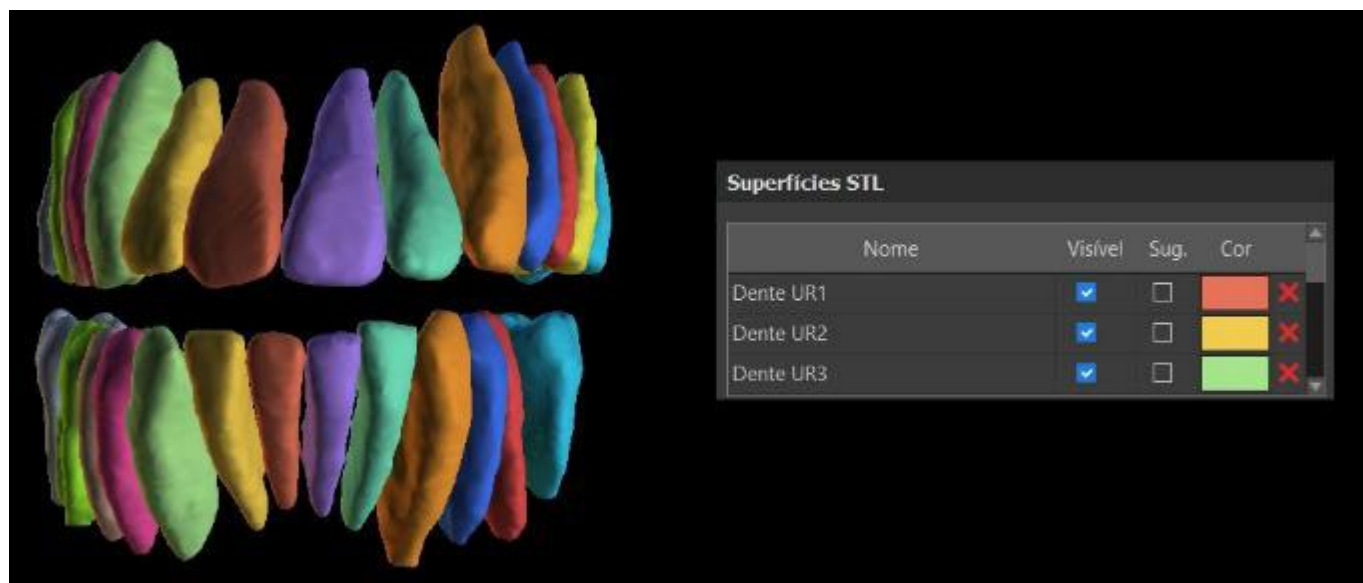

16.1.1 Segmentação do implante


Para executar a segmentação do implante, selecione "Segmentar implantes de TC ao segmentar dentes de TC automaticamente" em Preferências > Geral > Funcionalidade automática. A segmentação ocorrerá ao segmentar a mandíbula ou um dente. É necessário ter dados de TC com implantes já adicionados no laboratório, não é possível fazer segmentação em dados onde apenas um implante virtual foi adicionado.

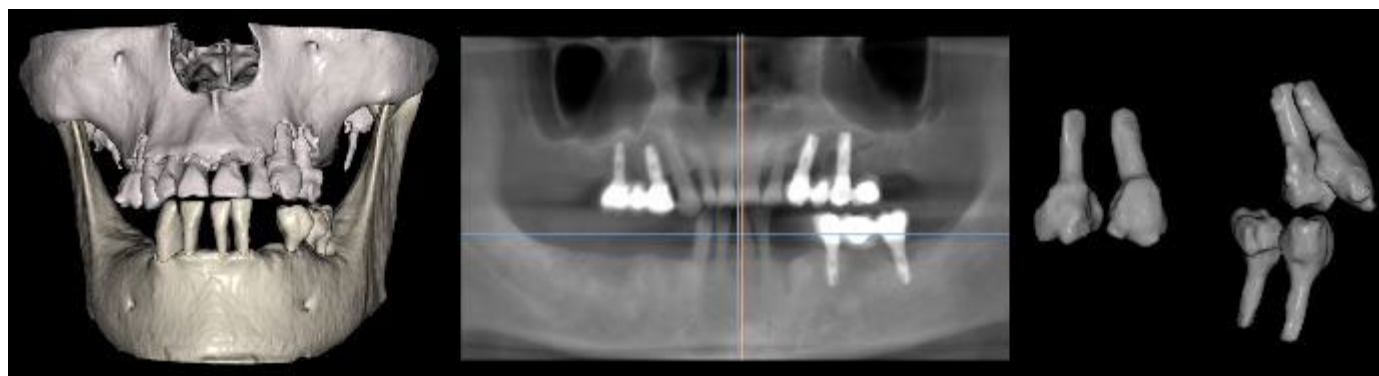

Dentes e implantes fundidos (esquerda) e implantes e dentes segmentados (direita)

16.2 Segmentação virtual dos dentes

Se a delimitação automática do dente falhar, ele poderá ser selecionado nos dados usando o dente virtual posicionado manualmente nos dados através da opção "Dentes virtuais > Adicionar dente" no menu principal. Após o posicionamento do modelo, execute a ação "Usar modelo de dente ativo" para os dados designados com base no modelo de dente inserido. Usando o "Parâmetro de vizinhança do modelo", é possível executar uma leve correção da área ao redor do modelo posicionado selecionado.

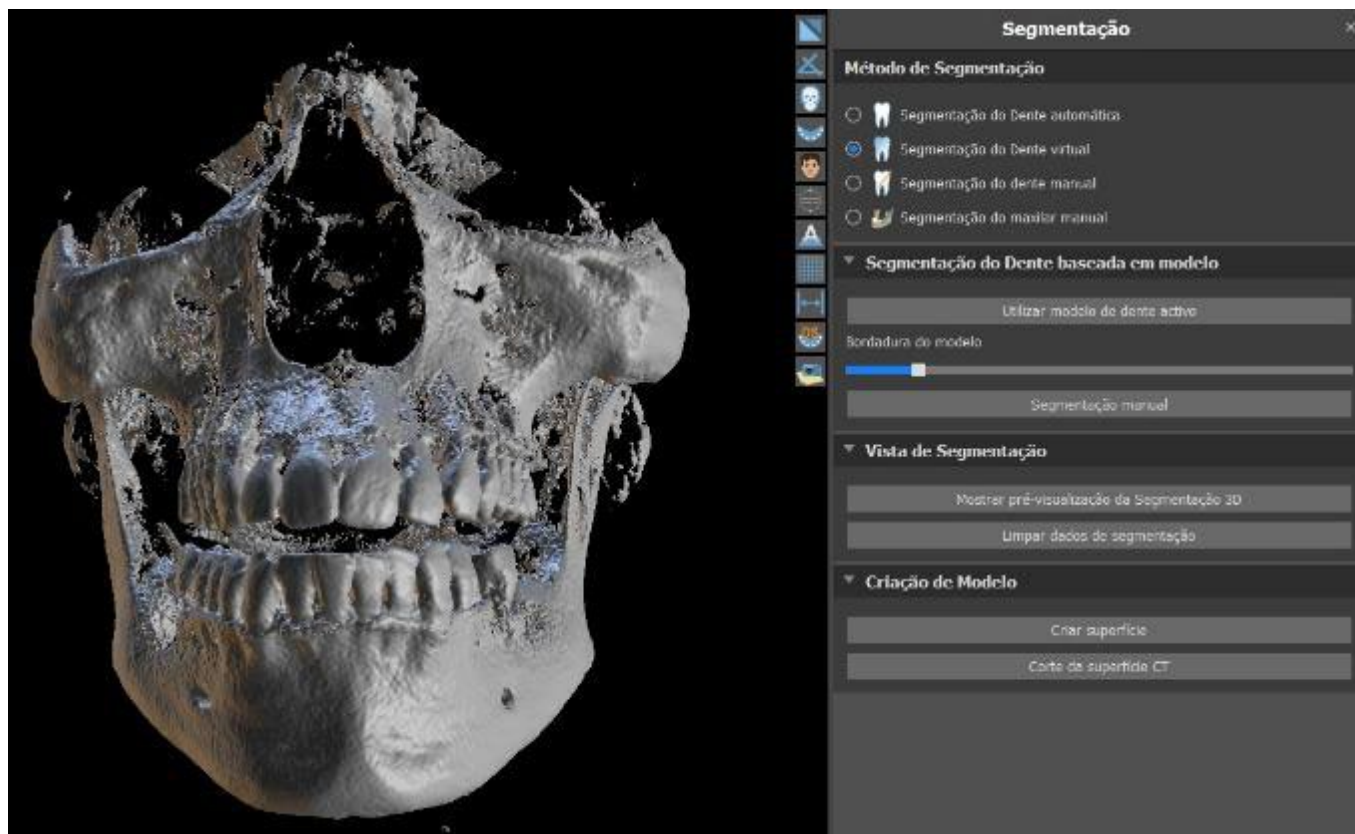


É possível transferir a área do dente marcada nos dados para o modelo clicando em “Criar superfície”. Um modelo criado dessa maneira aparece no painel “Superfícies” na tabela “Superfícies importadas”.


O dente pode ser removido dos dados clicando em “Remover dente”. Se você não estiver satisfeito com o resultado, a ação executada pode ser revertida com o botão “Desfazer” e os parâmetros de seleção de dente podem ser modificados.

16.3 Segmentação automática do maxilar



Segmentação automática do maxilar está disponível para o usuário na seção Método de segmentação. Basta clicar na opção (1) e escolher entre mandíbula ou maxilar ou ambos os maxilares (2). Dentes e mandíbula serão separados em modelos individuais se selecionados (3). Inicie a segmentação clicando em “Iniciar segmentação automática”. Isso pode levar alguns minutos. Se “Vias aéreas” estiver selecionado, a segmentação das vias aéreas também irá ocorrer (consulte o capítulo 16.4).

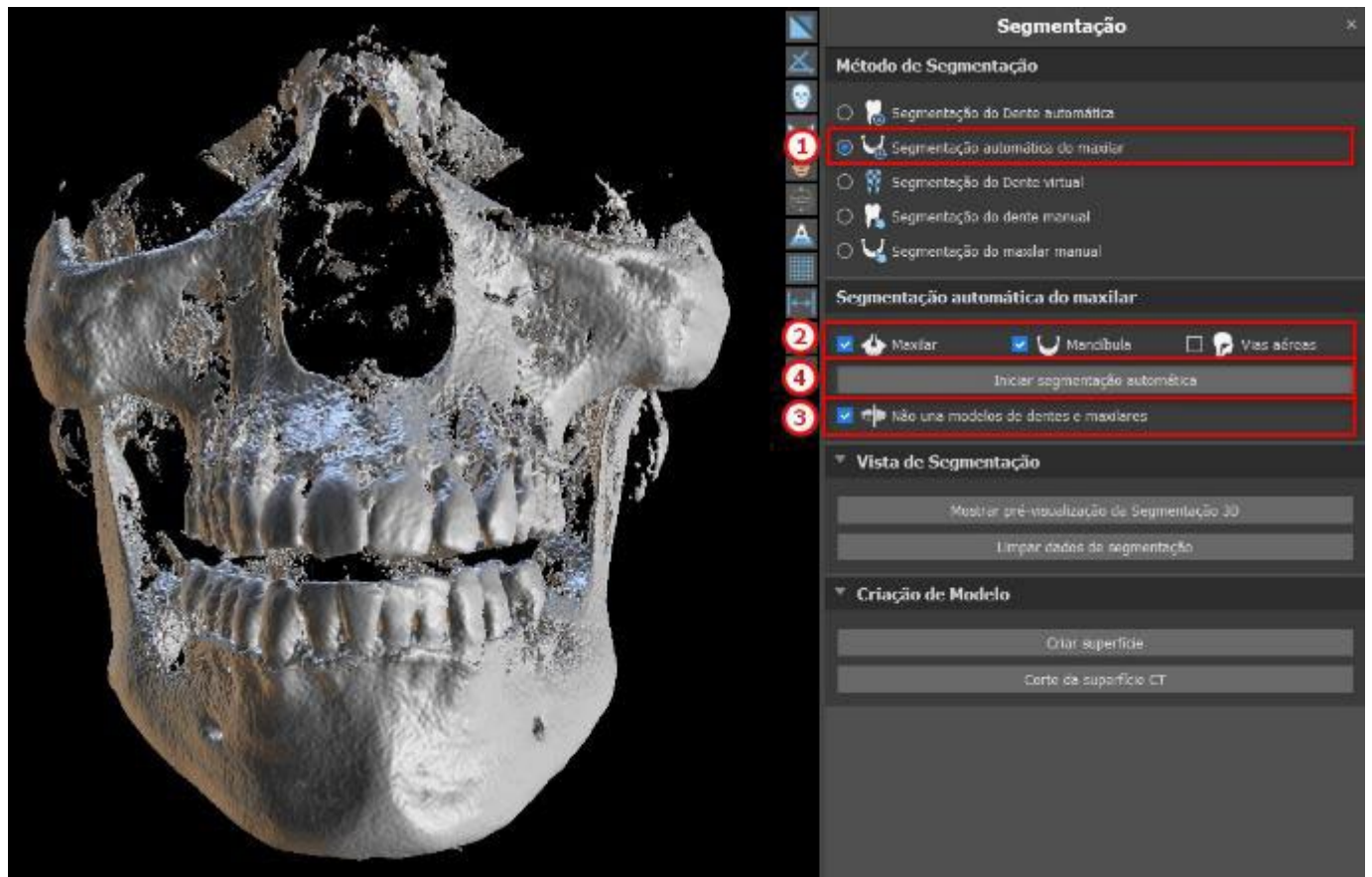


Os resultados da segmentação do maxilar podem ser corrigidos com as ferramentas de segmentação (5). As ferramentas podem ser usadas somente em uma visualização do maxilar. A segmentação será concluída clicando no botão “Seguinte” (6).

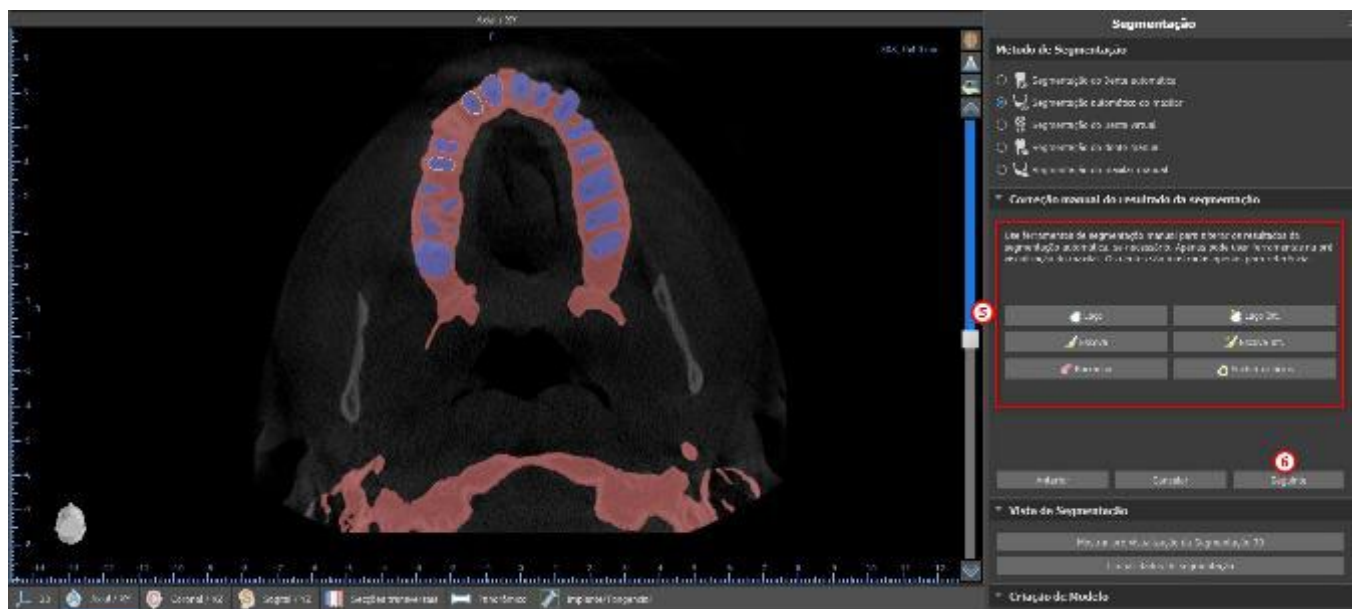

Clique no botão “Criar superfície e continuar” (7) para criar a superfície. É possível voltar e usar as ferramentas de segmentação novamente. Neste caso, clique no botão “Anterior” (8). “Iniciar nova segmentação” (9) inicia uma nova segmentação para o maxilar.

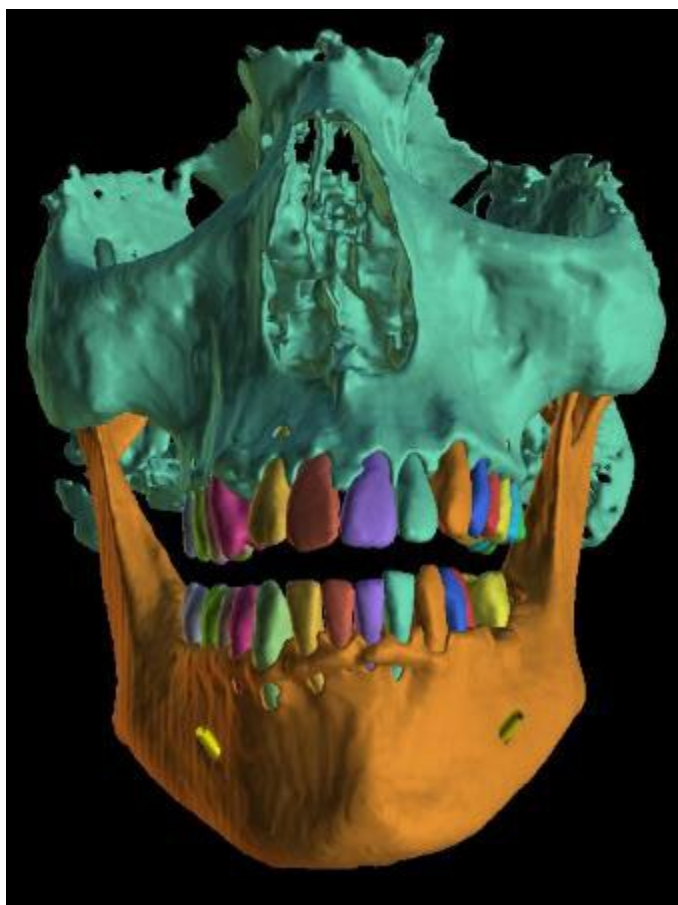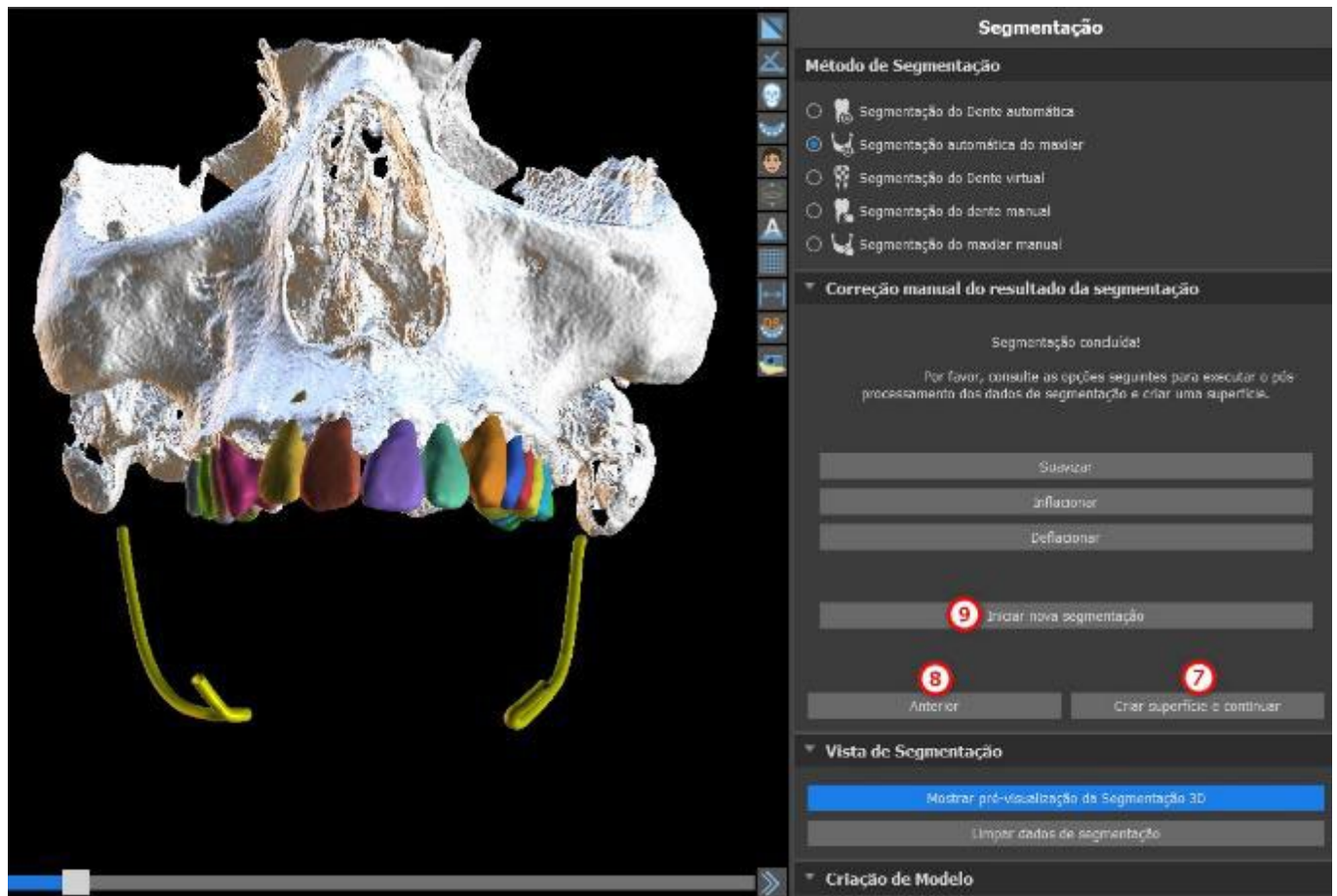

Modelos de dentes e maxilares não estão unidos

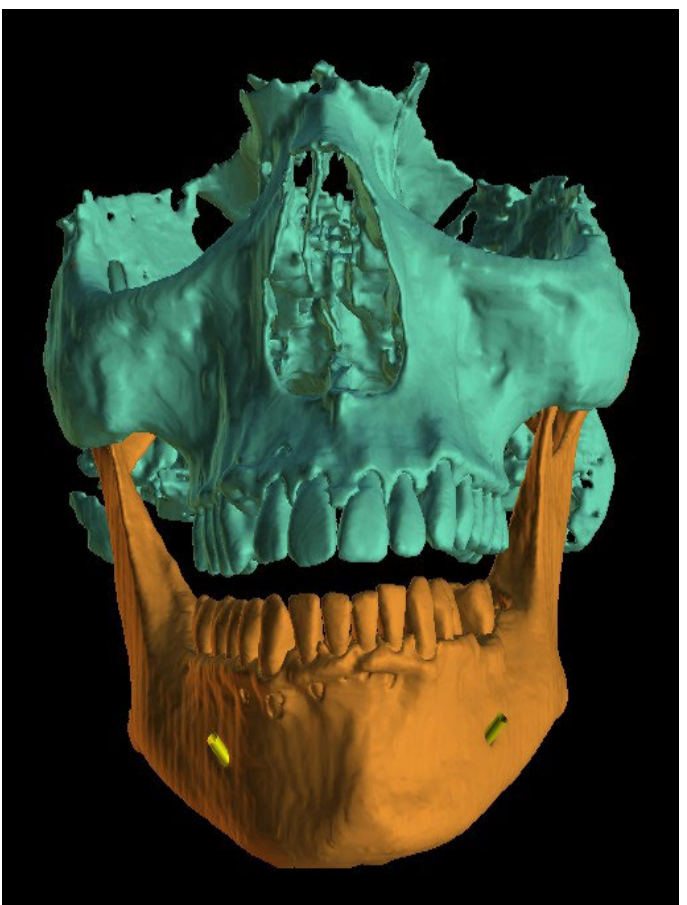

Modelos de dentes e maxilares unidos


O usuário pode mostrar ou ocultar as os dentes de TC da cena 3D na tabela Superfícies STL (10). A mesma opção se aplica aos implantes segmentados (11). Se uma nova segmentação do osso maxilar for iniciada, os modelos anteriores de Superfícies STL serão ocultados. Os modelos devem ser removidos manualmente da tabela STL.

Observação: Revise a segmentação do maxilar em relação aos dados de TC antes de criar a superfície. Se “Run Bone Segmentation without manual adjustments” estiver ativado, a etapa de edição é ignorada; revise a superfície resultante e reinicie a segmentação se ela não corresponder à anatomia do paciente (consulte as seções 1.2 e 1.3).





16.4 Vias aéreas

A segmentação das vias aéreas está disponível no método “Segmentação óssea do maxilar” (1). Para executar essa função, selecione “Vias aéreas” (2) e clique em “Iniciar segmentação automática” (3).

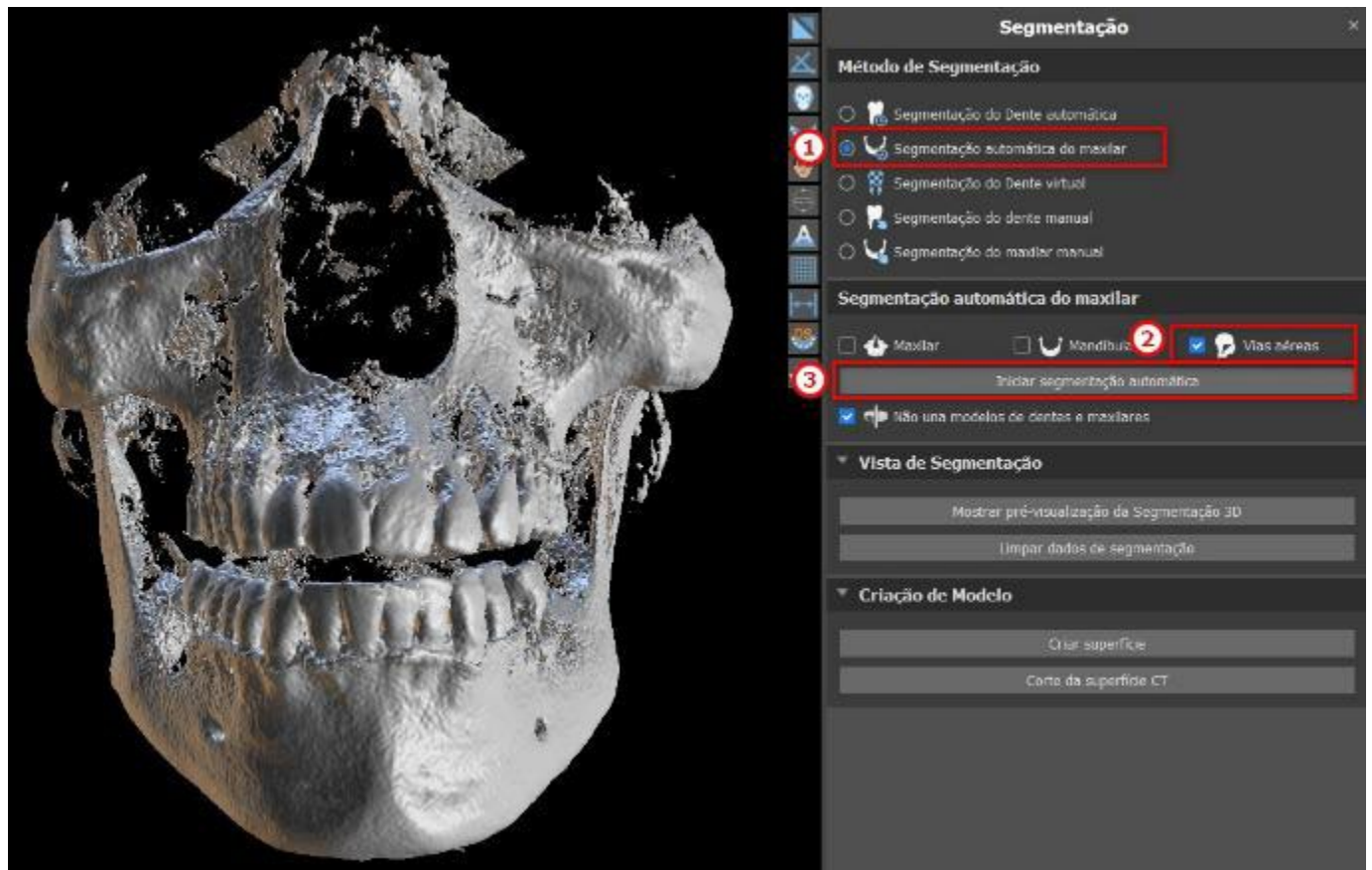


O modelo das Vias aéreas é visível no painel “Superfícies”, e pode ser exportado pelo painel de Exportação mediante o pagamento de uma taxa.

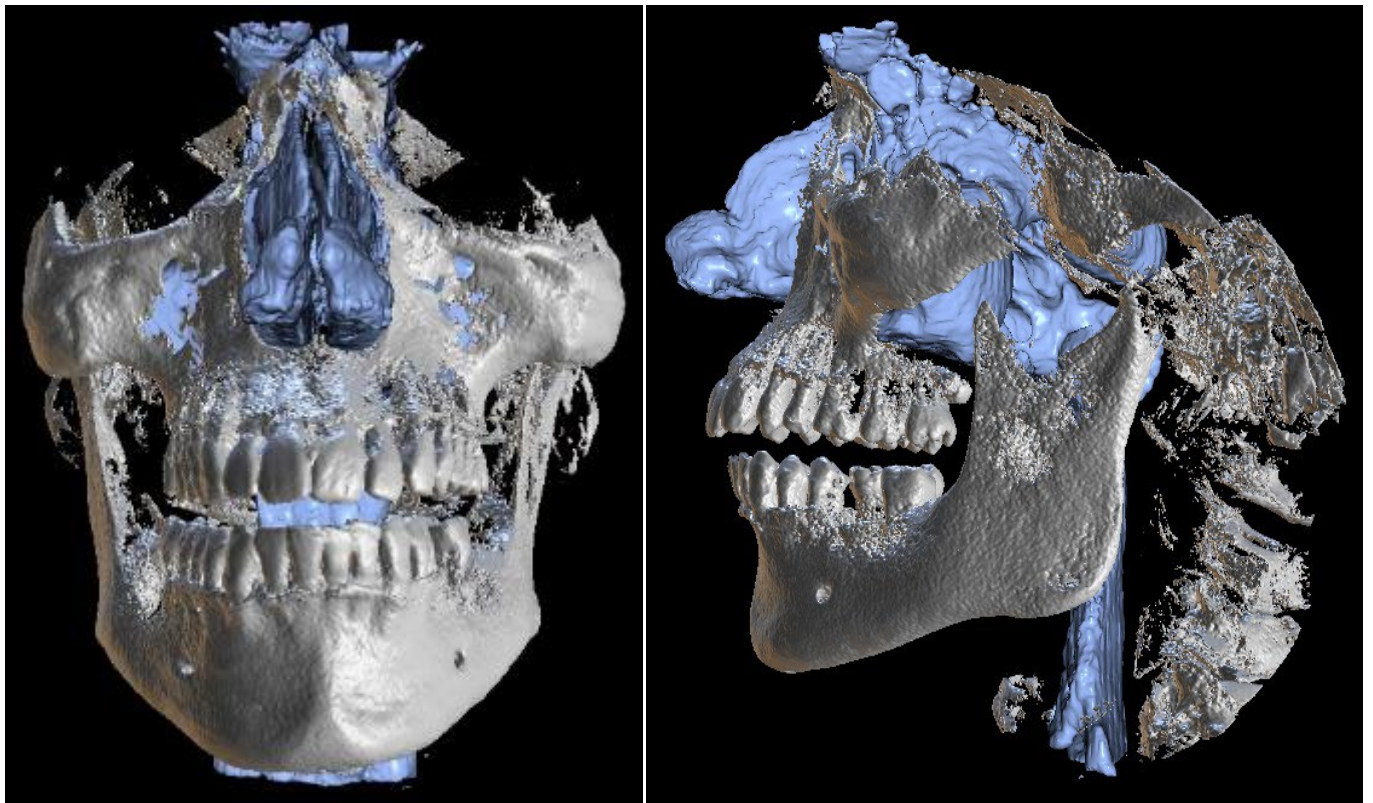

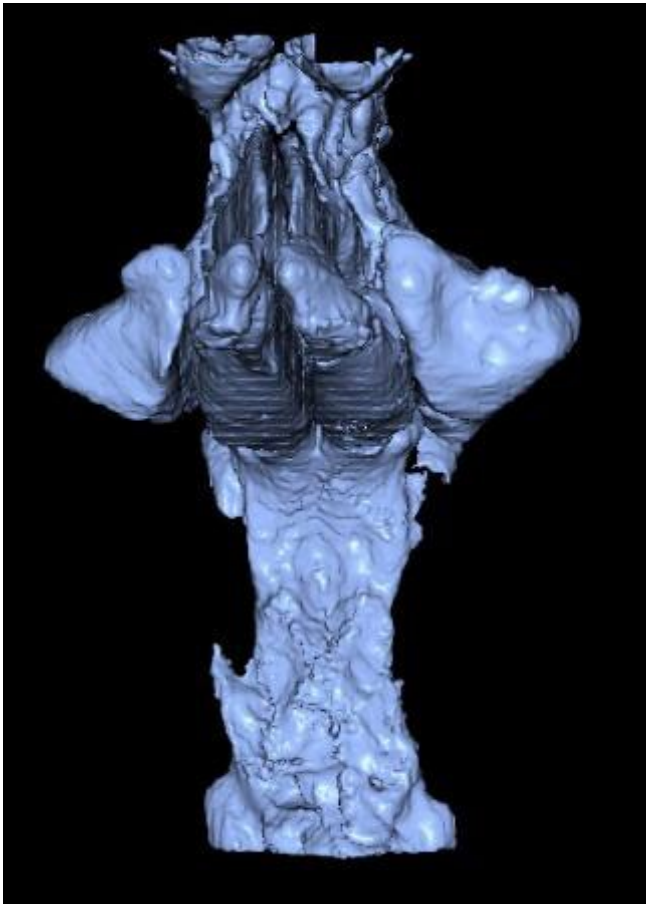

17 Guia Cirúrgico

É possível fabricar guias cirúrgicos no programa com base em modelos STL importados ou no chamado dispositivo de escaneamento. Também é possível editar o guia cirúrgico fabricado. Guias cirúrgicos são fabricados usando as funções localizadas no painel “Guia” (1), que pode ser aberto clicando o item de menu "Arquivo (ou Painéis) > Fabricação do guia" (2) (enquanto o modo "Normal" ou "Avançado" estiver ativo (3)). As ferramentas são divididas em grupos de acordo com suas finalidades

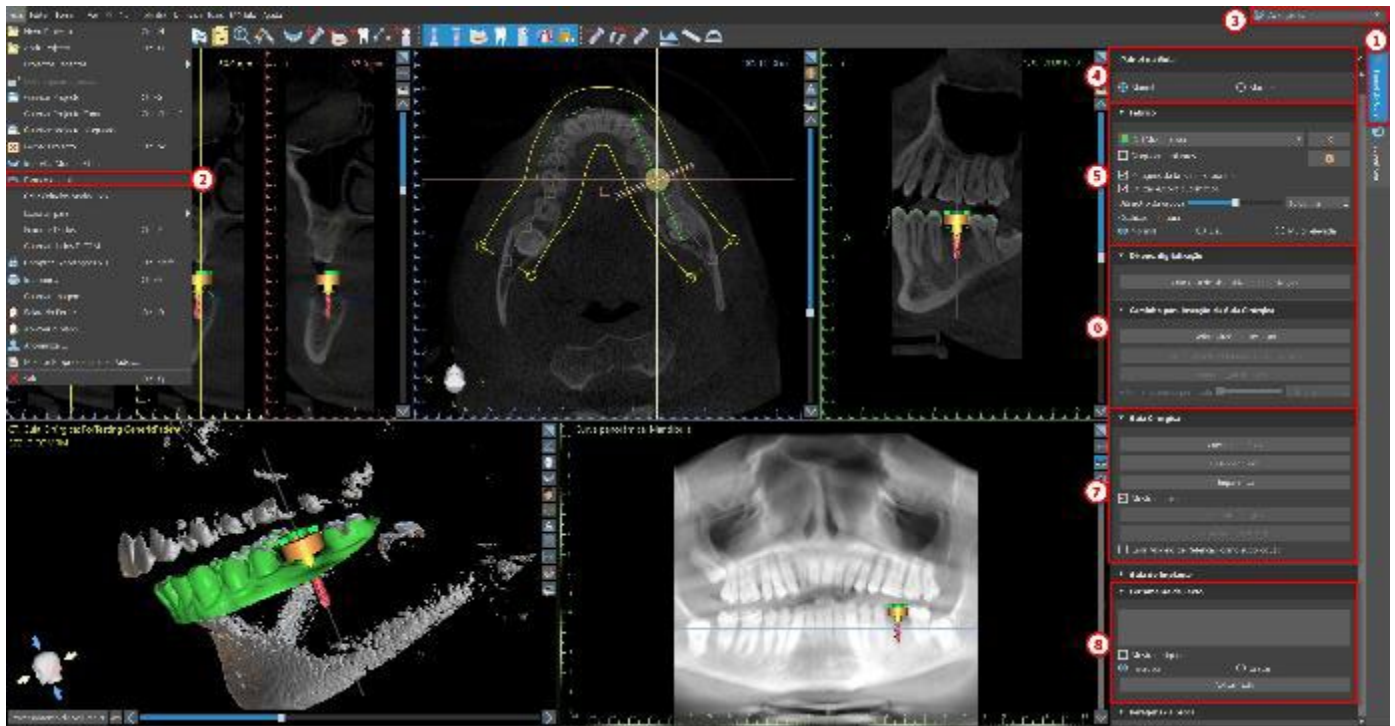


O primeiro grupo (4) combina elementos usados em conjunto para os dois tipos de modelo. O segundo (5) contém um botão para fabricar guias cirúrgicos com base em um modelo de dispositivo de escaneamento. O terceiro (6) contém uma função que cria o modelo de corte inferior. O quarto (7) contém todos os elementos para a fabricação de um guia cirúrgico a partir de um modelo de superfície. O quinto (8) contém as ferramentas para a criação de um texto de etiqueta. Estes são seguidos por painéis para criar etiquetas.

O método de fabricação difere de acordo com o tipo de modelo que está sendo processado.

17.1 Fabricação do guia baseada em dispositivo de escaneamento

Abra o painel de “Fabricação do guia”. A primeira seção ("Fabricação") contém todas as configurações comuns para a fabricação de um guia cirúrgico. A caixa de combinação (1) é usada para selecionar o modelo de entrada.


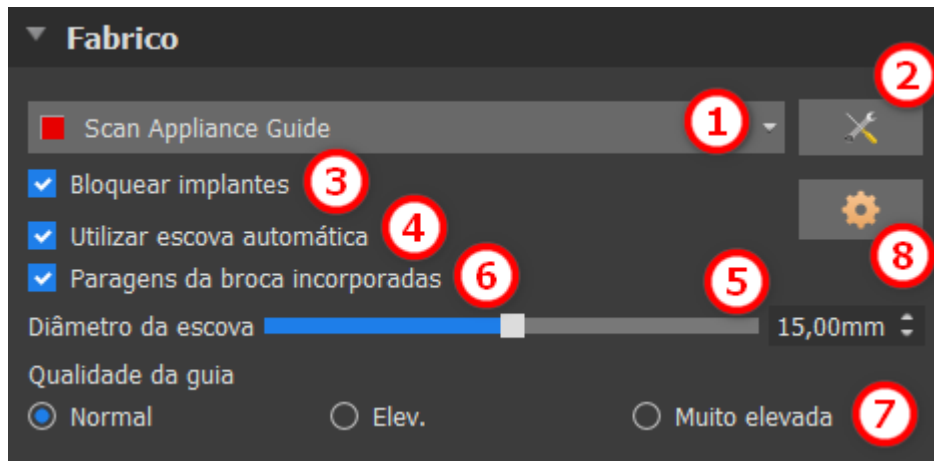


Alguns modelos de entrada podem estar danificados - eles são compostos de várias partes e sua estrutura interna pode não estar correta. A fabricação do guia cirúrgico pode falhar nesses casos. Se o modelo de entrada estiver danificado, é possível tentar corrigir a geometria de entrada usando a ferramenta de correção (2) e executar a fabricação do modelo novamente. Ao


manipular ou modelo, é uma boa maneira de desativar a opção de trabalhar com implantes, para que não sejam movidos acidentalmente, por exemplo. Uma caixa de seleção "Bloquear implantes" (3) os bloqueia. Os implantes também são bloqueados automaticamente ao usar ferramentas para fabricar guias cirúrgicos.

Para poder trabalhar convenientemente com a guia cirúrgica resultante e para que as partes salientes não o impeçam de trabalhar com as ferramentas, é possível selecionar o alinhamento automático das áreas acima e ao redor dos tubos da guia. Selecione "Usar pincel automática" (4) para esse fim e, em seguida, use a configuração (5) para definir o diâmetro da área livre. Se essas seleções não forem verificadas, apenas uma área do mesmo diâmetro do tubo guia fornecido será ativada acima dos tubos guia.

As configurações automáticas de escova para modificar os tubos de guia do software podem ser definidas nas configurações da Guia clicando no botão  na seção Fabricação.

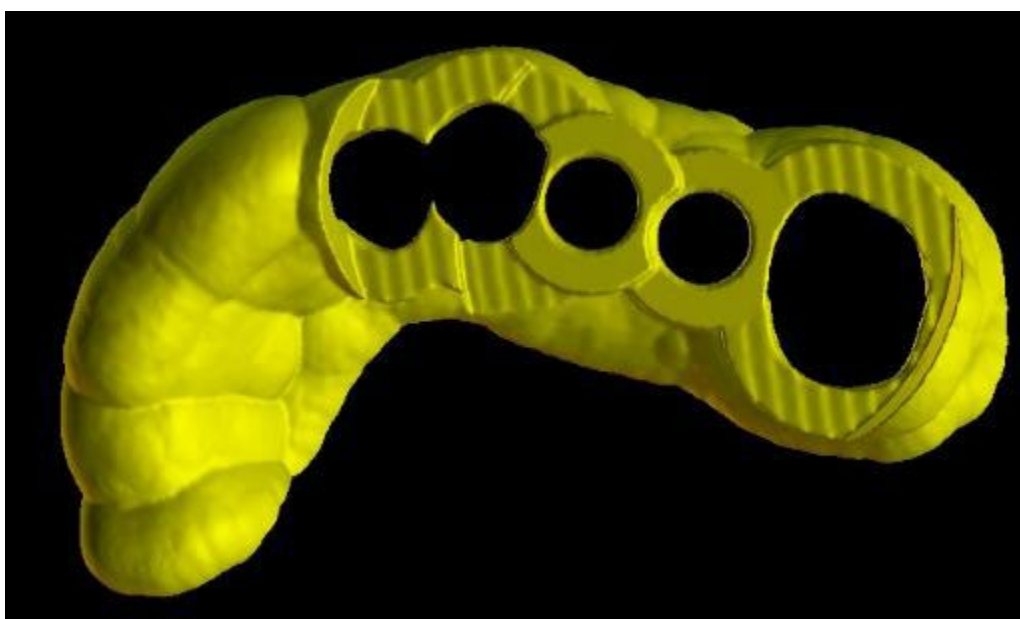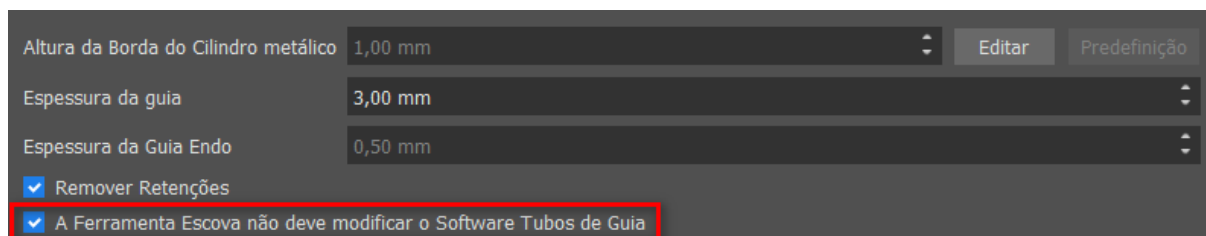

Tubos de guia do software não são modificados

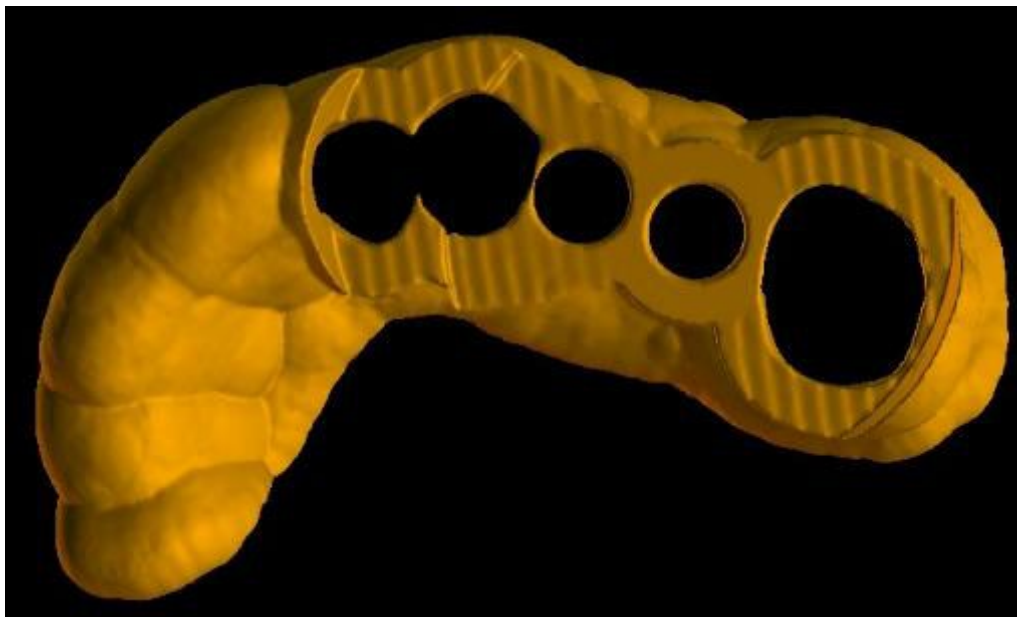


Tubos de guia do software são modificados

Utilizando a caixa de seleção "Paradas de perfurações integradas", é possível gerar uma parada de perfuração integrada, o que permite que a cabeça da peça atinja o fundo, criando a profundidade adequada à mandíbula (6).

Os detalhes do modelo resultante são ajustáveis (7). A regra geral é que, quanto mais detalhado for o modelo, mais demorará para gerá-lo e mais lentas serão as edições manuais com ferramentas como a Ferramenta Pincel. Um modelo com a configuração "Normal" deve ser suficientemente detalhado para a maioria dos dados de entrada.

Por fim, as propriedades adicionais do guia cirúrgico sempre podem ser ajustadas (8).

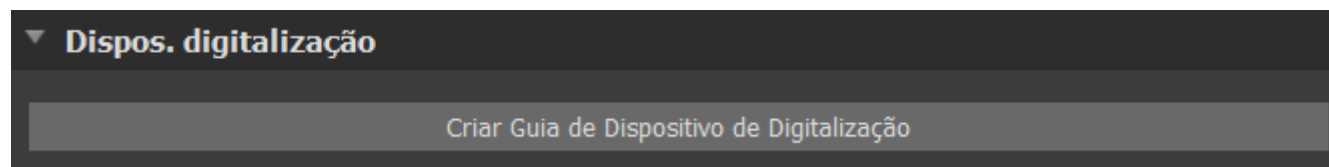


Após inserir e verificar todas as configurações no painel "Fabricação", é possível prosseguir para a fabricação automática da guia cirúrgica. Clicar no botão "Criar guia de Dispositivo de escaneamento" na seção "Dispositivo de escaneamento" executa isso. Uma barra de progresso é exibida e, quando isso acabar, o guia cirúrgico resultante será exibido automaticamente.

17.2 Fabricação do guia baseada em escaneamento da superfície de modelos



É necessário ter um modelo STL de entrada aberto também neste caso.

Primeiro verifique se todas as configurações no painel "Fabricação" estão corretas, ou seja, se o modelo de entrada correto está selecionado, se o alinhamento automático do modelo é ou não usado acima dos tubos de guia e qual nível de detalhe é selecionado para o guia cirúrgico resultante. As configurações específicas de fabricação do guia a partir de um modelo de superfície estão disponíveis na seção "Configurações do Guia"(8).

Ao abrir um projeto, o programa tenta adivinhar se ele contém dados superiores ou inferiores e faz a seleção automaticamente. O mesmo teste também é realizado ao iniciar a geração de um guia cirúrgico.

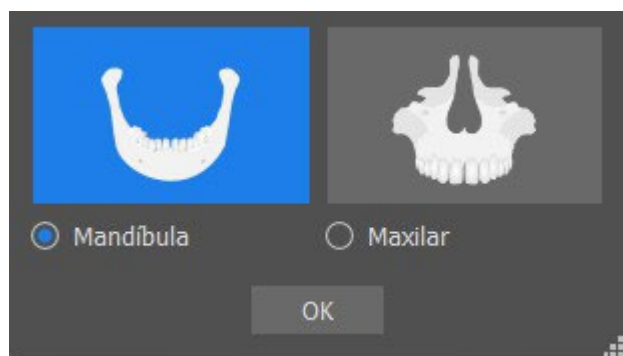


Se a estimativa do programa não estiver de acordo com a situação real, é possível alterar a seleção manualmente.

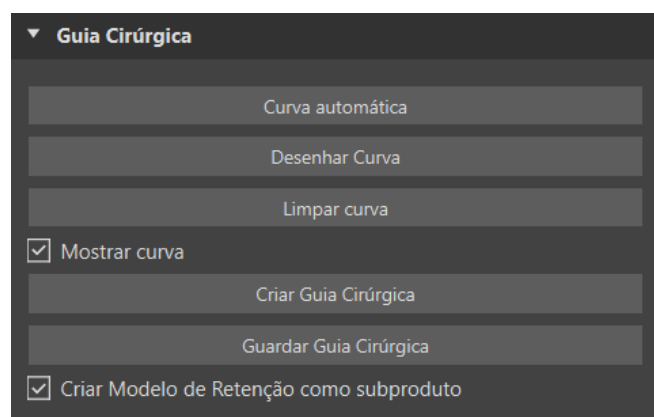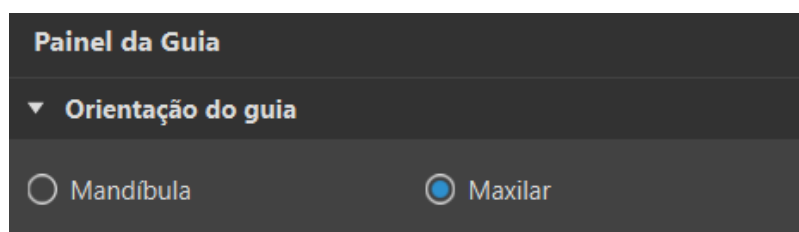


Antes de realmente fabricar a guia cirúrgica, é necessário especificar a área que deve ser coberta. Isso é feito automaticamente clicando no botão "Curva automática". Se o desenho automático da curva falhar, é possível desenhar a curva manualmente clicando em "Desenhar curva". Isso ativa o modo de desenho. O estado do botão é indicado por uma mudança de cor.

Se estivermos no modo de desenho de curvas, é possível manipular o modelo sem pressionar nenhuma tecla.

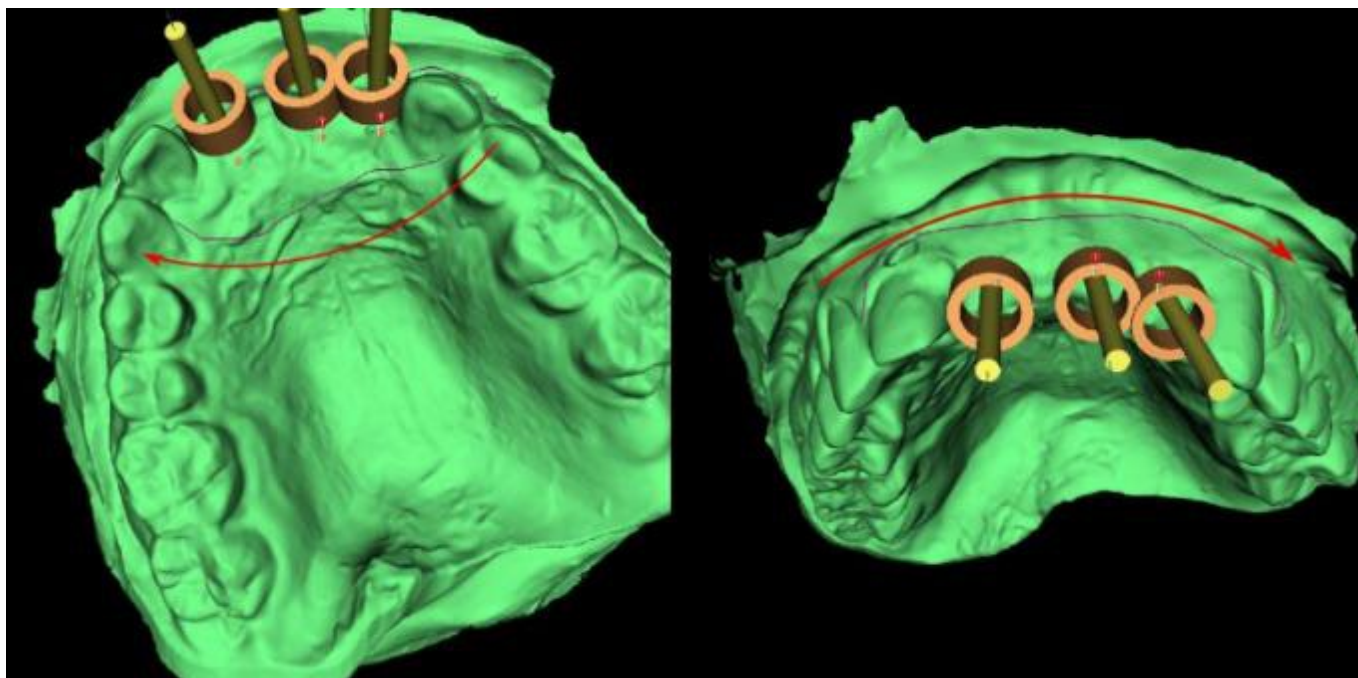


A forma da curva pode ser editada usando pontos de controle individuais nela. Antes de gerar um guia cirúrgico, é uma boa ideia verificar sua forma nesse modo. Se necessário, a curva pode ser excluída clicando no botão “Limpar curva” e a curva pode ser desenhada de forma automática novamente.

Como consequência da fragmentação, erros em alguns modelos de entrada e, em alguns casos, irregularidades locais na superfície, pode acontecer que a curva não corresponda exatamente à forma pretendida. Nesse caso, é necessário mover os pontos mais próximos da seção incorreta para que o contorno resultante se alinhe; veja as seguintes imagens.

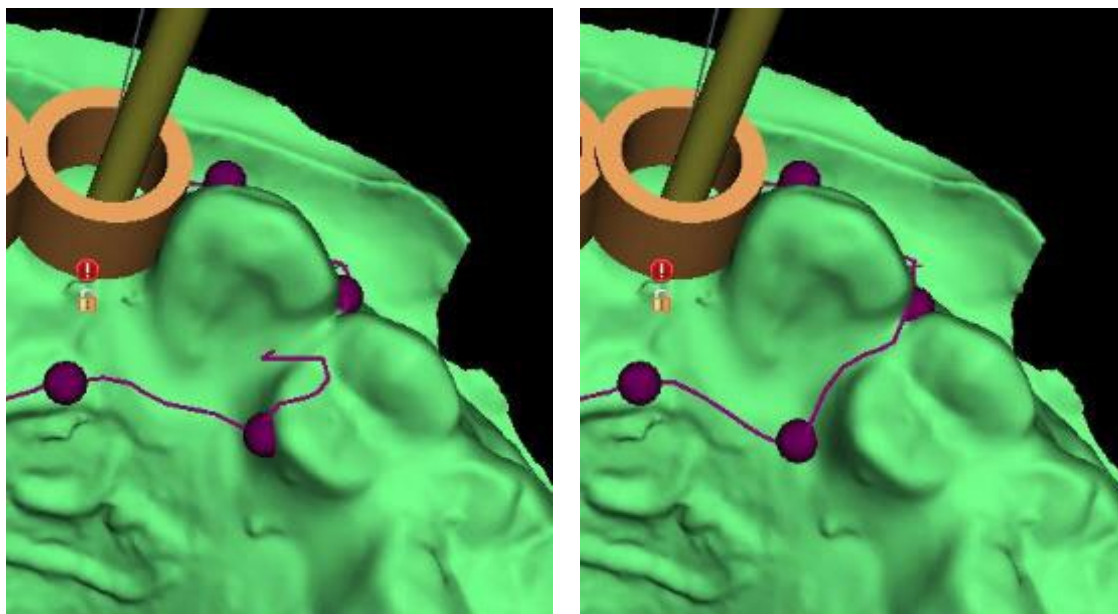

Os parâmetros de curva automática podem ser definidos em Preferências > Guia Cirúrgico > Sugestão de curva de guia. A curva sugerida será exibida com base nas configurações.

Selecionar "Guia cirúrgico externo para canino contralateral e exceder até o dente mais distal" estenderá a curva do guia cirúrgico do dente mais distal no lado do arco, onde um implante está localizado, até o canino contralateral.

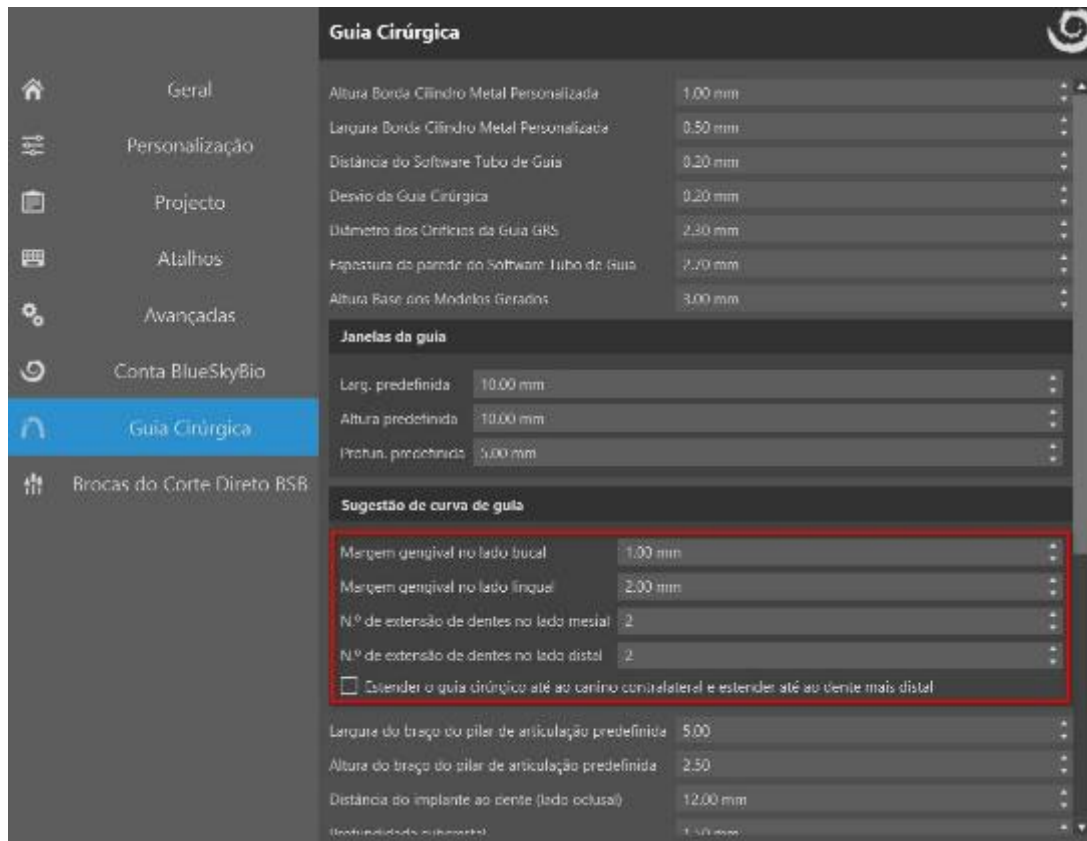

Depois de terminar a edição, você pode executar a geração do guia cirúrgico com o botão “Criar Guia Cirúrgico”. A curva cortada, agora desnecessária, é ocultada automaticamente neste momento. Isso é indicado pela caixa de seleção “Mostrar curva”, que pode ser usada para exibir novamente a curva.


Se a curva inserida e, portanto, o guia cirúrgico resultante não contiver todos os implantes planejados, o usuário é notificado e tem a opção de interromper a geração.

Depois de concluído, o modelo de guia cirúrgica fabricado é exibido no painel “Superfícies”, onde seus parâmetros podem ser alterados como padrão.



O guia cirúrgico pode ser regenerado com parâmetros editados e a mesma curva; a curva é apenas oculta e pode ser exibida com a seleção, editada novamente e usada para criar um modelo modificado.

17.3 Remove retenções


A função “Caminho para inserção da guia cirúrgica” é usada para definir a direção a partir da qual a guia cirúrgica será inserida. Com esta função, é possível visualizar as áreas que passam “sob” a guia cirúrgica (retenções) e podem causar problemas ao inserir a guia cirúrgica nos dentes, principalmente no caso de utilização de materiais rígidos para fabrico. Estas áreas podem ser removidas clicando na caixa de seleção “Criar modelo de retenção como subproduto” (gera modelo com retenções removidas). O guia cirúrgico criado neste modelo será fácil de instalar.

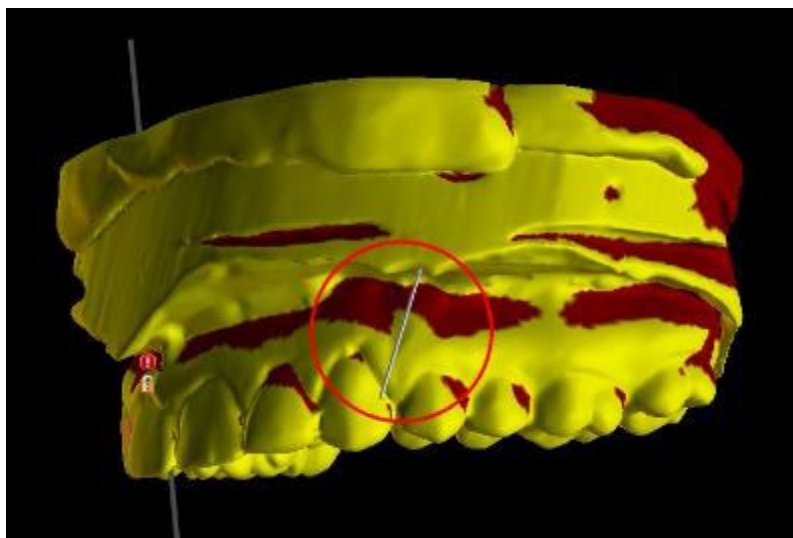

As diferenças entre as saídas individuais podem ser comparadas no seguinte par de imagens. À esquerda, há um guia do modelo com os retenções removidos; à direita, todos os detalhes são preservados.

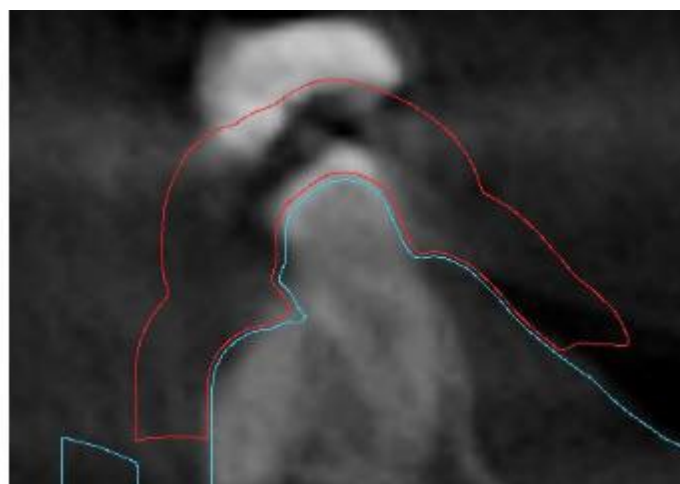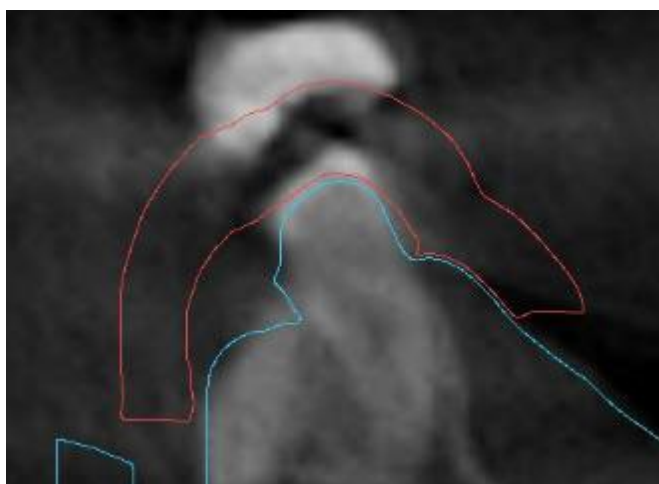


O ângulo de Direção do Caminho de Inserção padrão e o Retenção Máximo Permitido são definidos em Preferências, separador Guia cirúrgico. Além disso, a funcionalidade Definir Direção de Inserção da Vista está disponível no Pannel do Guia. A criação de um Modelo de Retenção gera um novo modelo que pode ser trabalhado de forma independente.

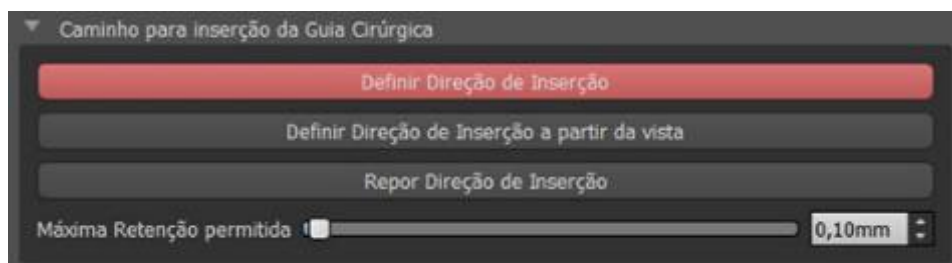

17.4 Ferramenta de Pincel


Com exceção da ferramenta de pincel automático, o aplicativo oferece as ferramentas básicas para ajustar manualmente o resultado do guia cirúrgico: As "Ferramentas de Pincel". Essas ferramentas podem suavizar a superfície (ou seja, diminuir as partes protuberantes e uniformizar as

depressões), adicionar ou remover material da superfície, deformar localmente o material da superfície e editar contornos no modelo (funciona apenas em 2D). A ferramenta é encontrada sob o módulo "Modelo mestre", na "Edição de modelo". Para mais informações sobre ajustes de modelo, consulte a seção 12.

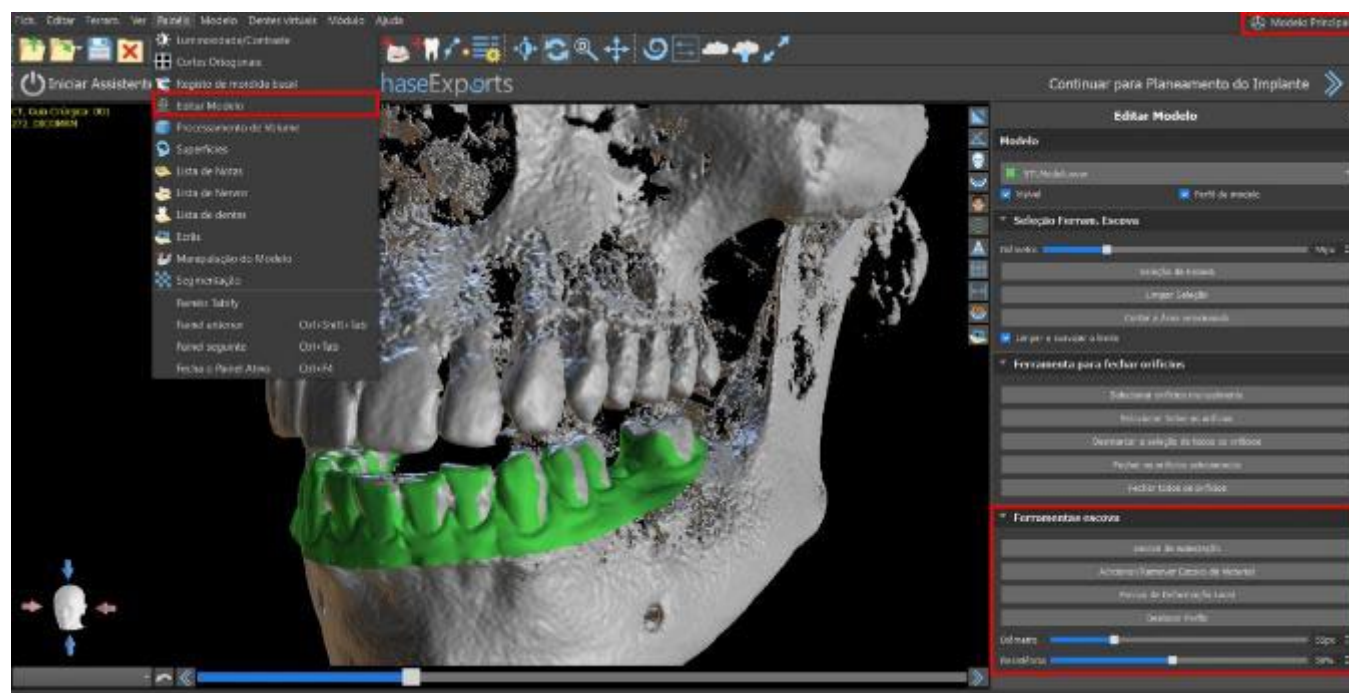


17.5 Ferramenta de Texto

As guias cirúrgicas fabricadas podem ser complementadas com um ou mais textos com um perfil 3D. Isso é feito com a "Ferramenta de Texto".

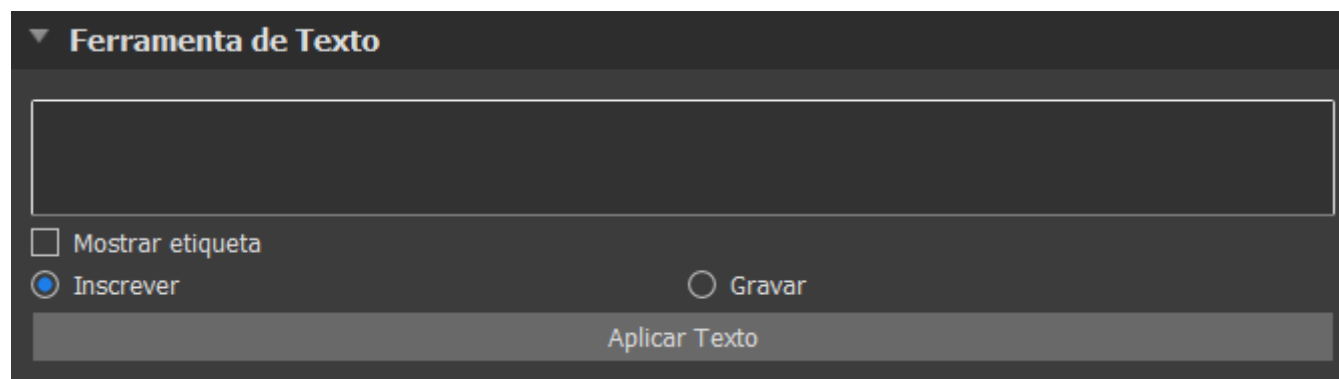

É necessário primeiro verificar se o modelo correto está selecionado. Se o modelo estiver definido como invisível nesse momento, o usuário será notificado sobre isso quando tentar inserir um rótulo nele. O texto é inserido no campo de edição. Nesse ponto, uma exibição auxiliar do texto digitado também é mostrada na janela de exibição 3D. O texto estará localizado no modelo no local em que é exibido nesta janela. Portanto, é necessário posicionar o modelo na janela 3D de forma que o texto fique na posição correta em sua superfície. Também é necessário selecionar um dos dois métodos para criar texto em profundidade: relevo ou gravação.

Em seguida, pressione o botão "Aplicar Texto". A exibição auxiliar do texto na janela 3D está oculta e o texto é pressionado na superfície da guia cirúrgica. A exibição auxiliar na janela 3D pode ser reativada com a caixa de seleção "Mostrar etiqueta".

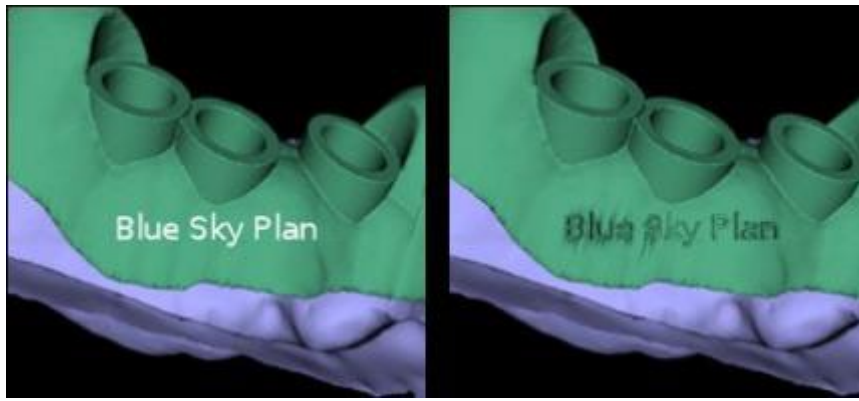

18 Modo endodôntico

O tratamento endodôntico (também conhecido como tratamento de canal radicular) é uma sequência de tratamento para a polpa infectada de um dente que se destina a proporcionar a eliminação da infecção e a proteção do dente descontaminado de uma futura invasão microbiana. É normalmente realizado num dente e pode incluir todas as 4 raízes.

O planejamento se inicia com uma tela introdutória intitulada "Endodôntico", onde o usuário seleciona o tipo de planejamento. Para mais informações, consulte o capítulo 3 "Blue Sky Launcher".




Para continuar no modo Endo, clique no botão "Continuar para o planejamento endodôntico", na tela superior direita.

Antes de realmente criar a guia endodôntica, é necessário especificar a área que deve ser coberta. Isso é feito automaticamente clicando no botão "Curva automática" (1). Clicar no botão "Desenhar curva" (2) ativa o modo de desenho. O estado do botão é indicado por uma mudança de cor. A borda da curva pode ser editada usando os pontos de controle individuais. Antes de realmente gerar a guia endodôntica, é importante verificar seu formato nesse modo. Se necessário, a curva pode ser excluída clicando no botão "Limpar curva" (3) e uma nova curva pode ser desenhada.

Quando a edição estiver concluída, a guia endodôntica poderá ser gerada clicando no botão "Criar Guia Endo" (4). Se a curva inserida e, portanto, a guia endodôntica resultante, não contiver todos os implantes planejados, o usuário será notificado e terá a opção de interromper a geração.

Depois de concluído, o modelo de guia endodôntica que foi criado é exibido no painel "Superfícies" e pode ser exportado e salvo clicando no botão "Salvar Guia Endo" (5).

A Espessura da Guia Endo pode ser definida no Módulo Avançado no painel da Guia. Abra as configurações da Guia clicando no ícone  (6).

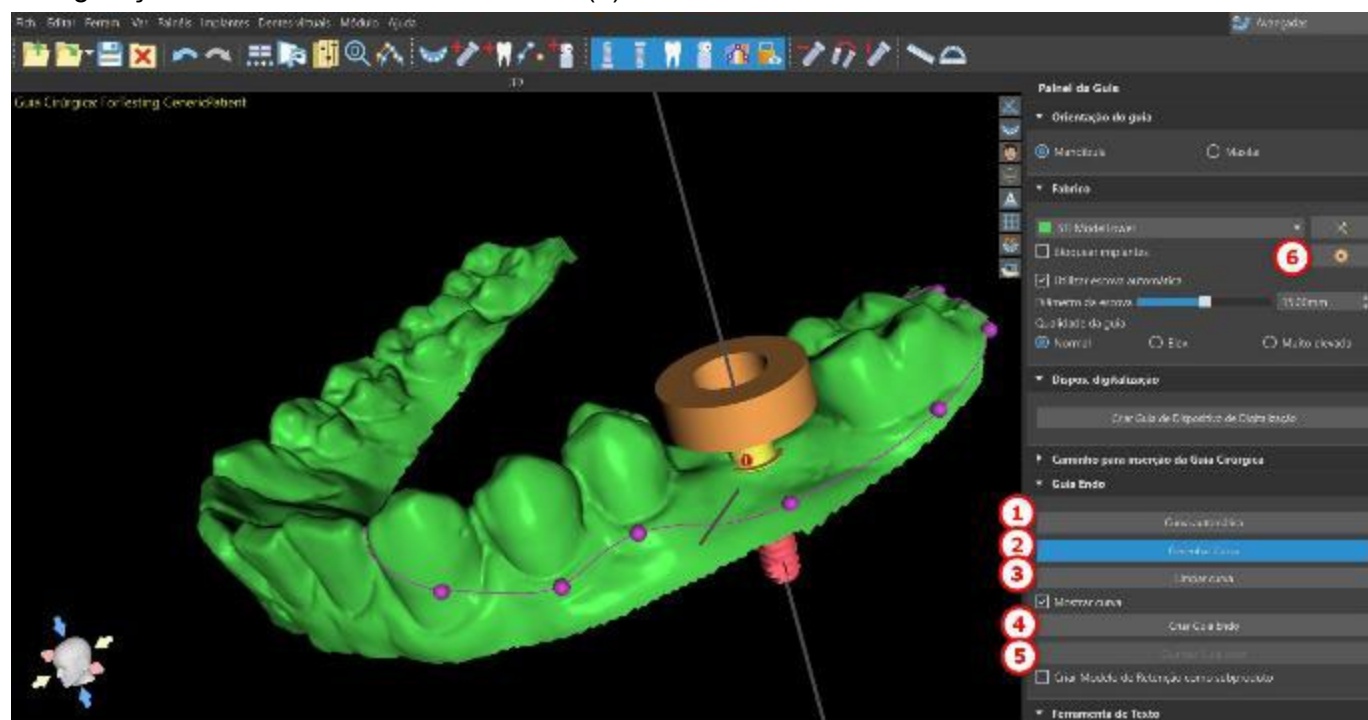


O modo Endo deve estar ativo para definir a Espessura da Guia Endo.



O utilizador pode colocar uma ponta de implante exatamente onde clicar. O pivot do implante é "Ponta" por predefinição ("Cabeça" com o modo Endo desligado).

O utilizador pode ativar "Mostrar sempre implante/dente selecionado" para visibilidade 2D (mesmo quando a transparência estiver definida para 1,00) e "Mover cortes para a posição selecionada do implante" para mover os cortes para o implante adicionado. Essas opções estão disponíveis em Preferências -> Guia Cirúrgica e o modo Endo deve estar ativo para que seja possível trabalhar nele.

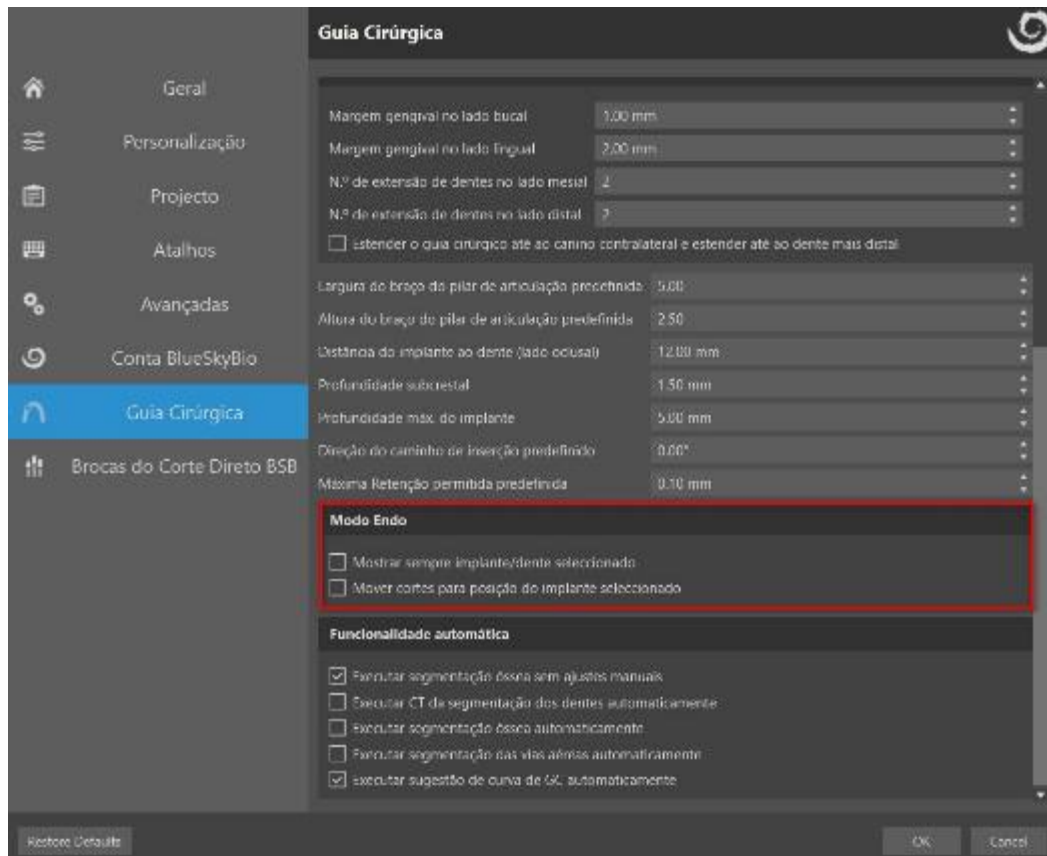

Observação: Quando o usuário estiver no módulo endodôntico, não será possível alternar para o módulo de guia cirúrgica. É necessário iniciar um novo projeto no módulo Guia Cirúrgico!

19 Exportando Dados

A maioria dos dados do projeto pode ser exportada do aplicativo na forma de um modelo STL. A seleção do menu "Arquivo> Exportar dados" é usada para exportar dados.

A qualidade da exportação pode ser definida na caixa de diálogo, o que influencia a qualidade do modelo resultante, mas também o tempo necessário para gerar a exportação. As caixas de seleção podem ser usadas para selecionar o que deve ser exportado do projeto. A seleção é limitada aos dados que estão visíveis atualmente na vista 3D do aplicativo. Nervos, modelos importados, implantes e superfícies de densidade podem ser selecionados. É possível exportar para um arquivo ou diretamente para o aplicativo VRMesh instalado para uma licença com um número limitado de exportações. O número de exportações restantes é indicado no botão "Exportar" e no título da janela. O número de exportações é reduzido apenas uma vez em um projeto aberto atualmente. Ao selecionar "Abrir no Alpha AI", "Abrir no RayWare", ou "Abrir no Uniz Dental", os modelos podem ser exportados para o respectivo software de impressão 3D externo.

Observação: Exporte somente dados que tenham sido revisados e aprovados conforme descrito na seção 1.2 Advertências. O dentista responsável pelo tratamento deve revisar, modificar se necessário e aprovar todos os dados gerados pelo software antes de qualquer tratamento do paciente.

Qualidade exportação

☒ Padrão ☐ Elev. ☐ Muito elevada

Formato do ficheiro de exportação

STL

Nervos

Nervo	Selecionado
0	☒
1	☒

Superfícies STL

Nome	Cor	Selecionado
BSP_2021_1164_Lower_Model		☒
BSP_2021_1164_Upper_Model		☒

Superfícies CT

Nome	Selecionado
Original	☒

Implantes

ID	Selecionado L.	Selecionado A.	Selecionado G. T.
0	☒	☒	☐
1	☒	☒	☐

Dentes virtuais

Nome do dente	CAM	Editado	Selecionado
---------------	-----	---------	-------------

Scanbodies

ID	Selecionado S.
----	----------------

☐ Mostrar apenas os dentes com o suporte para ficheiro CAM ☐ Trocar a orientação da face ☒ Exportar ficheiros separados para uma pasta ☐ Abrir em RayWare ☐ Abrir em Alpha AI ☐ Abrir na Uniz Dental Custo: 0

Criar superfície

Exportar (Falta(m) 39)


Cancelar

20 Softwares externos

20.1 Importar do Medit

O propósito da conexão entre o Blue Sky Bio e o Medit é possibilitar que os escaneamentos do scanner intraoral do clínico sejam usados diretamente no Blue Sky Plan.


Para importar os escaneamentos intraorais ao Blue Sky Plan, selecione a caixa em seu scanner cujo status esteja sinalizado como “Escaneamento Concluído”. Em seguida, clique no botão “Exportar Blue Sky Plan” para exportar os dados escaneados para o aplicativo Blue Sky Plan.

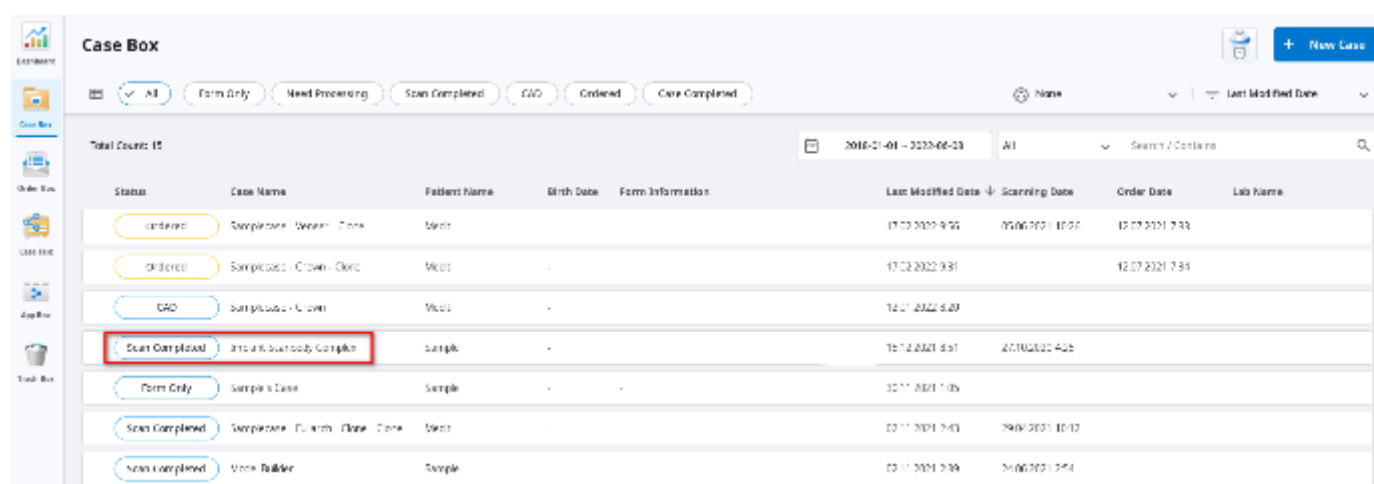

Status	Case Name	Patient Name	Birth Date	Form Information	Last Modified Date	Scanning Date	Order Date	Lab Name
ordered	Sample Case - Upper - Bone	Sample	-	-	17.03.2022 9:55	05.06.2021 10:24	12.07.2021 7:33	
ordered	Sample Case - Crown - Crown	Sample	-	-	17.02.2022 9:31		12.07.2021 7:31	
CAD	Sample Case - Crown	Sample	-	-	12.07.2021 9:39			
Scan Completed	Implant Scanbody Complex	Sample	-	-	15.12.2021 8:31	20.06.2021 4:25		
Form Only	Sample Case	Sample	-	-	10.11.2021 1:05			
Scan Completed	Sample Case - Full Arch - Bone - Bone	Sample	-	-	02.11.2021 7:43	19.09.2021 10:12		
Scan Completed	Upper Builder	Sample	-	-	02.11.2021 7:39	19.09.2021 7:54		



Para importar um escaneamento do Medit, é necessário ter um projeto aberto no Blue Sky Plan. O escaneamento será carregado automaticamente.

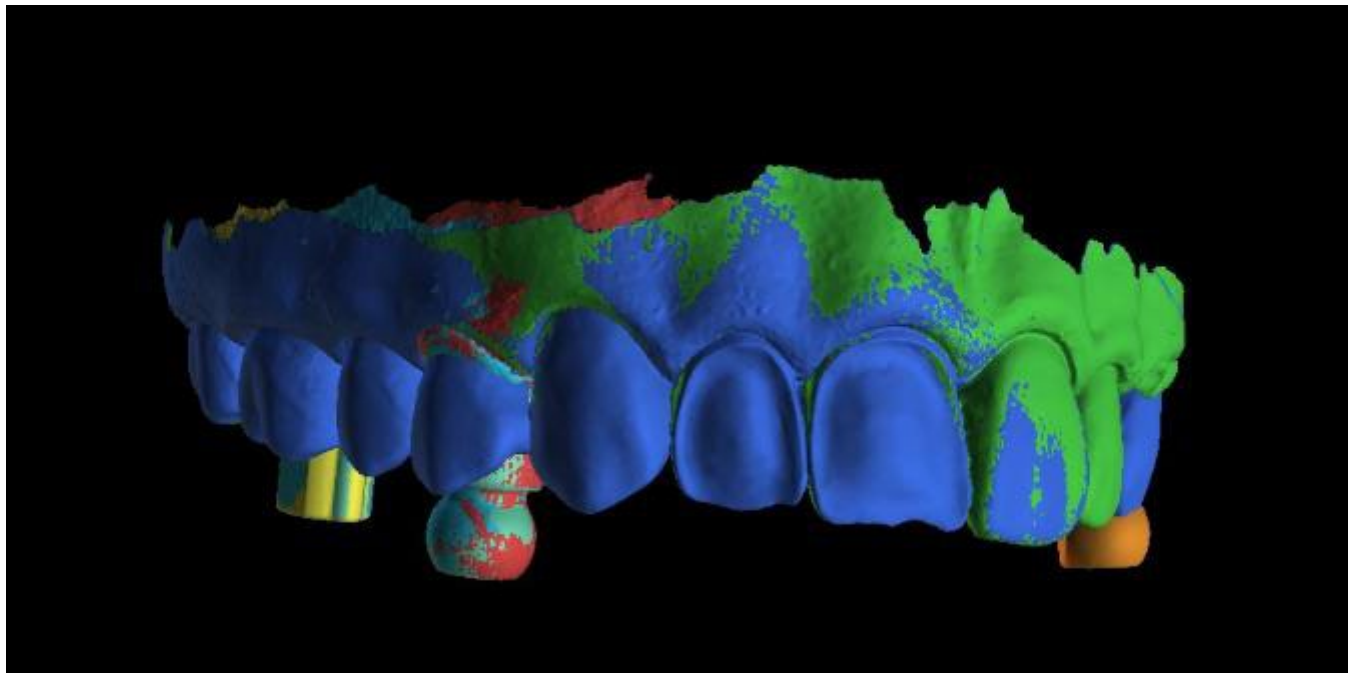

21 Pinos de Articulação


Nos casos em que o usuário precise imprimir modelos 3D da mandíbula superior e inferior em uma posição exata, a função Pinos de articulação deve ser usada. Os pinos de articulação podem ser conectados a dois modelos arbitrários de STL (duas arcadas opostas) e os modelos com os pinos podem ser exportados.

Depois de impressas as mandíbulas superior e inferior (modelos, bases da dentadura, etc.), o usuário pode inserir os pinos macho e fêmea um no outro para recriar a articulação exata. Os pinos de articulação podem ser colocados no painel de manipulação do modelo no módulo de guia cirúrgico.

O usuário precisa selecionar os modelos de maxilar superior e inferior e clicar no botão "Adicionar". O número de pinos também pode ser alterado.



Ambos os modelos não precisam ser fechados antes de adicionar os pinos de articulação. Os modelos abertos são fechados durante esse processo automaticamente. Ambos os modelos devem estar alinhados antes de adicionar pinos.

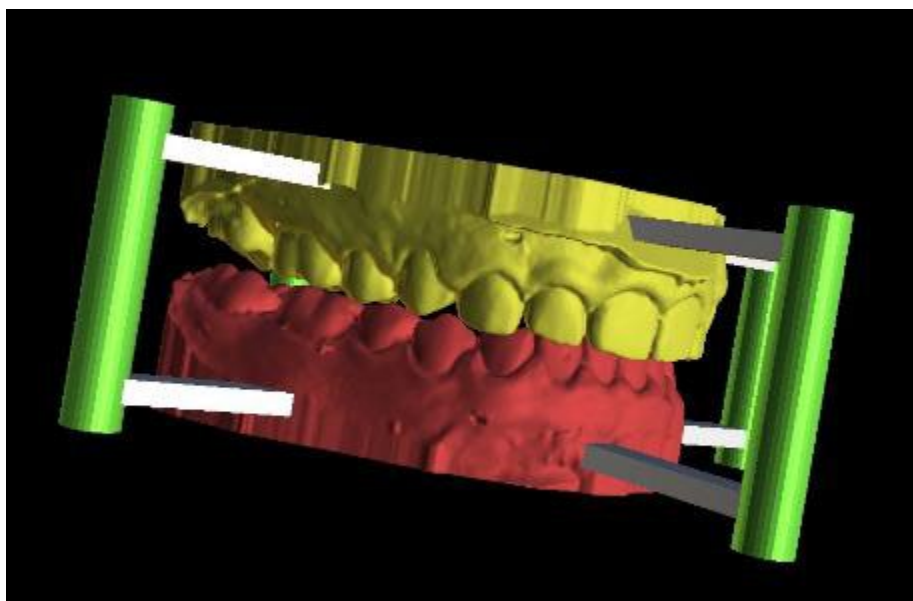

Os pinos e as ferramentas de manipulação serão exibidos. As dimensões dos braços de conexão e dos pinos podem ser alteradas arrastando os elementos de manipulação que aparecem quando o usuário passa o mouse sobre esse objeto. As setas permitem que os pinos sejam movidos para os lados e os elementos de escala alterem a espessura dos pinos.

Não é possível arrastar os braços dos pinos para fora dos pinos. As dimensões padrão podem ser definidas em Preferências, na guia "Guia Cirúrgico", como largura padrão do braço do pino de articulação e altura padrão do braço do pino de articulação.

Geral

Personalização

Projecto

Atalhos

Avançadas

Iniciar sessão em BBB/LP

Licença

Guia Cirúrgica

Guia Cirúrgica

Altura Borda Cilindro Metal Personalizada

1,00 mm

Largura Borda Cilindro Metal Personalizada

0,50 mm

Distância do Software Tubo de Guia

0,20 mm

Desvio da Guia Cirúrgica

0,20 mm

Diâmetro dos Orifícios da Guia GRS

2,30 mm

Espessura da parede do Software Tubo de Guia

2,70 mm

Altura Base dos Modelos Gerados

3,00 mm

Janelas da guia

Larg. predefinida

10,00 mm

Altura predefinida

10,00 mm

Profun. predefinida

5,00 mm

Largura do braço do pilar de articulação predefinida

5,00

Altura do braço do pilar de articulação predefinida

2,50

Distância do implante ao dente (lado oclusal)

12,00 mm

Direção do caminho de inserção predefinido

0,00°

Máxima Retenção permitida predefinida

0,10 mm

Modo Endo

☐

Mostrar sempre implante/dente seleccionado

☐

Mover cortes para posição do implante seleccionado

Uma vez que a posição e o tamanho de todos os pinos e braços são ajustados, clicando em "Criar pinos de articulação", os modelos finais de arcadas com os pinos de articulação são criados. Os modelos de mandíbula superior e inferior são separados para exportação e preparados com pinos de articulação macho e fêmea para que possam ser conectados na posição original.




Blue Sky Bio

BS-LS-IFU-06-pt Ver 11

Blue Sky Plan®


2026-10

131

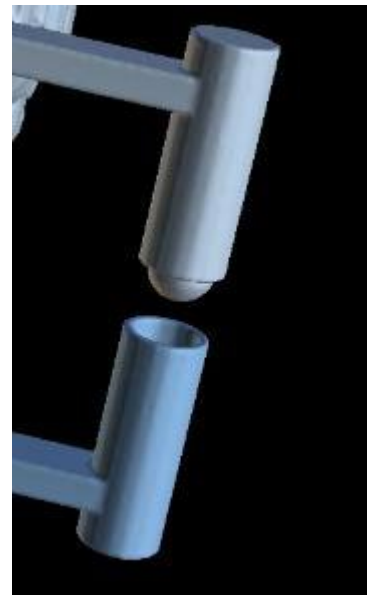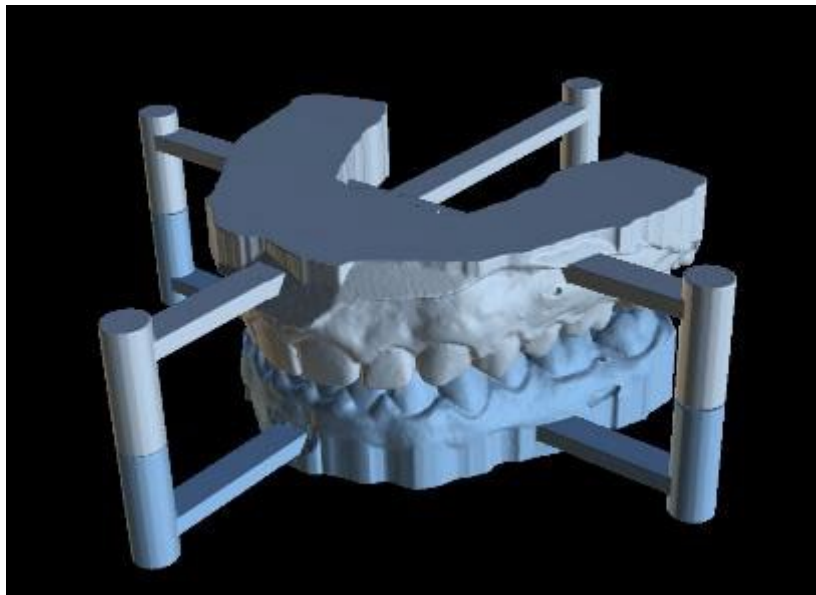

22 Exportando Coordenadas

Com o objetivo de produzir um guia cirúrgico, o programa tem a função de exportar as coordenadas dos implantes com base nos marcadores que fazem parte do dispositivo de escaneamento. É necessário primeiro designar marcadores visíveis nos dados. Abra o painel com as funções de exportação de coordenadas na opção de menu “Arquivo> Exportar para > Coordenadas de GPI/...”

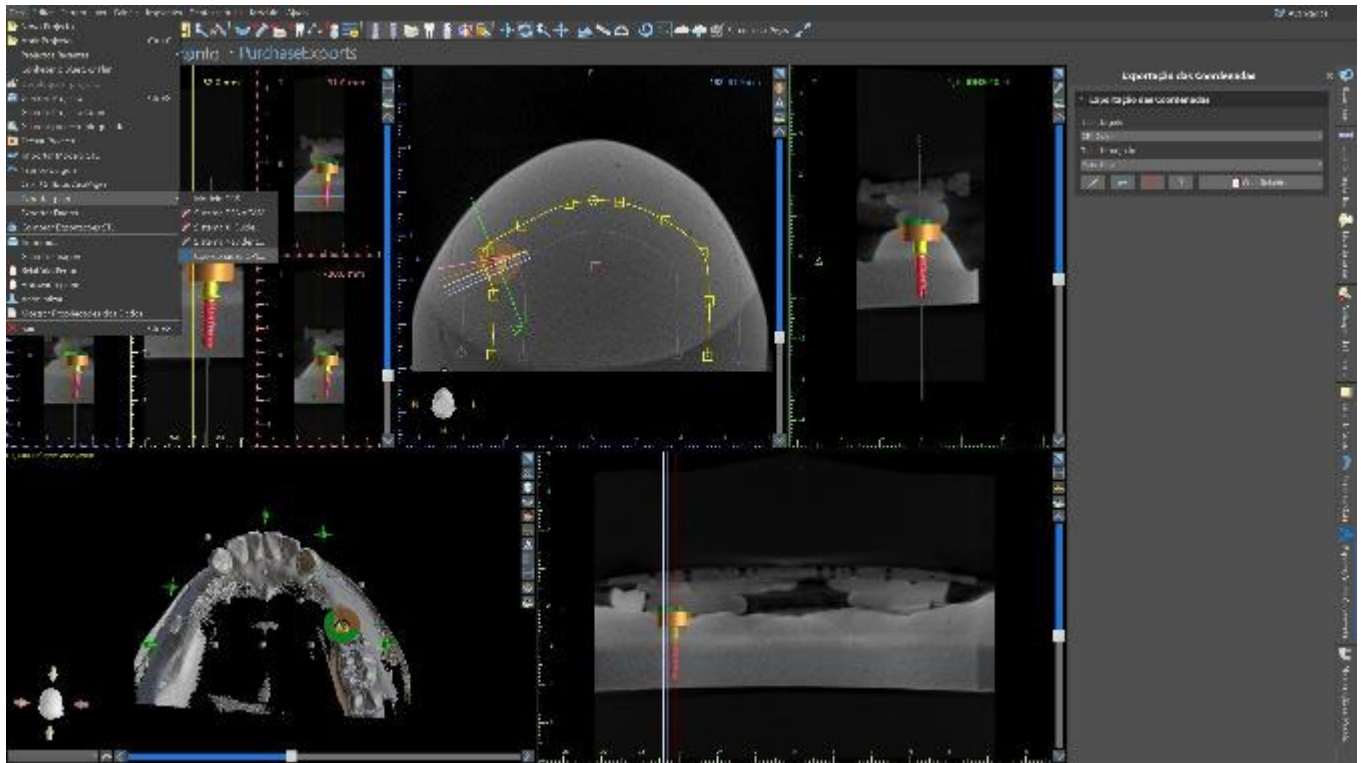

No painel de configurações de exportação de coordenadas, selecione o tipo de dispositivo de escaneamento (1) e o tipo de mandíbula correspondentes (2). Uma visualização esquemática do modelo atualmente selecionado pode ser exibida clicando no botão de ajuda (3).

GPI Guide




Na janela 3D, visualize o modelo acima e ajuste a exibição com o controle deslizante para que os marcadores fiquem claramente visíveis. Clique no botão para ativar o modo de exibição de marcador

(4) e designe marcadores clicando neles. A ordem na qual os marcadores são designados deve corresponder à ordem marcada no modelo esquemático. Se nenhum pedido for prescrito, os marcadores poderão ser selecionados em qualquer ordem. Os marcadores podem ser designados em todas as visualizações disponíveis e sua posição é ajustada automaticamente para o melhor ajuste.




Se você cometer um erro ao inserir um marcador, o ponto inserido mais recentemente (5) ou todos os pontos (6) poderão ser removidos clicando nos botões correspondentes ou clicando com o botão direito do mouse em um marcador quando o modo de seleção de marcador estiver ativo. As coordenadas são realmente exportadas quando você clica no botão "Criar relatório" (7). Para uma licença com um número limitado de exportações, o número de exportações restantes é indicado no botão; o número de exportações reduzido por um cada vez que o projeto é aberto.

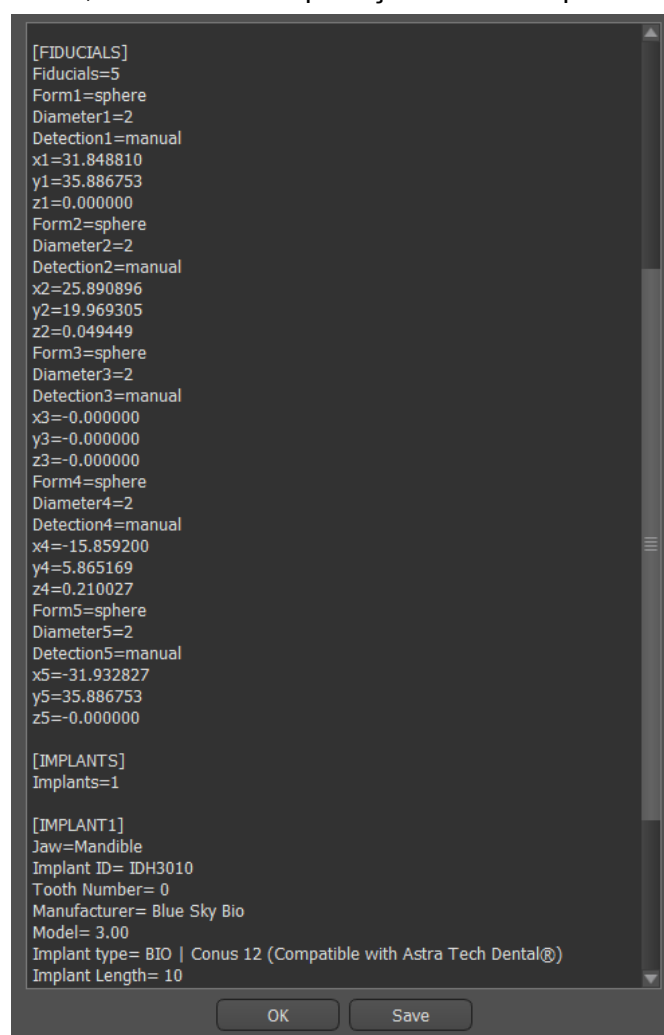

23 Operações booleanas

As operações booleanas permitem ao usuário ingressar e subtrair modelos 3D. Esta função pode ser ativada no Modelo Mestre ou no Módulo Normal/Avançado na seção Painéis.

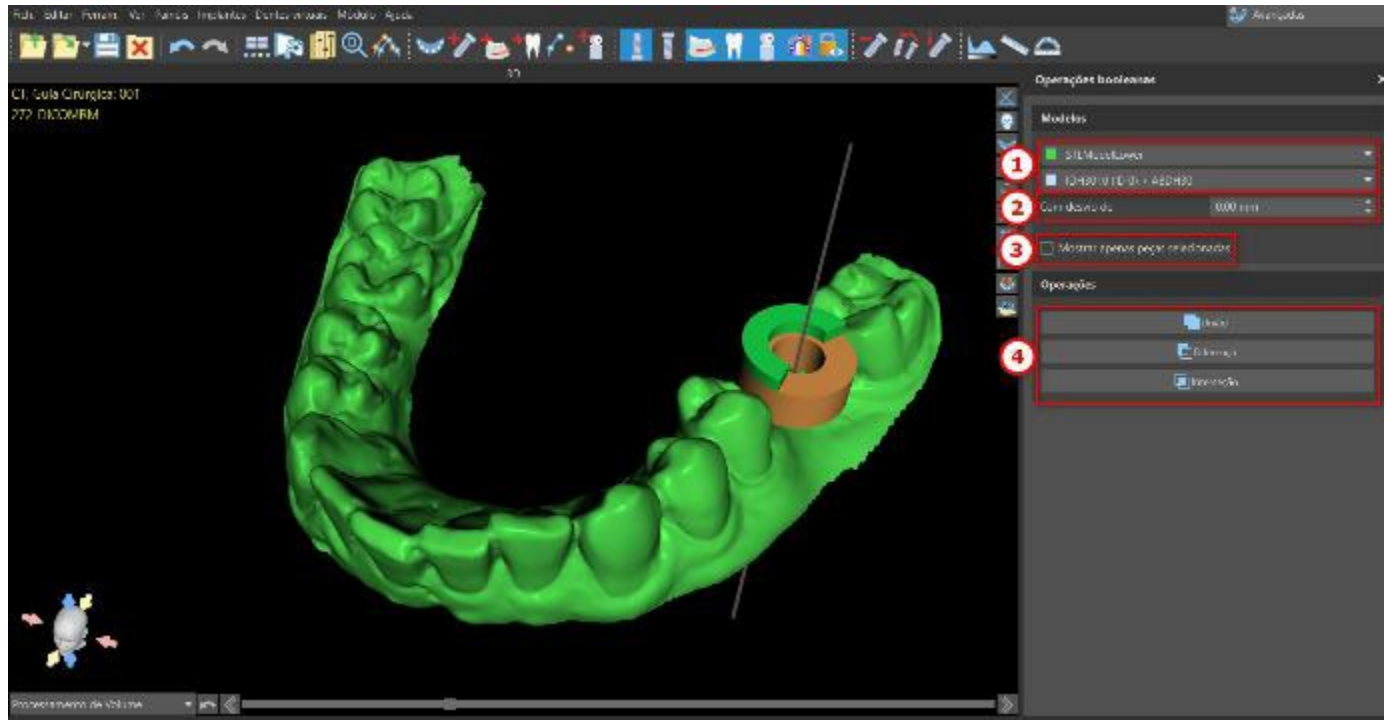


Para iniciar uma operação booleana, selecione dois modelos na seção de modelos (1) com o deslocamento preferido (2) e clique na opção de operações (4). A malha resultante da operação estará disponível no painel Superfícies.

Se houver vários modelos disponíveis, a caixa de seleção "Mostrar somente as peças selecionadas" exibirá somente os modelos entre os quais a operação booleana ocorrerá.


Observação: Operações booleanas são aplicadas a qualquer modelo STL ou implante.

23.1 União

Os objetos serão unidos para se tornarem um único objeto.

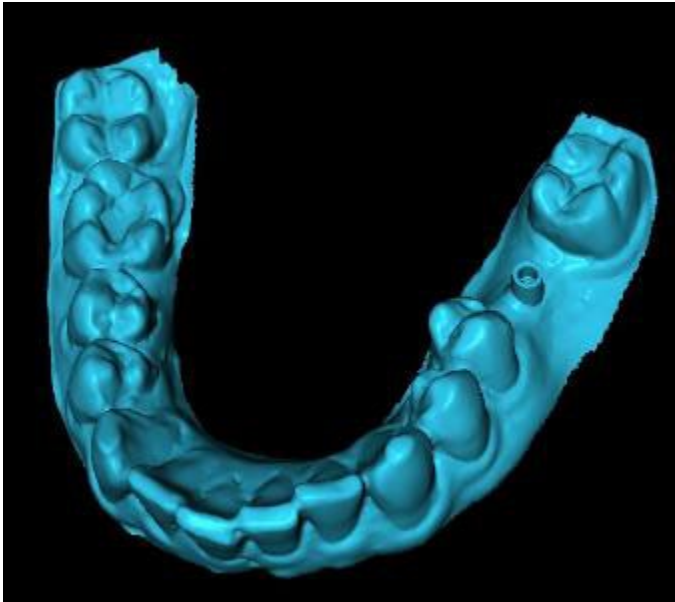


União com deslocamento zero

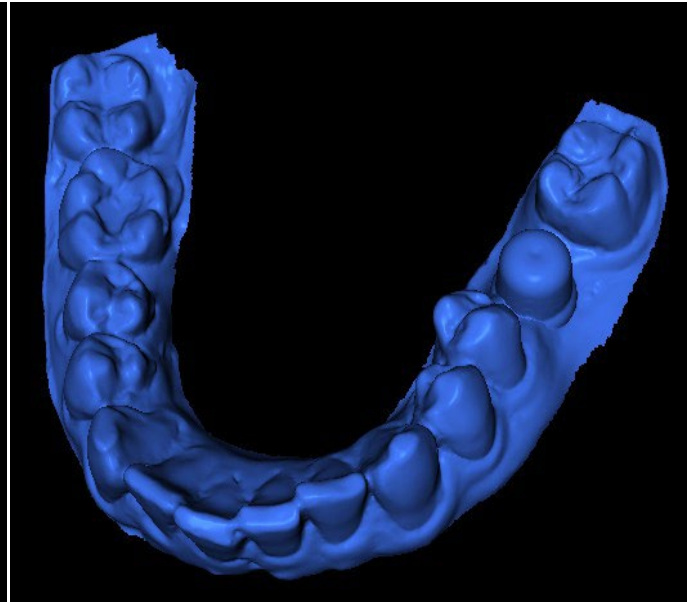


União com deslocamento de 2 mm

23.2 Diferença

A operação de diferença é usada para remover uma parte selecionada de um objeto.

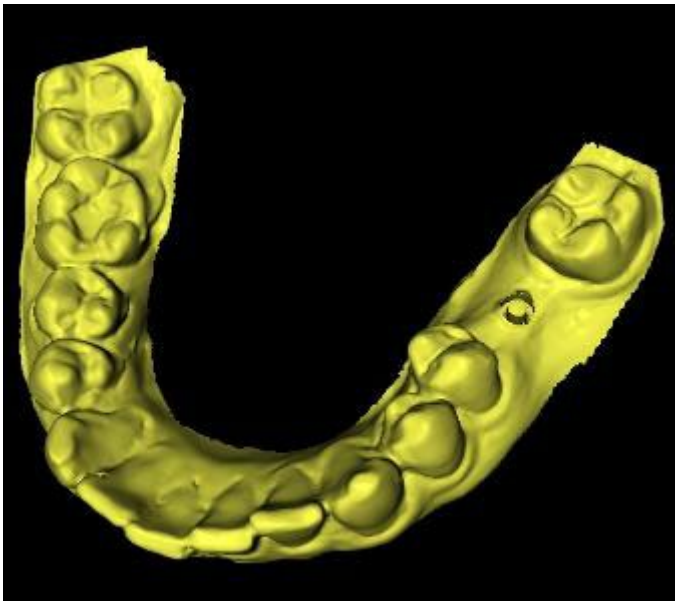


Diferença com deslocamento zero

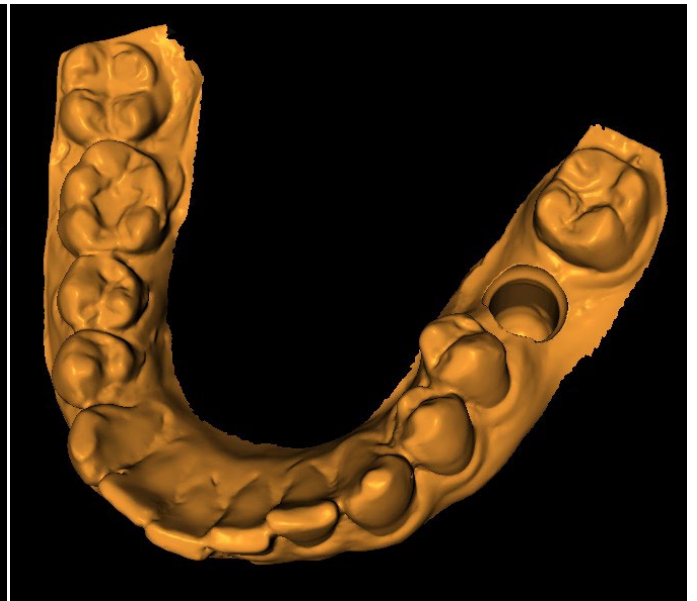


Diferença com deslocamento de 2 mm

23.3 Interseção

O operador de interseção retém as partes que são comuns em todos os objetos envolvidos.

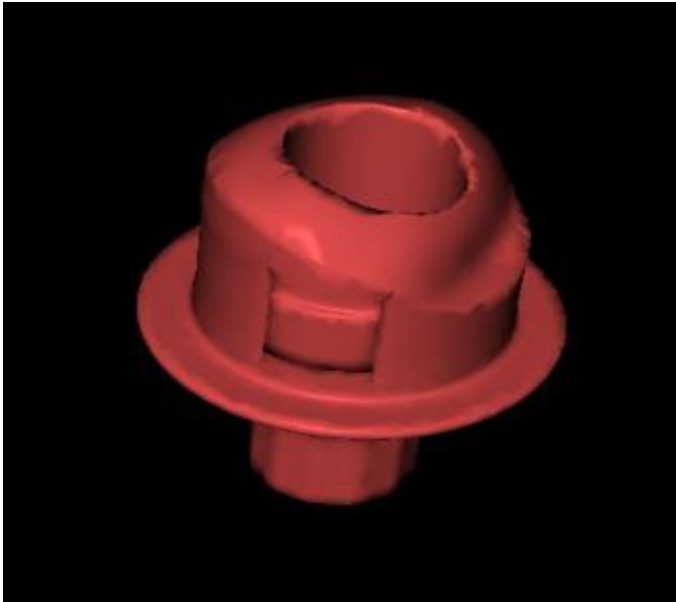


Interseção com deslocamento zero

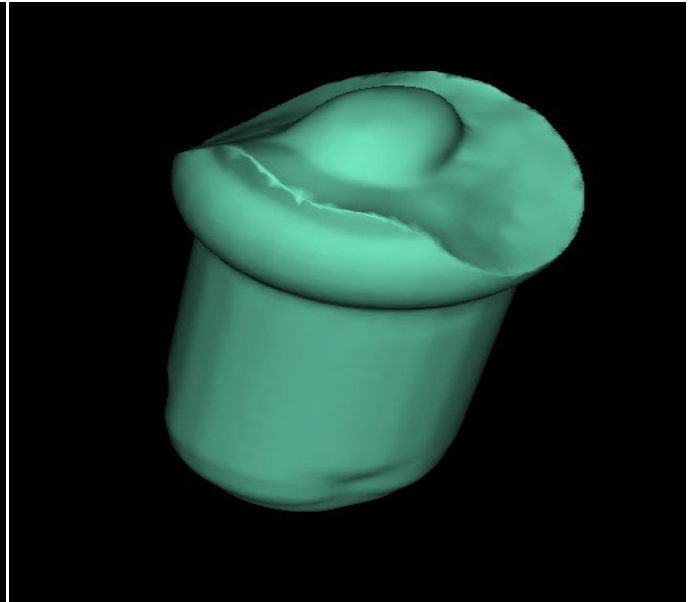

Interseção com deslocamento de 2 mm


24 Tubos de conexão

Os tubos de conexão permitem ao usuário conectar duas superfícies por meio de um tubo. A forma do tubo é definida por perfis de forma livre. Os perfis são definidos por curvas de forma livre, que podem ser ajustadas interativamente. Além disso, o usuário pode ajustar a curvatura do tubo. Esta função pode ser ativada no Modelo Mestre ou no Módulo Normal/Avançado na seção Painéis.

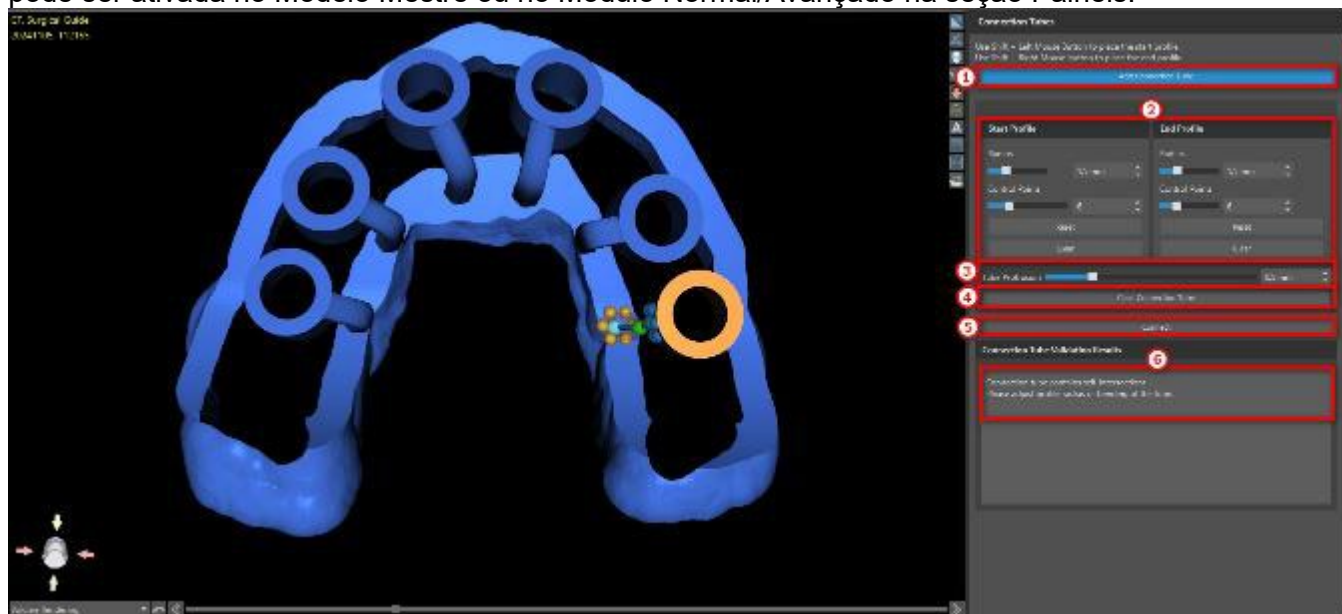

Para iniciar uma operação de tubo de conexão, clique no botão "Adicionar tubo de conexão" (1). Se não estiver selecionado, a funcionalidade permanecerá desativada. Use Shift + botão esquerdo do mouse para posicionar o perfil inicial e Shift + botão direito do mouse para posicionar o perfil final. O raio e os pontos de controle de cada perfil sempre podem ser ajustados (2). Se necessário, qualquer ponto selecionado pode ser redefinido ou apagado quando o resultado não atender às expectativas. Para definir o deslocamento do tubo, use o controle deslizante para modificar o valor do deslocamento (3). Para remover o tubo de conexão, clique no botão "Limpar tubo de conexão" (4). Antes de criar um tubo de conexão, verifique se nenhuma mensagem de erro é exibida na seção Resultados de validação do tubo de conexão (6). Se você definir os pontos inicial e final do perfil no mesmo local, a distância entre os pontos finais do perfil se tornará muito pequena. Ajuste as posições dos pontos finais do perfil. Alguns tubos de conexão podem conter autointerseções. Ajuste o raio do perfil ou a curvatura do tubo.


Para criar tubos de conexão, clique no botão "Conectar" (5). Após a geração dos tubos, uma nova superfície intitulada Tubos de conexão do modelo aparecerá na lista de superfícies.

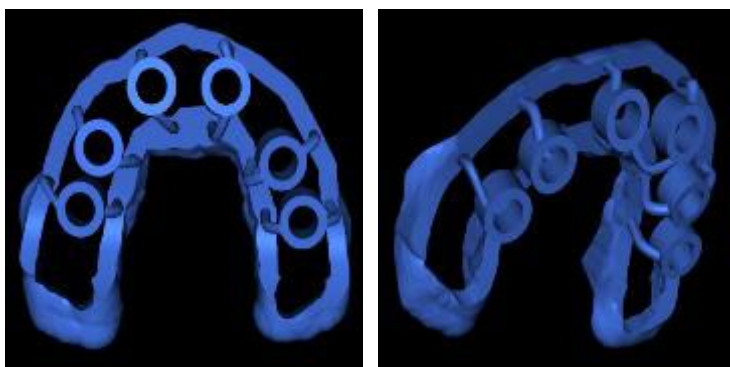

Possíveis resultados da conexão de tubos

25 Formas personalizadas

O painel Formas personalizadas permite ao usuário criar e posicionar formas geométricas simples. Uma vez criadas, essas formas são adicionadas a Superfícies e podem ser posteriormente manipuladas e utilizadas, por exemplo, nos painéis Edição de modelo ou Operações booleanas. Esta função pode ser ativada no Modelo Mestre ou no Módulo Normal/Avançado na seção Painéis.

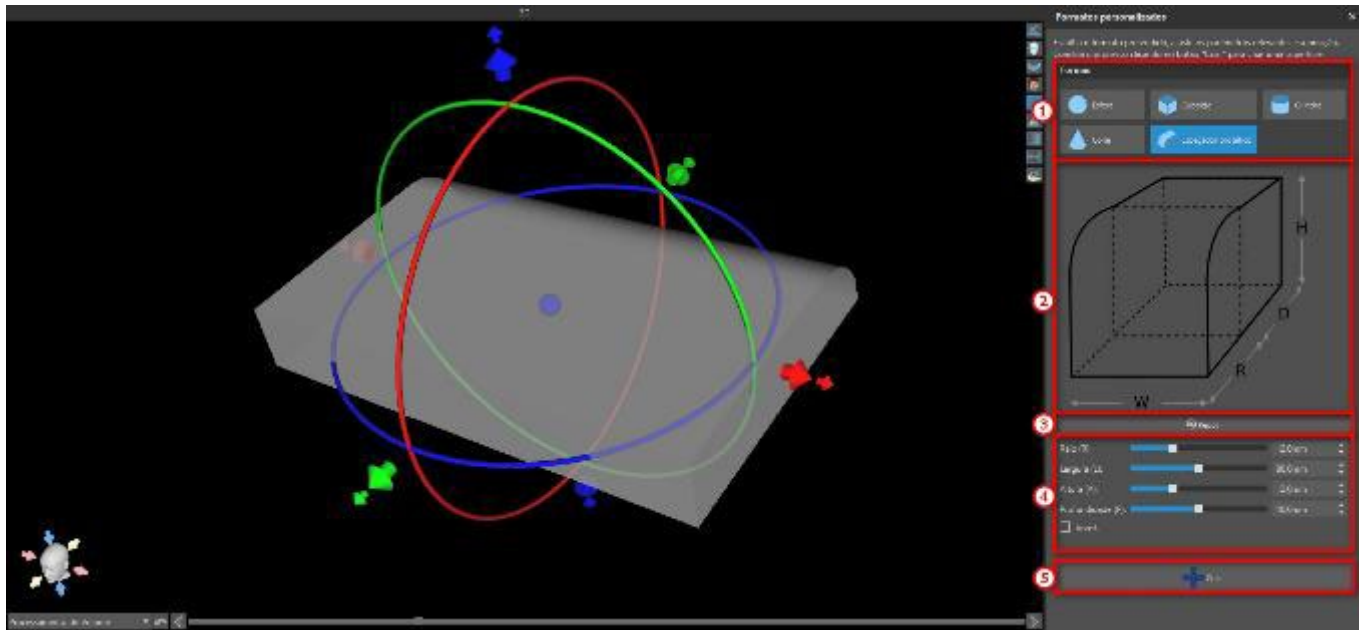

Selecione a forma desejada na seção Formas (1). Em seguida, você pode ajustar os parâmetros da forma e sua posição (4). O significado de cada parâmetro para as formas personalizadas é exibido na imagem (2). Clicar no botão "Redefinir" (3) restaura todos os parâmetros aos seus valores padrão. Finalize o processo clicando no botão "Criar" (5) para criar uma superfície.



Outras formas personalizadas como modelos STL


26 Assistente Blue Sky Plan

26.1 Assistente automático de implantes

O Assistente automático de implantes acelera e simplifica a criação de guias cirúrgicos ao executar automaticamente uma série de etapas de fluxo de trabalho predefinidas. Essas etapas automatizadas podem ser ajustadas de acordo com as preferências do usuário. Para personalizar o comportamento do fluxo de trabalho automatizado, abra Preferências e vá até a seção "Funcionalidade do fluxo do assistente automático" na guia Guia cirúrgico. Os seguintes recursos podem ser ativados ou desativados:


- Detecção do nervo mandibular
- Alinhamento automático do modelo
- Posicionamento de coroas
- Ajuste da posição do implante

Modificar essas configurações permite ajustar o fluxo de trabalho automático ao processo de planejamento preferido.

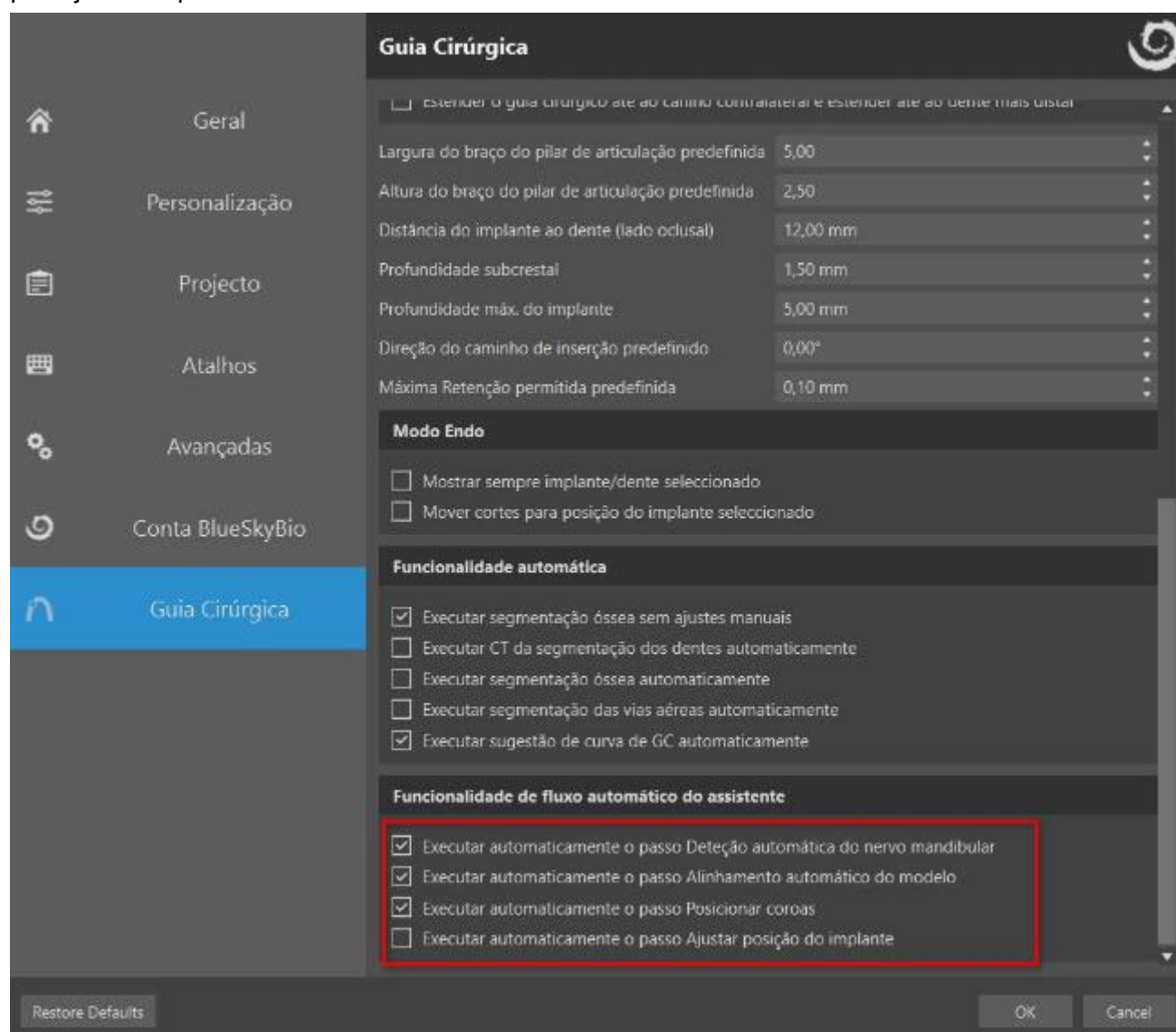

Em Configurações do Projeto, você pode selecionar o paciente (1), escolher a pasta de tratamento apropriada (2) e especificar o tipo de arcada (3). Para mais detalhes, consulte o capítulo 3 "Blue Sky Launcher".


Em Configurações do fluxo de trabalho, clicar no ícone de cruz azul (4) permite baixar pacotes de dados adicionais de várias empresas terceiras. Você pode selecionar a empresa de implantes (5), o kit de perfuração (6) e o sistema de implante (7). O kit de perfuração selecionado em Configurações do fluxo de trabalho não pode ser modificado dentro do assistente. Se for necessário substituir o implante durante o procedimento, deve ser selecionado um implante compatível com o kit de perfuração previamente selecionado. Ativar a caixa de seleção "Adicionar Indicador de Trajetória" (8) adiciona um pilar personalizado de 3 x 20 mm aos implantes automáticos. Se esta caixa de seleção não estiver ativada, nenhum pilar será adicionado. A caixa de seleção "Resolver colisões automaticamente" (9) amplia automaticamente os tubos do guia no software para evitar colisões. A caixa de seleção "Enviar ao LabPronto" (10) permite enviar o projeto via LabPronto ao final do fluxo. Além disso, é possível especificar se os dados de TC devem ser segmentados localmente, completamente ou não durante o assistente (12). Ativar "Extraíir dente" (11) permite a extração dentária dentro do fluxo de trabalho. Você pode extrair um dente selecionando o dente desejado no diagrama de seleção de dentes ou usando os botões de seta (ou a roda do mouse) para percorrer os dentes. Apenas um dente pode ser extraído por vez. O sistema de notação dentária é determinado pelas configurações em Preferências > Geral, onde é possível escolher entre a notação dentária EU, FDI ou US.

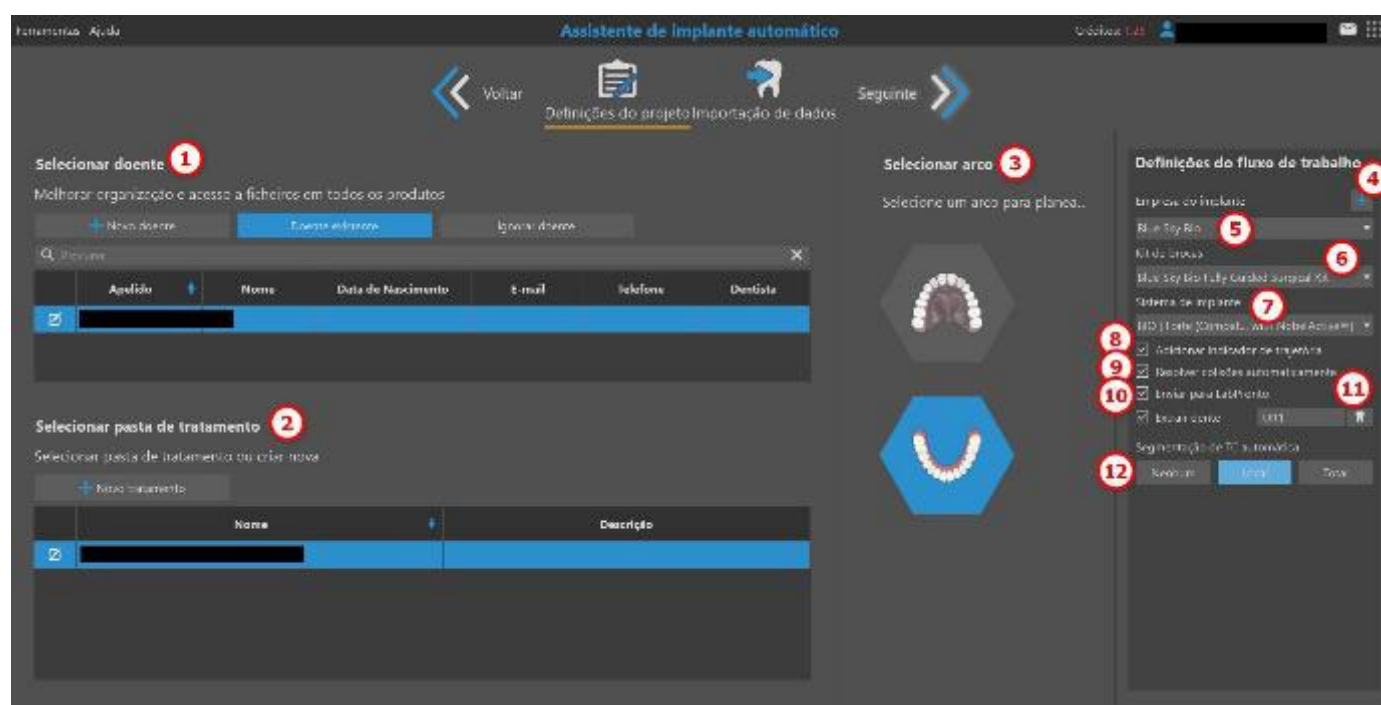


Após a importação dos dados necessários (escaneamento óptico da mandíbula ou maxila e a TC do paciente) na etapa "Importação de dados" e ao clicar em "Seguinte", o Assistente automático de implantes é aberto.

Observação: a arcada antagonista é opcional. Não pode ser utilizado para o planejamento do tratamento; no entanto, pode ser incluído para melhorar a qualidade da coroa gerada.


O software primeiro realiza a detecção automática de nervos e, em seguida, avança para "Alinhamento automático do modelo", onde a arcada importada é alinhada com a TC. O sistema então prossegue para a etapa "Posicionar coroas", onde as coroas e os implantes correspondentes são posicionados automaticamente de acordo com as seleções de implantes definidas em Configurações do fluxo de trabalho. Se a segmentação tiver sido ativada nessas configurações, o processo de segmentação será executado neste momento.

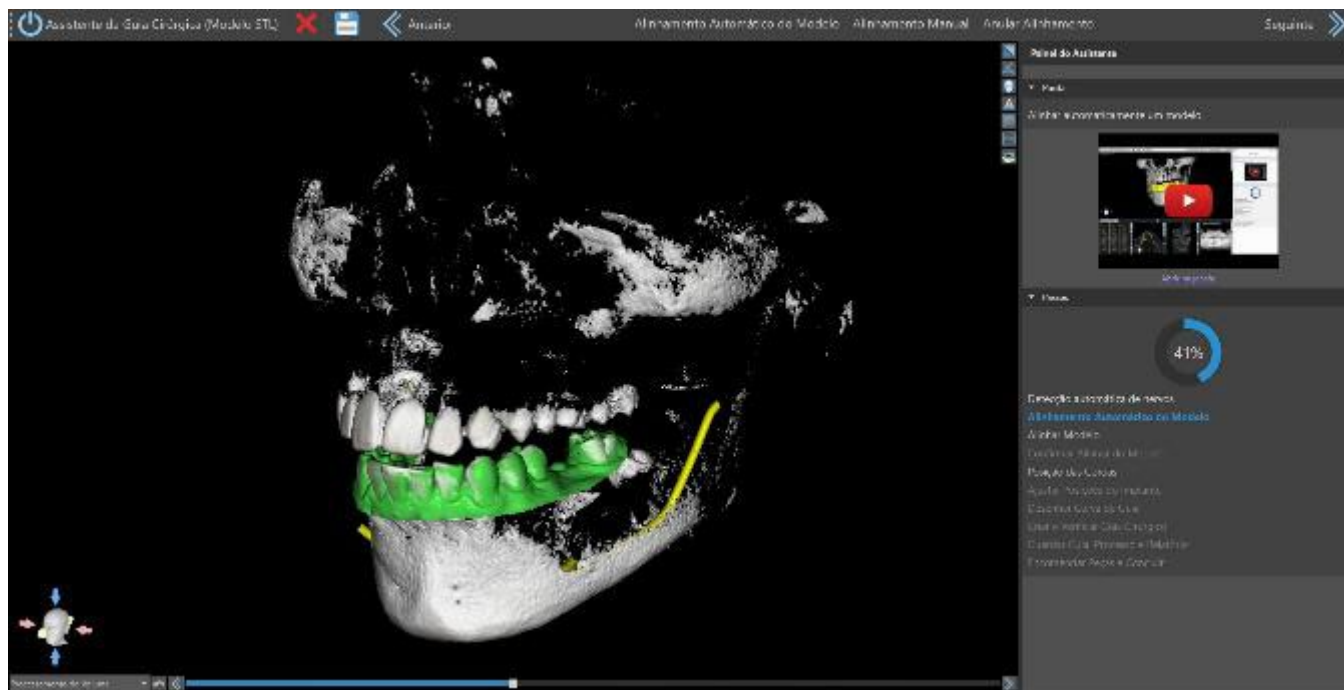

Detecção automatizada do nervo mandibular

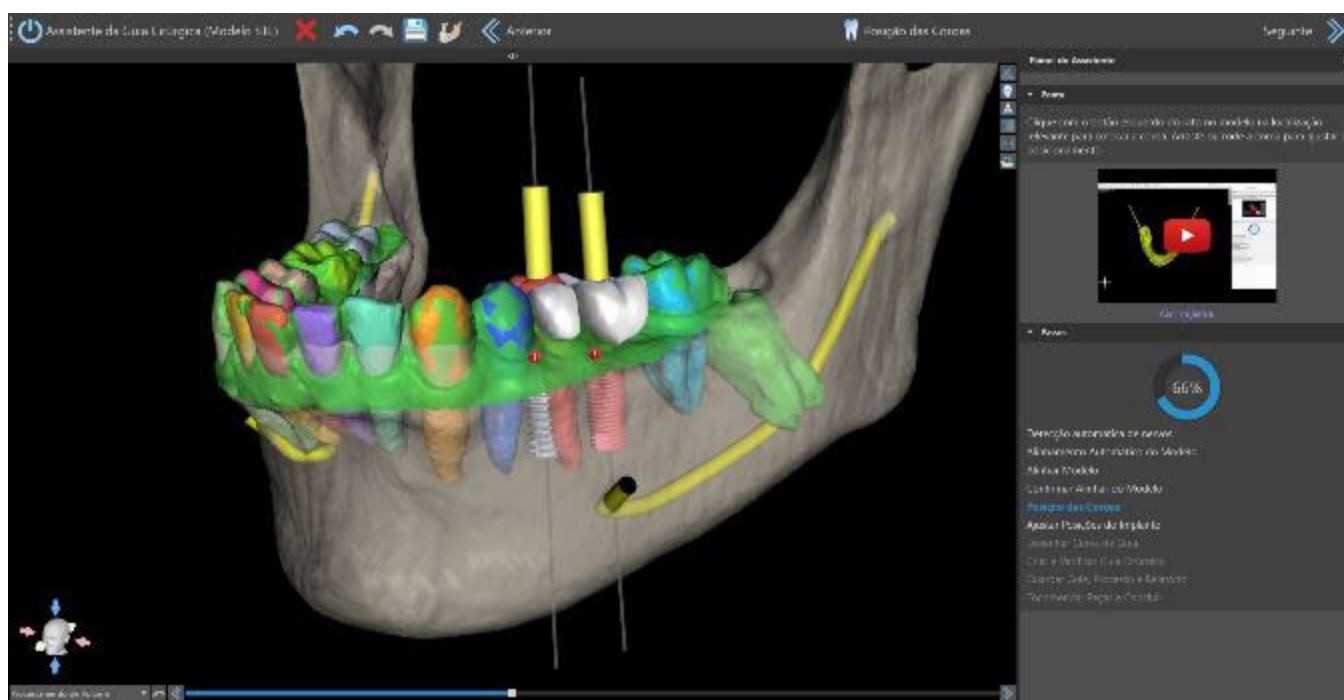


Alinhamento automatizado de modelos com segmentação completa e extração dentária

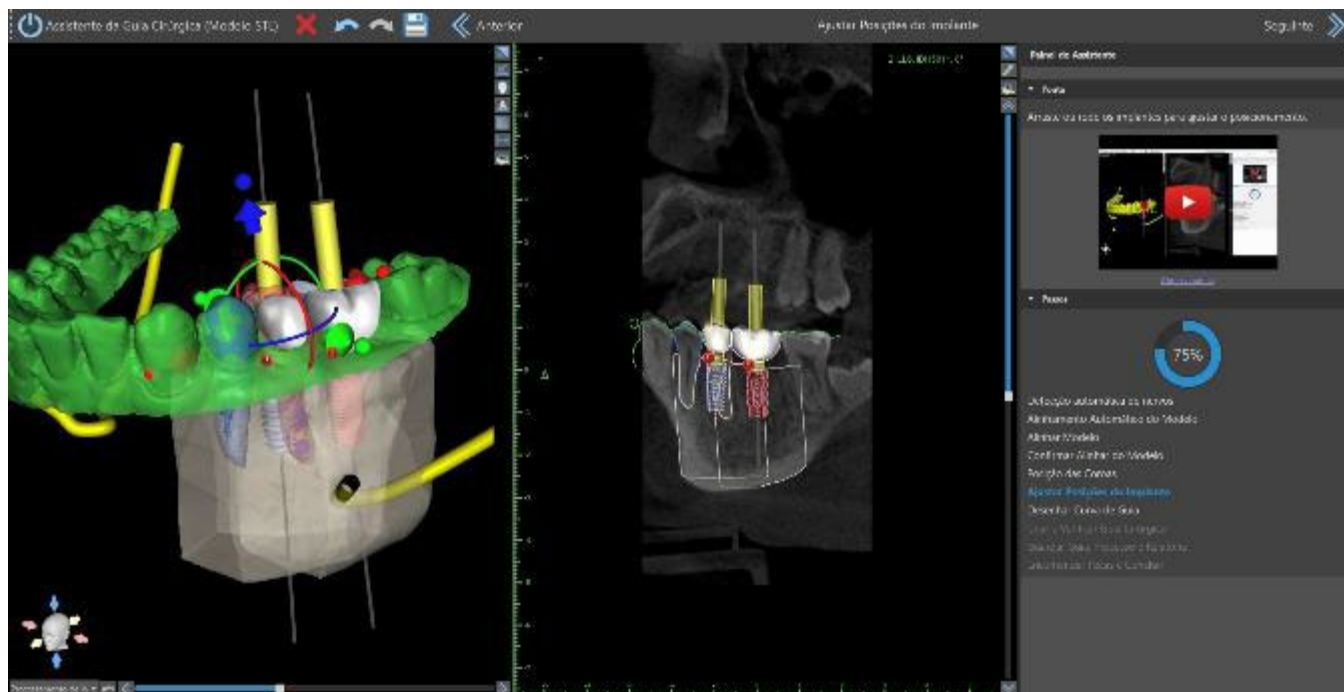


Posicionamento automatizado de coroas com segmentação local e extração dentária

O Assistente automático de implantes pode adicionar dentes e coroas a espaços abertos em uma arcada, mas apenas se não houver mais de três dentes adjacentes ausentes. Se mais de três dentes consecutivos estiverem ausentes, nenhum dente será adicionado.

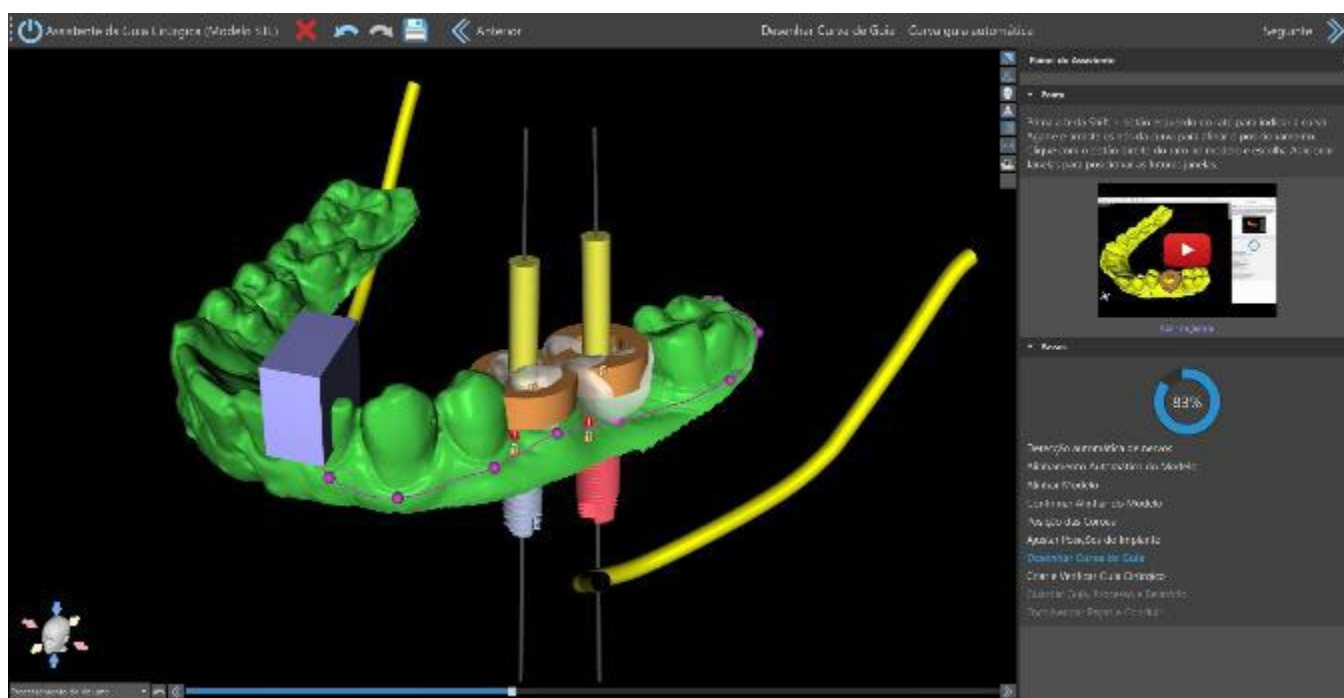

Ajuste automatizado de implantes sem segmentação e extração dentária

O Assistente automático de implantes suporta ações de menu de contexto. Clique com o botão direito na cena para exibir ou ocultar os objetos e as superfícies.

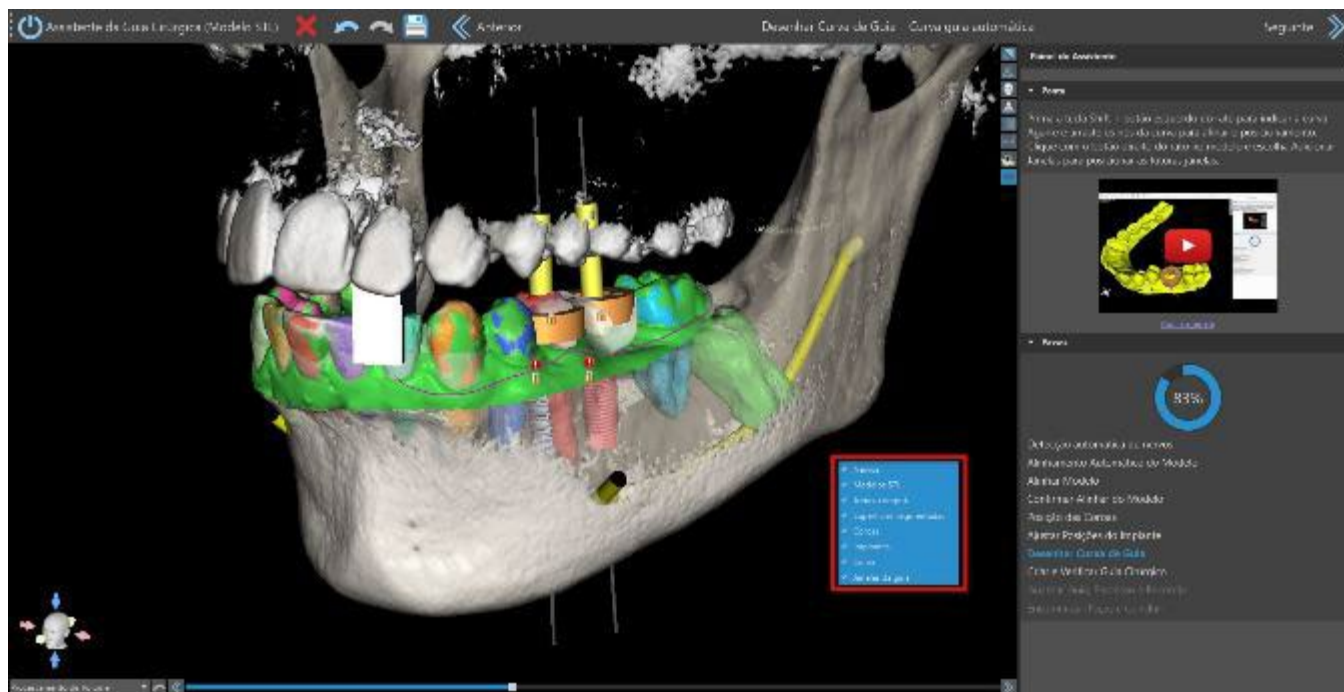

Na etapa "Desenhar guia", clique em "Desenhar curva do guia" para criar manualmente um guia e pressione SHIFT + clique esquerdo para definir a curva do guia. Você pode arrastar os nós da curva para ajustar finamente sua posição. A curva também pode ser gerada automaticamente clicando em "Curva do Guia Automática". Ao clicar no botão "Seguinte", você avança para a etapa de verificação, onde pode criar e verificar o guia cirúrgico. Você também pode adicionar janelas adicionais e, em seguida, recriar o guia com as janelas atualizadas. Na próxima etapa, você pode salvar seu guia, caso e relatório, bem como solicitar peças para finalizar o assistente.

Observação: Você sempre pode retornar às etapas anteriores para realizar ajustes.

Observação: O Assistente automático de implantes é uma função Premium de Automação Avançada. Após o período de avaliação gratuito, requer uma assinatura paga (consulte a seção 1.4). Sem assinatura, o Assistente Blue Sky Plan passo a passo continua disponível.


Observação: Cada etapa automática produz uma proposta. Revise e verifique o resultado de cada etapa (canal nervoso, alinhamento do modelo, posições de coroas e implantes, segmentação, curva do guia e guia cirúrgico) antes de prosseguir e antes de salvar, exportar ou encomendar (consulte as seções 1.2 e 1.3).

26.2 Descrição passo a passo do assistente

Para casos mais fáceis de planejamento de implantes no modo Normal, existe a ferramenta Assistente Blue Sky Plan. A ferramenta permite o processamento de casos na forma de etapas sequenciais parcialmente automatizadas com ajuda. Para iniciar o assistente, primeiro selecione "Fluxo SG especialista" na tela principal e, em seguida, selecione "Modelo TC", "Impressão TC", "Impressão TC com marcadores" ou "Guia cirúrgico com escaneamento óptico".




Se um projeto já estiver aberto, você também pode clicar no botão "Iniciar assistente" no canto superior esquerdo. Para iniciar o assistente "Plano cirúrgico com escaneamento óptico", selecione o mesmo botão.

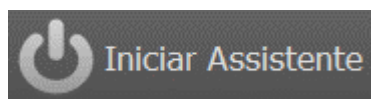

Você pode alternar entre as etapas individuais do Assistente usando os botões "Seguinte" (1) e "Anterior" (2). Cada etapa mostra claramente o estágio do Assistente em que você está (3). Existem vídeos de aprendizagem temáticos disponíveis para algumas das atividades (4). Durante a execução do Assistente, você pode usar o botão "Salvar tela" (5) e continuar trabalhando com as imagens através do "Painel de tela". O botão na barra superior é usado para reativar ou reiniciar a ferramenta atualmente usada (6).

Se você achar que o caso requer um processamento mais complexo, você pode desligar o Assistente a qualquer momento e continuar o trabalho no Modo Normal (7). Quaisquer nervos detectados, implantes inseridos ou guias criados serão salvos.

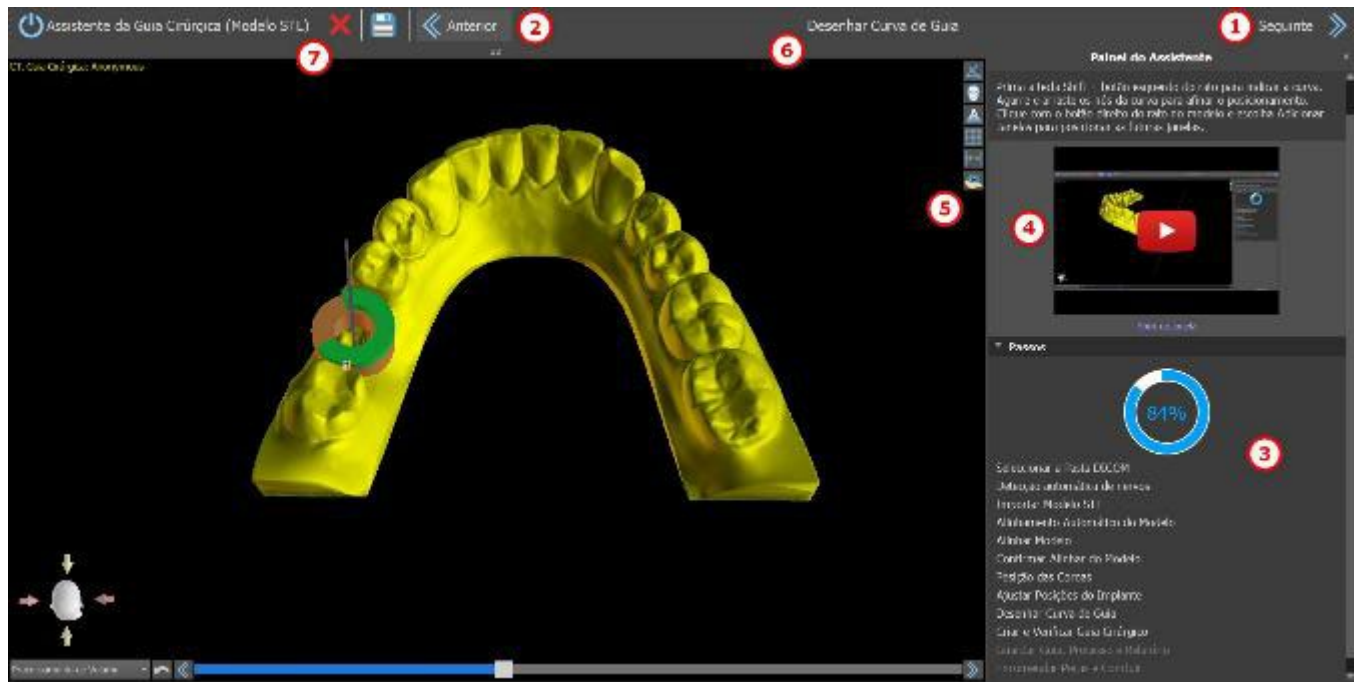


O assistente permite utilizar vários tipos de dados de entrada no planejamento (tipo de importação):

- DICOM + modelo STL (modelo STL)
- Digitalização de modelo DICOM + (Modelo TC)
- DICOM + Digitalização de impressão (TC de impressão)
- Digitalização de impressão DICOM + com marcadores (TC de impressão com marcadores)

26.2.1 Introdução ao assistente


Após iniciar o assistente, será aberta uma caixa de diálogo que permite selecionar o tipo de importação e escolher entre vários tipos de kit. Ao selecionar um kit de perfuração mais antigo em Configurações do fluxo de trabalho, é possível selecionar o tipo de peça de mão.

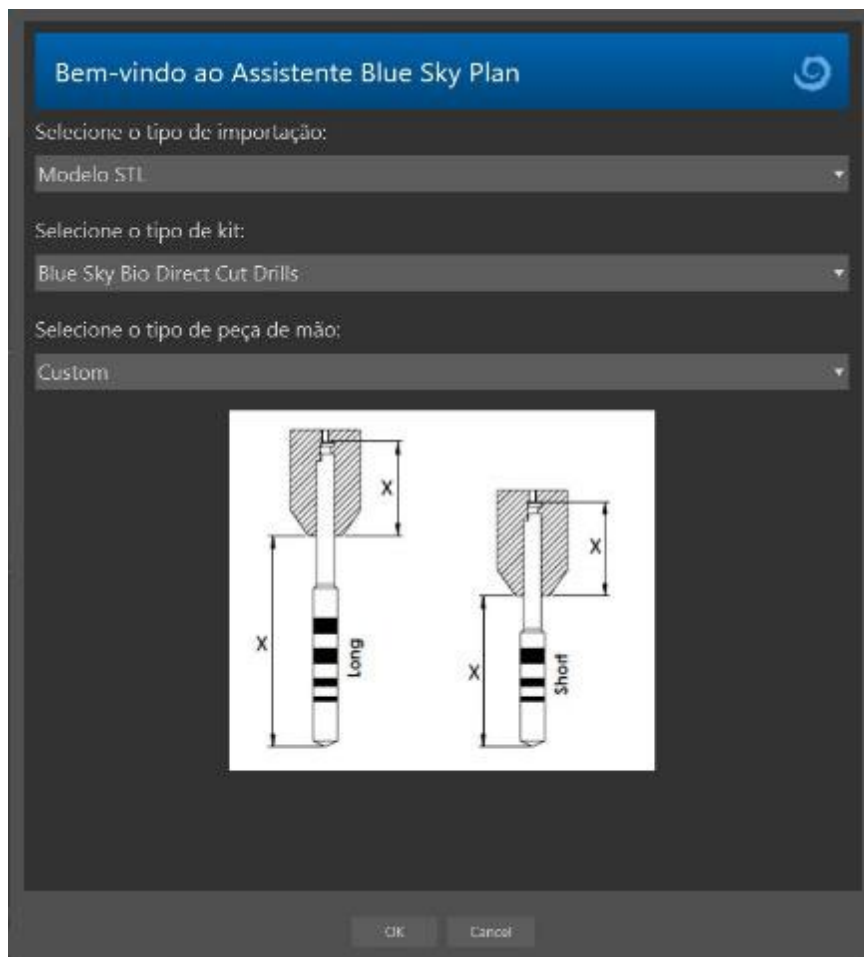


26.2.2 Adicionando um canal mandibular


Nesse passo, a detecção automática do nervo é realizada para ambos os forames. É possível cancelar a detecção do nervo se o usuário quiser trabalhar com o maxilar. Nesse caso, clique em "Cancelar, é maxilar".

A detecção automática do nervo para ambos os forames pode ser desativada em Preferências, seção Funcionalidade automática.

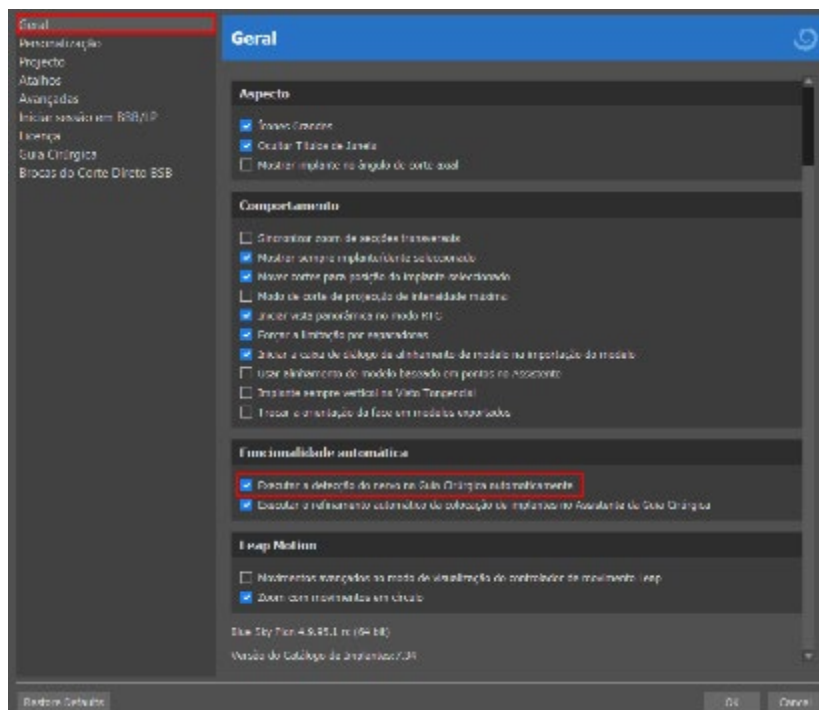

Se esta opção for escolhida, o utilizador define os forames manualmente. Selecione “Definir manualmente o forame direito” e, na vista 3D, clique no cursor em forma de cruz, primeiro no direito e depois no forame mental esquerdo, seleccionando “Definir manualmente o forame esquerdo” (1). O canal mandibular é automaticamente detectado (2) e a sua forma pode ser editada manualmente em qualquer vista, exceto em 3D (3). Se não for necessário detectar o nervo mandibular, pode ignorar este passo usando o botão "Seguinte" . Se estiver a trabalhar com o maxilar, clique diretamente no botão “Maxilar”, na barra superior.

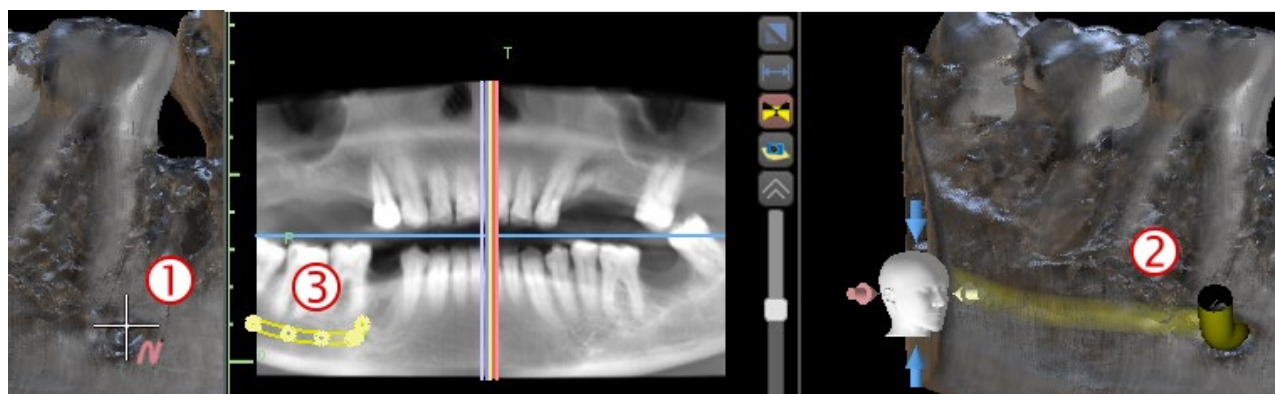

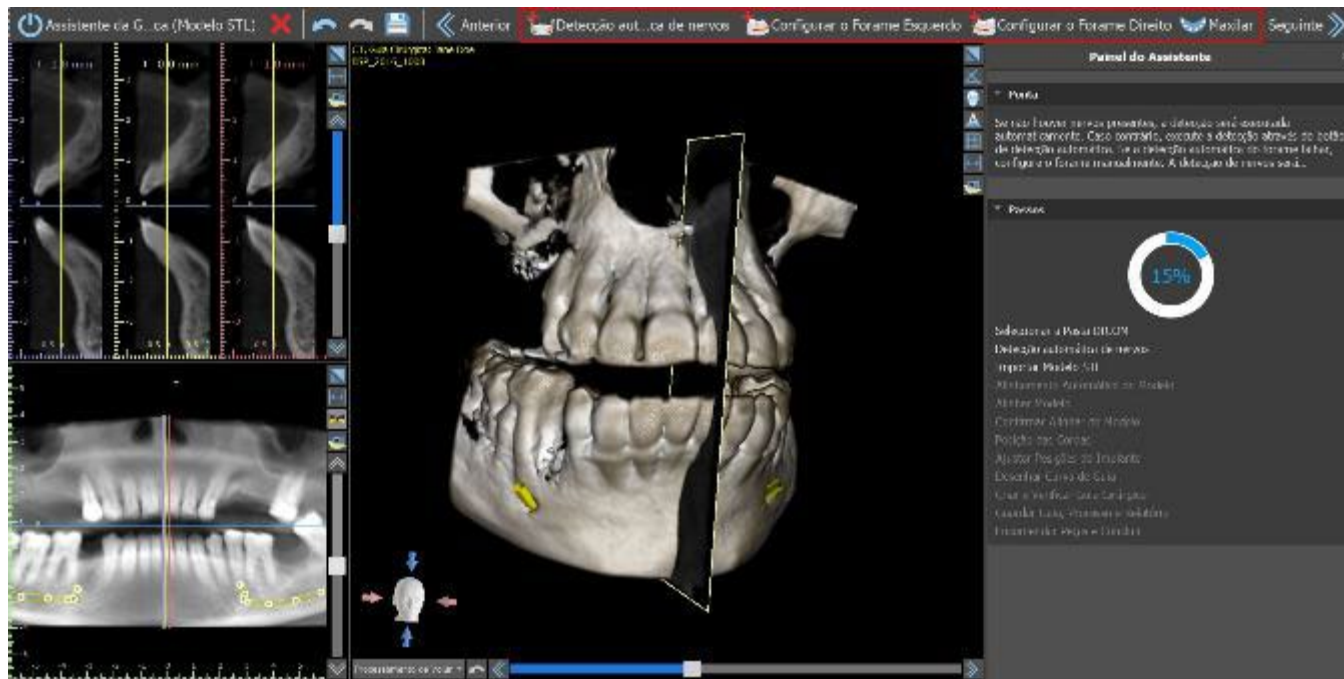


26.2.3 Upload e preparação do modelo

Na próxima etapa, o modelo será carregado e preparado. Dependendo do tipo de importação da escaneamento de superfície, várias etapas preparatórias podem ser executadas antes que você obtenha um modelo preparado para o alinhamento com os dados DICOM.


- Modelo STL - basta fazer o upload.
- Modelo TC - é necessário definir o limiar da superfície e criar um modelo de superfície.
- Impressão de TC - é necessário primeiro definir o limite da superfície e criar um modelo de impressão. É necessário plotar e editar uma curva no modelo de impressão para delimitar a peça modelo apropriada e criar um modelo invertido.
- Impressão de TC com marcadores - você precisa alinhar o equipamento de escaneamento com os marcadores gutta percha (consulte a seção 7) e, em seguida, como no caso do TC de impressão, criar um modelo invertido.

26.2.4 Alinhamento do Modelo


Exceto pelo processo de impressão de TC com marcadores, é necessário alinhar o modelo STL ao conjunto de dados do TC. Após importar o modelo, selecione se o modelo é mandíbula ou maxilar. O processo de alinhamento será feito automaticamente depois disso. A mesma função de alinhamento automático conta com o botão "Alinhamento de modelo automático".

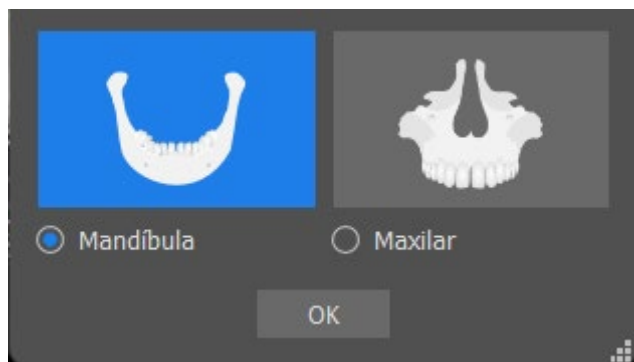

Também é possível alinhar o modelo manualmente, clicando no botão “Alinhamento Manual”. Pelo menos cinco dentes idênticos devem ser marcados no modelo e na imagem panorâmica. Os pontos devem ser colocados exatamente na mesma posição em ambas as digitalizações. Na próxima etapa, você deve confirmar o alinhamento ou retornar à etapa anterior para melhorar a configuração do ponto.

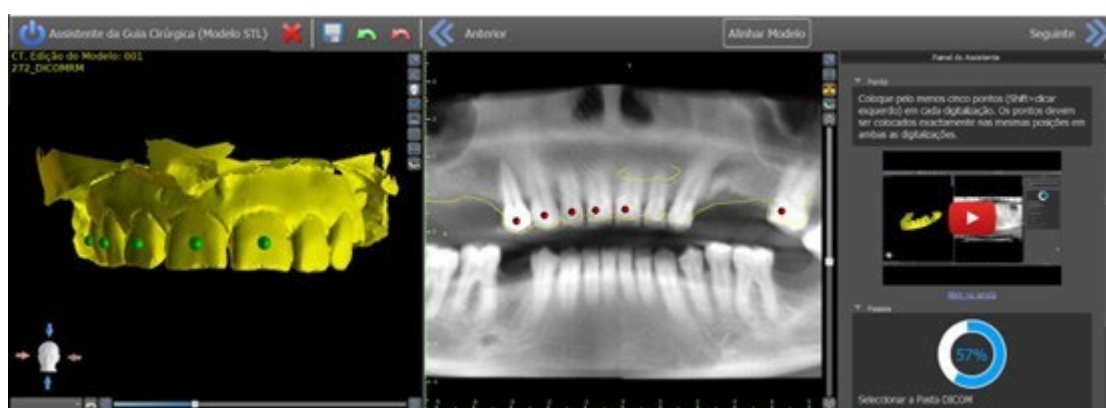

Para reverter o alinhamento, clique no botão “Desfazer alinhamento”.

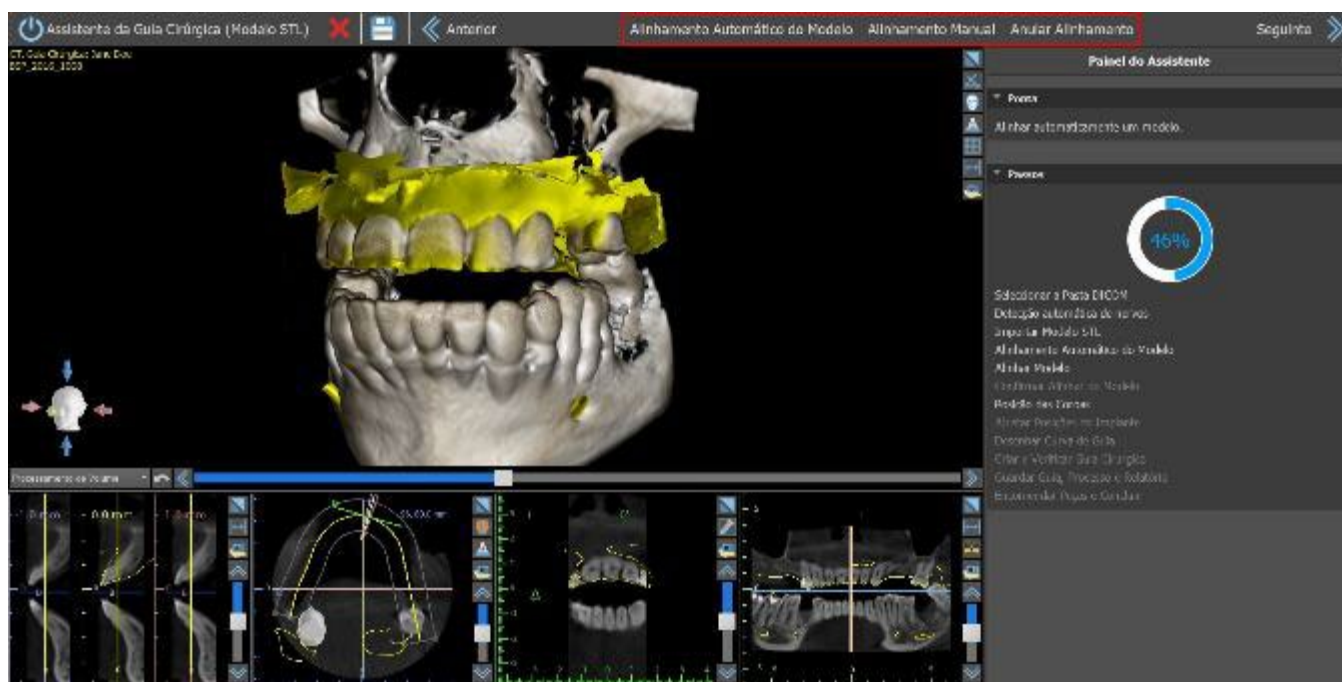

26.2.5 Coroas e Implantes

Agora você pode adicionar coroas e implantes. As coroas podem ser geradas automaticamente ou selecionadas do catálogo predefinido. Para mais informações sobre dentes virtuais, consulte o capítulo 15.

Criar dente automaticamente com IA

Selecionar dente de catálogo

Conjunto de geometria dos dentes

Teeth Caps

Pré-visual.

Selecione o dente. Mantenha premida a tecla Shift ou Ctrl para selecionar um adicional.


Tam.	Nome
☐ Pequeno	
☒ Médio	
☐ Grande	

Implante

Blue Sky Bio IDH3010 com ABDH30


OK

Cancelar

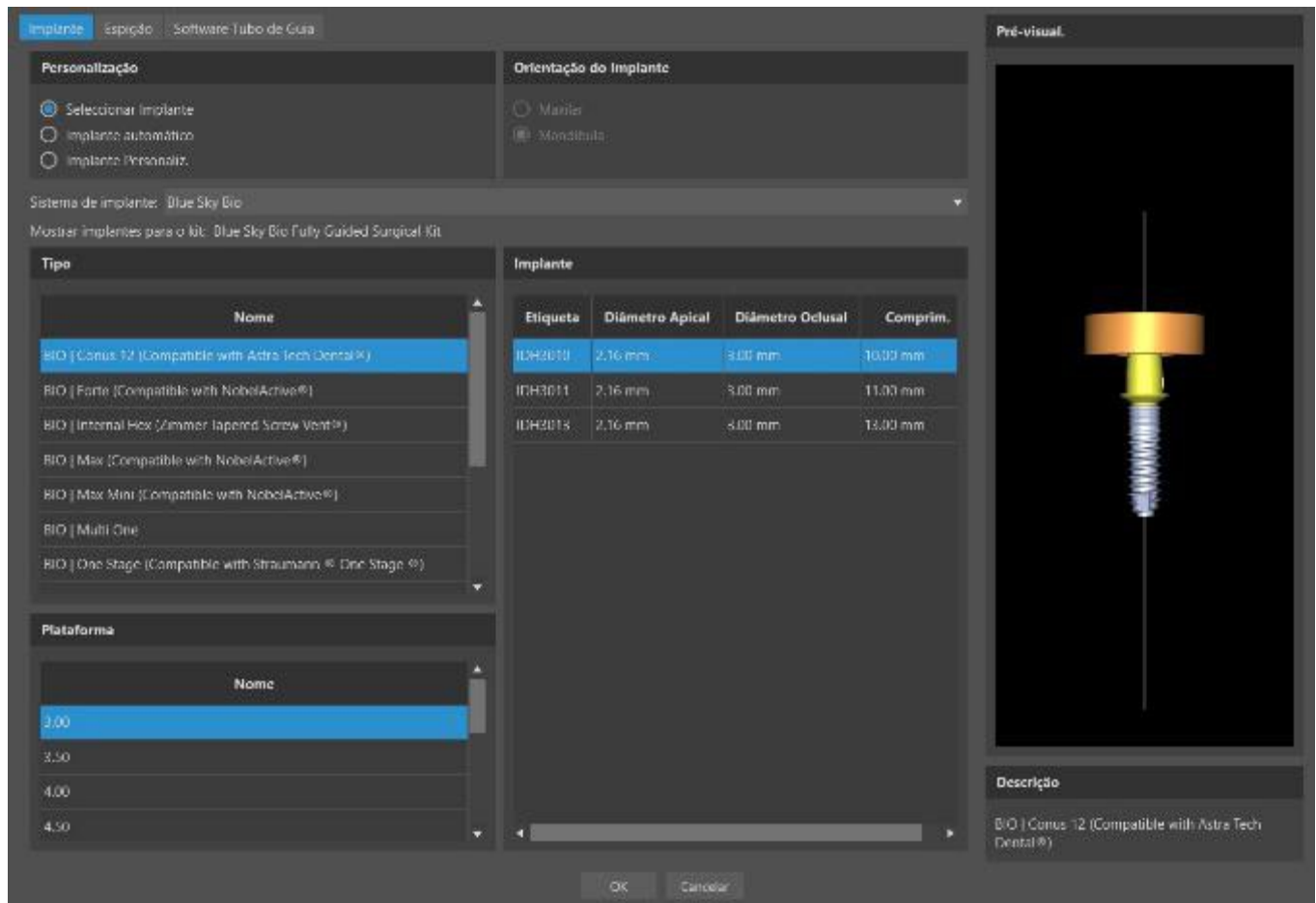


Você pode escolher entre vários conjuntos de geometria de dentes e implantes compatíveis com o tipo de kit selecionado no início do Assistente. As coroas são adicionadas juntamente aos implantes selecionados e, nesse passo, você pode movê-los apenas em conjunto.

O Blue Sky Plan® examina o espaço disponível para a colocação do dente e do implante. Isso funciona apenas para a opção de um dente. Se o sistema avaliar um espaço maior para o implante em questão, uma mensagem informativa será exibida e o usuário escolherá entre a colocação automática ou manual do implante. O usuário coloca e posiciona manualmente o implante clicando no botão “Colocar manualmente”. Se o usuário selecionar “Adicionar automaticamente”, o programa tentará colocar o implante, mas, muito provavelmente, ele pode estar com defeito. Observe que isso só se aplica aos implantes associados aos dentes do catálogo.

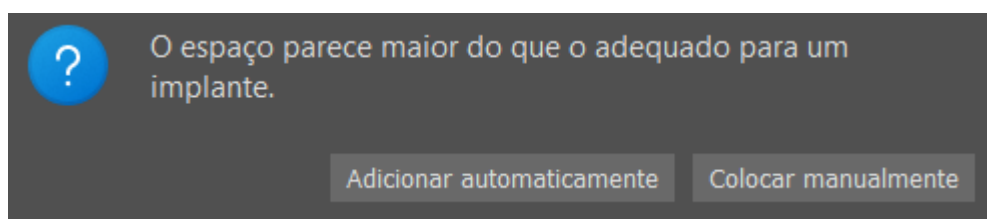

O Assistente Blue Sky Plan oferece a possibilidade de adicionar implantes totalmente automáticos. Um implante automático é adicionado por meio da caixa de diálogo “Adicionar dente”. Selecione o dente de IA associado na pré-visualização na guia “Criar dente automaticamente com IA” (esta é selecionada por padrão). Ao clicar no campo do implante, “Adicionar novo implante”, aparece uma caixa de diálogo. Selecione “Implante Automático” e o tipo de implante. O implante e a plataforma específicos serão escolhidos automaticamente. Clique em “OK” para confirmar a seleção do implante e depois novamente em “OK” para implante automático e adição de um dente. Para mais informações sobre implantes automáticos, consulte o capítulo 8.1.2.

Após adicionar o dente de IA com um implante automático, ocorre a segmentação, em que o osso local e dois dentes circundantes são segmentados. A segmentação não pode ser ocultada no Assistente, ela só pode ser feita fora do Assistente, no painel Superfícies.

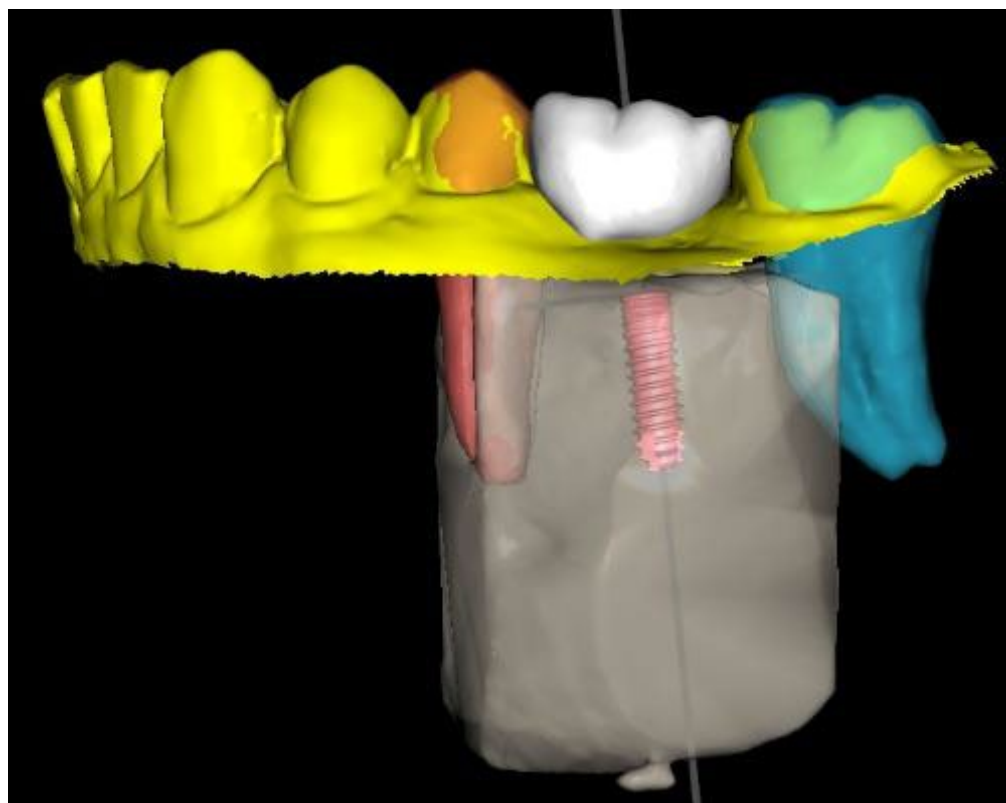

Na próxima etapa, você pode ajustar as posições do implante e da coroa separadamente. Ambas as etapas também exibem informações de validação sobre o status dos implantes individuais.



O ícone  aparece se um implante for avaliado como inválido. Após clicar duas vezes neste ícone, o Painel de Validação de Implante será aberto com mais informações.

Validação do Implante

Definições de Validação

☒ Implantes - prof. broca
☒ Implantes - aviso kit broca
☒ Implantes - Violação do SW Tubo de Guia
☒ Implantes - distância mínima 3,00 mm
☒ Nervo - distância mínima 2,00 mm
☒ Implantes - ângulo máximo 15,00°
 Implantes - distância de verificação de ângulo 100 mm
 Tolerância de Colisão do SW Tubo de Guia 1,50 mm
 Repor Predefinições

Implantes Inválidos

ID	Etiqueta		Ângulo
☐ 0	IDH3010	☒	17.87°

Resultados de Validação

Violação do Software Tubo de Guia

O Software Tubo de Guia colide com o modelo, o que impedirá que o cilindro de metal seja inserido corretamente na Guia Cirúrgica. Pode clicar com o botão direito do rato no implante e escolher "Software Tubo de Guia" e depois "Subir" ou "Tornar Mais Estreito" para mover o Software Tubo de Guia. O relatório de perfuração será atualizado em conformidade.

Caso você continue enquanto a colisão entre o Guia de Perfuração do Software for detectada, você pode selecionar nesta etapa se deseja solucionar as colisões imediatamente, ou deixar como está.

Foi detetada uma colisão entre o Software Tubo de Guia e o Modelo.

☐ Não mostrar novamente esta mensagem

Resolver colisões

Não fazer nada, tenho isso controlado

26.2.6 Guia Cirúrgico

Antes da fabricação do guia cirúrgico, é necessário especificar a parte do modelo que será coberta. Na etapa "Desenhar curva do guia", uma curva ao redor da área de interesse é desenhada automaticamente no modelo base. Ao gerar um guia cirúrgico, as retenções são removidas e o modelo recém-gerado não as possui. Para editar a curva, mova seus pontos individuais. Ao avançar para a próxima etapa, o guia cirúrgico será criado. Na etapa "Desenhar curva do guia", as janelas são adicionadas automaticamente. As janelas são geradas para cada X dente, começando a partir do X dente adjacente à osteotomia e, em seguida, continuando em ambas as direções ao redor da arcada até atingir o conjunto de propriedades da curva automatizada de SG. Você pode ajustar a configuração "Janela a cada x dentes" em Preferências > Guia cirúrgico > Janelas do guia. Tanto na etapa "Desenhar curva do guia" quanto na etapa "Criar e verificar guia cirúrgico", também é possível adicionar janelas manualmente clicando com o botão direito do mouse no modelo base. Em seguida, elas podem ser ajustadas usando o widget. Ao clicar em "Seguinte" (na etapa Desenhar curva do guia) ou em "Recriar guia com janelas" (na etapa Criar e verificar guia cirúrgico), um guia cirúrgico será recriado com as janelas definidas.

Guia Cirúrgica

Altura Borda Cilindro Metal Personalizada: 1,00 mm

Largura Borda Cilindro Metal Personalizada: 0,50 mm

Distância do Software Tubo de Guia: 0,20 mm

Desvio da Guia Cirúrgica: 0,20 mm

Diâmetro dos Orifícios da Guia GRS: 2,30 mm

Espessura da parede do Software Tubo de Guia: 2,70 mm

Altura Base dos Modelos Gerados: 3,00 mm

Janelas da guia

Larg. predefinida: 10,00 mm

Altura predefinida: 10,00 mm

Profun. predefinida: 5,00 mm

Janela a cada x dentes: 1

Sugestão de curva de guia

Margem gengival no lado bucal: 1,00 mm

Margem gengival no lado lingual: 2,00 mm

N.º de extensão de dentes no lado mesial: 2

N.º de extensão de dentes no lado distal: 2


☐ Estender o guia cirúrgico até ao canino contralateral e estender até ao dente mais distal

Largura do braço do pilar de articulação predefinida: 5,00


Altura do braço do pilar de articulação predefinida: 2,50

Distância do implante ao dente BSB adjacente: 13,00 mm


Restore Defaults OK Cancel

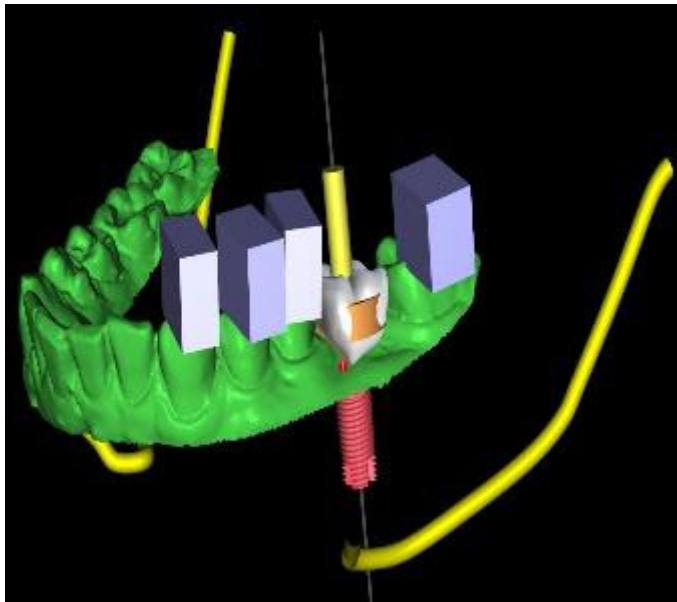


Janela a cada X dentes definida como 1

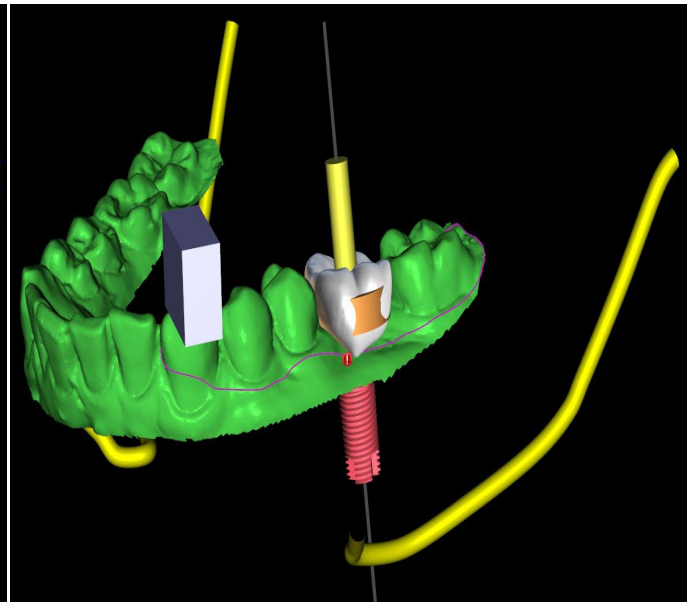

Janela a cada X dentes definida como 3

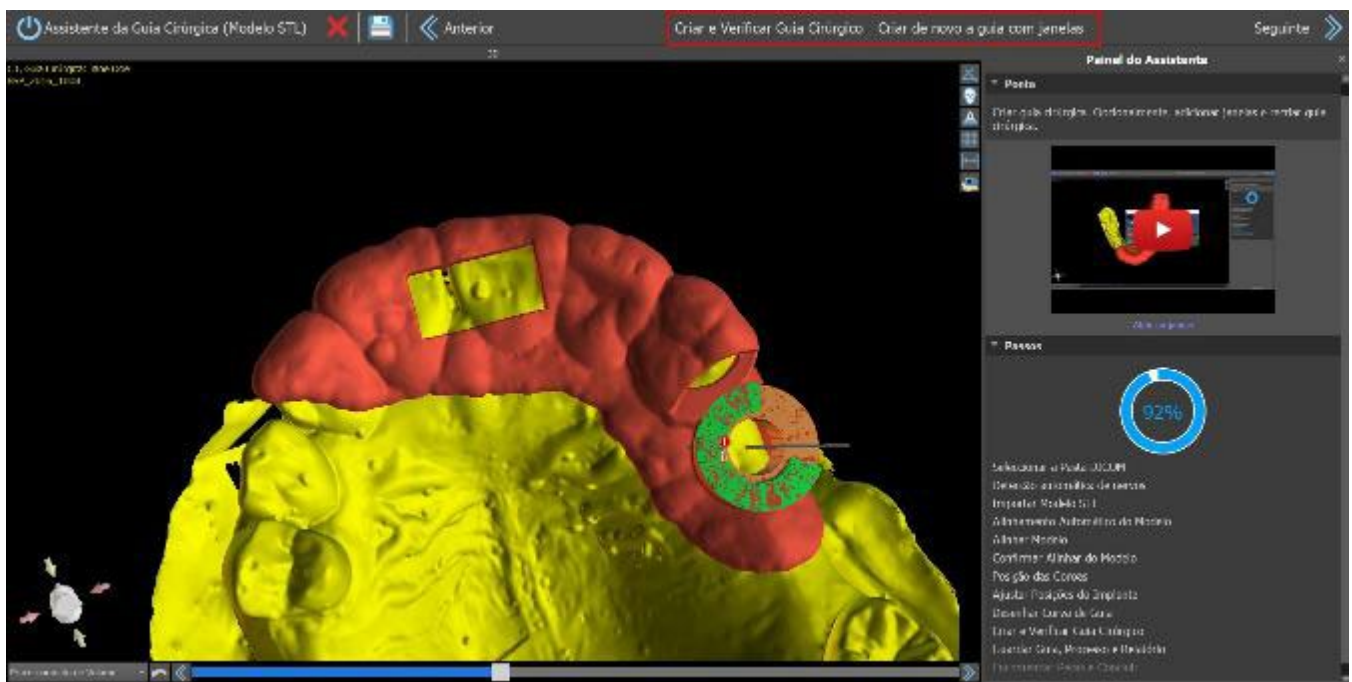

A sugestão automática de guia cirúrgico pode ser ativada em Preferências > Guia cirúrgico > Executar sugestão de curva SG automaticamente.

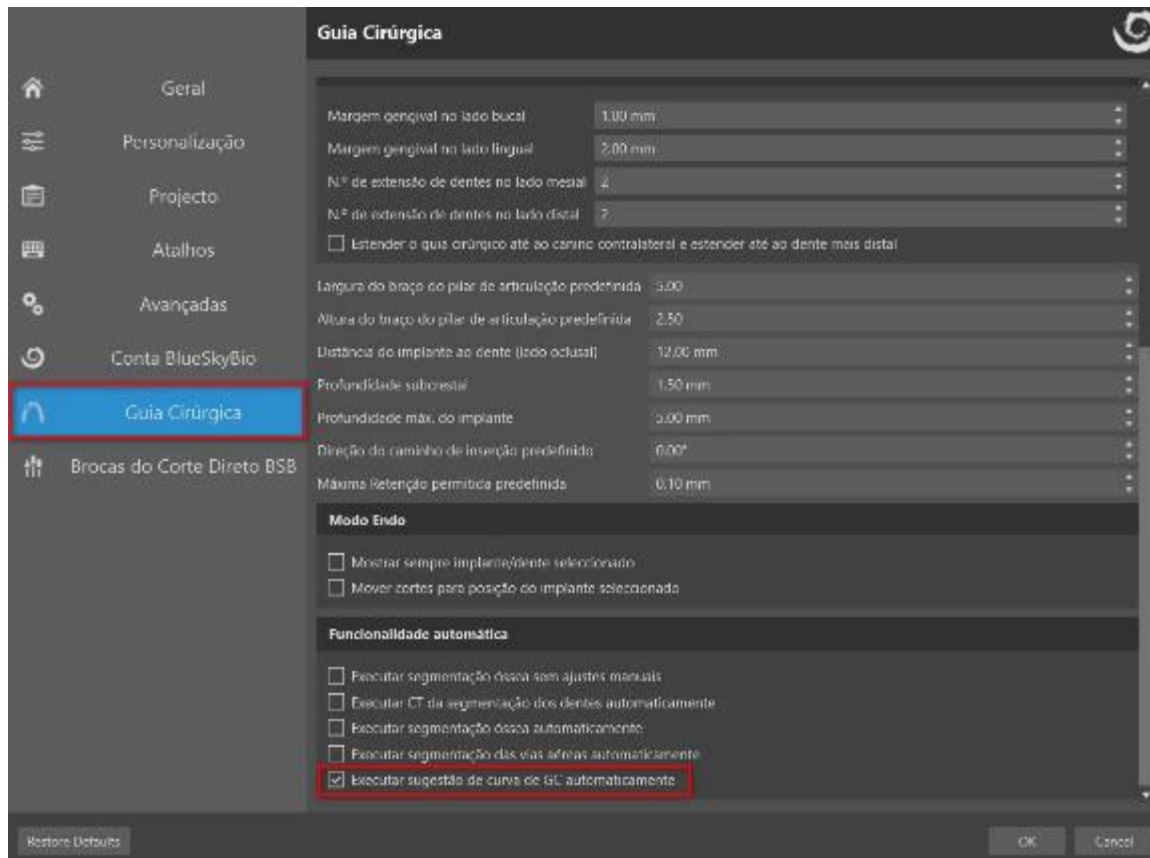

26.2.7 Salvando e Solicitando um serviço

Nas etapas restantes do Assistente, primeiro salve o projeto preparado. O modelo criado é exportado e pode ser enviado via BioBigBox.com. Em seguida, o relatório em PDF com informações básicas e capturas de tela é salvo. As peças necessárias podem ser encomendadas diretamente em <http://www.blueskybio.com>. Em seguida, você pode continuar com um novo caso ou fechar o Assistente.

Observação: Salve, exporte ou encomende somente dados que tenham sido revisados e aprovados conforme descrito na seção 1.2 Advertências. O dentista responsável pelo tratamento deve revisar, modificar se necessário e aprovar todos os dados gerados pelo software antes de qualquer tratamento do paciente.

27 Módulo Ortodôntico

O Blue Sky Plan possibilita o planejamento de tratamentos ortodônticos com base em modelos STL importados da mandíbula com dentes. Todos os controles estão disponíveis no painel "Ortodontia".

O planejamento começa com uma tela de introdução intitulada "Ortodontia", onde o usuário seleciona o tipo de planejamento: "Alinhadores", "Guia de colagem indireta - Alinhar braquetes aos dentes" ou "Guia de colagem indireta - Alinhar braquetes ao arame". Para mais informações, consulte o capítulo 3 "Blue Sky Launcher".



O tipo específico de planejamento não pode ser alterado em um próximo processo. Você pode visualizar o tipo de planejamento selecionado para o seu design no canto superior esquerdo da janela 3D, onde os dados do paciente são mostrados.

As funções para preparação do modelo são idênticas em todos os tipos de planejamento. Especificamente, isto inclui os passos para Carregar o Modelo de Entrada, Alinhamento da Mandíbula, Segmentação dos Dentes e Recorte do Modelo.

Os tipos individuais de planejamento incluem:

Alinhadores: Movimentação dos Dentes – Editar Etapas – Adicionar Anexos (opcional) – Alinhadores do Design ou Curva de Recorte do Alinhador (opcional) – Exportar

IBT (Alinhar Braquetes aos Dentes): Adicionar Braquetes – Preparar IBT – Exportar

27.1 21.1. Adicionando Modelo STL

O planejamento começa carregando o modelo STL da arcada dentária, usando a seleção de menu “Importar modelos” e escolhendo a orientação correta. Também é possível usar a opção “Importar TC do paciente”, com o upload gradual de dados de TC e modelos de maxilares. O alinhamento do modelo STL e da tomografia computadorizada é feito através de “coincidência dos dentes”, e o modelo STL pode ser trabalhado posteriormente.

Se a outra arcada estiver disponível, ela poderá ser importada nesta etapa. Após o upload, o usuário pode mostrar/ocultar este outro modelo junto com as funções “Colisões” e “Proximidade”, ativando a visualização colorida das colisões conforme os dentes se aproximam ou colidem.

Ambas as mandíbulas devem ser alinhadas automaticamente, ou é possível ativar o widget de

alinhamento do modelo  para permitir que o usuário mova a mandíbula manualmente na visualização 3D. Outra função para esse propósito é o “registro de mordida” (consulte o capítulo 25.2).



O Blue Sky Plan também permite o processamento e o planejamento de ambas as arcadas em um único caso. Isso requer o upload e o alinhamento de ambos os modelos no estágio de importação. Essa etapa inclui também a inclusão do nome do paciente.


Se houver um dente ausente no modelo STL, o usuário pode adicioná-lo utilizando o botão “Adicion. Dente”. Ao clicar na opção, a caixa de diálogo Adicionar Dente surge, possibilitando selecionar um dente nos diversos conjuntos de geometria de dentes.

Após selecionar o dente, basta clicar no botão OK e, em seguida, clicar com o botão esquerdo no modelo com o dente ausente. É possível ajustar a posição do dente ou removê-lo clicando com o botão direito do mouse > Remover.

Nota: É possível adicionar/remover os dentes somente na etapa de importação. O dente selecionado deve corresponder ao maxilar correto!




Adicionar dentes

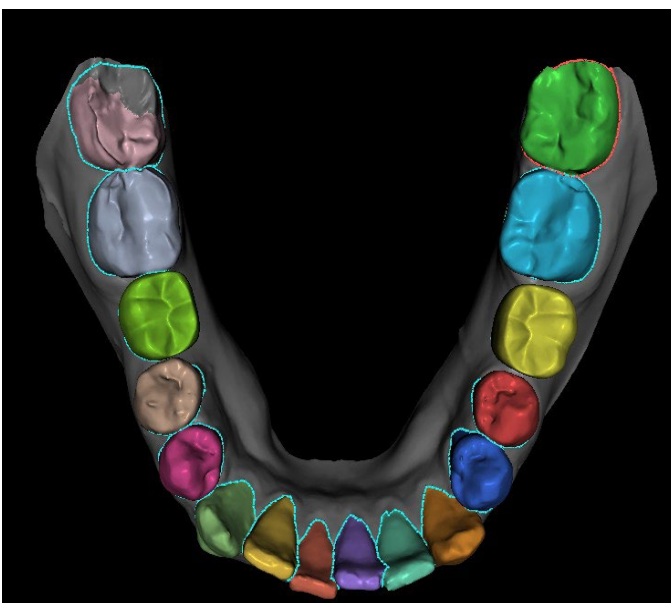

Dentes unidos na etapa de segmentação

É possível executar automaticamente as etapas "Anotação", "Segmentação", "Corte" e, se houver dados de TC disponíveis, também alinhar modelos STL aos dados de TC. Se ativado em Preferências, todas as etapas selecionadas serão ignoradas e o usuário chegará mais rápido às etapas "Movimentação dos dentes" ou "Continuar adicionando braquetes".


"É possível retornar a todas as etapas ignoradas usando o botão "Voltar""

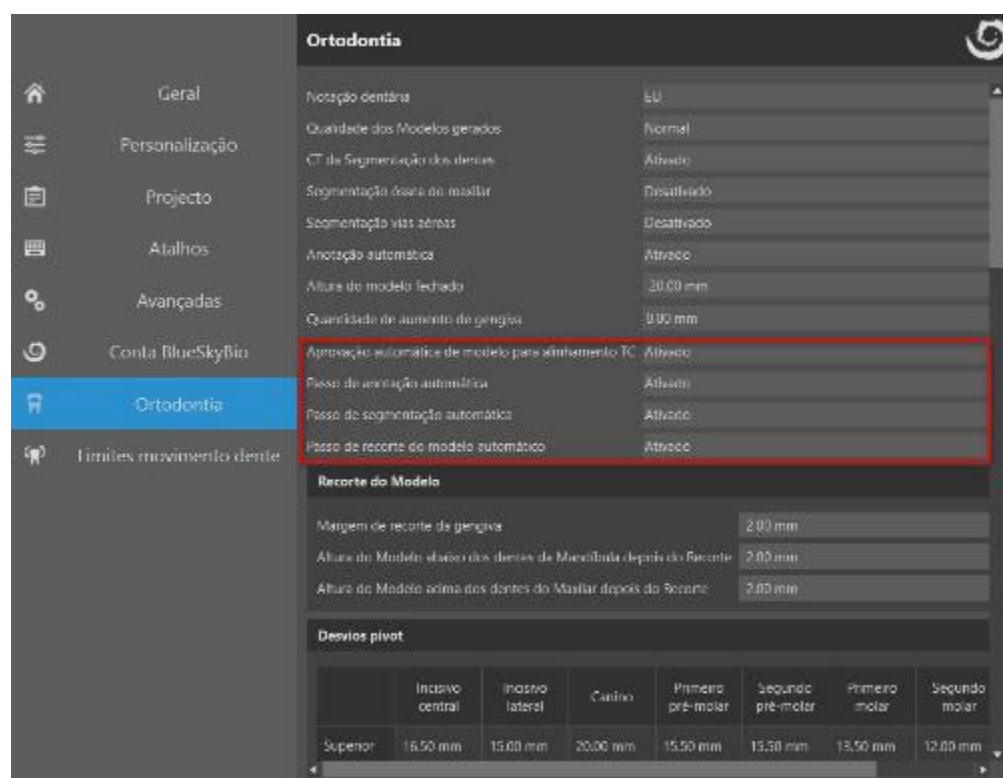

Se a função automática para as etapas estiver desativada, continue para a próxima etapa clicando no botão "Continuar para alinhamento da mandíbula".

27.2 Registro de Mordida

O Blue Sky Plan permite o alinhamento das arcadas superior e inferior usando um escaneamento de superfície de "mordida bucal". Esse processo requer que os dois modelos dos maxilares sejam importados. Em seguida, o botão "Registro da mordida bucal" pode ser usado para transferir para o painel especial "Registro da mordida bucal". A maxila e a mandíbula já são carregadas automaticamente no painel e é necessário adicionar apenas uma ou mais escaneamento bucais. O software alinha automaticamente a maxila e a mandíbula. Podem ser criados alinhamentos adicionais da mordida bucal (de acordo com o número de exames de mordida bucal) e é possível visualizar a mandíbula que se move do normal para cada um dos alinhamentos adicionais da mordida bucal.

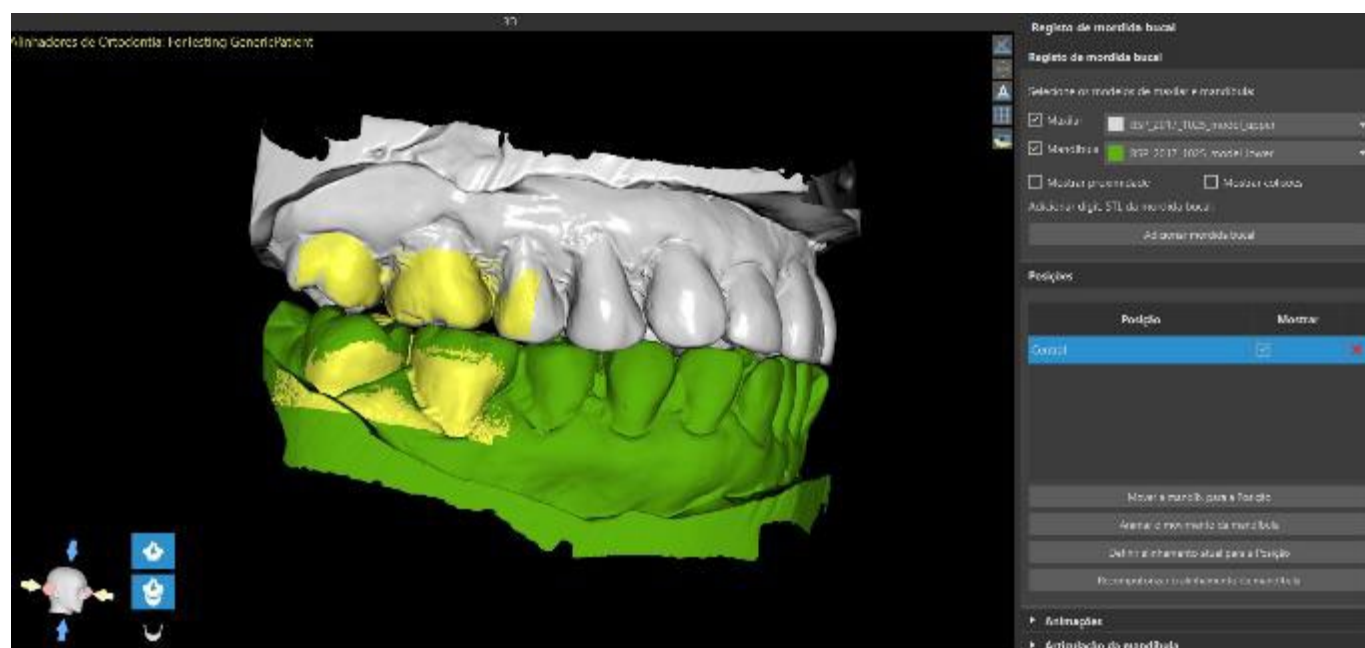

27.3 Articulação mandibular


A articulação da mandíbula inferior pode ser visualizada por meio da adição do articulador da mandíbula. Esta funcionalidade não depende da importação da mordida bucal e está disponível em todos os tipos de planejamento e todas as etapas no painel de Registro da Mordida Bucal. As colisões entre os maxilares podem ser mostradas em todas as posições.

marcados no modelo 3D. Um dente que não será movido ou está faltando deve ser marcado clicando com o botão direito do mouse (pontos azuis aparecem no modelo).

Depois que todos os dentes do primeiro lado estiverem marcados, você poderá prosseguir com o outro lado clicando em "Ir para o lado esquerdo", começando no incisivo destacado em vermelho novamente.

Não é necessário marcar todos os dentes de cada lado. Se o último molar, ou algo assim, não estiver presente, você pode pular a marcação dos dentes restantes ao lado, clicando em "Ir para o lado esquerdo" ou "Concluir marcação dos dentes".

Ao marcar os dentes, é possível voltar um passo para trás (o botão "Um dente anterior") e repetir a marcação do dente anterior, ou começar do zero novamente, pressionando "Limpar todos os dentes". As etiquetas coloridas (amarela e azul) indicam os nomes dos dentes.

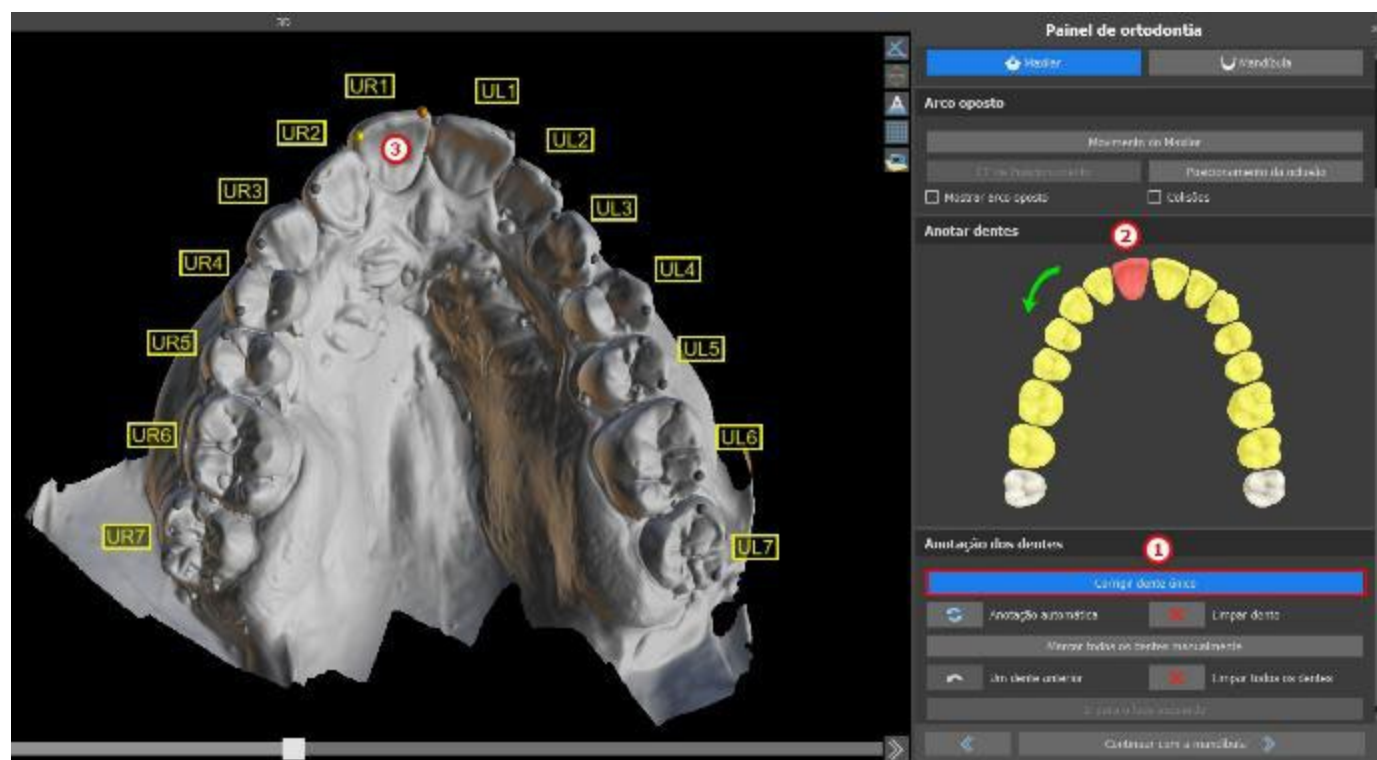


A correção de um único dente é possível clicando no botão "Corrigir um único dente" (1). Clique no esquema para selecionar o dente (2) e corrigir a marcação no modelo de mandíbula (3). Para remover a marcação do dente selecionado, clique no botão "Limpar dente". É possível marcar o dente novamente segurando a tecla "Shift" e clicando com o botão direito do mouse no dente.

Para concluir a etapa, clique no botão "Continuar com mandíbula"

Nota: A marcação adequada dos dentes é crucial para a subsequente etapa de segmentação automática dos dentes. Isso afeta fortemente a precisão da segmentação. Incisivos e caninos devem ser marcados clicando / colocando dois pontos na borda oclusal de cada dente. Os molares e os pré-molares devem ser marcados colocando os pontos no lado vestibular da superfície do dente, conforme indicado na imagem acima.

27.4.2 Marcação automática dos dentes

O Blue Sky Plan permite que o usuário marque os dentes automaticamente. Para desativar ou ativar esta função, acesse Ferramentas -> Preferências -> Ortodontia -> Marcação automática.

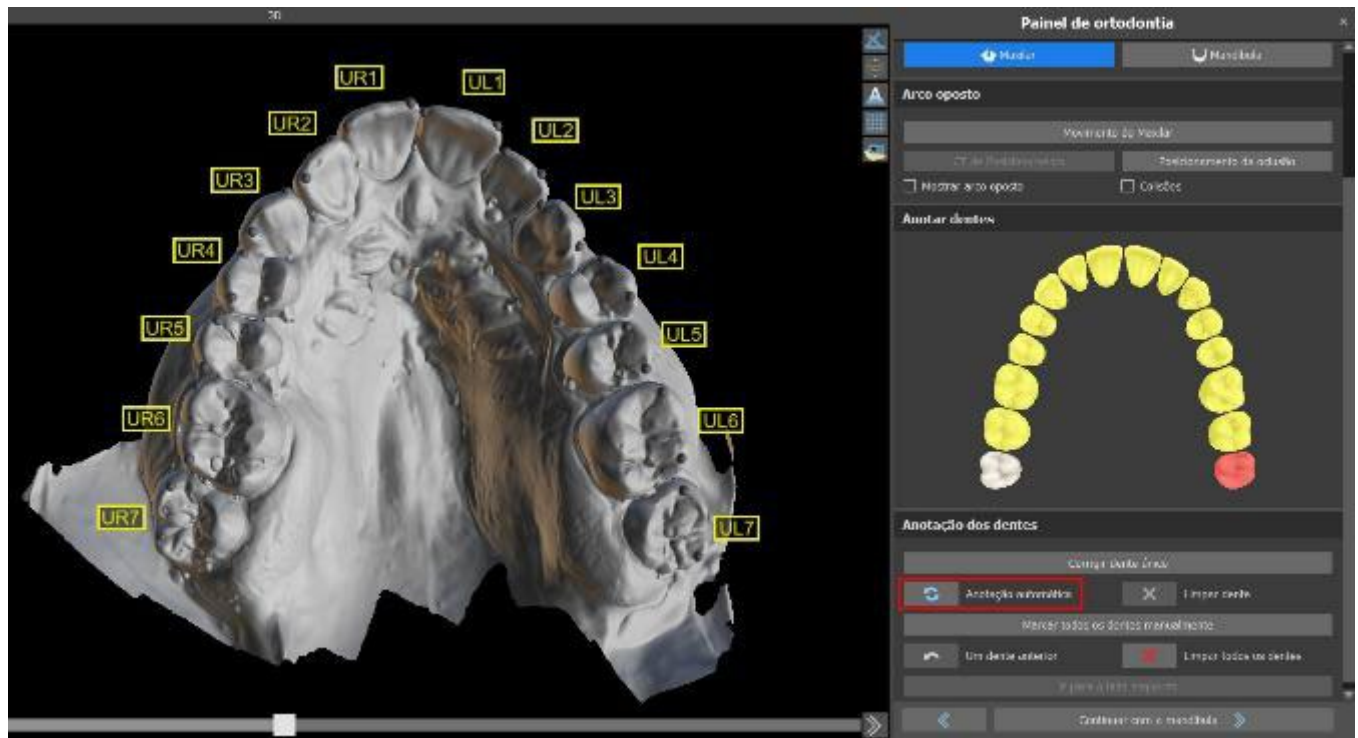

Essa função opera da mesma forma que a marcação manual. O usuário pode alternar entre marcação automática e a manual para modificar os pontos manualmente.

A espessura do modelo final de gesso, ou seja, a altura mínima permitida em milímetros, é, pelo menos, 20 mm e pode ser ajustada em Preferências.


Observação: Verifique se cada dente está marcado na posição e com o número de dente corretos antes de prosseguir. Erros de marcação afetam a segmentação automática dos dentes (consulte as seções 1.2 e 1.3).

27.5 Funcionalidade dos Maxilares


Depois que os dentes do primeiro arco (maxila) são marcados e o modelo é fechado, a transferência para o modo de planejamento de ambas as mandíbulas é ativada. Por padrão, o fluxo de trabalho é definido para que, após clicar em "Continuar com a mandíbula", seja realizada uma transferência direta para marcação da mandíbula. Para planejar as duas arcadas, os dois modelos devem ser marcados e alinhados. Nas etapas a seguir, há a opção de trabalhar ativamente com uma ou outra mandíbula. Se o dentista usar o outro modelo (o arco oposto) para controle visual no curso da etapa de planejamento e para a descrição de possíveis colisões intermaxilares apenas, o botão "Ignorar esta mandíbula" pode ser usado para transferência direta para uma única segmentação da mandíbula.

27.6 Segmentação dentária

A transferência para a etapa de segmentação automática de dentes individuais pode demorar um pouco, pois o programa tenta identificar a margem gengival automaticamente.

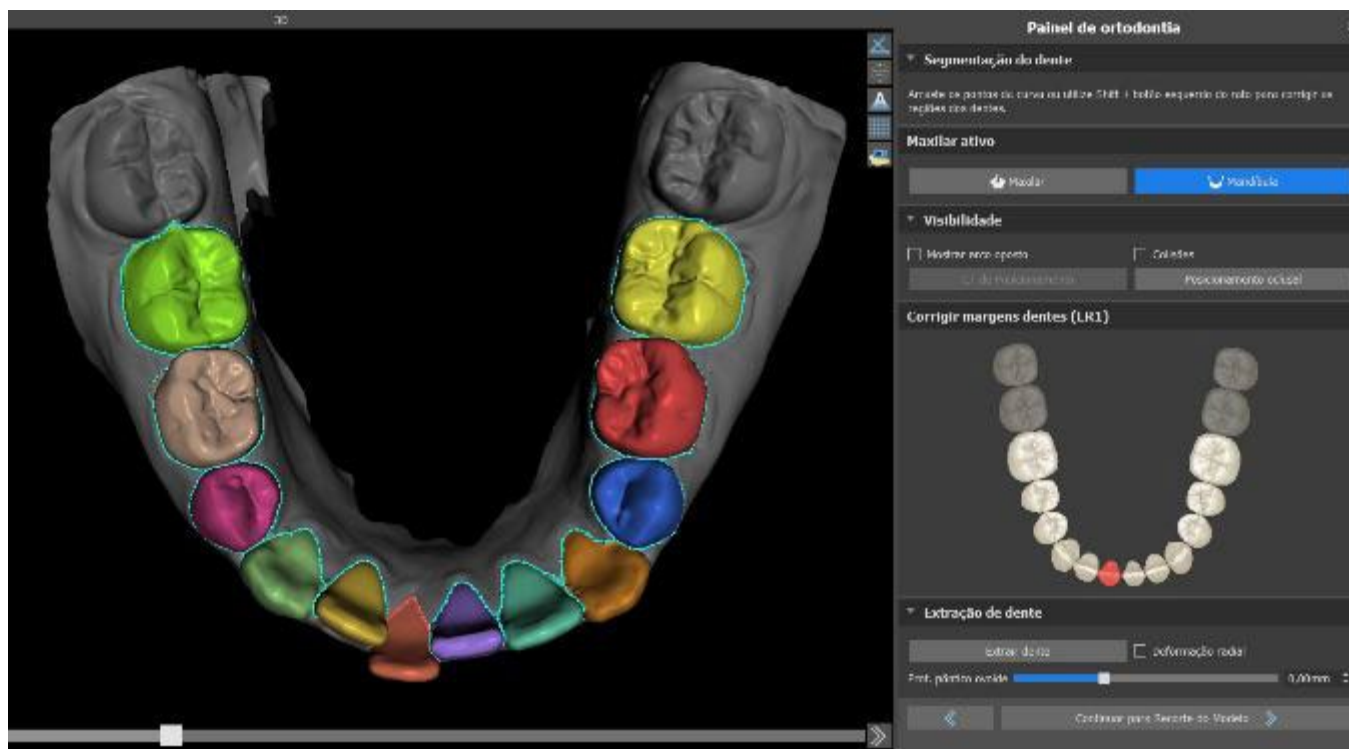


Após a segmentação automática, você pode ajustar a margem gengival detectada do dente ativo / selecionado arrastando os pontos de controle da curva ou desenhando manualmente uma parte da curva no modelo enquanto mantém pressionada a tecla “Shift” e o mouse esquerdo botão simultaneamente.

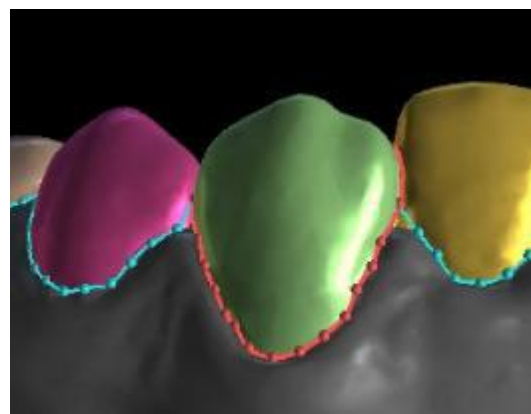

A margem gengival pode ser editada apenas para o dente ativo. O dente ativo pode ser alterado em toda a imagem da mandíbula esquemática no painel ou clicando no dente segmentado diretamente na visualização 3D.

Selecione o dente que deseja remover e clique no botão Extrair dente. O último dente não pode ser extraído.


A deformação radial afeta o formato do pântico ovoide resultante. Quando ligado, o valor de deformação da superfície depende exclusivamente da distância do ponto da superfície a partir de um centro teórico do dente, resultando em uma forma simétrica e dependente do raio. Quando desligado, o valor de deformação aplicado à gengiva no local pântico é calculado adaptativamente considerando o limite do formato do dente, resultando em um pântico oval que copia o formato limite.

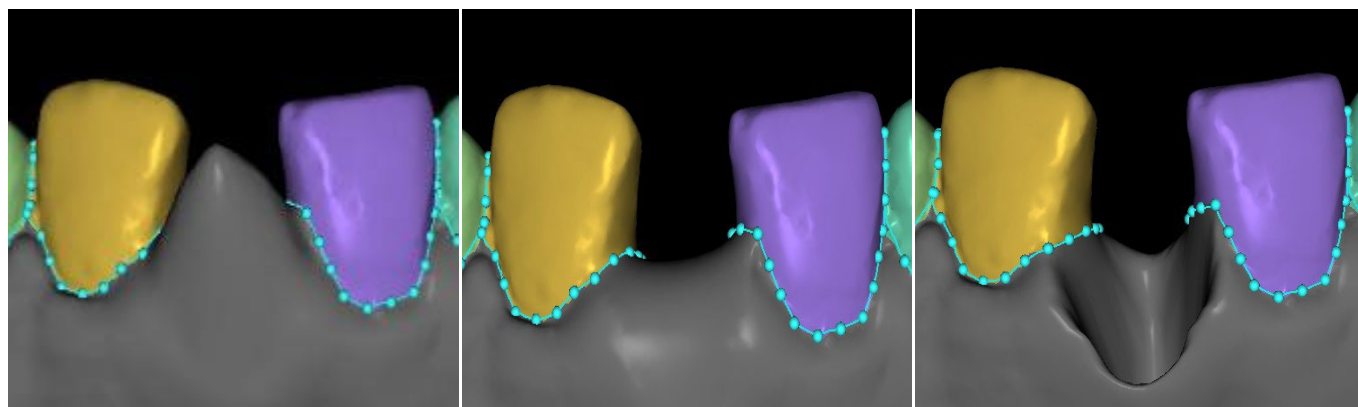

Prof. do pântico ovoide: 5 mm

Prof. do pântico ovoide: 0 mm

Prof. do pântico ovoide: 10 mm

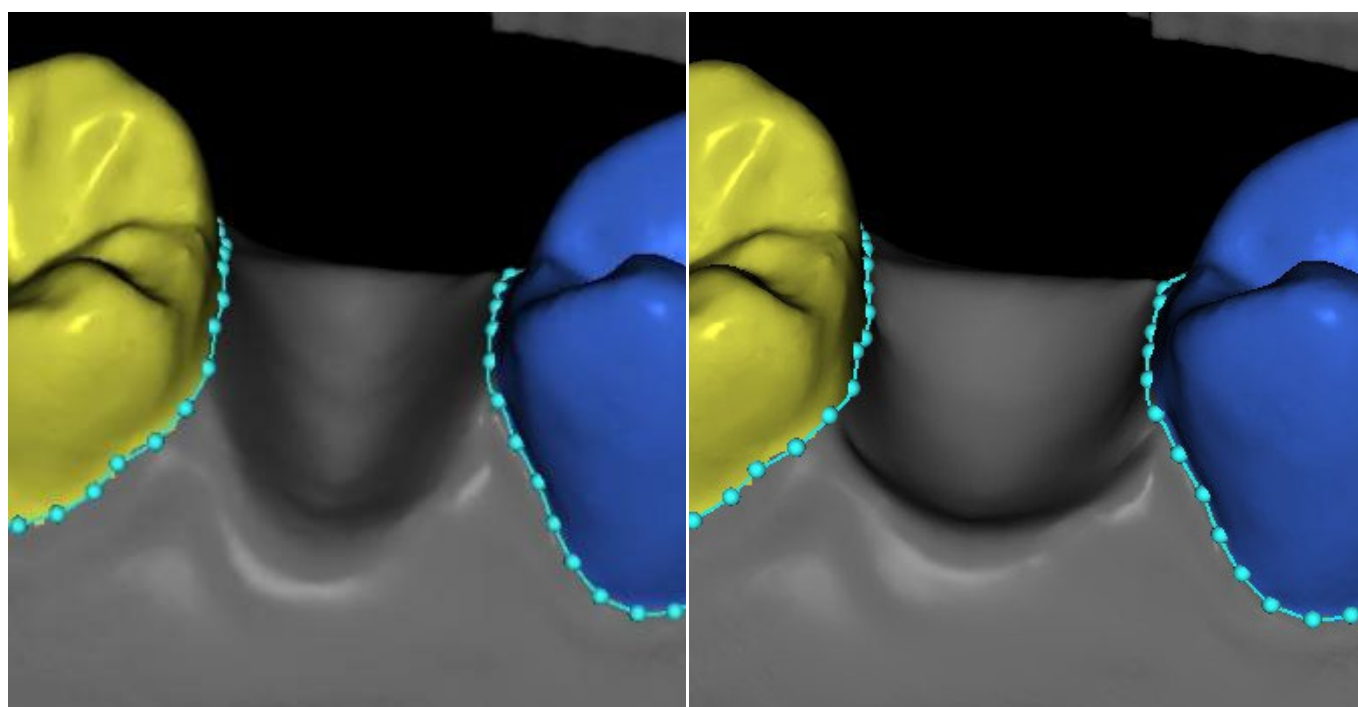

Extração de dente sem utilizar a “Deformação radial”

Extração de dente utilizando a “Deformação radial”

Uma vez que os limites não precisem de mais refinamentos, você pode terminar a segmentação clicando no botão "Continuar o Recorte do Modelo". Isso aplica as alterações feitas e separa os dentes da digitalização 3D, podendo movê-los.


Observação: Revise a margem gengival detectada de cada dente e corrija-a quando necessário antes de prosseguir para o recorte do modelo (consulte as seções 1.2 e 1.3).

27.7 Recorte do Modelo

O modelo STL importado para a BSP pode conter excesso de material e sua impressão significaria um desperdício desnecessário de material de impressão. Para estas situações, a BSP oferece a função de recorte por meio de uma curva. A curva de recorte é criada automaticamente a uma distância dos dentes com base no parâmetro “Margem de Recorte da Gengiva” (que pode ser modificado em Preferências). A curva é ainda ajustável manualmente por meio do arrastamento dos pontos de controle.


Parte dessa etapa é também o fechamento e o recorte do modelo a uma altura específica, com base na distância dos dentes segmentados. Os parâmetros “Modelar a Altura Abaixo dos Dentes

Mandibulares Após o Recorte” para o maxilar inferior e “Modelar a Altura Acima dos Dentes Maxilares Após o Recorte” para o maxilar superior podem ser modificados em Preferências. A etapa de Recorte do Modelo pode ser pulada usando as opções “Não Recortar Maxila” ou “Não Recortar Mandíbula”.

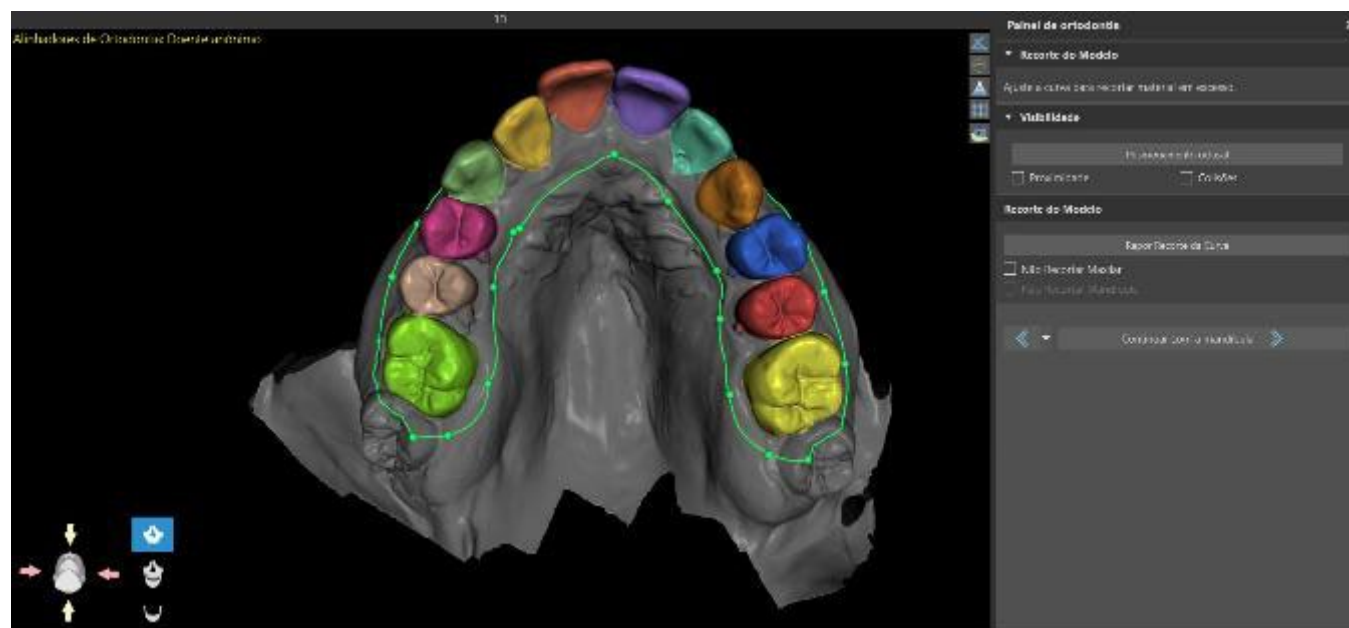

Nesta etapa, o Recorte do Modelo está apenas definido. Ele só começará após clicar em Continuar a Movimentação dos Dentes, portanto esta operação pode demorar um pouco.

Após a separação dos dentes, a gengiva pode ser aumentada (isto é, inflada) para evitar interferência no alinhador e para ajudar a impedir a colisão do tecido. Observação: Devido à otimização nos processos, o valor de 0,0mm é recomendado para as versões 4.7.50 e posteriores. O valor 0,2mm é recomendado para as versões 4.7.20 e anteriores. Este é o parâmetro “Valor do Aumento da Gengiva” em Preferências.

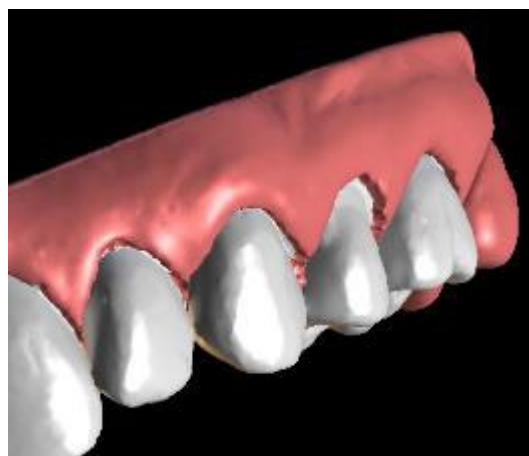


Além disso, as cores do modelo 3D e os dentes mudam para um branco e rosa mais naturais, respectivamente. Agora, o software permite reposicionar os dentes e planejar suas posições finais.

27.8 Movimentação dos Dentes




Nesta etapa, as posições alvo dos dentes individuais podem ser planejadas. Você deve começar selecionando o dente ativo – ou clicando com o botão esquerdo do mouse sobre um dente na imagem esquemática do maxilar no painel, ou clicando no dente na visualização 3D.

O dente ativo possui uma linha média do dente visível e um cursor de manipulação 3D mostrado ao seu redor. Usando o cursor, você pode mover e girar o dente nos seguintes tipos de movimentos:


- Inclinação mesial / distal
- Inclinação bucal / lingual
- Rotação ao longo do eixo longitudinal do dente
- Intrusão / Extrusão
- Esquerda / Direita
- Para frente / Para trás

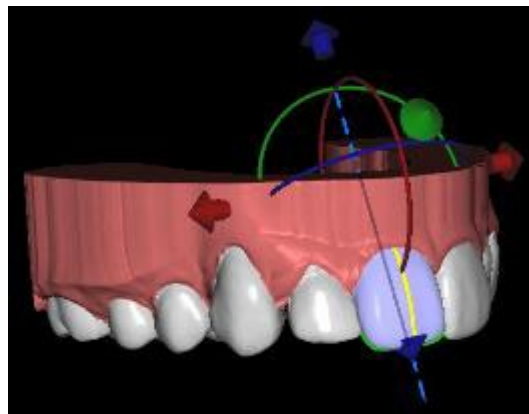

Algumas funções interessantes podem ser ativadas no painel ortodôntico após esta etapa. A opção "IPR" mostrará uma visualização em 3D dos tamanhos das reduções interproximais acima do limite, e os limites do IPR máximo permitido podem ser definidos em Preferências. As áreas vermelhas visualizam informativamente colisões entre dentes. "Diastemas" mostra a medida do espaço entre os dentes. "Posições iniciais dos dentes" mostra o modelo original antes de posicionar os dentes. "Posições finais dos dentes" mostra o último modelo após posicionar os dentes. "Linhas médias dos dentes" permite que o usuário veja o eixo estimado do dente com sua linha média. As larguras dos dentes e sua soma também são exibidas marcando "Larguras dos dentes".

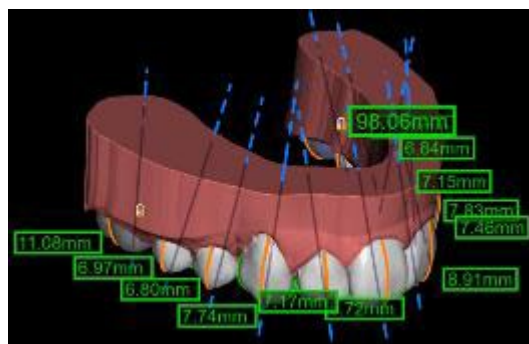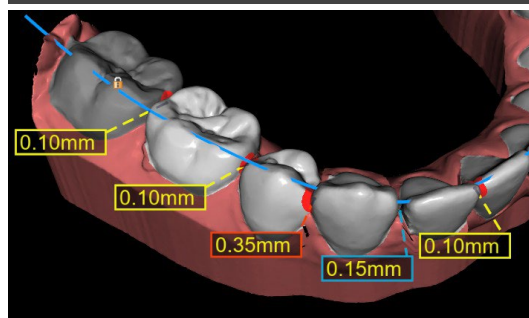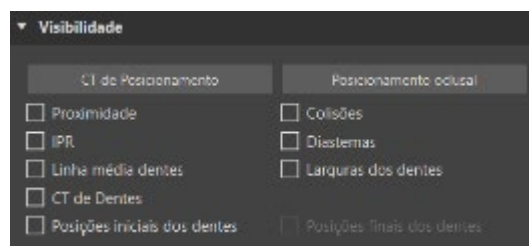


A seção "Automático" (1) permite que as posições finais sejam calculadas para o tratamento de alinhamento. Isso requer que o usuário carregue e anote ambas as mandíbulas. "Alinhar ambas as mandíbulas automaticamente" (2) executa o algoritmo de alinhamento repetidamente, tentando melhorar as posições finais a cada passo. Colisões entre mandíbulas não são resolvidas. Os IPR são aplicados automaticamente depois. "Alinhar sem resolução de IPR" (6) executa o algoritmo apenas uma vez e não resolve IPRs. Cada execução apenas tenta melhorar a posição dos dentes. "Resolver IPR" (7) tenta resolver IPRs por expansão do arco e deslocamento dos dentes. O controle deslizante "Repetições de alinhamento" (3) mostra

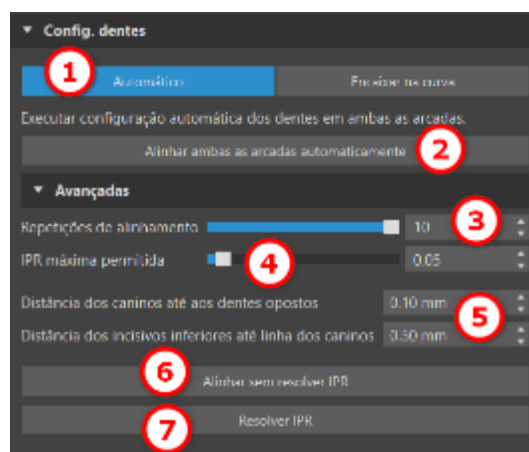

o número de execuções do algoritmo, 10 por padrão. O controle deslizante "IPR máximo permitido" (4) permite IPR até um determinado valor, já que o padrão é nenhum IPR. Parâmetros adicionais podem ser editados na seção de nivelamento para cada mandíbula (5).



A seção "Ajustar à curva" (1) permite ao usuário ajustar uma curva que representa um arco dentário ideal e encaixar um ou todos os dentes nessa curva.

Para endireitar os dentes na curva, mantendo os dados do IPR em uma faixa aceitável, selecione "Nivelar com a curva" (2) e clique no botão "Encaixar todos os dentes" (3). Quando o usuário trabalha com a mandíbula e um arco oposto está disponível, o software permite que o usuário nivele os dentes aos opostos (3). Clique em "Encaixar todos os dentes" para encaixá-los. Parâmetros adicionais podem ser editados na seção de nivelamento para cada maxilar. (4). A opção "Sem nivelamento" (5) quebra os dentes sem extrusão ou intrusão. Ao clicar em "Editar Curva" (7) o usuário edita os pontos da curva simetricamente ou assimetricamente. Este botão também ativa "Mover com Curva", onde é possível mover a curva e os dentes ao mesmo tempo. Quando "Editar Curva" está ativo, as medidas da curva dentária ficam visíveis. O botão "Redefinir Curva" (8) redefine a curva para sua posição original. Se o utilizador clicar no botão "Editar Curva" novamente, a curva já não poderá ser editada.

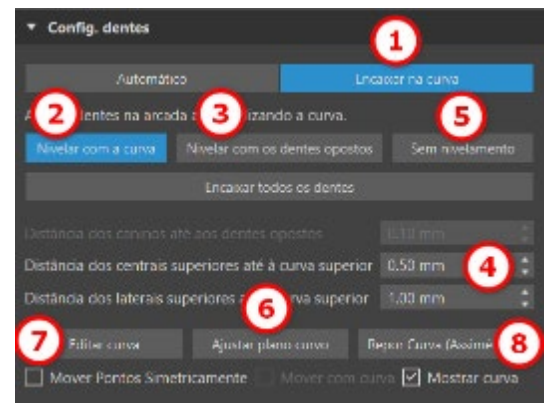


Clicar no botão "Ajustar plano da curva" (6) ativa o plano oclusal para ajustar a curva. É possível mover o plano na cena 3D com base no ângulo e na distância do plano. Editar

Os parâmetros adicionais estão disponíveis nas Preferências em Ortodontia, seção Movimento do dente.

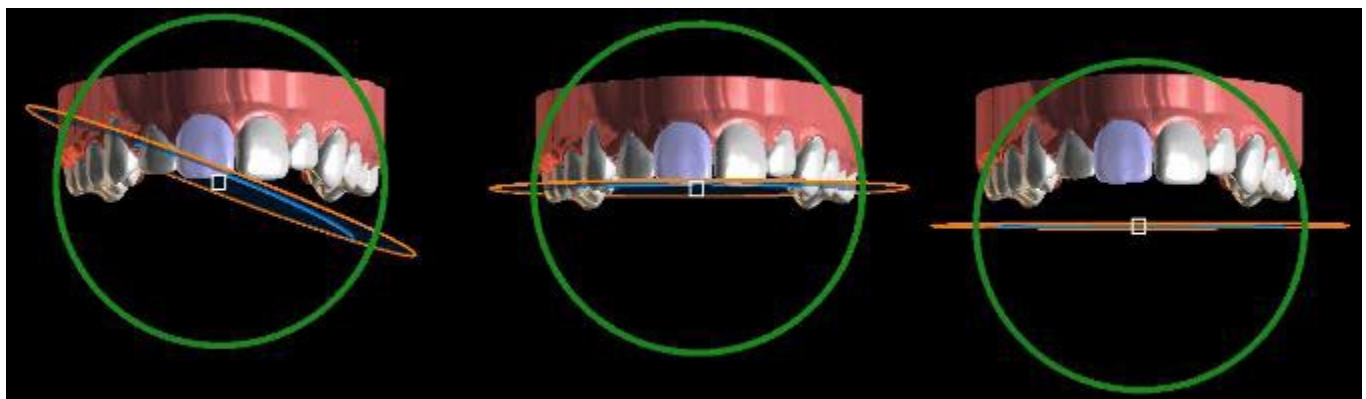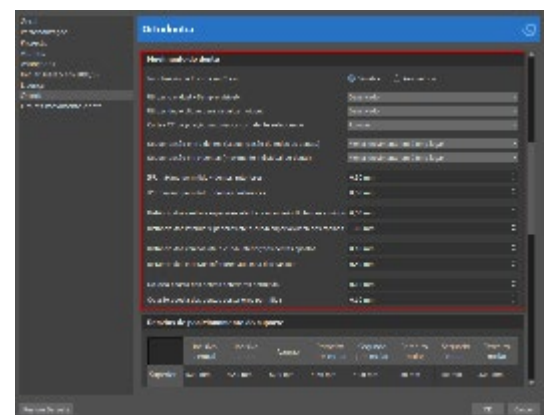

Ajuste do plano curvo

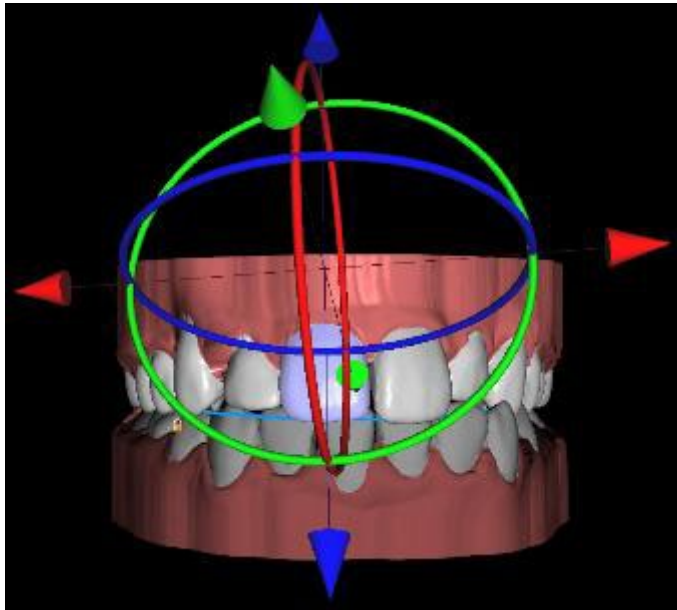

Widget “Sempre visível” habilitado



“Cortes CT de posição automática com dente selecionado” habilitado

Cada dente pode ser travado na posição, clicando com o botão direito do mouse sobre o dente e selecionando “Travar dente” no menu de conteúdos. O desbloqueio procede de forma semelhante ou o usuário pode desbloquear todos os dentes de uma só vez clicando no botão “Desbloquear todos os dentes”.

O usuário também pode ajustar a linha média quando o botão “Ajustar linha média” estiver ativo.

O botão “Redefinir todos os dentes” retorna todos os dentes às suas posições originais. Enquanto o dente ativo está sendo movido, o painel “Ortodontia” mostra informações sobre os movimentos totais na forma de distâncias [mm] e ângulos [°] da posição inicial. Os limites de movimento podem ser definidos como mensais, quinzenais ou semanais.

Desvios do dente (LR1)


Trans - Bucal/Lingual	-0.02 mm
Trans - Mesial/Distal	0.86 mm
Extrair/Inserir	-0.08 mm
Ponta - Bucal/Lingual	-4.70 °
Ponta - Mesial/Distal	1.29 °
Rotacão	0.77 °

☐ Transferir o movimento localmente

Limites Mensal

A multisseleção permite que diversos dentes sejam manipulados de uma só vez - segure a tecla Shift e clique com o botão esquerdo para selecionar diversos dentes. A multisseleção permite utilizar todos os métodos de manipulação (por meio do widget de manipulação, da tabela de desvios, e setas do teclado). Ao marcar a caixa de seleção “Transf. movimento localmente”, o desvio local do dente é aplicado aos outros dentes selecionados.


As opções do menu de contexto (bloqueio, encaixe, alteração da velocidade de movimento do dente, etc.) podem ser usadas com a multisseleção.

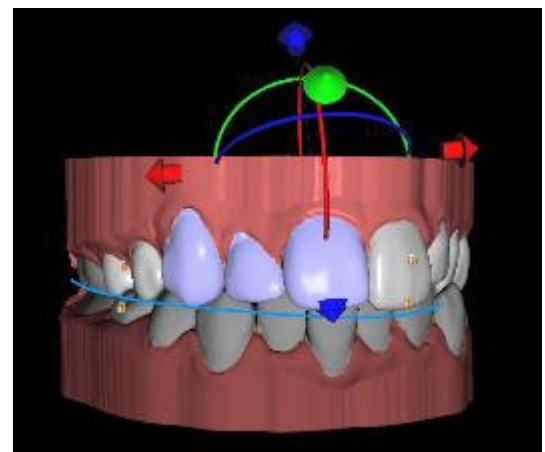

A Etapa é um passo obrigatório para todos os dentes (ou seja, “ponto de sincronização”). As posições final e inicial são etapas implícitas, no entanto é possível criar etapas adicionais caso seja necessário.

As etapas podem ser criadas de duas formas:



- Clicando no botão “Inserir etapa” (2)

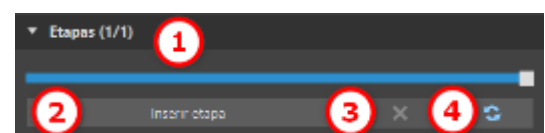


- Duplicando o passo “Movimento dos dentes”

O controle deslizante (1) exibe a sequência de etapas individuais. Cada etapa (exceto a posição inicial) pode ser excluída (3). Além disso, é possível apagar as etapas personalizadas e voltar para as padronizadas (4).

Ao posicionar um dente, às vezes é útil ver o movimento de todo o dente, incluindo suas raízes. Portanto, o Blue Sky Plan permite adicionar um dente virtual com raízes de forma simples pelo menu de contexto > Exibir dente virtual, ou ainda ativando a caixa de seleção “Mostrar dentes virtuais” (nota: Essa opção não estará disponível se você importar os Dados CT). Para refinar o formato e a posição do dente virtual recém-adicionado, para que ele seja uma representação fiel dos dentes subjacentes separada do scan 3D, clique no botão “Ajustar dente virtual”. Agora, você pode ajustar a posição e o tamanho do dente virtual usando o cursor em cena. Para ocultar o dente virtual, clique novamente na caixa de seleção “Dentes virtuais”.

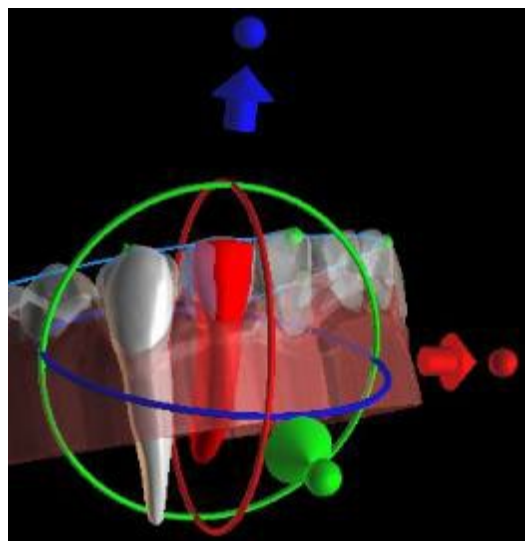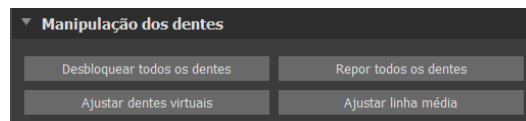


Para trabalhar no dente selecionado, clique com o botão direito no dente e selecione a funcionalidade. Para ocultar o dente, selecione “Ocultar dente virtual”. Para redefinir o dente a sua posição original, selecione “Redefinir posição do dente virtual”. É possível alterar o ponto de rotação do cursor de manipulação 3D, ou seja, alternar entre a inclinação e o torque. Os ângulos de inclinação e torque são rastreados e relatados separadamente. As compensações do pivô podem ser definidas em Preferências.

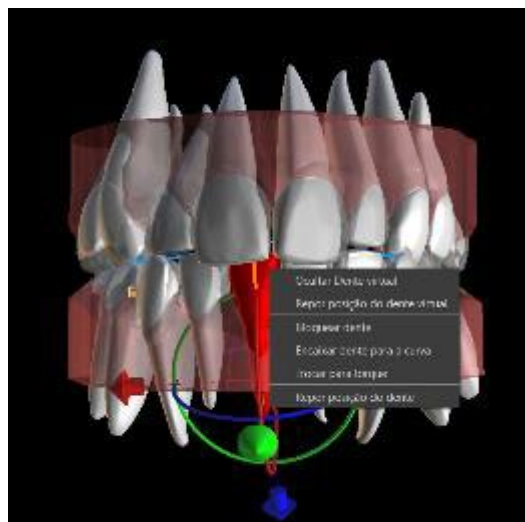

O software Blue Sky Plan permite que o usuário trabalhe com dados CT segmentados.

Acesse Preferências > Ortodontia > CT da segmentação dos dentes para habilitar a segmentação dos dentes de CT. Para ocultar todos os dentes de CT visíveis, basta clicar na caixa de seleção “Dentes de CT”. Para ocultar um dente de CT (ou mais), clique com o botão direito no dente selecionado e selecione “Ocultar dente de CT”. Para uma melhor clareza das raízes, a transparência da mandíbula pode ser aumentada movendo o controle deslizante no painel (1).

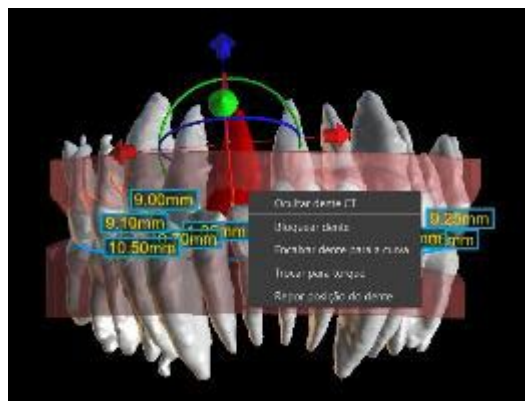

O usuário pode habilitar a segmentação óssea automática do maxilar. Essa opção está disponível em Preferências > Ortodontia > Segmentação óssea do maxilar.

Ao iniciar a etapa de Movimento dos Dentes, o osso maxilar segmentado com dentes de CT se tornará visível automaticamente. Para ocultar os dados, basta usar a caixa de seleção "Osso maxilar". Para uma melhor clareza dos dados CT, você pode aumentar a transparência movendo o controle deslizante no painel (2).


É possível habilitar a Segmentação das vias aéreas em Preferências > Ortodontia > Segmentação das vias aéreas. Para ocultar os dados, basta usar a caixa de seleção "Vias aéreas". Para uma melhor clareza dos dados CT, você pode aumentar a transparência movendo o controle deslizante no painel (3).




Observação: As opções "CT da Segmentação dos dentes", "Segmentação óssea do maxilar" e "Segmentação vias aéreas" devem estar ativadas durante a etapa de importação dos dados CT para que seja possível produzir os dados segmentados!



Dentes de CT

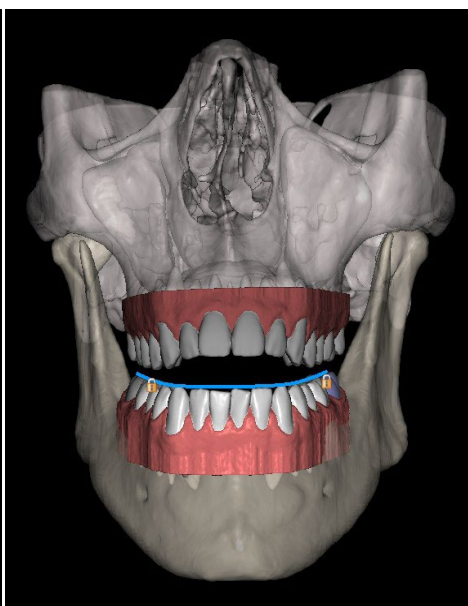


Osso maxilar

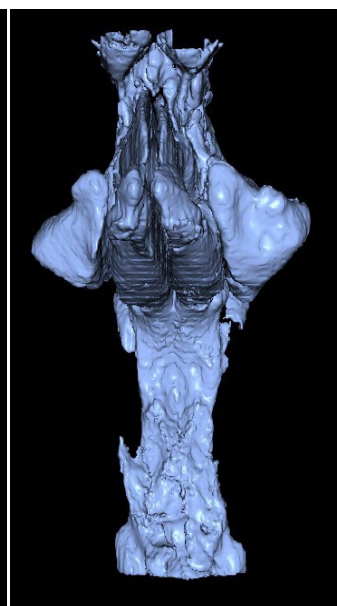

Vias aéreas

O BSP permite ao usuário corrigir o tratamento em andamento com posições finais originais. O usuário carrega as novas digitalizações, continua para a etapa "Alinhamento dos dentes" e seleciona o projeto original em Arquivo > Importar configuração final do dente do caso existente (1). Quando o projeto é carregado, o planejamento da posição final do novo projeto é atualizado e um mapa colorido mostrando a precisão do alinhamento por dente é exibido. Após carregar o projeto original, aparecerá o botão "Confirmar importação" (2). Após clicar nele o mapa de cores desaparecerá, mas as posições finais permanecerão.

Observação: As posições finais calculadas automaticamente são propostas. Um dentista habilitado deve revisar cada posição dentária, as colisões entre as arcadas e os valores de IPR, e ajustá-los conforme necessário antes de gerar posições intermediárias ou alinhadores (consulte as seções 1.2 e 1.3).

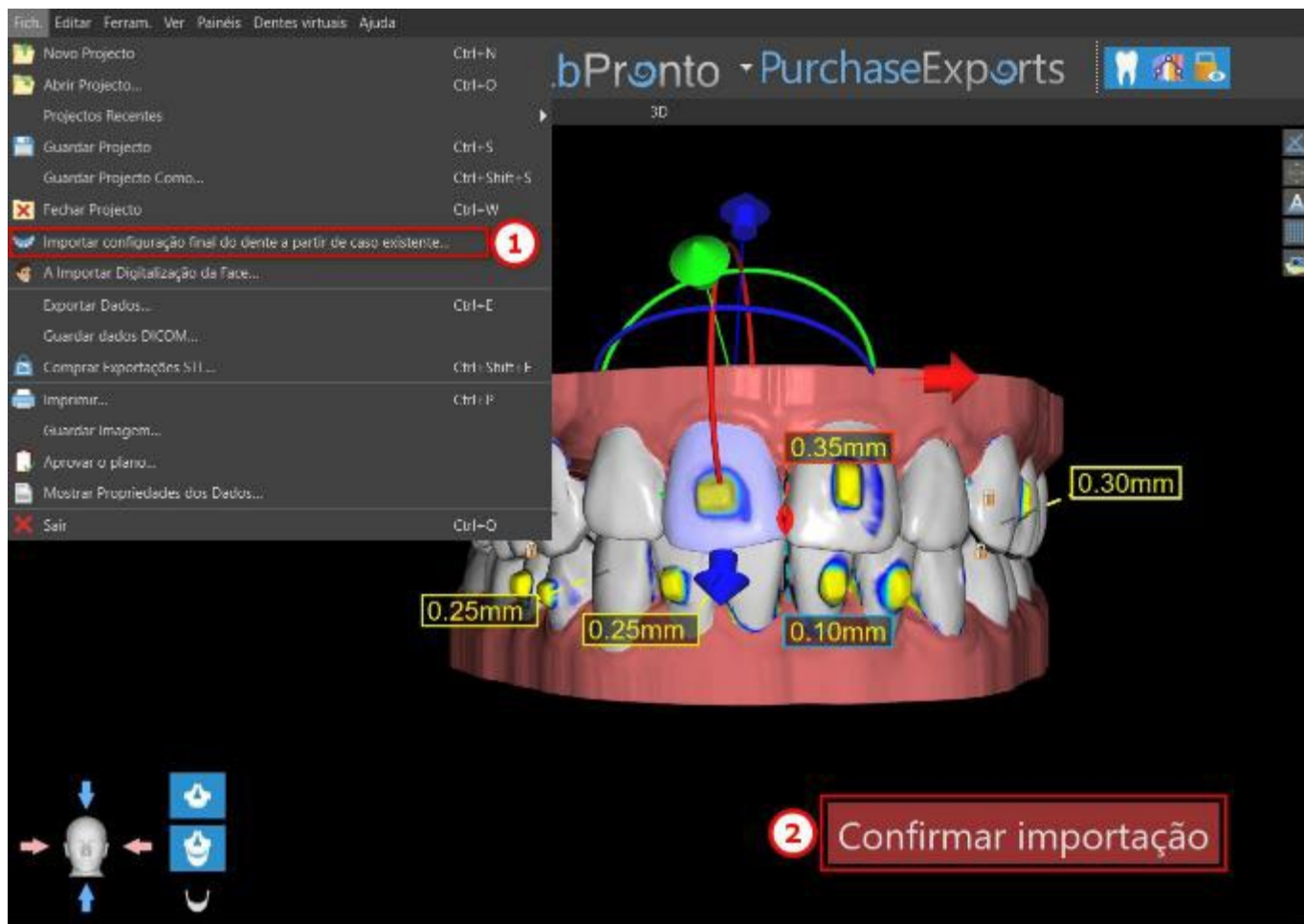

27.9 Gerando posições intermediárias

Quando estiver satisfeito com as posições-alvo dos dentes, use o botão "Continuar para editar etapas" para gerar posições intermediárias e passar para a próxima etapa de planejamento.

A tabela no painel "Ortodontia" lista o número de etapas intermediárias necessárias para alcançar a posição-alvo planejada do dente ativo. O número de etapas é sempre o mesmo para todos os dentes, mas é possível iniciar o movimento dos dentes em etapas posteriores. A primeira e a última linha da tabela representam a posição inicial e de destino do dente ativo; portanto, essas posições estão bloqueadas e não podem ser alteradas neste estágio de planejamento. O número de etapas é estimado automaticamente com base nas configurações predefinidas das limitações máximas de movimento. As limitações de movimento padrão são armazenadas nas Preferências do aplicativo e podem ser ajustadas manualmente.

O controle deslizante na parte superior do painel "Ortodontia" (2) permite mover os dentes ao longo do tempo e em etapas intermediárias. Se o controle deslizante for movido para a esquerda, os dentes serão visualizados nas posições iniciais. A posição muito correta do controle deslizante representa as posições de destino planejadas. Ao arrastar o controle deslizante, você pode animar o movimento dos dentes através de etapas intermediárias ao longo do tempo. Além disso, você pode mover o controle deslizante para uma das etapas intermediárias e, se necessário, ajustar a posição do dente ativo nesta etapa concreta para evitar colisões com os dentes vizinhos.


O movimento de um dente ativo é ilustrado por uma cor verde na tabela. As etapas são mostradas em vermelho. As linhas laranjas são as etapas com mudanças em relação ao passo anterior. A linha selecionada pelo usuário é marcada em azul.

Na tabela, existem duas colunas de caixas de seleção. Pode ser importante iniciar o movimento do dente ativo posteriormente em uma etapa. A etapa inicial pode ser alterada marcando a caixa de seleção na coluna esquerda ("Iniciar passo") (3). Após qualquer alteração, é necessário gerar novamente a tabela inteira clicando no botão "Atualizar etapas" (7). As caixas de seleção na coluna da direita ("Obrigatório") (4) podem ser usadas para bloquear as posições intermediárias do dente - o dente sempre se move pelas posições intermediárias bloqueadas.

Três planos opcionais para organizar o movimento dos dentes estão disponíveis – "Movimento mínimo se move por último", "Movimento mínimo se move primeiro" e "Movimento uniforme". "Sequenciação entre dentes" (5) move todos os dentes em relação uns aos outros, enquanto a "Sequenciação intra-dentes" (6) refere-se ao movimento de rotação e translação de cada dente individualmente. É possível também definir uma Sequenciação intra-dentes clicando com o botão direito no dente.

O movimento de todos os dentes pode ser adiado em um passo clicando no botão "Duplicar passos" (8). Os detalhes sobre o movimento de cada dente dentro de um passo específico podem ser encontrados em "Detalhes do passo" (9). Para uma ilustração do movimento dos dentes em cada etapa individual, use "Abrir gráfico de movimento". Se necessário, cada plano ajustado pode ser redefinido para o padrão (10).

A velocidade de movimento de cada dente pode ser alterada ao clicar com o botão direito no dente. Reduzir a velocidade reduzirá o movimento do dente em 65%, por outro lado, aumentar a velocidade irá acelerar o movimento em 65%. Redefinir a velocidade irá retornar a velocidade de movimento do dente aos seus valores originais. Observe que qualquer mudança na velocidade de movimento do dente também irá afetar o número de etapas intermediárias na tabela.

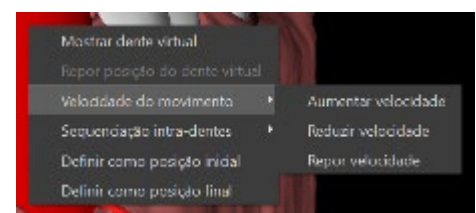


No tipo de planejamento dos Alinhadores, é necessário selecionar qual método de criação de alinhadores será utilizado mais adiante no final desta etapa. Para a geração e exportação apenas das posições intermediárias dos modelos, a seleção padrão "Exportar apenas modelos" é suficiente.

Ao selecionar a opção “Alinhadores Possíveis de serem Impressos no Design”, os alinhadores serão desenhados e gerados diretamente como modelos em BSP, que posteriormente poderão ser exportados. Selecionando a opção “Curva de Recorte do Alinhador do Design” significa que a linha de recorte, aplicável à máquina de extração, será desenhada nos modelos e exportada. É muito útil para o recorte automático do alinhador.

Se os anexos forem adicionados em posições intermediárias do modelo, é necessário marcar também “Adicionar anexos”. Fazendo isso, esta etapa será adicionada ao resto do processo.

O botão “Exportar vídeo” (1) permite ao usuário exportar conteúdo do vídeo do movimento dos dentes. Algumas funções interessantes podem ser definidas nesta opção. Observe que, por padrão, o tamanho do vídeo é dado pelo tamanho da janela da imagem 3D. Em alguns casos, isso poderá gerar vídeos grandes (por exemplo, em monitores 4k), com os quais alguns reprodutores de vídeos podem ter problemas. Para evitar esses problemas, você pode limitar o tamanho do vídeo selecionando o limite “HD” ou “Full HD” na opção “Tamanho do vídeo”. Como alternativa, é possível também instalar um reprodutor de vídeo diferente (por exemplo, o VLC media player) que seja capaz de lidar com vídeos grandes.

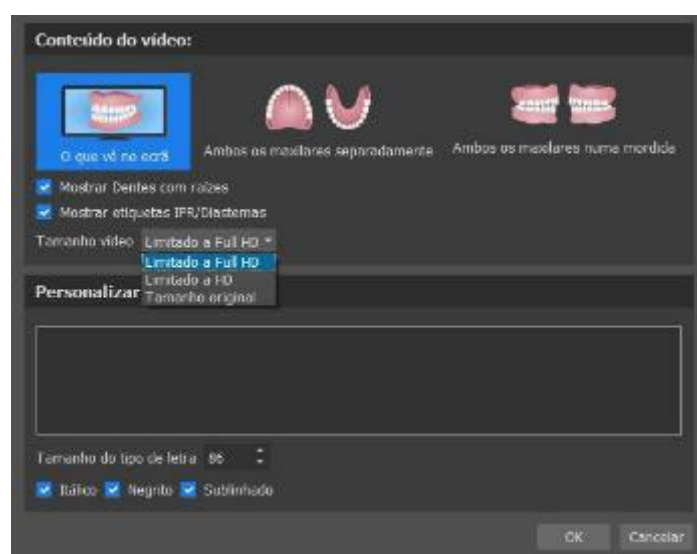


27.10 Alinhadores Ortodônticos

O método de criação de alinhadores pode ser selecionado no final da etapa “Geração das posições intermediárias” (descrito no capítulo anterior). Os próximos passos serão baseados nesta seleção.

27.10.1 Adicionar anexos



Os anexos são adicionados automaticamente por meio do “Posicionamento automático de anexos” predefinido em Preferências. Os acessórios são colocados de acordo com as instruções do médico.

Para alterar o posicionamento dos anexos, clique em uma das três opções: “Posicionamento gengival”, “Posicionamento médio” ou “Posicionamento incisal”. Isso afetará apenas os anexos posicionados verticalmente.

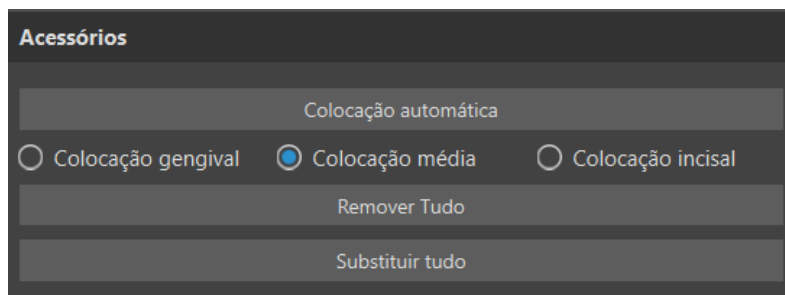


Os anexos podem ser adicionados manualmente após clicar com o botão direito do mouse no dente na visualização 3D e selecionar entre vários conjuntos, formas e tamanhos. A posição de fixação pode ser ajustada manualmente.

Se o usuário decidir ir para o passo anterior para alterar a movimentação dos dentes, os acessórios para o posicionamento atual podem ser mantidos. Isso também funciona para os suportes.

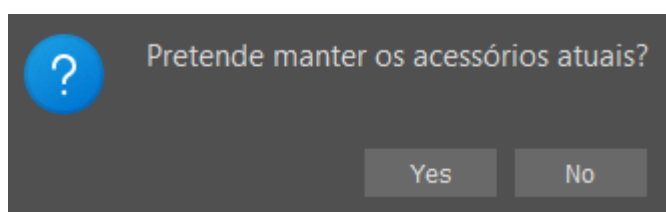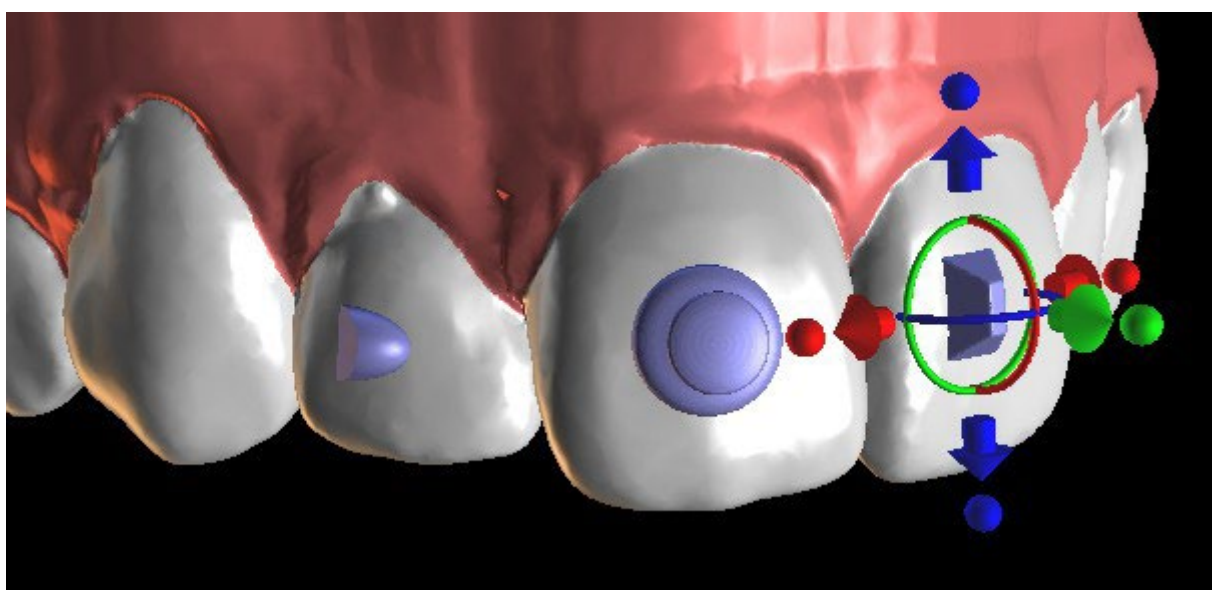

27.10.2 Alinhadores de Impressão de Desenho


Esta etapa destina-se a ser utilizada para o desenho e edição da curva para a fabricação do alinhador. A curva do alinhador será gerada automaticamente com base nas configurações dos parâmetros “Forma da Curva” e “Margem de Recorte” em Preferências. Ambos os parâmetros também podem ser ajustados e regenerados diretamente no painel de Ortodontia. Estas alterações são salvas no projeto. Se os parâmetros forem alterados neste processo, é necessário regenerar a curva, clicando no botão “Reinicializar Curva”. A geração dos alinhadores faz parte da transição para a etapa de exportação do modelo STL.

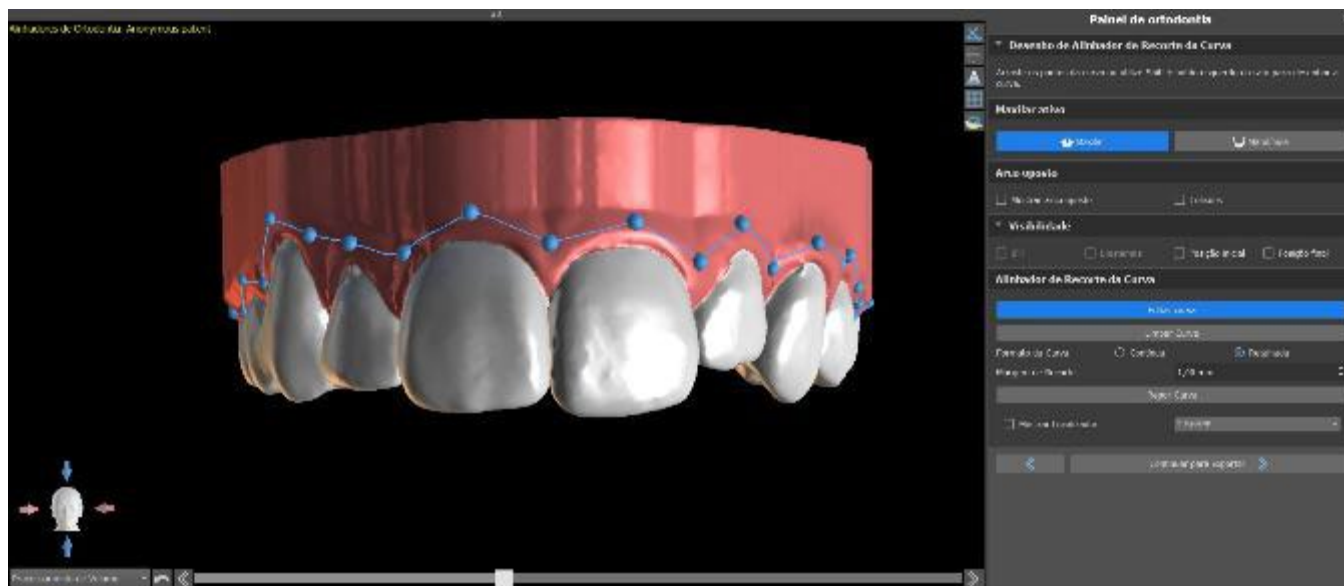


A produção de alinhadores pode ser encomendada na Blue Sky Bio. Você deve enviar os arquivos STL que contêm os modelos com o perfil 3D para identificar o número do paciente e do estágio para o Blue Sky Bio. O Blue Sky Bio fará os alinhadores e os enviará para você. Se em algum estágio o paciente não corresponder mais ao seu modelo para esse estágio (fazendo o alinhador não encaixar), edite os modelos e reordene os alinhadores. Instruções mais detalhadas de uso estão disponíveis nas Notas de Rodapé 31.1.

27.10.3 Curva de Corte dos Alinhadores do Design

A Curva de Recorte do Alinhador será (assim como a Curva do Alinhador) gerada automaticamente com base nas configurações dos parâmetros “Forma da Curva” e “Margem de Recorte” em Preferências. Ambos os parâmetros também podem ser ajustados e regenerados diretamente no painel de Ortodontia. Estas alterações são salvas no projeto. Se os parâmetros forem alterados neste processo, é necessário regenerar a curva, clicando no botão “Reinicializar a Curva de Recorte do Alinhador”. Para utilizar as informações da linha de recorte para o recorte automático dos alinhadores nas informações das máquinas fresadoras no futuro, é possível ativar “Mostrar localizador” e modificar a curva de recorte adequadamente. Será possível exportar a curva na próxima etapa.

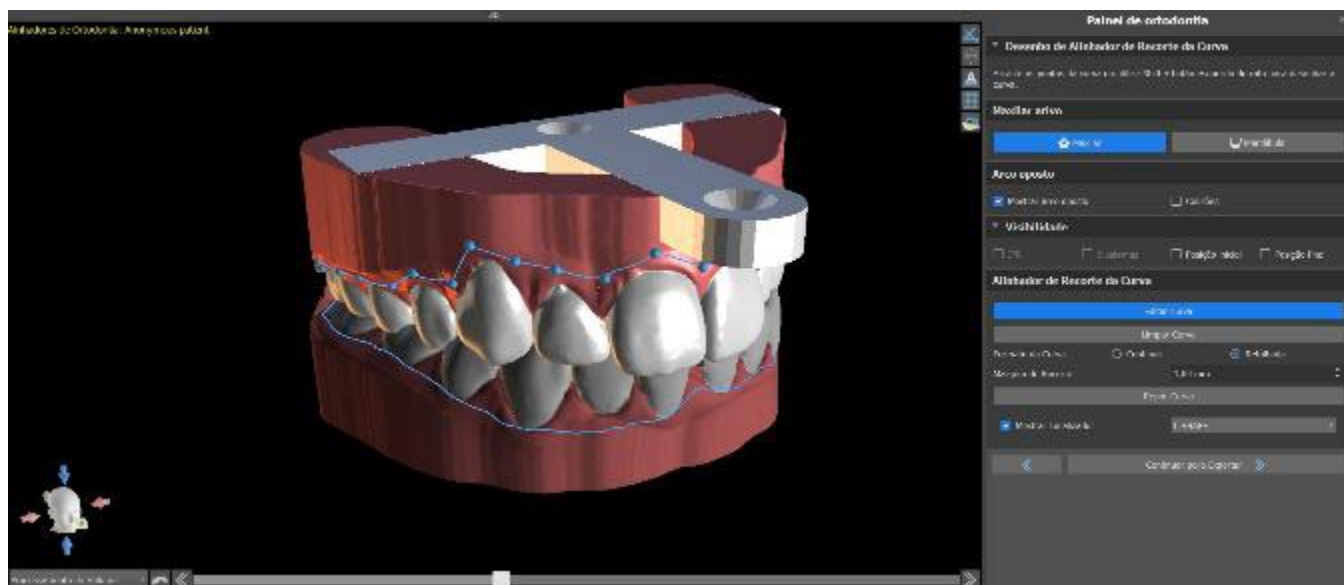


O tipo do modelo do localizador de alinhador pode ser definido em Preferências -> Ortodontia -> Seção dos alinhadores. O tipo de localizador também pode ser alterado na etapa da Exportação.

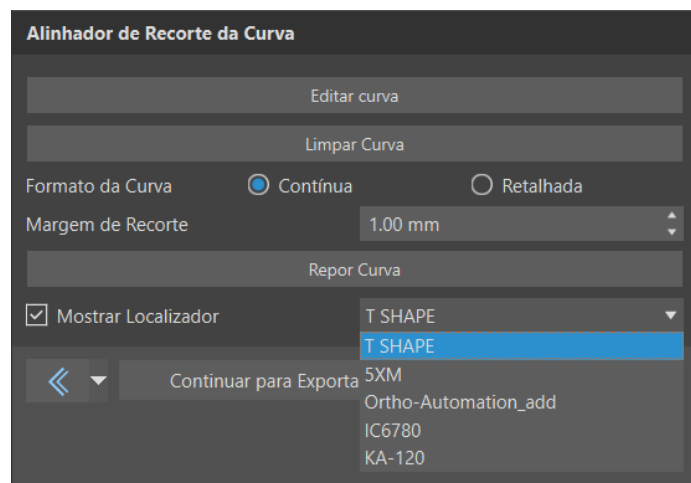

27.10.4 Enviar para fabricação de alinhadores

Ao selecionar "Enviar para fabricação de alinhadores" (1) e clicar em "Enviar para fabricação de alinhadores" (2), é possível solicitar alinhadores para um caso via LabPronto.

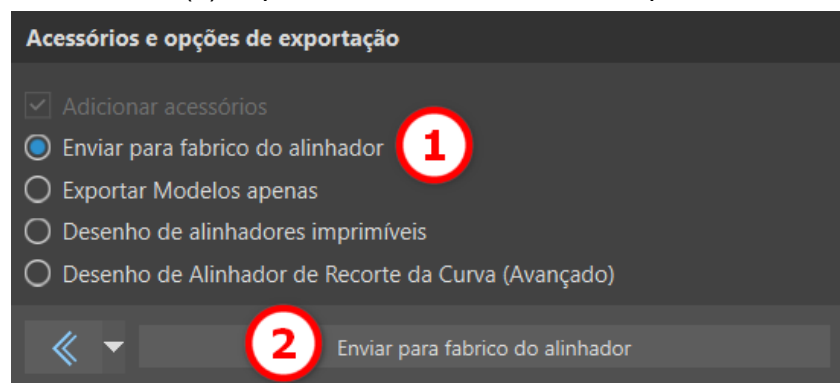

Na página LabPronto, selecione as informações do pedido e anexe os arquivos. Clique em "Solicitar agora" para solicitar seus alinhadores.

Predictable TAD Placement with TAD Surgical Guides! Now Available!



BlueSkyBio.com

Your Partner In Implant & Digital Dentistry

Discover Now!



1. Order Details

2. Attach Files

Aligners

Aligners

SELECT SERVICE

Clear Aligner Fabrication (\$30 + \$20/ Aligner)

More information on selected service

[Service Details](#)

ORDER INFORMATION

Number of Aligners

1

Patient Name or Identifier*

Select Existing Patient

OR

ADD NEW PATIENT

Export from BSB to STL *

Select Option

How Many Steps Should Be Included in Each Shipment (up to two years)? *

12

Expedited Turnaround (4 Business Day) ? *

Select Option

Additional information for Lab:

Include any relevant information or special considerations. Above, please select the number of aligners for the case. The user that planned this case should be able to provide this information, or it can be checked in the Blue Sky Plan Software.

Select Shipping Option

USPS (\$ 0.00)

**Total Order :
\$ 50.00**

Placing an order via LabPrints indicates that you have read and agree to the LabPrints Terms

Shipping Address

Payment Method

Primary contact

Continue to Attach Data Files



Predictable TAD Placement with TAD Surgical Guides! Now Available!

Discover Now!

BlueSkyBio.com Your Partner In Implant & Digital Dentistry

1. Order Details **2. Attach Files**

Attach File(s) File uploaded successfully: 100% Remove

Attach Upper / Lower Arch

Previous

Select Shipping Option
USPS (\$ 0.00)

Total Order : \$ 50.00

Coupon Code Apply

☐ **IMPORTANT:** Automatically submit order when file upload(s) complete.

ORDER NOW

Placing an order via LabPrints indicates that you have read and agree to the LabPrints Terms

Shipping Address

Payment Method

Primary contact

Observe que este serviço está disponível atualmente apenas nos Estados Unidos da América e você precisa preencher o endereço de entrega.

27.11 Bandeja de Ligação Indireta – Alinhar os Braquetes aos Dentes


O Blue Sky Plan também permite a colocação controlada de braquetes virtuais no software e a fabricação de uma guia de colagem indireta para permitir a colocação dos braquetes físicos.

Esse tipo de planejamento é utilizado para adicionar braquetes à posição inicial dos dentes. É por isso que não se inclui a etapa de Movimentação dos Dentes e, após o Recorte do Modelo, vai direto para Adicionar Braquetes.


27.11.1 Adicionar Braquetes

Os braquetes são adicionados diretamente nos dentes com base nas “Compensações de Colocação dos Braquetes” pré-definidas em Preferências. A posição dos braquetes já adicionados pode ser

modificada pelo dispositivo de manipulação 3D e a função “Ajustar ao Dente”, clicando com o botão direito do mouse.


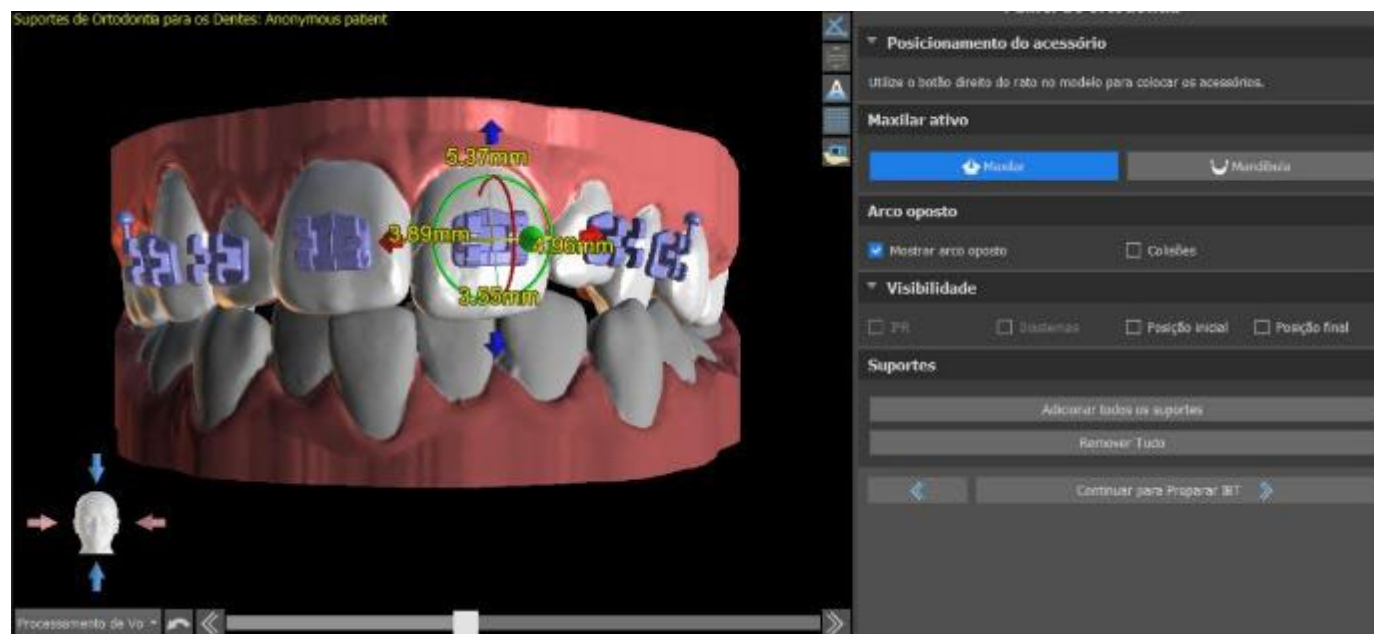


Braquetes de vários sistemas estão disponíveis.

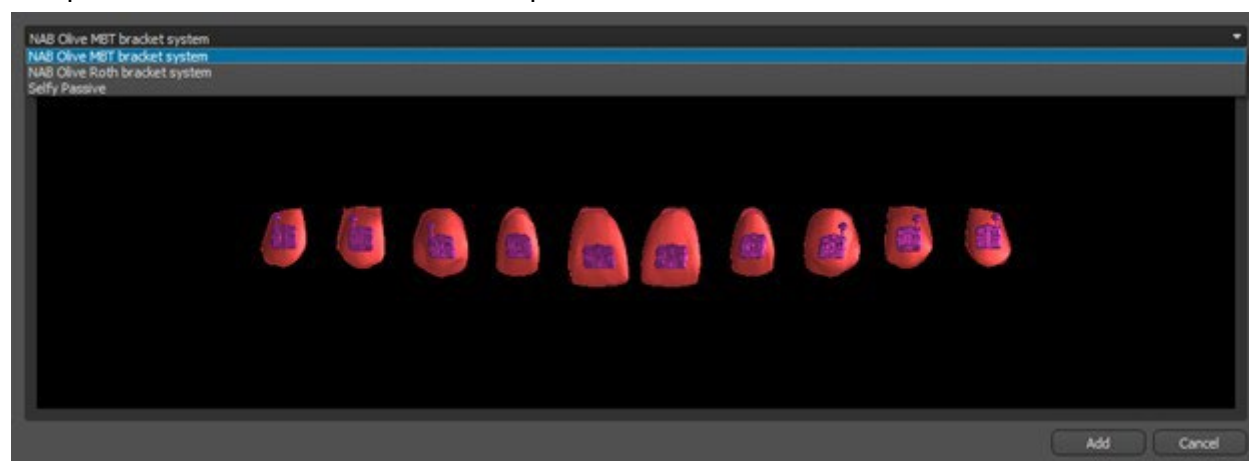

27.11.2 Preparar IBT


Depois que os braquetes forem colocados, a próxima etapa incluirá o desenho e a edição da curva para a fabricação da guia de colagem indireta. Seu uso permite que os braquetes físicos sejam colocados com precisão na vida real.

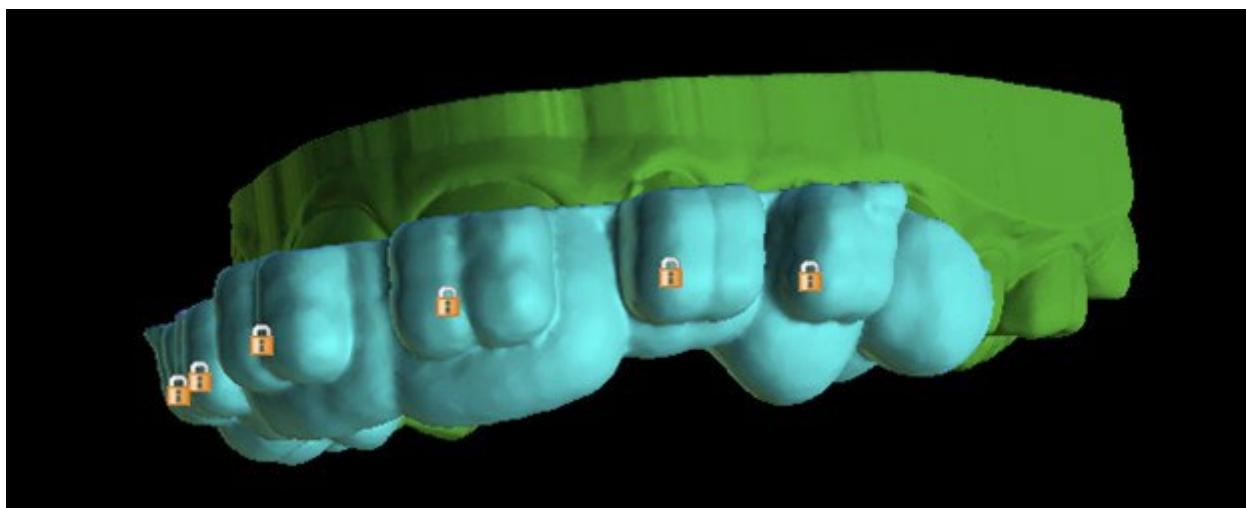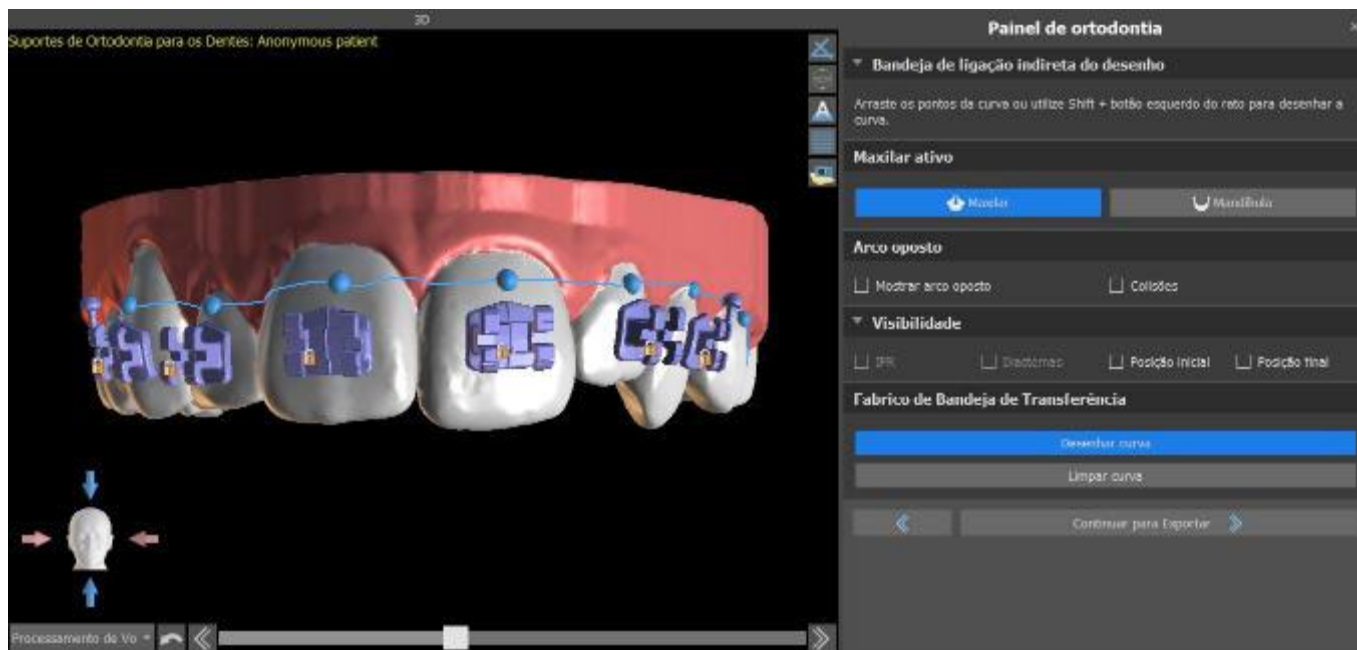

27.12 Bandeja de Ligação Indireta - Alinhar os Braquetes ao Arame

27.12.1 Adicionar Braquetes

O tipo de planejamento “Alinhar Braquetes ao Arame” é utilizado para adicionar braquetes à posição final dos dentes. Blue Sky Plan coloca automaticamente os braquetes ao longo do arame. Os braquetes respeitam totalmente o arame retangular e não ajustam sua posição de acordo com a superfície do dente. Assim como no método anterior, é possível escolher entre vários sistemas de braquetes, e o braquete adicionado pode ser modificado usando o dispositivo de manipulação 3D e a função “Ajustar ao Arame”, clicando com o botão direito do mouse.

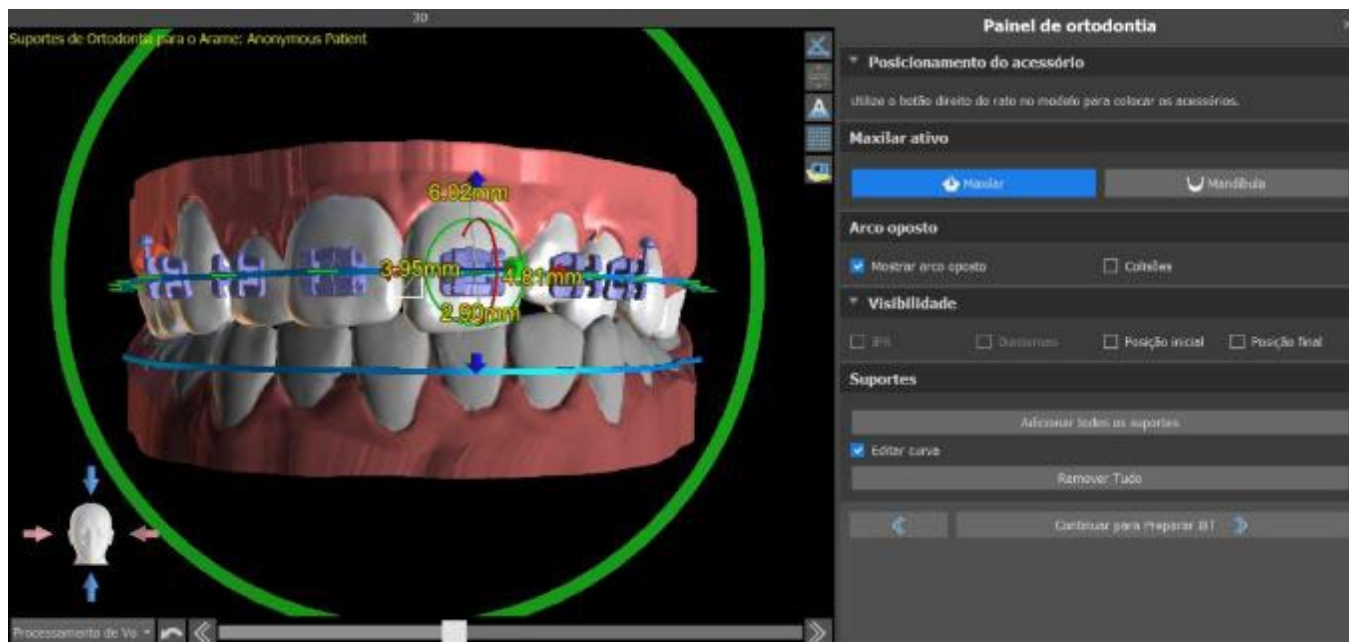


27.12.2 Preparar IBT



Esta etapa inclui o desenho e edição da curva para a fabricação de bandejas de colagem indireta, de forma semelhante ao tipo de planejamento anterior. A curva é desenhada sobre a posição final dos dentes. A guia de colagem indireta é gerada apenas para o modelo de primeira posição. A configuração padrão para fabricação de guias de colagem indireta pode ser alterada em Preferências.

27.13 Geração e Exportação dos Modelos STL


A etapa final, Exportar, é novamente comum para todos os tipos de planejamento. A única diferença está no que pode ser exportado nesta etapa final (modelos OBJ ou STL ou os parâmetros da curva).

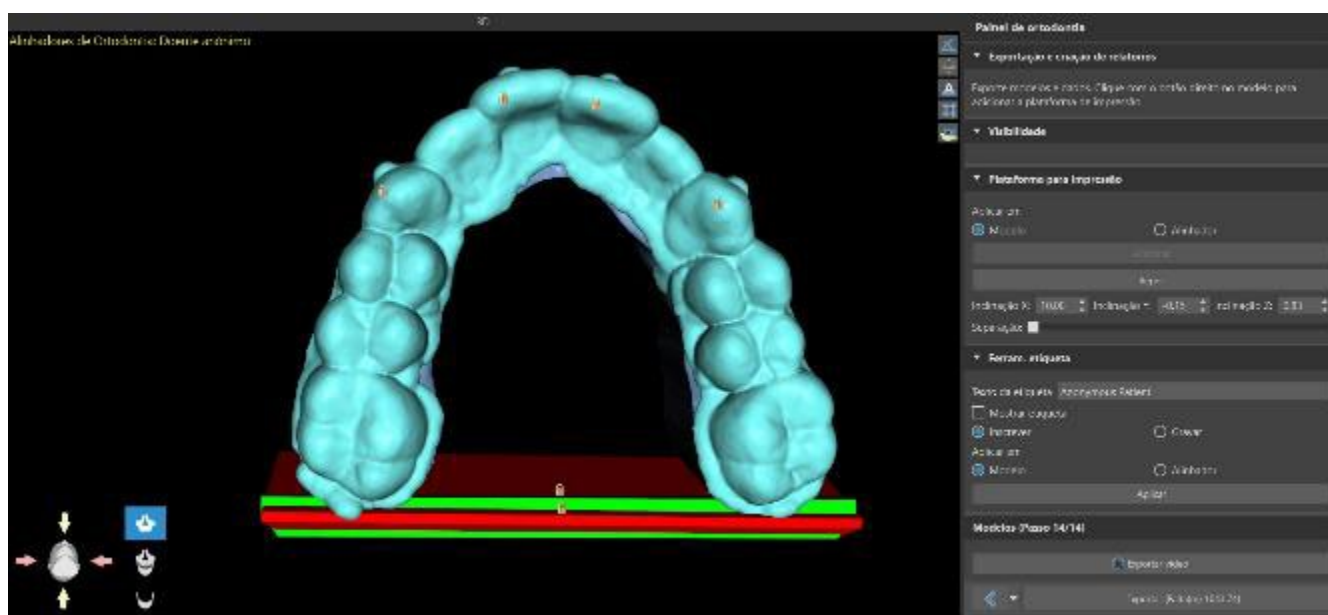


Antes da exportação propriamente dita, é necessário verificar todas as posições intermediárias dos modelos gerados. Após a verificação, é possível exportar modelos em diferentes coordenadas; modelos regulares e separados podem ser enviados separadamente. As coordenadas de exportação de um modelo podem ser selecionadas no Painel de Ortodontia.

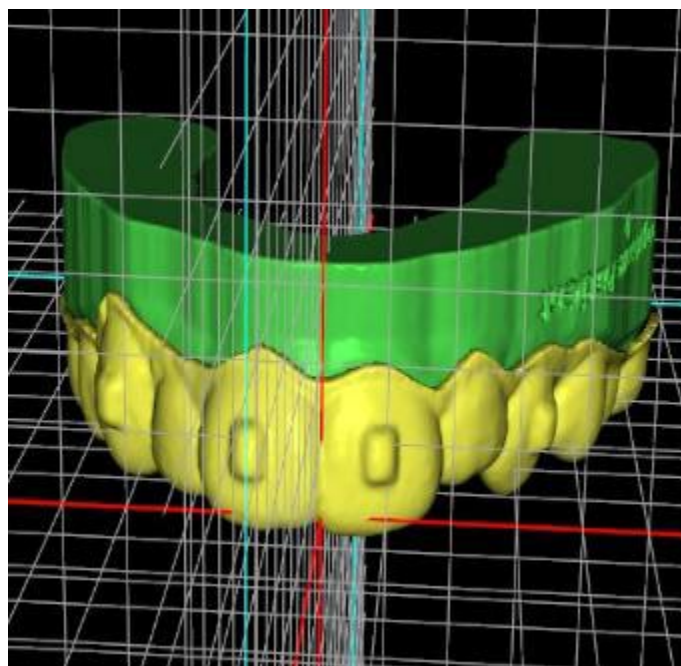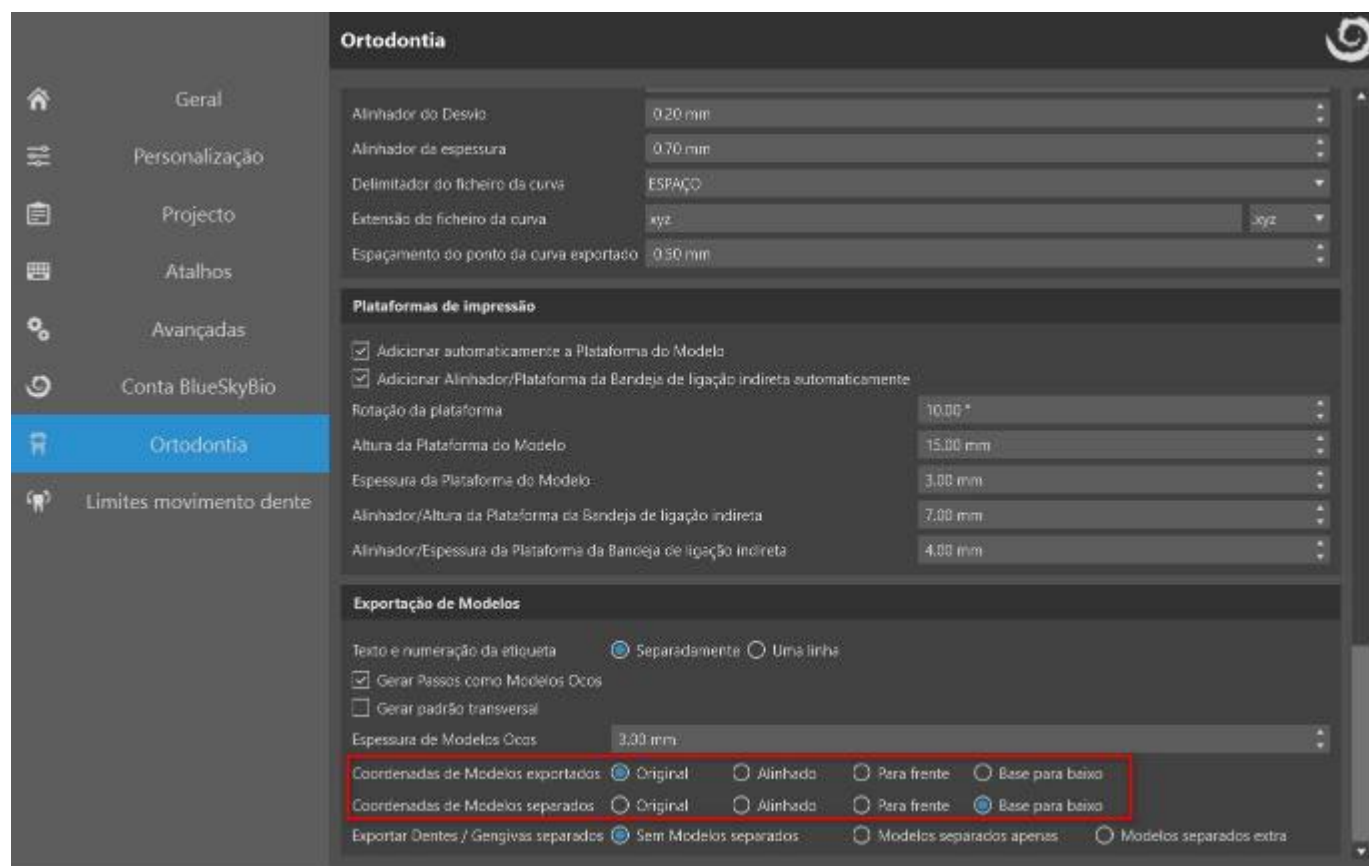


coordenadas: para frente

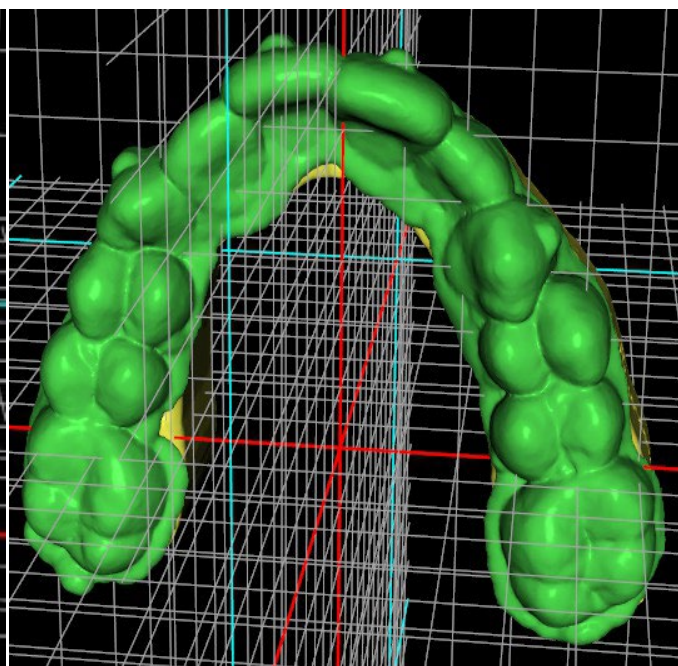

coordenadas: original

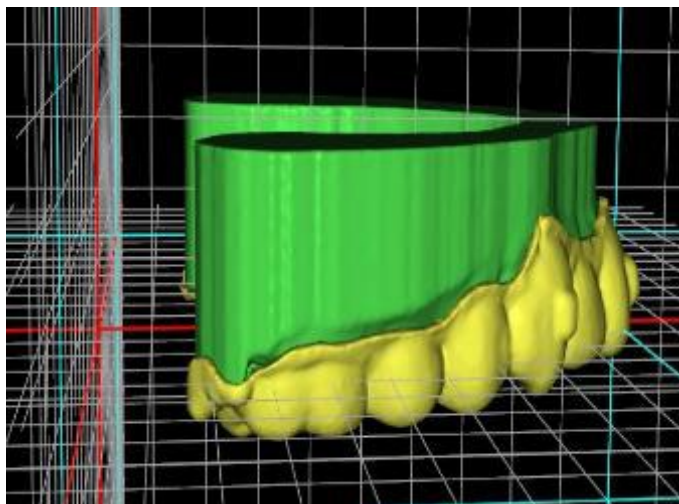


coordenadas: alinhado

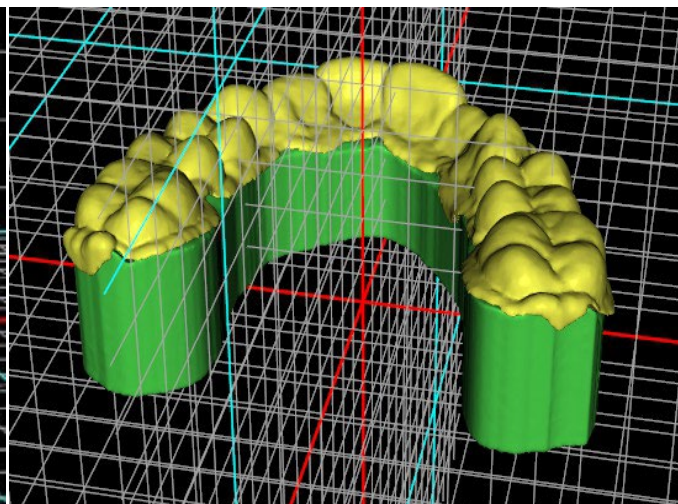


coordenadas: base para baixo

As plataformas são adicionadas automaticamente aos modelos gerados, permitindo a impressão 3D horizontal de um número maior de modelos. São adicionados separadamente para modelos e para alinhadores e, para trabalhos adicionais com eles, é necessário que a opção correta esteja marcada no Painel de Ortodontia. As configurações padrão para plataformas (tamanho e rotação) encontram-se em Preferências, separador Ortodontia. Estes parâmetros podem ser ajustados manualmente para um caso específico. Usando o cursor “Separar”, é possível criar duas partes menores no final da mandíbula, que são suficientes para impressão. Você pode adicionar a plataforma a um modelo em apenas uma etapa - será gerado nas etapas restantes.

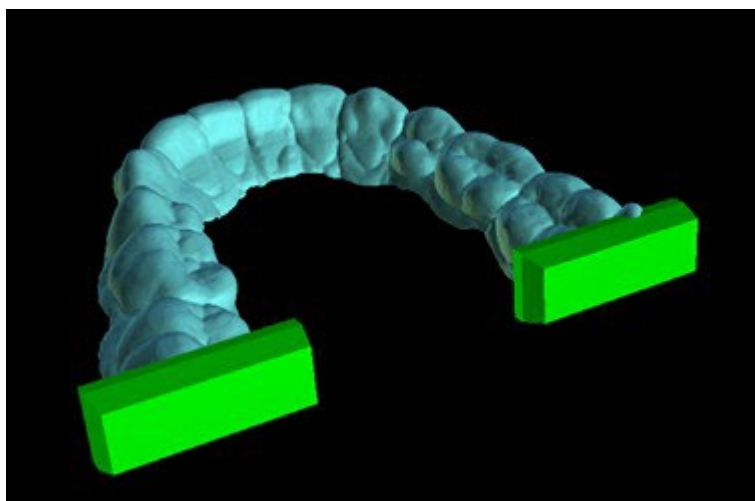

O painel Ortodontia também permite complementar os modelos intermediários gerados e os alinhadores ou IBTs com texto com um relevo ou gravação de perfil 3D (normalmente o nome do paciente e o número da etapa). Isso é feito com a "Ferramenta de texto", que funciona como aquela usada para gravar o texto nas guias cirúrgicas. A única diferença é que o texto precisa ser anexado apenas ao primeiro modelo e é propagado automaticamente para os outros modelos intermediários. É necessário escolher o método de gravação e de relevo em “Ferramenta da etiqueta” e se for aplicado nos alinhadores ou modelos gerados (IBT). É possível escolher se o texto da etiqueta e o número do modelo será gerado na mesma fila.

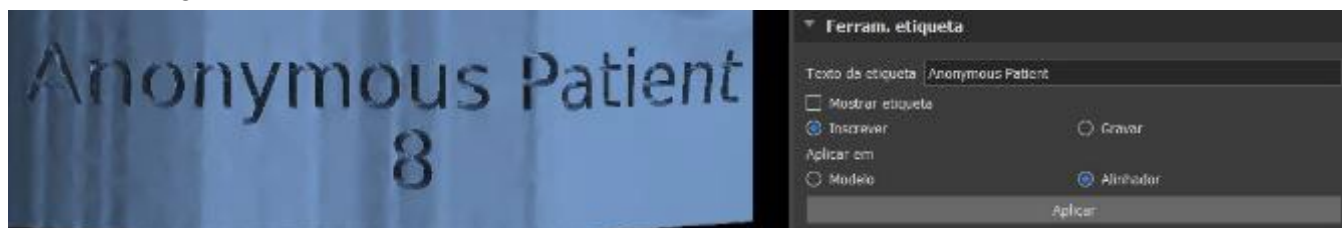


Caso o modelo STL gerado precise ser otimizado para impressão, oco com (ou sem) padrão cruzado, o usuário deve verificar as opções “Gerar Passos como Modelos Ocos” e “Gerar Padrão Cruzado” em Preferências, na aba “Ortodontia”, antes de exportar.



Além dos modelos, os parâmetros da Curva de Recorte do Alinhador também podem ser exportados para o tipo de planejamento dos Alinhadores. As curvas geradas para os modelos intermediários podem ser modificadas individualmente com o localizador visualizado para serem preparadas de forma otimizada para uso nas fresadoras. Os parâmetros “Delimitador de Arquivo da Curva” e “Extensão de Arquivo da Curva” podem ser modificados em Preferências.

Nesta etapa, mais uma vez, será possível exportar um vídeo. Se você tiver adicionado anexos nas etapas anteriores, agora será possível exportar vídeo com os anexos disponíveis.

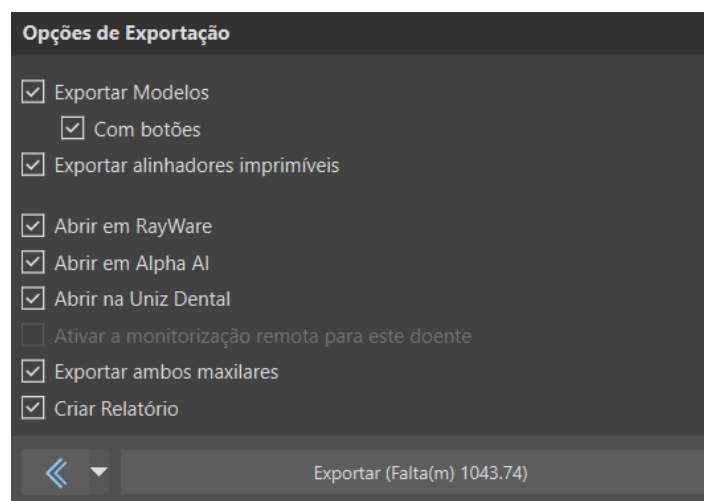

Os modelos gerados podem ser exportados do software na forma de modelos STL pressionando o botão "Exportar". Ao trabalhar com dados de TC, também é possível exportar os dentes segmentados, incluindo suas raízes. Ao selecionar “Abrir no Alpha AI”, “Abrir no RayWare”, ou “Abrir no Uniz Dental”, os modelos podem ser exportados para o respectivo software de impressão 3D externo.

Nota: Para exportar os arquivos STL, é necessário ter uma licença de exportação STL válida! Para visualizar a opção "Abrir no Alpha AI", "Abrir no RayWare" ou "Abrir no Uniz Dental", é necessário ter os softwares instalados em seu computador.


Existe uma opção no passo de exportação para exportar os arquivos para o BioBigBox, onde é atribuído como novo Paciente e Tratamento. Essa informação será enviada ao serviço BlueSkyMonitoring quando "Ativar monitoramento remoto para este paciente" estiver selecionado.

O LabPronto (representado pelo botão "Solicitar alinhadores agora") é uma solução que permite enviar diretamente o pedido do cliente ao fornecedor mais apto a concluí-lo de forma rápida e adequada. O LabPronto analisa o pedido do usuário, a disponibilidade do laboratório, e o preço que o usuário irá pagar. Feito isso, o Lab Pronto irá priorizar o pedido do usuário ao laboratório específico que irá criá-lo. O Lab Pronto disponibiliza diversas opções de pedido, permitindo que o usuário solicite exatamente o que precisa, nada além disso. É possível terceirizar todo o processo, a fabricação, ou o planejamento.

"Exportar ambos maxilares" exporta o maxilar e a mandíbula para a pasta selecionada.

Para ativação imediata e automática da licença STL, adquira exportações diretamente no Blue Sky Plan Software (Arquivo> Comprar exportações STL). Você também pode adquirir exportações de caixas STL em <https://blueskybio.com/store/stl-case-export>.

Por fim, também é possível gerar o chamado Relatório de Movimentação Dentária com os ângulos e deslocamentos dos dentes movidos da posição original para a posição final. Além disso, o relatório mostra os movimentos de cada posição intermediária para a próxima etapa.

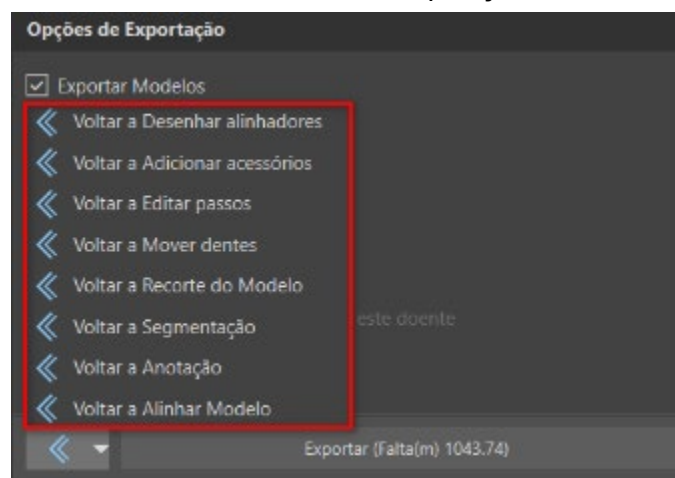


Ao clicar no menu suspenso ao lado do botão "Voltar", é possível "pular rapidamente" várias etapas para trás.

27.14 Mostrar dimensões


"Mostrar dimensões" no módulo ortodôntico é uma ferramenta de medição. Mostra caixas delimitadoras que podem ser usadas para analisar objetos. Esta ferramenta pode ser usada em todas as etapas da ortodontia.

Para usar esta função, clique com o botão direito do mouse em um objeto na cena 3D e selecione "Mostrar dimensões" no menu de contexto. As dimensões são ocultadas clicando em "Ocultar dimensões" no mesmo menu de contexto.


Em Ferramentas > Mostrar dimensões, é possível ativar a multisseleção sem precisar clicar em "Mostrar dimensões". A multisseleção é desativada ao clicar fora do objeto.

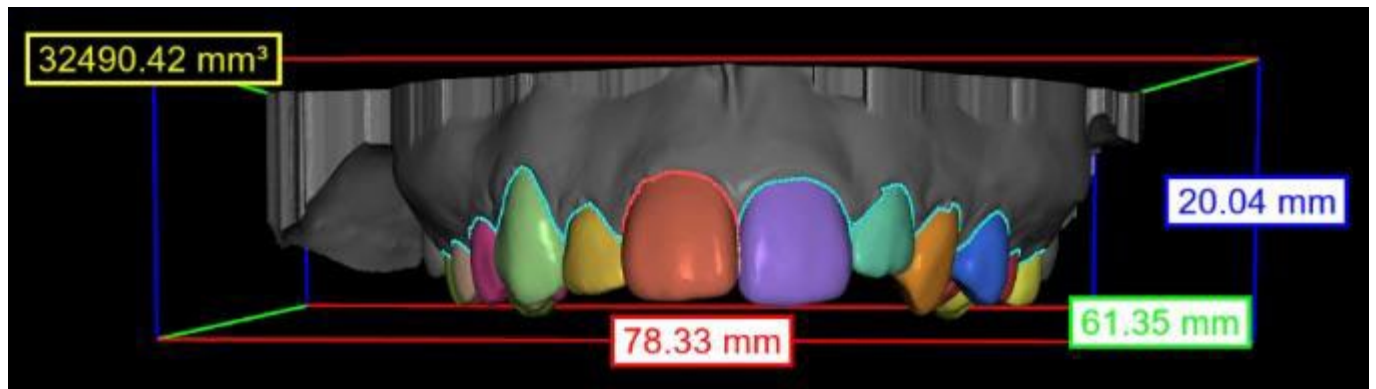

Dimensões mostradas na etapa "Segmentação"

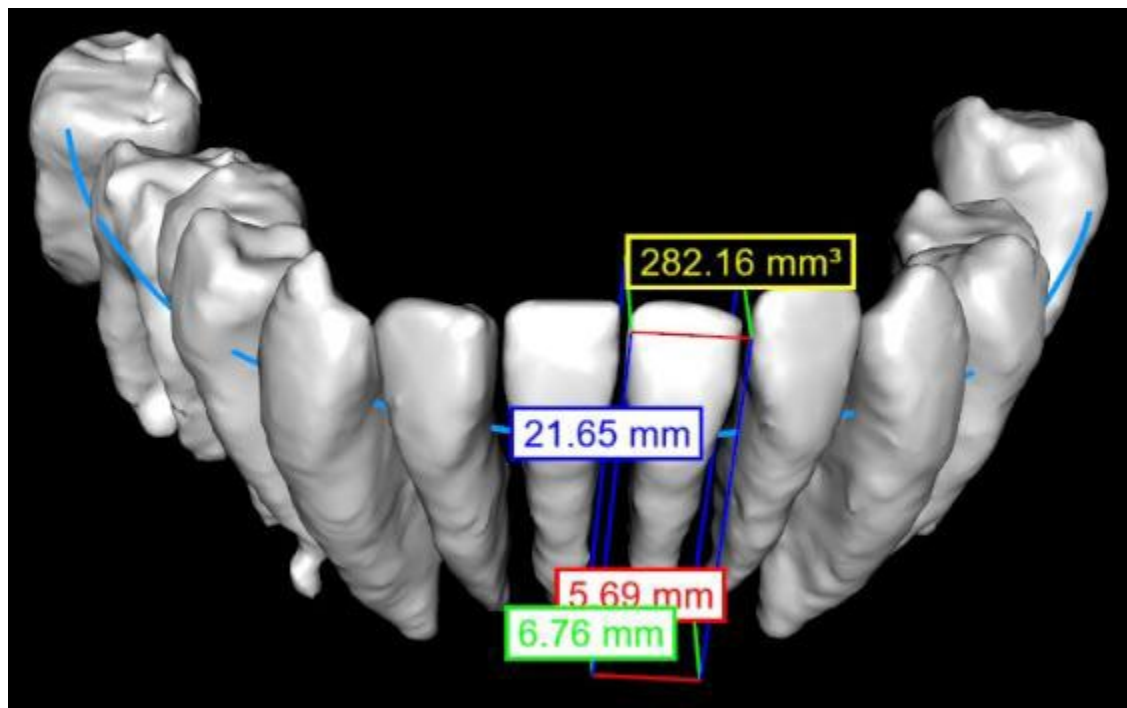

Dimensões mostradas na TC do dente na etapa "Alinhamento do dente"

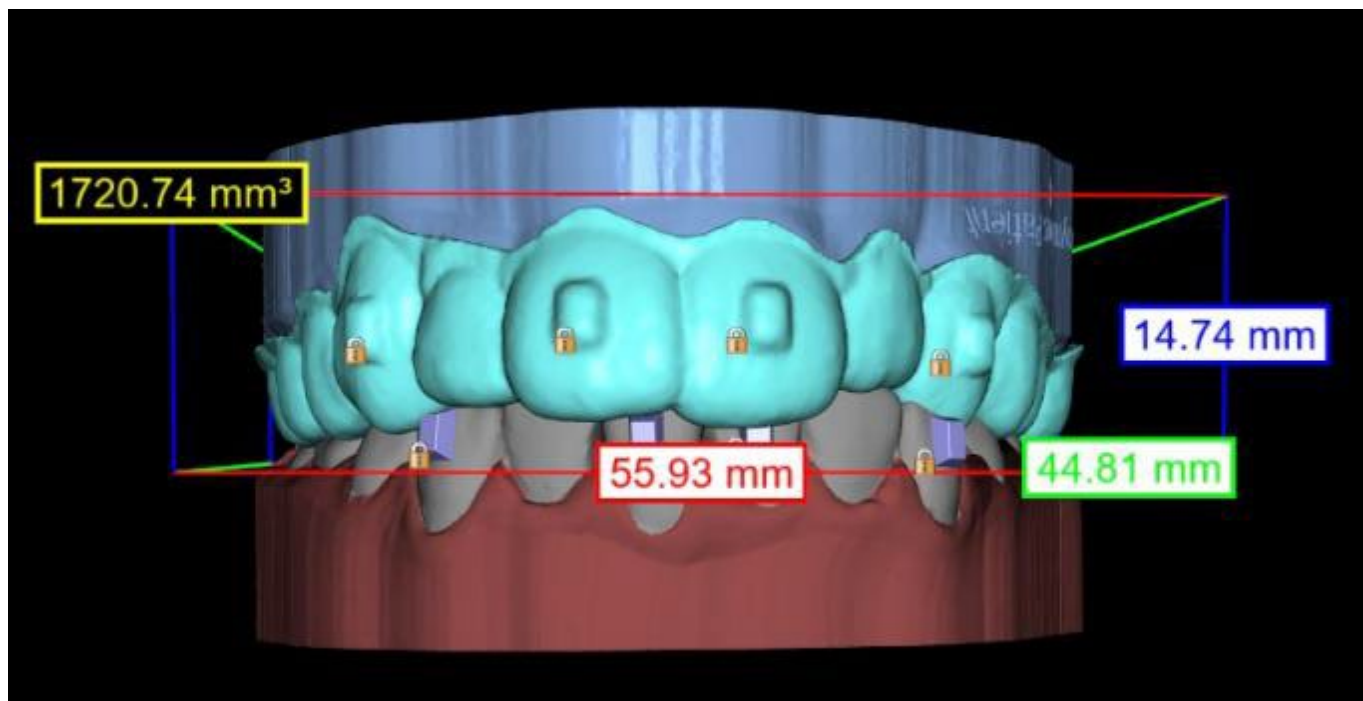

Dimensões mostradas no alinhador na etapa "Exportação"

27.15 Instruções Rápidas para o uso de sistema computadorizado de braquetes ortodônticos

Instruções de uso mais detalhadas estão disponíveis nas notas de rodapé 31.2

O usuário durante a etapa de exportação deve marcar as caixas de seleção para "Exportar modelos" e "Com braquetes" e gerar um modelo, incluindo os indicadores de localização do braquete, na forma de um modelo STL.

27.15.1 Imprimindo os modelos

O usuário deve usar uma impressora 3D relevante que imprima a uma resolução de pelo menos 150 microns no eixo x / y e 100 microns no eixo z, para imprimir o modelo exportado em material cinza ou dental model. O software de controle da impressora, a impressora e o material do modelo devem ser configurados/liberados para uso conjunto.

Selecione o arquivo de modelo STL exportado no software de controle da impressora para impressão.

27.15.2 Adicionando Braquetes

Use cimento para fixar firmemente os braquetes desejados aos marcadores de localização dos braquetes no modelo impresso em 3D.

27.15.3 Criando uma guia de colagem indireta por termoformagem

O usuário cria guia de colagem indireta por termoformagem sob pressão sobre o modelo impresso em 3D com braquetes presos ao modelo com uma placa de acetato comercialmente disponível, como Essix Ace. O usuário deve cortar a placa no meio da altura dos braquetes para facilitar sua liberação.

Os braquetes devem então ser colocados nos nichos criados no guia. Pule para a seção 1.9 usando a guia de colagem indireta para colocar os braquetes.

27.15.4 Criando uma guia de colagem indireta por impressão 3D (este método deve ser utilizado somente em estabelecimentos autorizados pela FDA/ANVISA)

O usuário deve clicar em "Criar a guia de colagem indireta".

O usuário deve verificar a imagem da tela de impressão da guia quanto à precisão e, quando estiver correto, exporte/imprima a guia de colagem indireta escolhendo Arquivo > Exportar dados e selecionando guia de colagem indireta a ser exportada como um STL.

O usuário deve usar uma impressora 3D relevante que imprima a uma resolução de pelo menos 150 microns no eixo x / y e 100 microns no eixo z, para imprimir o modelo exportado em material cinza ou dental model. O software de controle da impressora, a impressora e o material do modelo devem ser configurados/liberados para uso conjunto. O material deve ser uma resina fotopolimerizável que não seja reciclada ou reciclável.

Selecione o arquivo STL da guia de colagem indireta no software de controle da impressora e selecione o material de resina da guia de impressão comercializado legalmente e chamado NextDent Ortho IBT.

Os braquetes devem então ser colocados nos nichos criados no guia de colagem indireta.

27.15.5 Usando as guias de colagem indireta para colagem dos braquetes

O usuário deve colocar os braquetes nos dentes colocando cimento convencional nas bases dos braquetes, seguindo as instruções do fabricante e assentar guia com os braquetes na boca do paciente. O excesso de cimento deve ser removido e uma fotopolimerização deve ser realizada através da Guia de Colagem Indireta.

A guia de transporte exterior deve ser removida e a guia de revestimento interior deve ser destacada. O excesso de cimento curado deve ser removido.

27.15.6 Utilização do arquivo STL de verificação de calibração do Blue Sky Plan

A calibração da impressora deve ser feita de acordo com as instruções do fabricante da impressora e de acordo com as normas da FDA/ANVISA. A frequência da calibração deve ser determinada pelas instruções do fabricante da impressora e pelo sistema de qualidade do estabelecimento. O Blue Sky Bio fornece um arquivo de verificação de calibração para confirmar a calibração adequada. A verificação da calibração deve ser feita sempre que a impressora estiver calibrada e sempre que o material de impressão for trocado.

Faça o download do arquivo de verificação de calibração STL pelo site da Blue Sky Bio


- Importe o arquivo de verificação de calibração STL no software de controle da impressora
- Imprima o arquivo STL
- Meça as 3 dimensões de cada cubo e a distância entre os cubos adjacentes com um compasso.

O tamanho de cada cubo é impresso no cubo.

A distância entre os cubos é de 3mm.

As medições dos cubos e espaços abertos devem estar dentro da precisão certificada da impressora.

Se as medições estiverem fora desse intervalo, recalibre a impressora de acordo com as instruções do respectivo fabricante.

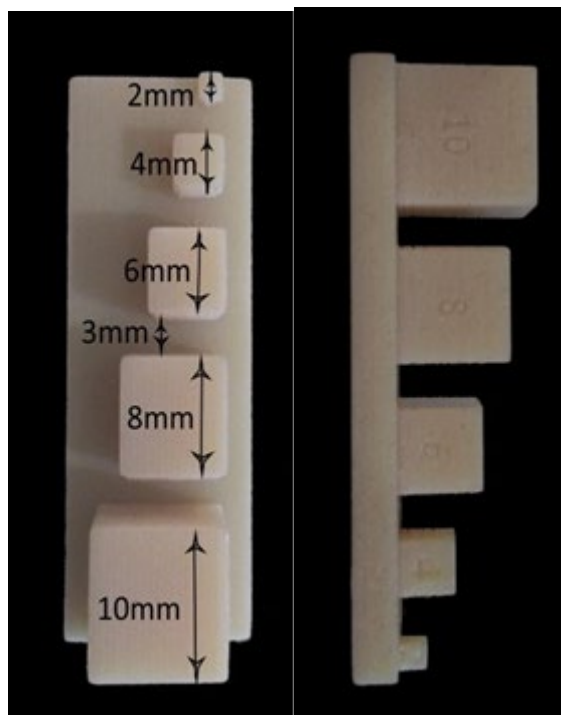

Precauções: Não toque nas superfícies adesivas com os dedos (sem luvas), pois os óleos da pele podem diminuir a adesão. Não permita que o adesivo fique embaixo do braquete no slot da guia. A posição de cada braquete deve ser verificada pelo dentista e, se necessário, braquetes mal posicionados devem ser removidos e reposicionados. Braquetes de cerâmica podem desgastar o arco oposto. Aguarde para aplicar os braquetes de cerâmica até a mordida abrir. Se necessário, use braquetes de metal antes da colocação dos braquetes de cerâmica. Forneça ao paciente instruções sobre como conduzir uma higiene bucal completa, pois tártaro ou resíduos alimentares podem prejudicar a função do braquete. Não aplique força excessiva ao abrir o braquete, pois ele pode dobrar ou se soltar do dente. Para evitar lascas ao remover os braquetes, use o instrumento apropriado. Se o paciente apresentar uma reação alérgica, remova imediatamente o braquete e aconselhe o paciente a procurar atendimento médico.

28 Módulo de Prótese Total


O Blue Sky Plan permite ao usuário modelar e exportar próteses. As funções estão disponíveis no painel “Dentadura” quando o usuário alterna para o módulo “Dentadura”.

28.1 Adicionando o modelo STL do paciente

O novo planejamento começa com o carregamento do modelo de escaneamento da mandíbula STL usando a seleção principal do módulo “Dentaduras> Importar modelos”. Para começar a planejar a prótese, o usuário precisa mudar para o módulo “Dentadura” em “Modelo Mestre”. Para mais informações, consulte o capítulo 3 “Blue Sky Launcher”.

28.2 Adicionando dentes virtuais

Dentes virtuais podem ser adicionados clicando no ícone  na barra de ferramentas. Uma caixa de diálogo para selecionar as coroas é aberta. Clicar em um dente o seleciona e uma descrição em texto da coroa aparece abaixo da visualização. Vários dentes podem ser selecionados pressionando a tecla Shift ou Ctrl. Outra possibilidade é clicar em Selecionar todos os dentes maxilares / Selecionar todos os dentes mandibulares ou selecionar todos os dentes. Também é possível selecionar entre três tamanhos. Os dentes são adicionados como corrente de dentes. Confirmamos a seleção clicando no botão “OK”; o botão “Cancelar” fecha a caixa de diálogo sem fazer uma seleção.

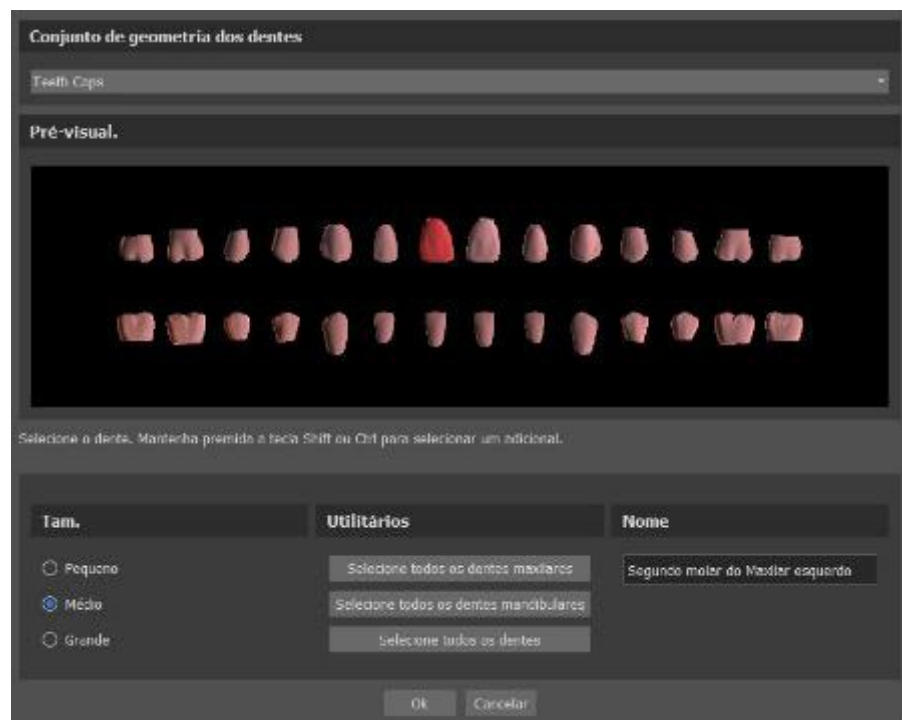


Dentes virtuais são conjuntos de dentes regulares, disponíveis no Guia Cirúrgico, Dentadura, Coroa, e Ponte, eles são modificáveis e exportáveis.

O Painel Dentário é usado para modelagem de próteses. Depois de clicar na guia “Painel Dentário”, o menu abaixo aparecerá com os botões para trabalhar com a cadeia de dentes.



28.3 Marcar Dente Visível para a cadeia de dentes


Clicar em "Marcar dentes visíveis para a cadeia de dentes" e usar o controle permite a manipulação da cadeia de dentes. Os dentes também podem ser movidos individualmente com as setas para lados diferentes. A rotação é feita usando os círculos ao redor da cadeia de dentes. Cada eixo é representado por uma cor.

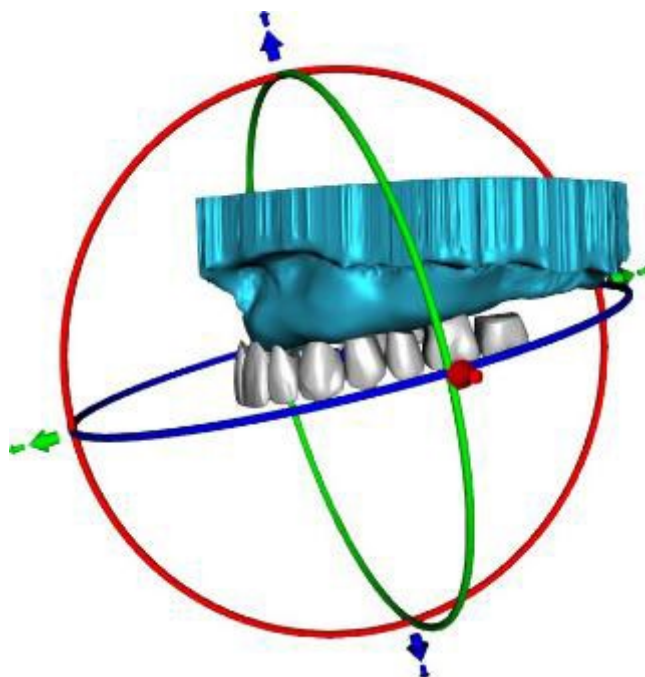

28.4 Limpando a Cadeia de dentes

Limpa a cadeia de dentes selecionada.

28.5 Mostrar/ ocultar cadeia de dentes

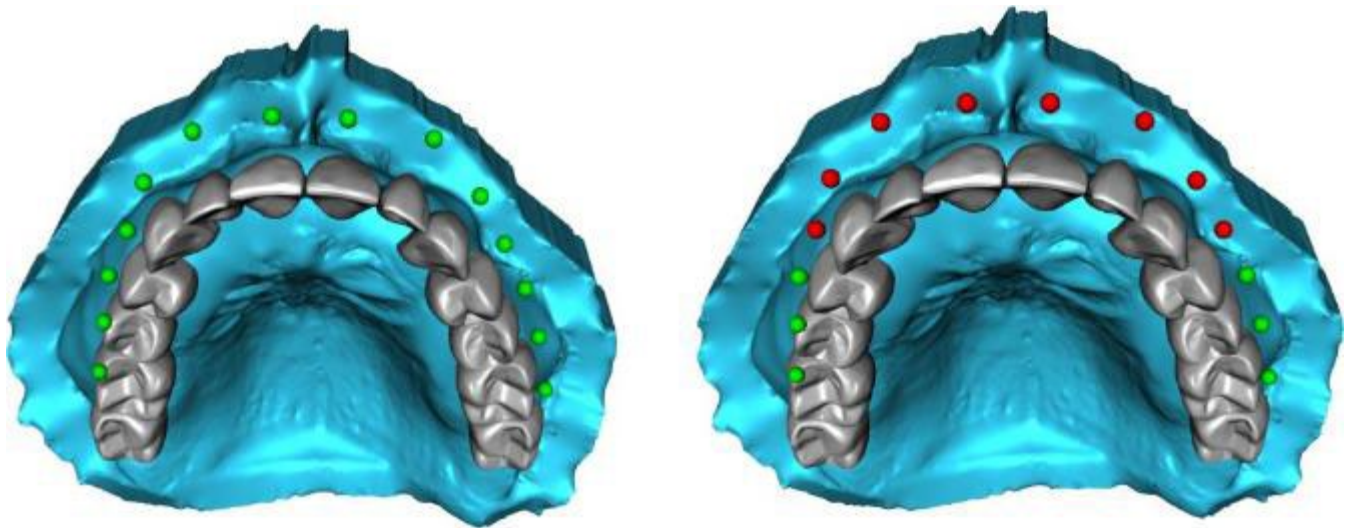


O botão "Mostrar / ocultar cadeia de dentes" é usado para mostrar e ocultar os indicadores de ponto verde na cadeia de dentes. Há um indicador por dente.

28.6 Mover a cadeia de dentes completa


"Mover Cadeia de Dentes Inteira" permite ao usuário ocultar cadeias de dentes na maxila ou na mandíbula, selecionando a opção apropriada.

A escala é usada para aumentar ou diminuir os dentes.

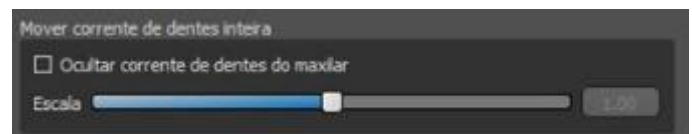


28.7 Manipulação de modelos

O modelo pode ser desbloqueado clicando na caixa de seleção e o centro de rotação pode ser alterado.

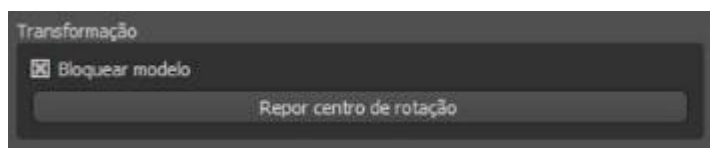


28.8 Criando a Prótese Total

Uma prótese total pode ser criada no menu no painel direito. Isso requer a seleção de um arquivo, a orientação correta da mandíbula e a confirmação clicando em "Criar prótese".

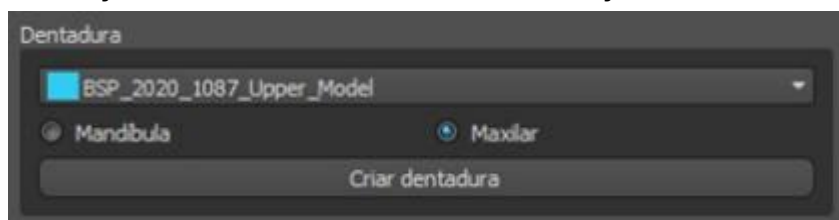

28.9 Etapa 1 – cavidades e direção de inserção

A etapa 1 é usada para definir os parâmetros iniciais da prótese.

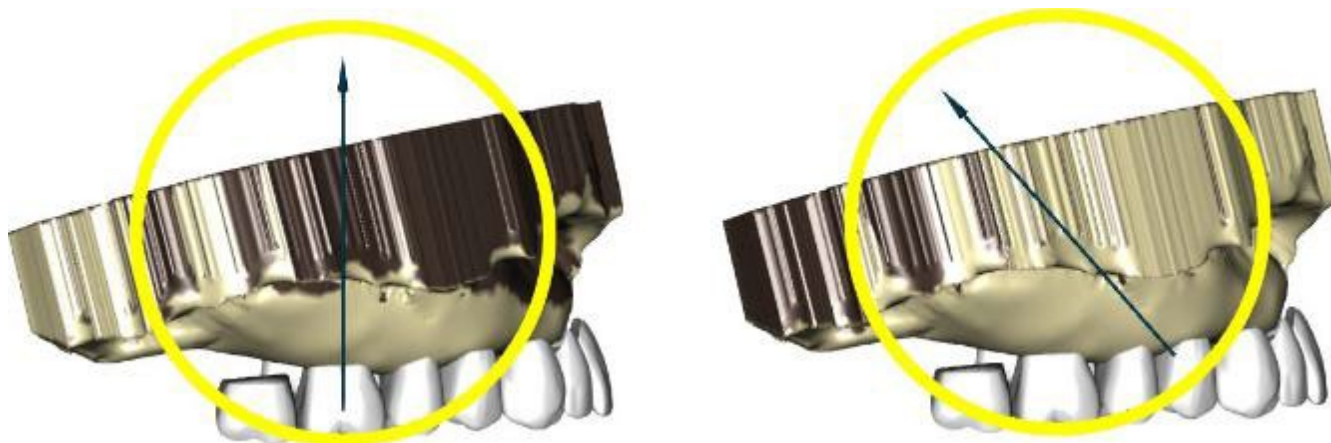

Os controles deslizantes podem ser usados para definir os valores para remoção de deslocamento e retenção.


A direção de inserção deve ser ajustada usando o anel de rotação para minimizar as retenções.

"Definir direção de inserção da vista" é usado para definir a direção de inserção de acordo com a configuração atual do ângulo de visão.

"Redefinir direção da inserção" restaurará o status original da seta e do modelo.




"Definir selado palatal posterior" permite a modelagem dessa estrutura. O selado palatal é criado clicando com o botão esquerdo do mouse nos dois pontos necessários com a tecla Shift pressionada. Os ajustes podem ser feitos desenhando com o mouse.

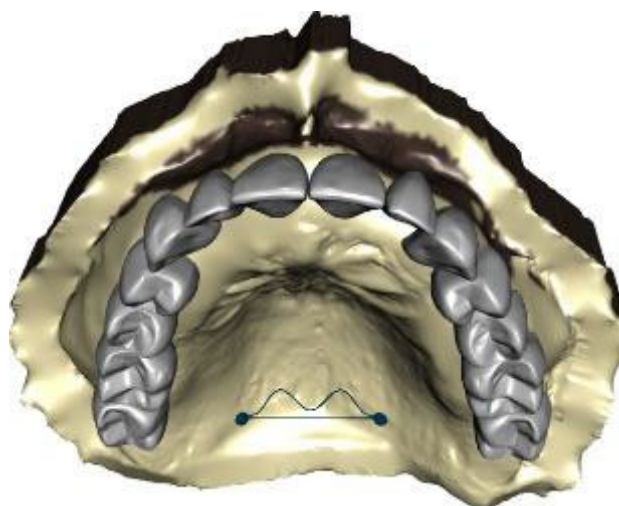

Os botões "Voltar" e "Seguinte" são usados para recuar ou avançar uma etapa.

28.10 Etapa 2 – seleção da base da prótese total

A etapa 2 define um contorno ao redor da cadeia de dentes para definir as bordas da prótese. Se um contorno não estiver definido, o usuário não poderá avançar para outra etapa.

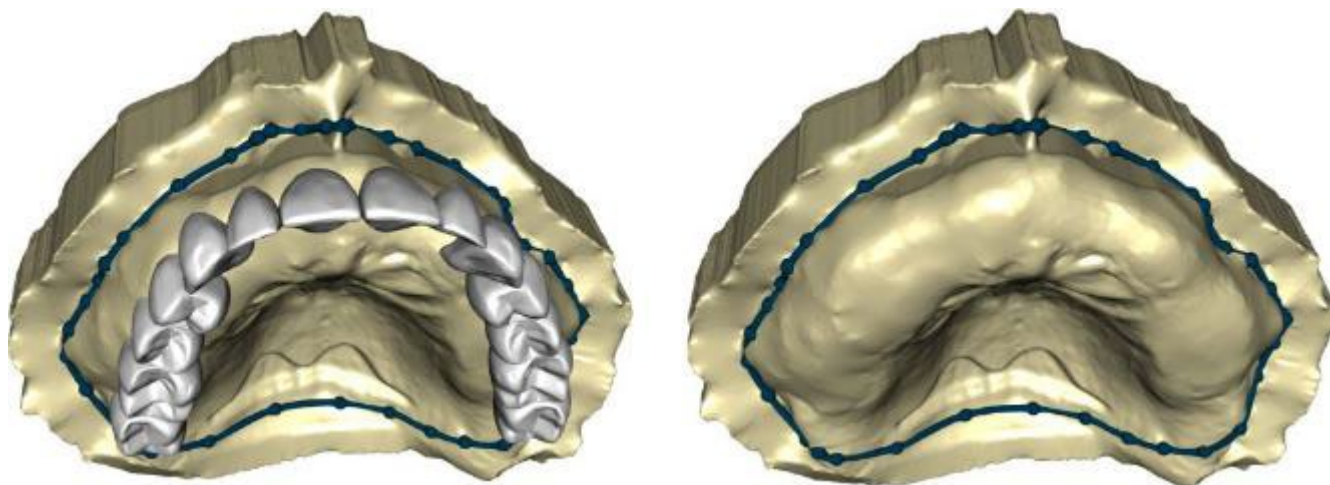

O deslocamento da gengiva e a espessura da prótese podem ser definidos pelos controles deslizantes.


A extensão da gengiva permite ao usuário estender a gengiva com o controle deslizante. A espessura e a suavidade da gengiva podem ser definidas com os controles deslizantes.

Pressionar a tecla Shift e clicar duas vezes no modelo ao redor dos dentes adicionará novos pontos e criará um contorno azul ao redor da área que representa a base da prótese:

O contorno pode ser excluído selecionando "Limpar contorno".

28.11 Etapa 3 – contorno gengival

A etapa 3 é usada para ajustar a gengiva criada.

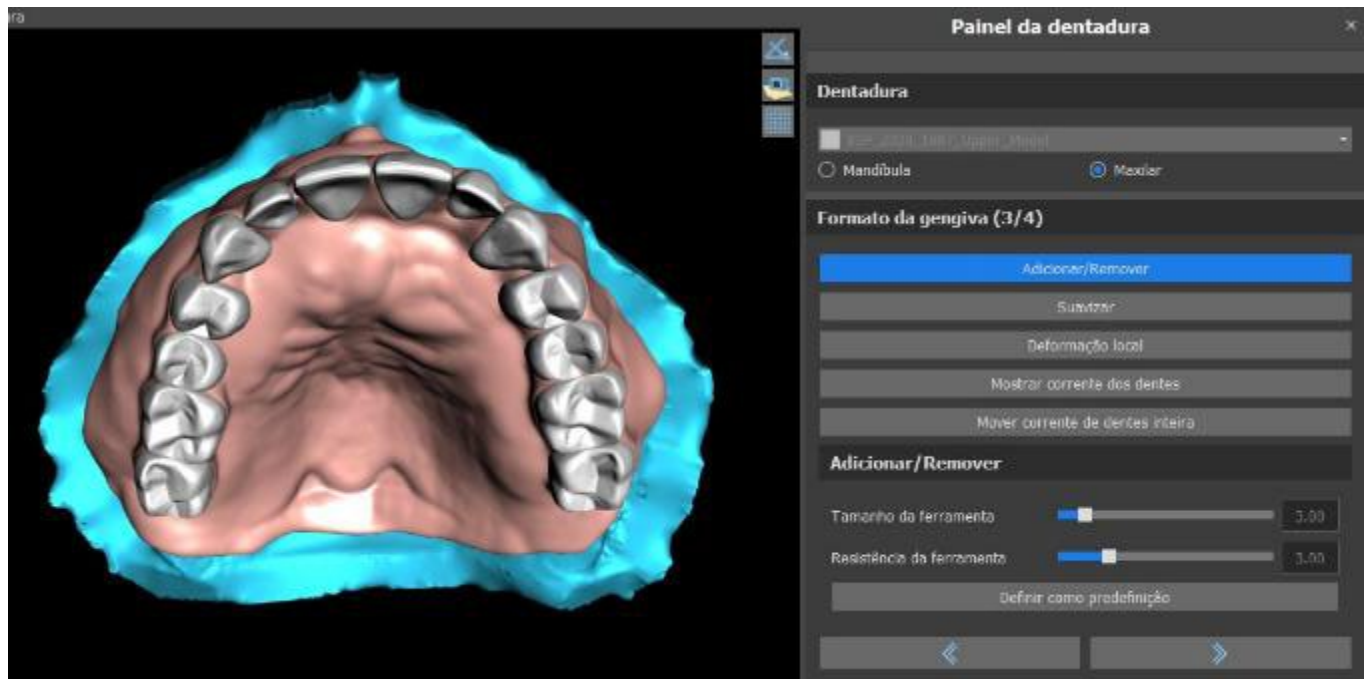

Os seguintes ajustes podem ser feitos nesta etapa


Adicionar/remover - adição/remoção de material gengival

Suavizar - suavização da superfície da gengiva

Deformação local - criação de altos e baixos

Mostrar cadeia de dentes - exibição dos indicadores de ponto verde


Mova toda a cadeia de dentes - manipulação com a cadeia de dentes

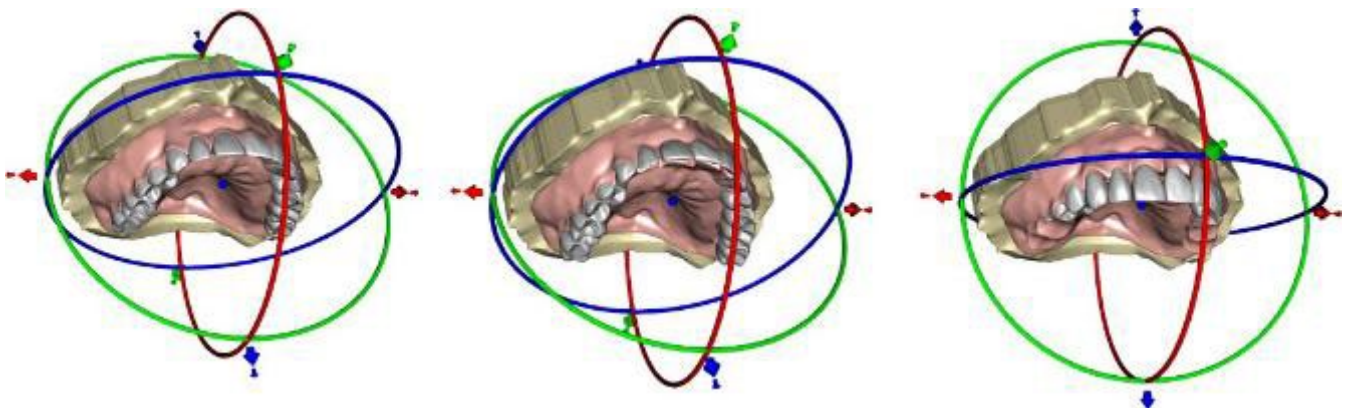

O controle deslizante "Tamanho da ferramenta" é usado para a seleção do tamanho da ferramenta, e "Força da ferramenta" define a força da ferramenta. Os valores originais podem ser restaurados selecionando o botão "Definir como padrão".

28.12 Etapa 4 – Prótese Total

A etapa 4 é usada para finalizar a criação da prótese. Durante esta etapa, os dentes virtuais que penetram na base da prótese são reduzidos, mantendo a espessura mínima da prótese.

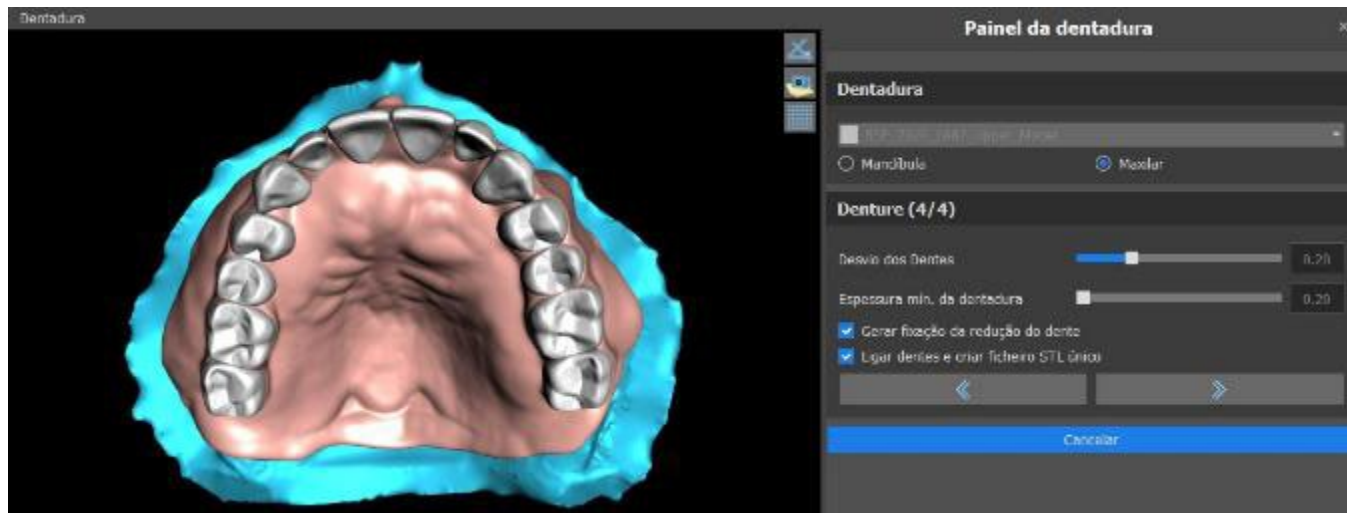

Os controles deslizantes são usados para seleccionar o deslocamento dos dentes e a espessura mínima da prótese.

A fixação da redução do dente gera uma fixação da prótese. Conecte os dentes como um único arquivo STL facilita o trabalho para a exportação.

O design do modelo é concluído seleccionando o botão “Seguinte”.

28.13 Exportando

O usuário pode exportar a prótese criada nesta etapa. A qualidade da exportação pode ser definida, bem como a orientação da face de troca. Exportar arquivos separados exporta os objetos seleccionados para um arquivo separado ou para um único arquivo criado pelo usuário. O botão “Criar superfície” permite que o usuário junte os modelos seleccionados para criar um modelo. O usuário não será cobrado novamente quando as superfícies adicionais forem exportadas do caso.

Qualidade exportação

☐ Padrão
 ☐ Elev.
 ☒ Muito elevada

Formato do ficheiro de exportação

STL

Superfícies STL

Nome	Cor	Selecionado
BSP_2020_1087_Lower_Model		☐
BSP_2020_1087_Upper_Model		☒
Maxillary_Undercut		☐

Dentes virtuais

Nome do dente	CAM	Editado	Selecionado
Right Maxillary Central Incisor	N/A	Não	☒
Left Maxillary Second Molar	N/A	Não	☒
Left Maxillary First Molar	N/A	Não	☒

☐ Mostrar apenas os dentes com o suporte para ficheiro CAM
 ☐ Trocar a orientação da face
 ☒ Exportar ficheiros separados para uma pasta
 Custo: 1

Criar superfície
 Exportar (Falta(m) 18)
 Cancelar

28.14 Painel de superfícies dentárias

A Teeth Surfaces lista os modelos de STL do paciente importado, coloca os dentes virtuais e suas versões reduzidas e a nova base de prótese gerada:

Superfícies STL

Bloq.	Nome	Proximidade	Visível	Cor	
☐	BSP_2020_1087_Lower_Model	☐	☐		
☐	BSP_2020_1087_Upper_Model	☐	☒		
☐	Right Maxillary Central Incisor	☐	☐		
☐	Left Maxillary Second Molar	☐	☐		

A tabela inclui os seguintes atributos:

"Bloquear" - bloqueio de superfície controlado por uma caixa de seleção

"Nome" - nome da superfície

"Proximidade" - proximidade da superfície controlada por uma caixa de seleção

"Visível" - visibilidade da superfície ou ocultação por uma caixa de seleção

"Cor" - cor da superfície




- remoção de superfície

Os filtros podem ser usados para exibir apenas a maxila ou a mandíbula ou os tipos de objetos selecionados.




28.15 Abrindo um projeto salvo


Um caso salvo é aberto com “Arquivo > Abrir projeto ...” no canto superior esquerdo.

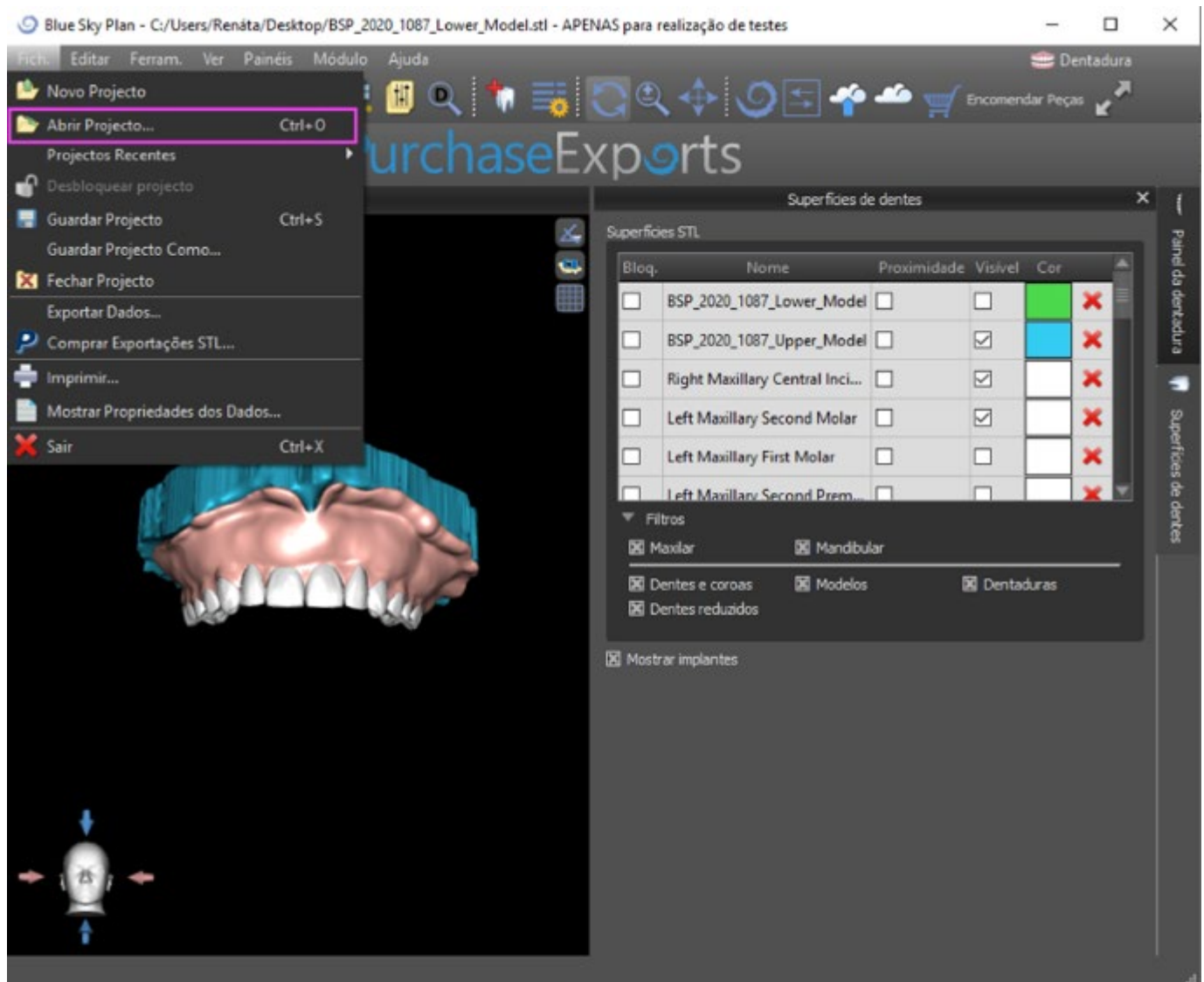

Após clicar, o arquivo a ser aberto é selecionado e a seleção é confirmada com “OK”.

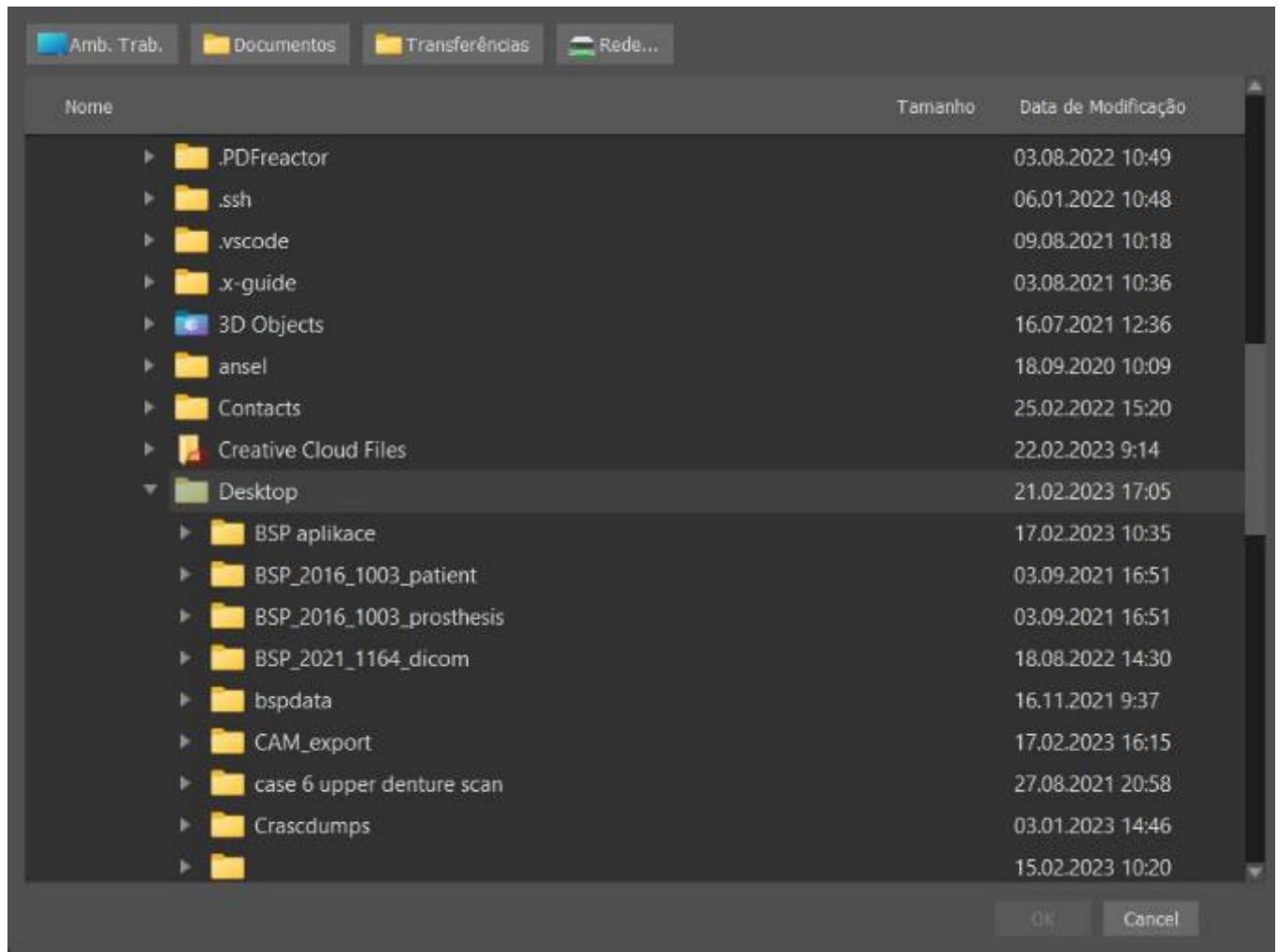

O projeto selecionado é aberto.

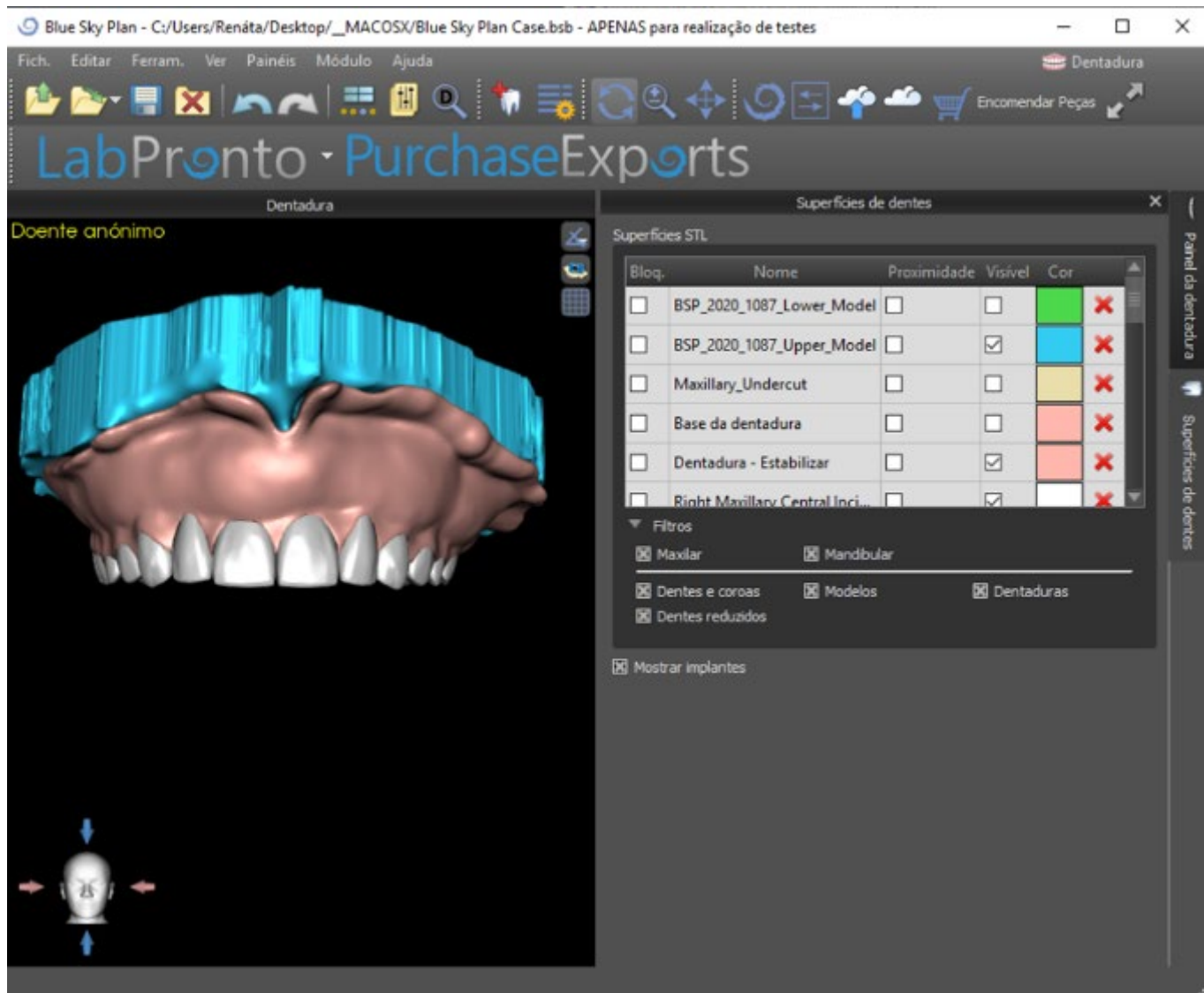

28.16 Capturas de Tela

O painel Captura de tela pode ser usado para tirar uma captura de tela com o botão  localizado no canto superior direito da área de trabalho.


Depois de clicar no botão, a mensagem “Salvar captura de tela” é exibida e a captura de tela é incluída na coluna no painel direito.



As setas à direita são usadas para alterar o tamanho da captura de tela.



O vídeo permite exportar as capturas de tela como vídeo AVI ou gif animado com texto personalizado e tamanho e tipo de fonte selecionados.

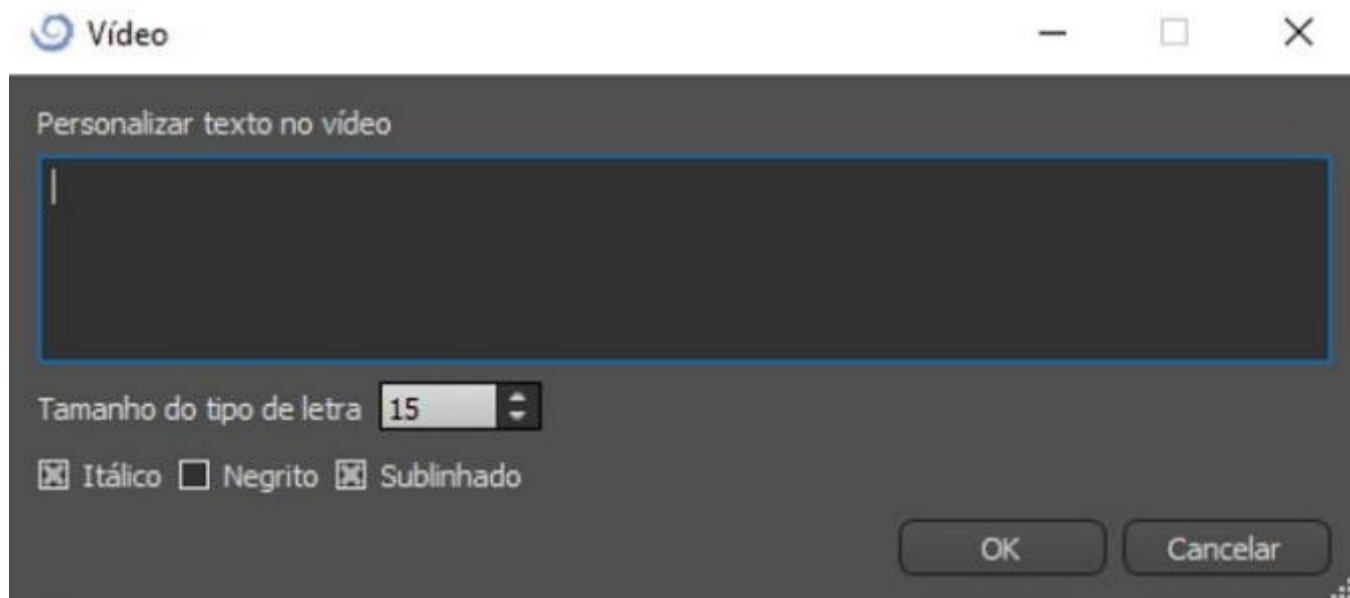

29 Módulo de Coroa e Pontes

O Blue Sky Plan® permite ao usuário criar uma ponte e coroas e alterar a geometria dos dentes virtuais. Essas funções estão disponíveis no painel "Coroa e ponte" quando o usuário alterna para o módulo Coroa e ponte.


29.1 Adicionando o modelo STL do paciente

O novo planejamento começa carregando o modelo STL escaneado das arcadas dentárias, usando a seleção principal do módulo "Coroa e ponte > Coroa convencional | Coroa para base de titânio | Ponte". Para começar a planejar a coroa e a ponte, o usuário precisa mudar para o módulo "Coroa e ponte" em "Modelo Mestre". Para mais informações, consulte o capítulo 3 "Blue Sky Launcher".

29.2 Adicionando dentes virtuais

Dentes virtuais podem ser adicionados clicando no ícone  na lista do painel "Dentes Virtuais > Adicionar Dente". Uma caixa de diálogo para selecionar as coroas é aberta. Clicar em um dente o seleciona e uma descrição em texto da coroa aparece abaixo da visualização. Vários dentes podem ser selecionados pressionando a tecla Shift ou Ctrl. Outra possibilidade é clicar em Selecionar todos os dentes maxilares / Selecionar todos os dentes mandibulares ou selecionar todos os dentes. Também é possível selecionar entre três tamanhos. Os dentes são adicionados como uma cadeia de dentes.

Ao clicar no botão "OK", a seleção é confirmada; o botão "Cancelar" fecha a caixa de diálogo sem fazer uma seleção.

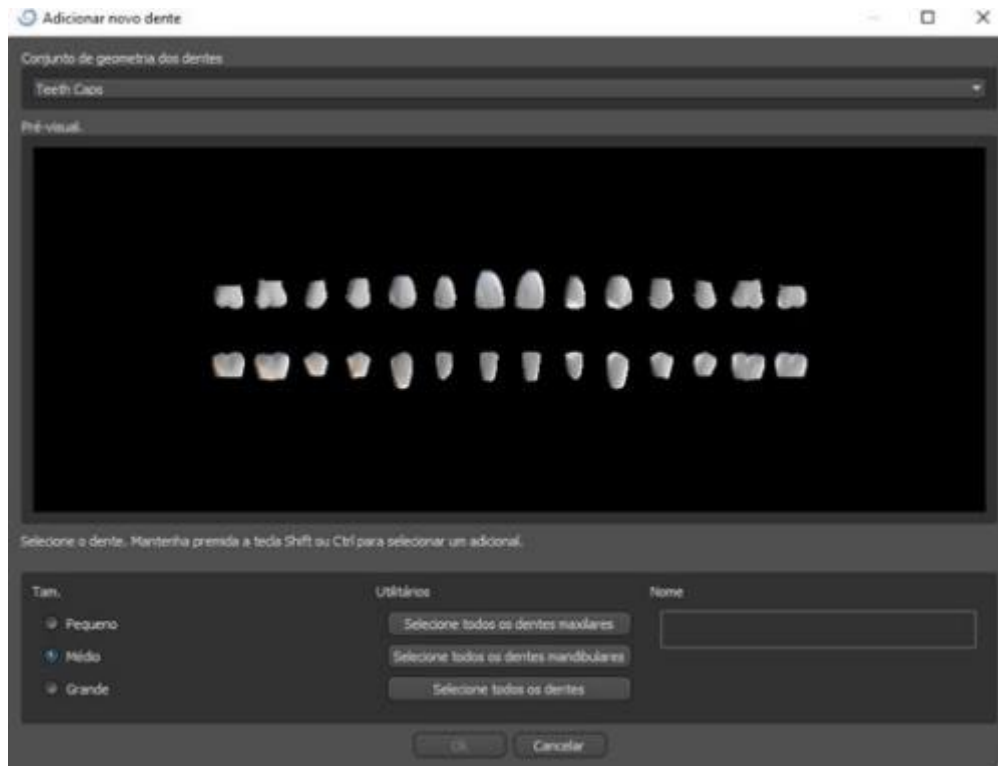

Dentes virtuais são conjuntos de dentes regulares, disponíveis no módulo Guia Cirúrgico, Coroa e Ponte e Dentadura, modificáveis e exportáveis.

29.3 Pannel de Desenho das Restaurações

O painel Design de restauração permite que o usuário escolha o tipo de restauração - coroa em uma base ti-base e convencional. Também é possível selecionar o tipo de mandíbula e modelo antagonista, bem como criar uma ponte.

O modelo antagonista resolve e detecta uma colisão de dentes. Se houver apenas uma mandíbula disponível, a seleção "sem antagonistas" resolve essa situação.



O ti-base pode ser escolhida clicando no dente ou no menu suspenso ti-base. Se uma base de dados não estiver selecionada, o usuário não poderá ir mais longe.

29.4 Seleção do tipo de restauração – Coroa sobre implante

A coroa em uma seleção do Ti-base pode ser escolhida no menu no painel direito. Isso requer a seleção de um tipo de restauração, maxila, modelo, coroa, ti-base e modelo antagonista (opcional) (se um usuário usa maxila e mandíbula) e a confirmação clicando em "Iniciar".


Observe que é obrigatório fazer uma digitalização do corpo de prova para a restauração "Coroa no Ti-base".

The screenshot shows a software interface with the following sections:

- Ponta:** Seleccione modelo, coroa e tibase e clique em "Iniciar".
- Selecionar tipo de restauro e maxilar:**
 - Tipo de restauro: Coroa numa Tibase (dropdown menu)
 - Selecionar maxilar: ☐ Mandibula ☒ Maxilar
- Selecionar modelos:**
 - Modelo: BSP_2020_1069_Lower_Model (dropdown menu)
 - Coroa: Left Maxillary First Molar (dropdown menu)
 - Tibase: ABDH30 - Left Maxillary First Molar (dropdown menu)
 - Antagonista: (opcional) (dropdown menu)
- Iniciar** (button)

Etapa 1 - Retenções

A etapa 1 é usada para definir os parâmetros iniciais da coroa.

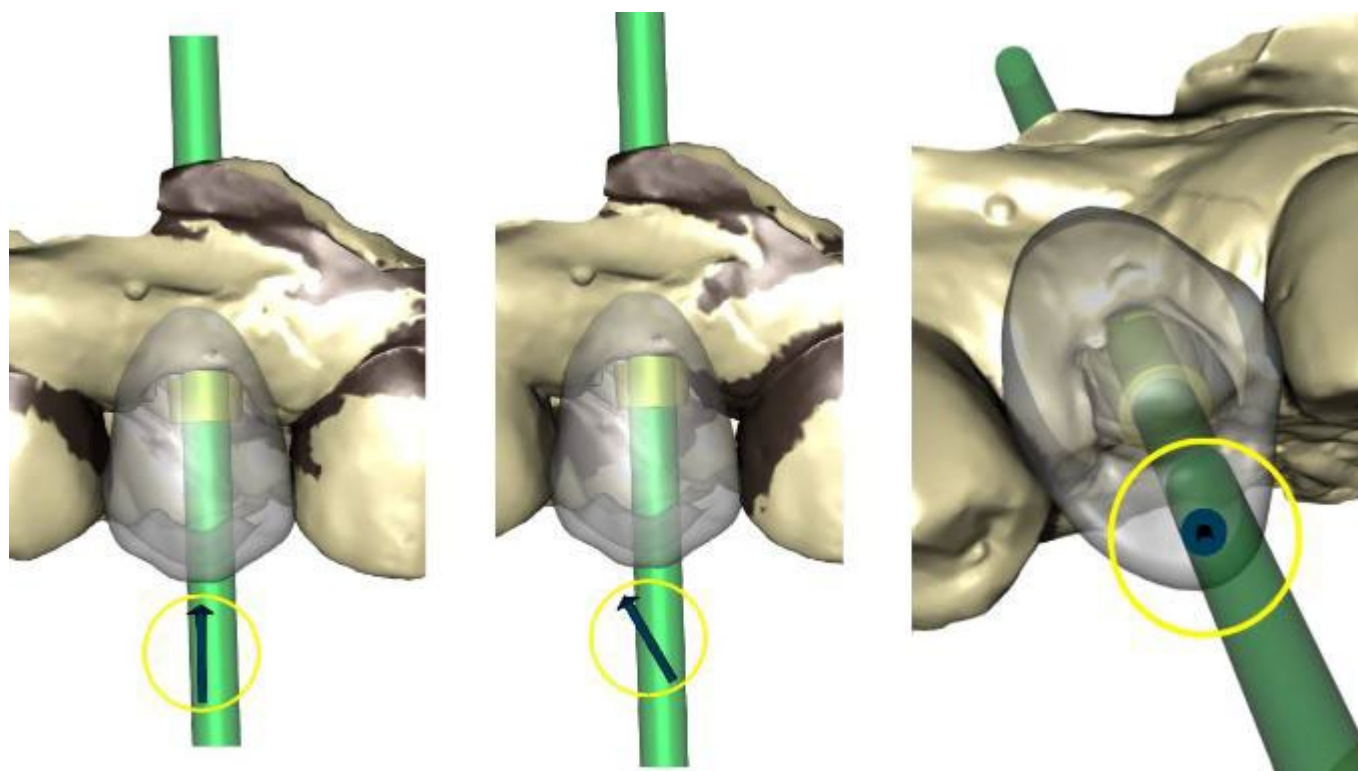

O controle deslizante pode ser usado para definir os valores para a retenção.

"Definir direção da vista de inserção" é usado para definir a direção da inserção de acordo com o ângulo de visualização atual na visualização 3D.


"Redefinir direção de inserção" restaura a configuração original da direção da pastilha.



Os botões "Voltar" e "Seguinte" são usados para recuar ou avançar uma etapa no fluxo do projeto.

Etapa 2 – Identificar áreas interproximais

A etapa 2 é usada para selecionar / colorir os dentes adjacentes existentes para que a coroa possa ser redimensionada pelo software para que ela se ajuste.

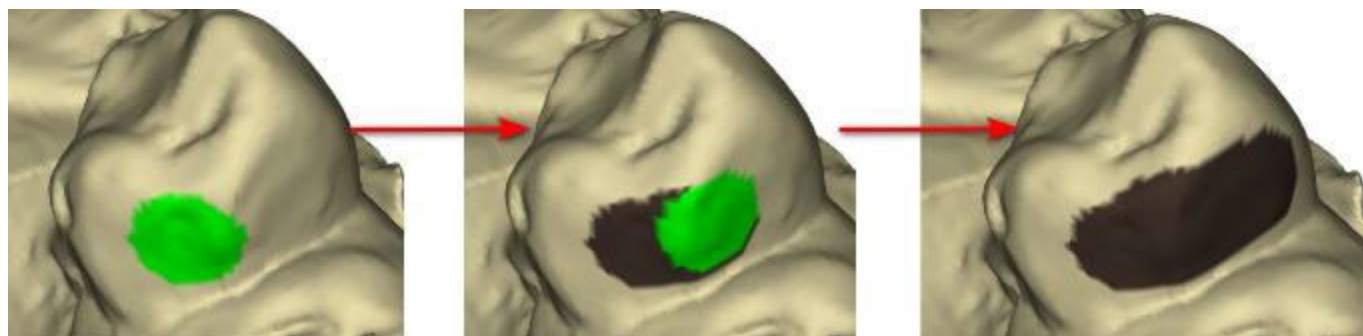


A área interproximal pode ser excluída selecionando "Limpar área". Pressionar a tecla Shift e segurar o botão esquerdo do mouse definirá a área interproximal e criará um contorno marrom ao redor da seleção que representa a coroa e a base da ponte.


Ao pressionar a tecla Ctrl e clicar com o botão esquerdo do mouse, você pode remover a seleção. O controle deslizante "Tamanho da ferramenta" é usado para a seleção do tamanho do pincel.

Etapa 3 - Detecção de margem

A etapa 3 detecta as margens do dente usadas para a criação da coroa. Pressionar a tecla Shift e segurar o botão esquerdo do mouse permite que a margem seja editada.

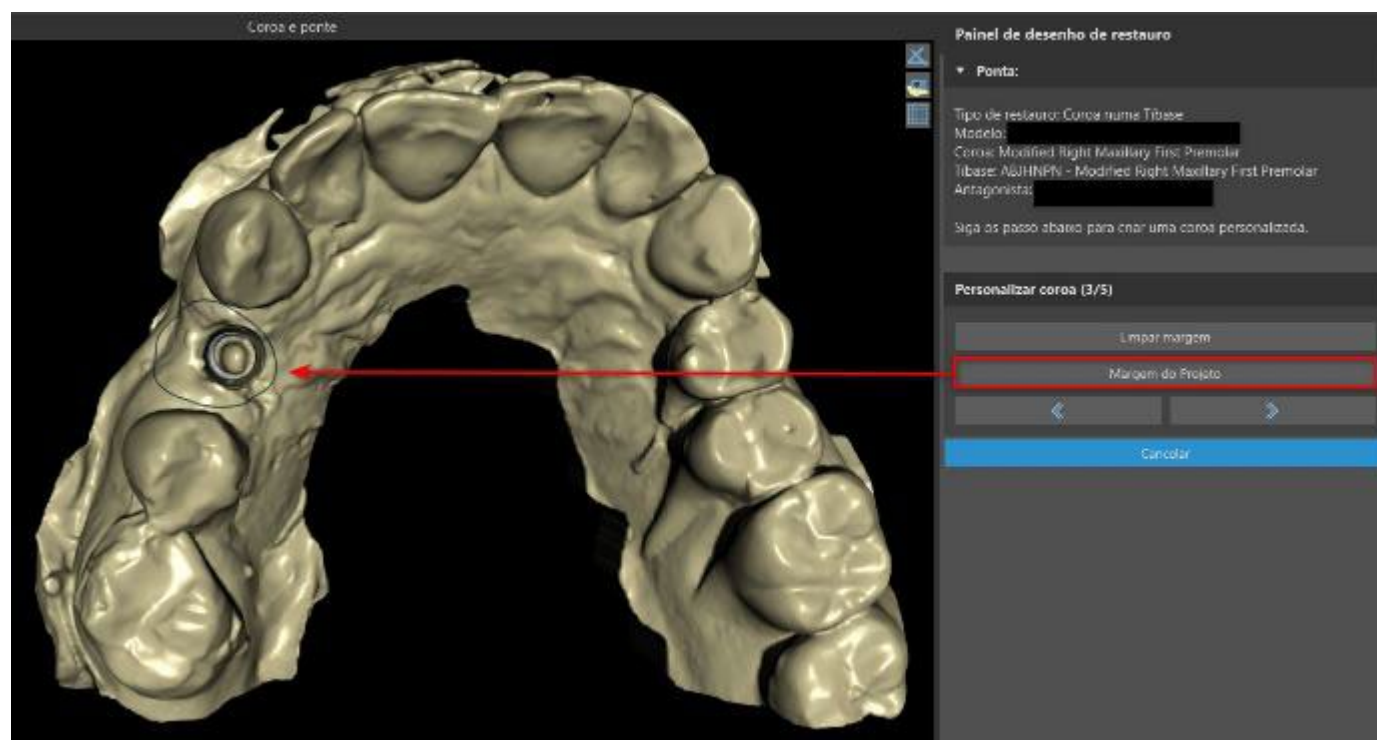


O botão Margem do projeto projeta a curva definida pelo usuário no dente deformado.

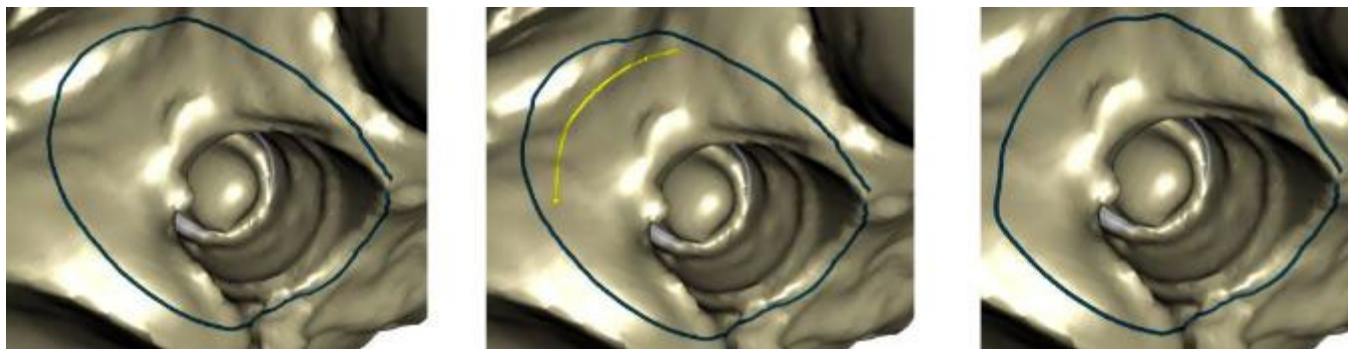

Etapa 4 - Edição do ti-base

A etapa 4 é usada para a atualização da coroa e a criação de um canal de parafuso da coroa.

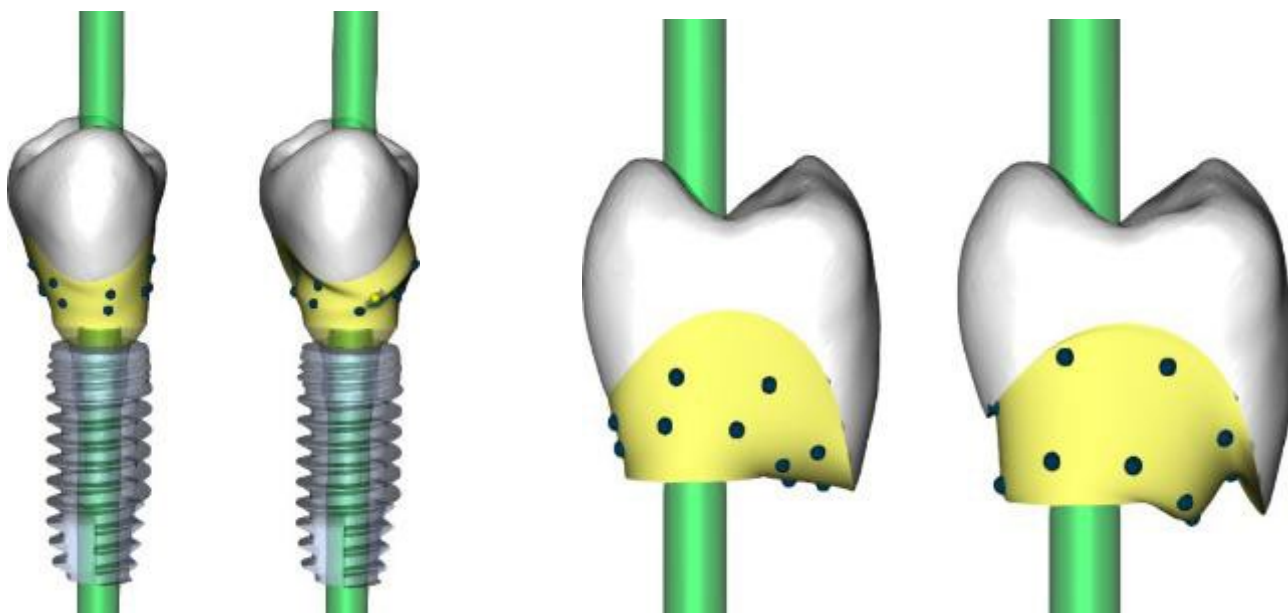

A "margem da coroa" pode ser usada para definir a margem da coroa.


A "margem base de titânio" pode ser usada para definir a margem base.

O "espaço para cimento da coroa" é um espaço extra para a cola entre a coroa e o pilar.

O botão Criar parafuso da coroa cria um orifício na coroa para que o usuário possa acessar o parafuso do pilar e parafusá-lo no implante.

Etapa 5 – Edição da Coroa


A etapa 5 é usada para os ajustes da coroa criada.

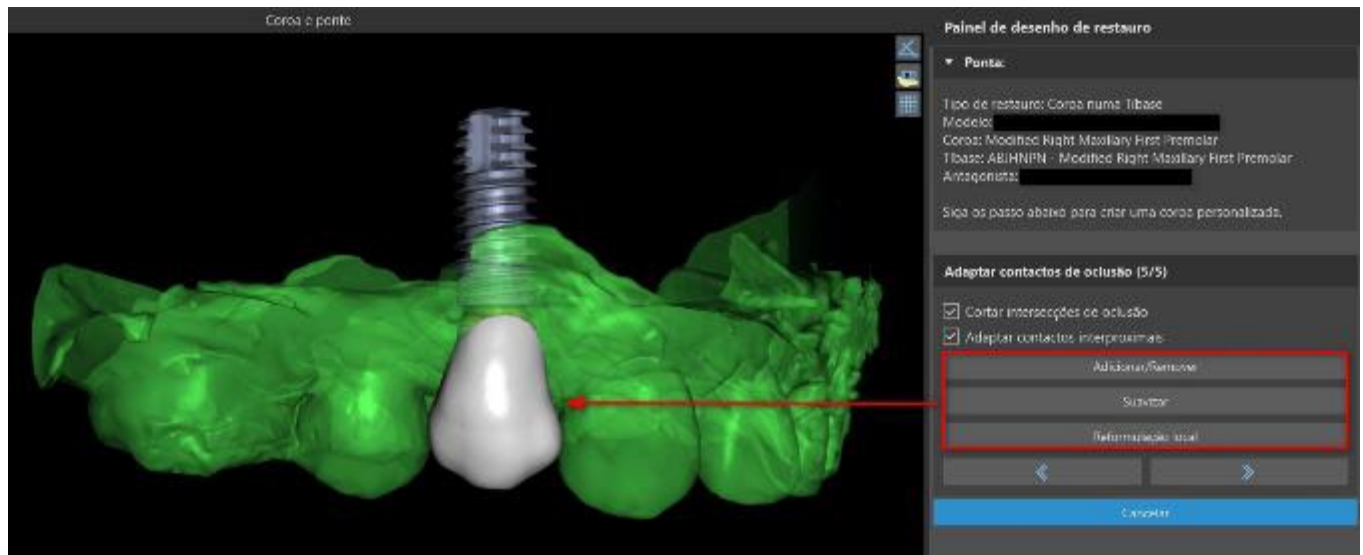

"Adicionar / Remover" é usado para adicionar / remover o material da coroa.

"Suavizar" suaviza a superfície da coroa.

A ferramenta "Reformulação local" que deforma o dente em um ponto local.

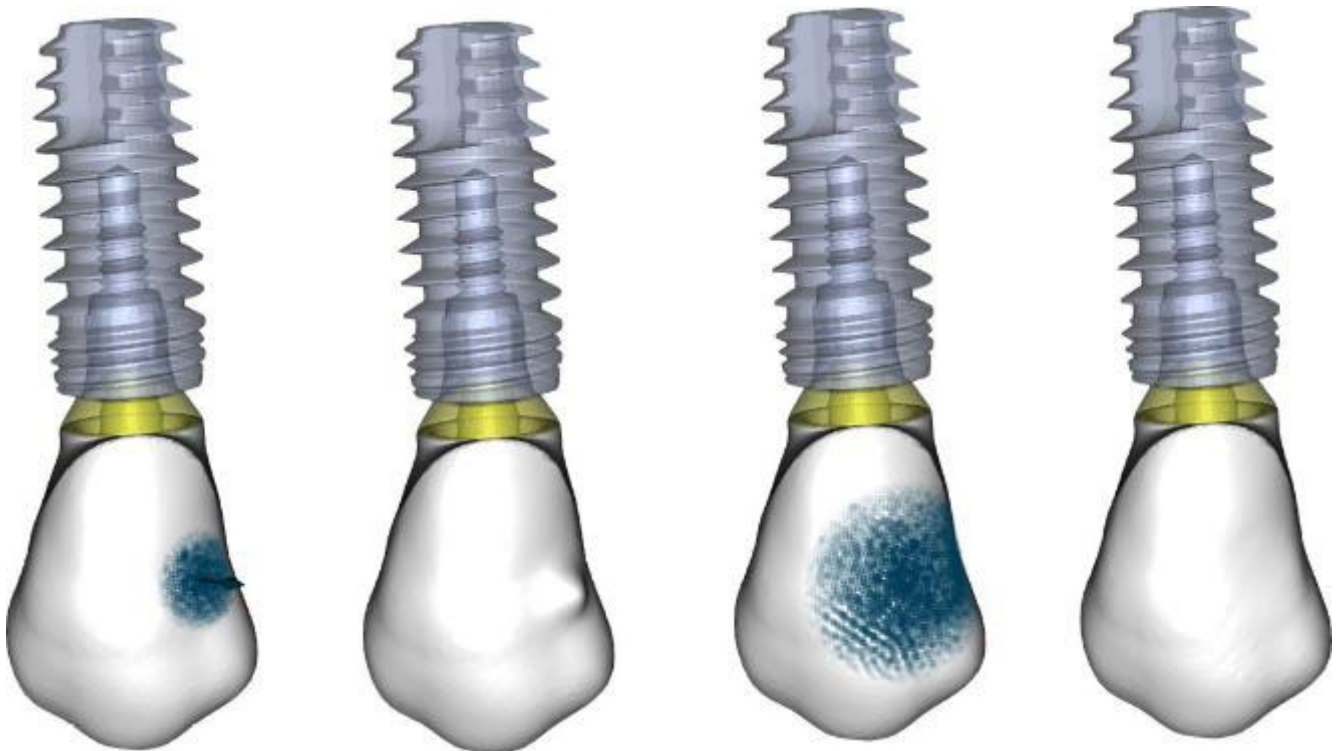


O controle deslizante "Tamanho da ferramenta" é usado para a seleção do tamanho da ferramenta, e "Força da ferramenta" define a força da ferramenta. Os valores originais podem ser restaurados clicando no botão "Definir como padrão".

A caixa de seleção relevante pode ser usada para ocultar "Adaptar contatos interproximais" e "Intersecção oclusal de corte".

29.5 Seleção do tipo de restauração – Coroa convencional

A seleção convencional da coroa pode ser escolhida no menu no painel direito. Isso requer a seleção de um tipo de restauração, mandíbula, modelo e confirmação ao clicar em “Iniciar”. Os modelos de coroa e antagonista são opcionais. Se um usuário selecionar a opção (sem coroa), a coroa será adicionada na terceira etapa.

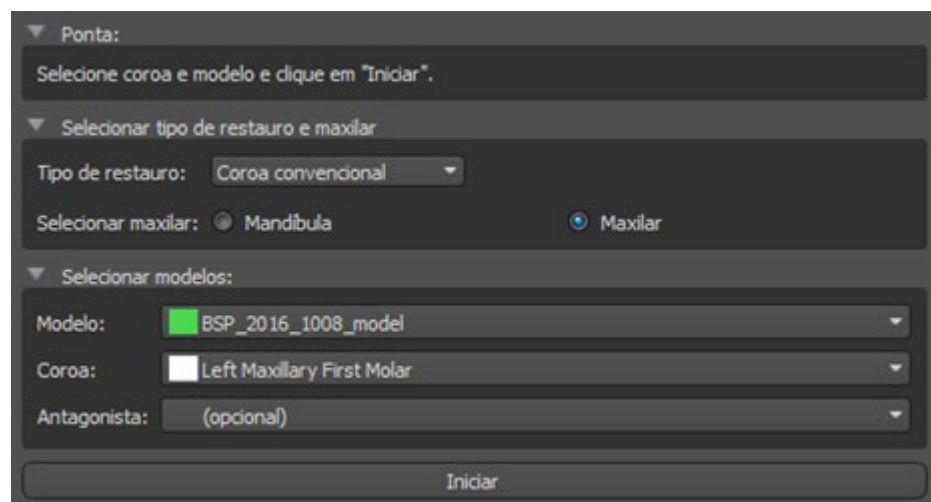


The screenshot shows a software interface with the following sections:


- Ponta:** A text box with the instruction "Selecione coroa e modelo e clique em 'Iniciar'".
- Selecionar tipo de restauro e maxilar:**
 - Tipo de restauro:** A dropdown menu set to "Coroa convencional".
 - Selecionar maxilar:** Two radio buttons, "Mandibula" (unselected) and "Maxilar" (selected).
- Selecionar modelos:**
 - Modelo:** A dropdown menu set to "BSP_2016_1008_model".
 - Coroa:** A dropdown menu set to "Left Maxillary First Molar".
 - Antagonista:** A dropdown menu set to "(optional)".
- Iniciar:** A button at the bottom.

Etapa 1 - Definição da linha de margem

A etapa 1 é usada para definir uma linha de margem fechada ao longo da estrutura dentária restante. O usuário pode selecionar entre a detecção semiautomática da linha de margem e modo manual. Para trabalhar com a detecção semiautomática, clique no botão “Detecção da linha de margem em dois pontos”. Clique nos 2 pontos (Shift + botão esquerdo do mouse) conforme mostrado na imagem abaixo para detectar uma curva. A curva deve ser detectada automaticamente. É possível movê-la com os pontos ou adicionar mais pontos para uma detecção mais precisa.

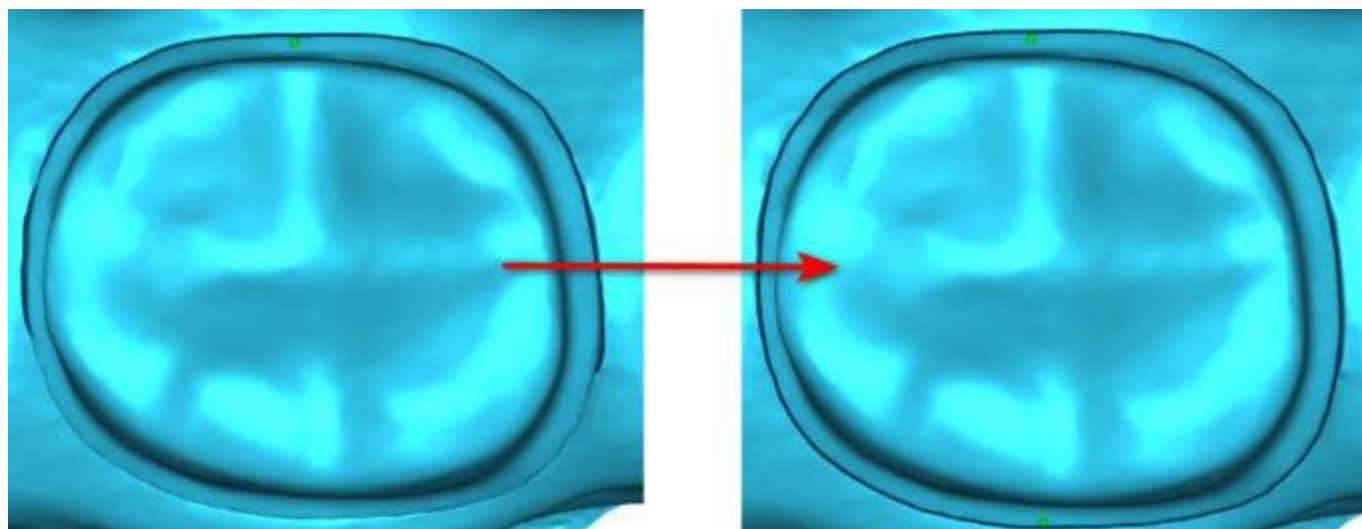

Para trabalhar com a detecção manual da linha de margem, clique no botão “Modo manual”. Clique nos pontos (Shift + botão esquerdo do mouse) ao longo da estrutura remanescente do dente. A curva fechada pode ser modificada ao segurar Shift e o botão esquerdo do mouse.

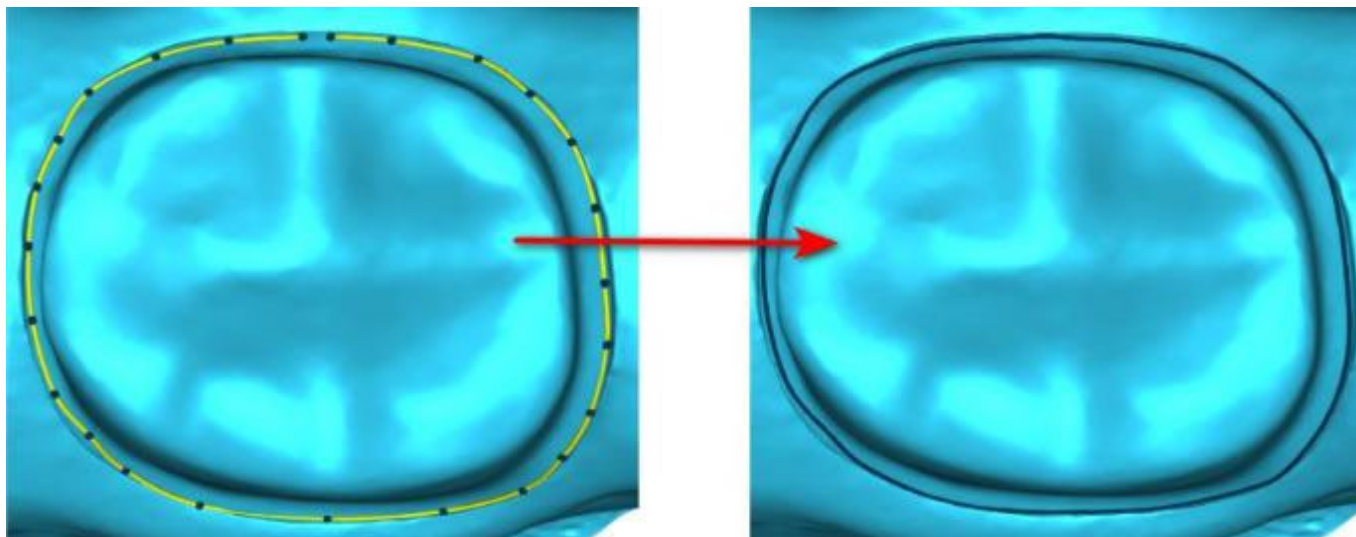


A margem pode ser excluída selecionando "Limpar área". As opções Desfazer e refazer também podem ser utilizadas para modificações

Aviso: É necessário primeiro definir uma linha de margem fechada para prosseguir à próxima etapa!

Etapa 2 – Retenções

A etapa 2 é usada para definir os parâmetros iniciais da coroa.

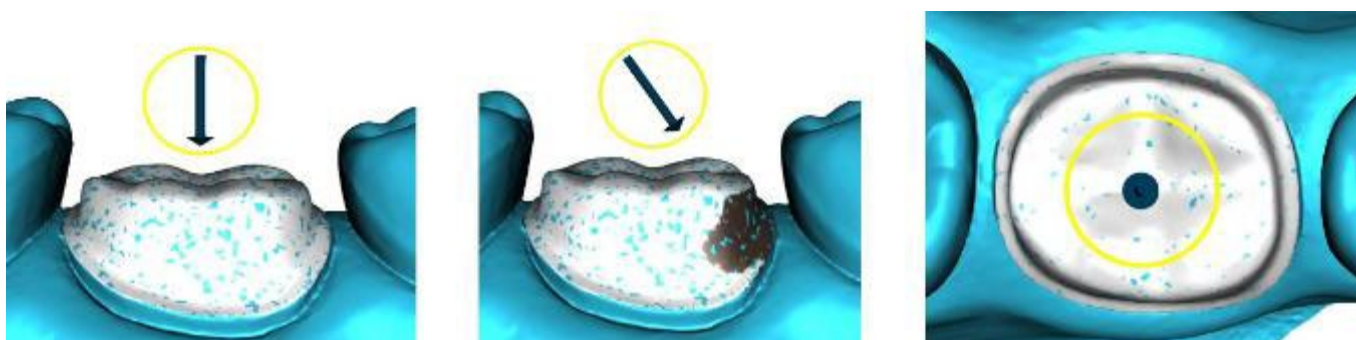

O controle deslizante pode ser usado para definir os valores para a retenção.


"Definir direção da vista de inserção " é usado para definir a direção da inserção de acordo com o ângulo de visualização atual na visualização 3D.

"Redefinir direção da pastilha" restaura a direção da pastilha original.



Etapa 3 – Identificar áreas interproximais

A etapa 3 é usada para selecionar / colorir os dentes adjacentes existentes, para que a coroa possa ser redimensionada pelo software para ajustar.

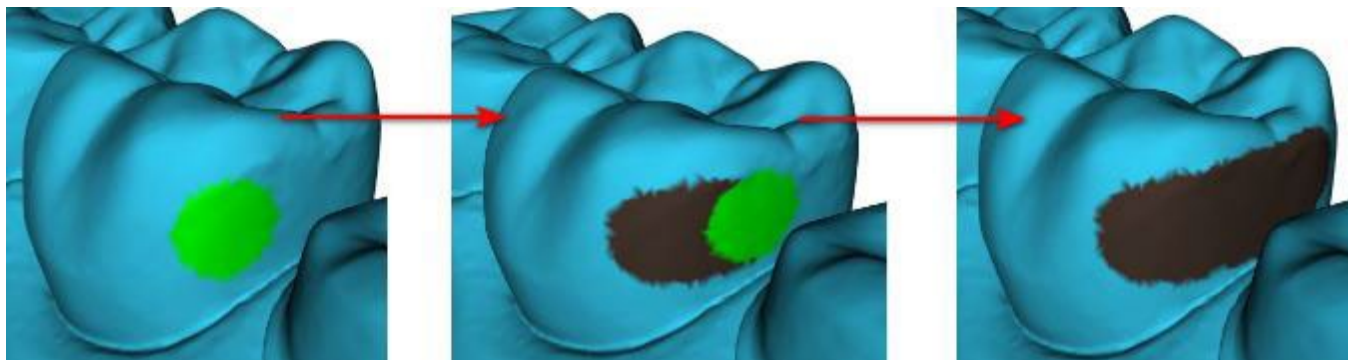


A área proximal pode ser excluída selecionando “Limpar área”. Pressionar a tecla Shift e segurar o botão esquerdo do mouse definirá a área interproximal e criará um contorno marrom ao redor da seleção que representa a coroa e a base da ponte. Ao pressionar a tecla Ctrl e clicar com o botão esquerdo do mouse, você pode remover a seleção.

O controle deslizante "Tamanho da ferramenta" é usado para a seleção do tamanho do pincel.

Etapa 4 – Edição do fundo da coroa

A etapa 4 é usada para editar o fundo da coroa.

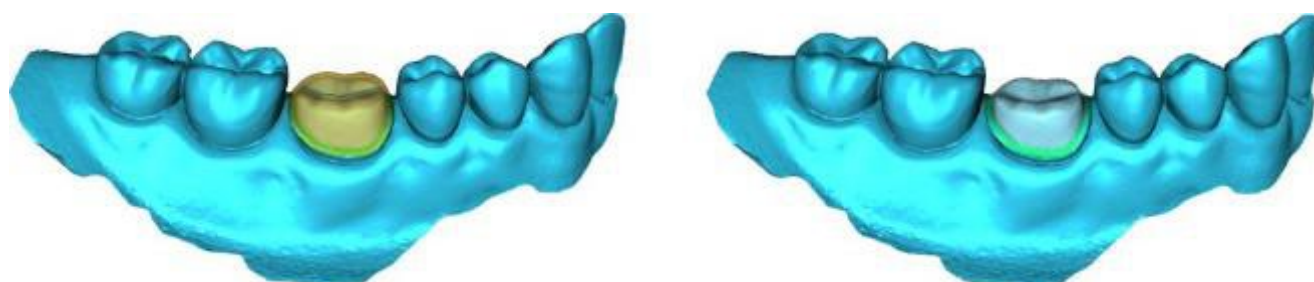

O “espaço para cimento da coroa” é um espaço extra para a cola entre a coroa e o pilar.

“Sem abertura em cimento” permite que o usuário edite a margem da coroa.

“Horizontal” define a largura da borda horizontal da coroa.

“Angular” define o comprimento da parte angulada da borda.

“Ângulo” define o ângulo da parte angulada.


“Vertical” define uma borda vertical adicional.

“Espessura mínima” é usada para editar a espessura mínima.


A caixa de seleção relevante pode ser usada para ocultar a espessura mínima. Se o usuário selecionou a opção (sem coroa) no painel de restauração, a caixa de diálogo "Adicionar novo dente" estará disponível para selecionar o dente, clicando no botão "Seguinte". Apenas um dente pode ser selecionado. O dente é adicionado clicando no botão "OK". Cancelar fecha a caixa de diálogo "Adicionar novo dente".

Etapa 5 – Colocação e edição do dente

A etapa 5 é usada para a colocação e edição dos dentes.

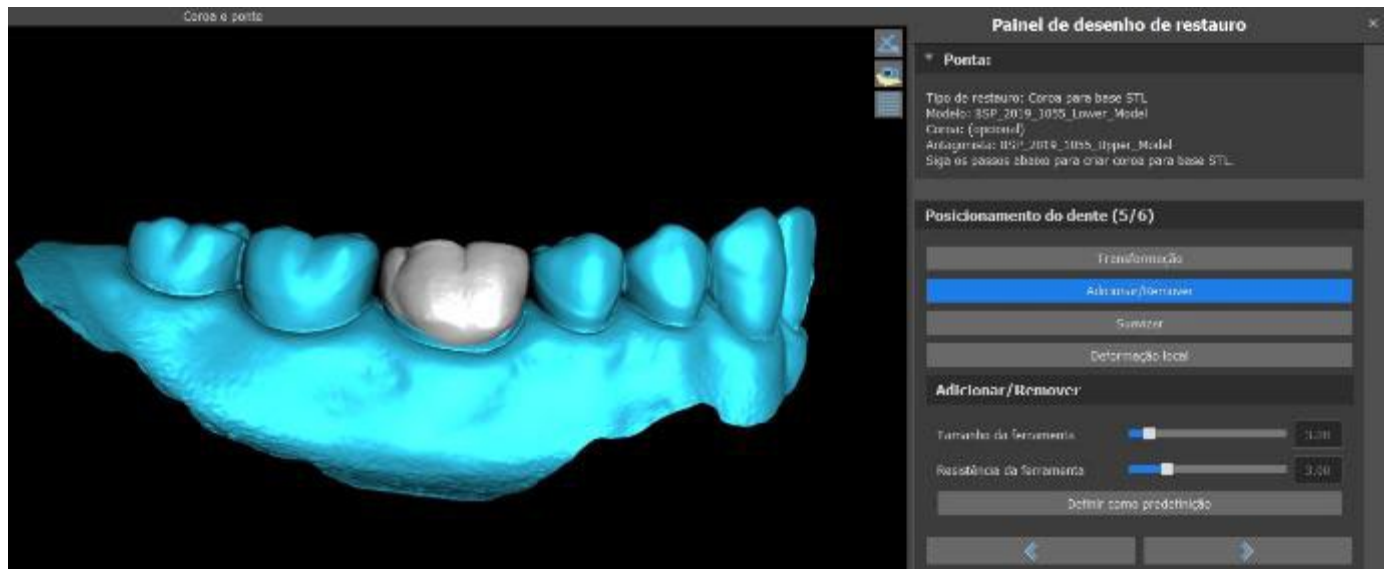

"Transformação" ativa o dispositivo para a colocação do dente.

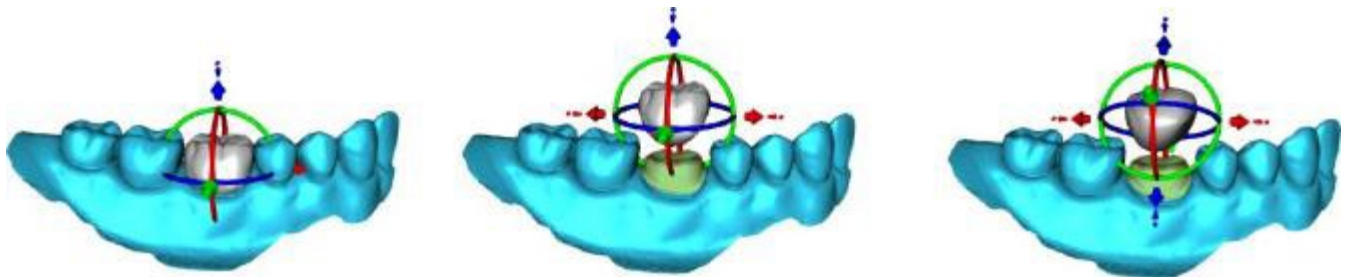

"Adicionar / Remover" é usado para adicionar / remover o material da coroa.


"Suavizar" suaviza a superfície da coroa.

"Deformação local" permite a criação de altos e baixos.

O controle deslizante "Tamanho da ferramenta" é usado para a seleção do tamanho da ferramenta, e "Força da ferramenta" define a força da ferramenta. Os valores originais podem ser restaurados clicando no botão "Definir como padrão".

Etapa 6 - Edição da coroa

A etapa 6 é usada para edição adicional da coroa.

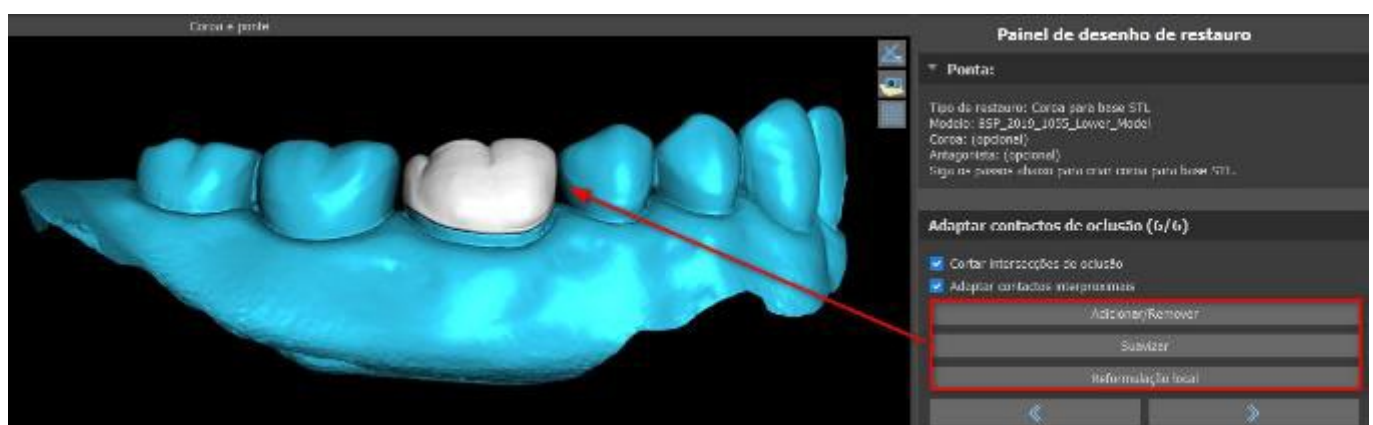

"Adicionar / Remover" é usado para adicionar / remover o material da coroa.

"Suavizar" suaviza a superfície da coroa.

A ferramenta "Reformulação local" que deforma o dente em um ponto local.

O controle deslizante "Tamanho da ferramenta" é usado para a seleção do tamanho da ferramenta, e "Força da ferramenta" define a força da ferramenta. Os valores originais podem ser restaurados clicando no botão "Definir como padrão".


A caixa de seleção relevante pode ser usada para ocultar "Adaptar contatos interproximais" e "Intersecção oclusal de corte".

29.6 Criando uma ponte

A função criar ponte está disponível no painel Design de restauração, mas somente se você selecionar o fluxo do processo Ponte na tela principal. Permite ao usuário projetar uma ponte para a falta de dentes. Ao clicar em "Criar ponte", o usuário inicia um novo fluxo de processo.

Etapa 1 - Ponte da unidade


A etapa 1 é usada para definir os pontos entre os dentes para uni-los. Se os dentes estiverem se cruzando, os pontos azuis não serão criados.

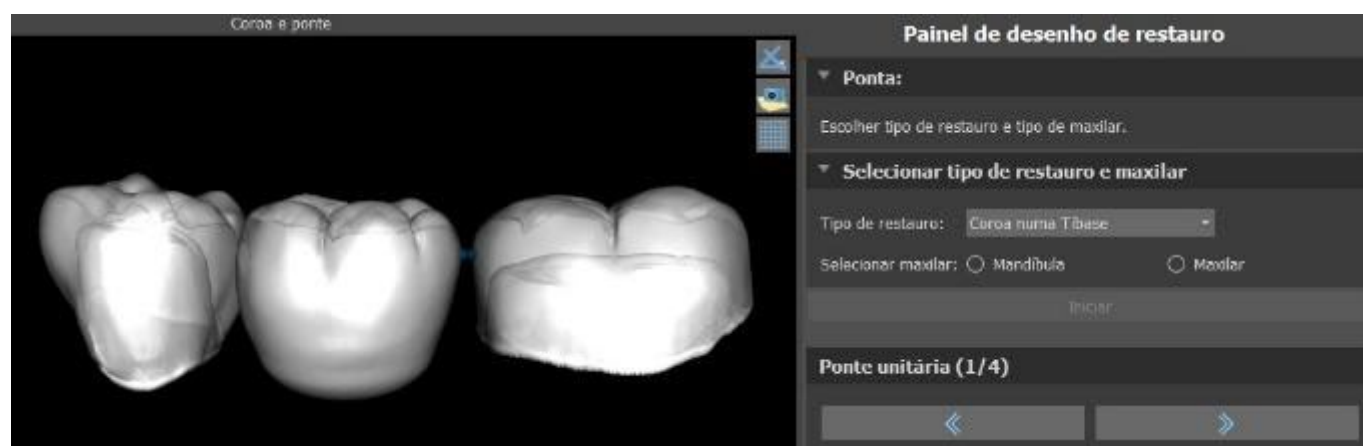

Os pontos azuis podem ser arrastados ao longo dos dentes para definir a ponte de acordo com as preferências do usuário.


Etapa 2 - Editando conexões

Os pontos azuis permitem ao usuário editar as conexões entre as coroas ou os dentes.

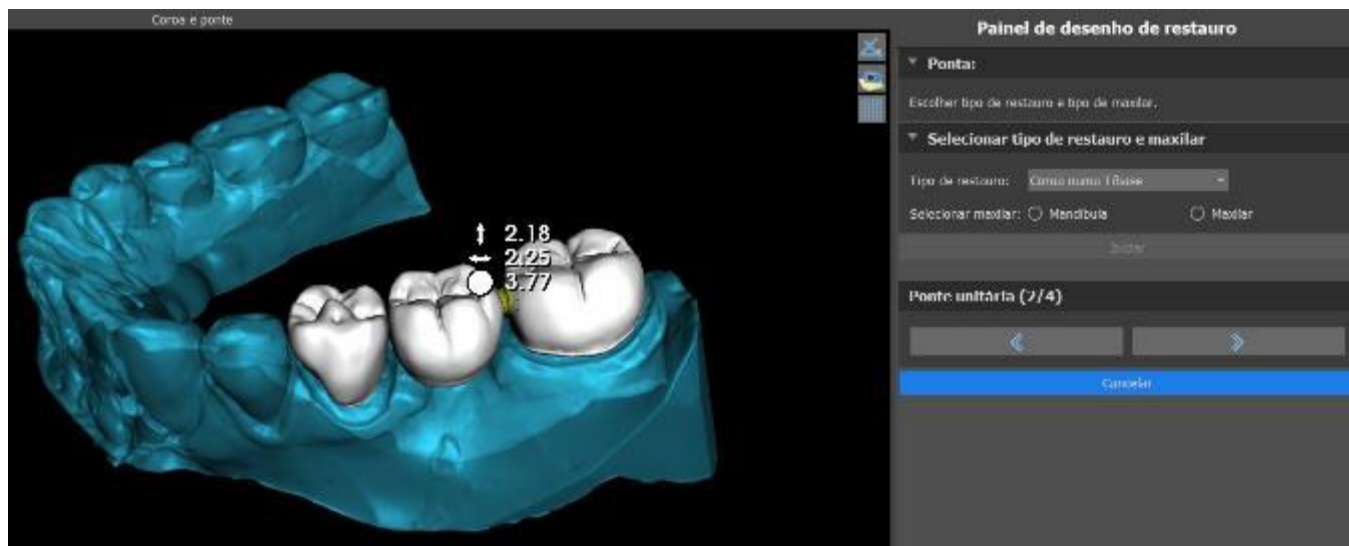

Etapa 3 - Edição da ponte

A etapa 3 é usada para editar a ponte.

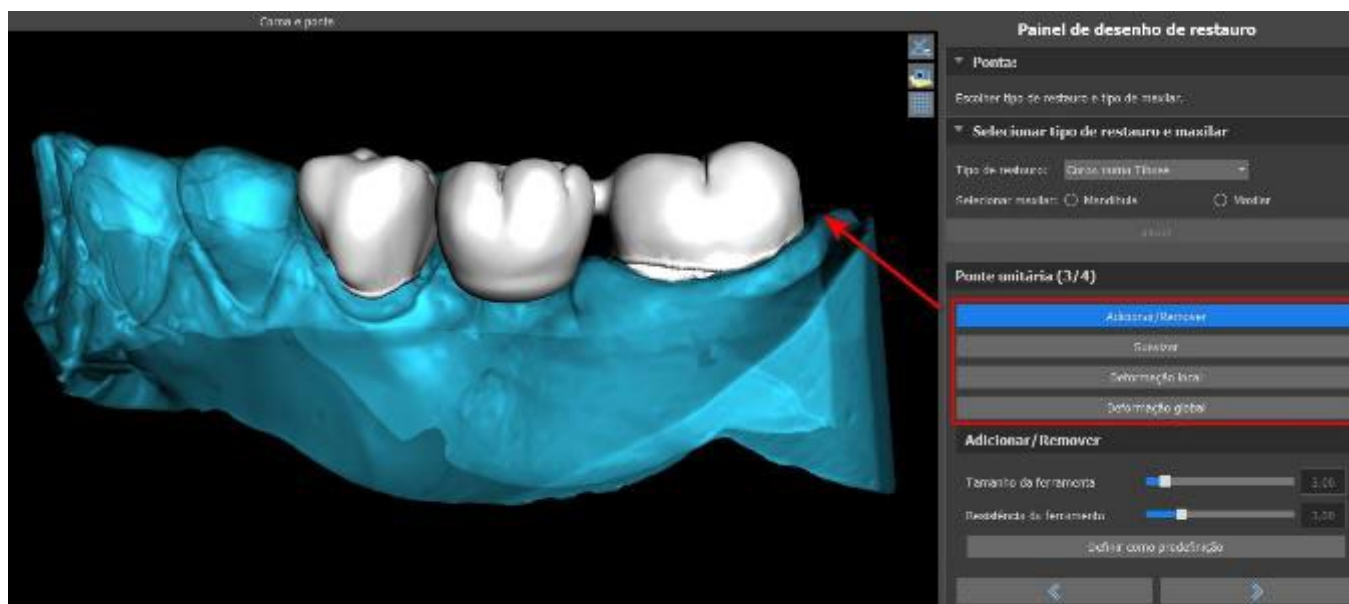

"Adicionar / Remover" é usado para adicionar / remover o material.

"Suavizar" suaviza a superfície da ponte.

"Deformação local" permite a criação de altos e baixos.


A "deformação global" cria altos e baixos em uma escala global.

O controle deslizante "Tamanho da ferramenta" pode ser usado para alterar a dimensão da ferramenta pincel e "Força da ferramenta" define a força da ferramenta. Os valores originais podem ser restaurados clicando no botão "Definir como padrão".

Se os dentes estiverem sobrepostos, a operação de união entre os dentes será realizada e as duas primeiras etapas serão ignoradas.

Etapa 4 – Retenções

A etapa 4 é usada para definir os parâmetros iniciais da ponte.

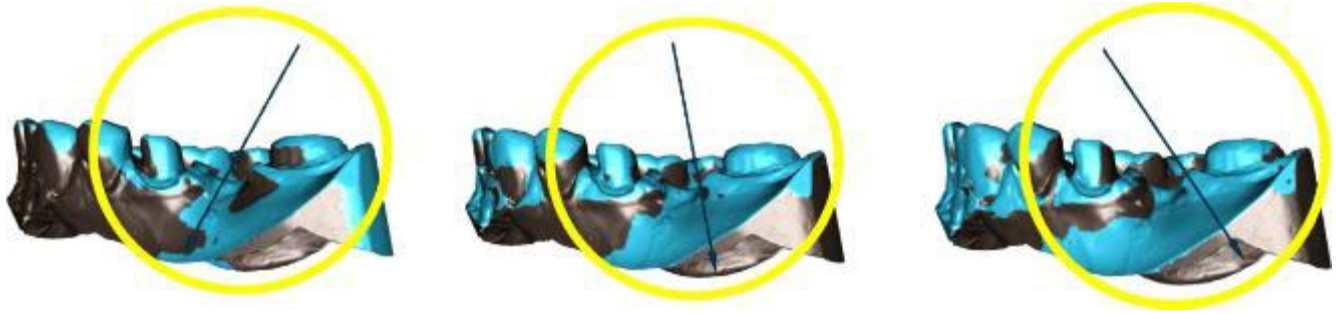


O controle deslizante pode ser usado para definir os valores de retenção.

"Definir direção da vista de inserção " é usado para definir a direção da inserção de acordo com o ângulo de visualização atual na visualização 3D.

"Redefinir direção da pastilha" restaura a direção da pastilha original.

A criação da ponte é finalizada clicando no botão "Seguinte".

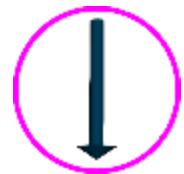

29.7 Painel de superfícies dentárias

A lista superfície dos dentes tem os modelos de STL do paciente importado, coloca os dentes virtuais e suas versões reduzidas e a base da coroa recém-gerada:

Bloq.	Nome	Proximidade	Visível	Cor	
☐	BSP_2020_1069_Lower_Model	☐	☐		
☐	BSP_2020_1069_Upper_Model	☐	☒		
☐	Left Maxillary First Molar	☐	☒		

A tabela inclui os seguintes atributos:

"Bloquear" - bloqueio de superfície controlado com uma caixa de seleção.

"Nome" - nome da superfície.

"Proximidade" - proximidade da superfície controlada com uma caixa de seleção.

"Visível" - visibilidade da superfície ou ocultação com uma caixa de seleção.

"Cor" - cor da superfície.



– Remoção de superfície.

Os filtros podem ser usados para exibir apenas a maxila ou a mandíbula ou os tipos de objetos selecionados:



29.8 Painel de edição dos dentes

O painel Edição dos Dentes permite ao usuário editar a forma de um dente usando diferentes ferramentas de edição:



"Manipular Modelo" permite ao usuário mudar a posição do dente.

"Suavizar" suaviza a superfície do dente.

"Transformação da geometria global" cria altos e baixos em uma escala global.


"Adicionar / Remover" é usado para adicionar / remover o material.

"Transformação de geometria local" cria altos e baixos em uma escala local.

"Afrouxar a malha" é semelhante à suavização, embora respeite as bordas afiadas em algum grau.

O controle deslizante "Tamanho da ferramenta" pode ser usado para alterar o tamanho da ferramenta pincel. Os valores originais podem ser restaurados clicando no botão "Definir como padrão".

As operações booleanas permitem ao usuário ingressar e subtrair modelos 3D.

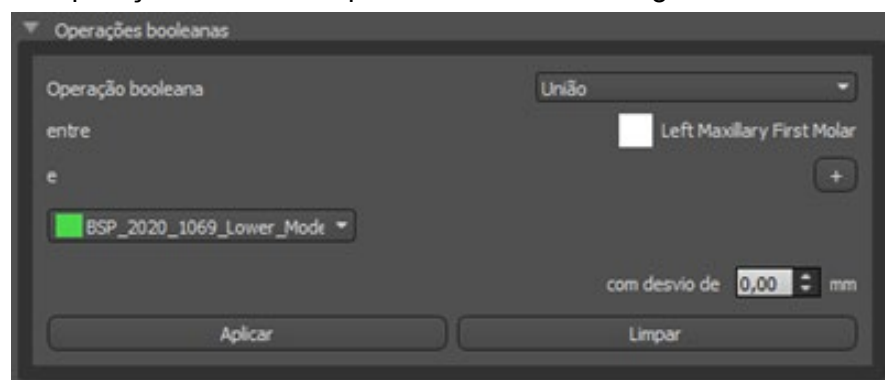

29.9 Painel de Componentes


O Painel de peças lista o kit de perfuração do paciente importado e o tipo e quantidade de guia de cada peça, que podem ser adicionados ao carrinho de compras.

Painel de Peças			
Kit de brocas		Blue Sky Bio Direct Cut Drills	
Tipo de guia		Guia Cirúrgica Digital com Parâmetros Incorporados	
	Tipo	ID	Quantidade
☒	Implante	IDH3010	1
☒	Implante	IDH3011	1
☒	Implante	ION4110	1
☒	Cilindro de metal	TUBE44-272	2
☒	Cilindro de metal	TUBE368 (conjunto de 5 unidades)	1
☒	Broca	DRILLD26L	1
☒	Broca	DRILLD26S	1
☒	Broca	DRILLT35S	1
☒	Espigão	ABDH30	2
☒	Espigão	AOA1565A	1
☒	Eixo de perfuração	CORD32L	1
☒	Eixo de perfuração	CORD32S	1
☒	Eixo de perfuração	CDRT35S	1

O usuário é levado para a página oficial do Blue Sky Plan após clicar no botão "Adicionar peças ao carrinho". Os valores originais da quantidade de peças podem ser restaurados clicando em "Limpar ajustes do usuário".


29.10 Painel de Capturas de Tela

O painel Captura de tela pode ser usado para tirar uma captura de tela com o botão  localizado no canto superior direito da área de trabalho. Depois de clicar no botão, a mensagem "Salvar captura de tela" é exibida e a captura de tela é incluída na coluna no painel direito.

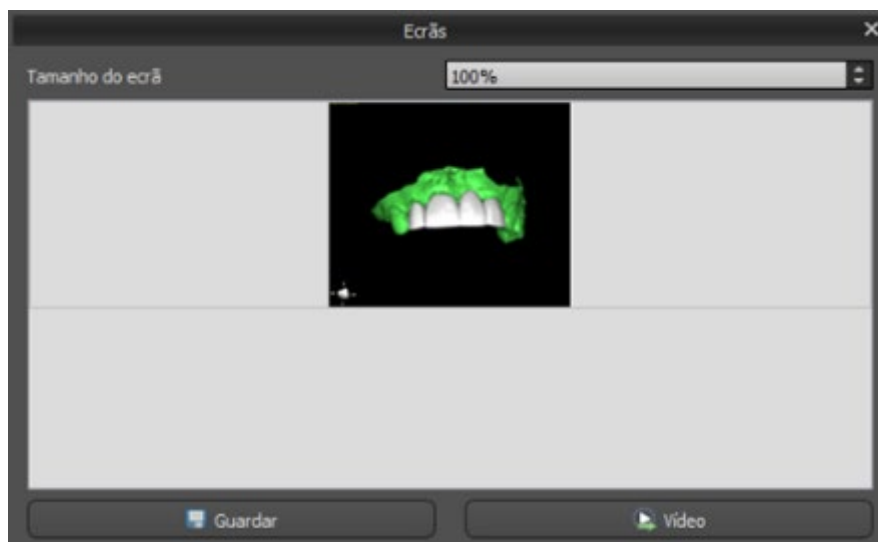

As setas à direita são usadas para alterar o tamanho da captura de tela.

O vídeo permite que as capturas de tela sejam exportadas como um vídeo AVI ou gif animado com texto personalizado e tamanho e tipo de fonte selecionados.

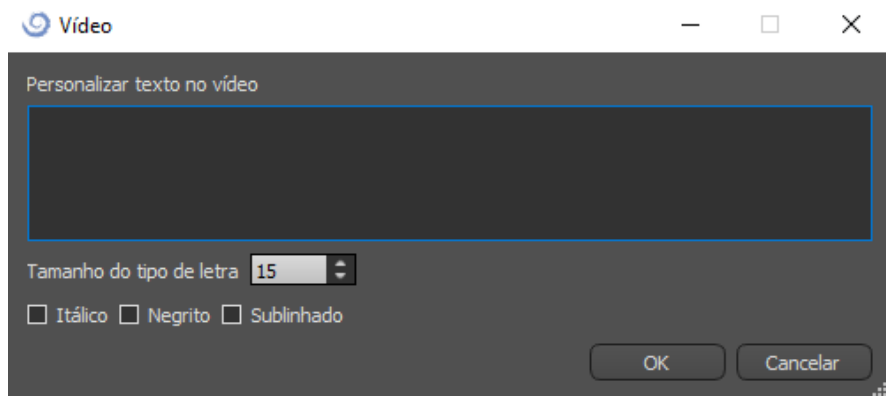

29.11 Exportação CAM

Além da exportação normal dos modelos, o software permite a criação de uma exportação CAM. Para exportar, você precisa criar pelo menos uma coroa ou uma ponte. Uma vez concluído esta etapa, você pode escolher quais modelos deseja exportar na coluna CAM (1) dentro da caixa de diálogo da exportação.

Se o modelo não for CAM exportável o valor será “N/A” (2), caso contrário haverá uma caixa de seleção (3).

Se você quiser visualizar apenas os modelos que podem ser exportados pelo CAM, use o botão no canto inferior esquerdo chamado “Mostrar apenas dentes com suporte a arquivo CAM” (4).

Qualidade exportação
☐ Padrão ☐ Elev. ☒ Muito elevada

Formato do ficheiro de exportação
 STL

Superfícies STL

Nome	Cor	Selecionado
BSP_2019_1055_Upper_Model		☒
BSP_2019_1055_Lower_Model		☐

Dentes virtuais


Nome do dente	CAM	Editado	Selecionado
Modified Right Mandibular First Molar	N/A	Sim	☒
Personalizar coroa	☒	Sim	☒

☐ Mostrar apenas os dentes com o suporte para ficheiro CAM
 ☐ Trocar a orientação da face
 ☒ Exportar ficheiros separados para uma pasta
 Custo: 0

Criar superfície Exportar (Falta(m) 18) Cancelar

O produto final da exportação do CAM é um arquivo chamado < nome > .constructionInfo onde todas as informações sobre o modelo são armazenadas.

29.12 Preferências de Coroa e Ponte

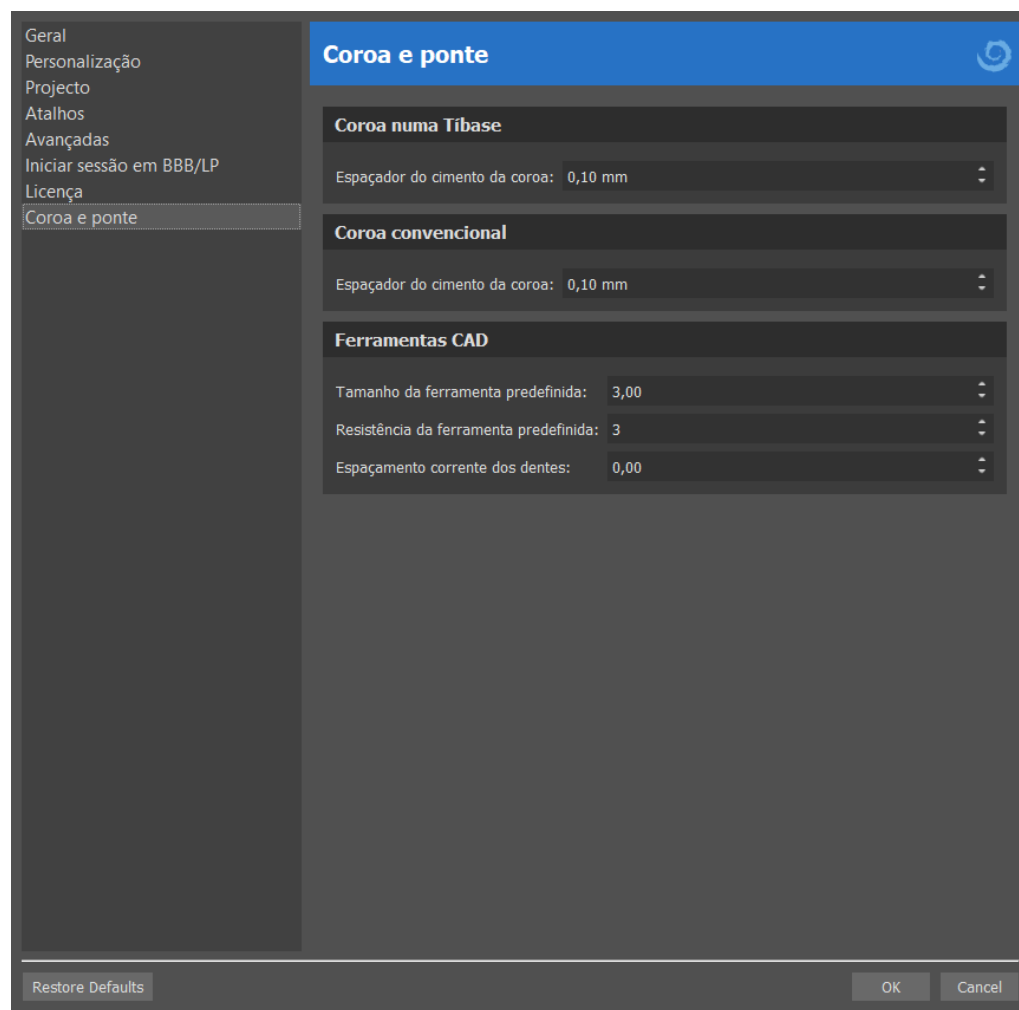


Em “Preferências > Coroa e Ponte” o usuário pode definir o espaçador de cimento Coroa para diferentes tipos de restauração disponíveis no painel Design da Restauração. Ferramentas CAD estão disponíveis para o módulo Dentadura. O “Tamanho padrão da ferramenta” é usado para selecionar o tamanho padrão da ferramenta, e a “Força padrão da ferramenta” define a força padrão da ferramenta. O “Espaçamento do encadeamento dos dentes” permite ao usuário definir o espaçamento entre os dentes no encadeamento.

30 Tala

As placas ortodônticas são o tratamento dental mais comum para disfunções temporomandibulares (DTMs - tensão nos músculos da mandíbula proveniente de apertar ou ranger os dentes). Essas placas são usadas por curtos períodos de tempo. Elas não causam mudanças permanentes nos dentes ou na mandíbula. Elas incluem placas de mordida e protetores bucais que encaixam-se entre as arcadas superiores e inferiores.

As placas ortodônticas podem ajudar a aliviar a tensão muscular e estabilizar a mandíbula. Elas fazem isso prevenindo que ocorra o processo de apertar e ranger os dentes (bruxismo) que pode causar dor e tensão muscular. É um tratamento importante que pode levar 3 meses ou mais. As placas também são utilizadas no tratamento de problemas musculares, um novo teste muscular de VDO, deslocamento mandibular lateral e reposicionamento do anterior.

O Blue Sky Plan possibilita o planejamento de tratamentos ortodônticos com base em modelos STL importados da mandíbula com dentes. O planejamento se inicia com uma tela introdutória intitulada **Placa**, onde o usuário seleciona o tipo de planejamento – **Tala Incisiva (AMPSA)** ou **Tala de mordida oclusal**.

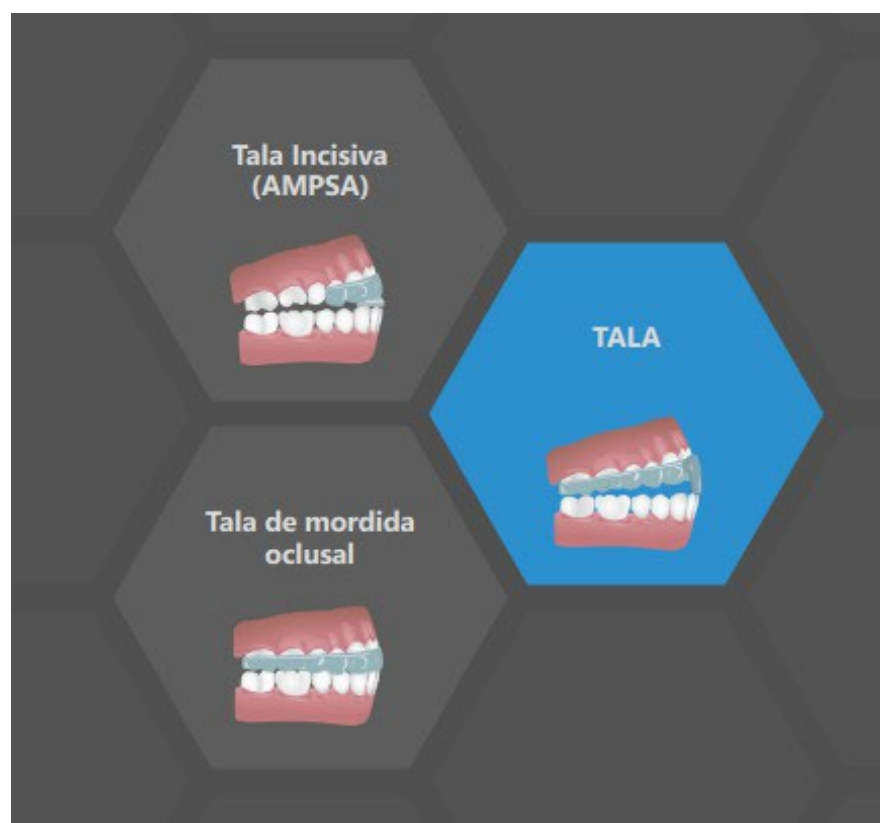

O tipo específico de planejamento não pode ser alterado em um próximo processo.

Os tipos individuais de planejamento incluem:

- **Tala Incisiva (AMPSA)** -> Alinhar à grade - Registro de mordida bucal - Articulação da mandíbula - Remover retenções - Adicionar desprogramadores anteriores - Desenhar curva da placa - Definir áreas elevadas - Editar módulo da placa - Exportar

- **Tala de mordida oclusal** -> Alinhar à grade - Registro de mordida bucal - Articulação da mandíbula - Remover retenções - Desenhar curva da placa - Definir áreas elevadas - Editar módulo da placa - Exportar


30.1 Adicionando o modelo STL do paciente

Para iniciar o planejamento da placa, o usuário precisa selecionar o tipo de placa “Placa incisal” ou “Placa de mordida oclusal”. Para mais informações, consulte o capítulo 3 “Blue Sky Launcher” (disponível na versão PDF do manual).

30.2 Alinhar à grade

Os modelos importados podem não ser alinhados corretamente (o alinhamento não corresponde à cabeça no canto inferior esquerdo da visualização 3D). Isso torna o planejamento muito difícil. Nesses casos, o Blue Sky Plan possui uma etapa de **Alinhamento de Modelo**.

Para o alinhamento, é necessário selecionar o modelo principal através do qual o alinhamento é feito. Para alinhar o modelo à grade, pressione a **tecla SHIFT** e adicione 3 pontos ao modelo, clicando com o botão esquerdo do **mouse** para alinhar a mandíbula à grade. Em seguida, faça o alinhamento de ajuste refinado com o widget de manipulação.

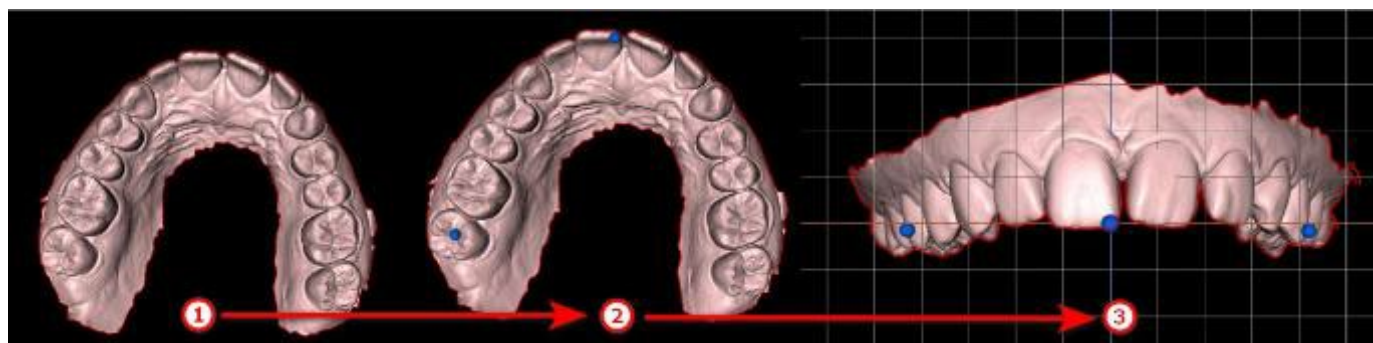


A

30.3 Registro de Mordida

Observação: Não será possível trabalhar com a etapa de registro de mordida bucal caso não tenha importado as mordidas bucais durante a etapa de importação de dados.



caixa de seleção **Mover todos os modelos juntos** pode ser usada nas situações em que o usuário precise fazer o ajuste fino de cada modelo separadamente. Para alterar a orientação do modelo, clique em **Trocar orientação**

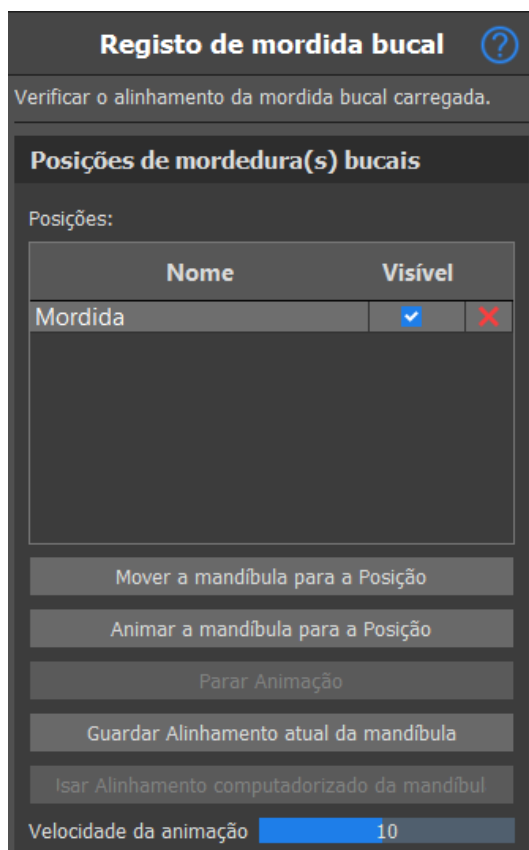

O processo de registro de mordida bucal requer que os dois modelos dos maxilares sejam importados.

A tabela de posições exibe uma lista de posições de mandíbula que foram alinhadas de acordo com os modelos de mordida. O nome da mandíbula exibe as mordidas bucais alinhadas e pode ser renomeado ao clicar duas vezes no nome da mordida. As mordidas podem ser excluídas clicando no botão **x** (3).

Mover mandíbula para a posição - Instantaneamente move a mandíbula para a posição selecionada na tabela.

Animar mandíbula para a posição: Anima a mandíbula da posição real para a posição selecionada na tabela.

Interromper animação: Interrompe a animação de movimento.

Salvar alinhamento atual da mandíbula: Define a posição atual como a posição inicial para a posição selecionada na tabela.

Usar alinhamento computado da mandíbula: Define a posição atual para a posição selecionada na tabela como calculada utilizando os modelos de mordida bucal.

Controlador deslizante de **Velocidade de animação**:

Avançado

Aqui pode trabalhar apenas com mordidas bucais que ainda não tenham uma posição (se a tiver eliminado antes). Pode fixar anotações a partir do passo de importação de dados das mordidas para as mordidas duplas, etc.

Adicionar posições da mordida bucal

Nome da mordida bucal:

Mordida

Selecionar digitalização mordida bucal:

☒ BSP_2017_1030_model_bite

☐ Digit. mordida bucal dupla (esq. e dir.)

+ Adicionar posição da mordida bucal

Na seção avançada, o usuário pode trabalhar apenas nas mordidas bucais que ainda não têm um posição (se tiver sido excluída antes). Para adicionar um nome de mordida bucal, clique na lista suspensa **Nome de mordida bucal** e selecione um nome. Para renomear o nome da mordida, clique na seção Mordida e renomeie-a. Ao clicar em **Adicionar posição de mordida bucal**, o usuário adiciona uma nova posição de mordida que pode ser vista na tabela de **Posições**.

30.4 Articulação mandibular

A articulação da mandíbula inferior pode ser visualizada por meio da adição do articulador da mandíbula. Essa função não depende da importação de uma mordida bucal. As colisões entre os maxilares podem ser mostradas em todas as posições.

Coloque o articulador mandibular na mandíbula clicando na extremidade oclusal entre os incisores centrais mandibulares para posicionar o articulador mandibular.

Dica: Certifique-se sempre de posicionar o articulador e que uma abertura diferente de zero está definida para que seja feito um espaço para a placa ou o desprogramador anterior.

30.5 Remover retenções

Remover retenções é usado para definir a direção a partir da qual a tala será inserida. Com esta função, é possível visualizar as áreas que passam “sob” o modelo (retenções) e podem causar problemas ao inserir a placa nos dentes, principalmente no caso de utilização de materiais rígidos para fabricação. O guia de placa fabricado neste modelo será fácil de instalar.

Articulação do maxilar

?

Mantenha premida a tecla Shift e coloque o articulador clicando no botão esquerdo do rato (de acordo com a figura abaixo). Utilize o cursor para definir a posição da abertura da mandíbula.

Colocação do articulador

Colocar o articulador do maxilar

Remover o articulador

Abertura do articulador

Abertura da mandíbula

5,0 mm

Abrir

Fechar

Avançado

Pode configurar parâmetros avançados do Articulador aqui.

Editar parâmetros do Articulador

Comprimento dos braços

105,0 mm

Comprimento da base

100,0 mm

Ângulo de Balkwill

23,0 °

Repor para Predefinições

Para adicionar um articulador de mandíbula, clique no botão **Posicionar articulador de mandíbula**. O botão **Remover articulador** remove o articulador do software. O controlador de abertura de mandíbula define a distância/deslocamento entre as mandíbulas. Os parâmetros do articulador podem ser ajustadas na seção Avançada. **Repor para predefinições** redefine os parâmetros para as posições padrão.



A visualização do articulador mostra ao usuário o quanto a mandíbula abriu. A distância é indicada na etiqueta.

Remover Retenções

Selecione uma direção de inserção do modelo de tala arrastando o widget na imagem 3D ou defina a direção de inserção a partir da vista atual da câmara. As áreas vermelhas serão preenchidas para uma inserção suave.

Caminho para inserção da Tala

Definir Direção da Inserção

Definir Direção da Inserção a partir da vista

Repor Direção da Inserção

Avançado


Pode definir mais parâmetros aqui.


Definições da Retenção

Máxima Retenção permitida
0,00 mm

Como trabalhar com a direção de inserção:

- Selecione o **modelo** no qual irá trabalhar
- Clique em **Definir direção de inserção**
- A direção de inserção deve ser ajustada usando o **anel de rotação** para minimizar as retenções
- A direção de inserção também pode ser definida clicando em **Definir direção de inserção pela visualização**
- **Redefinir direção da inserção** irá **restaurar** o status original da seta
- A **Máxima Retenção permitida** permite que o usuário defina os valores da retenção.

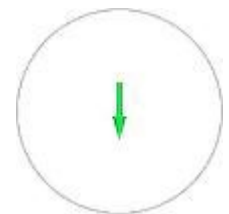

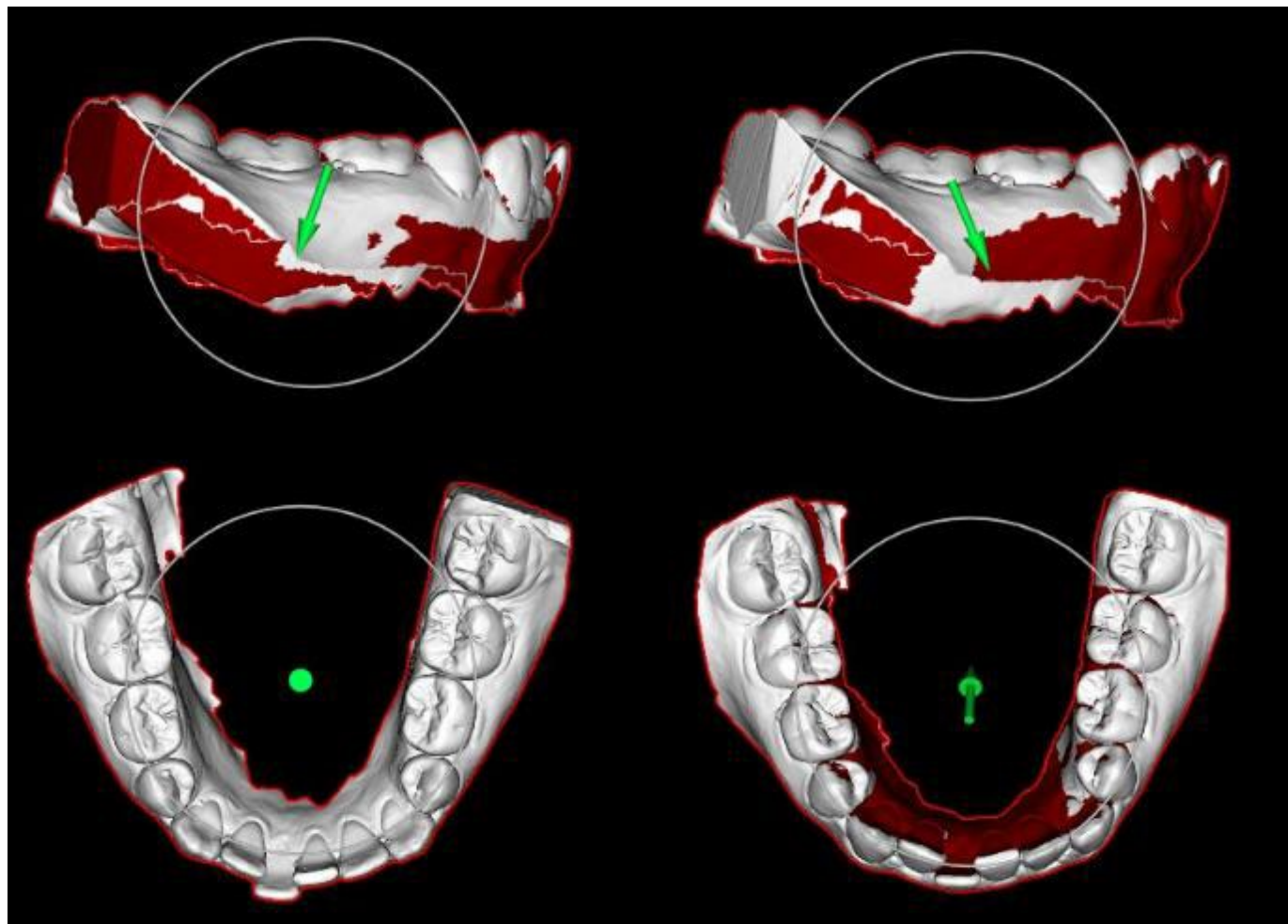


Se a direção de inserção for definida incorretamente; **a seta fica vermelha**, o usuário receberá a mensagem **A direção de inserção é inválida** e não poderá prosseguir. É necessário definir a direção correta para prosseguir.

30.6 Adicionar desprogramadores anteriores

O desprogramador anterior é uma placa oclusal plana com um bloco acrílico anterior para desocluir os dentes posteriores. Já que o corpo conta com um reflexo protetivo para evitar a pressão adicionada aos dentes anteriores, quando esta placa é utilizada, menos pressão é exercida. Os desprogramadores anteriores Blue Sky Plan são representados por formas STL que o usuário pode manipular.

Observe que os parâmetros de comprimento sempre medem a distância “perpendicular”. Por exemplo, o comprimento anterior e posterior medem apenas a distância ao longo do eixo Y (verde no aplicativo), conforme mostrado na figura, mesmo que o arrasto 3D seja visualizado abraçando o lado do desprogramador. S é o ponto central do suporte (o plano na parte superior do desprogramador). O ângulo de orientação é o ângulo entre a projeção paralela lateral da posição original do vértice posterior B, o centro do suporte S e a posição atual do vértice posterior B. Observe que alterar este parâmetro irá afetar todas as partes do desprogramador, exceto o suporte em si.

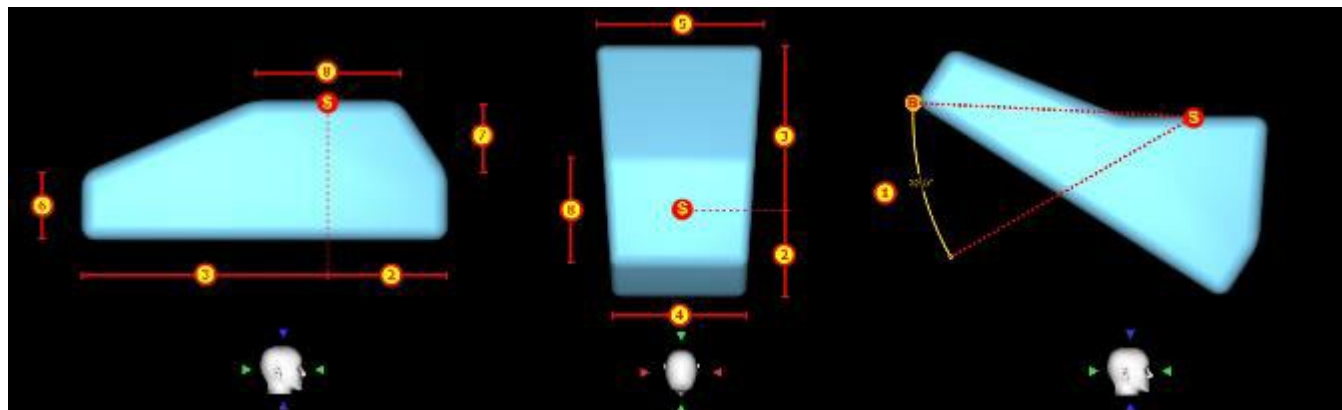

Desprogramador anterior
?

Pode adicionar o Desprogramador Anterior à Tala e definir a sua posição e parâmetros. Clique uma vez no modelo do Desprogramador para ativar arrastadores de parâmetros e clique duas vezes para o habitual widget de manipulação.

Desprogramador anterior

+ Adicionar Desprogramador anterior

✖ Remover Desprogramador anterior

Parâmetros

Ângulo de orientação

1

5,2°

Comprimento anterior

2

4,4 mm

Comprimento posterior

3

6,1 mm

Largura anterior

4

8,0 mm

Largura posterior

5

13,4 mm

Espessura

6

4,0 mm

Altura do suporte

7

2,0 mm

Largura do suporte

8

3,9 mm

Predefinições

▼

📁

⋮

Para adicionar um desprogramador, clique no botão **Adicionar desprogramador anterior**. O usuário pode selecionar o formato do desprogramador anterior a partir de uma lista existente, além de ajustar sua localização e manipular suas medidas. **Remover desprogramador anterior** o botão remove o desprogramador anterior.

Para criar um novo modelo predefinido que lhe permitirá salvar os parâmetros atuais do desprogramador, clique no botão **Salvar**. Uma nova janela de diálogo será exibida com a opção **Inserir nome do modelo predefinido**. Salve seu modelo predefinido e visualize-o em seus modelos.


BlueSkyBio

BS-LS-IFU-06-pt Ver 11


Blue Sky Plan®

2026-10

230

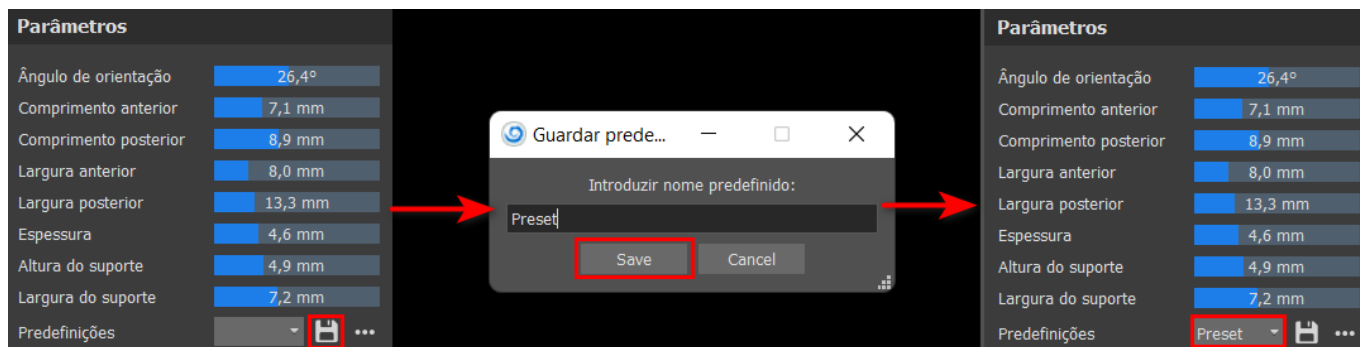


Para mais opções, clique na opção..... Aqui, você poderá excluir seus modelos predefinidos, além de importar/exportar outros modelos.

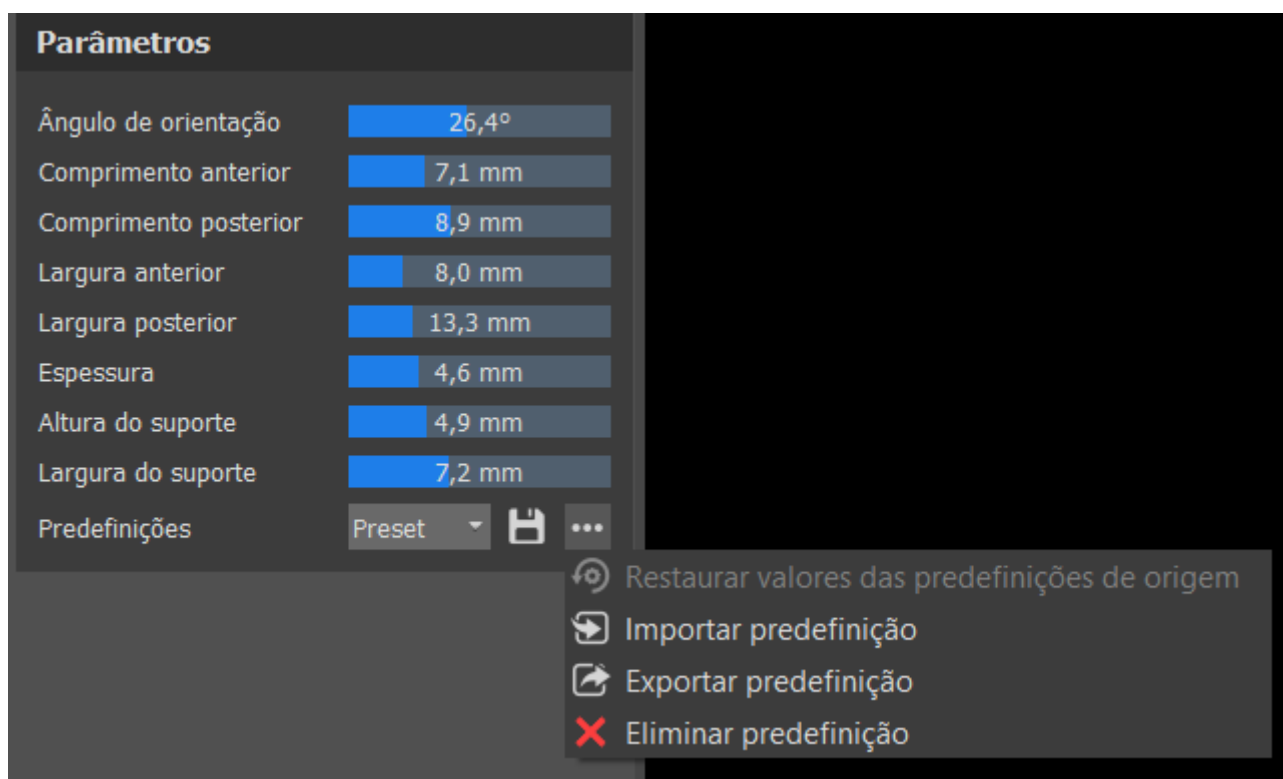

30.7 Desenhar curva da placa

Pressione e segure a tecla **Shift** e adicione um ponto de curva no modelo selecionado clicando com o botão esquerdo do mouse. Também é possível segurar a tecla **Shift** e pressionar **botão esquerdo do mouse** e arrastar o mouse sobre a superfície do modelo. A forma da curva pode ser editada usando pontos de controle individuais nela. Antes de gerar um guia de tala, é uma boa prática verificar sua forma nesse modo. Se necessário, você pode excluir a curva clicando no botão **Limpar curva** e começar a desenhá-la novamente.

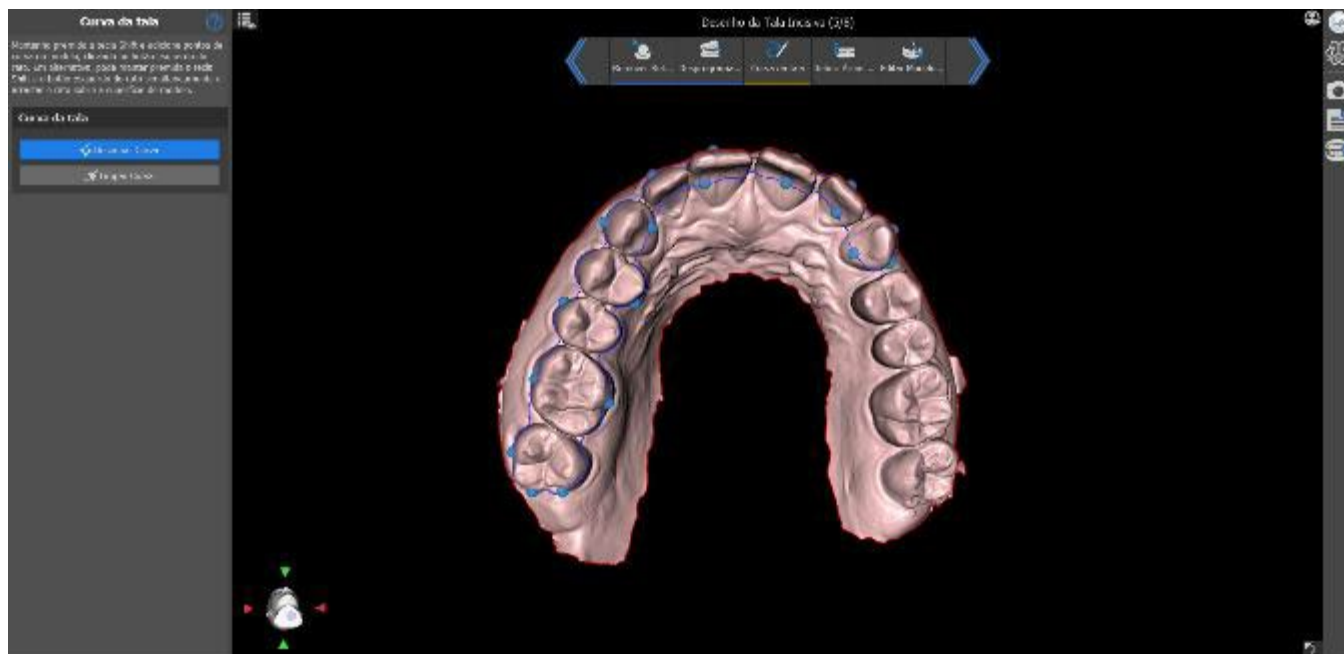

30.8 Definir áreas elevadas



O método de **Elevação das pontas dos cúspides antagonista** (1) busca estender a região delimitada pela curva até a mandíbula antagonista. O **Acompanhamento do raio das pontas do cúspide** determina a inflação virtual das pontas dos cúspides antagonistas que serão utilizados para a fabricação do formato da placa. Um valor maior irá resultar em uma parte oclusal mais plana, enquanto valores mais baixos irão resultar em uma indentação mais aguda na parte oclusal da placa. Este valor pode ser definido clicando no controlador deslizante.


Elevar ao plano (2) aumenta a região delimitada pela curva para o plano visualizado.

Elevação por Rampa (3) eleva a região delimitada pela curva até o plano visualizado com a possibilidade de definir o ângulo da rampa.

Deslocamento por espessura mínima (4) este método infla a região delimitada pela curva pelo valor mínimo de espessura. O deslocamento e a espessura mínima da placa podem ser definidos pelos controles deslizantes na seção de Configurações **Gerais da Placa**.

O **deslocamento e a espessura mínima** da placa podem ser definidos pelos controles deslizantes nas **Configurações de fluxo de trabalho** na etapa **Observações** ou em cada métodos de **Definir área elevada**.

Para criar uma pré-visualização da placa, selecione o **Método de elevação de área**.

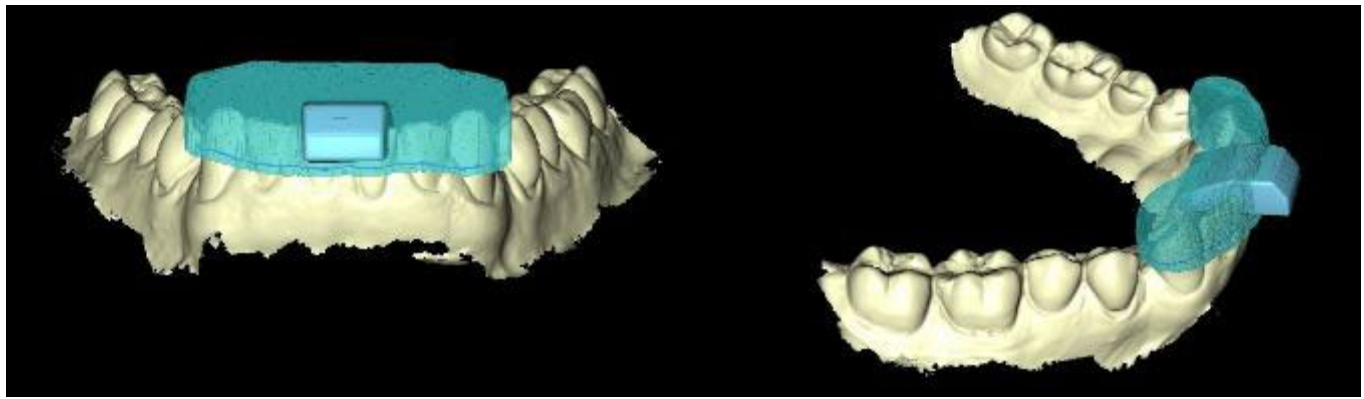

30.9 Editar modelo da placa




O controle deslizante de **Densidade** define a suavidade da malha ao aplicar um pincel se o Refinamento adaptativo estiver ligado.


O software Blue Sky Plan permite que o usuário edite os modelos. Clique no ícone de pincel para selecionar a funcionalidade para eliminar as áreas com problema. O **Pincel Adicionar/Remover** (2) é usado para adicionar/remover o material da superfície. O **Pincel de deformação local** (3) deforma superfície num ponto local. O **Pincel de suavização** (1) pode ser usado para modificações finais e polimento da superfície. **Resolve colisões** (4) tenta eliminar automaticamente as colisões atuais. O controle deslizante **Desvio** define o deslocamento para os modelos selecionados.

Usar refinamento adaptativo permite uma criação de malha melhor e mais suave ao usar a escova.

Corte Plano (5) permite ao usuário cortar um modelo por um plano de corte. O plano pode ser movido e girado e a direção de corte pode ser invertida. O plano pode ser redefinido para a posição horizontal padrão. Ambas as partes do modelo de corte podem ser mantidas (um novo modelo de restante de Corte Plano será criado).

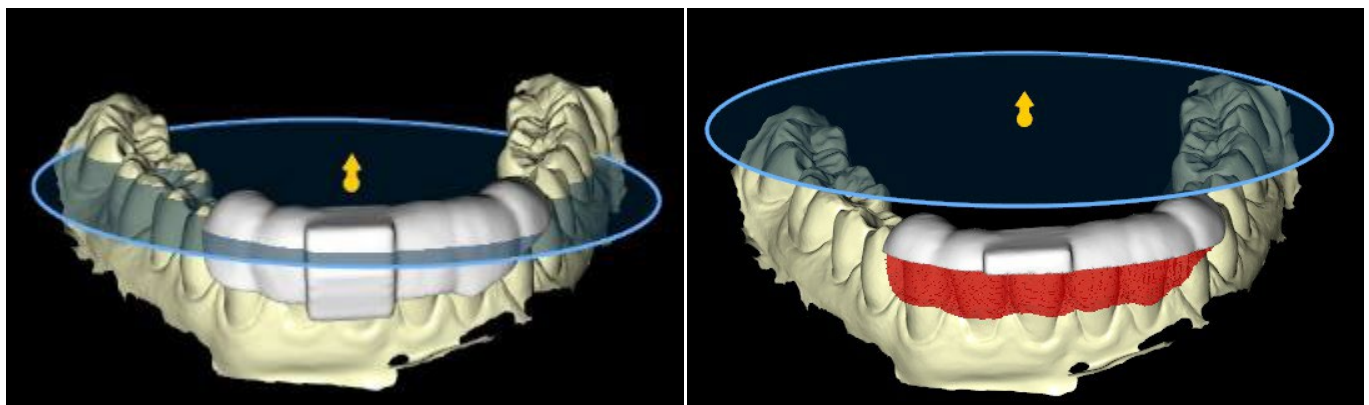


Tudo abaixo do corte plano será removido

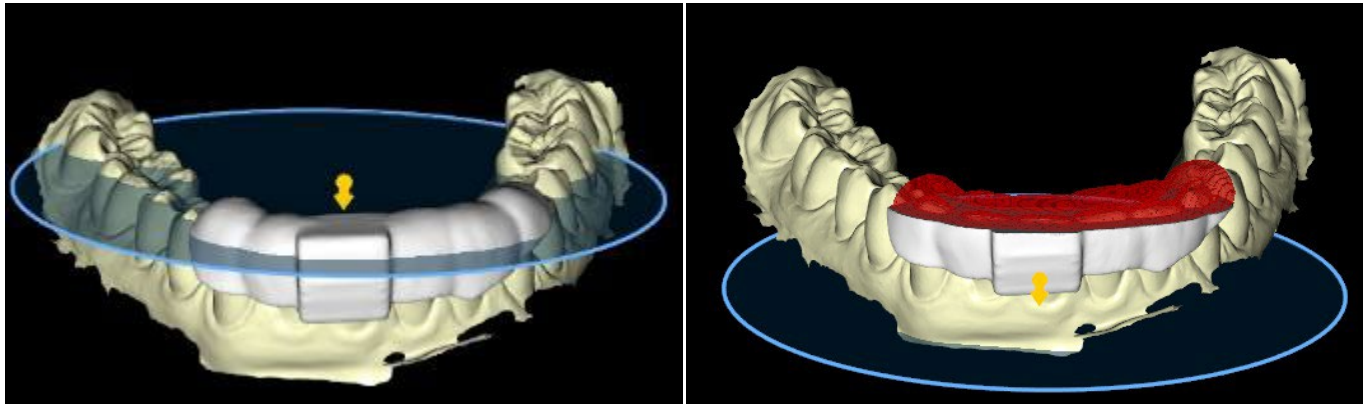

Tudo acima do corte plano será removido

30.10 Exportar e carregar para BioBigBox

A etapa final, Exportar, é comum para todos os tipos de planejamento. A única diferença está no que pode ser exportado neste passo final, modelos **OBJ** ou **STL** (3). **Exportar como arquivos separados** (4) exporta cada objeto selecionado para um arquivo separado. Caso contrário, os objetos são exportados como um único arquivo. O usuário pode escolher qual modelo será exportado (1) e também verificar o **Custo de Exportação** dos modelos, bem como os créditos disponíveis em sua licença (2). Após a seleção, os modelos serão exportados clicando no botão **Exportar** (5). Tanto o projeto (6) quanto os modelos selecionados (7) podem ser carregados na pasta de tratamento **BioBigBox**.

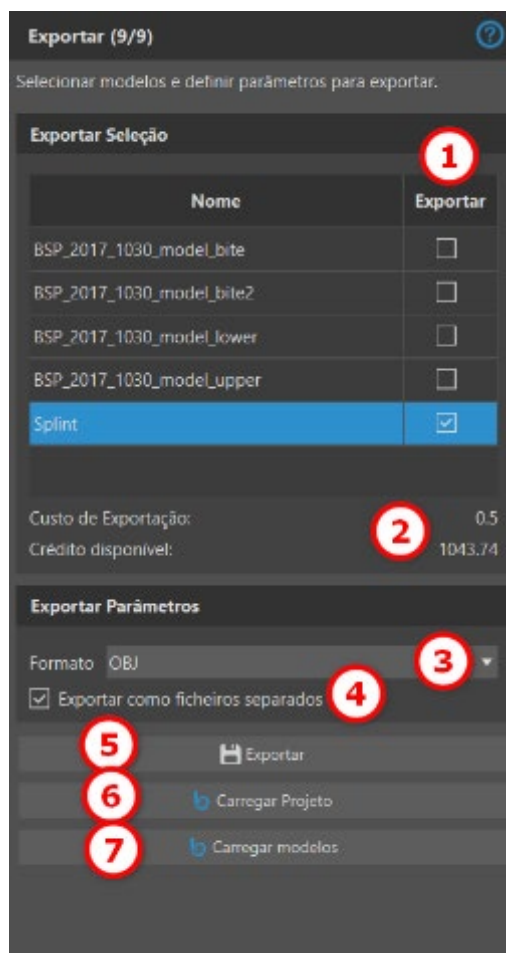

30.11 Atalhos do teclado

O usuário pode selecionar 2 visualizações - **perspectiva** e **ortográfica**. Para selecionar entre essas 2 vistas, clique duas vezes no **widjet de orientação da cabeça** ou **número 5**. É possível utilizar os atalhos do teclado **1, 3 e 7** ou **Alt 1, 3 e 7** para alternar entre as visualizações.


Os atalhos do teclado **4, 6, 2 e 8** movem a câmera em 15°.

30.12 Atalhos de manipulação



Os atalhos permitem que o usuário manipule os modelos visíveis na visualização 3D.

Atalhos de Manipulação	
Manter R + LMB	Rodar
Manter T + LMB	Transladar
H	Ocultar Arrastador

R + botão esquerdo do mouse rotaciona o modelo, **T + botão esquerdo do mouse** move o modelo, e **H** oculta o arrastador.

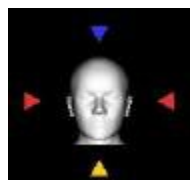

É possível orientar o modelo a partir de diferentes perspectivas usando o widget de orientação

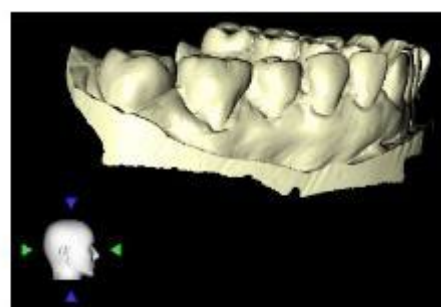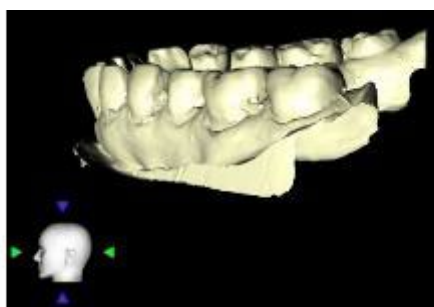



30.13 Painel de visibilidade

O painel de visibilidade permite que o usuário trabalhe com objetos 3D para definir:

- visibilidade
- opacidade
- renomear
- excluir

- alterar a cor
- colisões 


Para renomear um modelo, clique no botão **Renomear** (1), escreva um novo nome (2) e clique no botão **verificar** ou **X** (3) para confirmar.

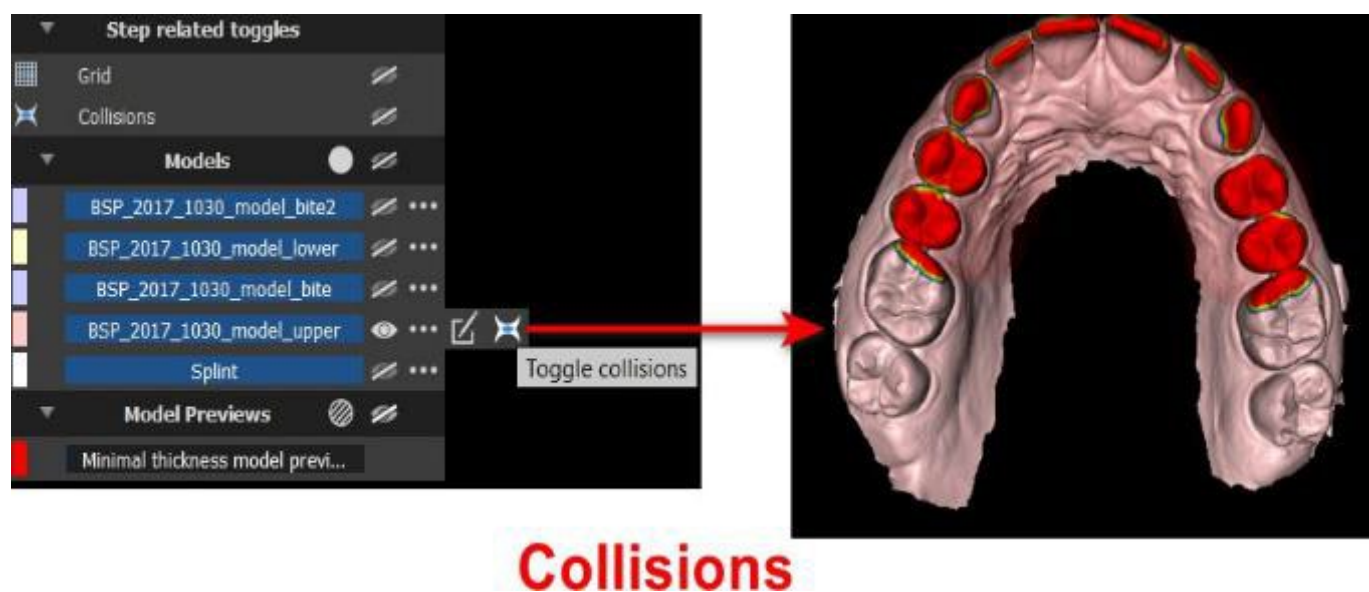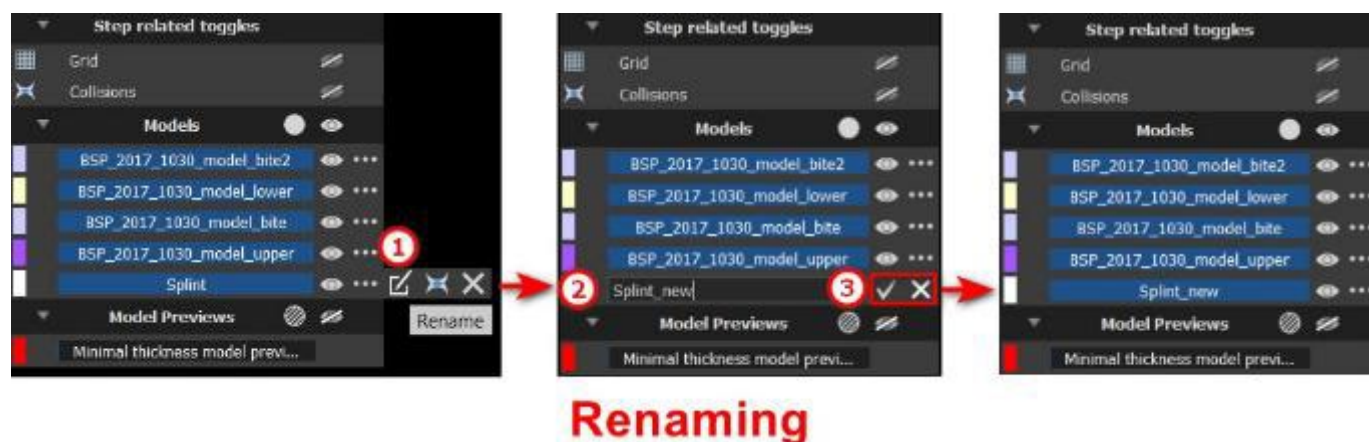


Para alterar a cor do modelo, selecione a cor do modelo em questão (1) e selecione qualquer cor do conjunto de “cores básicas” (2), depois clique no botão **OK** (3).



O indicador de escala da grade é mostrado no canto superior direito e pode ser alternado no painel de Visibilidade. O nome do paciente pode ser ocultado/mostrado clicando no ícone mostrado na imagem.

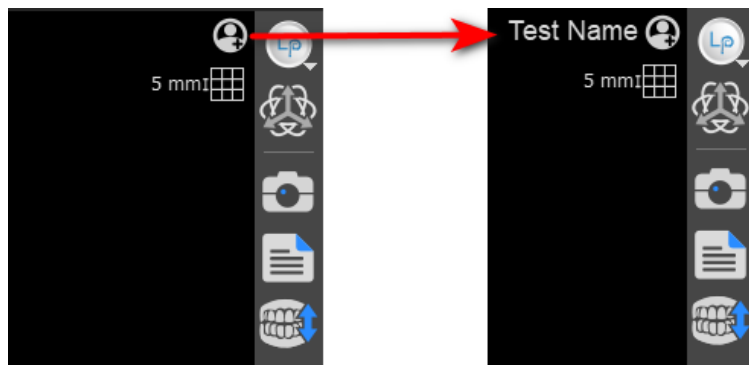


30.14 Módulo de edição

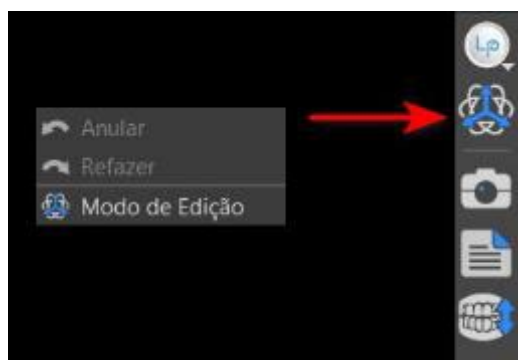

O usuário pode pular do Assistente para o Modo de Edição clicando com o botão direito **do mouse** -> **Modo de Edição** ou clicando no ícone no painel lateral. O Modo de Edição não está disponível nas etapas Curva da tala, Definir áreas elevadas e Editar modelo da placa.

Escolha uma das funções de edição suportadas na barra de ferramentas à esquerda (1).


Para sair do modo, clique no botão **Sair do modo de edição** (2).

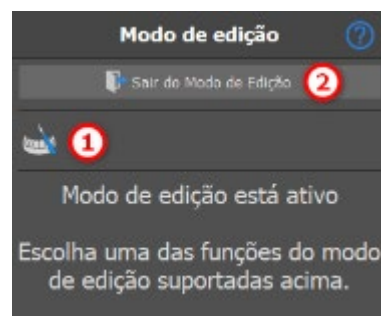

30.15 Editar modelo

consulte a seção 28.10

30.16 Observações e Medidas

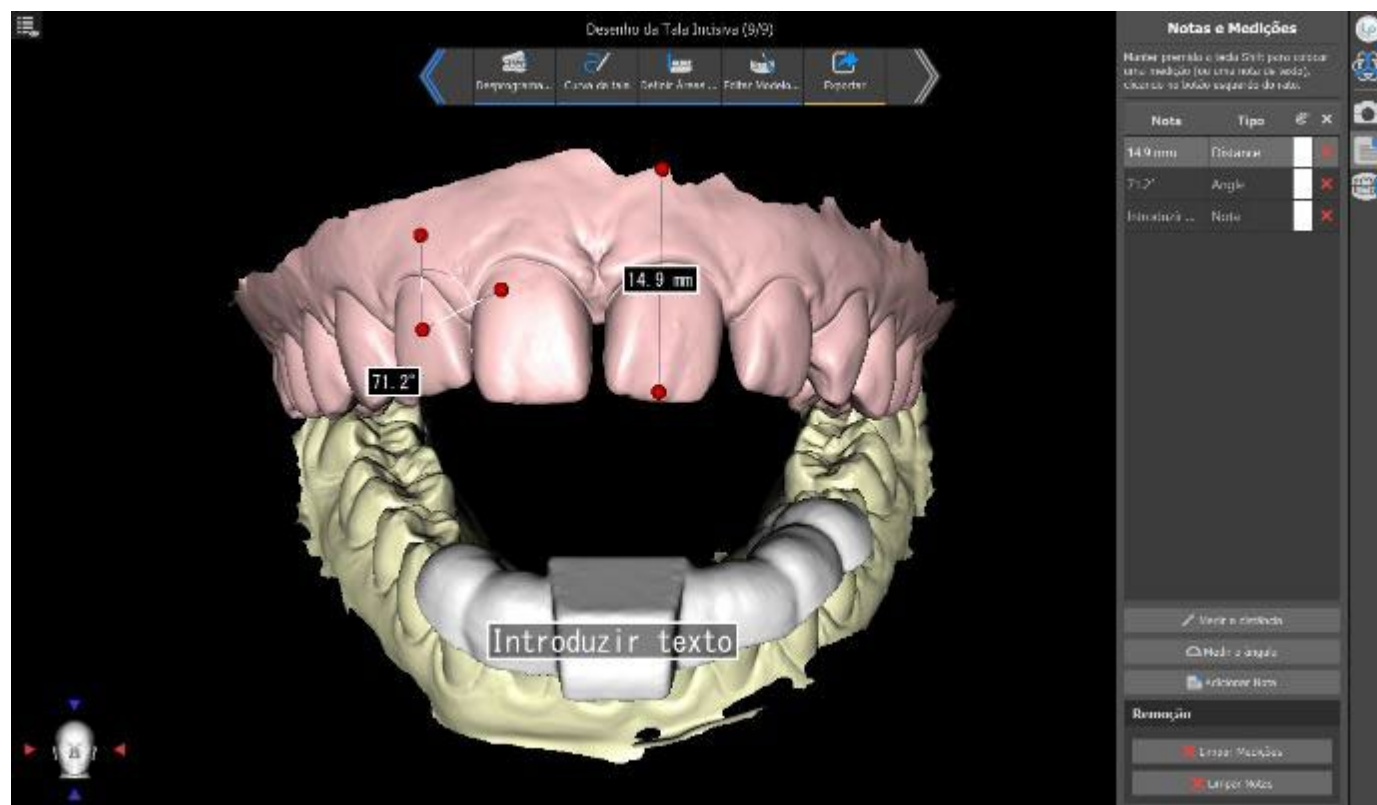


Selecione o botão **Medir distância** para fazer quaisquer medições 3D. Clique no botão esquerdo do mouse com o ponteiro no modelo para marcar o ponto inicial da distância a ser medida e clique novamente no modelo para marcar o ponto final da distância medida. Para corrigir a medida, você pode pegar um dos pontos finais e movê-los.

Selecione **Medir ângulo** para medir ângulos. Clique no botão esquerdo do mouse com o ponteiro no modelo e repita o processo duas vezes para obter um ângulo. Para corrigir a medida, você pode pegar os pontos que especificam o ângulo.

Selecione o botão **Adicionar notas** para adicionar uma nota no modelo. Segue a tecla Shift e aperte o botão esquerdo do mouse para inserir uma nota de texto. Por padrão, a mensagem Inserir texto é exibida, mas o usuário pode editá-la com um duplo clique.

O texto de uma sobreposição pode ser alterado clicando no campo **Nota**. A cor de vários tipos de itens também pode ser alterada no painel clicando no campo **Cor**. Para remover as medições, clique no botão  no campo **Nota** ou clicando nos botões **Limpar medições** ou **Limpar notas**.

30.17 Criar uma captura de tela

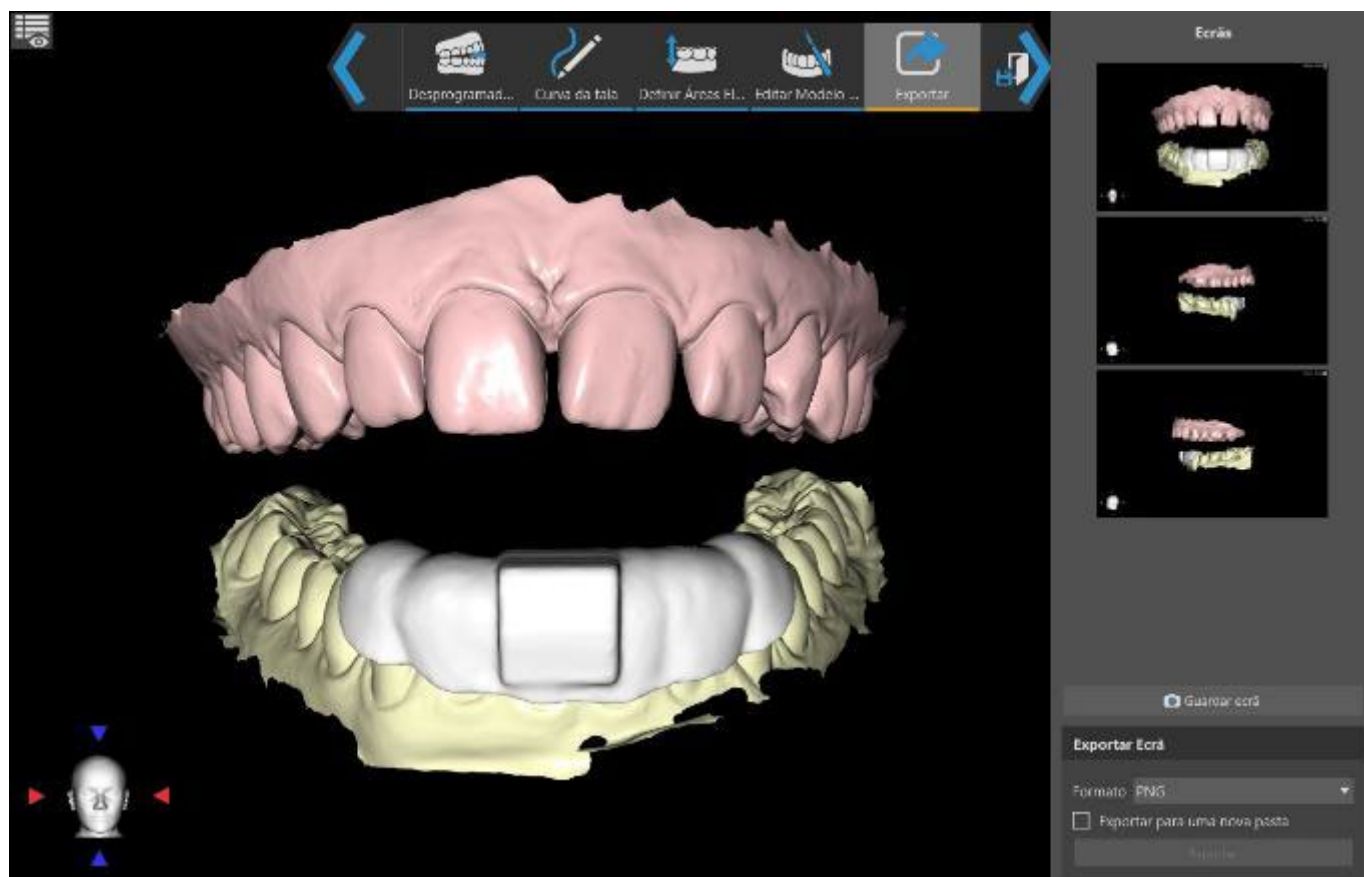


O painel de Captura de tela pode ser usado para tirar uma captura de tela com o botão localizado no canto superior direito da barra de ferramentas. Capturas de tela são tiradas clicando no botão **Capturar tela**. O usuário pode exportar capturas de tela no formato correspondente (PNG ou JPG). Capturas de tela podem ser excluídas usando o botão direito do mouse para selecionar **Remover**. Clicar em **Exportar** irá exportar as capturas de tela selecionadas.

30.18 Movimento da mandíbula

Consulte a seção 28.4


30.19 Mostrar dimensões

No módulo de placas, é possível ativar as dimensões para objetos 3D. Clique com o botão direito do mouse no modelo e selecione **Alternar dimensões** no menu de contexto. As dimensões são ocultadas ao clicar em Alternar dimensões novamente.

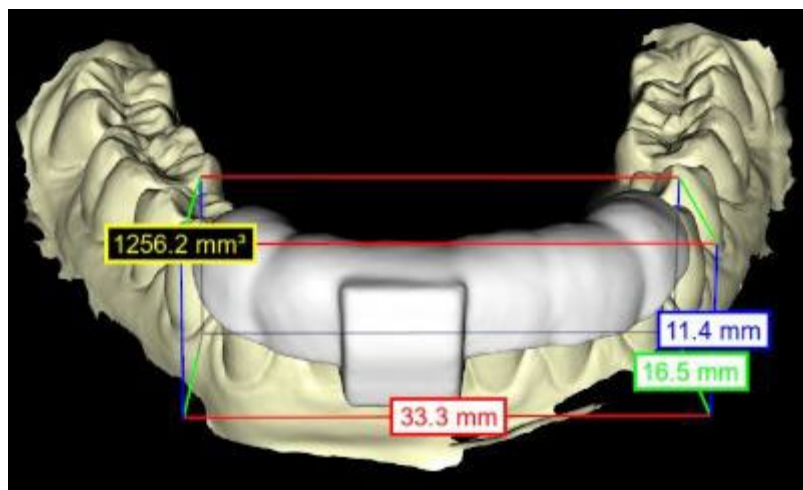

31 Preferências

O Blue Sky Plan® possibilita salvar as configurações do usuário para o programa e seu ambiente. Você marca a seleção de configurações com a opção de menu "Ferramentas > Preferências ...".

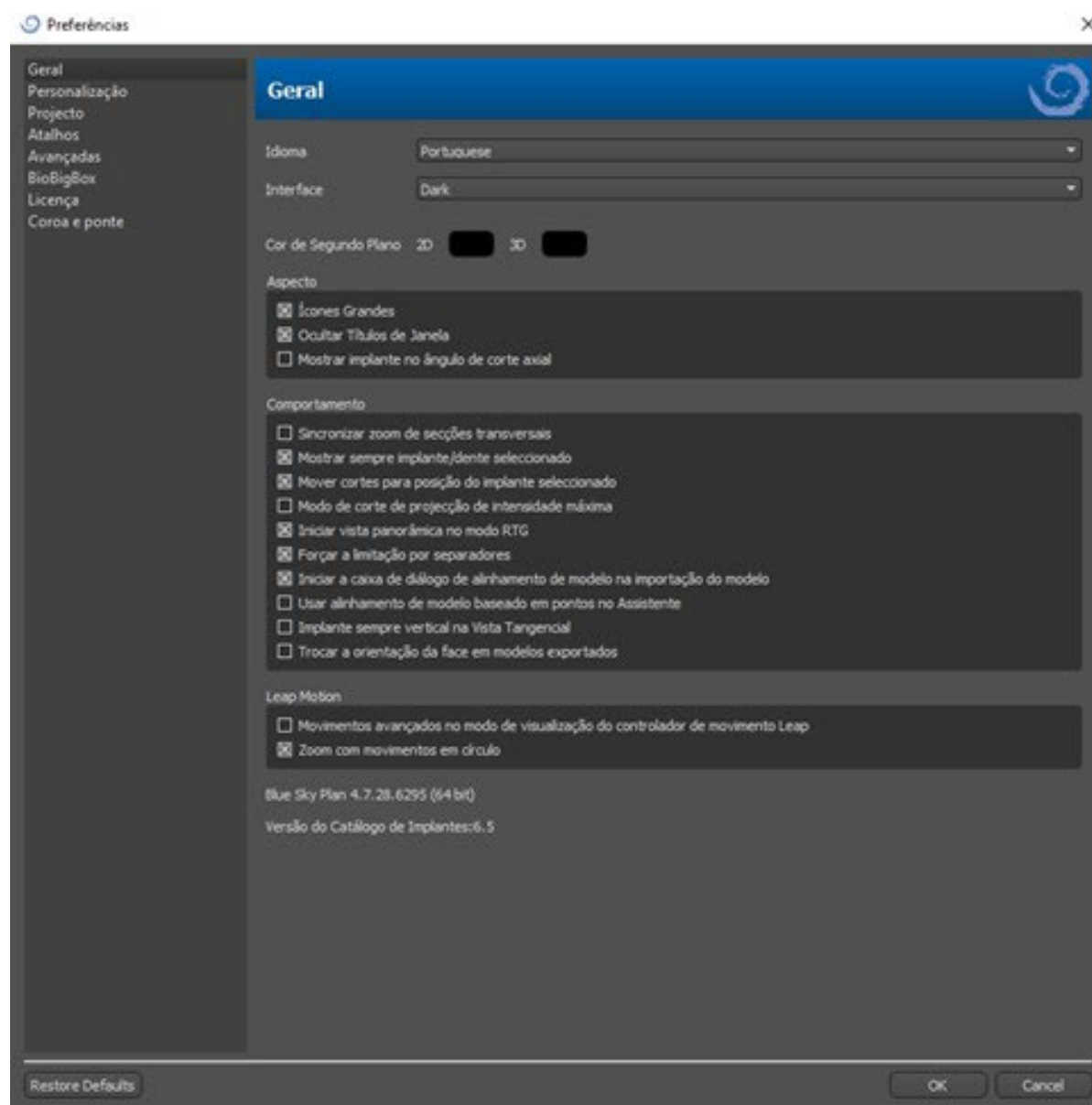

31.1 Geral

- Ícones grandes - define o tamanho dos ícones nas barras de ferramentas
- Ocultar títulos da janela - define a visibilidade dos títulos das janelas com dados de visualização
- Mostrar implante para ângulo de fatia axial – exibe o valor do implante para o ângulo de fatia axial
- Sincronizar o zoom de seções transversais - se essa opção estiver ativada, mover e alterar a régua em qualquer seção transversal da fatia também altera a régua nas outras seções transversais da fatia

- Sempre mostrar implante / dente selecionado - garante a visibilidade do implante ativo quando os implantes / dentes são totalmente transparentes
- Mover as fatias para a posição do implante selecionado - clicar no implante define as posições das fatias ortogonais e normais nos implantes selecionados.
- Modo de máxima intensidade de projeção de fatia - esse botão para alternar o modo de exibição de fatia oferece duas variantes: MIP (projeção de intensidade máxima) e raio-X.
- Iniciar visão panorâmica no modo RTG – na janela panorâmica, os dados abertos são visualizados no modo RTG (=composto)
- Forçar encaixe das guias – desabilita a opção de deixar os painéis em cascata um sobre os outros
- Iniciar caixa de diálogo de alinhamento do modelo na sua importação – o processo de alinhamento do modelo será feito automaticamente quando o modelo for importado
- Usar alinhamento do modelo baseado em pontos no Assistente – ajuste manual utilizando os pontos e volumes correspondentes no Assistente
- Implante sempre vertical na vista tangencial – qualquer rotação do implante exibirá o implante verticalmente na janela tangencial
- Trocar a orientação da face nos modelos exportados – os modelos exportados possuem a orientação de face invertida em relação à malha
- Gestos avançados no modo de visualização de salto - permite gestos avançados de manipulação de cena no modo de visualização de salto. Um controlador de saltos é necessário.
- Zoom com gestos em círculo - alterna o efeito do gesto em círculo entre o controle deslizante e o controle de zoom.

31.2 Personalização

- Atraso do arrastador - o tempo até o arrastador desaparecer após o cursor do mouse se afastar do implante ou dente
- Qualidade de importação do modelo – define a qualidade do modelo importado
- Exportar formato do arquivo – habilita a escolha do formato de exportação padrão
- Modo de colisões do modelo – permite alternar entre diversas vistas de colisões de modelo
- Atraso da imagem em vídeo – ao exportar os planos da etapa dentro do módulo Ortodôntico, será definido o intervalo de tempo entre as imagens individuais do vídeo exportado
- Grade 3D (cor, tamanho, espaçamento, espessura) – as propriedades da grade 3D do cenário
- Eixo – a espessura do eixo do implante/corpo digitalizado

31.3 Projeto

- Salvar projeto automaticamente - salva o projeto automaticamente no intervalo de tempo escolhido

31.4 Atalhos

Nestas seções são definidos os atalhos para diversas ações.

- Os usuários podem adicionar ou alterar o atalho clicando na janela “Atalho do teclado” e pressionando as teclas ou combinações de teclas. Para confirmar o atalho recém-definido, é necessário clicar no botão “Definir”.

31.5 Avançado

- Registro - permite que as informações sobre a execução do programa sejam armazenadas em um registro. O registro pode ser exibido clicando no botão "Mostrar registro", e seu conteúdo pode facilitar ao fabricante do programa a solução de problemas que surgem durante a execução do programa, em configurações específicas de hardware.
- Registrar erros do OpenGL – habilita o registro de erros do OpenGL
- Configurações do motor da Web – escolha o quanto o navegador Web padrão usa da aceleração do GPU
- Módulo de interface aberta – possibilita escolher o módulo padrão usado para abrir os dados em duplo clique na interface
- Verificação automática de atualizações - todos os dias, quando é iniciado pela primeira vez, o aplicativo verifica se você está usando a versão mais recente e, se não, oferece a instalação da atualização.
- Exibir dicas e mensagens do Blue Sky Bio – exibe a barra contendo dicas e mensagens
- Abrir vídeos em navegador externo – permite abrir vídeos de tutoriais no navegador externo
- Usar proxy do sistema – habilita os servidores proxy configurados no sistema a serem utilizados
- Antialiasing – habilita a suavização de bordas dos modelos
- Habilitar serviço LabPronto – exibe o serviço LabPronto
- Exibir aviso quando as configurações do Guia de Perfuração do Software forem alteradas – exibe a mensagem de aviso se os parâmetros do Guia de Perfuração do Software forem alteradas
- Mostra aviso para colisões entre o os Guias de Perfuração do Software e o modelo – exibe uma mensagem de aviso se o Guia de Perfuração do Software colidir com o modelo
- Executar detecção do nervo no guia cirúrgico automaticamente – a detecção automática do nervo é realizada para ambos os forames no Assistente

31.6 Guia Cirúrgico

Nesta seção, as diferentes partes do guia cirúrgico podem ser ajustadas.

- Guia de Perfuração do Software – Distância (por exemplo: a distância do pilar do implante) e espessura da parede
- Guia Cirúrgico – Deslocamento (por exemplo: a distância entre o modelo e o guia cirúrgico)
- Janelas no Guia Cirúrgico – Largura, altura e profundidade, janela a cada x dentes
- Cilindros de metal – Altura e largura do lábio (para cilindros de metal personalizados)
- Guia GRS (disponível em "Arquivo > Exportar para > Guia GRS") – Diâmetro dos furos
- Modelo gerado – ajusta da Altura Base, em caso de uso da função Fechar ou Modelo Vazio
- Braços dos pinos de articulação – Largura e altura (consulte o capítulo 21)
- Implante para o dente (lado oclusal) – ao alinhar o dente ao implante, a Distância pode ser ajustada
- Retenção – direção do caminho de inserção e retenção máxima permitida (consulte o capítulo 17)
- Modo endodôntico – consulte o capítulo 18

31.7 Brocas de corte BSB direto

Essas configurações aplicam-se à solução Guia Cirúrgico de corte direto BSB somente.

31.8 Ortodontia e limites de movimento do dente


Consulte o capítulo 25.

31.9 Coroa e Ponte

Consulte o capítulo 27.

32 Atualizações automáticas

O Blue Sky Plan® possui a opção de verificar automaticamente a disponibilidade de uma versão mais recente do programa. Faz isso uma vez por dia, quando é iniciado pela primeira vez; isso pode ser desativado na caixa de diálogo de configurações do programa, na guia "Avançado", com Verificação automática de atualizações. Esse recurso pode ser chamado manualmente com a seleção do menu "Ajuda> Verificar atualizações ...

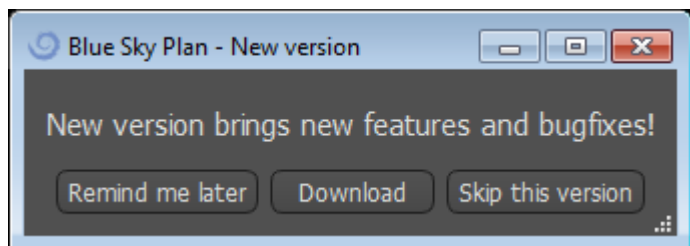

Se uma nova versão estiver disponível, o programa oferecerá ao usuário as opções de adiar a atualização para mais tarde, baixar e instalar a atualização imediatamente ou ignorar completamente essa atualização. O download da atualização é executado diretamente no ambiente do aplicativo e, para instalá-lo, o Blue Sky Plan® deve desligar e iniciar a instalação; portanto, feche os projetos abertos antes de verificar se há uma nova versão e instalar a atualização.



33 Notas de Rodapé

33.1 Instruções de uso para alinhadores prescritos Blue Sky Bio

Cuidado: a lei federal dos EUA restringe a venda deste produto por ou sob encomenda de um dentista ou médico.

Indicações de uso

O Blue Sky Bio Aligners é uma série de aparelhos plásticos transparentes e leves, indicados para o tratamento de más oclusões dentárias em pacientes com dentição permanente (ou seja, todos os segundos molares). Utilizando uma série de movimentos incrementais dos dentes, posiciona sequencialmente os dentes por meio de força suave contínua.

Descrição do dispositivo

Os alinhadores Blue Sky Bio são uma série de alinhadores de plástico transparente que oferecem uma solução para tratamento ortodôntico estético, utilizando um conjunto de alinhadores removíveis para corrigir más oclusões dentárias. Um profissional de saúde bucal (por exemplo, ortodontista ou dentista), usando um computador pessoal padrão, prescreve os Blue Sky Bio Aligners com base em uma avaliação dos dentes do paciente, determina o curso do tratamento com o sistema, tira moldes dos dentes do paciente e depois importa uma versão digital do molde (ou modelo) no software e, em seguida, no software, alinha os dentes como desejado em diferentes fases do tratamento. Os modelos das fases são exportados do software de pedidos e enviados para o Blue Sky Bio. O Blue Sky Bio produz uma série de alinhadores plásticos destinadas a realinhar gradualmente os dentes do paciente de acordo com a prescrição médica no software de pedidos. O médico prescritor cria os modelos usados para imprimir os alinhadores. A Blue Sky Bio produz alinhadores formadas de plástico transparente termoformado. Os alinhadores são enviadas de volta ao profissional de saúde dentária, que as fornece ao paciente, confirmando seu ajuste e design. Durante o tempo, os alinhadores são fornecidos sequencialmente ao paciente pelo profissional de saúde dental para mover gradualmente os dentes-alvo para a posição projetada. O dentista monitora o tratamento desde o momento em que o primeiro alinhador é entregue até o final do alinhador. Os alinhadores são mantidos no lugar por pressão e podem ser removidas pelo paciente a qualquer momento.

Armazenamento e Manuseio

Armazene os dispositivos em um ambiente seco, limpo e sem poeira na embalagem original a temperaturas moderadas (5 ° C a 40 ° C / 41 ° F a 104 ° F).

Conteúdo da caixa

A caixa contém os alinhadores para o paciente identificados pelos adesivos nas embalagens que contêm os alinhadores. Estes foram feitos a partir dos modelos que o profissional enviou para o Blue Sky Bio. Se em qualquer visita ao consultório o alinhador se encaixar incorretamente, digitalize o paciente, repita o processo de construção/pedido e envie ao Blue Sky Bio um novo modelo para nova confecção do alinhador.

Os alinhadores são entregues limpos, mas NÃO ESTÉREIS, em uma embalagem. A embalagem possui um adesivo que identifica o paciente e o número de alinhador. O paciente deve ser instruído a limpar o alinhador com creme dental e uma escova de dentes todos os dias. Os dentes devem ser escovados antes de inserir o alinhador.

33.2 Instruções de uso de sistema computadorizado de braquetes ortodônticos

Cuidado: a lei federal dos EUA restringe a venda deste produto por ou sob encomenda de um dentista ou médico.

Indicações de uso

O sistema de braquete ortodôntico computadorizado Blue Sky Bio é um sistema de software destinado ao uso como auxílio no planejamento de tratamento ortodôntico para corrigir más oclusões em pacientes ortodônticos. Para uso por profissionais de odontologia treinados em tratamento ortodôntico, incluindo análises radiográficas e planejamento de tratamento. O sistema de braquete ortodôntico computadorizado Blue Sky Bio é destinado ao uso com braquetes disponíveis no mercado atualmente usados no tratamento ortodôntico padrão. O produto final é uma guia de colagem indireta para uso do cirurgião-dentista na colocação de vários braquetes ao mesmo tempo. A impressão aditiva das guias de colagem indireta deve ocorrer apenas em um centro de impressão validado. Cada centro de impressão validado deve ser um fabricante de contrato registrado e listado na Blue Sky Bio, conforme documentado no FDA de acordo com o Registro e a listagem de estabelecimentos de dispositivos (consulte a CFR, parte 807).

Descrição do dispositivo

O dispositivo consiste em software proprietário que permite a colocação de braquetes ortodônticos virtuais em modelos 3D fornecidos pelo clínico. Os modelos físicos são escaneados e convertidos em modelos virtuais no software. Uma guia de colagem indireta feita de resina é produzida. Os braquetes ortodônticos físicos são inseridos na guia de colagem indireta. A guia ajuda na colagem precisa dos braquetes, duplicando a posição dos braquetes virtuais no software de planejamento. A guia é produzida usando dois métodos alternativos.

Um método utiliza o modelo virtual do modelo do paciente com braquetes virtuais. A guia de colagem indireta é projetada e impressa como um negativo do modelo virtual com os braquetes no lugar. A impressão da guia de colagem indireta deve ocorrer apenas em um estabelecimento registrado pelo órgãos regulatórios do país.

O segundo método utiliza um modelo de paciente impresso com marcadores indicando a posição dos braquetes. Os braquetes reais são colados ao modelo nas áreas marcadas e a guia de colagem indireta é termoformada por pressão sobre o modelo que captura os braquetes.

Ambos os métodos resultam em uma guia de colagem indireta de resina com braquetes anexados à guia de acordo com a posição do braquete planejada no software. O clínico insere a guia com os braquetes na dentição do paciente, permitindo o posicionamento e a adesão precisos dos braquetes. Os braquetes disponíveis comercialmente são usados como parte do sistema, mas não fazem parte do envio.

O software está disponível para download no site da Blue Sky Bio e é usado pela Blue Sky Bio e usuários autorizados. O download inclui o manual de instruções, que também pode ser baixado separadamente no site da Blue Sky Bio. O software requer ativação para usuários autorizados.

33.2.1 Identificação do usuário

O clínico cria os modelos de pacientes a serem digitalizados no software. O clínico cria ou revisa e aprova o plano de tratamento ortodôntico virtual, incluindo as posições do braquete. O software deve ser usado pelo Blue Sky Bio e por entidades autorizadas que fabricam a guia de colagem indireta com base no posicionamento dos braquetes aprovados pelo clínico.

Como usar o sistema de braquetes ortodôntico computadorizado

O profissional dental cria um modelo de dentição do paciente. O modelo é digitalizado e convertido em modelo digital usando qualquer scanner legalmente comercializado para aplicações odontológicas que exportam arquivos STL. Também é possível digitalizar uma impressão física para criar um modelo de paciente virtual. Os dados de modelo importados para uma cópia ativada do Sistema Computadorizado de Braquetes Ortodônticos em um computador padrão.

Um usuário autorizado é necessário para ativar o software. O usuário autorizado é um funcionário da Blue Sky Bio ou um comprador autorizado. Os usuários autorizados seguem as diretrizes de requisitos de especificação determinadas pela Blue Sky Bio para usar o computador e a impressora com o Sistema de braquete ortodôntico computadorizado.

O software possui um banco de dados de modelos 3D de braquetes ortodônticos disponíveis no mercado. Com base nos modelos 3D e no plano de tratamento do paciente, o operador do software identifica o posicionamento ideal dos braquetes. A colocação do braquete é revisada e aprovada pelo dentista. O cirurgião-dentista pode ajustar a posição final do braquete, se desejar.

Fabricação da guia de colagem indireta (IBT)

Dois métodos alternativos são usados para fabricar as guias de colagem indireta.

1. O modelo virtual da dentição do paciente com os braquetes virtuais no lugar é utilizado para criar um negativo do modelo. Este modelo virtual se encaixa no topo da dentição do paciente e também possui cavidades correspondentes ao formato dos braquetes. O usuário define o contorno da guia de colagem indireta no software e um modelo virtual da guia é criado. Este modelo é impresso usando um material novo e não reciclado legalmente comercializado para uso a curto prazo na boca chamado NextDent Ortho IBT utilizando uma impressora 3D que atende às especificações do Blue Sky Bio descritas na seção 16.11.4. A guia é entregue ao médico.

2. Em um método alternativo, um modelo da dentição do paciente com marcadores de posicionamento do braquete é impresso utilizando uma impressora 3D que atende às especificações do Blue Sky Bio descritas na seção 16.11.1.

Os braquetes reais são temporariamente anexados aos marcadores do modelo. Uma folha de resina termoplástica comercializada legalmente, como o Dentsply Essix Ace, é formada por pressão sobre o modelo que captura a dentição e os braquetes do paciente. Qualquer máquina formadora de pressão térmica padrão pode ser usada seguindo as orientações do fabricante das folhas de resina. Uma máquina formadora de pressão é vendida pelo fabricante do Essix Ace. A folha é cortada no meio dos braquetes. Retenções excessivas são removidas e a guia é adequada para ser usada como uma guia de colagem indireta e entregue ao médico.

Uso da guia de colagem indireta (IBT)

Os IBT são dispositivos específicos do paciente, destinados a uso a curto prazo na boca do paciente. A guia de colagem indireta é um guia de posicionamento para permitir ao dentista colocar os braquetes ortodônticos de maneira precisa. A fabricação da guia usando os dois métodos alternativos não altera a maneira como é usada. A chave para o uso clínico da guia é o ajuste na dentição do paciente e a localização dos espaços que seguram os braquetes durante o processo de colagem. O dentista verifica o ajuste preciso da guia na dentição. Além disso, a posição dos braquetes na boca do paciente é verificada para garantir que a localização dos espaços para os braquetes corresponda ao plano de tratamento virtual. Depois de verificada a forma da guia, o dentista insere os braquetes na guia e coloca um material de colagem legalmente comercializado. A etapa final é colocar a guia de volta na boca do paciente para colar os braquetes na dentição do paciente seguindo as instruções do fabricante. Se necessário, o dentista pode ajustar a posição do braquete removendo um ou mais braquetes e usando o posicionamento manual tradicional do braquete. O procedimento é o mesmo para uma guia de colagem indireta impressa ou termoformada.

33.3 Blue Sky Bio Aligner G - Instruções para o paciente

Apenas Rx

A lei federal restringe a venda deste dispositivo a médicos ou sob prescrição médica.

Descrição do dispositivo

O Blue Sky Bio Aligner G é uma sequência de alinhadores ortodônticos removíveis de plástico transparente que movem gradualmente os dentes permanentes do paciente em pequenos incrementos para corrigir um desalinhamento.

Indicações de uso

Blue Sky Bio Aligner G é uma série de aparelhos de plástico transparentes e leves indicados para o tratamento de más oclusões dentárias em pacientes com dentição permanente (ou seja, todos os segundos molares). Utilizando uma série de movimentos incrementais dos dentes, posiciona sequencialmente os dentes por meio de força suave contínua.

Contraindicações

- Não use em caso de alergia a plásticos.

Avisos e precauções

1. Como os alinhadores são usados na boca, pode ocorrer ingestão ou aspiração acidental do aparelho, o que pode ser prejudicial.
2. Mantenha os alinhadores longe da água quente e soluções químicas agressivas.
 - a) Não use limpadores de dentaduras para limpar os alinhadores.
 - b) Não beba líquidos quentes ou coloridos com os alinhadores colocados. Eles podem ficar distorcidos ou descoloridos.
3. Mantenha os alinhadores fora do alcance de crianças e animais de estimação.
4. Quando não estiverem em uso, guarde os alinhadores no recipiente fornecido.
5. Os alinhadores usados fora da sequência podem resultar em atraso no tratamento e complicações, incluindo desconforto do paciente. Sempre use os alinhadores conforme especificado pelo dentista.
6. Podem ocorrer sensibilidade e fraqueza nos dentes durante o tratamento, especialmente ao passar de um passo do alinhador para o próximo.
7. O uso do alinhador pode afetar temporariamente a dicção. Os pacientes geralmente se adaptam rapidamente aos alinhadores em uma ou duas semanas.
8. Pode ocorrer irritação dos tecidos moles da boca (gengivas, bochechas, língua e lábios). Se a irritação persistir, consulte o seu dentista.
9. Evite mascar chiclete ao usar os alinhadores.
10. Não use objetos pontiagudos para remover os alinhadores.

Instruções de uso

Higiene

1. Lave os novos alinhadores com água fria antes do primeiro uso.

2. Limpe os alinhadores antes de cada uso. Use uma escova de cerdas macias e uma pequena quantidade de creme dental. Não exponha os alinhadores à água quente.
3. Lave bem as mãos com água e sabão antes de manusear os alinhadores.
4. Mantenha uma higiene bucal adequada durante o uso e tratamento com os alinhadores.
 - a) Escove e use fio dental após cada refeição, antes de inserir os alinhadores.
 - b) Faça check-ups dentários e consultas de limpeza regularmente durante o período de tratamento com os alinhadores.

Colocação do alinhador

5. Os alinhadores devem ser usados de acordo com as instruções do dentista, geralmente por 20 a 22 horas por dia, pelo número de dias recomendado pelo dentista para cada alinhador em sequência.
6. Manuseie apenas um alinhador de cada vez.
7. Certifique-se de inserir os alinhadores conforme marcado – para uso superior ou inferior. Tanto a parte superior quanto a inferior podem ser inseridas primeiro.
8. Ao inserir o alinhador, empurre-o suavemente sobre os dentes da frente e, em seguida, aplique pressão, usando as pontas dos dedos, nos topos dos molares esquerdo e direito (dentes de trás) até que o alinhador se encaixe no lugar.

Remoção do alinhador

9. Ao remover os alinhadores, use a ponta do dedo na parte interna do molar posterior em um lado da boca para puxar lentamente o alinhador dos molares. Repita o processo do outro lado antes de tentar remover completamente o alinhador. Quando estiver desencaixado dos molares, um leve afastamento dos dentes com as pontas dos dedos deverá permitir a remoção sem danificar o alinhador.
10. Após a remoção, lave o alinhador com água, sacudindo o excesso de água e guarde-o no estojo fornecido.
11. Se você tiver acessórios nos dentes durante o tratamento com alinhadores, tome cuidado para não desalojar os acessórios ao remover os alinhadores

33.4 Blue Sky Bio Aligner G - Instruções para o usuário

Indicações de uso

Blue Sky Bio Aligner G é uma série de aparelhos de plástico transparentes e leves indicados para o tratamento de más oclusões dentárias em pacientes com dentição permanente (ou seja, todos os segundos molares). Utilizando uma série de movimentos incrementais dos dentes, posiciona sequencialmente os dentes por meio de força suave contínua.

Contraindicações

- O Blue Sky Bio Aligner G é contraindicado para pacientes alérgicos a plásticos.

Descrição do dispositivo

Blue Sky Bio Aligner G é uma série de alinhadores de plástico transparente que oferece uma solução para o tratamento ortodôntico estético, utilizando um conjunto de alinhadores removíveis para corrigir más oclusões dentárias.

O Blue Sky Bio Aligner G é impresso em 3D usando Tera Harz Clear, P/N TC-85DAC, resina fotopolimerizável, da Graphy Inc.

O software odontológico utilizado no planejamento e fabricação dos alinhadores é o módulo de software Blue Sky Plan para o Blue Sky Bio Aligner G.

Um dentista (por exemplo, ortodontista ou dentista), usando um computador pessoal padrão, prescreve o Blue Sky Bio Aligner G com base em uma avaliação dos dentes do paciente e determina o curso do tratamento pelo sistema. O clínico tira moldes dos dentes do paciente, preenche um formulário de prescrição e envia os moldes para o laboratório dentário que, por sua vez, digitaliza os moldes e carrega os arquivos .STL dos moldes no software Blue Sky Plan. Esse arquivo digital é uma série de arquivos CAD (.STL) para a construção de modelos que podem ser usados para fabricar alinhadores. Alternativamente, o dentista pode gerar os arquivos digitais digitalizando a boca do paciente diretamente, usando um scanner intraoral e, em seguida, enviar os arquivos para a Blue Sky Bio ou seu laboratório autorizado.

O laboratório dentário ou o clínico projeta uma série de modelos digitais e moldeiras plásticas destinadas a realinhar gradualmente os dentes do paciente, isso é feito usando o software Blue Sky Plan. O dentista que prescreveu os alinhadores analisa e aprova o esquema do modelo antes que os alinhadores sejam produzidos. Uma vez aprovados pelo clínico, a Blue Sky Bio ou seu laboratório dentário autorizado produz os alinhadores sequenciais Blue Sky Bio Aligner G, que são feitos de resina Tera Harz Clear impressa em 3D. Os alinhadores sequenciais são impressos em 3D e polimerizados em uma unidade de pós-polimerização. O laboratório dentário limpa e pule a série Blue Sky Bio Aligner G para remover arestas, conforme necessário. Ela é, então, entregue ao dentista.

Os Blue Sky Bio Aligner G são enviados ao dentista, que os entrega ao paciente, confirmando o ajuste e o design. Durante um período, o clínico fornece ao paciente moldeiras adicionais para mover gradualmente os dentes-alvo até a posição projetada. O profissional de saúde bucal monitora o tratamento desde o momento em que o primeiro alinhador é entregue até quando o alinhador final é entregue. Os alinhadores são mantidos no lugar por pressão e podem ser removidos pelo paciente a qualquer momento. Cada alinhador da série é usado por aproximadamente 1 a 2 semanas, por 20 a 22 horas por dia (no entanto, eles devem ser removidos para alimentação e limpeza) e depois são substituídos pelos alinhadores do próximo passo. Isso é repetido pelo tempo prescrito pelo dentista.

Equipamento necessário e software de design

Os seguintes materiais, equipamentos e software são necessários para produzir o Blue Sky Bio Aligner G:

	Make	Type/Model
Material	Graphy Inc.	Tera Harz Clear resin, P/N TC-85DAC
Design software	Blue Sky Bio, LLC	Blue Sky Plan Software for Blue Sky Bio Aligner G
3D Printer	SprintRay, Inc.	SprintRay Pro 95 printer
UV Light Curing Unit	CureM	U102H UV Cure Oven

Instruções do dentista para Blue Sky Bio Aligner G

Digitalização

O primeiro passo é obter as dimensões e detalhes da dentição inicial do paciente. O clínico tira moldes dos dentes do paciente, preenche um formulário de prescrição e envia os moldes para o laboratório dentário que, por sua vez, digitaliza os moldes e carrega os arquivos .STL dos moldes no software Blue Sky Plan. Esse arquivo digital é uma série de arquivos CAD (.STL) para a construção de modelos que podem ser usados para fabricar alinhadores.

Alternativamente, o dentista pode gerar os arquivos digitais digitalizando a boca do paciente diretamente, usando um scanner intraoral.

Processamento do design

O segundo passo é criar alinhadores digitais sequenciais. O dentista usa o módulo do software Blue Sky Plan para Blue Sky Bio Aligner G para desenvolver o plano de tratamento e produzir arquivos STL 3D padrão para facilitar a fabricação de cada alinhador sequencial no plano de tratamento. Alternativamente, um técnico dentário desenvolve o plano de tratamento e o envia ao dentista licenciado para revisão e aprovação antes da impressão 3D.

CUIDADO – O dentista deve fornecer ao paciente apenas alguns conjuntos de alinhadores de cada vez. O dentista deve monitorar o progresso do paciente periodicamente antes de entregar os alinhadores subsequentes.

➤ Para obter instruções detalhadas sobre como usar o software Blue Sky Plan, consulte o **Manual do Usuário – Software Blue Sky Plan – Blue Sky Bio Aligner G**.

Instruções para impressão e pós-processamento do Blue Sky Bio Aligner G

Processo de impressão do Blue Sky Bio Aligner G

O terceiro passo é para a produção dos alinhadores com uma impressora 3D. Use o software Blue Sky Plan para Blue Sky Bio Aligner G para planejar o tratamento criando uma série de alinhadores sequenciais que gradualmente posicionam os dentes em sua posição final desejada. Use a impressora 3D SprintRay Pro 95 para imprimir os alinhadores em cada passo do tratamento.

- Este passo requer um arquivo dos alinhadores digitais: Arquivos no formato STL
- Tamanho do arquivo STL: menos de 500 MB em cada arquivo.

Considerações paramétricas para impressão do Blue Sky Bio Aligner G no SprintRay Pro 95

- **Modo Material:** camada da TALA SPRINTRAY
- **Comprimento de onda para polimerização da resina:** 405 nm LED
- **Espessura da camada:** 100 µm
- **Tempo de exposição:** 2 segundos
- **Ângulo de orientação recomendado (graus):** 30° da plataforma/cama de impressão
- **Função de suporte:** automática
- **Posição de impressão:** deslocamento de todas as posições: 5 mm
- **Condições ambientais**
 - o Temperatura: 15 ~ 25 °C
 - o Umidade relativa: 30 – 75%

Recursos do software da impressora

- a) Importação de arquivo STL
- b) Rotação e posicionamento automáticos
- c) Fatiador de camada para inspeção de caminho
- d) Geração automática e manual de suportes

Reutilização de materiais (resina não polimerizada, restos de fotopolímeros)

- A. Os critérios validados e aceitos para reutilização de material são de até 6 vezes ou menos. Descarte qualquer resina não polimerizada (resina restante) depois de utilizada 7 vezes.
- B. Volume necessário de resina para fabricar alinhadores até 7 vezes para SprintRay Pro95 = 310 g.
- C. Volume necessário de resina para produzir um conjunto de alinhadores = 35 g. o Um conjunto de alinhadores significa um alinhador superior (maxilar) e um alinhador inferior (mandibular).
- D. Volume mínimo de reposição (quantidade) de resina para SPRINTRAY Pro 95: 100 g.
- E. **Nota** – A resina não polimerizada (resina restante) no tanque de resina não deve ser despejada de volta no frasco de resina original. Descarte a resina não polimerizada (resina restante).
- F. **Cuidado** – Não misture resina nova com restos de resina (resina não polimerizada). Não há reação entre substâncias químicas, oxigênio e umidade. Portanto, não há razão para monitorar o estado da resina.
- G. **Nota** – A Graphy Inc. garante apenas a qualidade dos alinhadores que foram impressos continuamente até 6 vezes ou menos.

Preparação para impressão

- A. Agite vigorosamente a Tera Harz Clear em sua embalagem original antes de usar.
 - B. Se diferentes tipos de resina ou álcool usados durante a limpeza permanecerem na cuba, isso poderá enfraquecer as propriedades do material do alinhador impresso ou levar à falha na impressão. Sempre limpe o tanque de resina para remover qualquer impureza após a impressão.
 - C. Use óculos e luvas de proteção ao manusear resinas e peças impressas.
 - D. Abra a tampa da impressora 3D, verifique se não há impurezas na placa ou no tanque de resina e despeje a Tera Harz Clear no tanque de resina da impressora até a linha de enchimento indicada pelo fabricante. Cuidado – Ao abastecer o tanque com a resina, deve-se usar luvas de nitrilo, óculos de proteção e máscara.
 - E. Feche a tampa da impressora.
- Para obter instruções detalhadas sobre como preparar a impressora 3D, consulte o Manual do usuário OEM, **Manual do Usuário SprintRay PRO 95**.

Processo de impressão 3D

- A. Carregue o arquivo dos alinhadores digitais (STL) para iniciar.
- B. Para imprimir o modelo do alinhador na plataforma de construção, use a ferramenta do software da impressora para definir a posição ideal a 30 graus da plataforma.
- C. Gere suportes no lingual usando a configuração recomendada pelo fabricante da impressora. Se o suporte não for suficiente, adicione suportes no modelo do alinhador.
- D. Inicie a impressão.

Limpeza da resina residual no alinhador impresso

- A. Retire o modelo de alinhador impresso da plataforma de construção.
- B. Remova os suportes do alinhador.
- C. Coloque o alinhador em uma toalha de papel e deixe-o repousar por 1 hora até que a resina residual seja removida ou limpa do alinhador. (Vire a superfície interna do alinhador para baixo para facilitar a remoção da resina residual.)
- D. Verifique se há restos de resina dentro do alinhador. Se ainda restar resina residual, limpe-a com um cotonete. (Nota – Se ainda houver resina residual no interior, ela poderá causar incompatibilidade.)

➤ Cuidado – Depois que a impressão de impressão é concluída, o tanque de resina normalmente contém alguma sobra de resina (resina não polimerizada). Essa resina não deve ser reutilizada. Descarte a resina residual de forma segura. Não misture a nova resina com resina não polimerizada (resina restante).

Pós-processamento

O quarto passo é o pós-processamento. Nesse passo, o alinhador fica totalmente endurecido. É necessário um forno de polimerização UV CureM U102H para o processo de polimerização posterior por luz UV e nitrogênio.

Equipamento de pós-processamento necessário (unidades de polimerização por luz UV e nitrogênio)

- **Nome da marca:** Cure M U102H
- **Câmara de polimerização:** Necessária
- **Tensão de alimentação:** 100-240, 50/60
- **Potência da lâmpada:** 80 W
- **Intensidade da luz:** 400 mW/cm²
- **Comprimento de onda da lâmpada:** 395~405 nm
- **Tempo de polimerização (mín.):** 60 minutos – Vire o objeto entre o tempo de polimerização

- A. O alinhador impresso deve passar pelo processo de polimerização posterior por luz UV e nitrogênio utilizando a máquina CureM. Não use qualquer outra unidade de polimerização posterior.
 - B. Coloque o alinhador na placa do CureM.
 - C. Conecte o tubo gerador de nitrogênio ao conector da placa.
 - D. Coloque a placa dentro da unidade de polimerização.
 - E. Depois disso, adicione nitrogênio a 10 L/m por 1 minuto.
 - F. Inicie a primeira polimerização posterior por 30 minutos, vire o alinhador do lado oposto e polimerize por mais 30 minutos nas mesmas condições, enchendo a câmara com nitrogênio primeiro.
 - G. Retire o alinhador do CureM usando pinças quando a polimerização posterior estiver concluída.
 - H. Se necessário, faça o polimento do alinhador com uma lixa úmida usando o método dentário geral
- Para obter instruções detalhadas sobre como usar o CureM U102H, consulte o Manual do usuário OEM, **Manual do Usuário CureM U102H**.

Limpeza e finalização

Após o processo de polimerização posterior, limpe os alinhadores e finalize o processo de fabricação.

- A. Lave o alinhador em água morna.
- B. Coloque o alinhador sobre um lenço de papel (toalha de papel) e deixe-o repousar por 30 minutos até que esteja seco.
- C. Depois que o alinhador estiver completamente seco, verifique a superfície do alinhador e finalize o processo.

Instruções do laboratório dentário para etiquetar e embalar o Blue Sky Bio Aligner G

Antes de enviar os alinhadores ao clínico, coloque cada alinhador em um saco plástico, rotulado com o seguinte:

o Nome do paciente e número identificador

- o Nome do dentista
- o Endereço do laboratório dentário e informações de contato
- o Rx – Símbolo de uso apenas com prescrição
- o N° do passo do alinhador
- o Instruções de uso para o paciente – Blue Sky Bio Aligner G

Notificação

As especificações da Tera Harz Clear foram validadas com o equipamento necessário e o processo de fabricação e software validados. Quaisquer outros equipamentos e processos de fabricação estão além das especificações do dispositivo.

Avisos

- A Tera Harz Clear contém monômeros polimerizáveis que podem causar irritação da pele (dermatite alérgica de contato) ou outras reações alérgicas em pessoas suscetíveis. Em contato com a pele, lave de forma abundante com água e sabão. Se ocorrer sensibilização da pele, interrompa o uso. Se houver dermatite ou outros sintomas, procure orientação médica.
- Evite inalação ou ingestão. Alta concentração de vapor pode causar dor de cabeça, irritação dos olhos ou do sistema respiratório. O contato direto com os olhos pode causar possíveis danos à córnea. Exposição excessiva e a longo prazo ao material pode acarretar graves efeitos à saúde. Monitore a qualidade do ar de acordo com os padrões OSHA.
- O Tera Harz Clear não deve ser usado para nenhum outro propósito além de aplicações ortodônticas. Qualquer desvio dessas instruções pode trazer efeitos negativos às propriedades químicas e físicas do Tera Harz Clear.

Inalação

O Tera Harz Clear é um agente irritante para o sistema respiratório. Altas concentrações atmosféricas podem causar irritação do sistema respiratório, tontura, dores de cabeça e efeitos anestésicos.

Contato com a pele

O Tera Harz Clear pode causar sensibilidade se entrar em contato com a pele. Irritação da pele, contato repetido ou prolongado pode causar dermatite.

Contato com os olhos

Uma alta concentração de vapor do Tera Harz Clear pode causar irritação.

Ingestão

A Tera Harz Clear tem baixa toxicidade oral, mas a ingestão pode causar irritação do trato gastrointestinal.

Proteção

Use proteção ao manusear a Tera Harz Clear. Recomenda-se o uso de óculos de proteção e luvas de nitrilo.

- H317 pode causar uma reação alérgica na pele.
- H413 pode causar efeitos nocivos duradouros à vida aquática.

Precauções

- Leia todas as instruções de segurança e operação com antecedência.
- Use óculos de proteção e luvas de nitrilo sempre que manusear a resina Tera Harz Clear.
- Trabalhe em um local bem ventilado.
- Polimerize qualquer resina que planeje descartar.

Reações adversas

A Tera Harz Clear pode causar reações alérgicas. Em caso de reação alérgica, entre em contato com um ortodontista ou dentista.

Descarte

- Polimerize totalmente qualquer resina líquida que planeje descartar.
- Em sua forma polimerizada, o Tera Harz Clear não prejudica o meio ambiente. O material residual em estado líquido deve ser entregue a um ponto de coleta de resíduos.

Condições de armazenamento, data de validade e transporte

Mantenha o Tera Harz Clear em sua embalagem original, em temperatura ambiente e em local seco e escuro, preferencialmente dentro de 15 a 25 °C. Feche a embalagem após cada uso.

A data de validade está na etiqueta do produto. Não use a Tera Harz Clear após a data de validade.

Explicação dos símbolos

Symbol	Definition	Symbol	Definition
	Batch number of product		Date of manufacture
	Use-by date		Consult instructions for use
	Caution		Non sterile
	Keep away from sunlight		Recycle
	Do not use if package is damaged		Fragile, handle carefully
	Upper and lower temperature limitation		Manufacturer
	Prescription Use Only		Catalog number

Reclamações e eventos adversos e comunicações

Reporte quaisquer reclamações ou incidentes graves ao serviço de apoio ao cliente da Blue Sky Bio através do número (718) 376-0422 ou em <https://blueskybio.com/pages/support>. <https://blueskybio.com/pages/support>.

Comunique qualquer incidente grave ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o paciente esteja estabelecido.

Blue Sky Bio, LLC
800 Liberty Drive, Libertyville, IL 60048
info@blueskybio.com
(888) 446-6724